



ПРОДУКТОВ НАРЪЧНИК И РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

RT-4546-03

Адаптер за маска само за глава Portrait™ за устройство за лечение на гърди Access™ Supine

RT-4546-04

Адаптер за маска за глава и шия Portrait™ за устройство за лечение на гърди Access™ Supine

RT-4546-05

Адаптер за термопластичен материал Opti-Handle™ за устройство за лечение на гърди Access™ Supine

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

ОБЩИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! НЕ СА РАЗРЕШЕНИ МОДИФИКАЦИИ НА ТОВА ОБОРУДВАНЕ. АКО НЯКОЯ ЧАСТ НА ТОВА ИЗДЕЛИЕ БЪДЕ ПОДЛОЖЕНА НА ПРЕКАЛЕНО ГОЛЯМО НАТОВАРВАНЕ, ИЗГЛЕЖДА ПОВРЕДЕНА ИЛИ НЕ ФУНКЦИОНИРА ПРАВИЛНО, ПРЕКРАТЕТЕ НЕЗАБАВНО УПОТРЕБАТА И СЕ СВЪРЖЕТЕ С CQ MEDICAL НА ТЕЛЕФОН +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ИЛИ НА SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ОТСЛАБВАНЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ЛЪЧ

Лечението чрез всяко устройство води до повишаване на кожната доза. Термопластичните маски ще отслабят терапевтичния лъч и ще увеличат кожната доза. Атенюацията и повишената кожна доза трябва да се вземат предвид по време на планиране и облъчване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МР

MR Неклинични тестове са доказали, че адаптерът за маска за глава и шия **RT-4546-04 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine, адаптерът за маска само за глава **RT-4546-03 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine и термопластичният адаптер **RT-4546-05 Opti-Handle™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine са безопасни при МР. Адаптерът за маска за глава и шия **RT-4546-04 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine, адаптерът за маска само за глава **T-4546-03 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine и термопластичният адаптер **RT-4546-05 Opti-Handle™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine могат да се използват в среда на МР.

- Адаптерът за маска за глава и шия **RT-4546-04 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine, адаптерът за маска само за глава **RT-4546-03 Portrait™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine и термопластичният адаптер **RT-4546-05 Opti-Handle™** за устройство за лечение на гърди Access™ Supine трябва да се използват с версия за безопасност при МР на Access™ Supine (**RT-4546MRI**) в съответствие с предназначението му преди сканиране.
- Версията за безопасност при МР на Access™ Supine (**RT-4546MRI**) е ясно обозначена със следния символ: **MR**



ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ЕТИКЕТИ И ОПИСАНИЯ

Направете справка в www.CQmedical.com за списък със символите и техните дефиниции.





БЕЗОПАСЕН ЗА МР

Изделие, което не създава известни опасности, произтичащи от излагане на въздействието на МР среда. Изделията, безопасни за МР, са изработени от материали, които са немагнитни, не са метални и не провеждат електричество.




ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

УСТАНОВКА

Само за глава

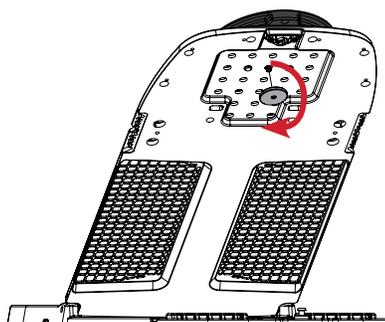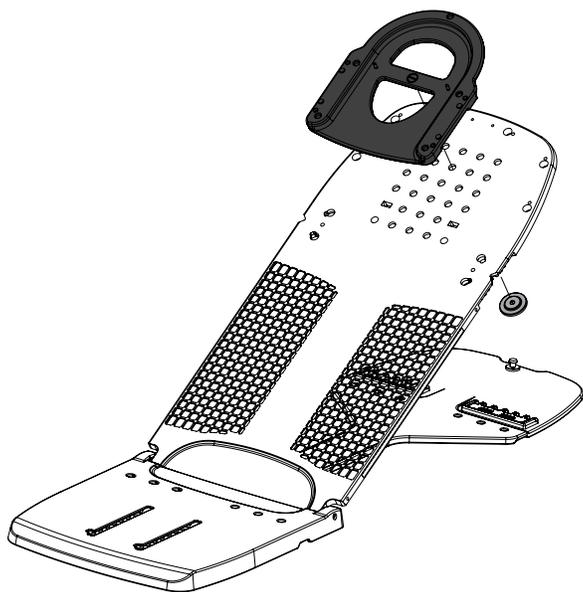

Глава и рамо

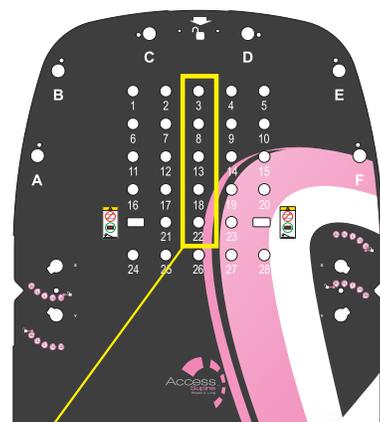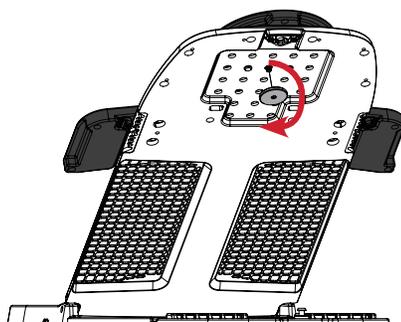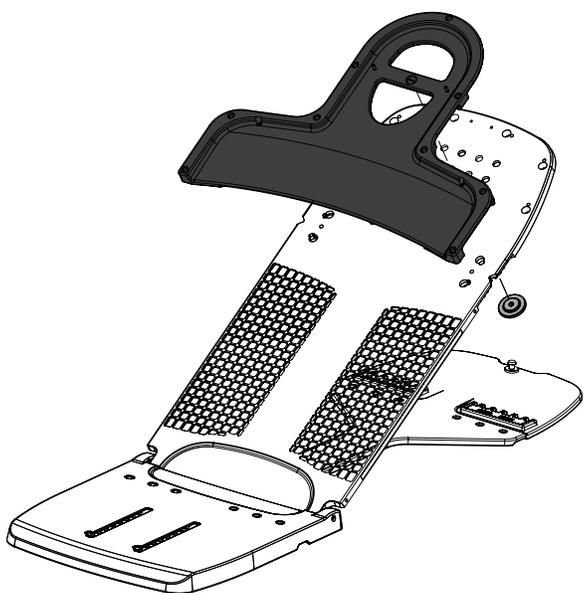


Закрепете адаптера за маска Portrait™ за Access™ Supine, като използвате отвор 3, 8, 13, 18 или 22.


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

РЕГУЛИРАЙТЕ, АКО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ЕЛИМИНИРАТЕ ДВИЖЕНИЕТО

Завъртете, за да стегнете

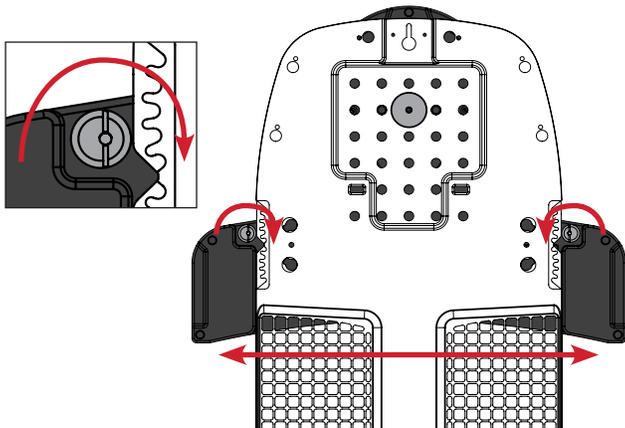



Заклучено

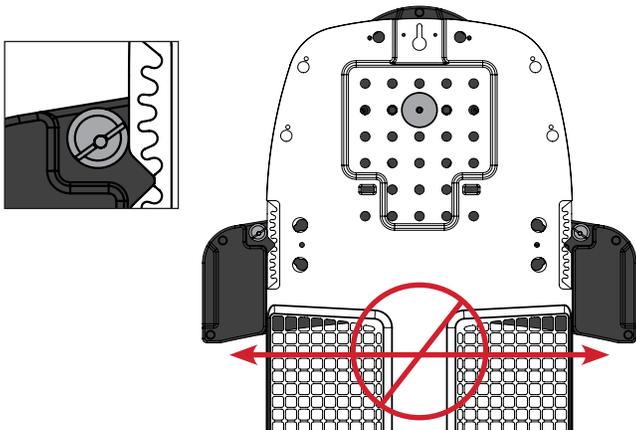



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ОТСТРАНЯВАНЕ

Само за глава

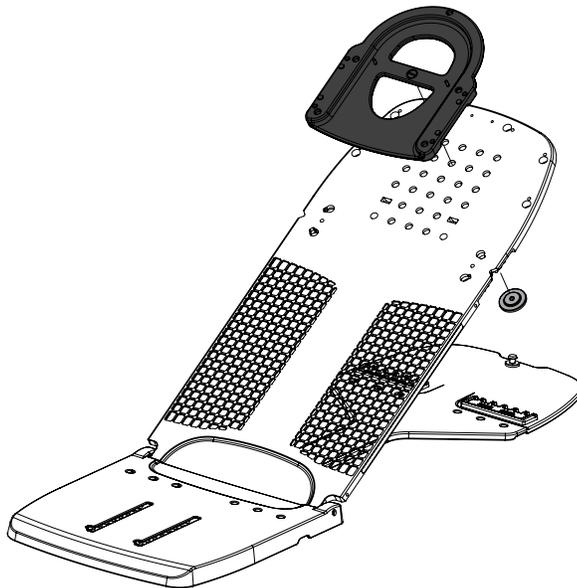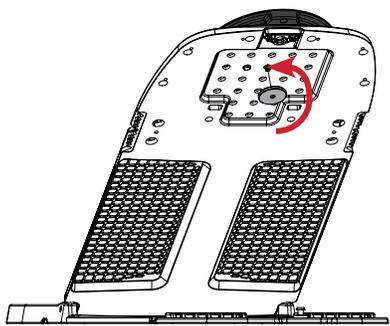

Глава и рамо

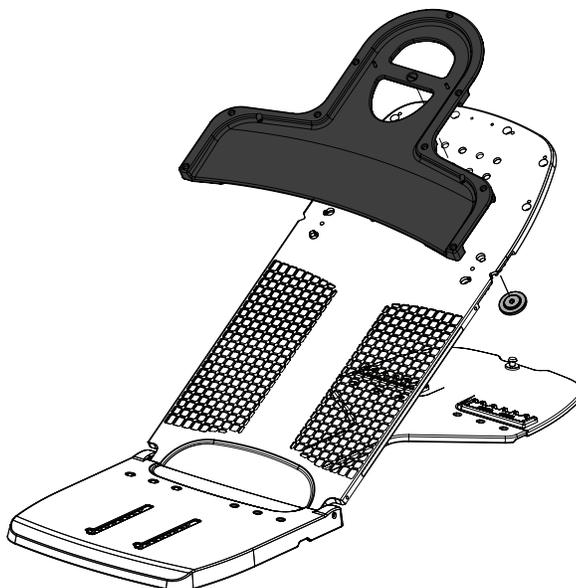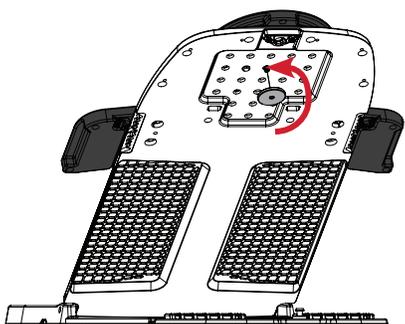


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА


УСТАНОВКА

Адаптер за термопластичен материал Opti-Handle™


Стъпка 1

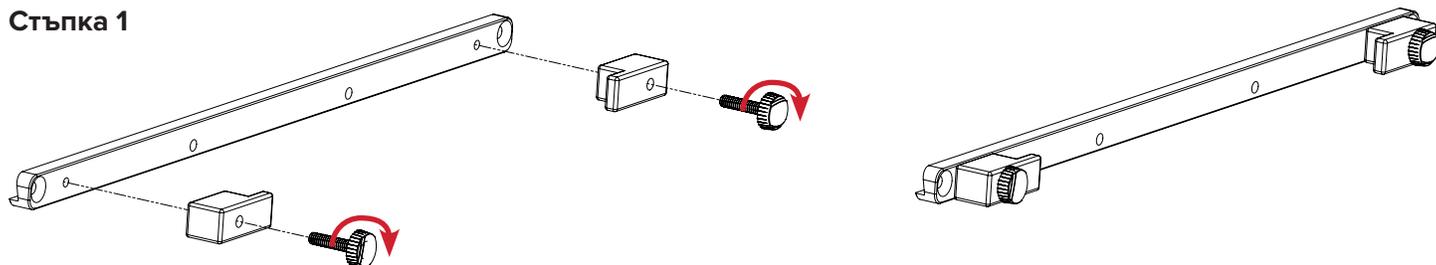

Стъпка 2

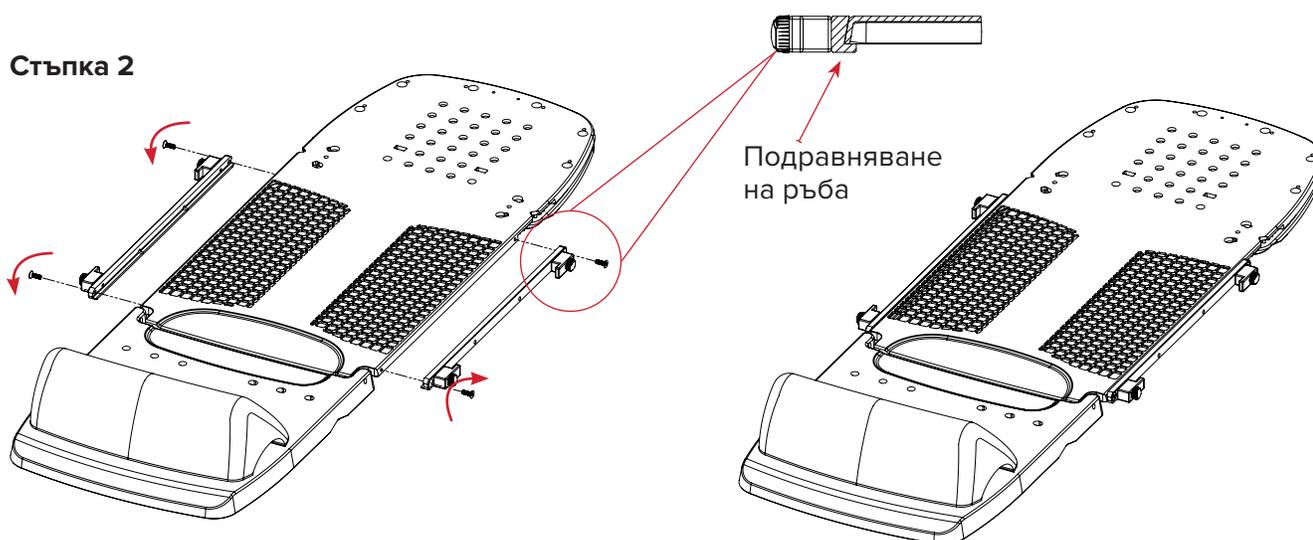

Стъпка 3

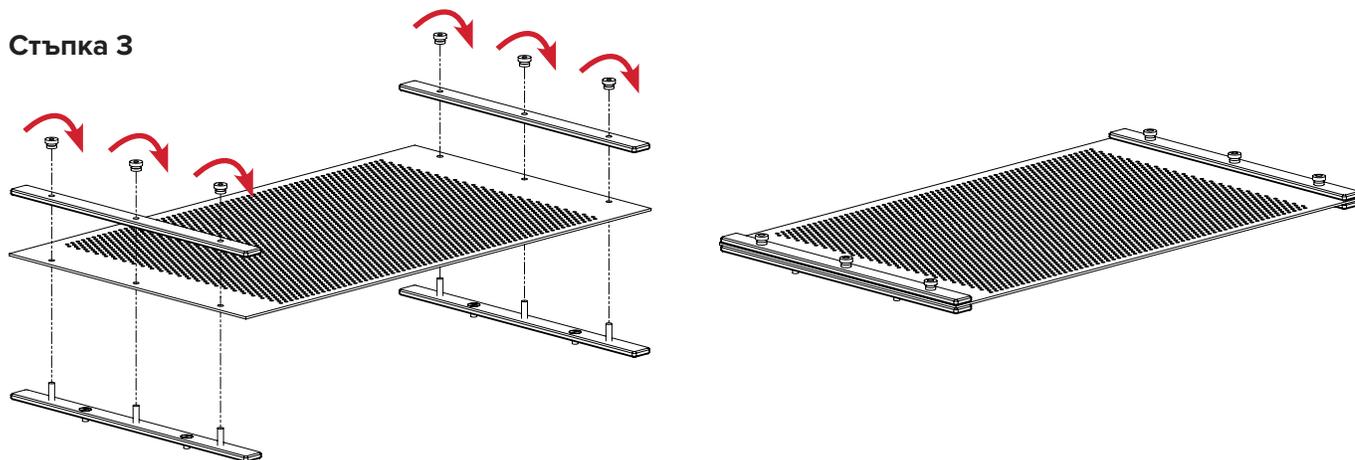

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

УСТАНОВКА


Стъпка 4

Поставете пациента върху устройството за лечение на гърди Access Supine.

! ЗАБЕЛЕЖКА ! Вижте продуктивия наръчник и ръководството за потребителя за Access Supine (P/N 2004394) за инструкции за работа, характеристики на продукта, спецификации, предупреждения, сигнали за внимание, и други общи предпазни мерки, свързани с употребата на устройство за лечение на гърди Access Supine.

Омекотете термопластичния материал (RT-1783P3) с прикрепените Opti-Handles (RT-4454-14).

Изпълнете стъпки 4A, 4B, 4C и 4D от двете страни на термопластичния материал.

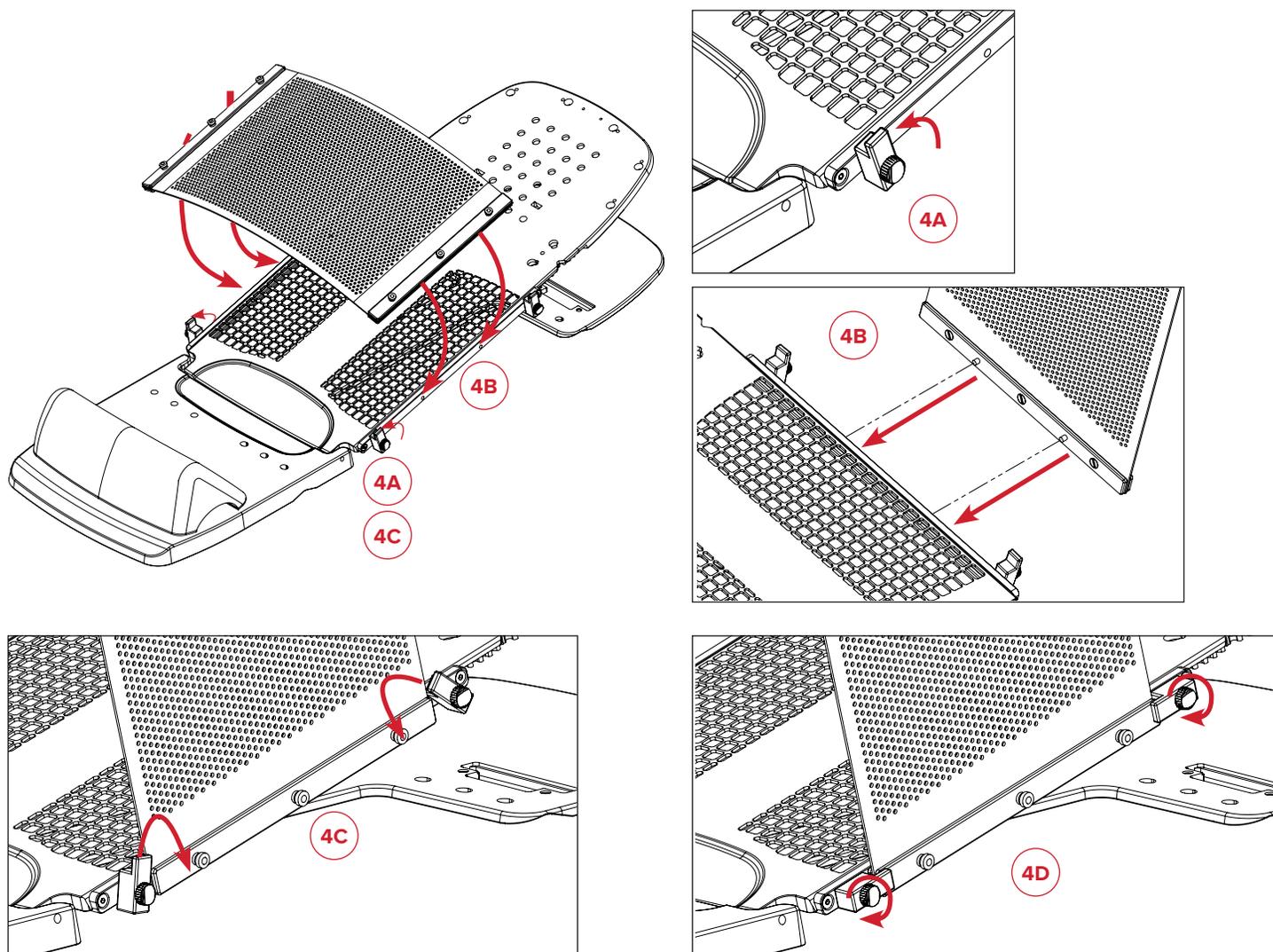

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ОТСТРАНЯВАНЕ





Адаптер за термопластичен материал Opti-Handle™

Стъпка 1

Изпълнете стъпки 1A, 1B и 1C от двете страни на термопластичния материал.

Отстранете пациента от устройството за лечение на гърди Access Supine.


! ЗАБЕЛЕЖКА ! Вижте продуктивия наръчник и ръководството за потребителя за Access Supine (P/N 2004394) за инструкции за работа, характеристики на продукта, спецификации, предупреждения, сигнали за внимание, и други общи предпазни мерки, свързани с употребата на устройство за лечение на гърди Access Supine.

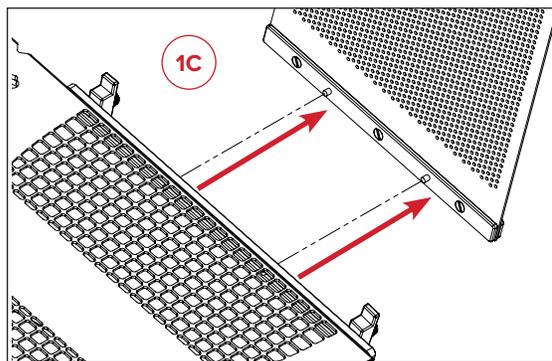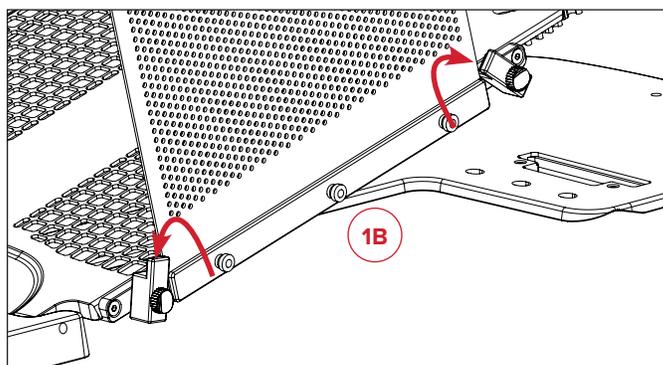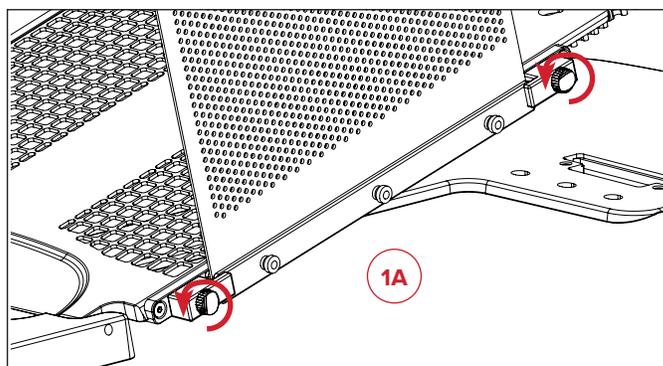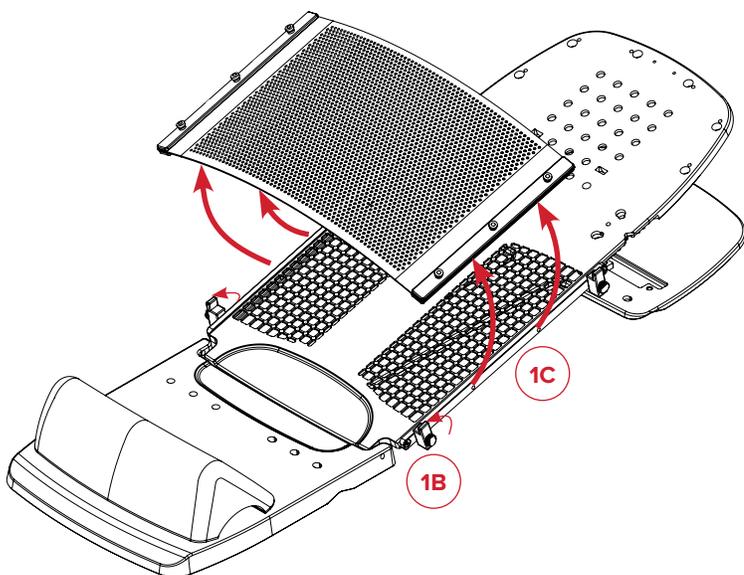



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

ОТСТРАНЯВАНЕ

Стъпка 2

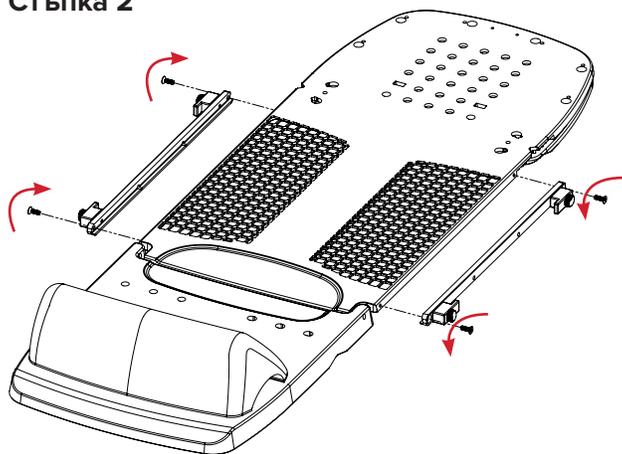

Стъпка 3

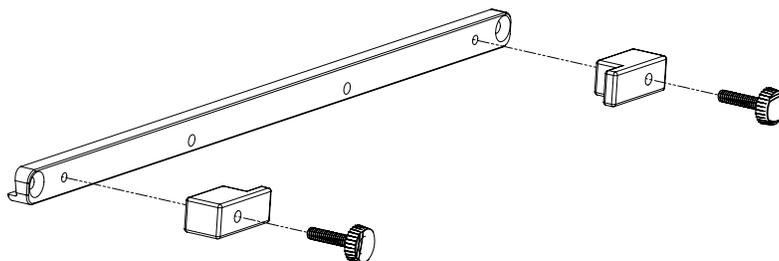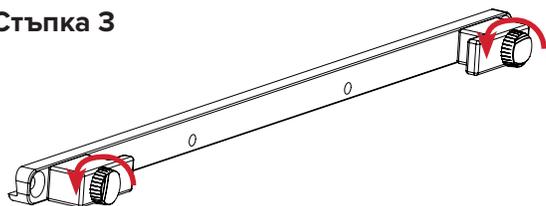

СПИСЪК НА КОМПОНЕНТИТЕ

RT-4546-03 И RT-4546-04

Съвместими с маски с рамки Portrait™ S

RT-4546-05

Съвместим с RT-1783P3, подложка Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Съвместим с Opti-Handles RT-4454-14, 35,56 cm (14 инча), комплект от 2 бр.



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com