



PŘÍRUČKA K PRODUKTU A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

RT-4546-03

Adaptér pouze hlavové masky Portrait™ pro
hrudní prostředek Access™ Supine

RT-4546-04

Adaptér hlavové a krční masky Portrait™ pro
hrudní prostředek Access™ Supine

RT-4546-05

Termoplastický adaptér Opti-Handle™ pro
hrudní prostředek Access™ Supine

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

OBEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

! VAROVÁNÍ ! NA TOMTO PROSTŘEDKU NENÍ DOVOLENO PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. POKUD JE KTERÁKOLI ČÁST TOHOTO ZAŘÍZENÍ VYSTAVENA DEVASTUJÍCÍMU ZATÍŽENÍ, JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ NEBO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ, IHLED JE PŘESTAŇTE POUŽÍVAT A KONTAKTUJTE SPOLEČNOST CQ MEDICAL NA ČÍSLE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 NEBO NA ADRESE SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ÚTLUM LÉČEBNÉHO PAPRSKU

Léčba jakýmkoli prostředkem povede ke zvýšení dávky na kůži. Termoplastické masky oslabí radioterapeutický paprsek a zvýší dávku na kůži. Útlum paprsku a zvýšení dávky na kůži je třeba brát během plánování léčby a jejího průběhu v potaz.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI V PROSTŘEDÍ MR

MR Neklinické zkoušky ukázaly, že adaptér hlavové a krční masky Portrait™ RT-4546-04 pro hrudní prostředek Access™ Supine, adaptér pouze hlavové masky Portrait™ RT-4546-03 pro hrudní prostředek Access™ Supine a termoplastický adaptér Opti-Handle™ RT-4546-05 pro hrudní prostředek Access™ Supine jsou bezpečné v prostředí MR. Adaptér hlavové a krční masky Portrait™ RT-4546-04 pro hrudní prostředek Access™ Supine, adaptér pouze hlavové masky Portrait™ RT-4546-03 pro hrudní prostředek Access™ Supine a termoplastický adaptér Opti-Handle™ RT-4546-05 pro hrudní prostředek Access™ Supine lze používat v prostředí MR.

- Adaptér hlavové a krční masky Portrait™ RT-4546-04 pro hrudní prostředek Access™ Supine, adaptér pouze hlavové masky Portrait™ RT-4546-03 pro hrudní prostředek Access™ Supine a termoplastický adaptér Opti-Handle™ RT-4546-05 pro hrudní prostředek Access™ Supine je nutné používat s verzí prostředku Access™ Supine (RT-4546MRI) bezpečnou v prostředí MR v souladu s jeho zamýšleným použitím před skenováním.
- Verze prostředku Access™ Supine (RT-4546MRI) bezpečná v prostředí MR je zřetelně označena následujícím symbolem: **MR**

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISKY

Na stránkách www.CQmedical.com najdete seznam symbolů a jejich definic.





BEZPEČNÉ V PROSTŘEDÍ MR

Součást se nepojí se žádnými známými riziky plynoucími z expozice jakémukoli prostředí MR. Součásti, jež jsou bezpečné v prostředí MR, jsou tvořené elektricky nevodivými, nekovovými a nemagnetickými materiály.




PROVOZNÍ POKYNY

SESTAVENÍ

Pouze hlava

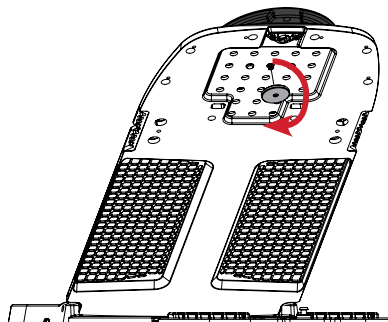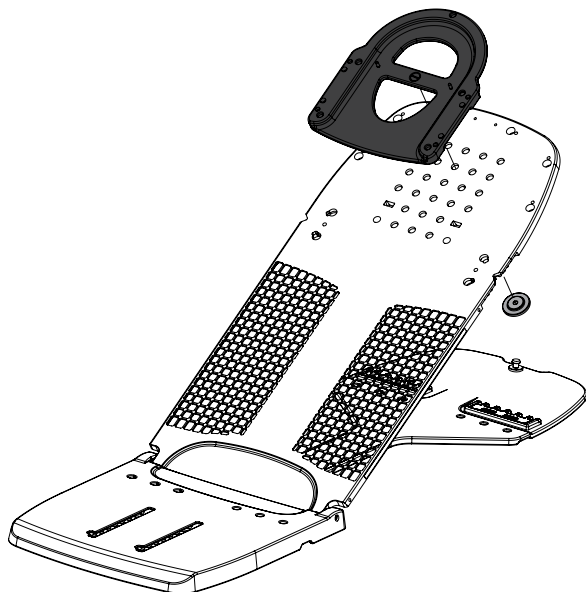

Hlava a rameno

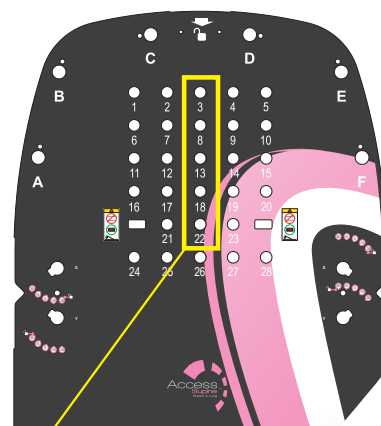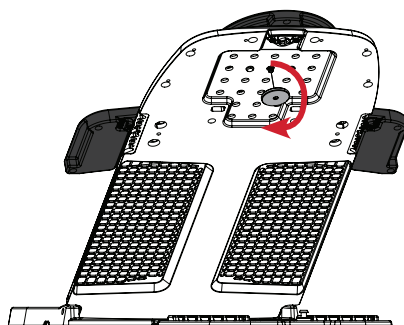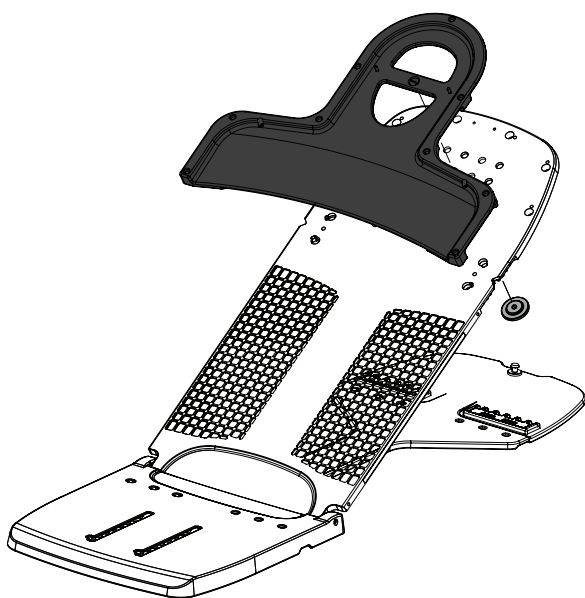


Upevněte adaptér masky Portrait™ k prostředku Access™ Supine pomocí otvoru 3, 8, 13, 18 nebo 22.


PROVOZNÍ POKYNY

V PŘÍPADĚ POTŘEBY ÚPRAVOU NASTAVENÍ ELIMINUJTE POHYB.

Utáhněte otočením.

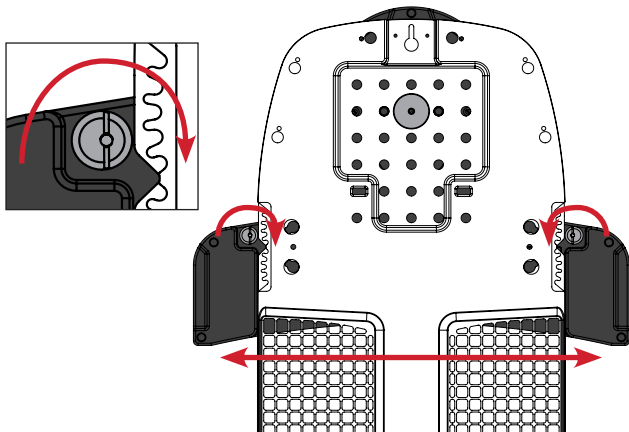



Uzamčeno

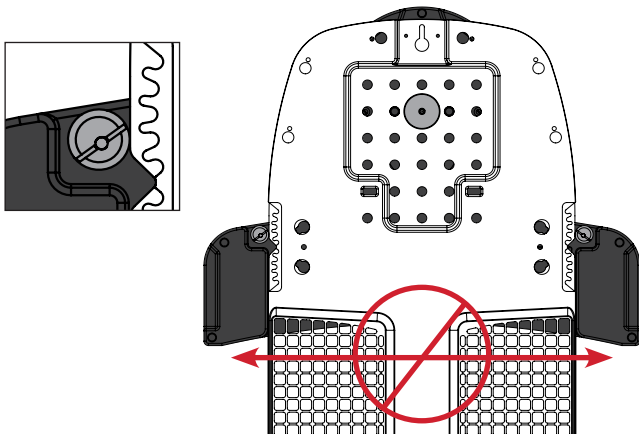



PROVOZNÍ POKYNY

ODSTRANĚNÍ

Pouze hlava

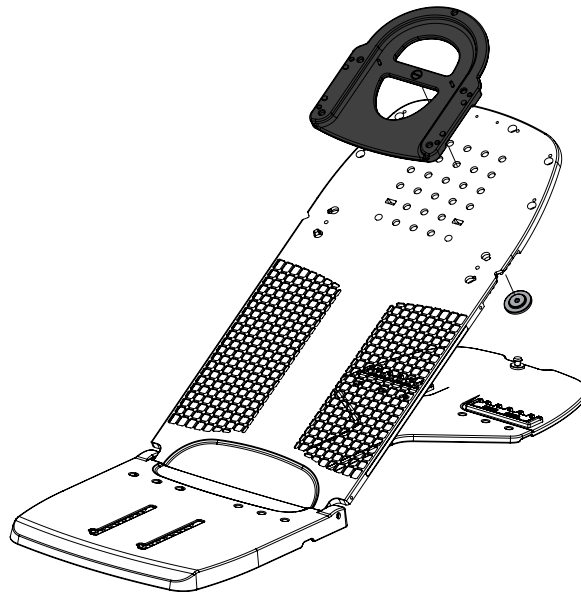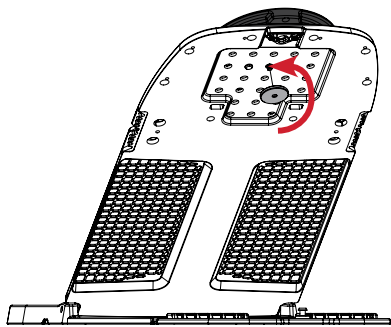

Hlava a rameno

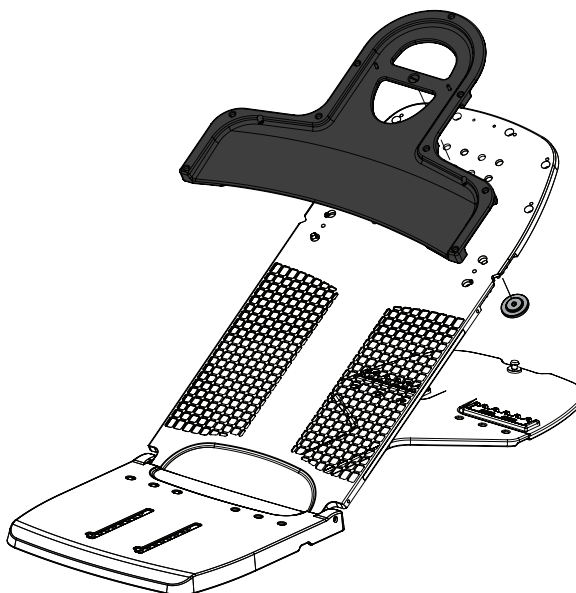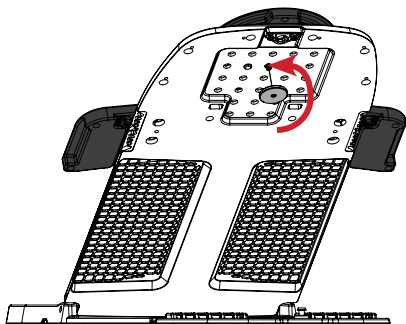


PROVOZNÍ POKYNY


SESTAVENÍ

Termoplastický adaptér Opti-Handle™


Krok 1

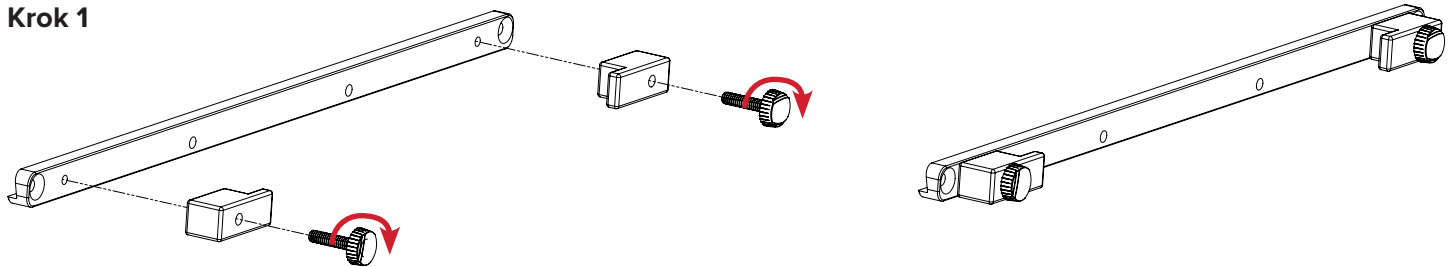

Krok 2

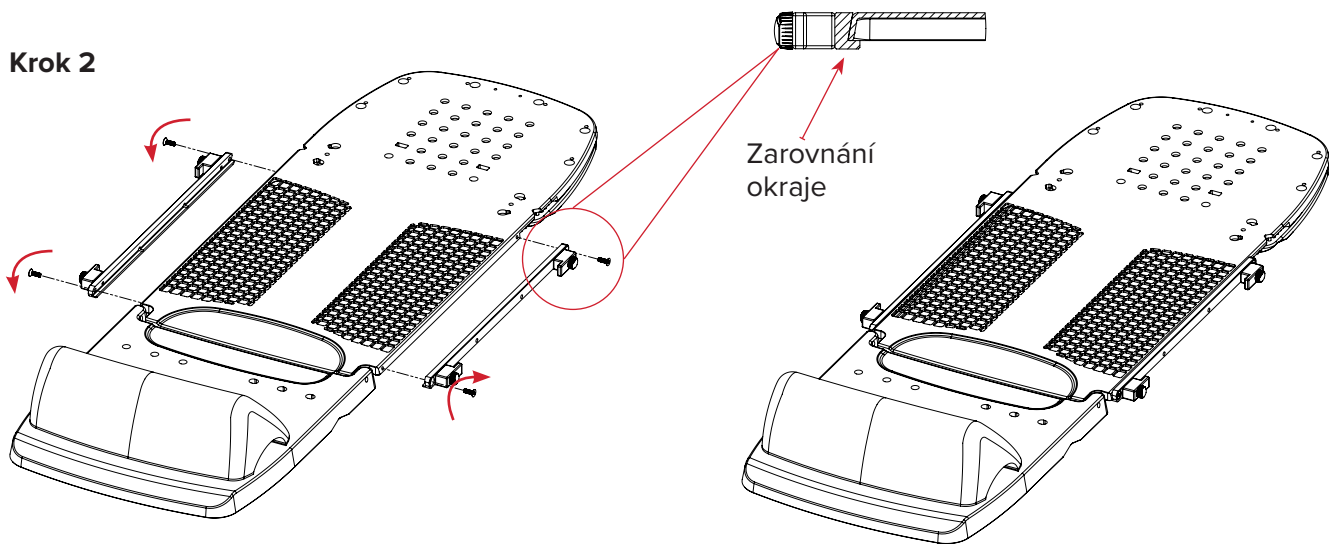

Krok 3

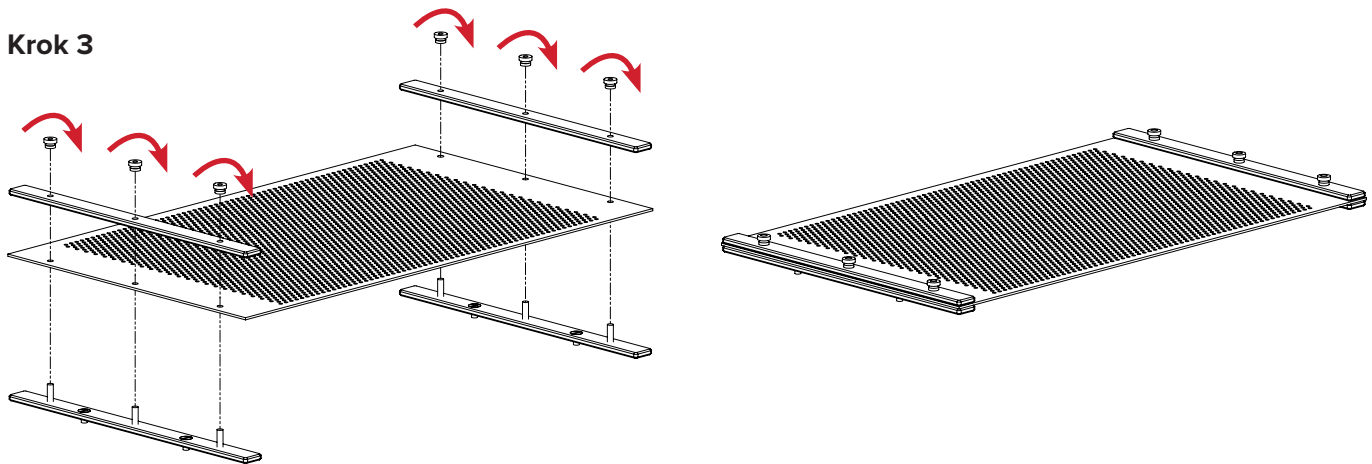

PROVOZNÍ POKYNY

SESTAVENÍ


Krok 4

Připravte pacienta na hrudním prostředku Access Supine.

! POZNÁMKA ! Provozní pokyny, funkce produktu, specifikace, varování, upozornění a další bezpečnostní opatření týkající se použití hrudního prostředku Access Supine (P/N 2004394) naleznete v příslušné příručce k produktu a uživatelském návodu.

Proved'te změkčení termoplastického materiálu (RT-1783P3) s připojenými rukojeťmi Opti-Handle (RT-4454-14).

Proved'te kroky 4A, 4B, 4C a 4D na obou stranách termoplastického materiálu.

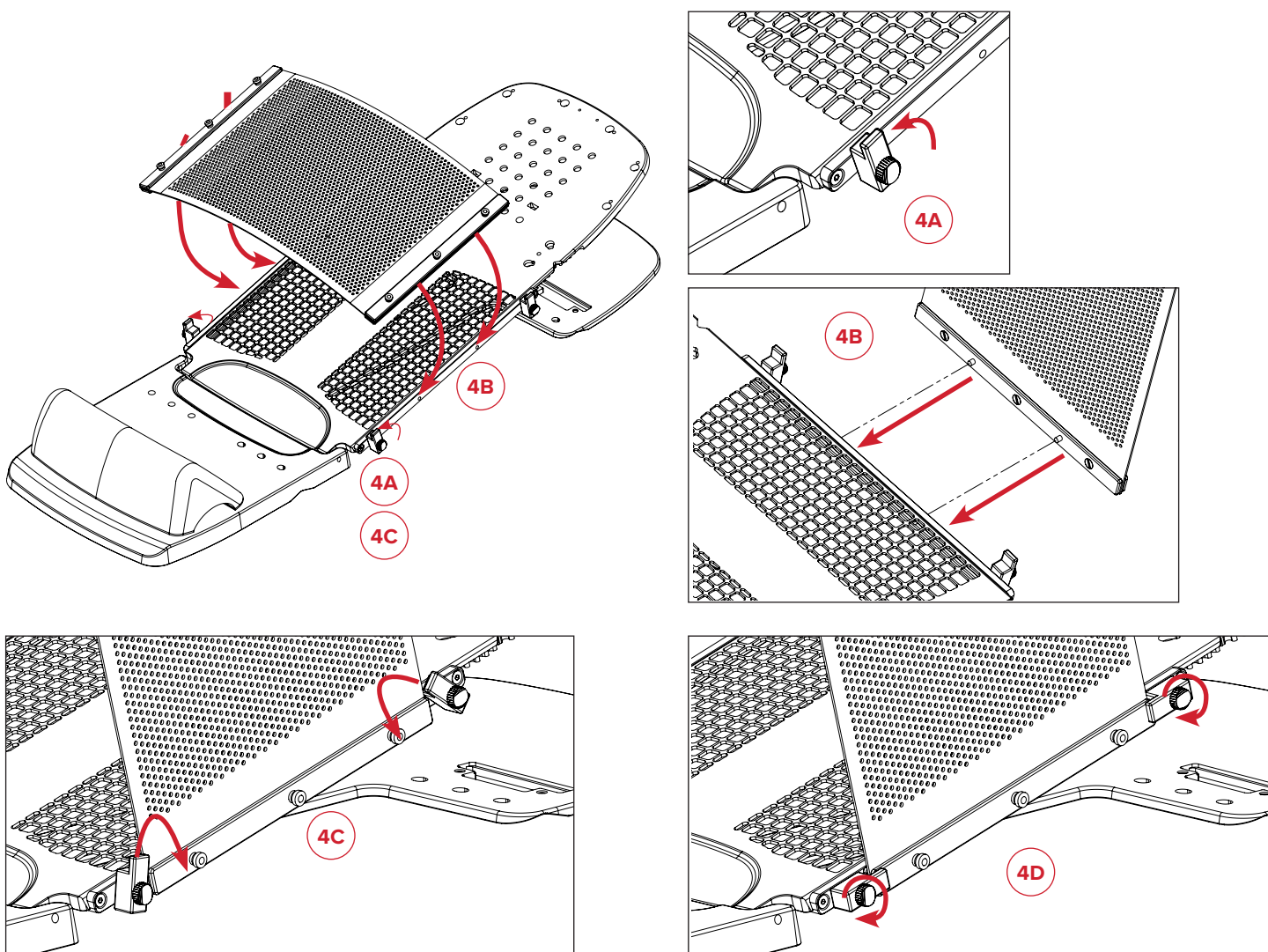

PROVOZNÍ POKYNY

ODSTRANĚNÍ





Termoplastický adaptér Opti-Handle™

Krok 1

Proveďte kroky 1A, 1B a 1C na obou stranách termoplastického materiálu.

Vyjměte pacienta z hrudního prostředku Access Supine.


! POZNÁMKA ! Provozní pokyny, funkce produktu, specifikace, varování, upozornění a další bezpečnostní opatření týkající se použití hrudního prostředku Access Supine (P/N 2004394) naleznete v příslušné příručce k produktu a uživatelském návodu.

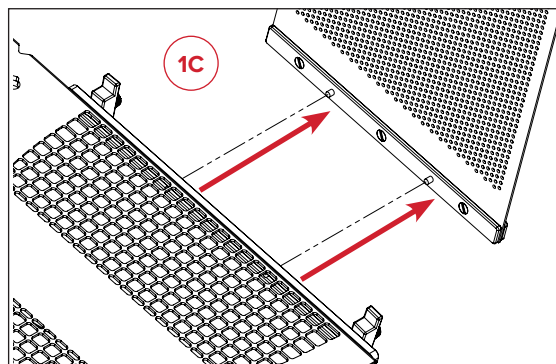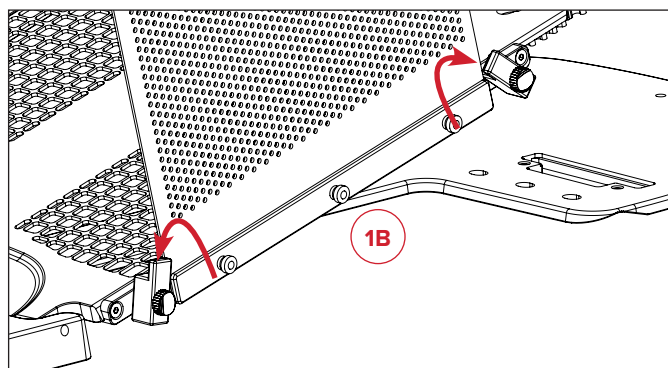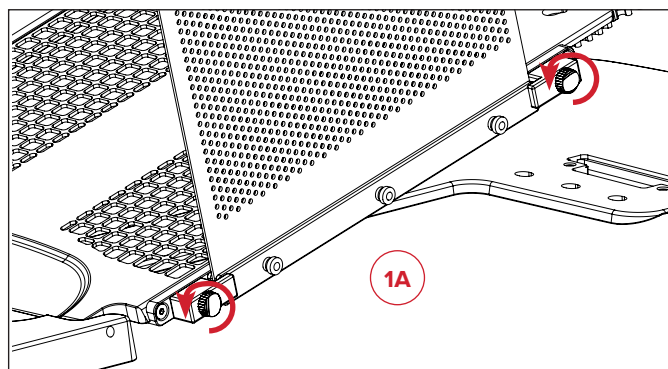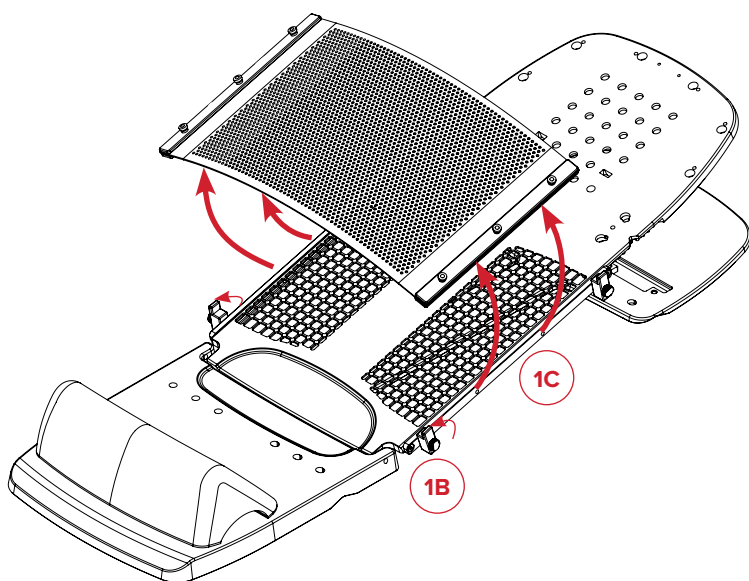



PROVOZNÍ POKYNY

ODSTRANĚNÍ

Krok 2

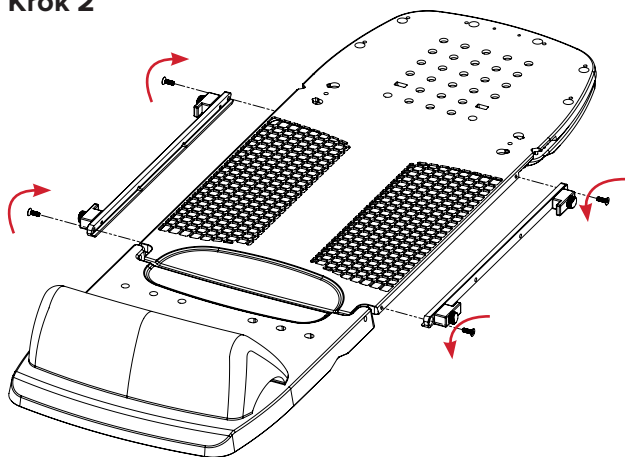

Krok 3

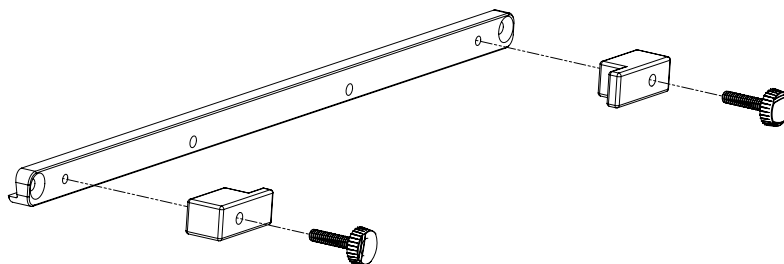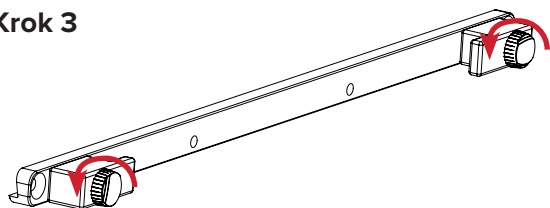

SEZNAM SOUČÁSTÍ

RT-4546-03 A RT-4546-04

Kompatibilní s rámovými maskami Portrait™ S

RT-4546-05

Kompatibilní s listem Aquaplast RT®, RT-1783P3, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Kompatibilní s rukojetmi Opti-Handle, RT-4454-14, 35,56 cm (14 palců), sada 2 ks



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com