



PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4546-03

Portrait™ Head Only-maskeadapter til
Access™ Supine-brystenhed

RT-4546-04

Portrait™ Head & Neck-maskeadapter til
Access™ Supine-brystenhed

RT-4546-05

Opti-Handle™-termoplastadapter til
Access™ Supine-brystenhed

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

GENERELLE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS NOGEN DEL AF UDSTYRET UDSÆTTES FOR EN EKSTREMT STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG CQ MEDICAL KONTAKTES PÅ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ELLER SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

DÆMPNING AF BEHANDLINGSSTRÅLE

Behandling med et hvilket som helst udstyr vil føre til en forøgelse af huddosen. Termoplastmasker vil svække en røntgenstråle og øge huddosen. Der skal tages højde for svækkelse og øget huddosis under planlægning og behandling.

OPLYSNINGER OM MR-SIKKERHED

 Ikke-klinisk test har påvist, at **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck-maskeadapter til Access™ Supine-brystenhed, RT-4546-03 Portrait™ Head Only-maskeadapter til Access™ Supine-brystenhed og RT-4546-05 Opti-Handle™-termoplastadapter til Access™ Supine-brystenhed** er MR-sikre. **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck-maskeadapter til Access™ Supine-brystenhed, RT-4546-03 Portrait™ Head Only-maskeadapter til Access™ Supine-brystenhed og RT-4546-05 Opti-Handle™-termoplastadapter til Access™ Supine-brystenhed** må bruges i et MR-miljø.

- **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck-maskeadapter til Access™ Supine-brystenhed, RT-4546-03 Portrait™ Head Only-maskeenhed til Access™ Supine-brystenhed og RT-4546-05 Opti-Handle™-termoplastadapter til Access™ Supine-brystenhed skal anvendes med den MR-sikre version af Access™ Supine (RT-4546MRI) i henhold til den tilsigtede anvendelse før scanning.**
- **Den MR-sikre version af Access™ Supine (RT-4546MRI) er tydeligt mærket med følgende symbol:**



ADVARSELSMÆRKATER OG BESKRIVELSER

Gå til www.CQmedical.com for at se en liste over symboler og deres definitioner.





MR-SIKKER

Et element, der ikke udgør nogen fare som følge af eksponering for et MR-miljø. MR-sikre enheder består af materialer, der ikke er elektrisk ledende, som ikke er metalliske og ikke er magnetiske.




BETJENINGSVEJLEDNING

OPSÆTNING

Head Only

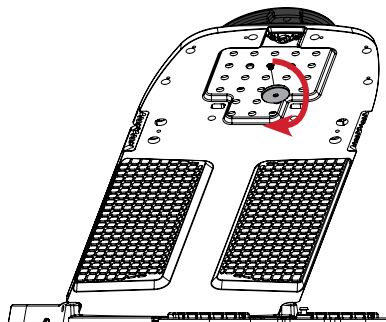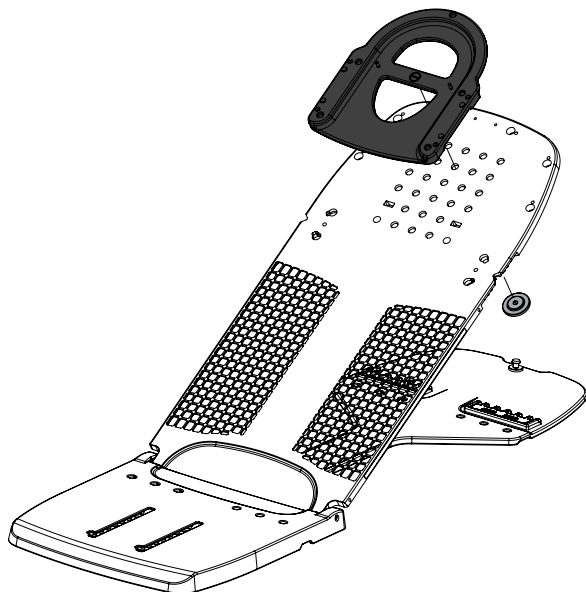

Head & Shoulder

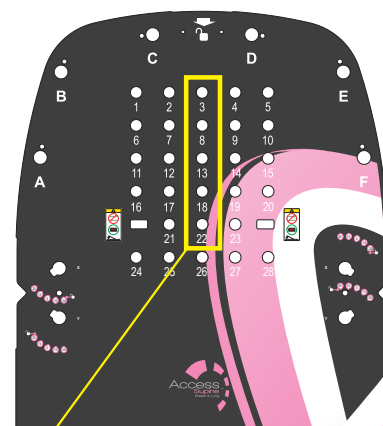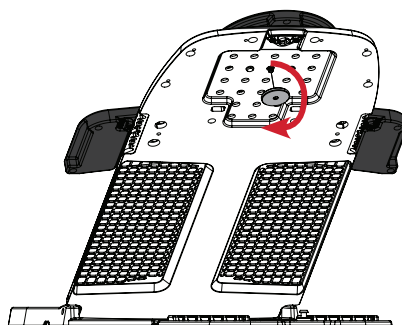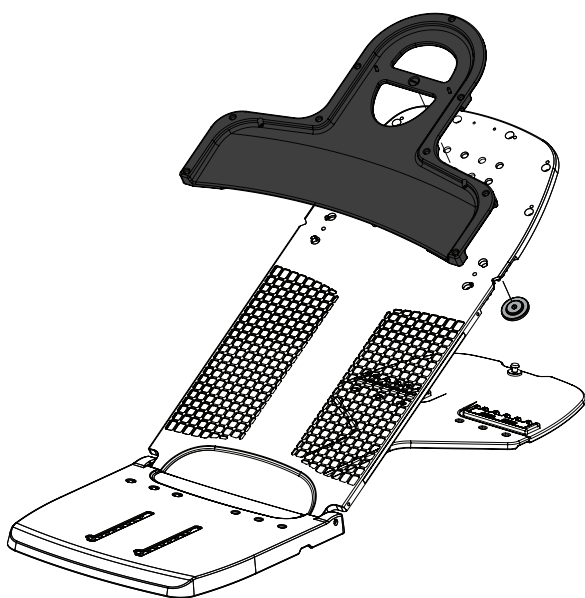


Fastgør Portrait™-
maskeadapteren til
Access™ Supine vha. hul 3,
8, 13, 18 eller 22.


BETJENINGSVEJLEDNING

JUSTER OM NØDVENDIGT FOR AT ELIMINERE BEVÆGELSE

Drej for at stramme

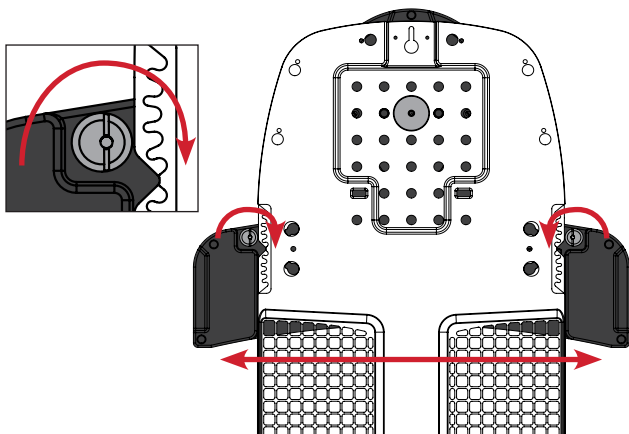



Låst

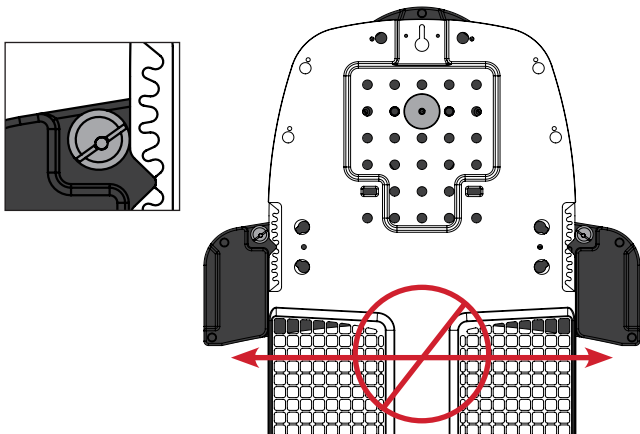



BETJENINGSVEJLEDNING

AFMONTERING

Head Only

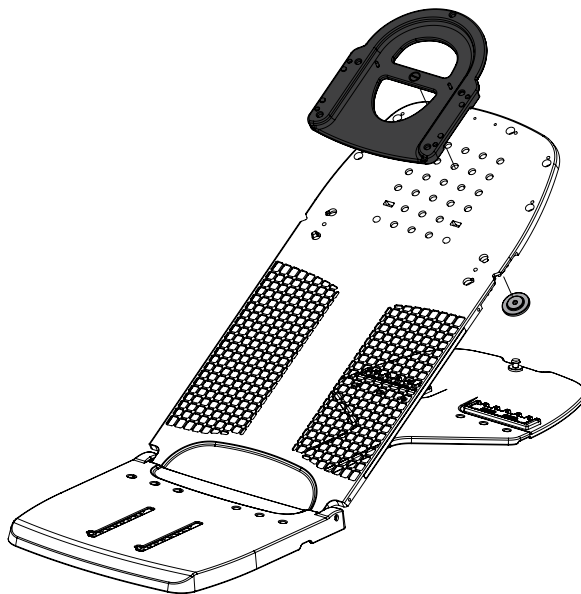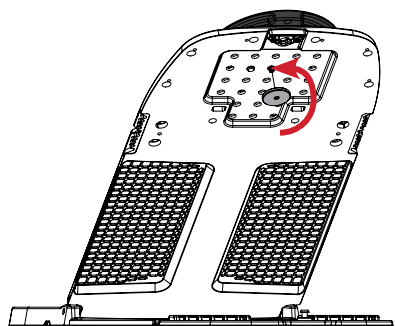

Head & Shoulder

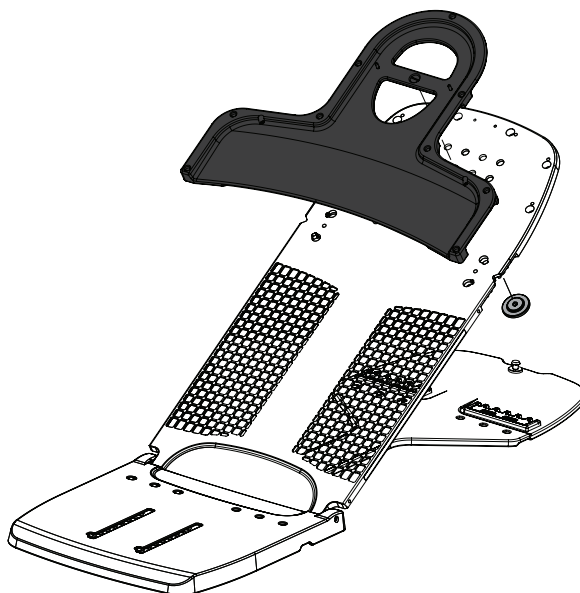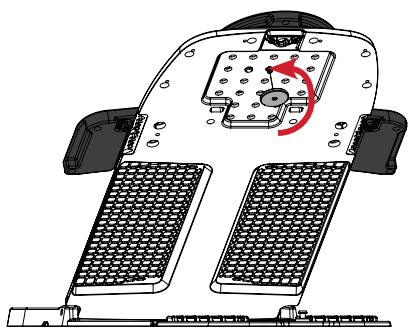


BETJENINGSVEJLEDNING


OPSÆTNING

Opti-Handle™-termoplastadapter


Trin 1

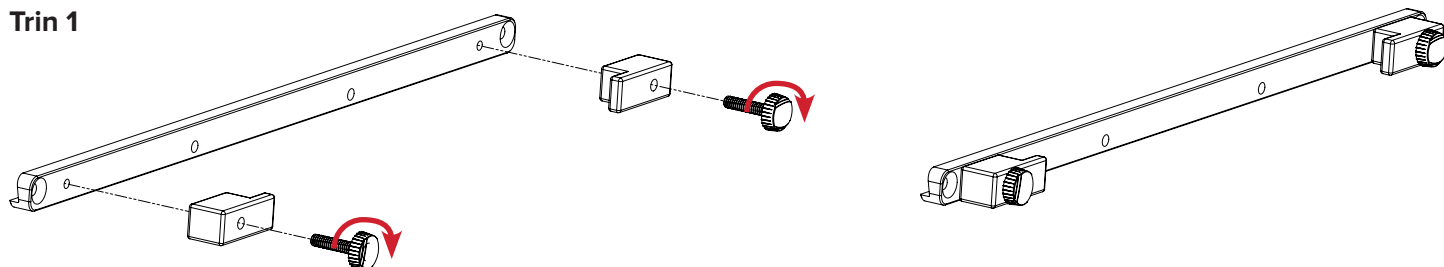

Trin 2

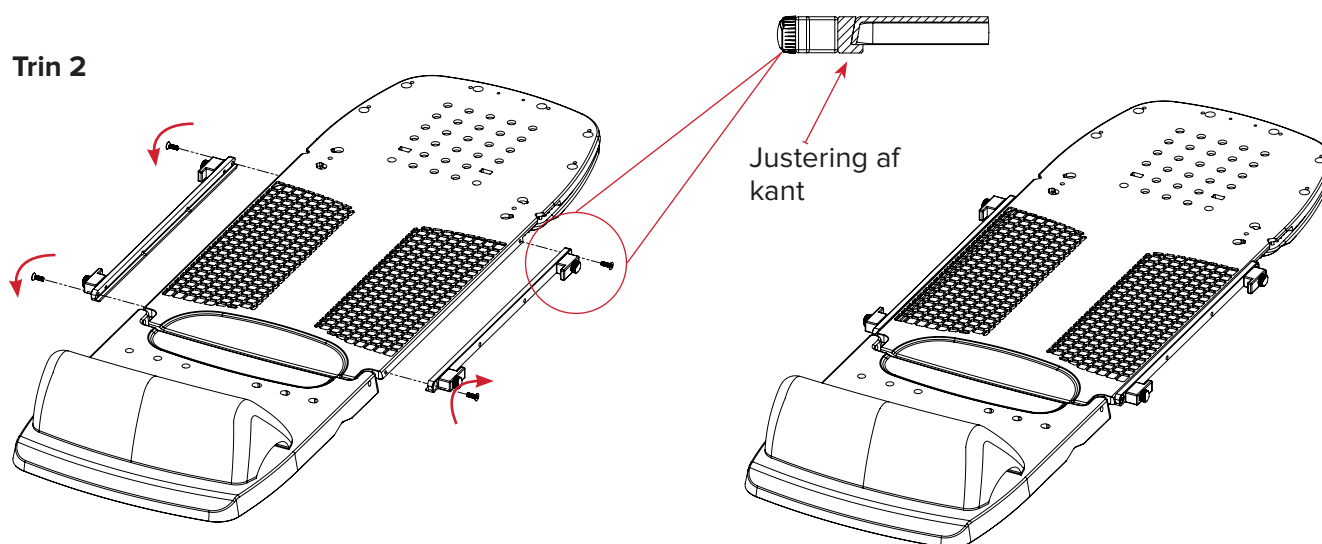

Trin 3

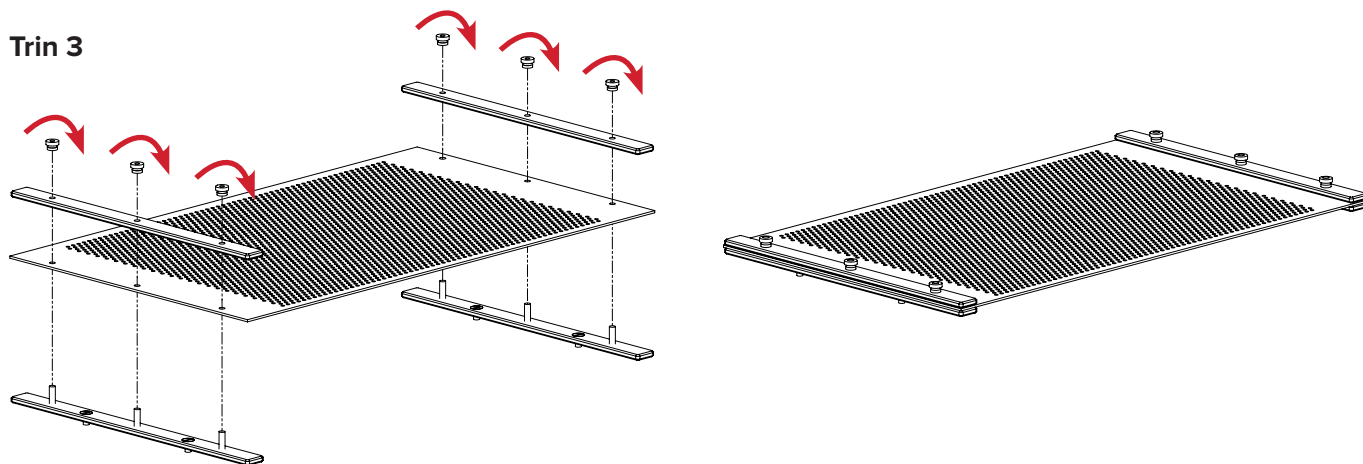

BETJENINGSVEJLEDNING

OPSÆTNING


Trin 4

Opsæt patienten med Access Supine-brystenheten.

! BEMÆRK ! Produktvejledningen og brugermanualen til Access Supine (P/N 2004394) indeholder betjeningsvejledning, produkttegenskaber, specifikationer, advarsler, forsigtighedsregler og andre generelle forholdsregler i forbindelse med brugen af Access Supine-brystenheten.

Blødgør termoplasten (RT-1783P3) med påsatte Opti-Handles (RT-4454-14).

Udfør trin 4A, 4B, 4C og 4D på begge sider af termoplasten.

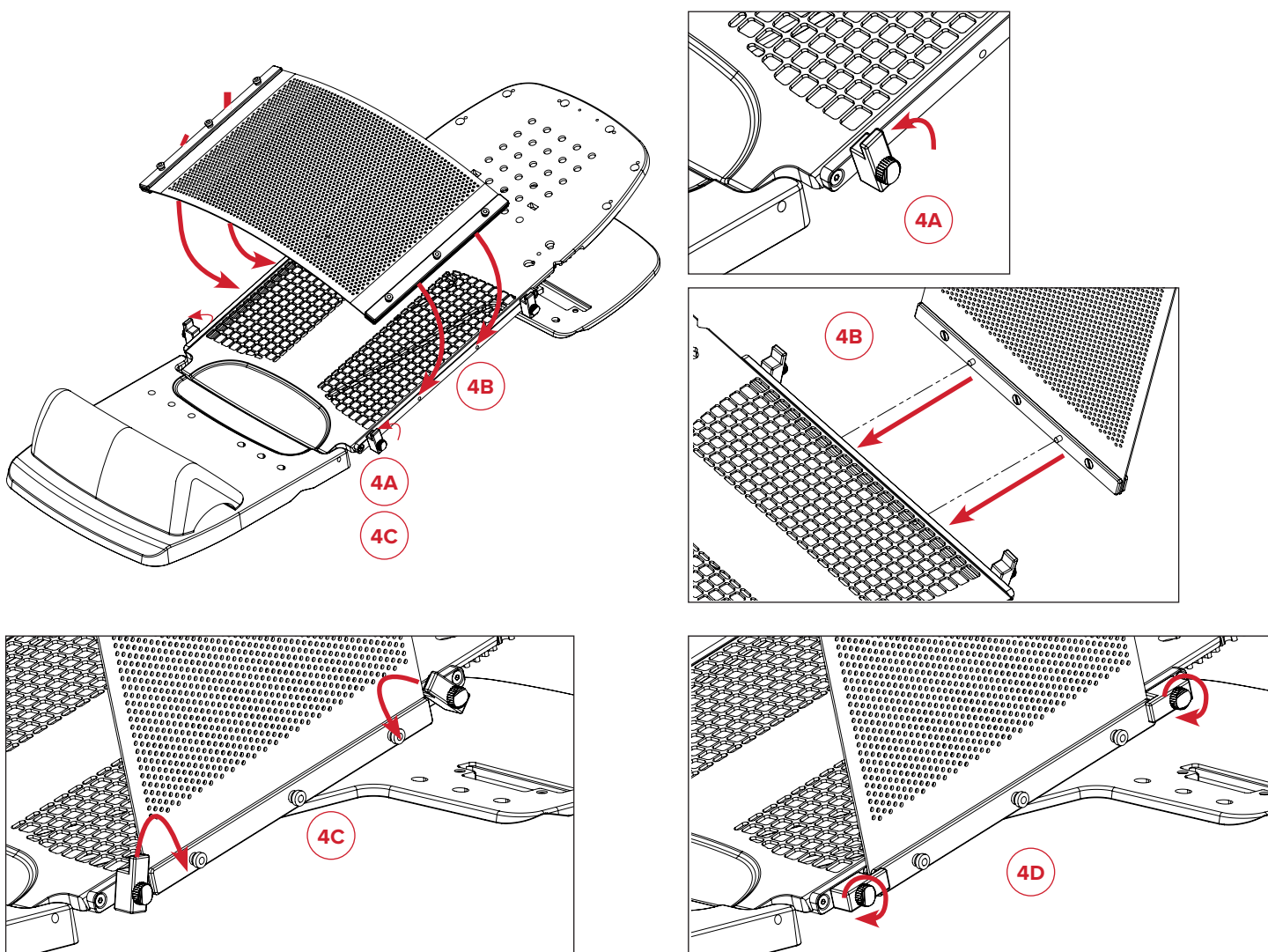

BETJENINGSVEJLEDNING

AFMONTERING





Opti-Handle™-termoplastadapter

Trin 1

Udfør trin 1A, 1B og 1C på begge sider af termoplasten.

Fjern patienten fra Access Supine-brystenheten.


! BEMÆRK ! Produktvejledningen og brugermanualen til Access Supine (P/N 2004394) indeholder betjeningsvejledning, produktegenskaber, specifikationer, advarsler, forsigtighedsregler og andre generelle forholdsregler i forbindelse med brugen af Access Supine-brystenheten.

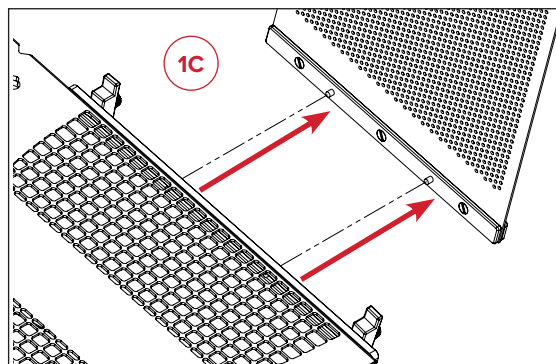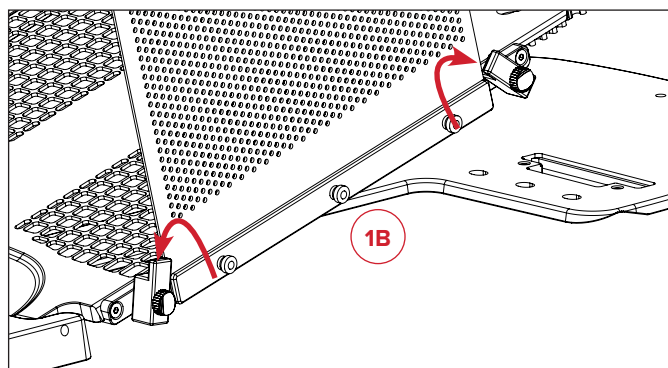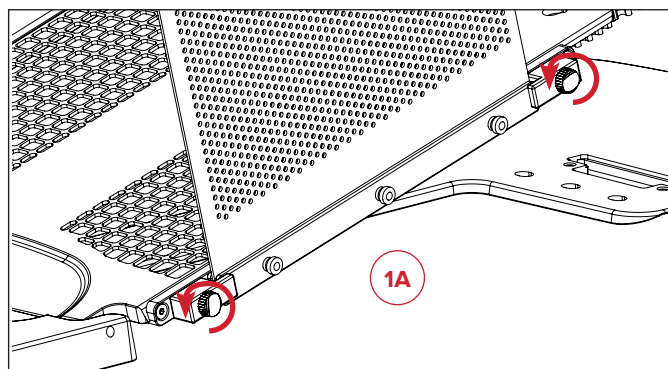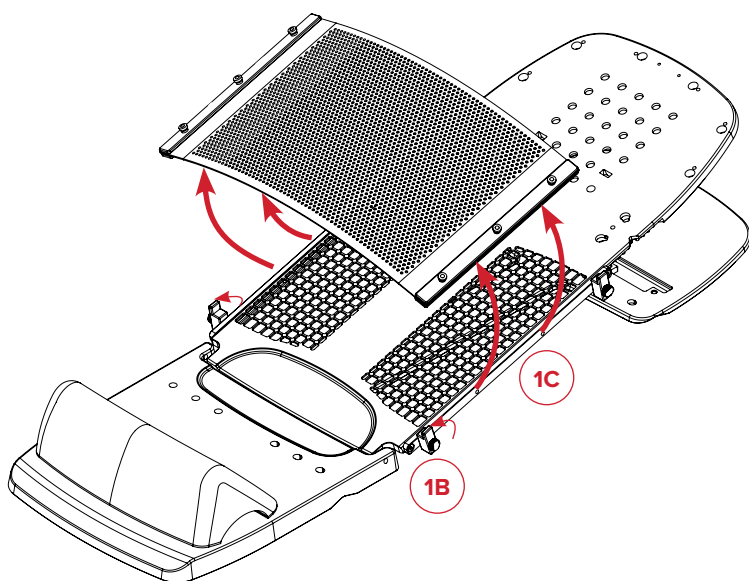



BETJENINGSVEJLEDNING

AFMONTERING

Trin 2

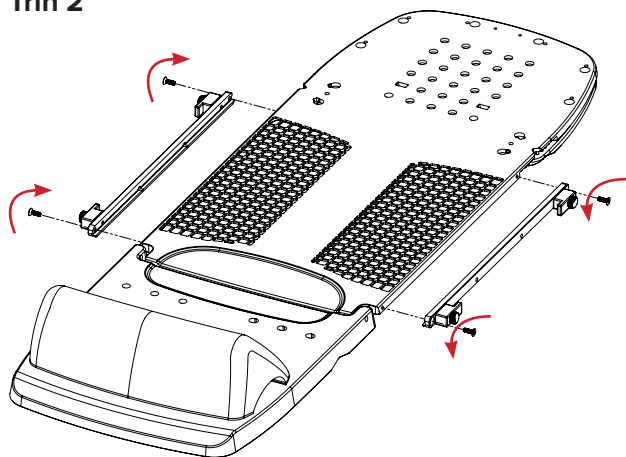

Trin 3

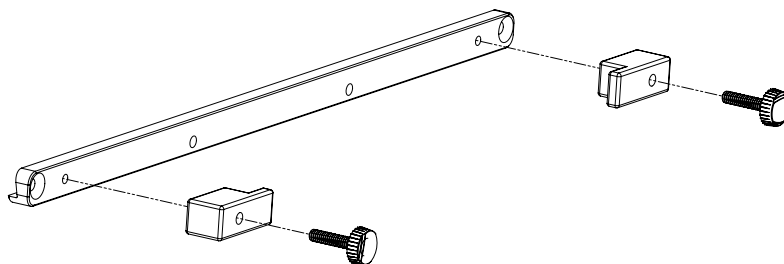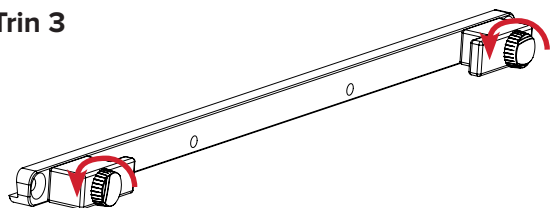

RESERVEDELSLISTE

RT-4546-03 OG RT-4546-04

Kompatibel med Portrait™ S-rammemasker

RT-4546-05

Kompatibel med RT-1783P3, Aquaplast RT®-ark, 12" × 18", 2,4 mm, perf.

Kompatibel med RT-4454-14, 35,56 cm (14 tommer) Opti-Handles, sæt med 2



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com