



positioning
patients for life.®

PRODUKTFÜHRER UND BEDIENERHANDBUCH

RT-4546-03

Portrait™ Head Only Mask Adapter für das
Access™ Supine Breast Device

RT-4546-04

Portrait™ Head & Neck Mask Adapter für das
Access™ Supine Breast Device

RT-4546-05

Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter für das
Access™ Supine Breast Device

ALLGEMEINE VORSICHTS- MASSNAHMEN

WARNHINWEISE

! WARNUNG ! DIESE VORRICHTUNG DARF NICHT MODIFIZIERT WERDEN. FALLS IRGEND EIN TEIL DIESER VORRICHTUNG EINER BEDENKLICH HOHEN LAST AUSGESETZT WURDE, ANSCHEINEND BESCHÄDIGT IST ODER NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT, BRECHEN SIE DIE VERWENDUNG UNVERZÜGLICH AB UND SETZEN SIE SICH MIT QFIX UNTER +1 484-720-6054 ODER TECHSUPPORT@QFIX.COM IN VERBINDUNG.

BEHANDLUNGSSTRAHLABSCHWÄCHUNG

Die Behandlung durch eine Vorrichtung führt zu einem Anstieg der Hautdosis. Thermoplastische Masken schwächen die Strahlung ab und erhöhen die Hautdosis. Während der Planung und der Behandlung müssen die Abschwächung der Strahlung und die erhöhte Hautdosis berücksichtigt werden.

MRT-SICHERHEITSINFORMATIONEN

 Nicht-klinische Tests haben gezeigt, dass **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device**, **RT-4546-03 Portrait™ Head Only Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device** und **RT-4546-05 Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter für das Access™ Supine Breast Device** MRT-sicher sind. **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device**, **RT-4546-03 Portrait™ Head Only Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device** und **RT-4546-05 Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter für das Access™ Supine Breast Device** in einer MRT-Umgebung verwendet werden können.

- **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device**, **RT-4546-03 Portrait™ Head Only Mask Adapter für das Access™ Supine Breast Device** und **RT-4546-05 Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter für das Access™ Supine Breast Device** müssen vor dem Scannen mit der MRT-sicheren Version der Access™ Supine (RT-4546MRI) in Übereinstimmung mit dem vorgesehenen Verwendungszweck verwendet werden.
- Die MRT-sichere Version von Access™ Supine (RT-4546MRI) ist mit dem folgenden Symbol eindeutig gekennzeichnet:



WARNSCHILDER UND BESCHREIBUNGEN

Eine Auflistung der Symbole und ihrer Definitionen kann unter Qfix.com abgerufen werden.





MRT-SICHER

Ein Gegenstand ruft keine bekannte Gefährdung in einer MRT-Umgebung hervor. MRT-sichere Gegenstände bestehen aus Materialien, die nicht elektrisch leitend, nicht metallisch und nicht magnetisch sind.




BEDIENUNGSANLEITUNG

EINRICHTUNG

Nur Kopf

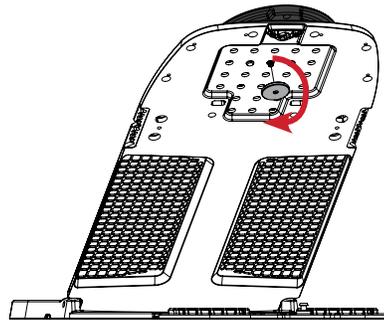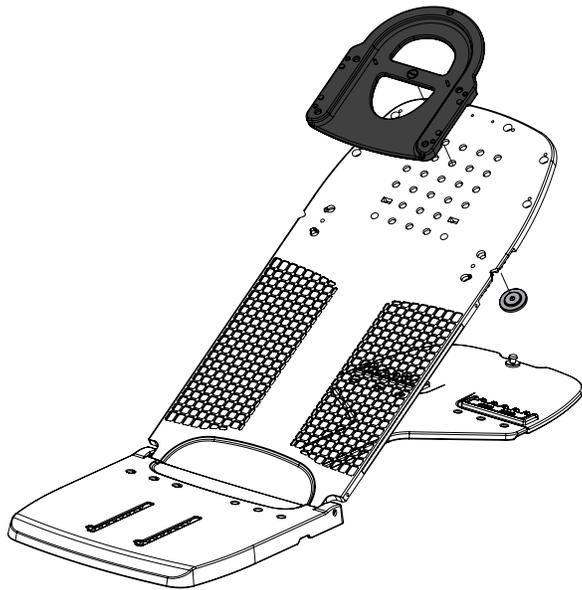

Kopf und Schulter

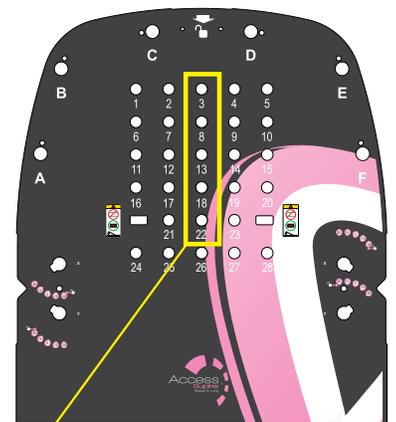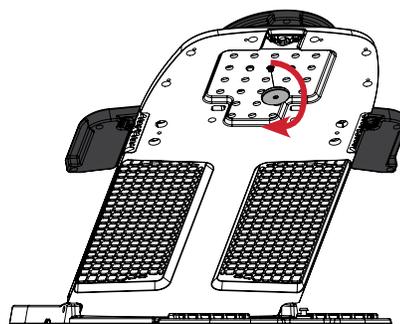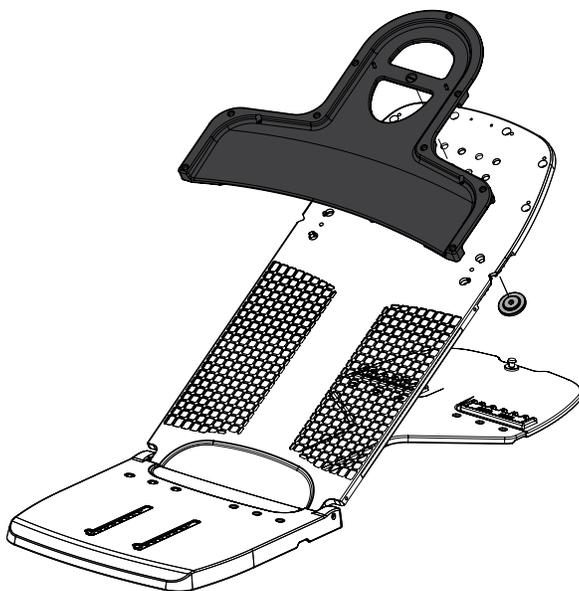


Befestigen Sie den Portrait™ Mask Adapter an der Access™ Supine mit Bohrung 3, 8, 13, 18 oder 22.


BEDIENUNGSANLEITUNG

BEI BEDARF ANPASSEN, UM BEWEGUNGEN ZU VERMEIDEN

Zum Festziehen drehen

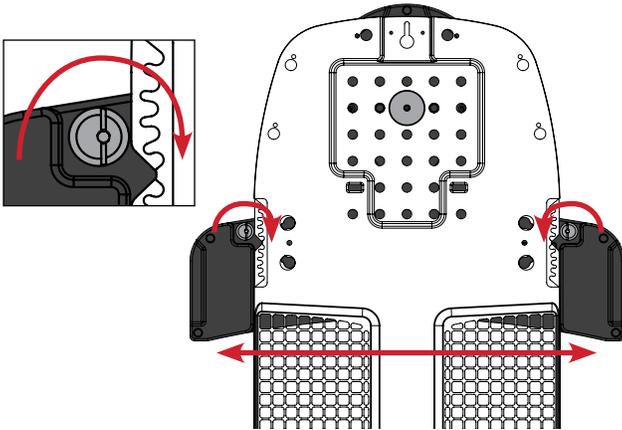



Verriegelt

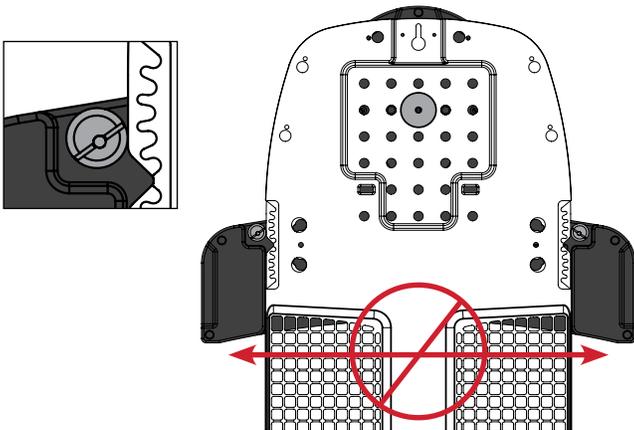


BEDIENUNGSANLEITUNG

DEMONTAGE

Nur Kopf

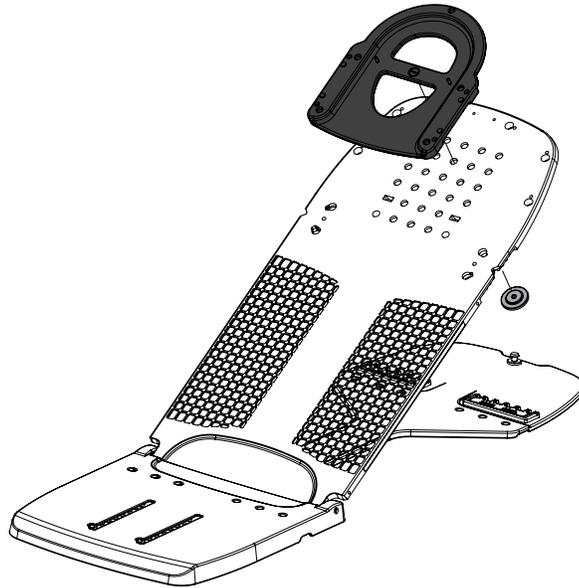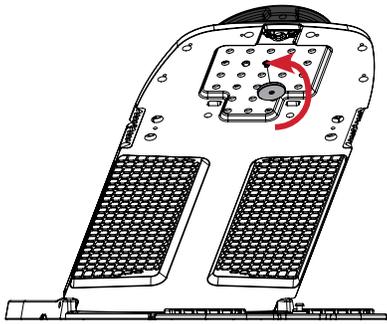

Kopf und Schulter

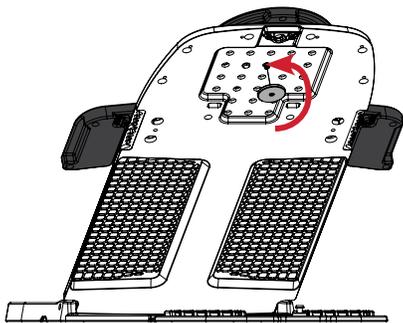


BEDIENUNGSANLEITUNG


EINRICHTUNG

Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter


Schritt 1

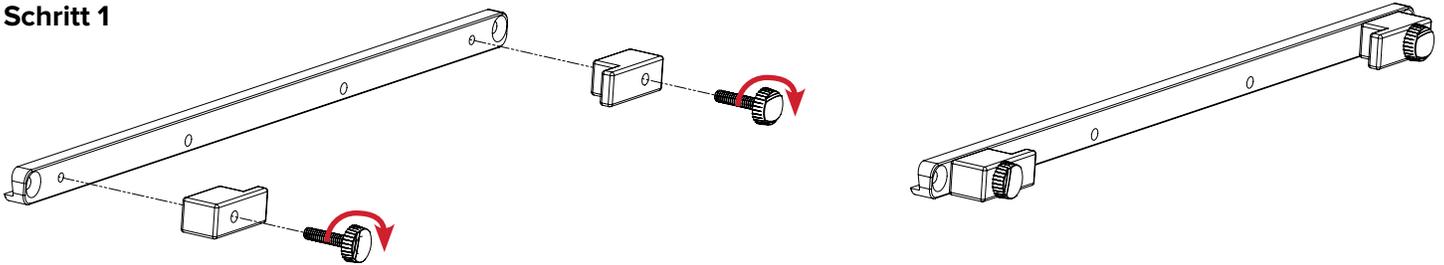

Schritt 2

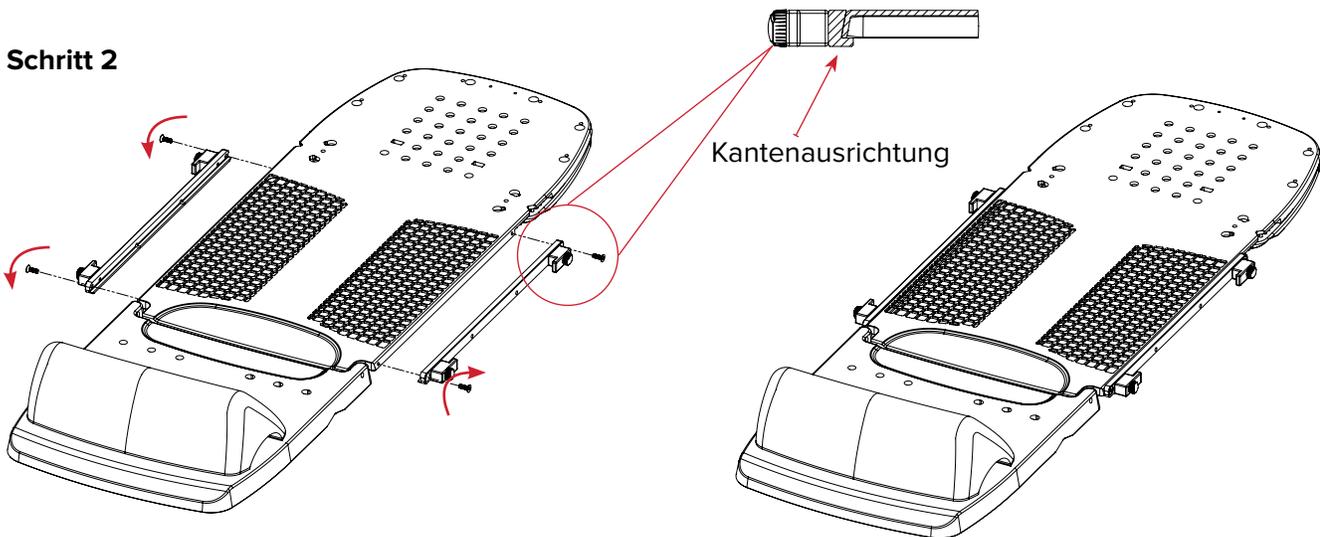

Schritt 3

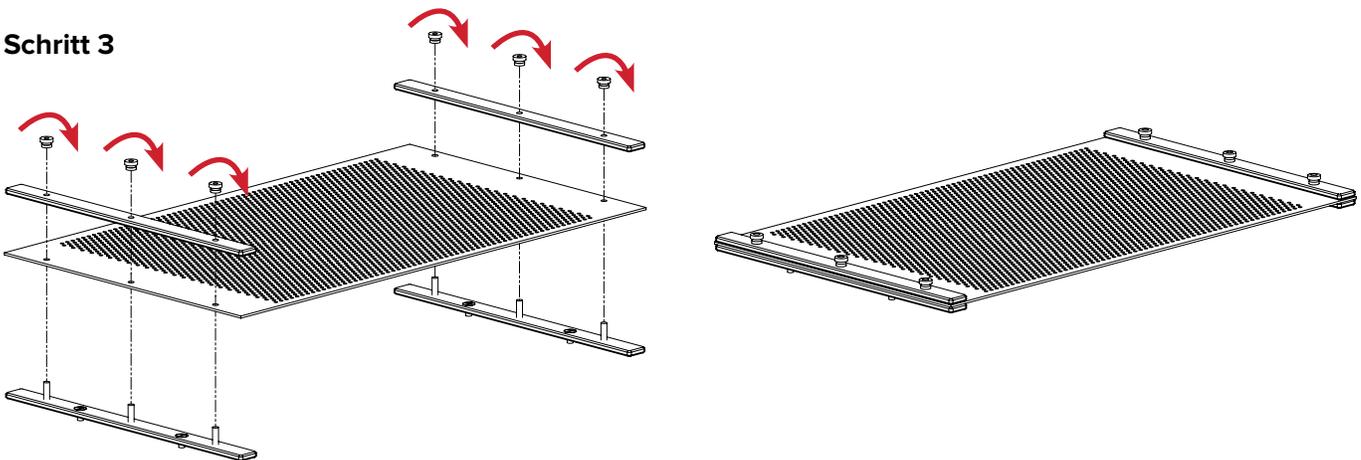

BEDIENUNGSANLEITUNG

EINRICHTUNG


Schritt 4

Legen Sie den Patienten auf das Access Supine Breast Device.

! HINWEIS ! Die Bedienungsanleitung sowie die Produktmerkmale, Spezifikationen, Warnungen, Vorsichtshinweise und andere allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung der Access Supine Breast-Vorrichtung finden Sie im Produktführer und dem Benutzerhandbuch für die Access Supine (P/N 2004394).

Machen Sie das Thermoplast (RT-1783P3) mit den angebrachten Opti-Handles (RT-4454-14) weich.

Führen Sie die Schritt 4A, 4B, 4C und 4D auf beiden Seiten des Thermoplastikmaterials durch.

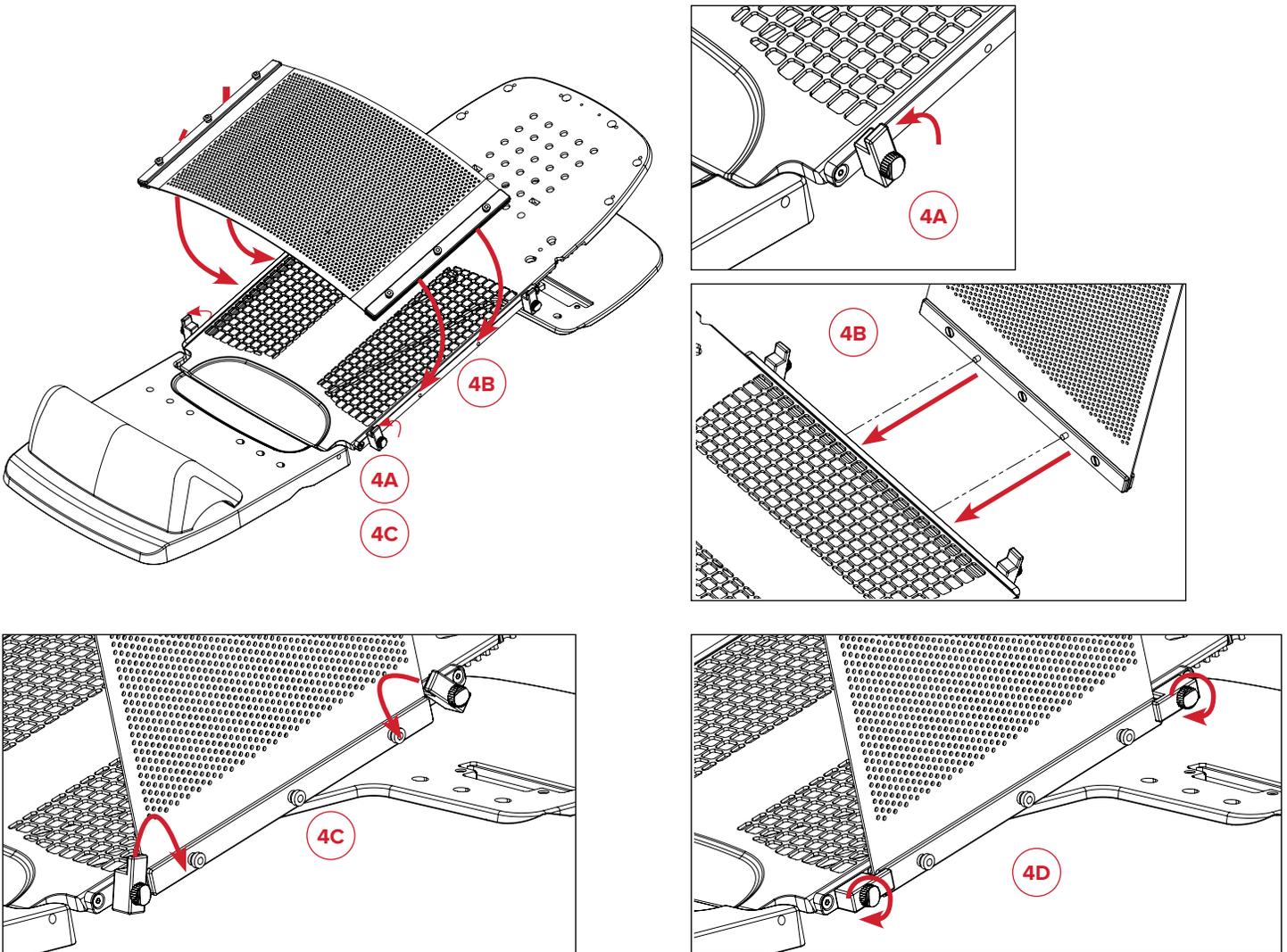

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEMONTAGE





Opti-Handle™ Thermoplastic Adapter

Schritt 1

Führen Sie die Schritt 1A, 1B und 1C auf beiden Seiten des Thermoplastikmaterials durch.

Entfernen Sie den Patienten vom Access Supine Breast Device.


! HINWEIS ! Die Bedienungsanleitung sowie die Produktmerkmale, Spezifikationen, Warnungen, Vorsichtshinweise und andere allgemeine Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung der Access Supine Breast-Vorrichtung finden Sie im Produktführer und dem Benutzerhandbuch für die Access Supine (P/N 2004394).

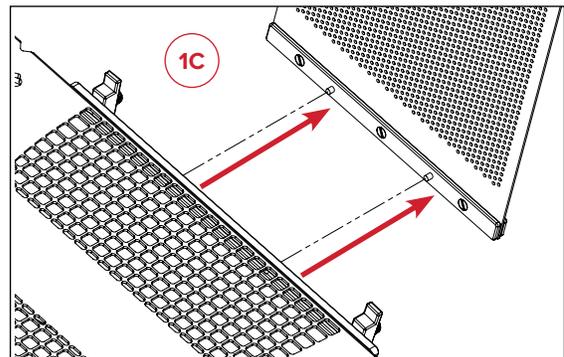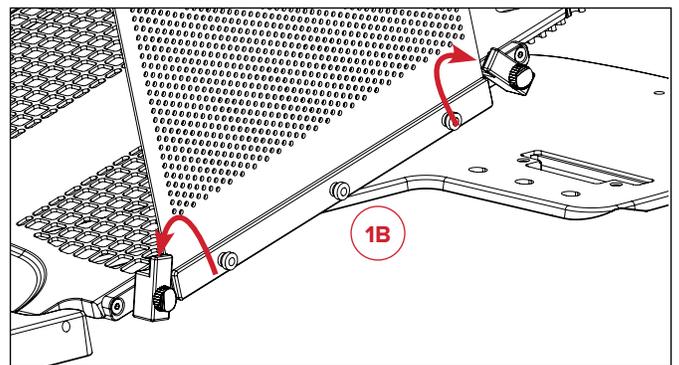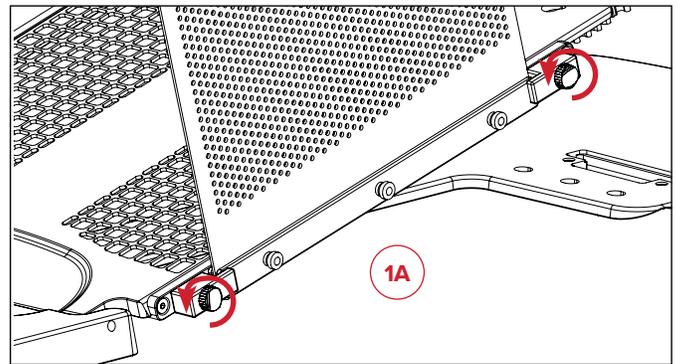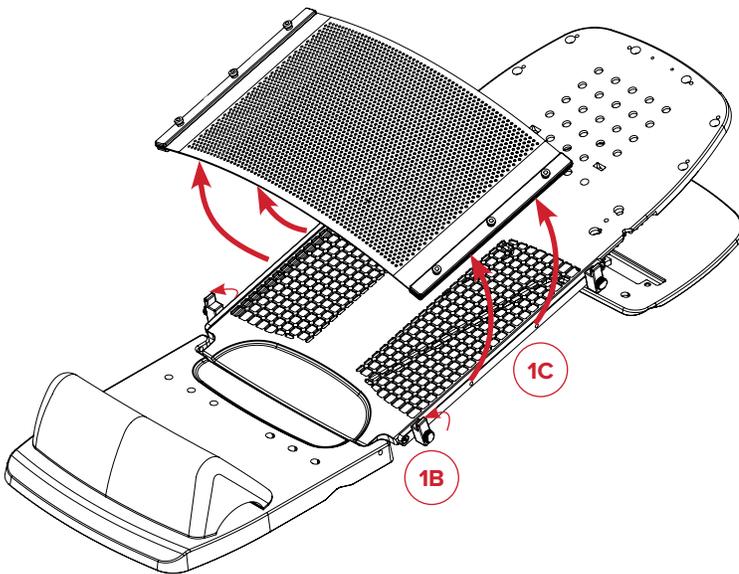



BEDIENUNGSANLEITUNG

DEMONTAGE

Schritt 2

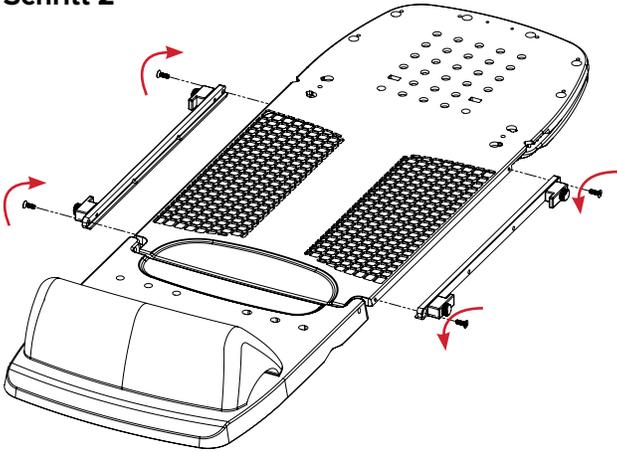

Schritt 3

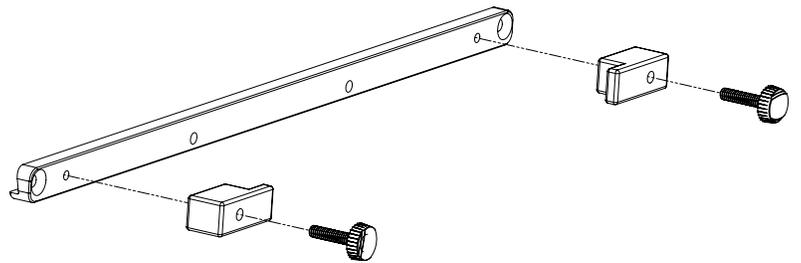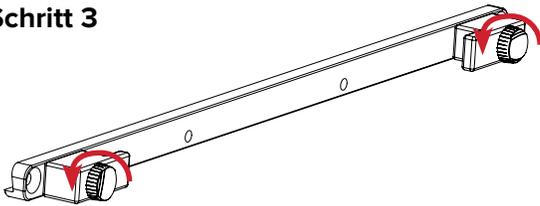

TEILELISTE

RT-4546-03 UND RT-4546-04

Kompatibel mit Portrait™ S-Frame Masks

RT-4546-05

Kompatibel mit RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Kompatibel mit RT-4454-14, 35,56 cm (14 Zoll) Opti-Handles, 2er-Set



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com

2008021_DE_A
2023-04