



GUÍA DEL PRODUCTO Y MANUAL DEL USUARIO

RT-4546-03

Adaptador de máscara solo para cabeza
Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para
tratamiento de mama

RT-4546-04

Adaptador de máscara para cabeza y cuello
Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para
tratamiento de mama

RT-4546-05

Adaptador termoplástico Opti-Handle™ para el
Dispositivo Access™ Supine para tratamiento
de mama

PRECAUCIONES GENERALES

ENUNCIADOS DE ADVERTENCIA

¡ ADVERTENCIA ! NO SE PERMITE NINGUNA MODIFICACIÓN DE ESTE EQUIPO. SI ALGUNA PIEZA DE ESTE DISPOSITIVO EXPERIMENTA UNA CARGA EXTREMA, PARECE DAÑADA O FUNCIONA DE FORMA INCORRECTA, INTERRUMPA DE INMEDIATO SU USO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON QFIX LLAMANDO AL +1 484-720-6054 O ENVIANDO UN MENSAJE A TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ATENUACIÓN DEL HAZ DE TRATAMIENTO

El tratamiento a través de cualquier dispositivo, provocará un aumento de la dosis en la piel. Las máscaras de termoplástico atenuarán un haz de radioterapia y aumentarán la dosis en la piel. La atenuación y el aumento de la dosis en la piel deben tenerse en cuenta durante la planificación y el tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD EN RM

MR En varias pruebas externas al ámbito clínico se ha demostrado que el **Adaptador de máscara para cabeza y cuello Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-04**, el **Adaptador de máscara solo para cabeza Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-03** y el **Adaptador termoplástico Opti-Handle™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-05** son seguros para la RM. El **Adaptador de máscara para cabeza y cuello Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-04**, el **Adaptador de máscara solo para cabeza Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-03** y el **Adaptador termoplástico Opti-Handle™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-05** pueden utilizarse en un entorno de RM.

- El **Adaptador de máscara para cabeza y cuello Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-04**, el **Adaptador de máscara solo para cabeza Portrait™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-03** y el **Adaptador termoplástico Opti-Handle™ para el Dispositivo Access™ Supine para tratamiento de mama RT-4546-05** deben utilizarse con la versión segura para RM del Access™ Supine (RT-4546MRI) de acuerdo con su uso previsto antes de la exploración.
- La versión segura para RM del Access™ Supine (RT-4546MRI) está etiquetada claramente con el siguiente símbolo:



ETIQUETAS Y DESCRIPCIONES DE ADVERTENCIA

Visite Qfix.com para consultar el listado de los símbolos y sus definiciones.





SEGURO PARA LA RM

Artículo que no representa riesgos conocidos derivados de la exposición a ningún entorno de RM. Los artículos seguros para RM están compuestos por materiales que no conducen la electricidad, no son metálicos y no son magnéticos.




INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN

Solo cabeza

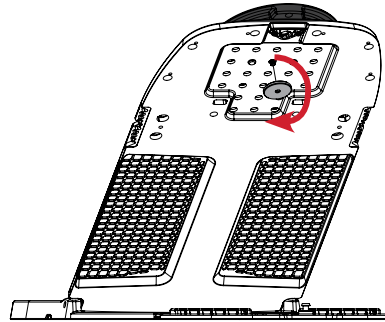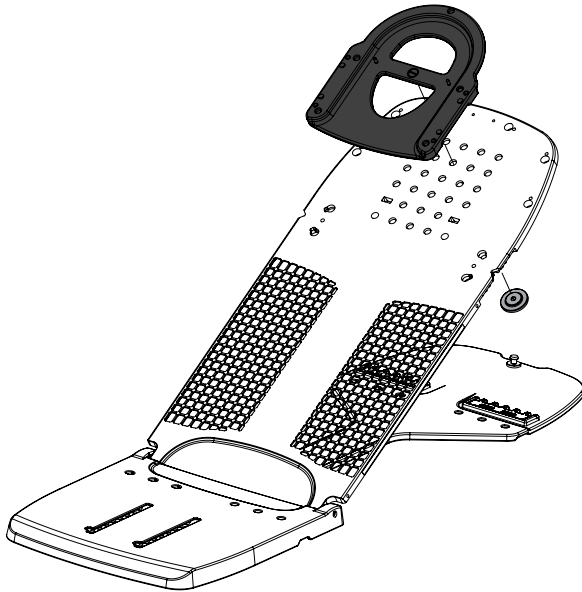

Cabeza y hombro

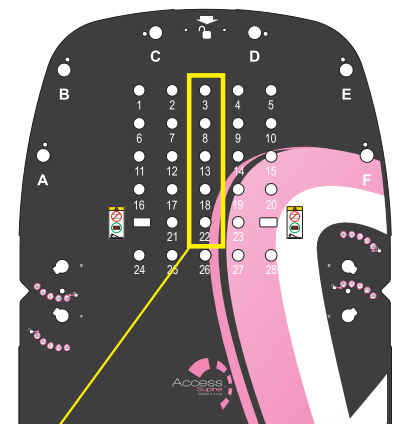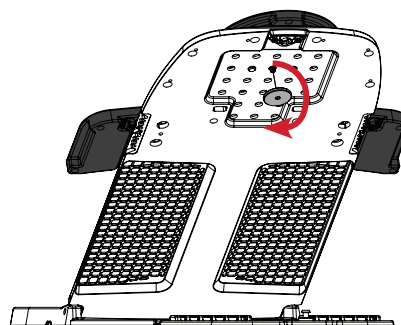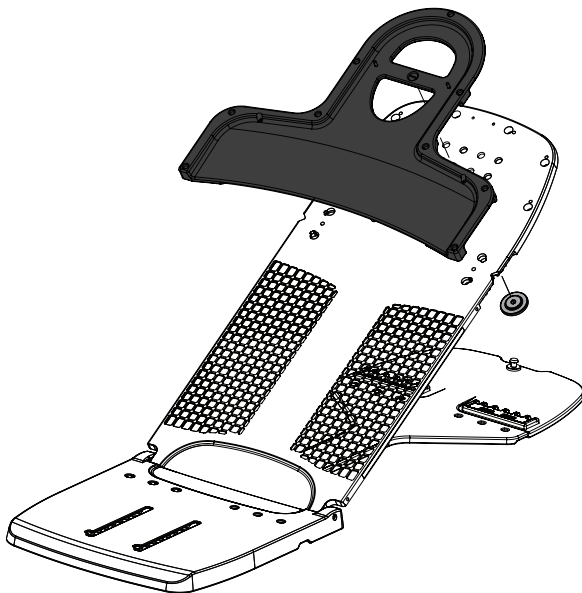


Fije el Adaptador de máscara Portrait™ al Access™ Supine mediante los orificios 3, 8, 13, 18 o 22.


INSTRUCCIONES DE USO

REALICE AJUSTES SI ES NECESARIO PARA ELIMINAR EL MOVIMIENTO

Gire para apretar

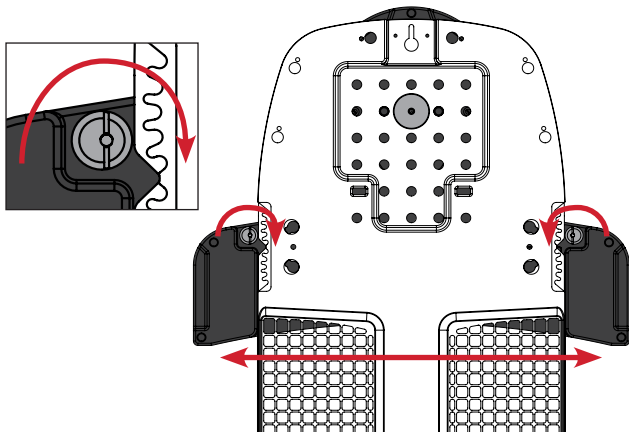



Bloqueado

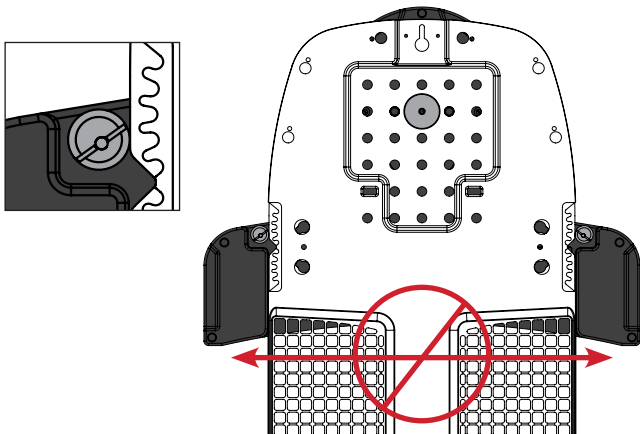



INSTRUCCIONES DE USO

DESMONTAJE

Solo cabeza

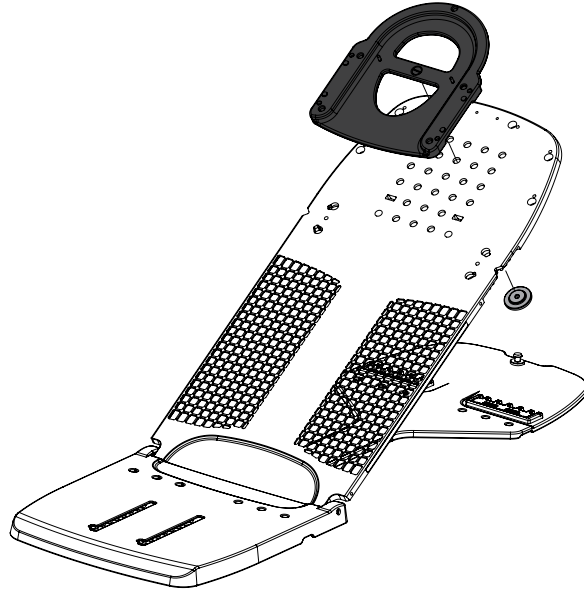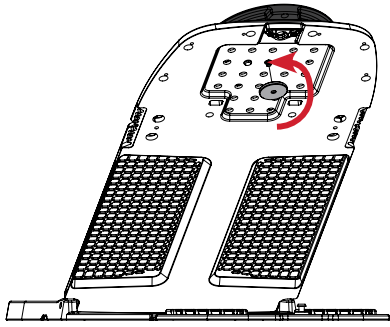

Cabeza y hombro

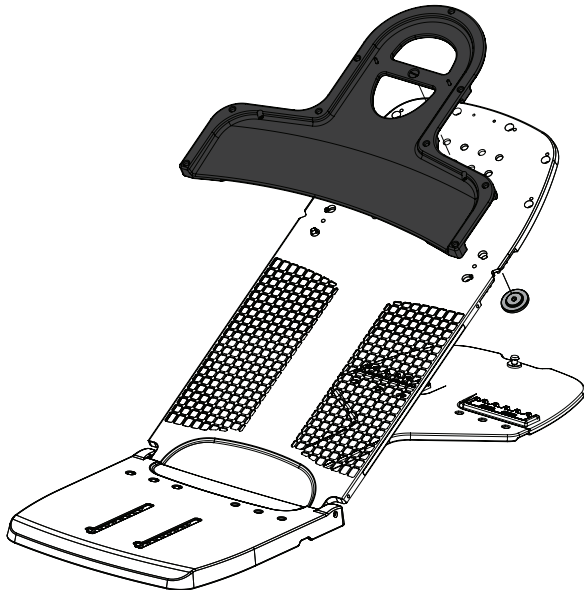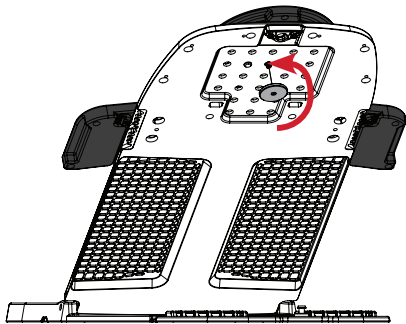


INSTRUCCIONES DE USO


PREPARACIÓN

Adaptador termoplástico Opti-Handle™


Paso 1

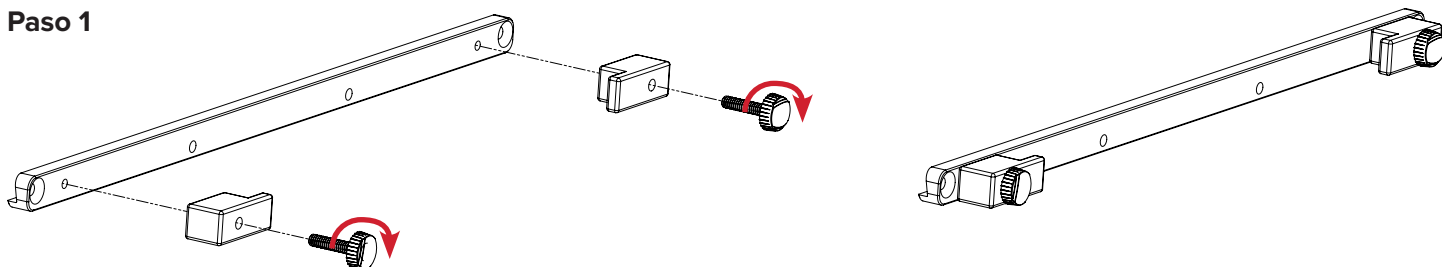

Paso 2

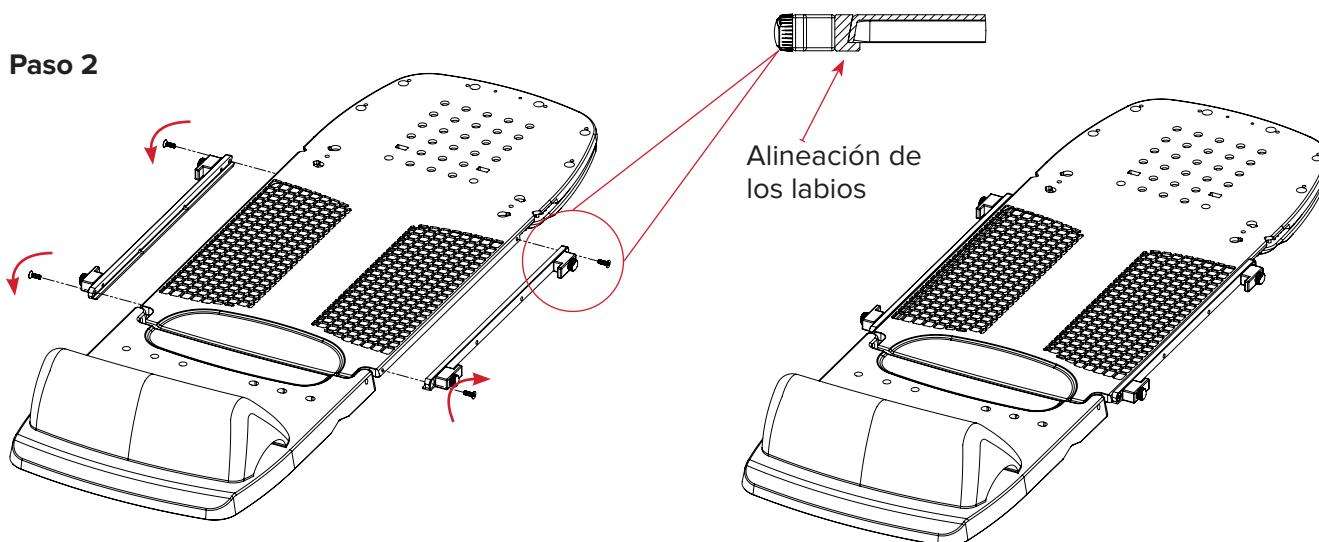

Paso 3

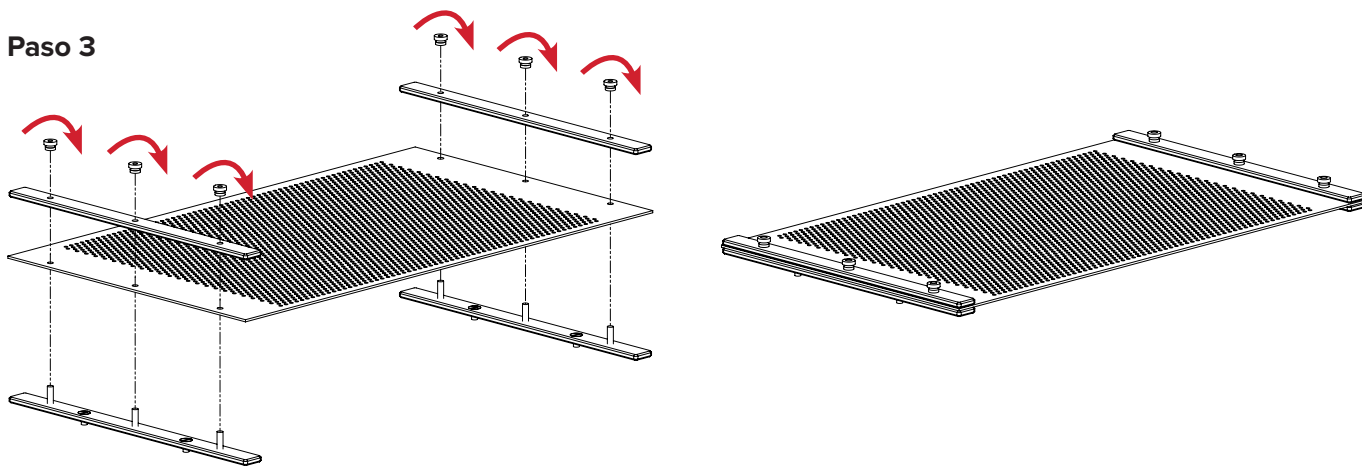

INSTRUCCIONES DE USO

PREPARACIÓN


Paso 4

Coloque al paciente en el Dispositivo Access Supine para tratamiento de mama.

¡ NOTA ! Consulte la Guía del producto y el Manual del usuario del Access Supine (P/N 2004394) para ver las instrucciones de funcionamiento, las características del producto, las especificaciones, las advertencias, las precauciones y otros avisos generales relacionados con el uso del Dispositivo Access Supine para tratamiento de mama.

Ablande el termoplástico (RT-1783P3) con las Opti-Handles (RT-4454-14) acopladas.

Complete los pasos 4A, 4B, 4C y 4D en ambos lados del termoplástico.

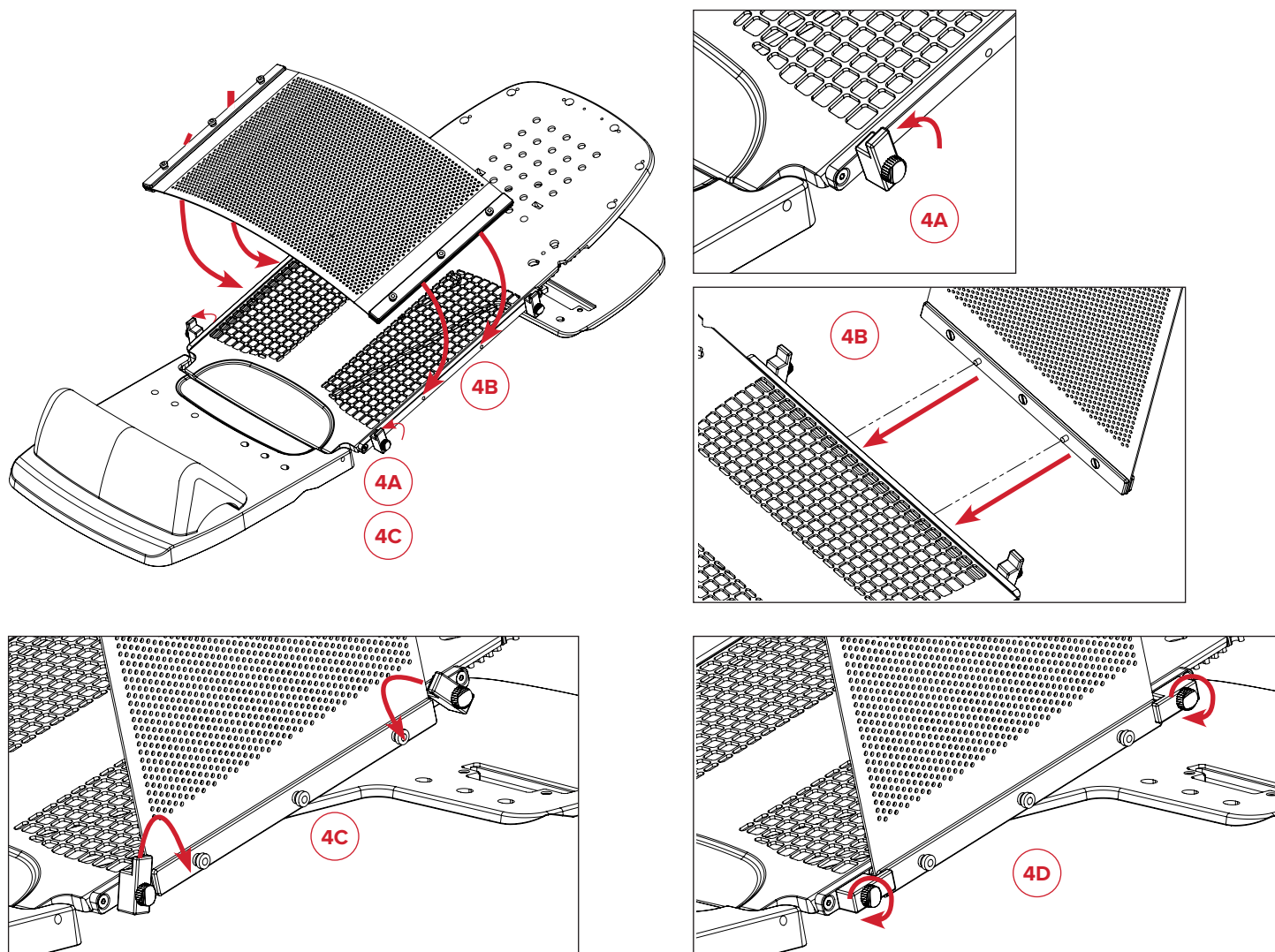

INSTRUCCIONES DE USO

DESMONTAJE





Adaptador termoplástico Opti-Handle™

Paso 1

Complete los pasos 1A, 1B y 1C en ambos lados del termoplástico.

Retire a la paciente del Dispositivo Access Supine para tratamiento de mama.


¡ NOTA ! Consulte la Guía del producto y el Manual del usuario del Access Supine (P/N 2004394) para ver las instrucciones de funcionamiento, las características del producto, las especificaciones, las advertencias, las precauciones y otros avisos generales relacionados con el uso del Dispositivo Access Supine para tratamiento de mama.

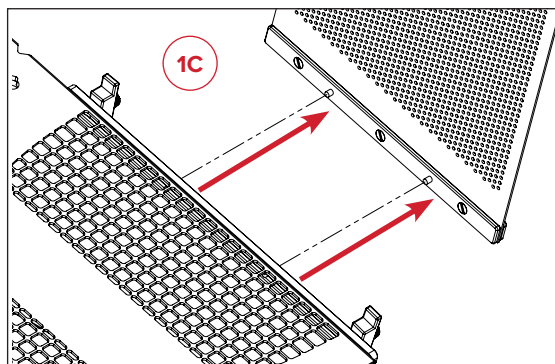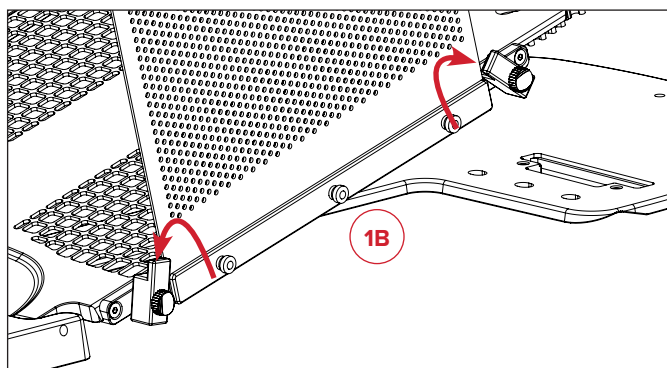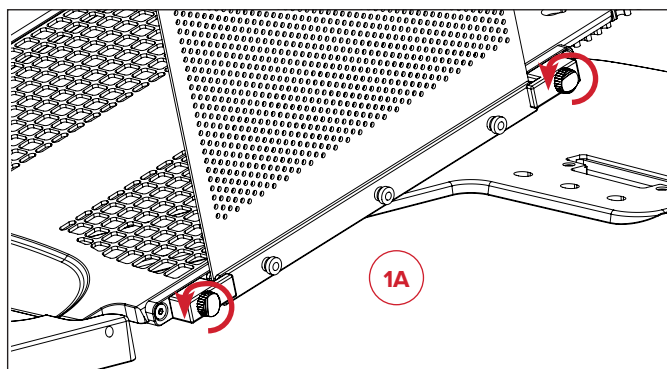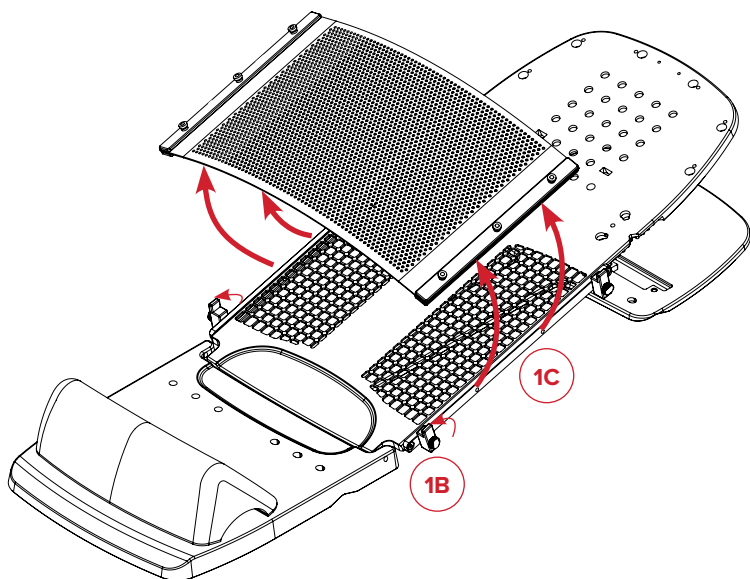



INSTRUCCIONES DE USO

DESMONTAJE

Paso 2

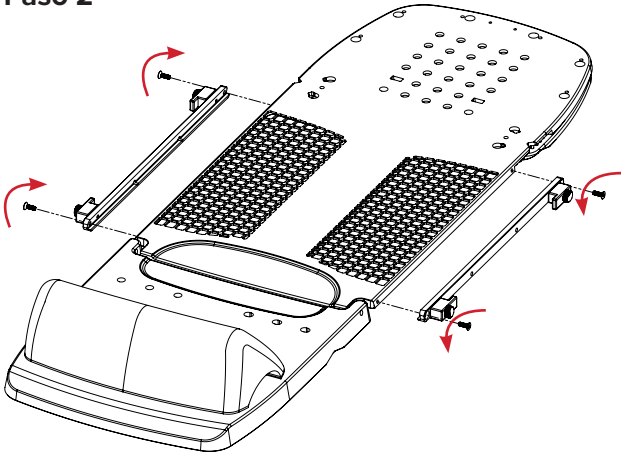

Paso 3

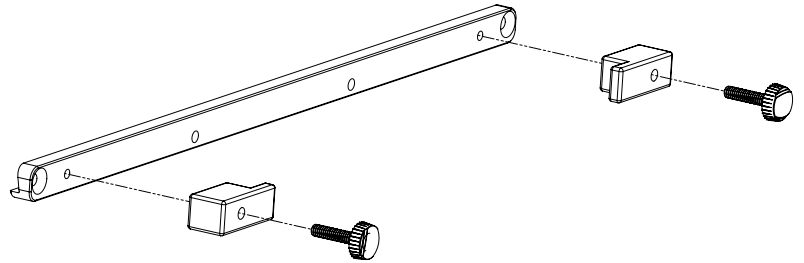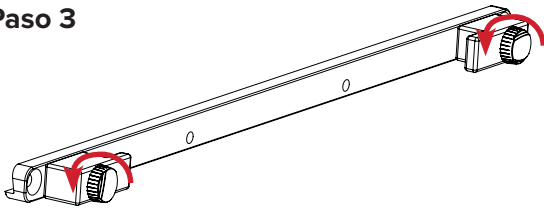

LISTA DE PIEZAS

RT-4546-03 Y RT-4546-04

Compatible con las máscaras Portrait™ S Frame

RT-4546-05

Compatible con la Lámina Perf. Aquaplast RT®, 2,4 mm (12" x 18"), RT-1783P3

Compatible con las Opti-Handles, 35,56 cm (14 pulg), RT-4454-14, juego de 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

📠 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_ES_A
2023-04