



TUOTEOHJE JA KÄYTTÖOPAS

RT-4546-03

Portrait™ vain pään maskisovitin
Access™ Supine -rintalaitteelle

RT-4546-04

Portrait™ pään ja niskan maskisovitin Access™
Supine -rintalaitteelle

RT-4546-05

Opti-Handle™ lämpömuovautuva sovitin
Access™ Supine -rintalaitteelle

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

! VAROITUS ! TÄTÄ LAITETTA EI SAA MUUNTA MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN JOTAKIN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NÄYTTÄÄ VAURIOITUNEelta TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ CQ MEDICALIIN, PUH. +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEeseen SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

HOITOSÄTEEN VAIMENTUMINEN

Minkä tahansa laitteen kautta tapahtuva hoito aiheuttaa lisääntyntä ihoaltistusta. Lämpömuovautuvat maskit vaimentavat sädekeilaa ja lisäävät ihoannosta. Vaimentuminen ja lisääntynyt iholle kohdistuva altistus on otettava huomioon suunnittelun ja hoidon aikana.

MAGNEETTIKUVAUKSEN TURVALLISUUTTA KOSKEVAT TIEDOT

 Ei-kliinisissä testeissä on osoitettu, että **RT-4546-04 Portrait™** pään ja niskan maskisovitin **Access™ Supine -rintalaitteelle**, **RT-4546-03 Portrait™** vain pään maskisovitin **Access™ Supine -rintalaitteelle** ja **RT-4546-05 Opti-Handle™** lämpömuovautuva sovitin **Access™ Supine -rintalaitteelle** ovat MR-turvallisia. **RT-4546-04 Portrait™** pään ja niskan maskisovitinta **Access™ Supine -rintalaitteelle**, **T-4546-03 Portrait™** vain pään maskisovitinta **Access™ Supine -rintalaitteelle** ja **RT-4546-05 Opti-Handle™** lämpömuovautuvaa sovittinta **Access™ Supine -rintalaitteelle** voidaan käyttää MR-ympäristössä.

- **RT-4546-04 Portrait™** pään ja niskan maskisovitinta **Access™ Supine -rintalaitteelle**, **RT-4546-03 Portrait™** pään ja niskan maskisovitinta **Access™ Supine -rintalaitteelle** ja **RT-4546-05 Opti-Handle™** lämpömuovautuvaa sovittinta **Access™ Supine -rintalaitteelle** on käytettävä **Access™ Supine (RT-4546MRI)** -laitteen magneettikuvaukseen sopivan version kanssa käyttötarkoituksen mukaisesti ennen kuvausta.
- **Access™ Supine -laitteen** magneettikuvaukseen sopiva versio (**RT-4546MRI**) on merkitty selkeästi seuraavalla symbolilla:



VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät ovat osoitteessa www.CQmedical.com.





MR-TURVALLINEN

Kohde ei aiheuta tunnettuja vaaroja, jotka aiheutuvat altistumisesta magneettikuvausympäristölle. MR-turvalliset tuotteet koostuvat materiaaleista, jotka eivät johda sähköä, eivät sisällä metalleja eivätkä ole magneettisia.




KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO

Vain pää

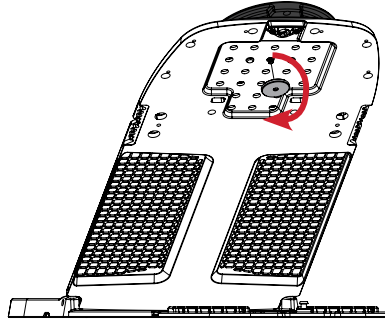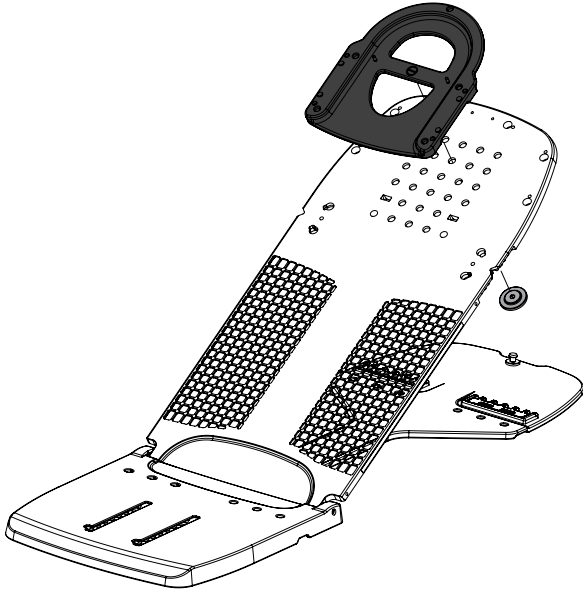

Pää ja olkapää

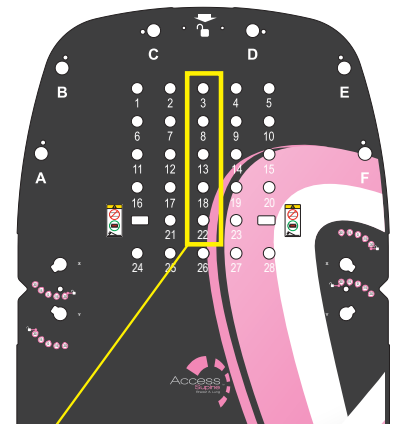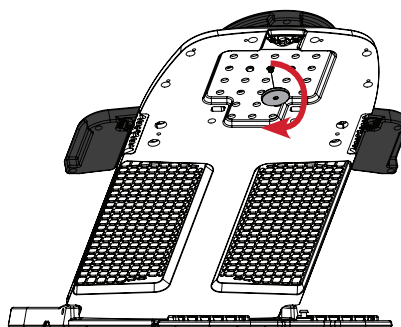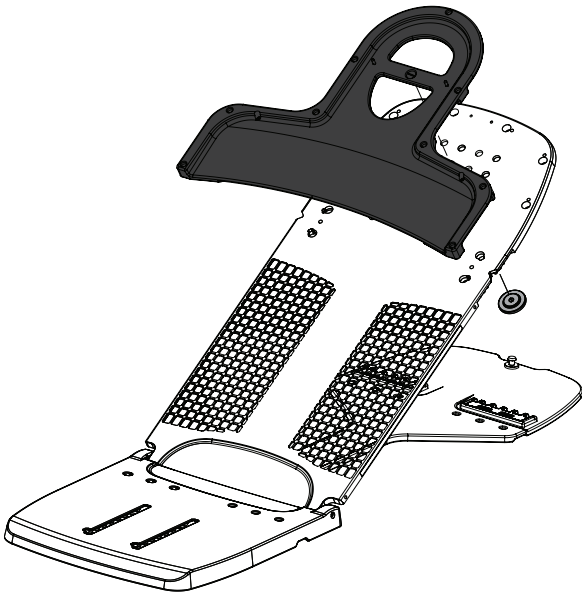


Kiinnitä Portrait™-maskisovitin Access™ Supine-laitteeseen käyttämällä reikää 3, 8, 13, 18 tai 22.


KÄYTTÖOHJEET

SÄÄDÄ TARVITTAESSA NIIN, ETTEI LIIKETTÄ PÄÄSE SYNTYMÄÄN

Kiristä kääntämällä

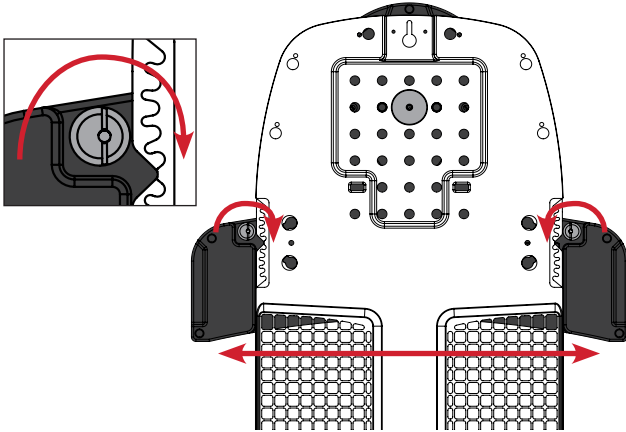



Lukittu

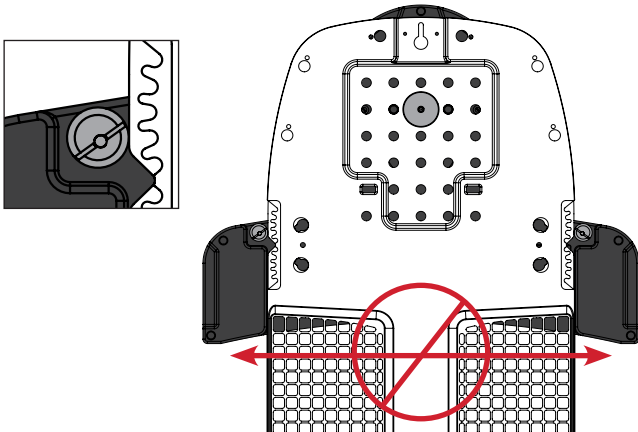



KÄYTTÖOHJEET

IRROTTAMINEN

Vain pää

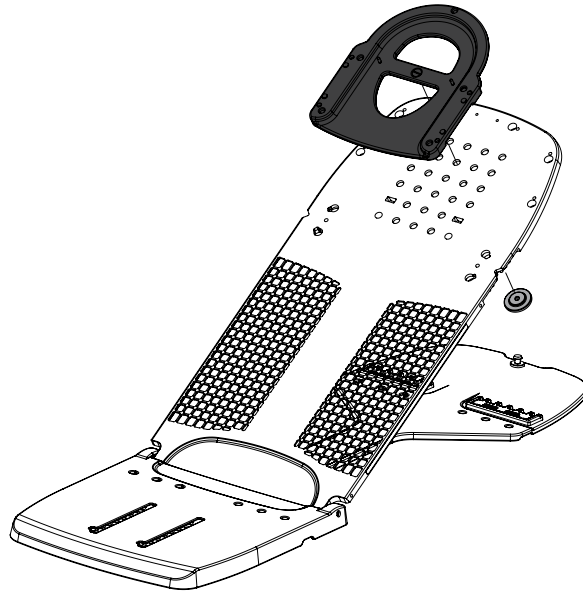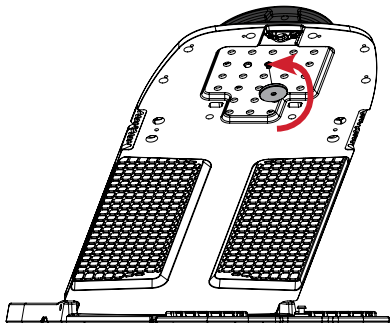

Pää ja olkapää

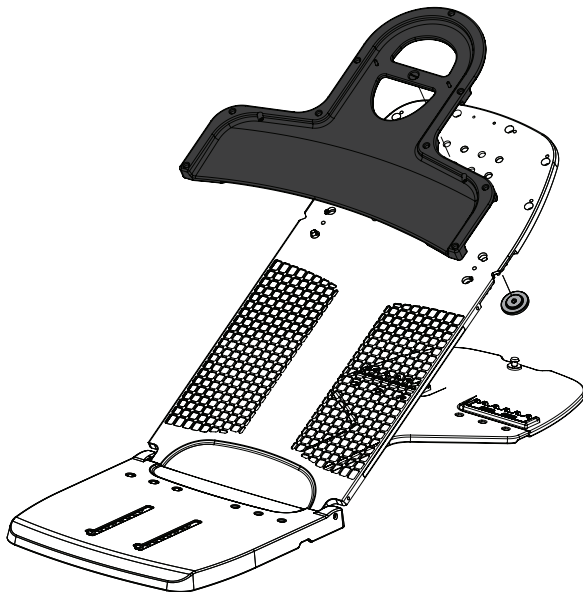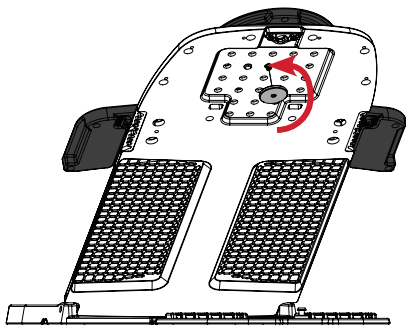


KÄYTTÖOHJEET


KÄYTTÖÖNOTTO

Opti-Handle™ lämpömuovautuva sovitin


Vaihe 1

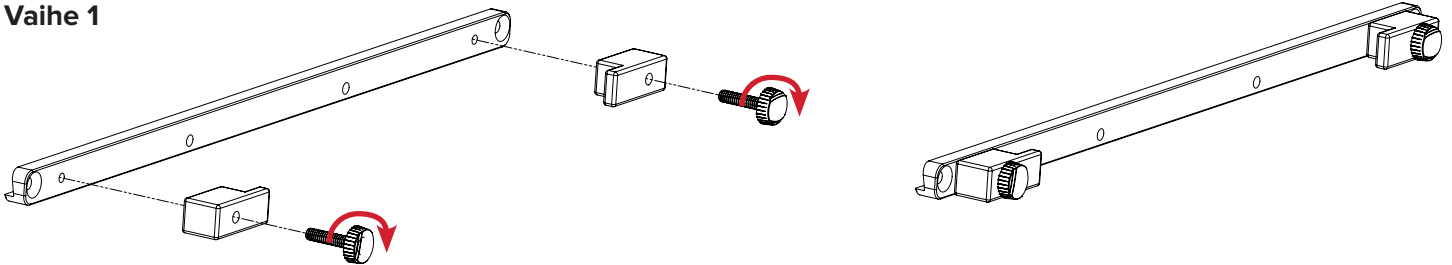

Vaihe 2

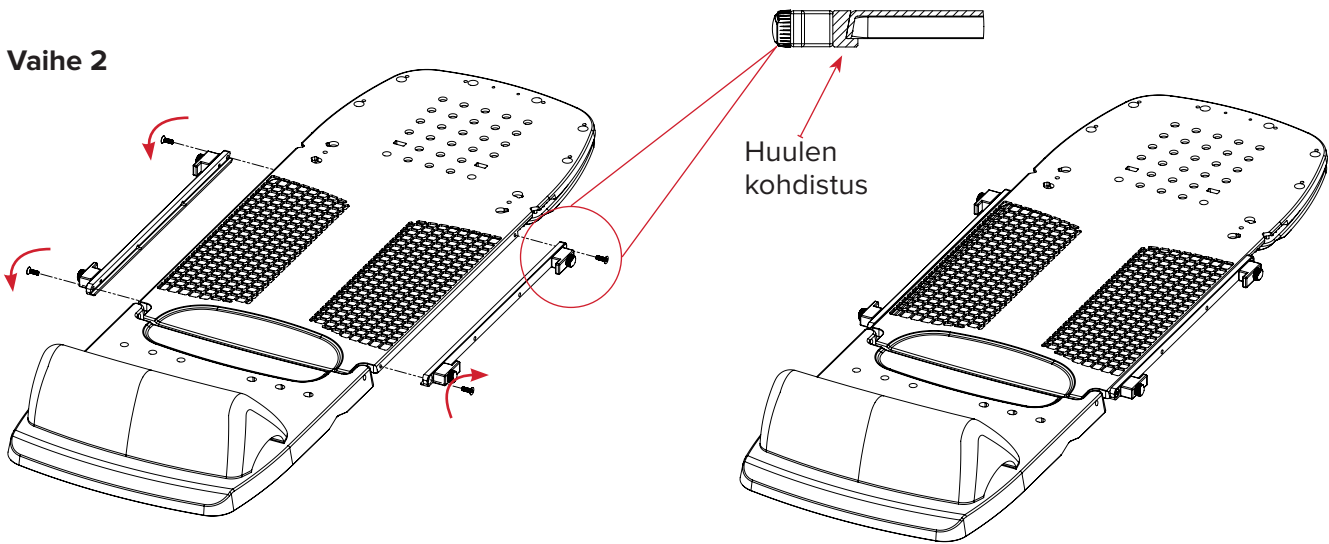

Vaihe 3

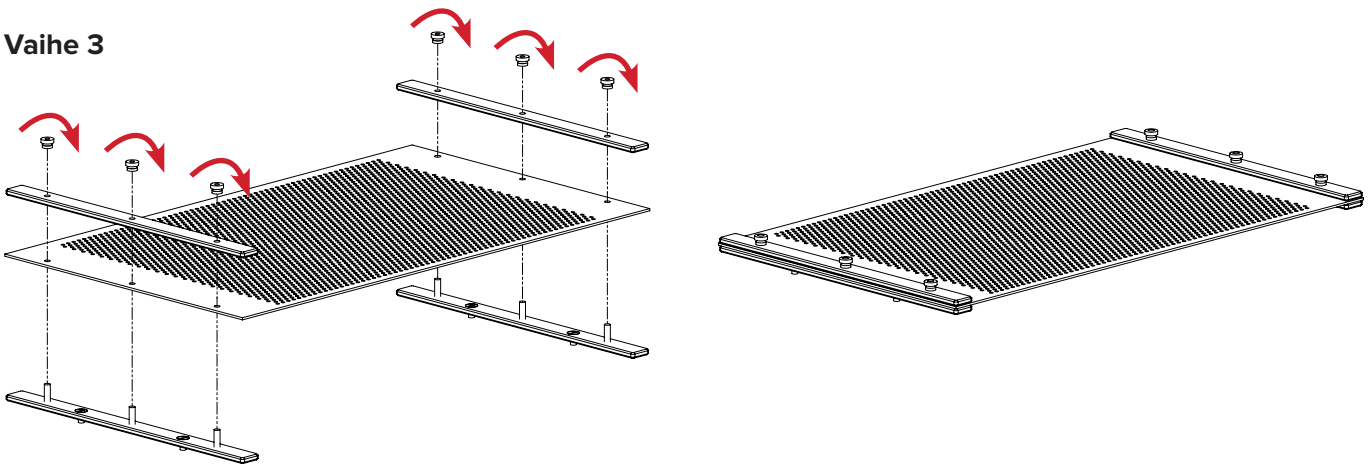

KÄYTTÖOHJEET

KÄYTTÖÖNOTTO


Vaihe 4

Aseta potilas Access Supine -rintalaitteeseen.

! HUOMAUTUS ! Tarkista Access Supine -laitteen (P/N 2004394) käyttöön liittyvät käyttöohjeet, tuoteominaisuudet, tekniset tiedot, varoitukset, huomiot ja muut yleiset varotoimet Access Supine -rintalaitteen tuoteohjeesta ja käyttöoppaasta.

Pehmitä lämpömuovautuva materiaali (RT-1783P3), johon on kiinnitetty Opti-Handles-laitteet (RT-4454-14).

Tee vaiheet 4A, 4B, 4C ja 4D lämpömuovautuvan materiaalin kummallakin puolella.

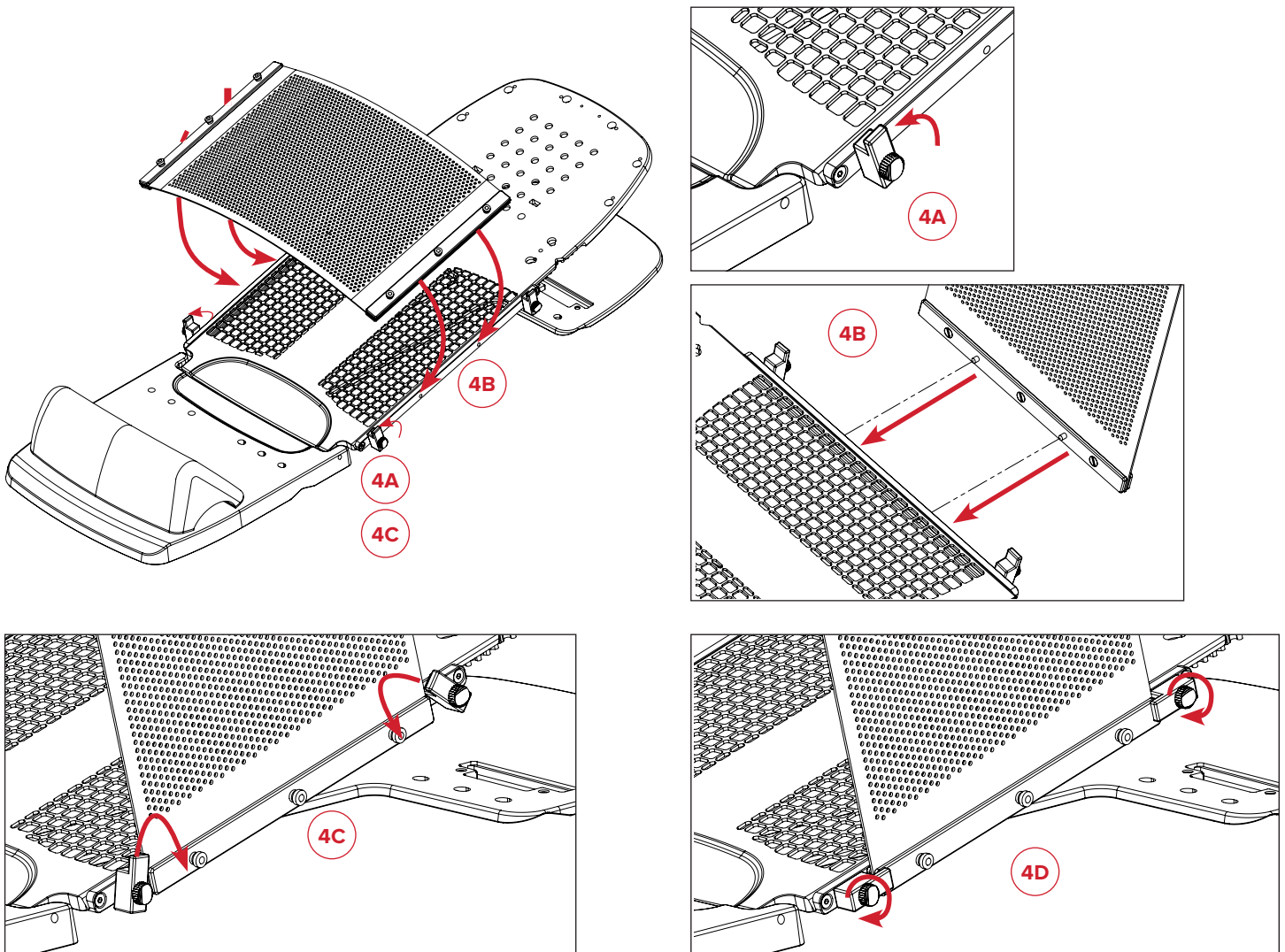

KÄYTTÖOHJEET

IRROTTAMINEN





Opti-Handle™ lämpömuovautuva sovitin

Vaihe 1

Tee vaiheet 1A, 1B ja 1C lämpömuovautuvan materiaalin kummallakin puolella.

Poista potilas Access Supine -rintalaitteesta.


! HUOMAUTUS ! Tarkista Access Supine -laitteen (P/N 2004394) käyttöön liittyvät käyttöohjeet, tuoteominaisuudet, tekniset tiedot, varoitukset, huomiot ja muut yleiset varotoimet Access Supine -rintalaitteen tuoteohjeesta ja käyttöoppaasta.

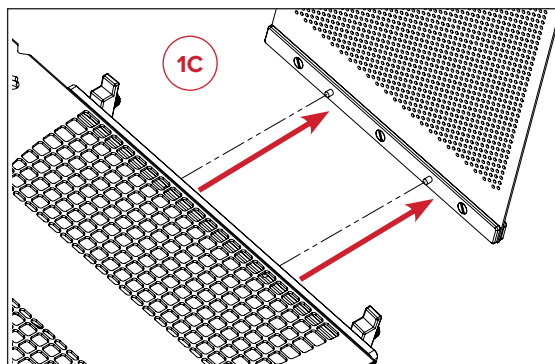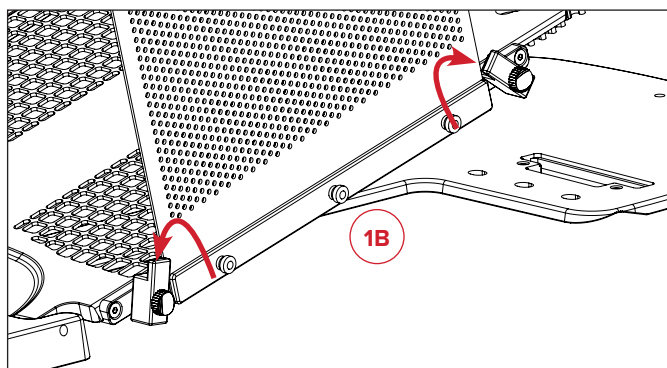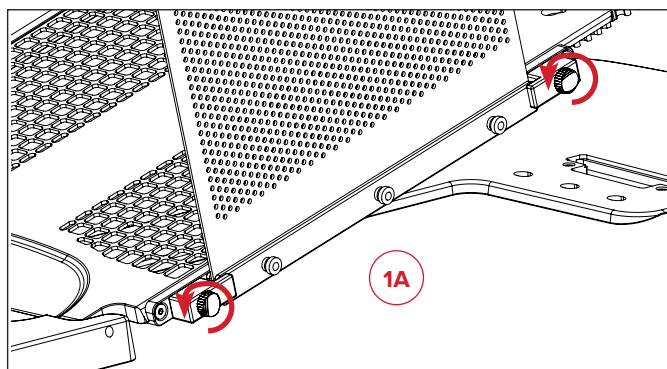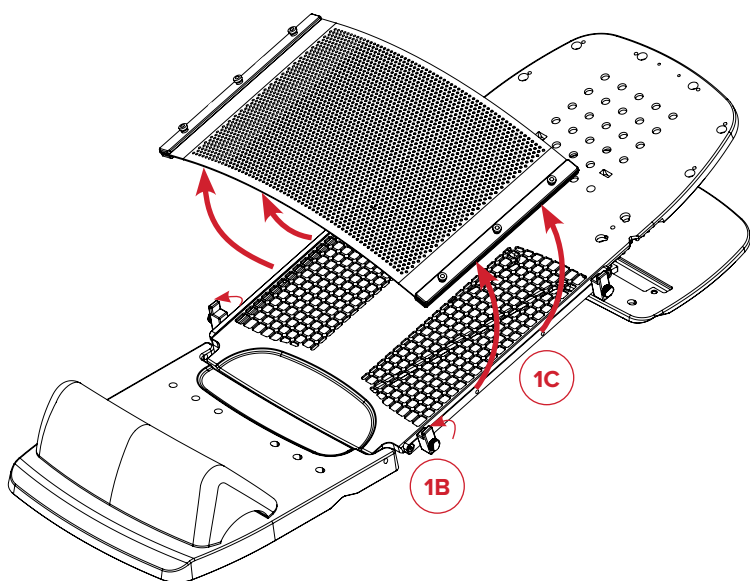



KÄYTTÖOHJEET

IRROTTAMINEN

Vaihe 2

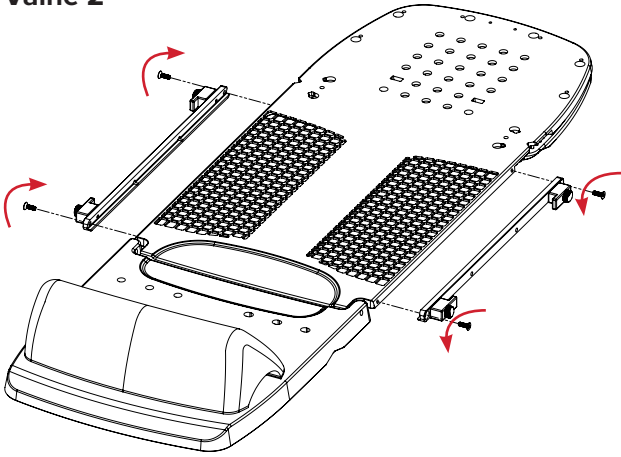

Vaihe 3

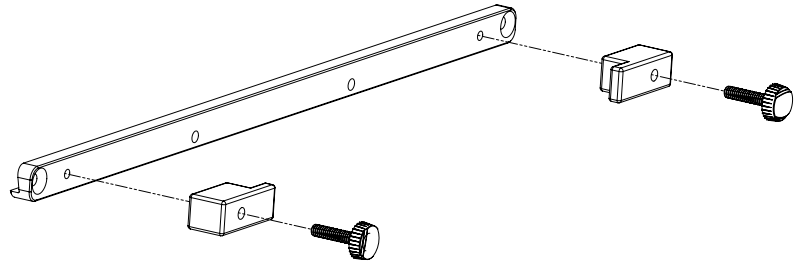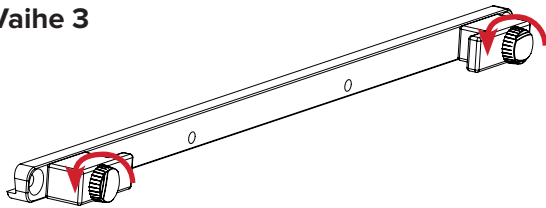

OSALUETTELO

RT-4546-03 JA RT-4546-04

Yhteensopiva Portrait™-S-kehysmaskien kanssa

RT-4546-05

Yhteensopiva seuraavan tuotteen kanssa: RT-1783P3, Aquaplast RT® -arkki, 12" x 18", 2,4 mm, rei'itetty

Yhteensopiva seuraavan tuotteen kanssa: RT-4454-14, 35,56 cm (14 tuumaa) Opti-Handles, 2 kpl



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com