



positioning
patients for life.®

GUIDE PRODUIT ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

RT-4546-03

Adaptateur de masque tête seule Portrait™ pour
dispositif mammaire Access™ Supine

RT-4546-04

Adaptateur de masque tête et cou Portrait™ pour
dispositif mammaire Access™ Supine

RT-4546-05

Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™ pour
dispositif mammaire Access™ Supine

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

! AVERTISSEMENT ! AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CE DISPOSITIF SUBIT UNE CHARGE EXCESSIVE DANS UN CONTEXTE D'ÉVÉNEMENT CATASTROPHIQUE, SEMBLE ENDOMMAGÉE OU FONCTIONNE MAL, INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONTACTER QFIX AU +1 484-720-6054 OU À L'ADRESSE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ATTÉNUATION DU FAISCEAU DE TRAITEMENT

Les traitements réalisés à travers des dispositifs augmentent la dose à la peau. Les masques thermoplastiques atténuent le faisceau radiothérapeutique et augmentent la dose à la peau. Cette atténuation et l'augmentation de la dose à la peau doivent être prises en compte au cours de la planification et du traitement.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RM

 Des tests non cliniques ont démontré que les dispositifs **RT-4546-04 Adaptateur de masque tête et cou Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptateur de masque tête seule Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine**, et **RT-4546-05 Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™ pour dispositif mammaire Access™ Supine** sont compatibles RM. Les dispositifs **RT-4546-04 Adaptateur de masque tête et cou Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptateur de masque tête seule Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine** et **RT-4546-05 Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™ pour dispositif mammaire Access™ Supine** peuvent être utilisés dans un environnement RM.

- Les dispositifs **RT-4546-04 Adaptateur de masque tête et cou Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptateur de masque tête seule Portrait™ pour dispositif mammaire Access™ Supine** et **RT-4546-05 Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™ pour dispositif mammaire Access™ Supine** doivent être utilisés avec la version compatible RM de l'**Access™ Supine (RT-4546MRI)** conformément à son utilisation prévue pour pouvoir procéder à l'examen.
- La version compatible RM de l'**Access™ Supine (RT-4546MRI)** affiche clairement le symbole suivant :



ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS

Consulter Qfix.com pour obtenir une liste des symboles et de leur définition.





COMPATIBLE RM

Dispositif ne présentant aucun danger connu suite à une exposition à un environnement RM. Les éléments compatibles RM sont composés de matériaux non conducteurs électriquement, non métalliques et non magnétiques.




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

Tête seule

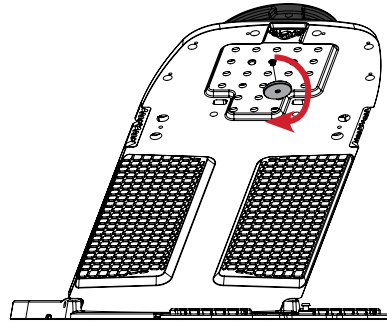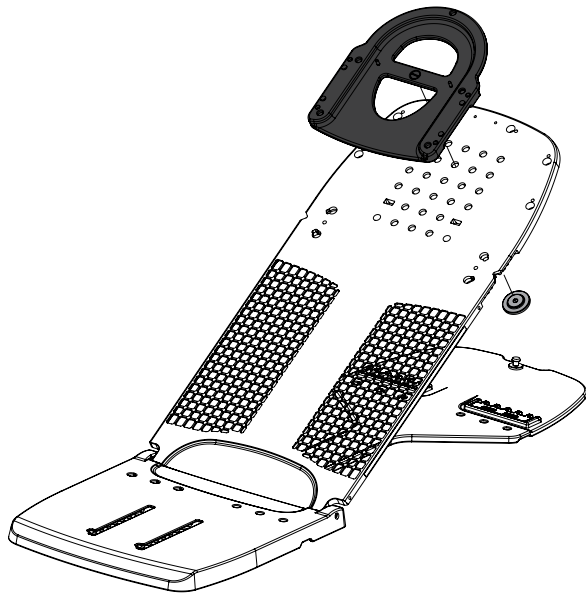

Tête et épaules

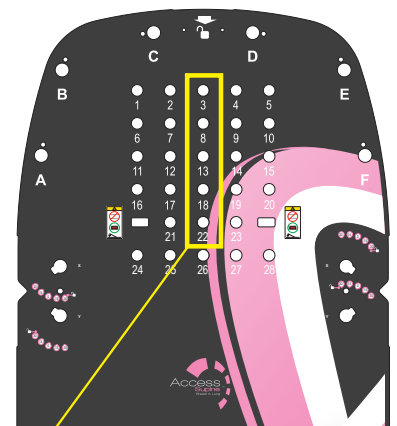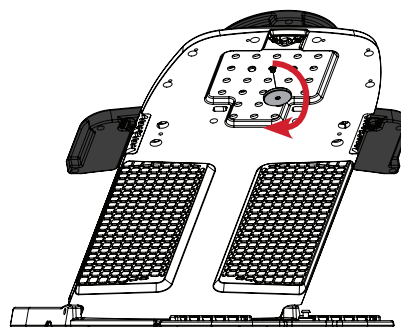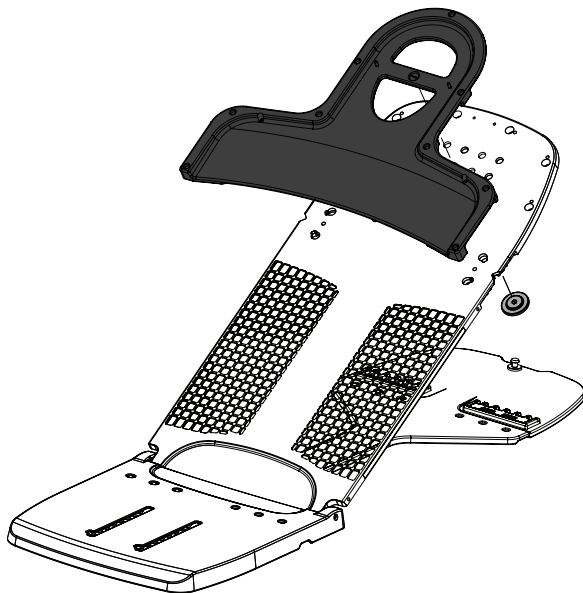


Fixer l'adaptateur de masque Portrait™ à l'Access™ Supine via le trou 3, 8, 13, 18 ou 22.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AJUSTER SI BESOIN POUR EMPÊCHER TOUT MOUVEMENT

Tourner pour serrer

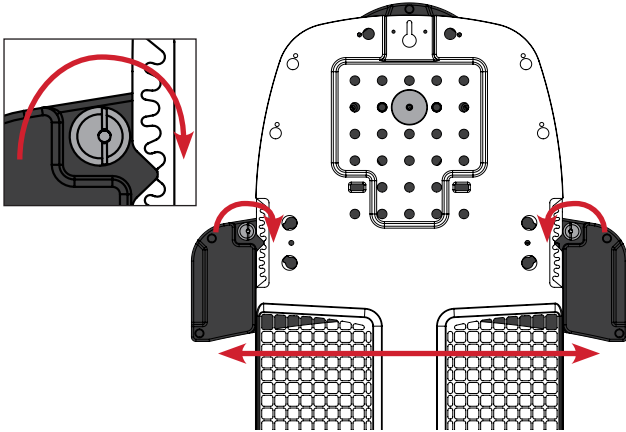



Verrouillé

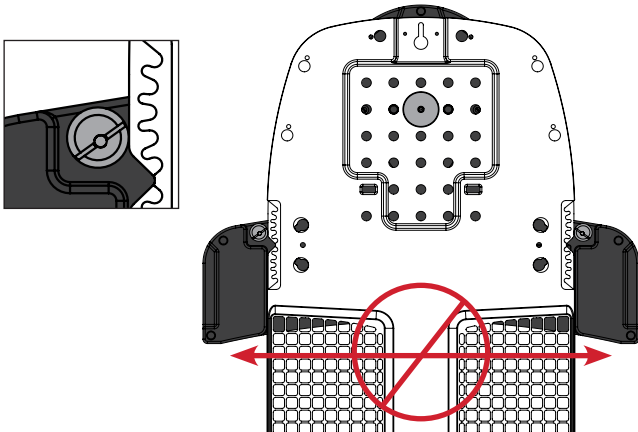



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT

Tête seule

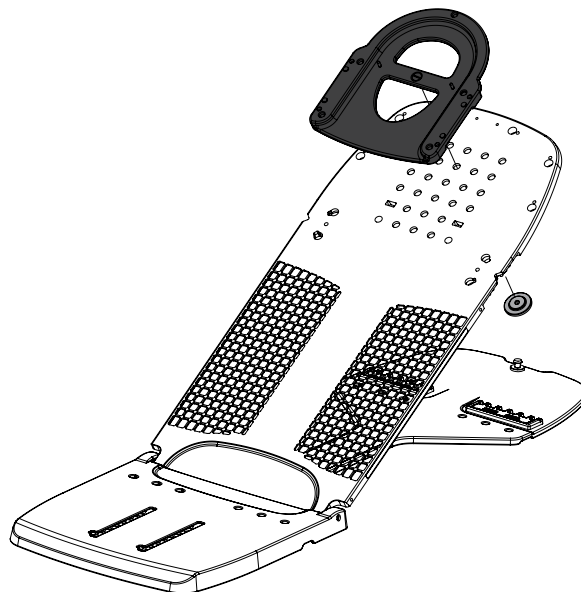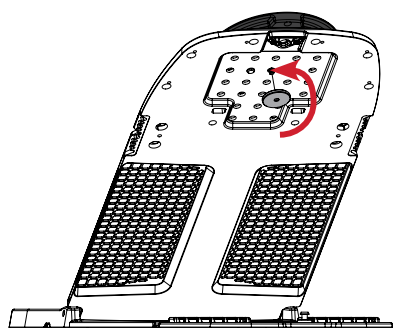

Tête et épaules

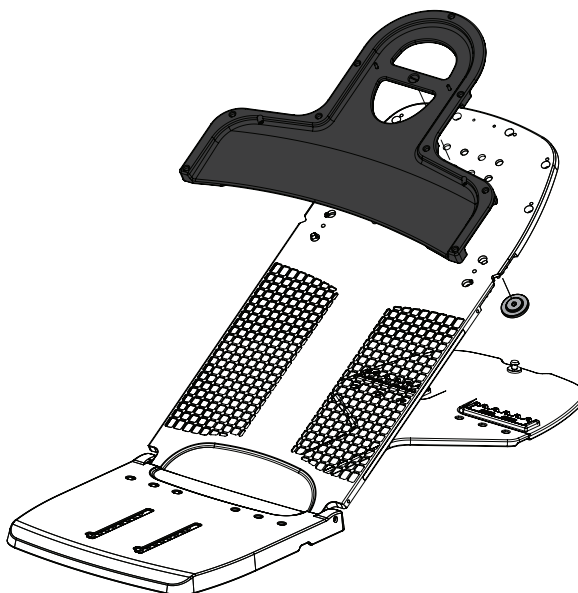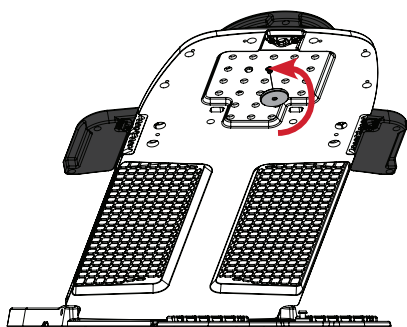


INSTRUCTIONS D'UTILISATION


INSTALLATION

Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™


Étape 1

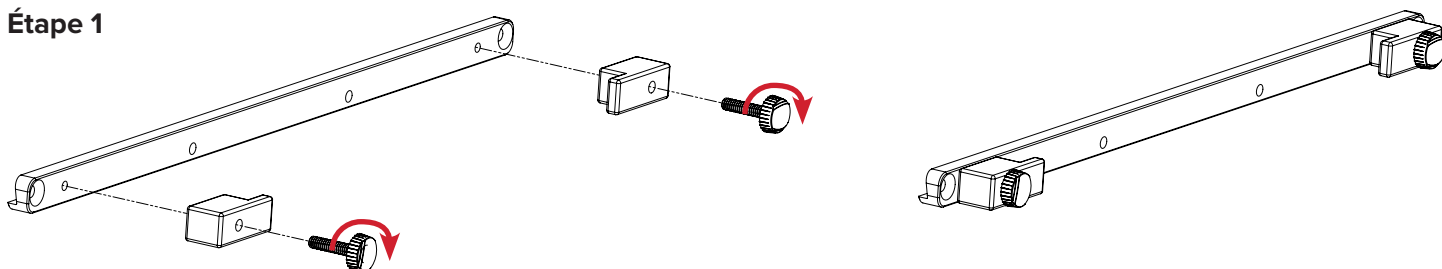

Étape 2

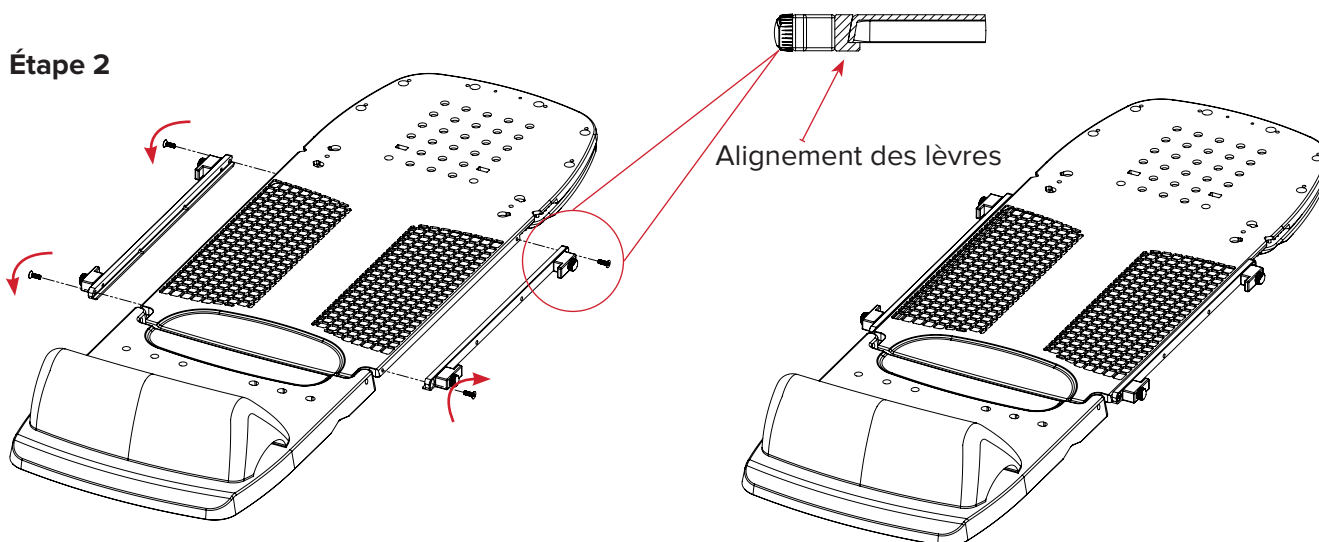

Étape 3

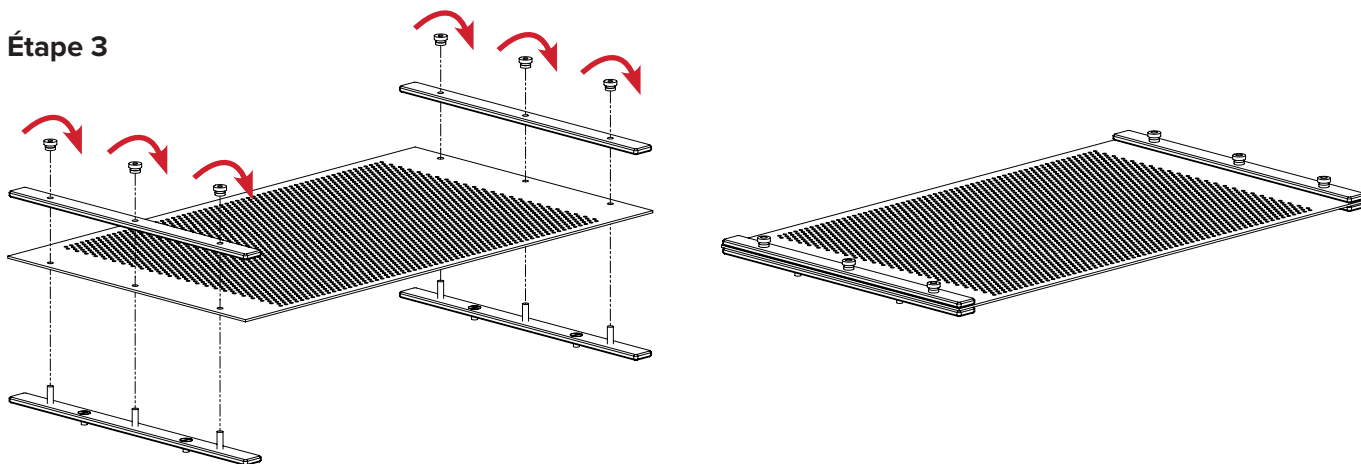

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION


Étape 4

Installer le patient sur le dispositif mammaire Access Supine.

! REMARQUE ! Consulter le guide produit et le manuel de l'utilisateur de l'Access Supine (réf. 2004394) pour connaître les instructions d'utilisation, les caractéristiques du produit, les caractéristiques techniques, les avertissements, les mises en garde et les autres précautions générales liées à l'utilisation du dispositif mammaire Access Supine.

Ramollir le thermoplastique (RT-1783P3) avec les Opti-Handles attachées (RT-4454-14).

Suivre les étapes 4A, 4B, 4C et 4D des deux côtés du thermoplastique.

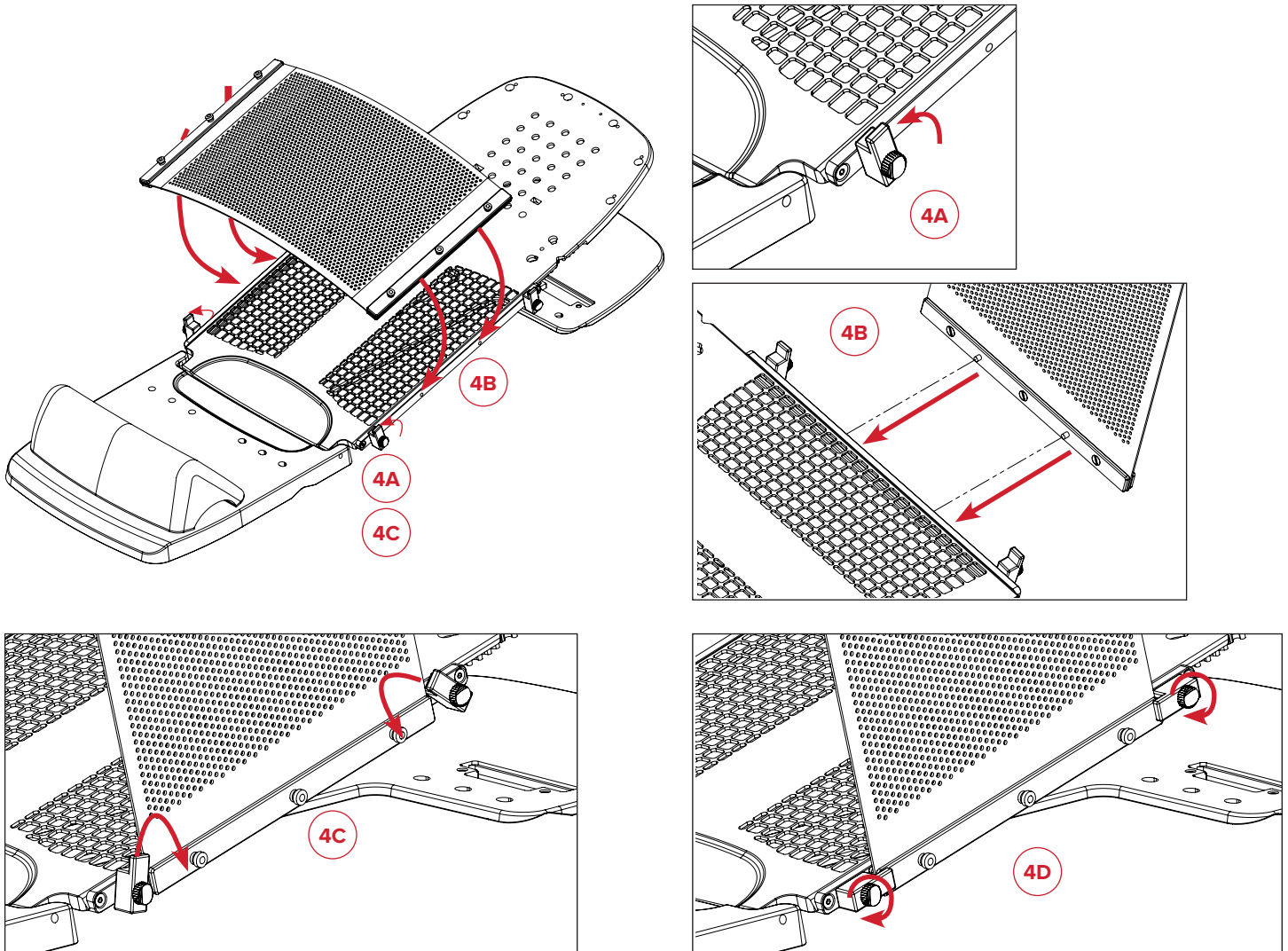

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT





Adaptateur thermoplastique Opti-Handle™

Étape 1

Suivre les étapes 1A, 1B et 1C des deux côtés du thermoplastique.

Retirer le patient du dispositif mammaire Access Supine.


! REMARQUE ! Consulter le guide produit et le manuel de l'utilisateur de l'Access Supine (réf. 2004394) pour connaître les instructions d'utilisation, les caractéristiques du produit, les caractéristiques techniques, les avertissements, les mises en garde et les autres précautions générales liées à l'utilisation du dispositif mammaire Access Supine.

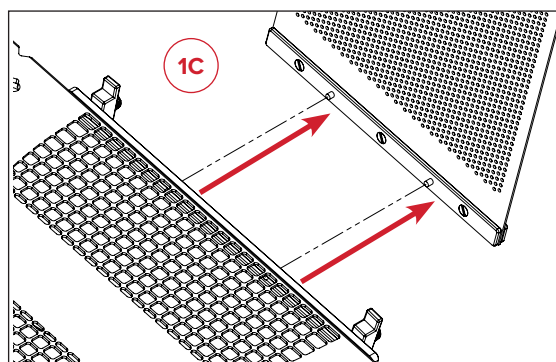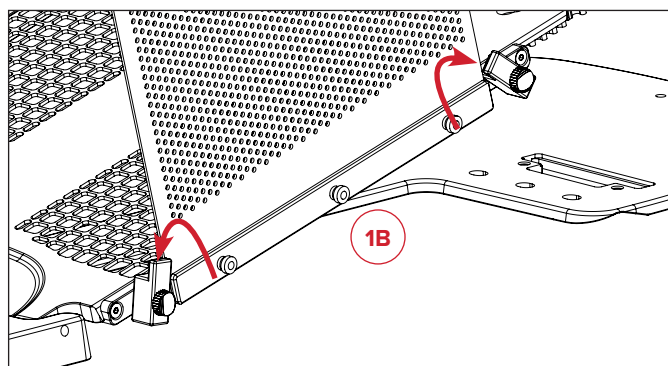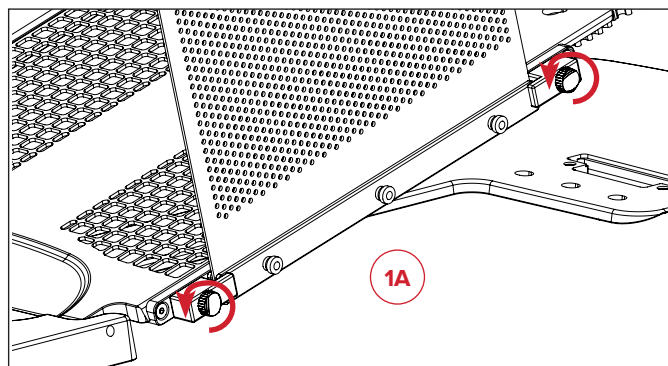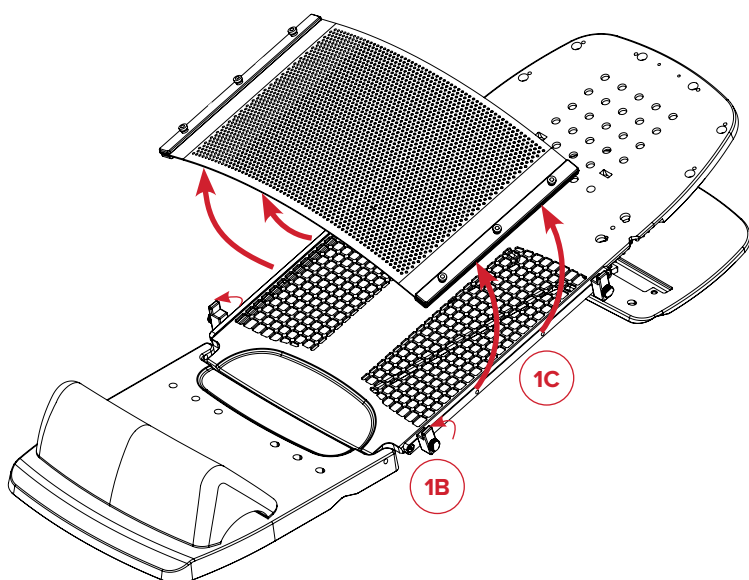



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

RETRAIT

Étape 2

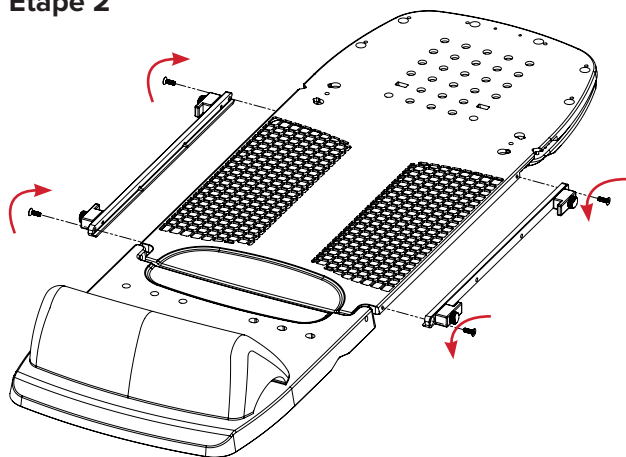

Étape 3

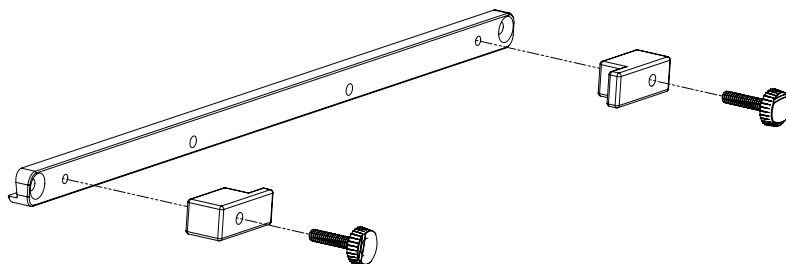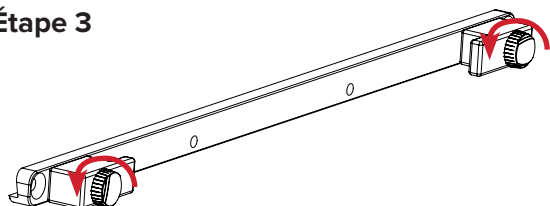

LISTE DES PIÈCES

RT-4546-03 ET RT-4546-04

Compatible avec les masques Portrait™ S Frame

RT-4546-05

Compatible avec RT-1783P3, feuille Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Compatible avec RT-4454-14, Opti-Handles 35,56 cm (14 pouces), jeu de 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_FR_A
2023-04