



VODIČ I KORISNIČKI PRIRUČNIK ZA PROIZVOD

RT-4546-03

Adapter za postavljanje maske samo za glavu Portrait™
na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine

RT-4546-04

Adapter za postavljanje maske za glavu i vrat Portrait™
na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine

RT-4546-05

Adapter za postavljanje termoplastične maske Opti-Handle™
na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

OPĆE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NISU DOPUŠTENE NIKAKVE PREINAKE OVE OPREME. AKO BILO KOJI DIO OVOG PROIZVODA BUDE IZLOŽEN OPTEREĆENJU KOJE UZROKUJE KVAR, DOIMA SE OŠTEĆENIM ILI NEPRAVILNO RADI, SMJESTA GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI I OBRATITE SE DRUŠTVU CQ MEDICAL NA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

PRIGUŠENJE TERAPIJSKOG SNOPA

Terapija kroz bilo koji proizvod uzrokovat će povećanje kožne doze. Termoplastične maske prigušit će radioterapijski snop i povećati kožnu dozu. Prigušenje i povećanu kožnu dozu treba uzeti u obzir prilikom planiranja i izvođenja terapije.

INFORMACIJE O SIGURNOSTI U OKRUŽENJU MAGNETSKE REZONANCIJE

MR Nekliničko ispitivanje pokazalo je da su **RT-4546-04 adapter za postavljanje maske za glavu i vrat Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine**, **RT-4546-03 adapter za postavljanje maske samo za glavu Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** i **RT-4546-05 adapter za postavljanje termoplastične maske Opti-Handle™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** sigurni za snimanje magnetskom rezonancijom. **RT-4546-04 adapter za postavljanje maske za glavu i vrat Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine**, **RT-4546-03 adapter za postavljanje maske samo za glavu Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** i **RT-4546-05 adapter za postavljanje termoplastične maske Opti-Handle™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** mogu se koristiti u okruženju magnetske rezonancije.

- **RT-4546-04 adapter za postavljanje maske za glavu i vrat Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine**, **RT-4546-03 adapter za postavljanje maske samo za glavu Portrait™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** i **RT-4546-05 adapter za postavljanje termoplastične maske Opti-Handle™ na ležaj za tretiranje dojki Access™ Supine** upotrebljavaju s verzijom ležaja Access™ Supine (**RT-4546MRI**) koji je siguran za snimanje magnetskom rezonancijom moraju se upotrijebiti u skladu s namjeravanom uporabom prije snimanja.
- **Verzija ležaja Access™ Supine (RT-4546MRI)** sigurna za snimanje magnetskom rezonancijom jasno je označena sljedećim simbolom:



OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihove definicije potražite na web-mjestu www.CQmedical.com.





SIGURNO ZA SNIMANJE MAGNETSKOM REZONANCIJOM

Predmet koji ne predstavlja poznatu opasnost uslijed izlaganja okruženju magnetske rezonancije. Predmeti sigurni za snimanje magnetskom rezonancijom sastavljeni su od materijala koji nisu električno provodljivi, metalni ni magnetni.




UPUTE ZA UPORABU

POSTAVLJANJE

Samo glava

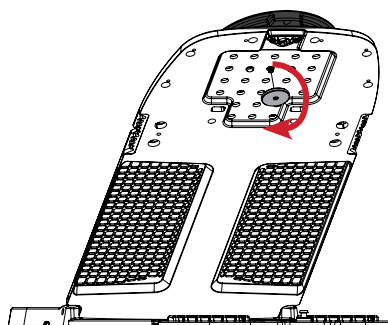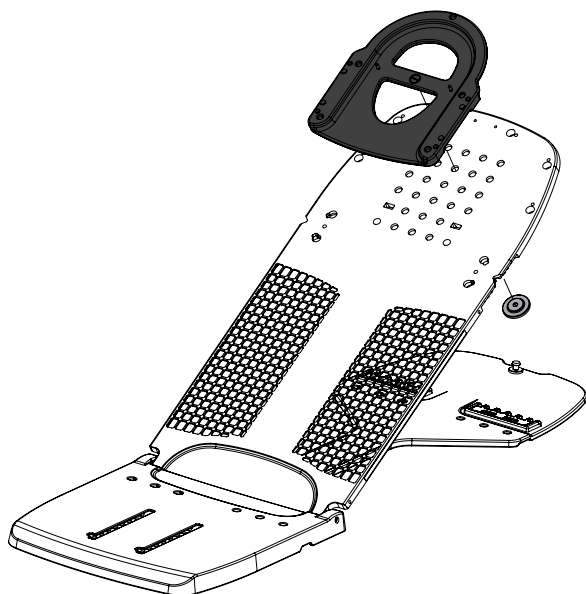

Glava i ramena

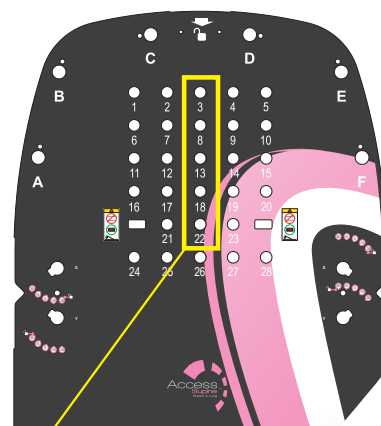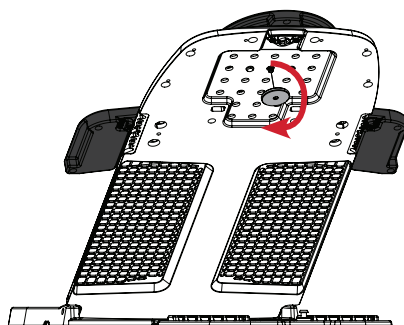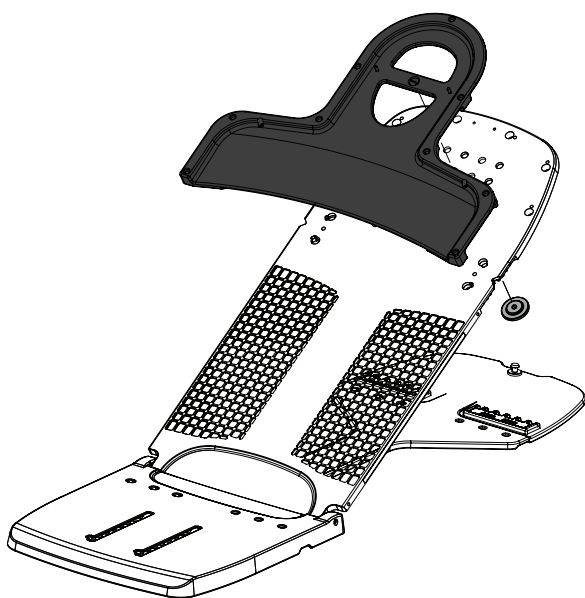


Pričvrstite adapter za masku Portrait™ na ležaj Access™ Supine koristeći otvor 3, 8, 13, 18 ili 22.


UPUTE ZA UPORABU

PO POTREBI PODESITE DA BISTE SPRIJEČILI POMICANJE

Zategnite okretanjem

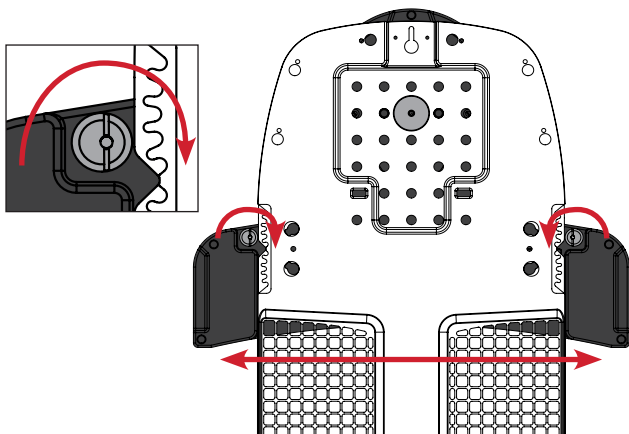



Zaključano

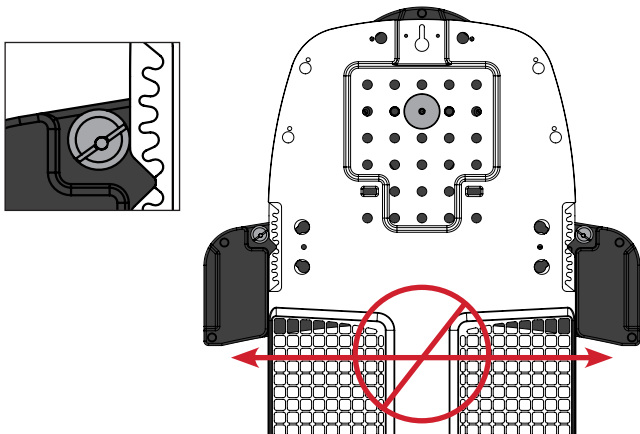



UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

Samo glava

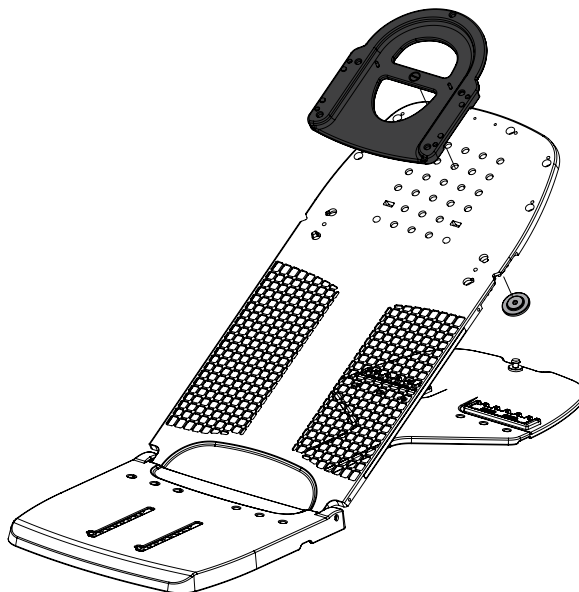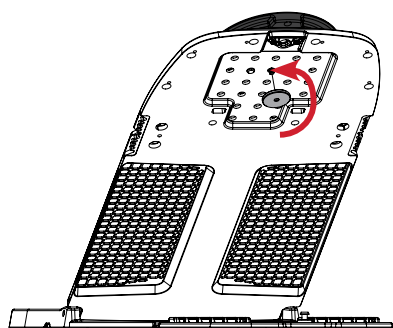

Glava i ramena

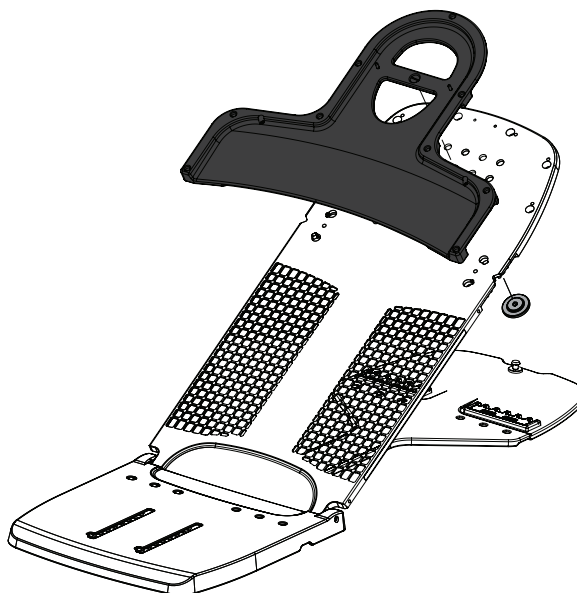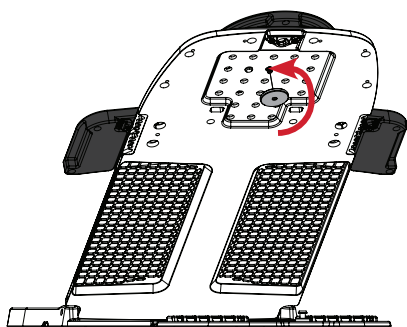


UPUTE ZA UPORABU


POSTAVLJANJE

Adapter za termoplastičnu masku Opti-Handle™


1. korak

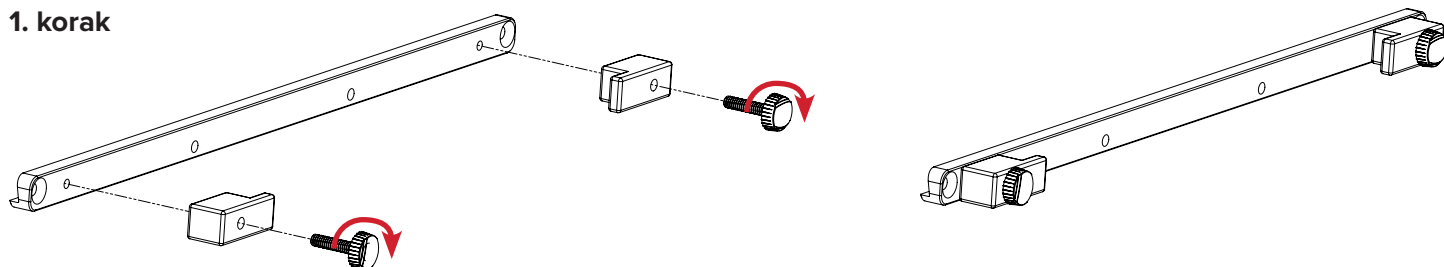

2. korak

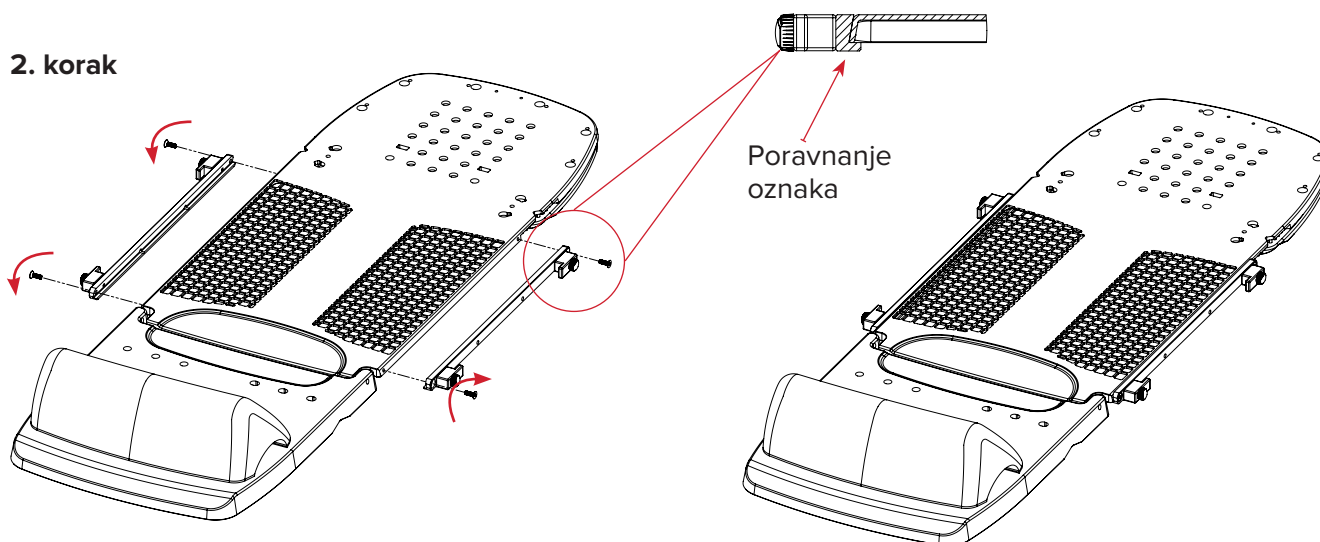

3. korak

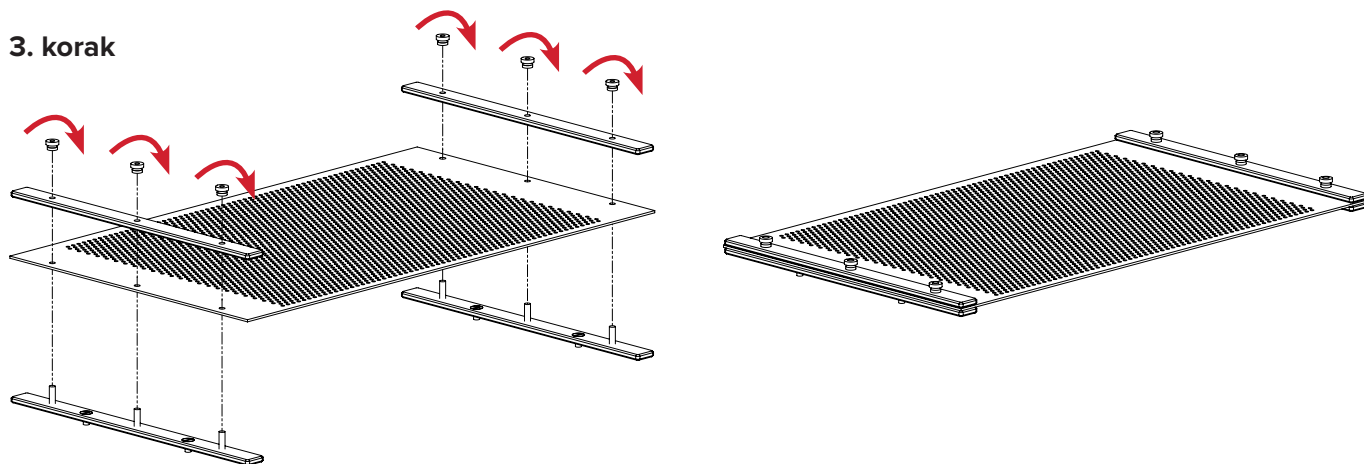

UPUTE ZA UPORABU

POSTAVLJANJE


4. korak

Postavite pacijenta na ležaj za tretiranje dojki Access Supine.

! NAPOMENA ! Upute za uporabu, značajke proizvoda, specifikacije, upozorenja, mjere opreza i druge opće mjere predostrožnosti u vezi s upotrebom ležaja za tretiranje dojki Access Supine potražite u vodiču i korisničkom priručniku za ležaj Access Supine (P/N 2004394).

Omekšajte termoplastični list (RT-1783P3) s pričvršćenim ručkama Opti-Handles (RT-4454-14).

Dovršite korake 4A, 4B, 4C i 4D s obje strane termoplastičnog lista.

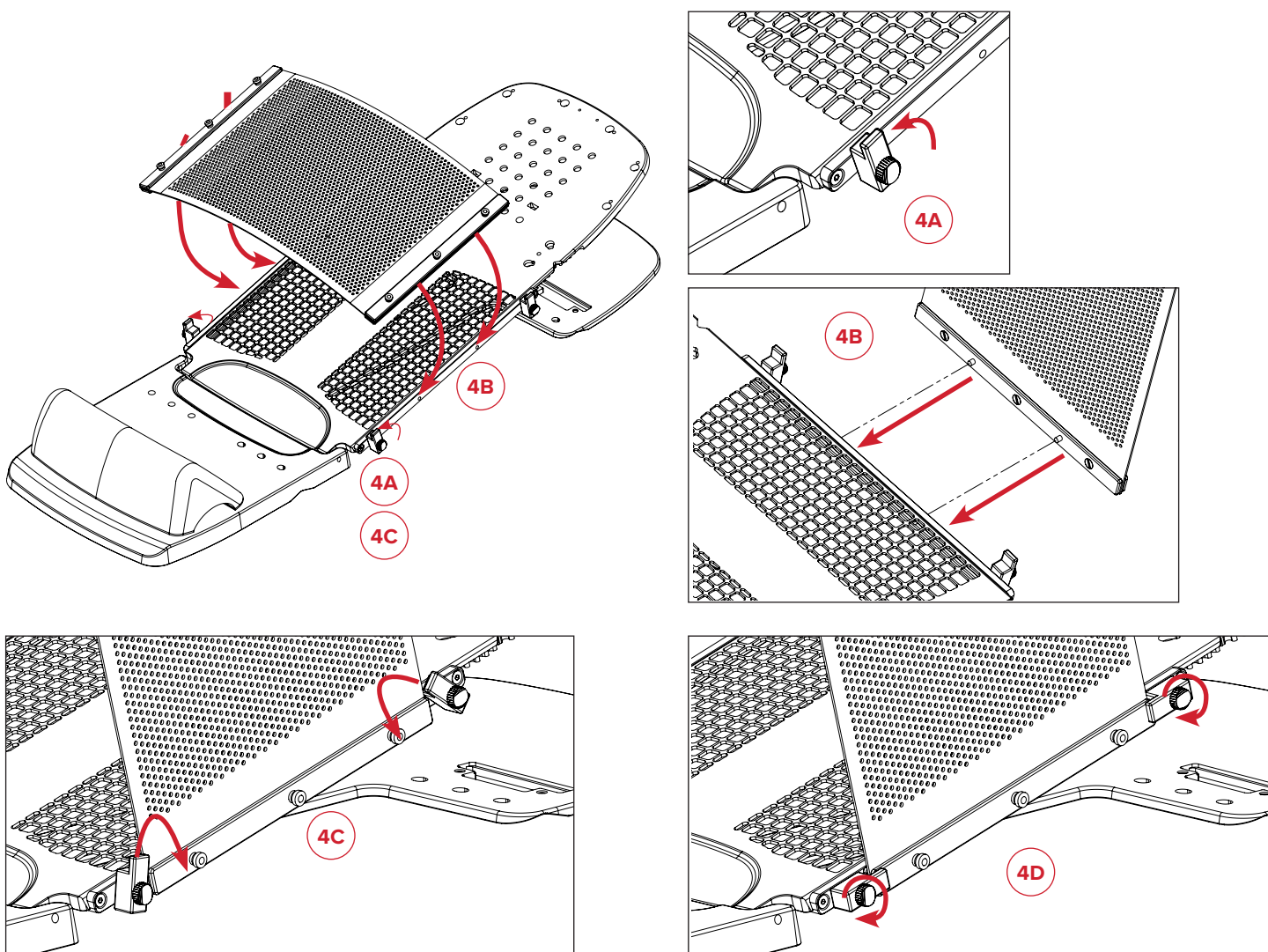

UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE





Adapter za termoplastičnu masku Opti-Handle™

1. korak

Dovršite korake 1A, 1B i 1C s obje strane termoplastičnog lista.

Maknite pacijenta s ležaja za tretiranje dojki Access Supine.


! NAPOMENA ! Upute za uporabu, značajke proizvoda, specifikacije, upozorenja, mjere opreza i druge opće mjere predostrožnosti u vezi s upotrebom ležaja za tretiranje dojki Access Supine potražite u vodiču i korisničkom priručniku za ležaj Access Supine (P/N 2004394).

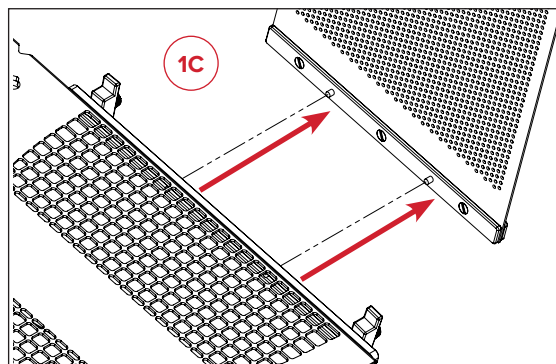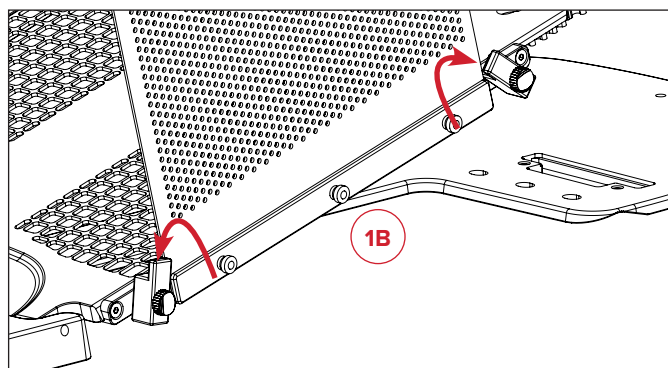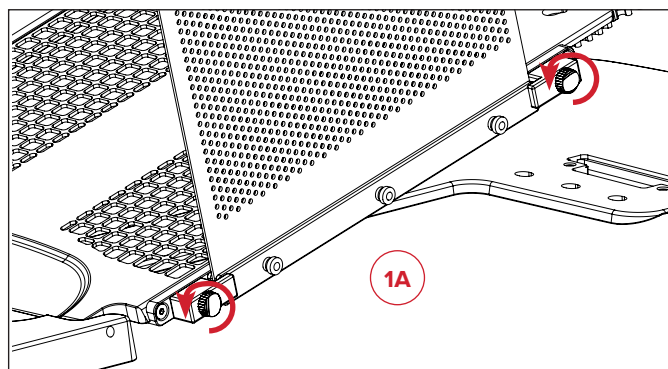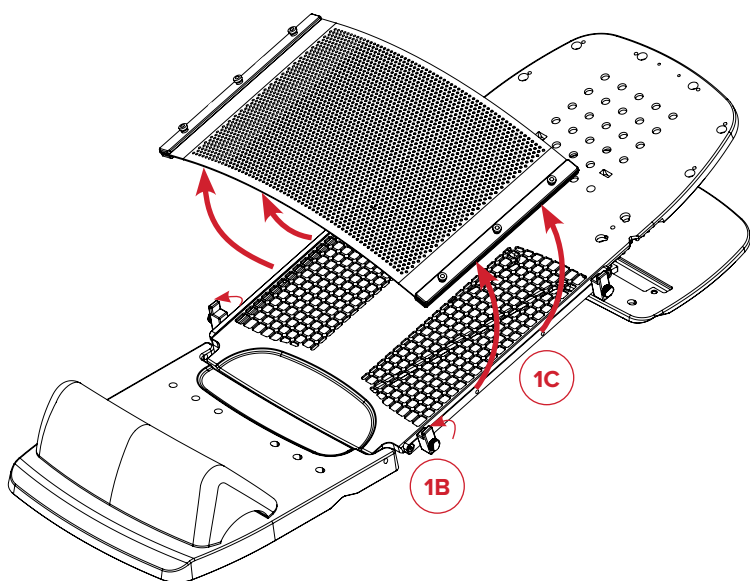



UPUTE ZA UPORABU

UKLANJANJE

2. korak

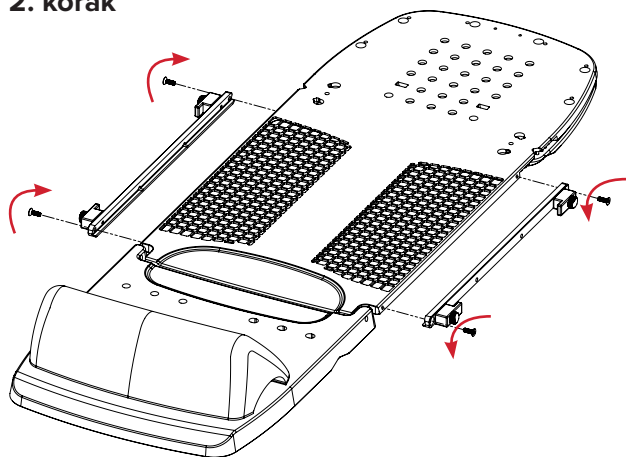

3. korak

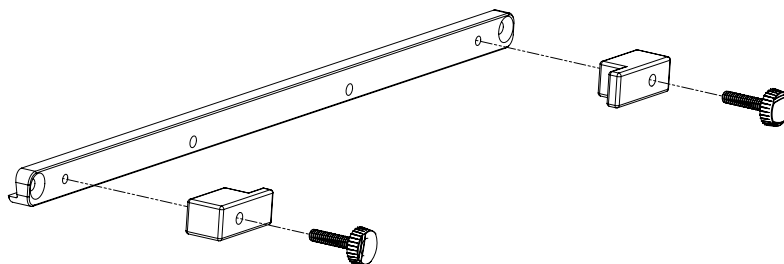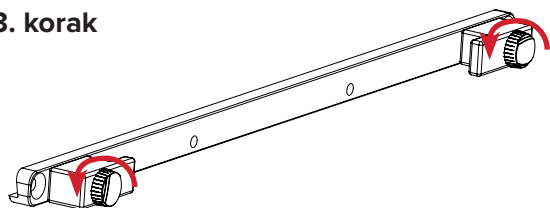

POPIS DIJELOVA

RT-4546-03 I RT-4546-04

Kompatibilno s maskama S-okvira Portrait™

RT-4546-05

Kompatibilno s RT-1783P3 listom Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, s perforacijom

Kompatibilno s RT-4454-14 ručkama Opti-Handles, 35,56 cm (14 inča), komplet od 2



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com