



PANDUAN PRODUK & BUKU PANDUAN PENGGUNA

RT-4546-03

Adaptor Masker Khusus Kepala Portrait™ untuk
Perangkat Payudara Access™ Supine

RT-4546-04

Adaptor Masker Kepala & Leher Portrait™ untuk
Perangkat Payudara Access™ Supine

RT-4546-05

Adaptor Termoplastik Opti-Handle™ untuk
Perangkat Payudara Access™ Supine

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM

PERNYATAAN PERINGATAN

! PERINGATAN ! PERALATAN INI TIDAK BOLEH DIMODIFIKASI. JIKA BAGIAN APA PUN DARI PERANGKAT INI MENGALAMI BEBAN BERLEBIHAN, TERLIHAT RUSAK, ATAU TIDAK BERFUNGSI DENGAN BENAR, SEGERA HENTIKAN PENGGUNAAN DAN HUBUNGI CQ MEDICAL DI +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ATAU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ATENUASI BERKAS SINAR PERAWATAN

Perawatan melalui perangkat apa pun akan menyebabkan peningkatan dosis kulit. Masker termoplastik akan menyebabkan atenuasi berkas sinar radioterapi dan meningkatkan dosis kulit. Atenuasi dan peningkatan dosis kulit sebaiknya dipertimbangkan selama perencanaan dan perawatan.

INFORMASI KESELAMATAN MR

 Pengujian nonklinis telah menunjukkan bahwa **RT-4546-04 Adaptor Masker Kepala & Leher Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptor Masker Khusus Kepala Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, dan **RT-4546-05 Adaptor Termoplastik Opti-Handle™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine** bersifat MR Aman. **RT-4546-04 Adaptor Masker Kepala & Leher Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptor Masker Khusus Kepala Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, dan **RT-4546-05 Adaptor Termoplastik Opti-Handle™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine** dapat digunakan dalam lingkungan MR.

- **RT-4546-04 Adaptor Masker Kepala & Leher Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, **RT-4546-03 Adaptor Masker Khusus Kepala Portrait™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine**, dan **RT-4546-05 Adaptor Termoplastik Opti-Handle™ untuk Perangkat Payudara Access™ Supine** harus digunakan dengan versi MR Aman dari Access™ Supine (RT-4546MRI) sesuai dengan tujuan penggunaannya sebelum pemindaian.
- **Versi MR Aman dari Access™ Supine (RT-4546MRI) diberi label yang jelas dengan simbol berikut:**



LABEL PERINGATAN & DESKRIPSI

Lihat www.CQmedical.com untuk daftar simbol dan definisinya.





MR AMAN

Item yang tidak menimbulkan bahaya yang diketahui akibat paparan terhadap lingkungan MR. Item MR Aman tersusun dari bahan yang nonkonduktif, nonlogam, dan nonmagnetik secara elektrik.




PETUNJUK PENGOPERASIAN

PENYIAPAN

Khusus Kepala

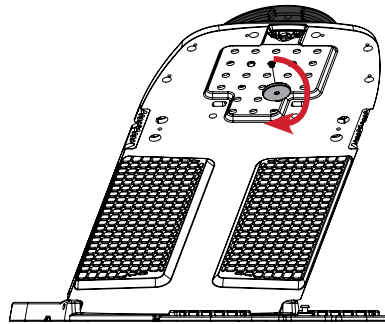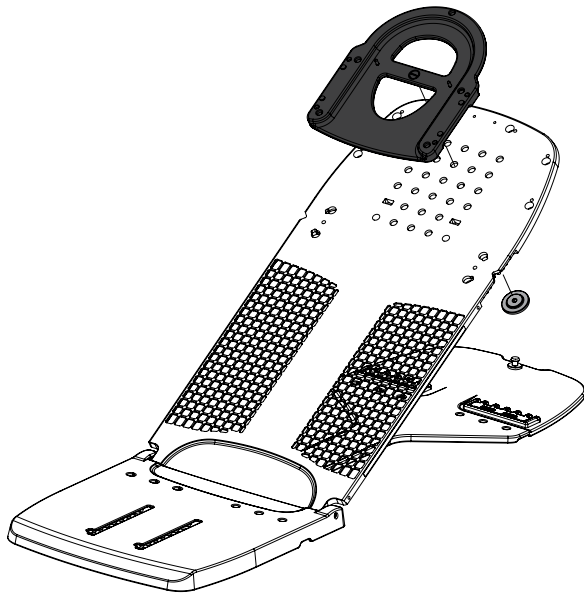

Kepala & Bahu

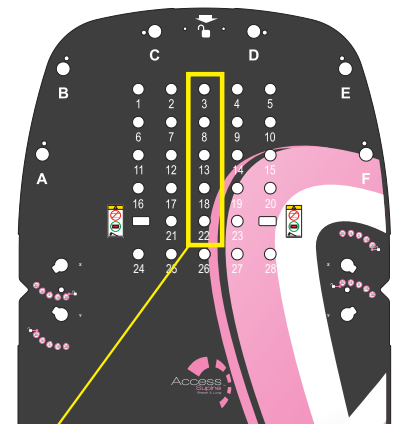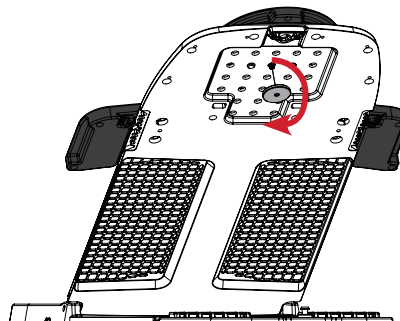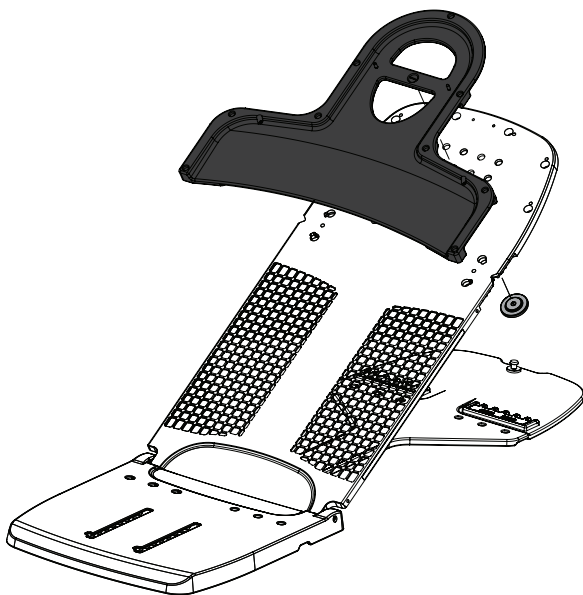


Kencangkan Adaptor Masker Portrait™ ke Access™ Supine menggunakan lubang 3, 8, 13, 18, atau 22.


PETUNJUK PENGOPERASIAN

SESUAIKAN SEPERLUNYA UNTUK MEMASTIKAN TIDAK ADA GERAKAN

Putar untuk
Mengencangkan

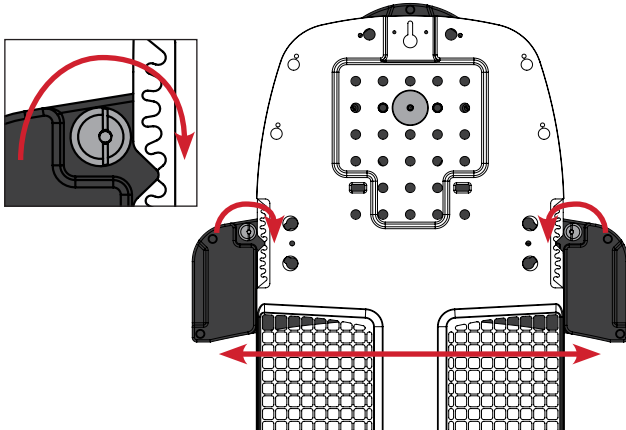



Terkunci

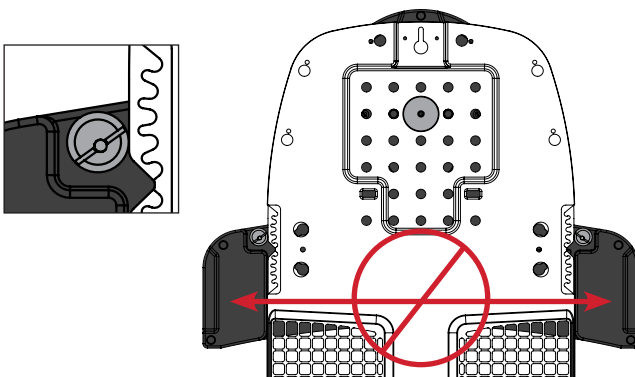



PETUNJUK PENGOPERASIAN

PELEPASAN

Khusus Kepala

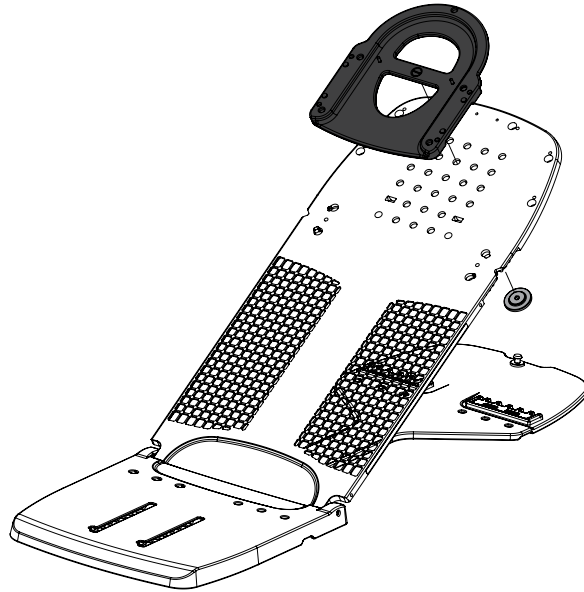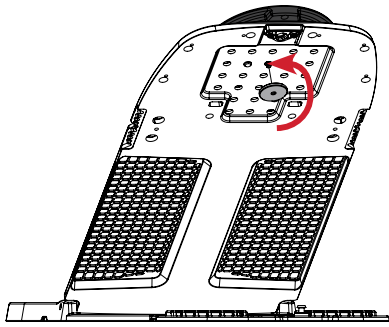

Kepala & Bahu

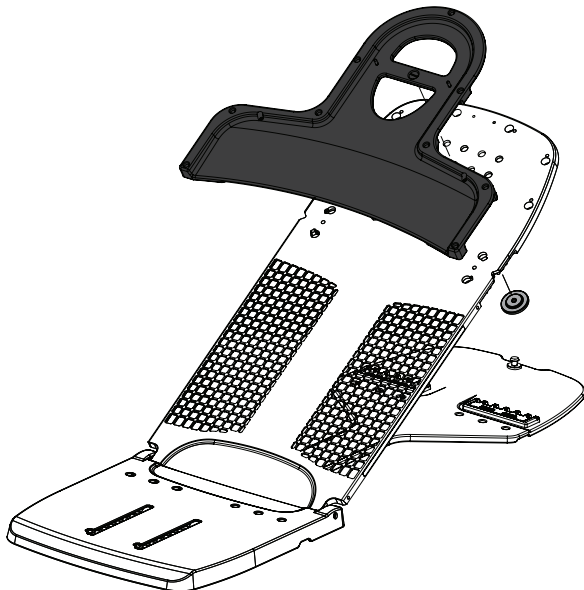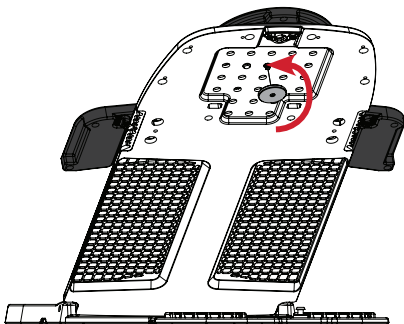


PETUNJUK PENGOPERASIAN


PENYIAPAN

Adaptor Termoplastik Opti-Handle™


Langkah 1

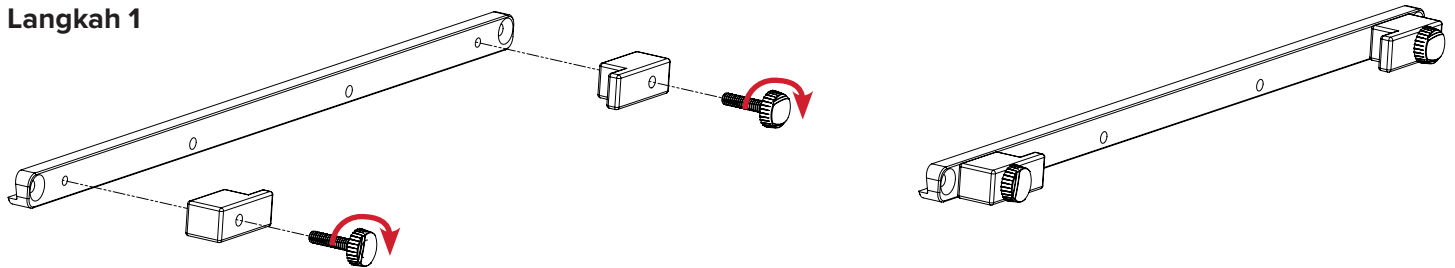

Langkah 2

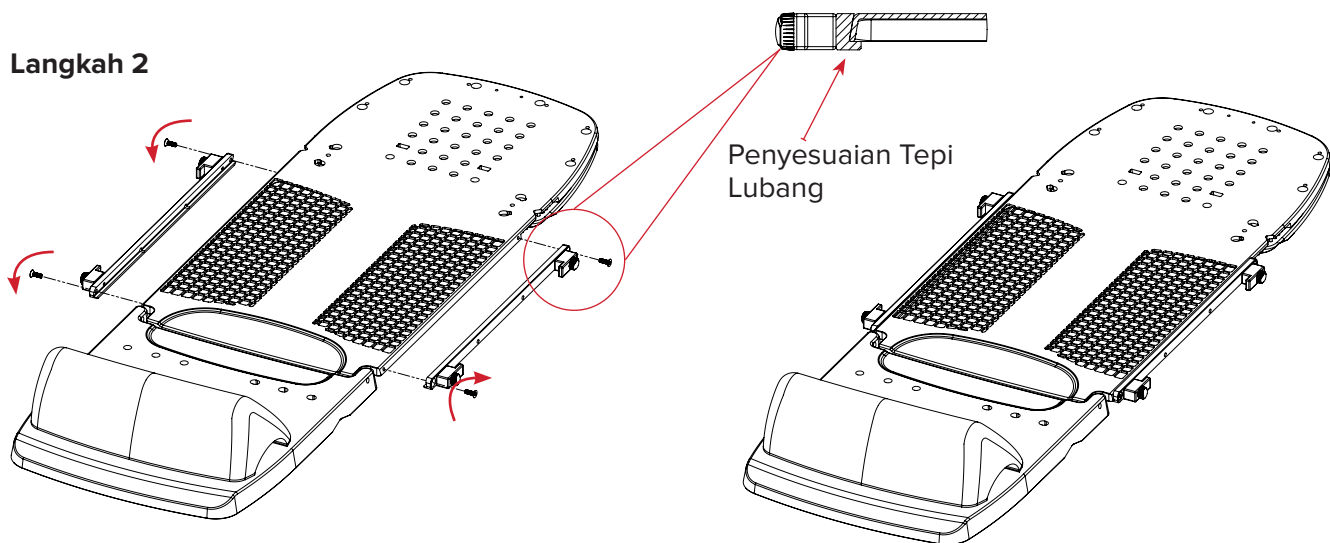

Langkah 3

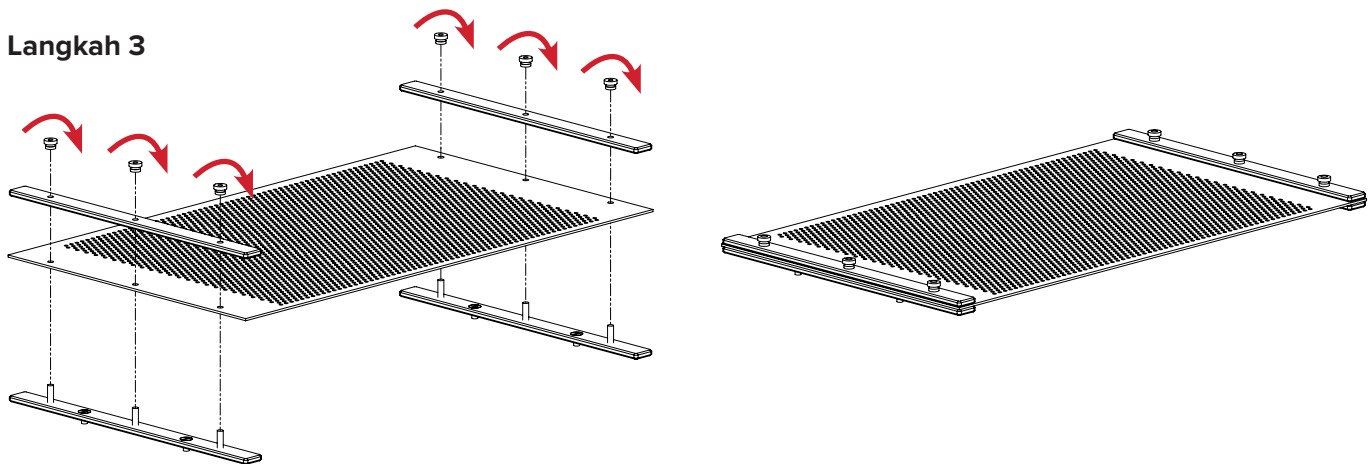

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PENYIAPAN


Langkah 4

Siapkan Pasien pada Perangkat Payudara Access Supine.

! CATATAN ! Lihat Panduan Produk dan Buku Panduan Pengguna untuk Access Supine (P/N 2004394) untuk mengetahui petunjuk pengoperasian, fitur produk, spesifikasi, peringatan, perhatian, dan tindakan pencegahan umum lainnya terkait dengan penggunaan Perangkat Payudara Access Supine.

Lunakkan termoplastik (RT-1783P3) dengan Opti-Handle terpasang (RT-4454-14).

Selesaikan langkah 4A, 4B, 4C, dan 4D di kedua sisi termoplastik.

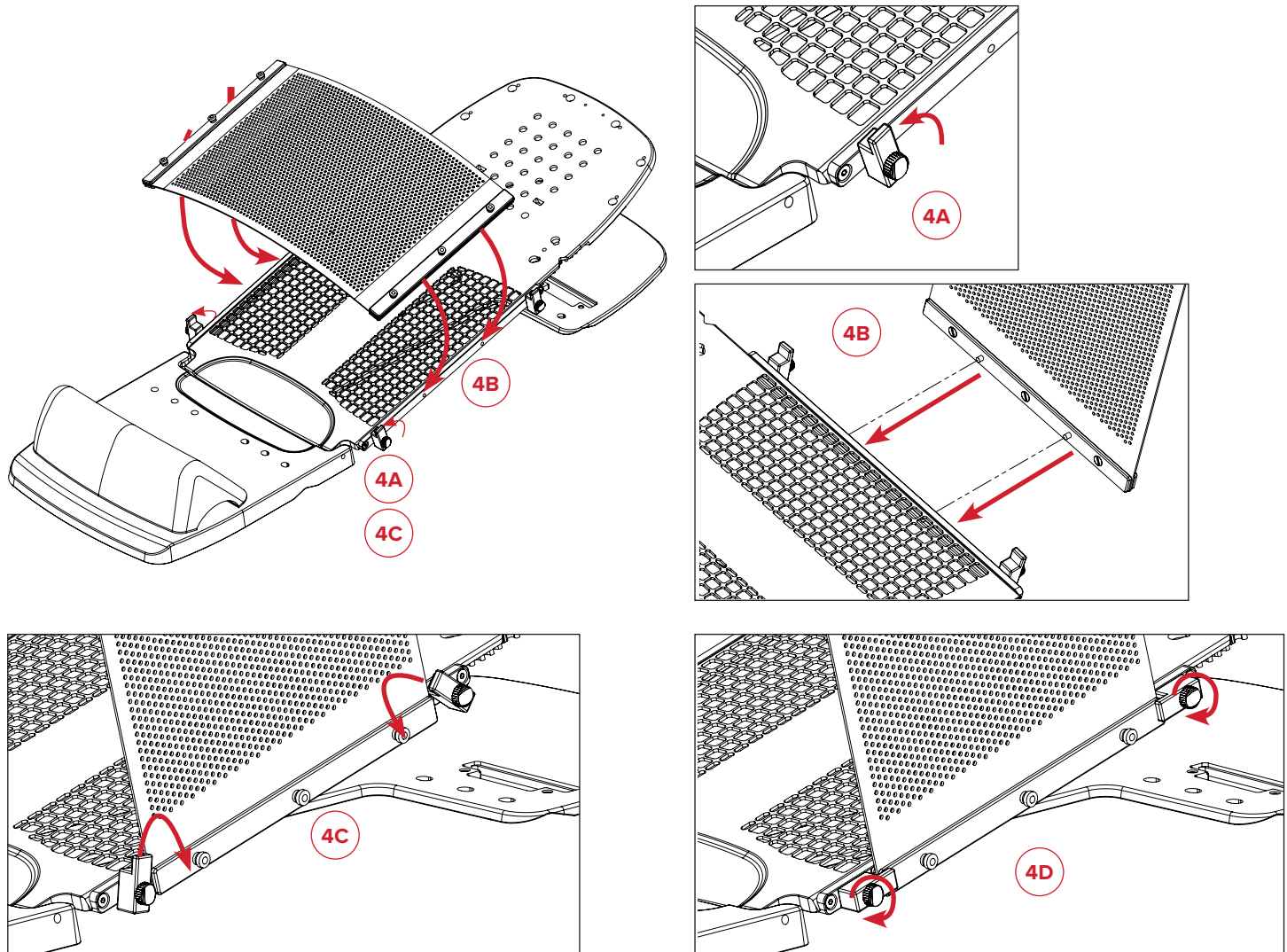

PETUNJUK PENGOPERASIAN

PELEPASAN





Adaptor Termoplastik Opti-Handle™

Langkah 1

Selesaikan langkah 1A, 1B, dan 1C di kedua sisi termoplastik.

Pindahkan Pasien dari Perangkat Payudara Access Supine.


! CATATAN ! Lihat Panduan Produk dan Buku Panduan Pengguna untuk Access Supine (P/N 2004394) untuk mengetahui petunjuk pengoperasian, fitur produk, spesifikasi, peringatan, perhatian, dan tindakan pencegahan umum lainnya terkait dengan penggunaan Perangkat Payudara Access Supine.

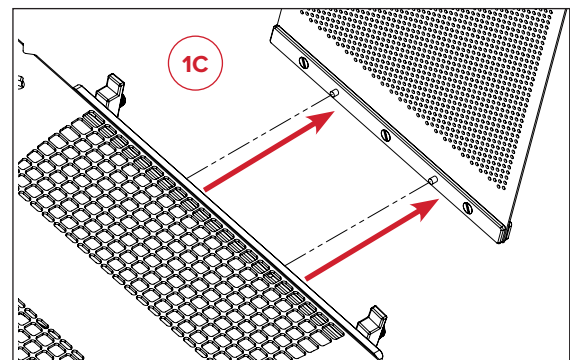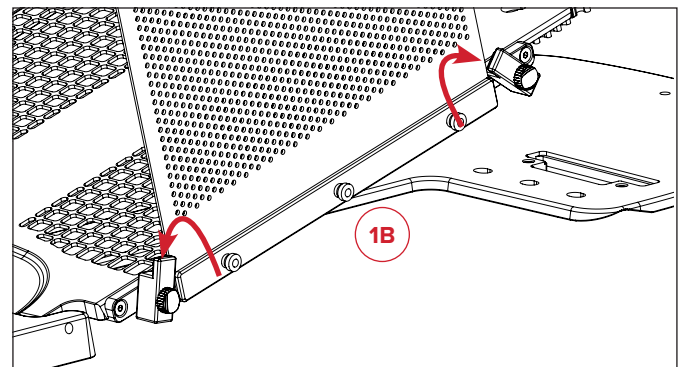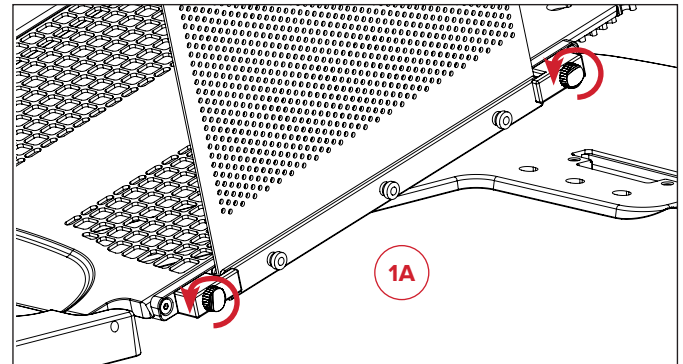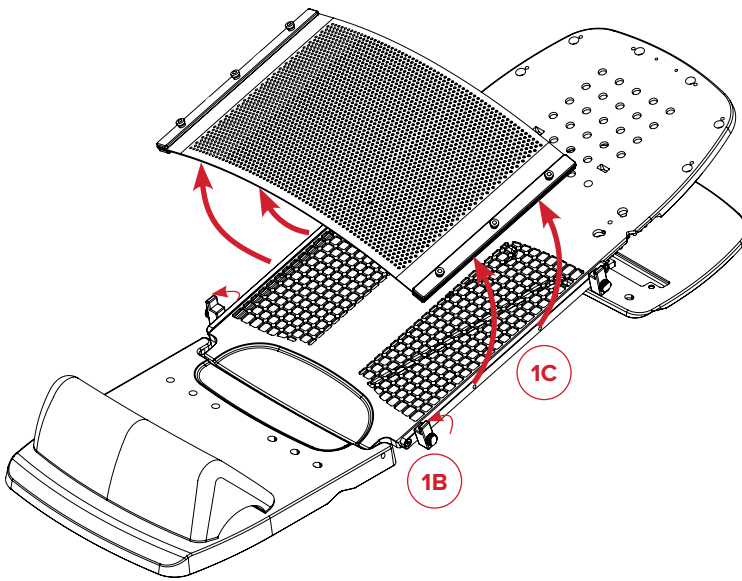



PETUNJUK PENGOPERASIAN

PELEPASAN

Langkah 2

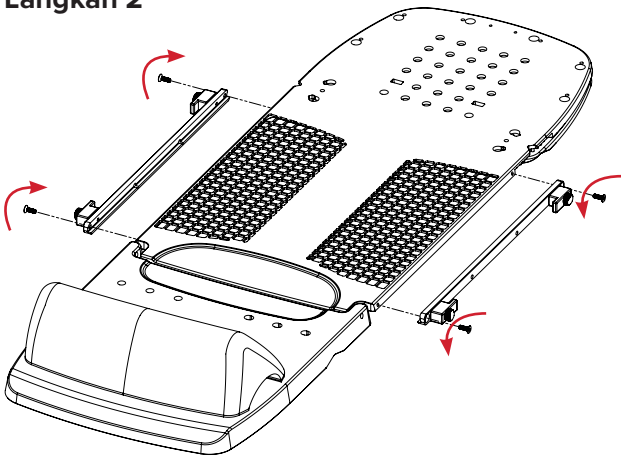

Langkah 3

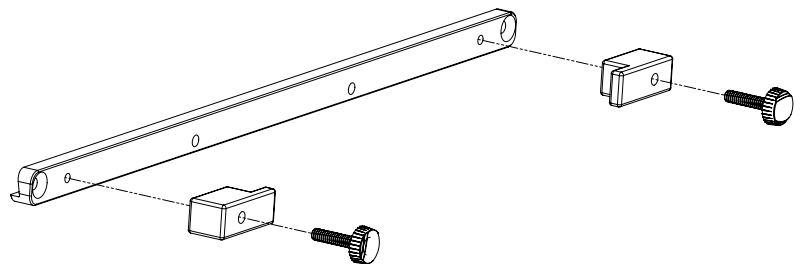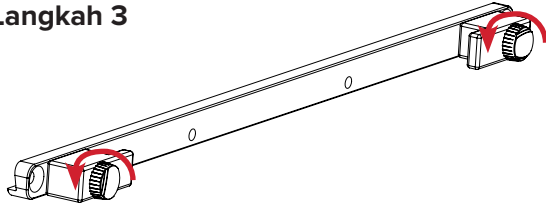

DAFTAR KOMPONEN

RT-4546-03 & RT-4546-04

Kompatibel dengan Masker Rangka S Portrait™

RT-4546-05

Kompatibel dengan RT-1783P3, Lembaran Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Kompatibel dengan RT-4454-14, Opti-Handle 35,56 cm (14 inci), set isi 2



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com