



GUIDA DEL PRODOTTO E MANUALE D'USO

RT-4546-03

Adattatore maschera solo testa Portrait™ per
dispositivo per mammella Access™ Supine

RT-4546-04

Adattatore maschera testa e collo Portrait™ per
dispositivo per mammella Access™ Supine

RT-4546-05

Adattatore termoplastico Opti-Handle™ per
dispositivo per mammella Access™ Supine

PRECAUZIONI GENERALI

AVVERTENZE

! AVVERTENZA ! NON È CONSENTITA ALCUNA MODIFICA DI QUESTA APPARECCHIATURA. SE UNA QUALSIASI PARTE DEL DISPOSITIVO È SOTTOPOSTA A CARICHI ESTREMI, APPARE DANNEGGIATA O FUNZIONA IN MODO ERRATO, INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'USO E CONTATTARE QFIX AL NUMERO +1 484-720-6054 O ALL'INDIRIZZO TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ATTENUAZIONE DEL FASCIO DI TRATTAMENTO

Il trattamento attraverso qualsiasi dispositivo determina un aumento della dose cutanea. Le maschere termoplastiche attenuano il fascio radioterapico e aumentano la dose cutanea. L'attenuazione del fascio e l'aumento della dose cutanea devono essere presi in considerazione durante la pianificazione e il trattamento.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RM

 Test non clinici hanno dimostrato che l'adattatore per maschera testa e collo Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-04, l'adattatore per maschera solo testa Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-03 e l'adattatore termoplastico Opti-Handle™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-05 sono compatibili con la RM. L'adattatore per maschera testa e collo Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-04, l'adattatore per maschera solo testa Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-03 e l'adattatore termoplastico Opti-Handle™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-05 possono essere usati in un ambiente RM.

- L'adattatore per maschera testa e collo Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-04, l'adattatore per maschera solo testa Portrait™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-03 e l'adattatore termoplastico Opti-Handle™ per dispositivo per mammella Access™ Supine RT-4546-05 devono essere utilizzati con la versione compatibile con RM di Access™ Supine (RT-4546MRI) in conformità all'uso previsto prima della scansione.
- La versione compatibile con la RM di Access™ Supine (RT-4546MRI) è chiaramente etichettata con il seguente simbolo: 

ETICHETTE DI AVVERTENZA E DESCRIZIONI

Consultare Qfix.com per un elenco dei simboli e le relative definizioni.





COMPATIBILE CON LA RM

Un elemento che non rappresenta pericoli noti derivanti dall'esposizione a un ambiente RM. Gli elementi compatibili con la RM sono composti da materiali elettricamente non conduttivi, non metallici e non magnetici.




ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO

Solo testa

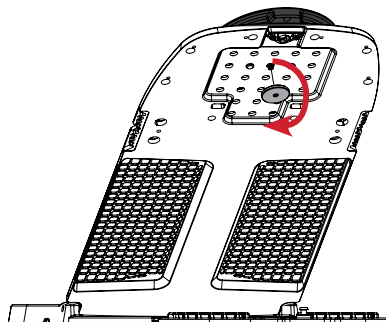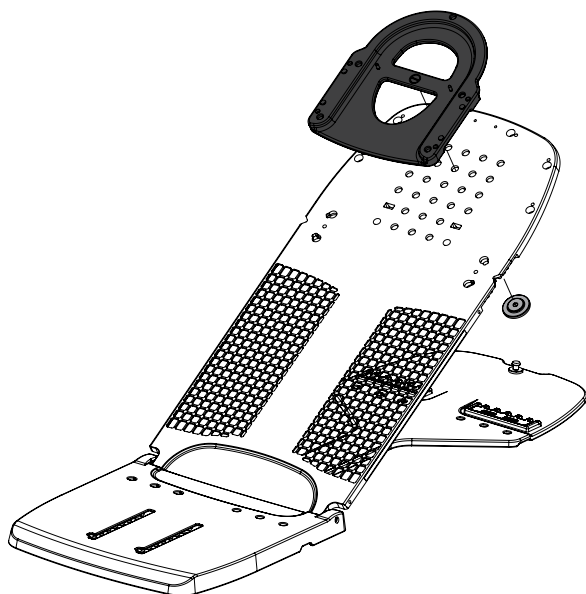

Testa e spalle

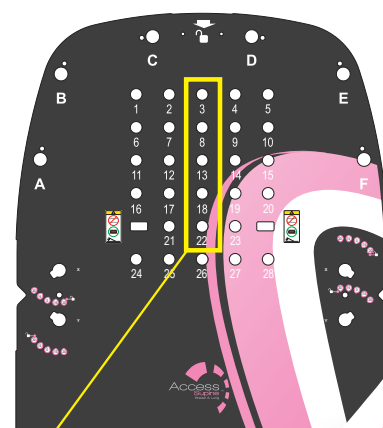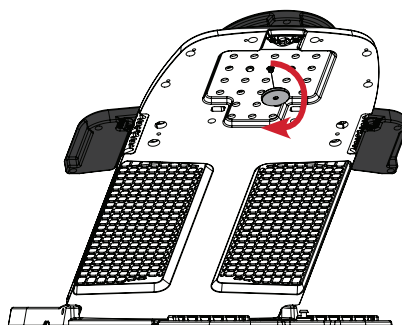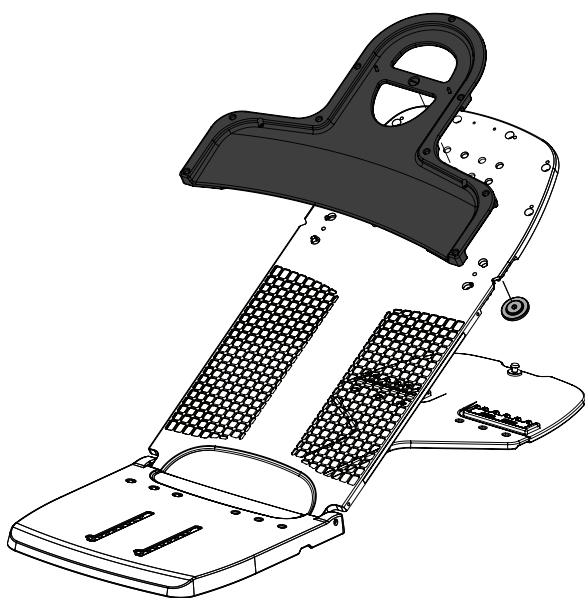


Fissare l'adattatore per maschera Portrait™ all'Access™ Supine utilizzando i fori 3, 8, 13, 18 o 22.


ISTRUZIONI PER L'USO

REGOLARE SE NECESSARIO PER ELIMINARE IL MOVIMENTO

Ruotare per serrare

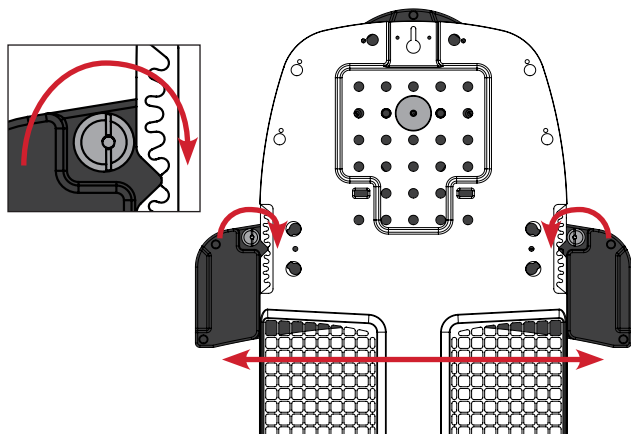



Bloccato

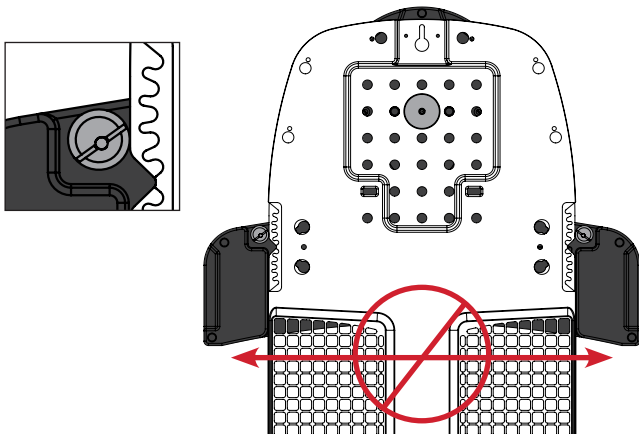



ISTRUZIONI PER L'USO

RIMOZIONE

Solo testa

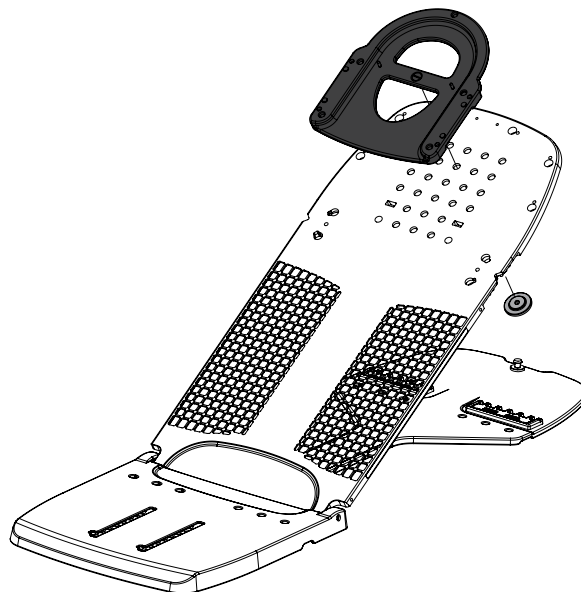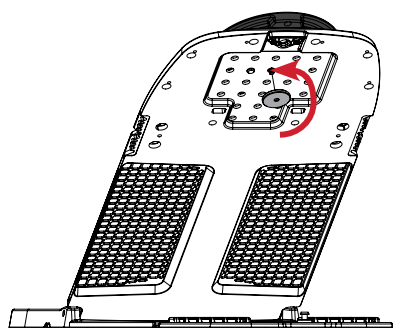

Testa e spalle

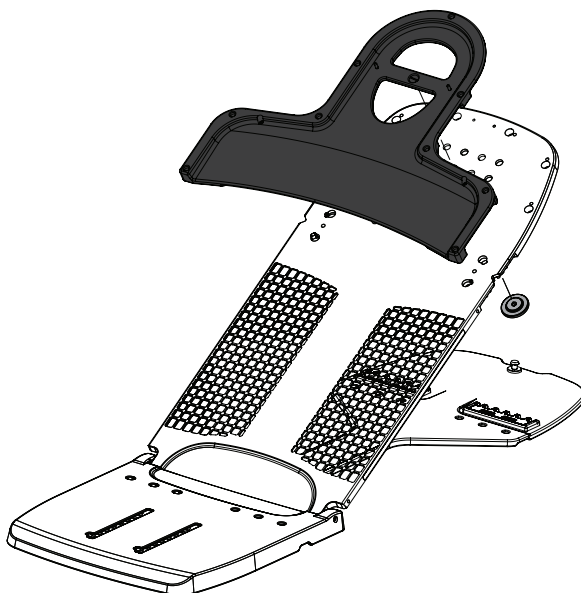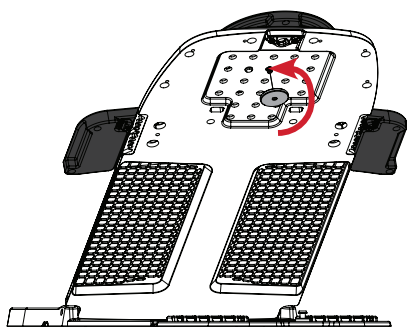


ISTRUZIONI PER L'USO


APPRONTAMENTO

Adattatore termoplastico Opti-Handle™


Passaggio 1

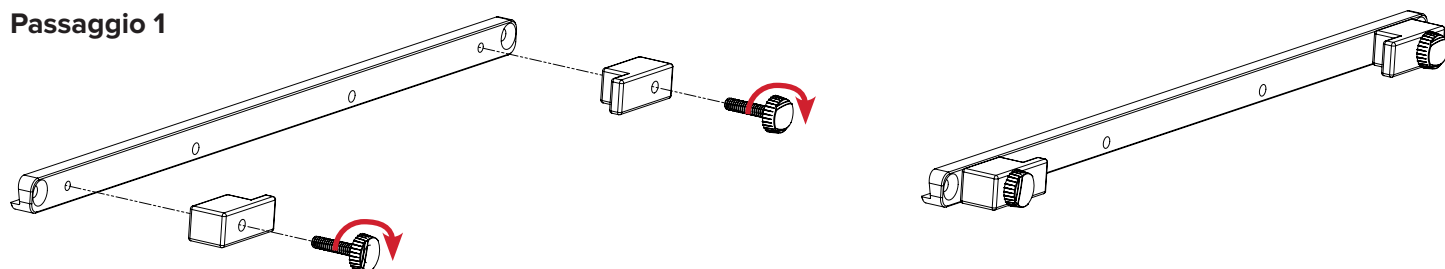

Passaggio 2

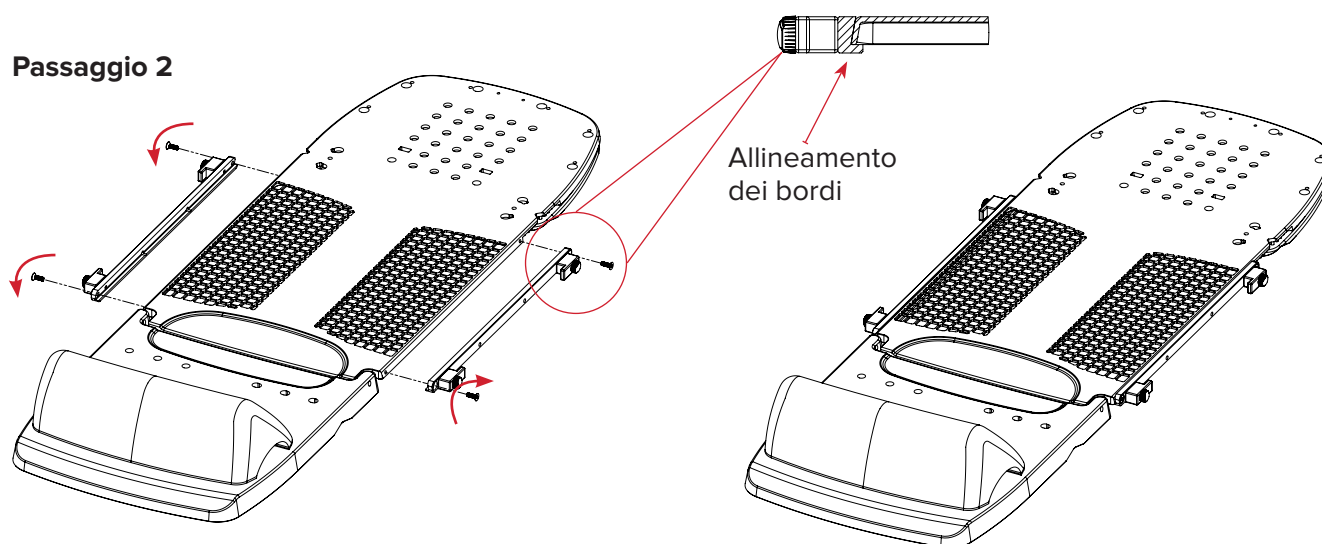

Passaggio 3

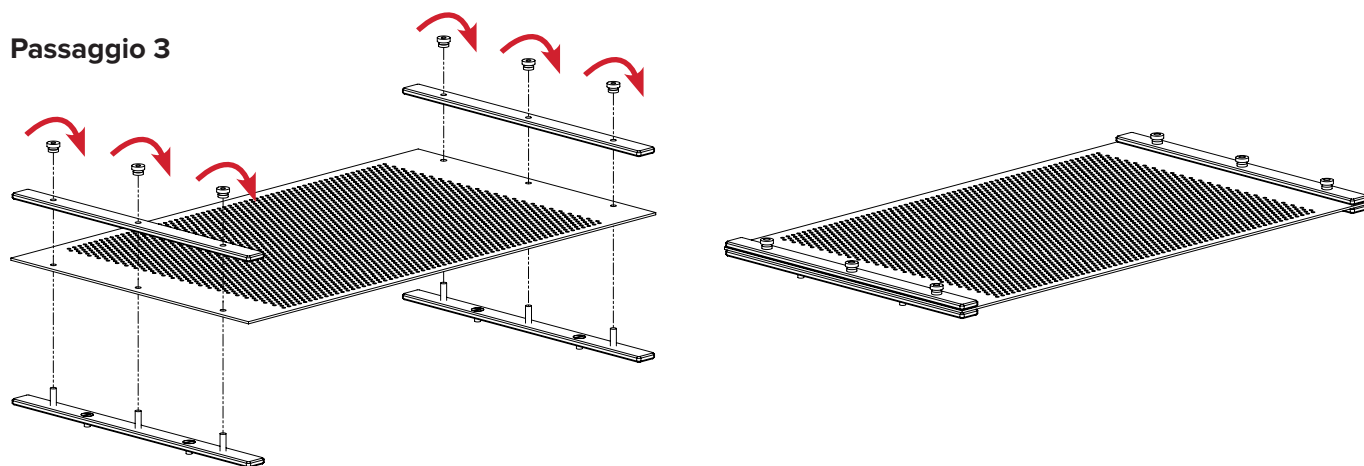

ISTRUZIONI PER L'USO

APPONTAMENTO


Passaggio 4

Posizionare il paziente sul dispositivo per la mammella Access Supine.

! NOTA ! Fare riferimento alla Guida del prodotto e Manuale d'uso di Access Supine (P/N 2004394) per le istruzioni operative, le caratteristiche del prodotto, le specifiche, le avvertenze, le attenzioni e altre precauzioni generali relative all'uso del dispositivo per mammella Access Supine.

Ammorbidire il materiale termoplastico (RT-1783P3) con le Opti-Handle collegate (RT-4454-14).

Completare i passaggi 4A, 4B, 4C e 4D su entrambi i lati del materiale termoplastico.

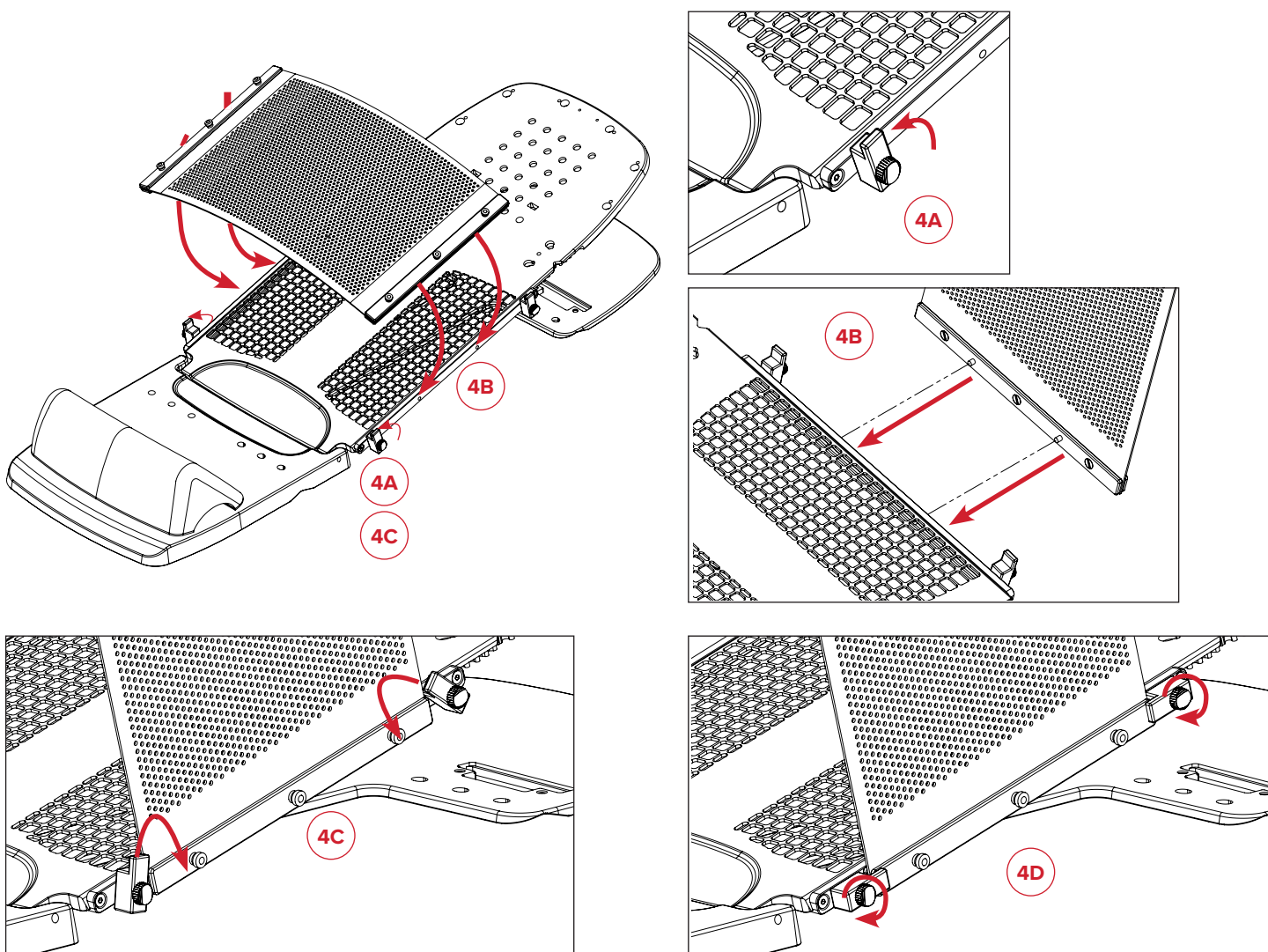

ISTRUZIONI PER L'USO

RIMOZIONE





Adattatore termoplastico Opti-Handle™

Passaggio 1

Completare i passaggi 1A, 1B e 1C su entrambi i lati del materiale termoplastico.

Rimuovere il paziente dal dispositivo per mammella Access Supine.


! NOTA ! Fare riferimento alla Guida del prodotto e Manuale d'uso di Access Supine (P/N 2004394) per le istruzioni operative, le caratteristiche del prodotto, le specifiche, le avvertenze, le attenzioni e altre precauzioni generali relative all'uso del dispositivo per mammella Access Supine.

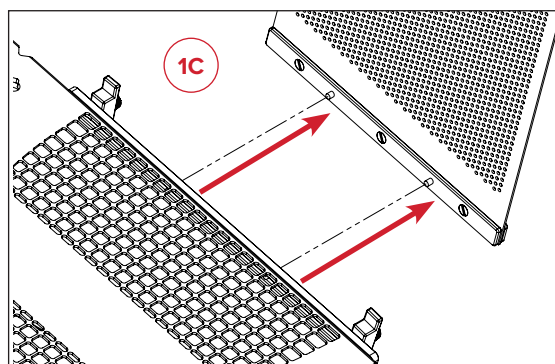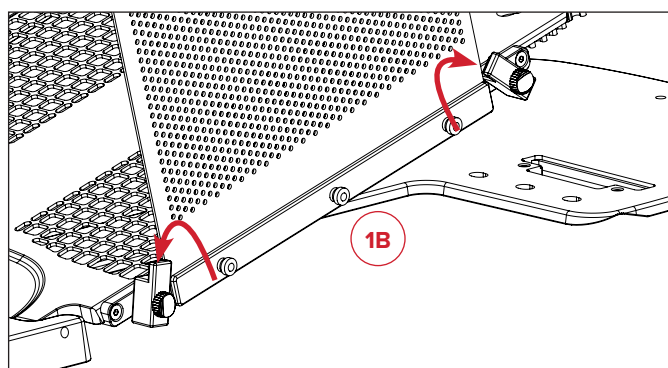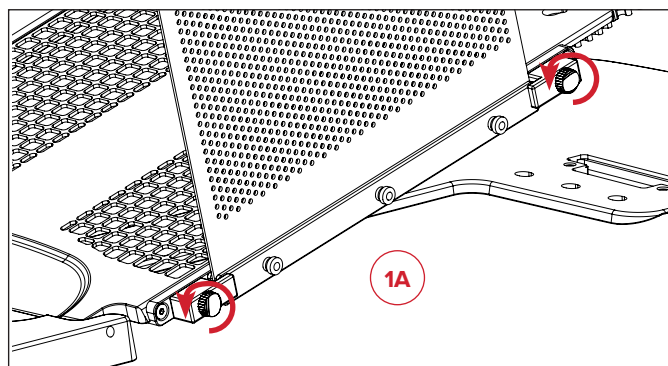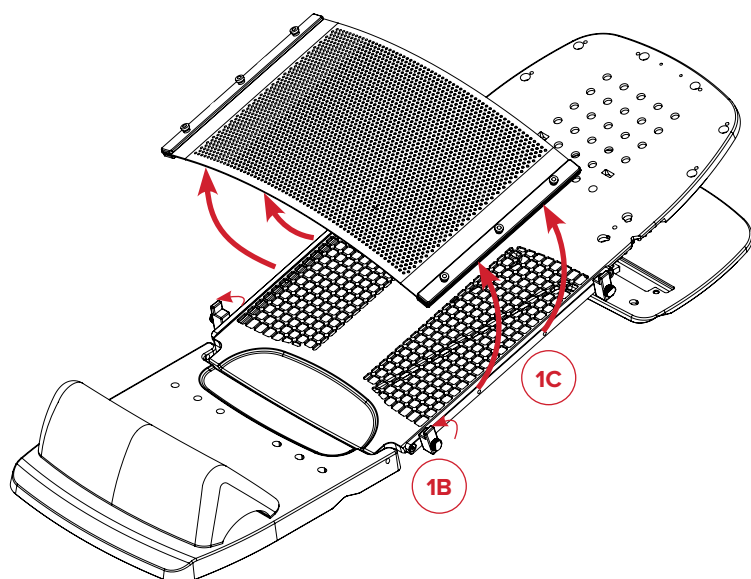



ISTRUZIONI PER L'USO

RIMOZIONE

Passaggio 2

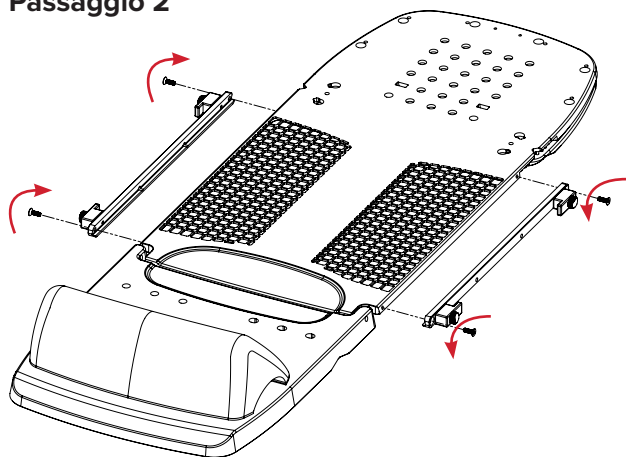

Passaggio 3

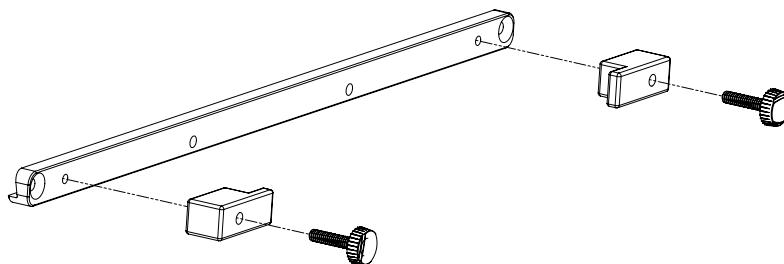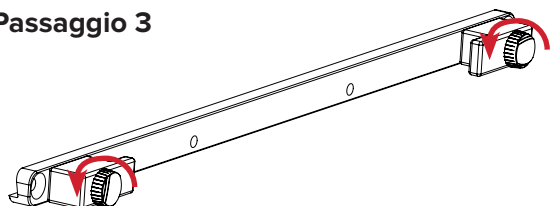

ELENCO DEI COMPONENTI

RT-4546-03 E RT-4546-04

Compatibile con maschere S-Frame Portrait™

RT-4546-05

Compatibile con RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Compatibile con RT-4454-14, 35,56 cm (14 pollici) Opti-Handles, set di 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_IT_A
2023-04