



positioning
patients for life.®

製品ガイド および取扱説明書

RT-4546-03

Access™ Supine乳房デバイス用
Portrait™頭部専用マスクアダプター

RT-4546-04

Access™ Supine乳房デバイス用
Portrait™頭頸部マスクアダプター

RT-4546-05

Access™ Supine乳房デバイス用
Opti-Handle™熱可塑性アダプター

一般的な使用上の注意

警告

！警告！ 本装置を改造することはできません。本デバイスの一部が大きな荷重を受けた場合、損傷しているように見える場合、または正常に機能しない場合は、直ちに使用を中止して、QFIX (+1 484-720-6054またはTECHSUPPORT@QFIX.COM) まで連絡してください。

治療ビームの減衰

デバイスを通して行う治療では、常に皮膚線量の増加が起こります。熱可塑性樹脂マスクは、放射線治療ビームの減衰と皮膚線量の増加をもたらします。計画と治療の際には、減衰と皮膚線量の増加を考慮に入れる必要があります。

MR安全性情報

MR 非臨床試験の結果、Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-04 Portrait™頭頸部マスクアダプター、Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-03 Portrait™頭部専用マスクアダプター、およびAccess™ Supine乳房デバイス用RT-4546-05 Opti-Handle™熱可塑性アダプターは、MR対応であることが実証されています。Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-04 Portrait™頭頸部マスクアダプター、Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-03 Portrait™頭部専用マスクアダプター、およびAccess™ Supine乳房デバイス用RT-4546-05 Opti-Handle™熱可塑性アダプターは、MR環境で使用できます。

- Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-04 Portrait™頭頸部マスクアダプター、Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-03 Portrait™頭部専用マスクアダプター、Access™ Supine乳房デバイス用RT-4546-05 Opti-Handle™熱可塑性アダプターは、スキャン前に使用目的に従って、MR対応バージョンのAccess™ Supine (RT-4546MRI) と併用する必要があります。
- Access™ Supine用 (RT-4546MRI) のMR対応バージョンには、以下の記号が明記されています。



警告ラベルとその説明

記号およびその定義のリストについては、Qfix.comを参照してください。





MR対応

MR環境への暴露による既知の危険性がない製品です。MR対応製品は非導電性、非金属、非磁性体の材質で構成されています。




操作方法

セットアップ

頭部のみ

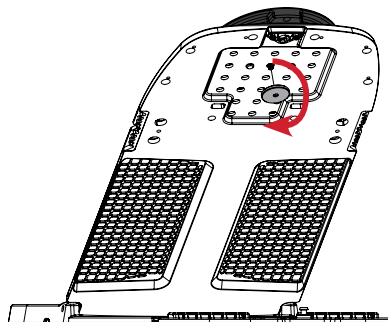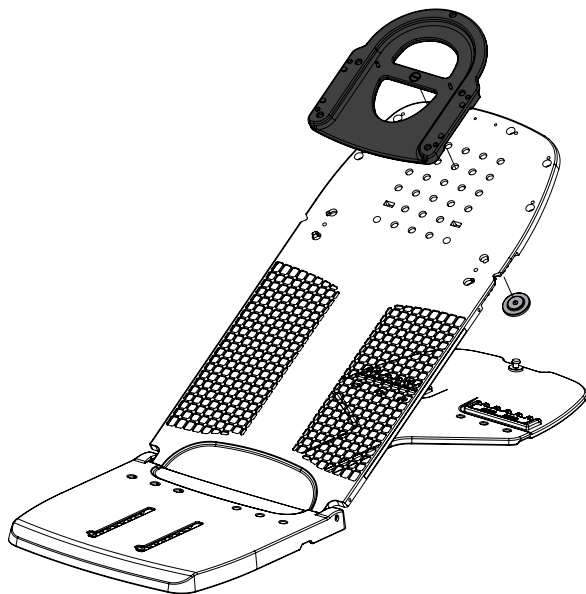

頭部および肩

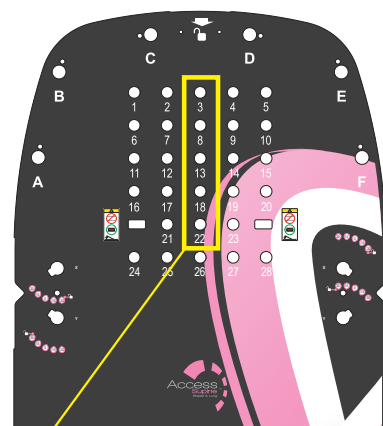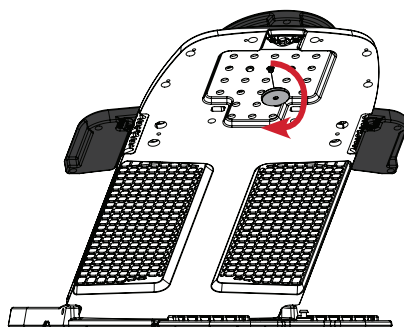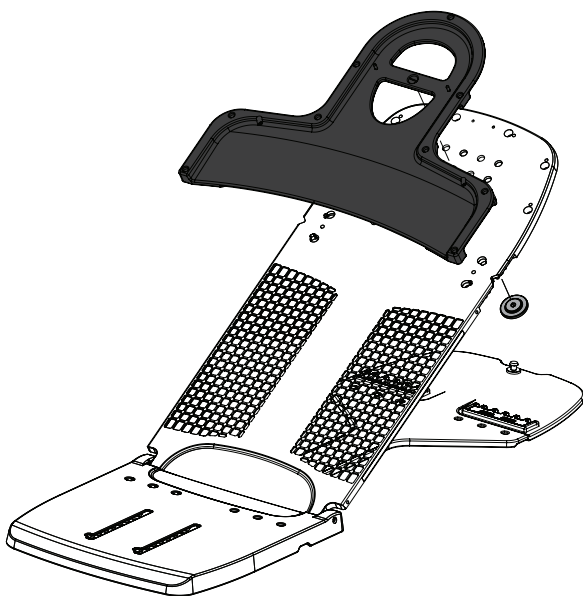


Portrait™マスクアダプターを、Access™ Supineの孔3、8、13、18、または22に固定します。


操作方法

必要に応じて調整し、動かさないようにします

回して締める

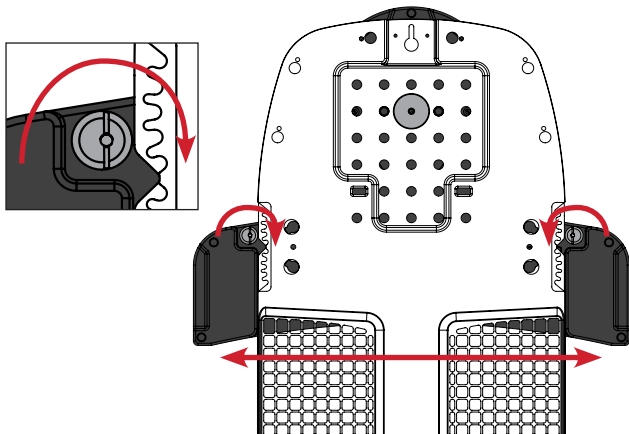



ロック

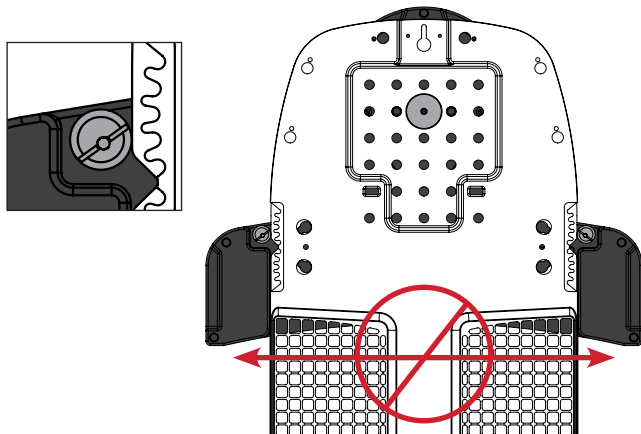



操作方法

取り外し

頭部のみ

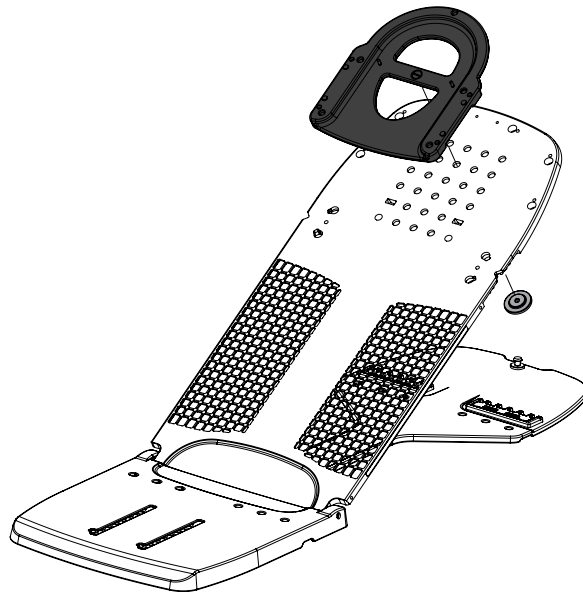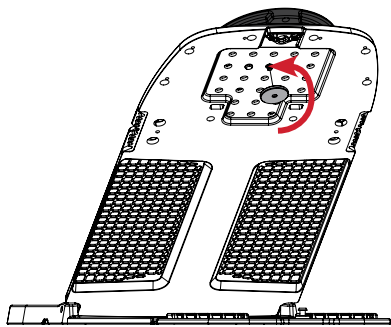

頭部および肩

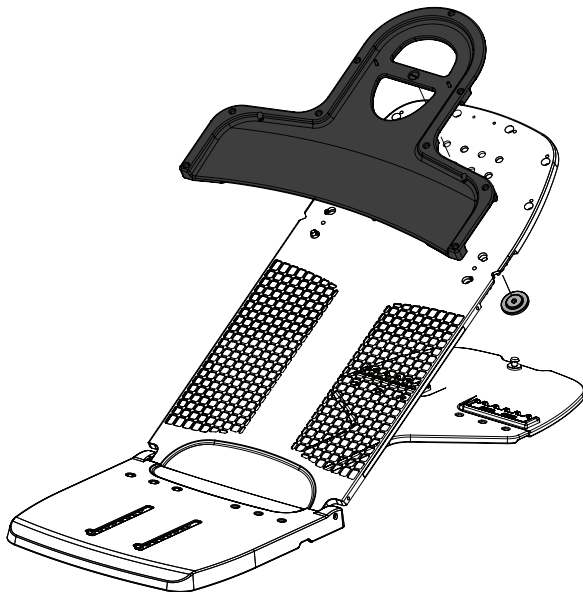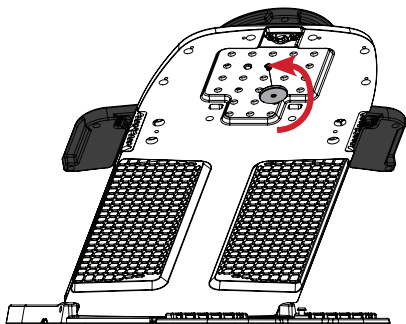


操作方法


セットアップ

Opti-Handle™熱可塑性アダプター


手順1

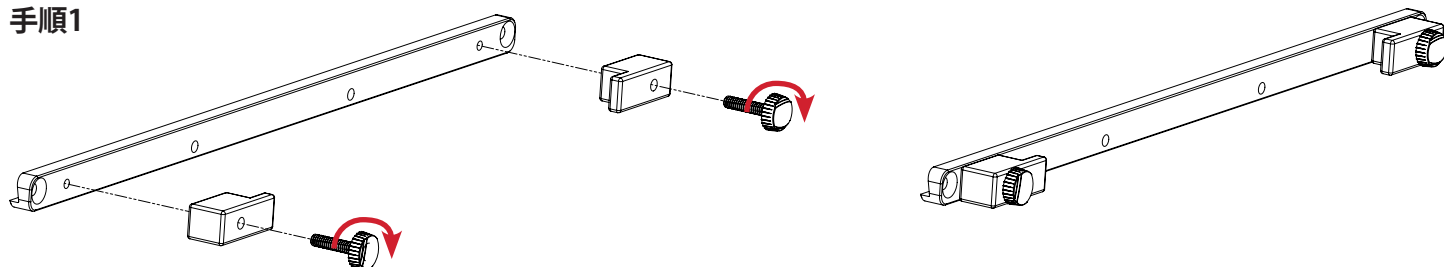

手順2

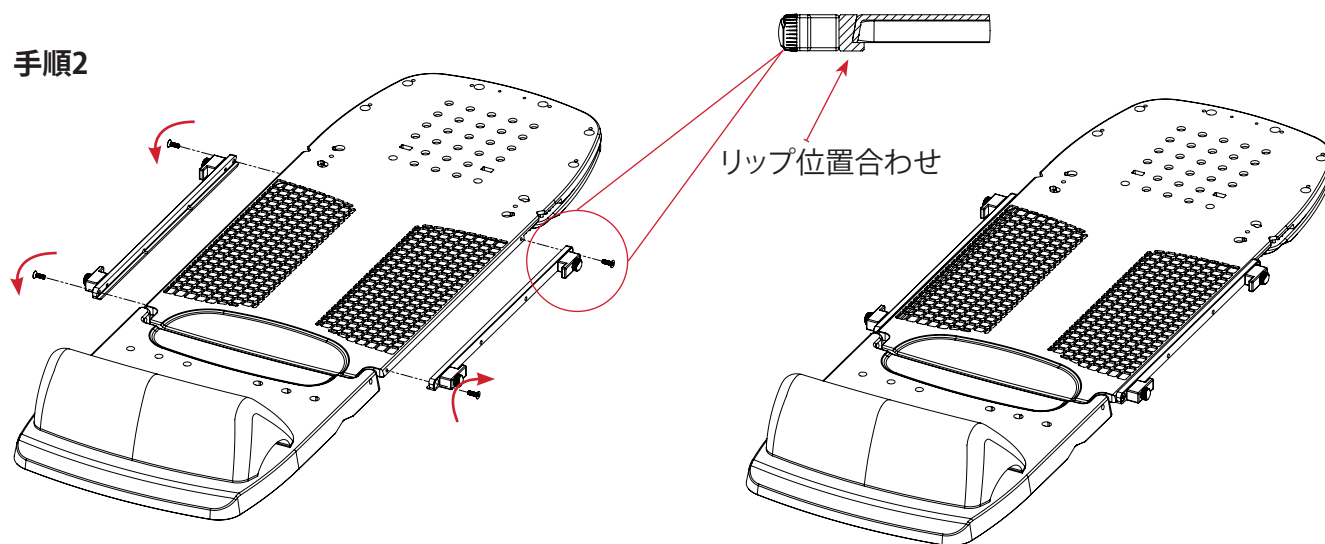

手順3

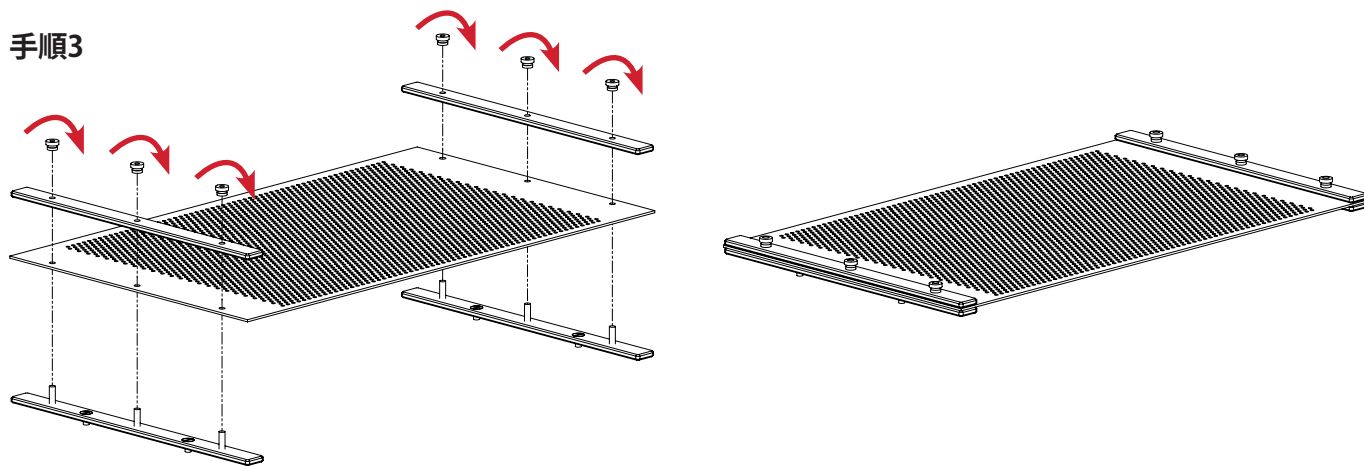

操作方法

セットアップ


手順4

Access Supine乳房デバイスで患者をセットアップします。

！注記！ Access Supine乳房デバイスの操作方法、製品機能、仕様、警告、注意、その他使用に関する一般的な注意事項については、Access Supineの製品ガイドおよび取扱説明書 (P/N 2004394) を参照してください。

付属のOpti-Handles (RT-4454-14) で、熱可塑性樹脂 (RT-1783P3) を柔らかくします。

熱可塑性樹脂の両側で、手順4A、4B、4C、および4Dを完了します。

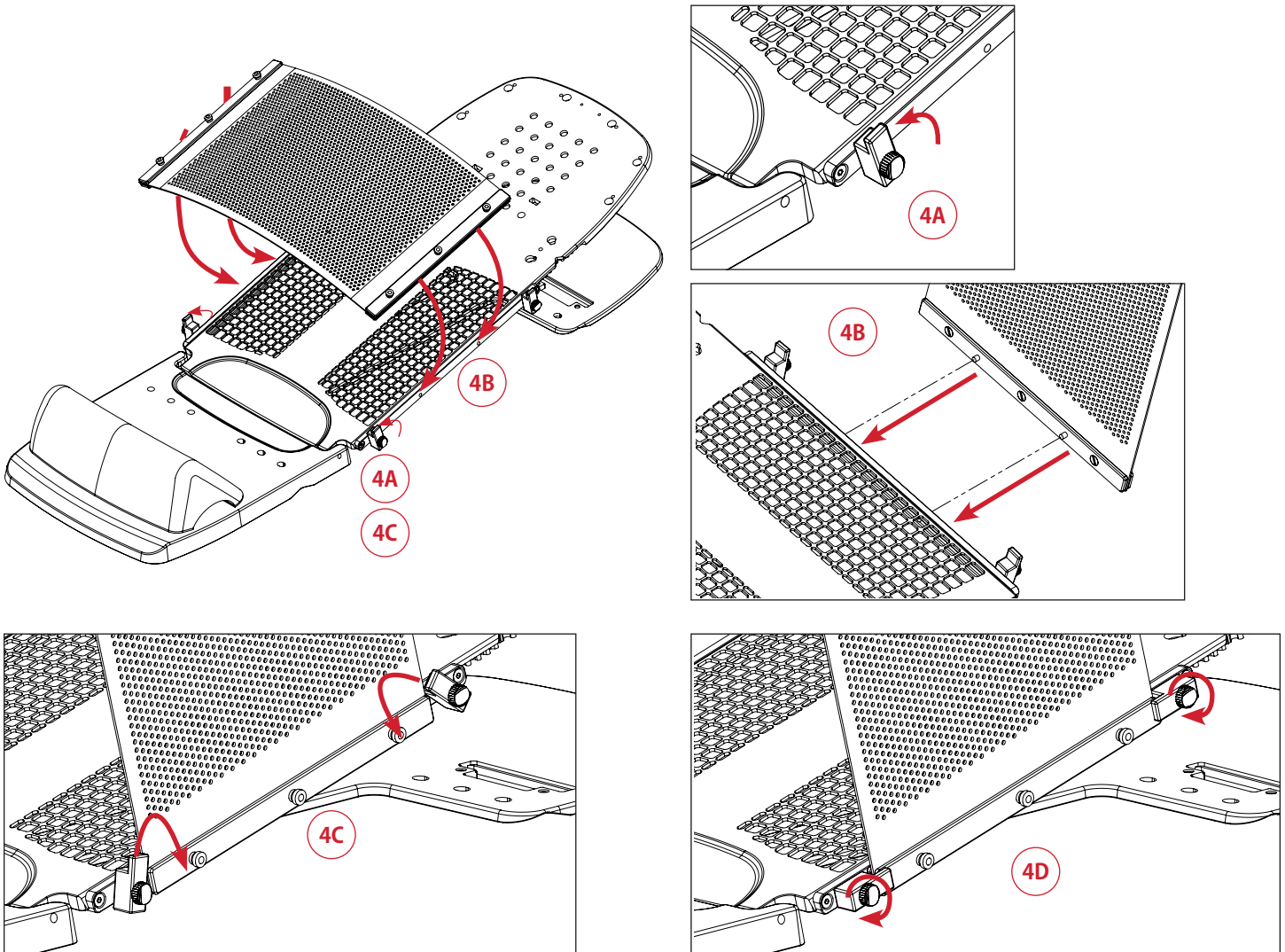

操作方法

取り外し





Opti-Handle™熱可塑性アダプター

手順1

熱可塑性樹脂の両側で、手順1A、1B、1Cを完了します。

Access Supine乳房デバイスを患者から外します。


！注記！ Access Supine乳房デバイスの操作方法、製品機能、仕様、警告、注意、その他使用に関する一般的な注意事項については、Access Supineの製品ガイドおよび取扱説明書 (P/N 2004394) を参照してください。

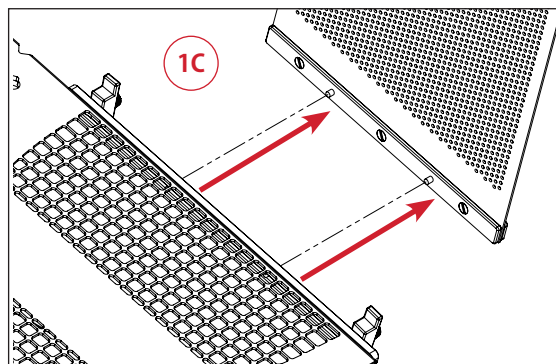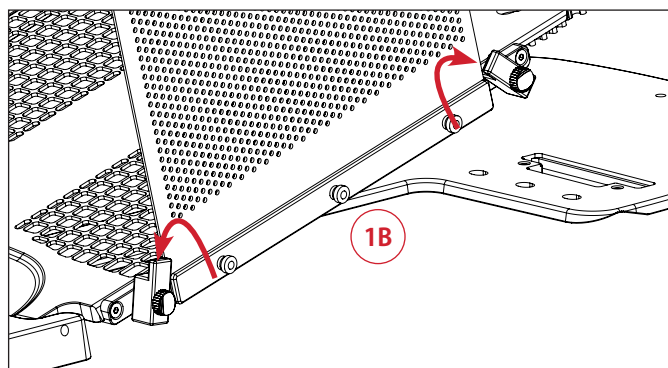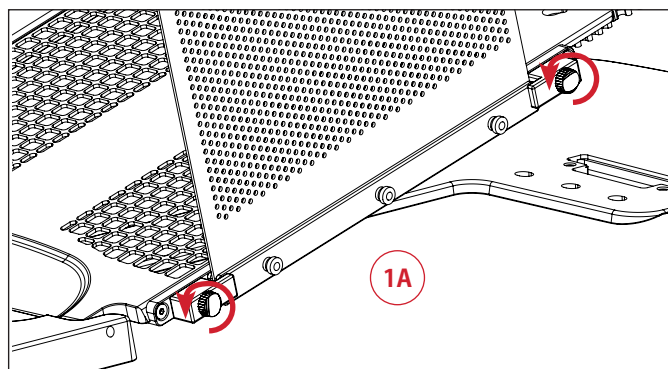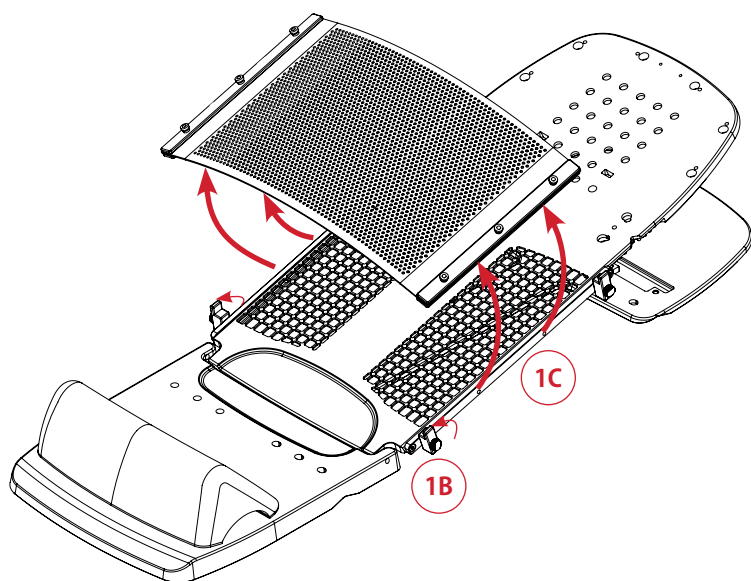



操作方法

取り外し

手順2

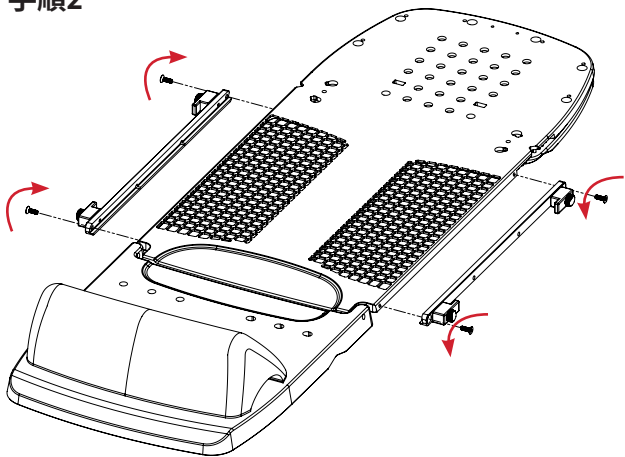

手順3

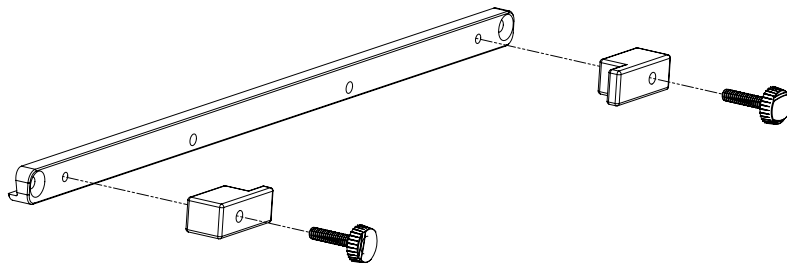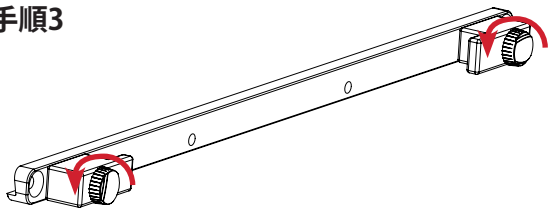

部品リスト

RT-4546-03およびRT-4546-04

Portrait™ Sフレームマスクに対応

RT-4546-05

RT-1783P3、Aquaplast RT®シート、12 x 18インチ、2.4 mm、Perfに対応

RT-4454-14、35.56 cm (14インチ) Opti-Handles 2個セットに対応



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_JA_A
2023-04