

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

RT-4546-03

Access™ Supine кеуде құрылғысының
Portrait™ тек бас маскасының адаптері

RT-4546-04

Access™ Supine кеуде құрылғысының
Portrait™ бас пен мойын маскасының адаптері

RT-4546-05

Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған
Opti-Handle™ термопластик адаптері

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 484-720-6054 НӨМІРІ НЕМЕСЕ TECHSUPPORT@QFIX.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША QFIX КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

ЕМДЕУ ШОҒЫНЫҢ ӘЛСІРЕУІ

Кез келген құрылғымен емдеу тері дозасының артуына себеп болады. Термопластикалық маскалар сәулелік терапия сәулесін сейілтеді және тері дозасын арттырады. Жоспарлау және емдеу кезінде мұндай сейірту мен тері дозасының артуын ескеру қажет.

MP ОРТАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 Бейклиникалық сынақтар Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-04 Portrait™ бас пен мойын маскасы адаптері, Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-03 Portrait™ тек бас маскасының адаптері және Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-05 Opti-Handle™ термопластик адаптері MP ортасында қауіпсіз екенін көрсетті. Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-04 Portrait™ бас пен мойын маскасы адаптерін, Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-03 Portrait™ тек бас маскасының адаптерін және Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-05 Opti-Handle™ термопластик адаптерін MP ортасында қолдануға болады.

- Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-04 Portrait™ бас пен мойын маскасы адаптерін, Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-03 Portrait™ тек бас маскасының адаптерін және Access™ Supine кеуде құрылғысына арналған RT-4546-05 Opti-Handle™ термопластик адаптерін Access™ Supine (RT-4546MRI) құрылғысының MP ортасында қауіпсіз нұсқасымен оның арнаулы мақсатына сай қолдану қажет.
- Access™ Supine (RT-4546MRI) құрылғысының MP ортасында қауіпсіз нұсқасы мынадай таңбамен анық белгіленген:



ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын Qfix.com сайтынан қараңыз.





MP ОРТАСЫНДА ҚАУІПСІЗ

Қандай да бір MP ортасының ықпалына ұшырау нәтижесінде ешқандай қауіп байқалмаған элемент. «MP ортасында қауіпсіз» элементтер электр тогын өткізбейтін, металдан жасалмаған және магнитсіз материалдардан тұрады.




ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

БАПТАУ

Тек бас

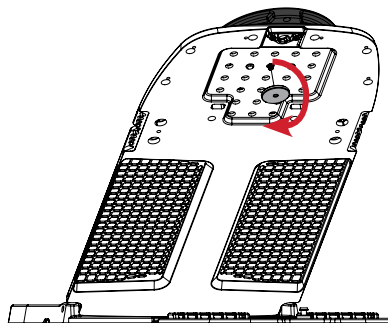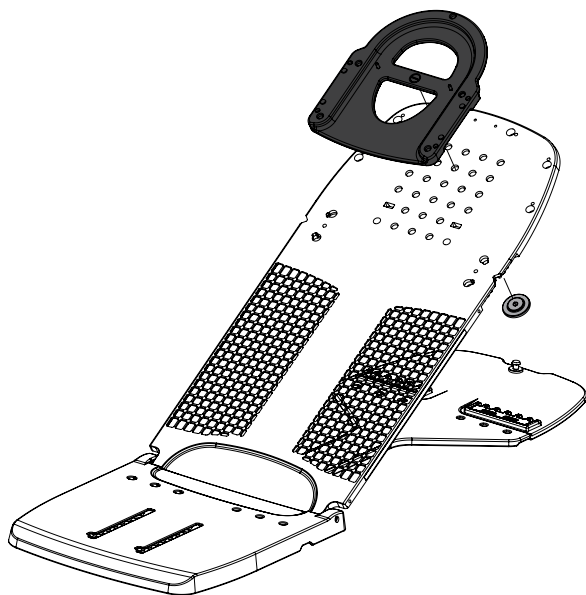

Бас пен иық

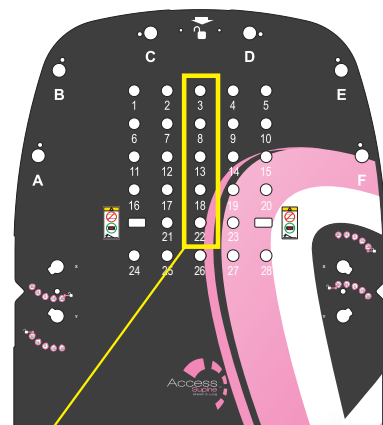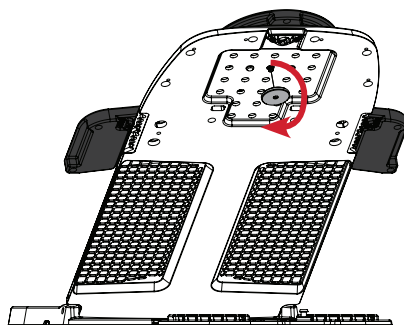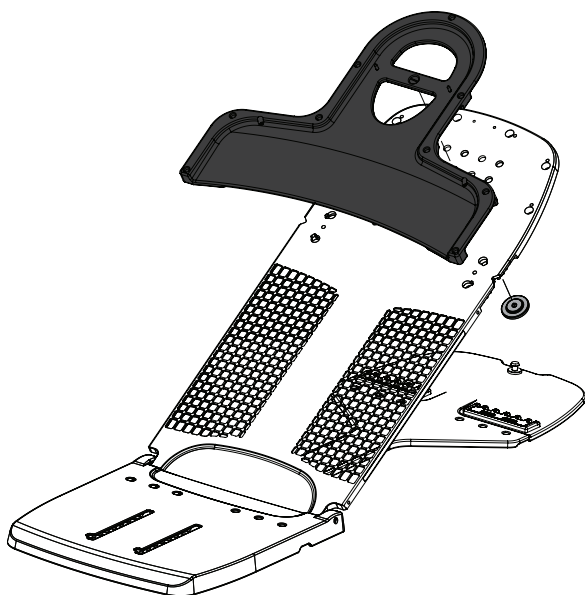


3, 8, 13, 18 немесе
22-саңылауларды
пайдаланып, Portrait™
маска адаптерін
Access™ Supine
құрылғысына бекітіңіз.


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ҚОЗҒАЛМАС ҮШІН ҚАЖЕТІНШЕ РЕТТЕҢІЗ

Қатайту үшін бұраңыз

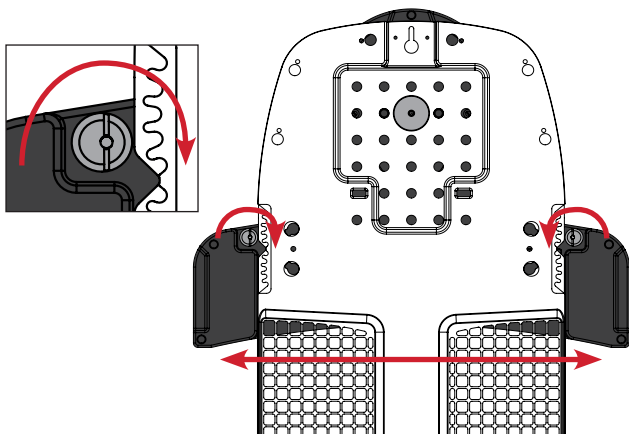



Құлыптаулы

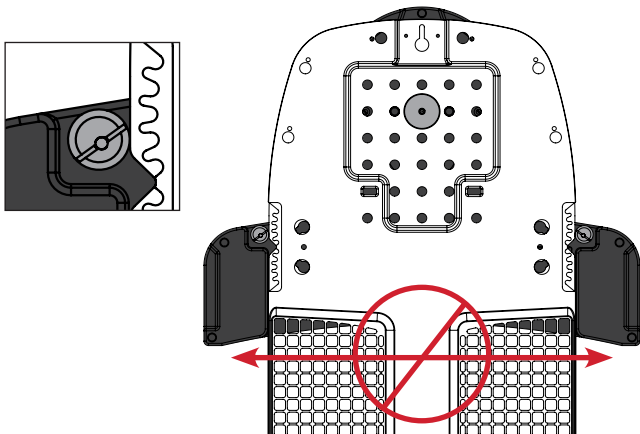



ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ШЫҒАРЫП АЛУ

Тек бас

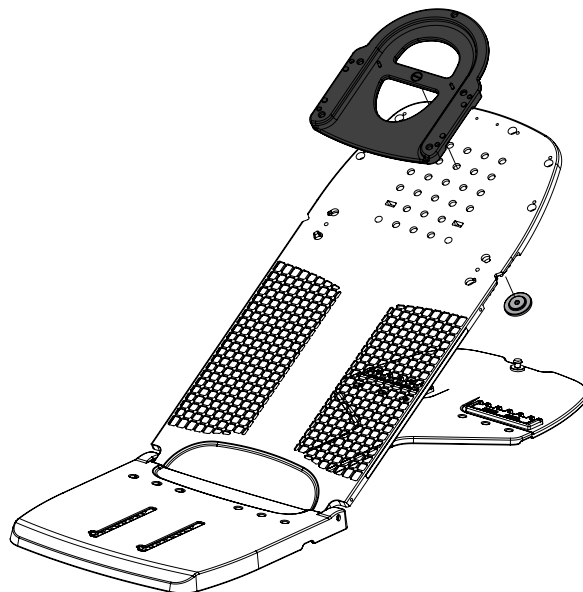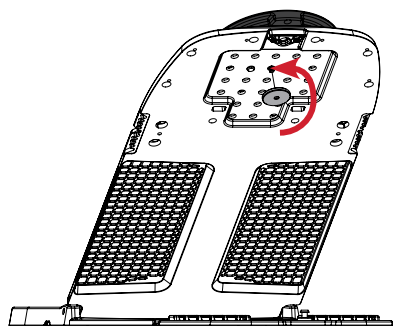

Бас пен иық

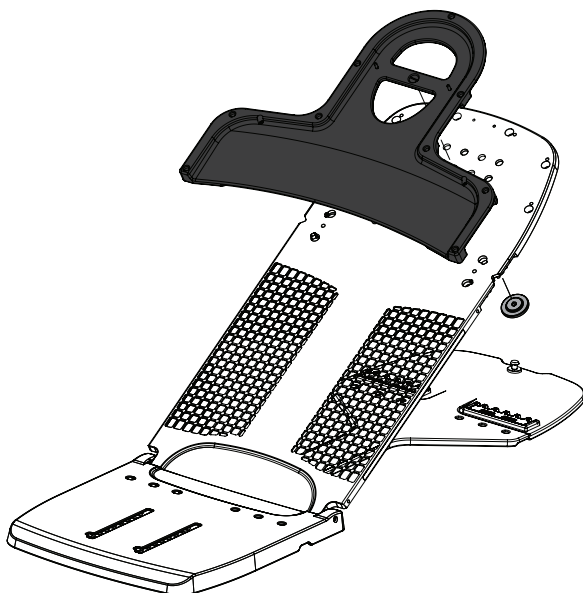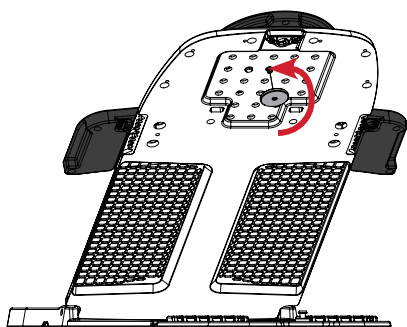


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ


БАПТАУ

Opti-Handle™ термопластик адаптері


1-қадам

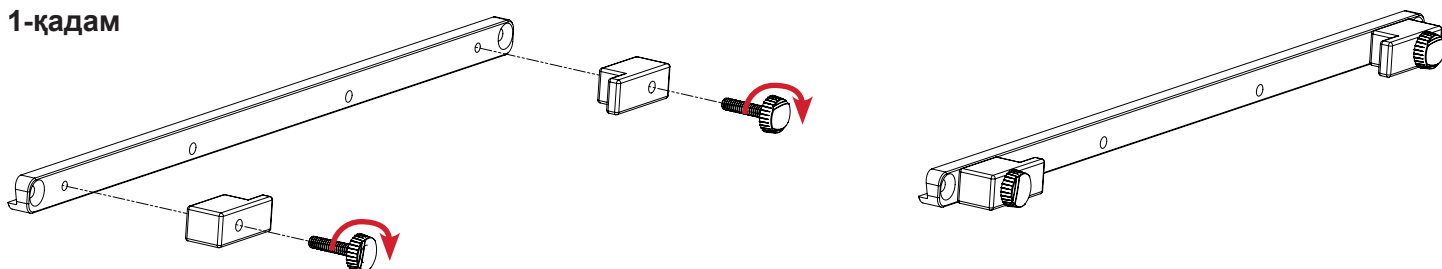

2-қадам

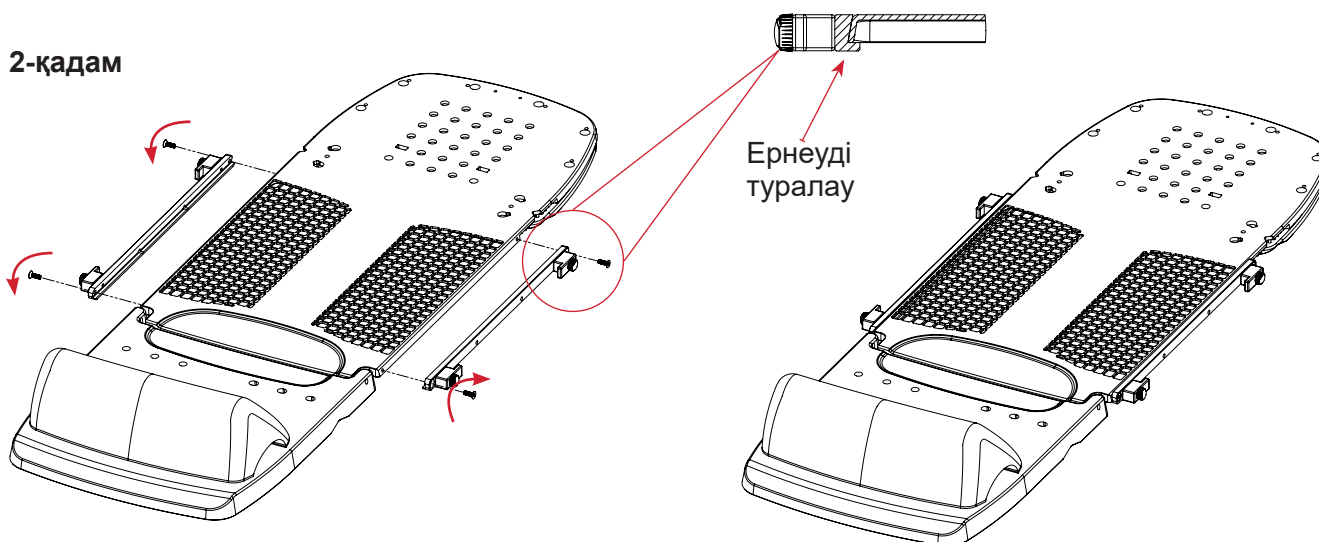

3-қадам

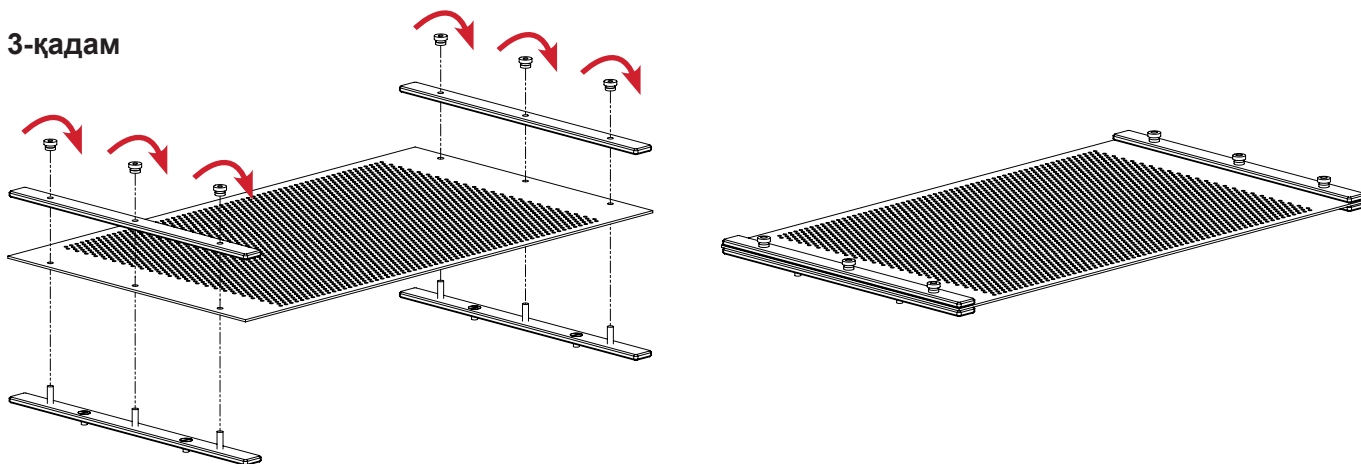

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

БАПТАУ


4-қадам

Access Supine кеуде құрылғысындағы емделушіні реттеңіз.

! ЕСКЕРТПЕ ! Access Supine кеуде құрылғысына (P/N 2004394) қатысты пайдалану нұсқауларын, өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларды, ескертулерді, сондай-ақ оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Access Supine құрылғысының Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Термопластикті (RT-1783P3) тіркелген Opti-Handles құралдарымен (RT-4454-14) жұмсартыңыз.

Термопластиктің қос жағында 4A, 4B, 4C және 4D қадамдарын орындаңыз.

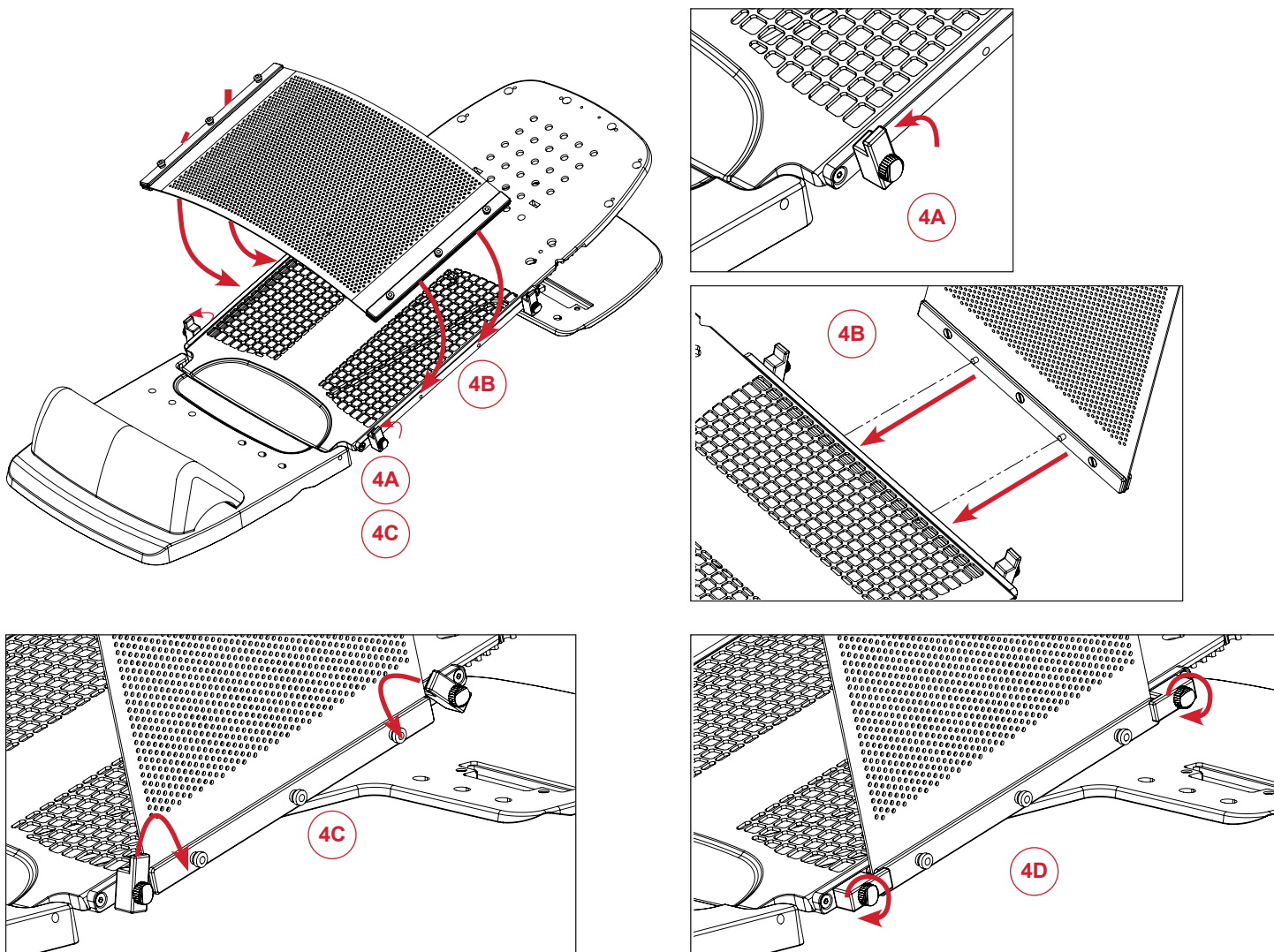

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ШЫҒАРЫП АЛУ





Opti-Handle™ термопластик адаптері

1-қадам

Термопластиктің екі жағында да 1A, 1B және 1C қадамдарын орындаңыз.

Емделушіні Access Supine кеуде құрылғысынан шығарыңыз.


! ЕСКЕРТПЕ ! Access Supine кеуде құрылғысына (P/N 2004394) қатысты пайдалану нұсқауларын, өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларды, ескертулерді, сондай-ақ оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Access Supine құрылғысының Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

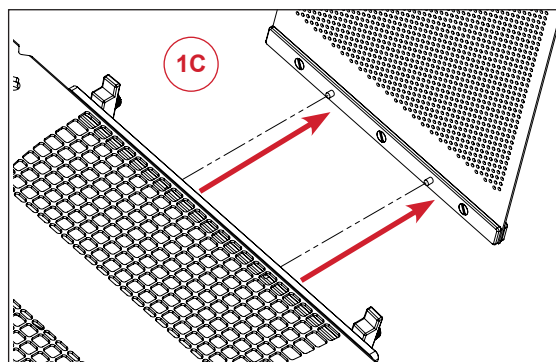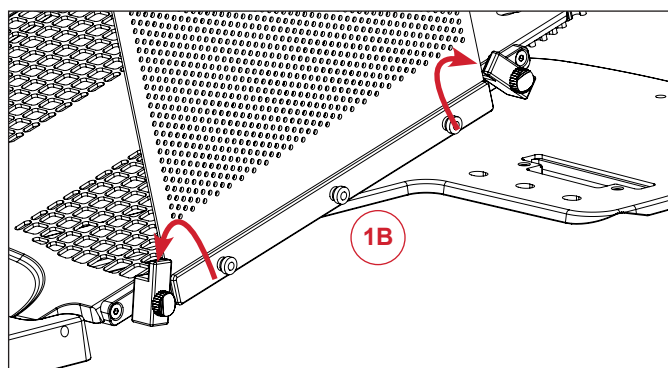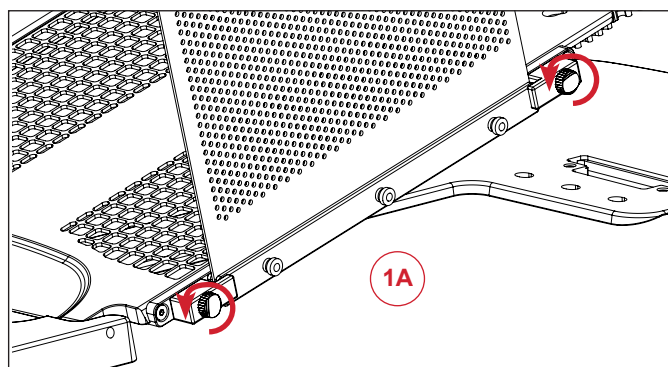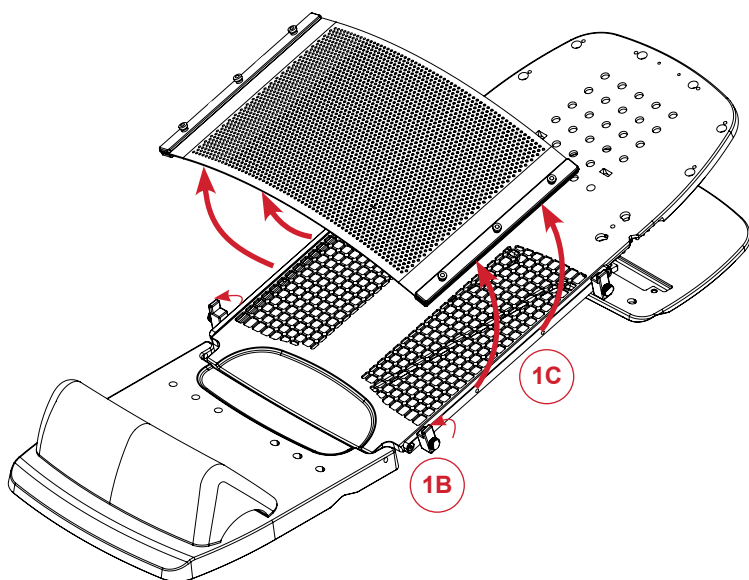



ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

ШЫҒАРЫП АЛУ

2-қадам

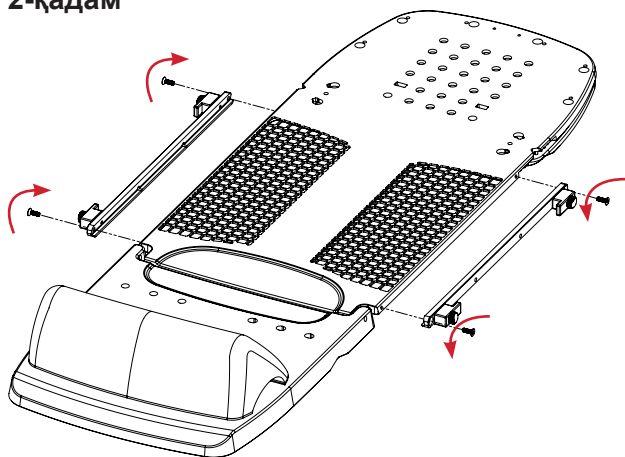

3-қадам

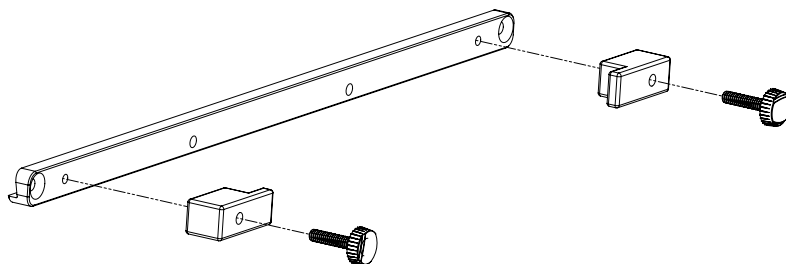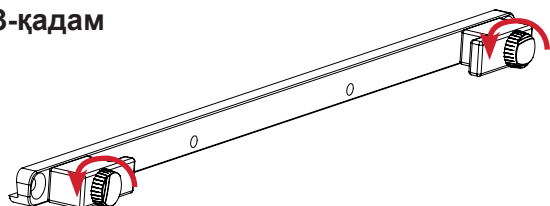

БӨЛШЕКТЕР ТІЗІМІ

RT-4546-03 ЖӘНЕ RT-4546-04

Portrait™ S тәрізді жақтаулы маскаларымен үйлесімді

RT-4546-05

Мына құрылғымен үйлесімді: RT-1783P3, Aquaplast RT® табағы, 12" x 18", 2,4 мм, тесілген

Мына құрылғымен үйлесімді: RT-4454-14, 35,56 см (14 дюйм) Opti-Handles, 2 бұйымнан тұратын жинақ



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_KK_A
2023-07