



제품 가이드 및 사용 설명서

RT-4546-03

Access™ Supine 유방 장치용
Portrait™ 머리 전용 마스크 어댑터

RT-4546-04

Access™ Supine 유방 장치용
Portrait™ 머리 및 목 마스크 어댑터

RT-4546-05

Access™ Supine 유방 장치용
Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

일반 주의사항

경고 문구

! 경고 ! 이 장비를 변경해서는 안 됩니다. 이 장치의 어떤 부품이든 극한 하중이 가해지거나, 손상되거나 제대로 작동하지 않는 것으로 보이면 즉시 사용을 중단하고 +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688번이나 SUPPORT@CQMEDICAL.COM으로 CQ MEDICAL에 문의하십시오.

치료 빔 감쇠

어느 장치든 통과시켜 치료를 제공하면 피부 선량이 증가하게 됩니다. 열가소성 마스크는 방사선 치료 빔을 감쇠시키고 피부 선량을 증가시킵니다. 계획 및 치료 중에는 감쇠와 피부 선량 증가를 고려해야 합니다.

MR 안전 정보

MR RT-4546-04 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 및 목 마스크 어댑터, RT-4546-03 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 전용 마스크 어댑터 및 RT-4546-05 Access™ Supine 유방 장치용 Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터는 비임상 테스트에서 MR 안전이 확인되었습니다. RT-4546-04 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 및 목 마스크 어댑터, RT-4546-03 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 전용 마스크 어댑터 및 RT-4546-05 Access™ Supine 유방 장치용 Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터는 MR 환경에서 사용할 수 있습니다.

- RT-4546-04 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 및 목 마스크 어댑터, RT-4546-03 Access™ Supine 유방 장치용 Portrait™ 머리 전용 마스크 어댑터 및 RT-4546-05 Access™ Supine 유방 장치용 Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터는 스캔 전에 의도된 용도에 맞게 Access™ Supine(RT-4546MRI)의 MR 안전 버전과 함께 사용해야 합니다.
- Access™ Supine(RT-4546MRI)의 MR 안전 버전에는 다음 기호가 명확하게 표시되어 있습니다. **MR**

경고 라벨 및 설명

기호 및 기호 정의 목록은 www.CQmedical.com을 참조하십시오.





MR 안전




MR 환경에 노출 시 야기되는 알려진 위험이 없는 제품입니다. MR 안전 품목은 전기적으로 비전도성인 비금속 및 비자성 물질로 구성됩니다.

작동 지침

설정 머리 전용

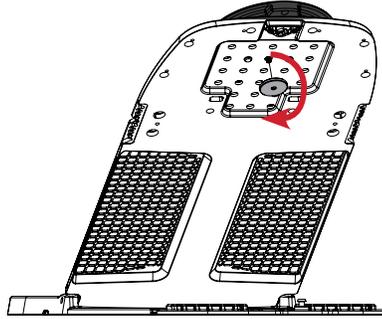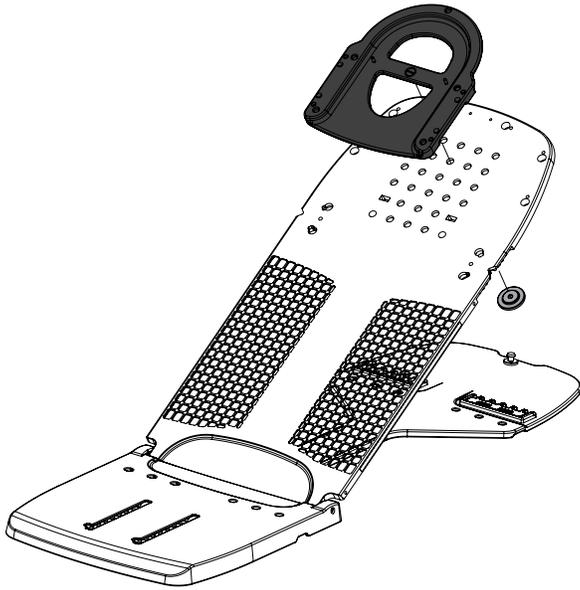

머리 및 어깨

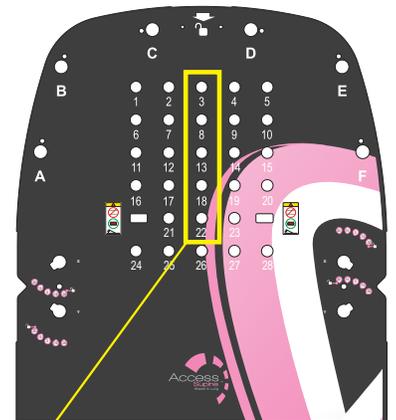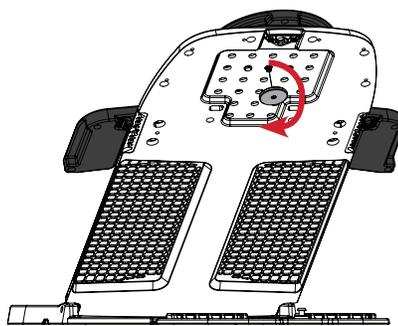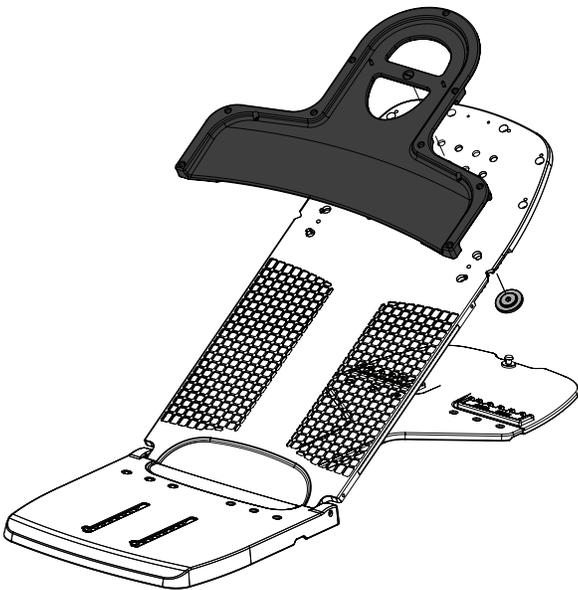


구멍 3, 8, 13, 18 또는 22를 사용하여 Portrait™ 마스크 어댑터를 Access™ Supine에 고정합니다.


작동 지침

필요한 경우, 움직이지 않도록 조정

돌려서 조임


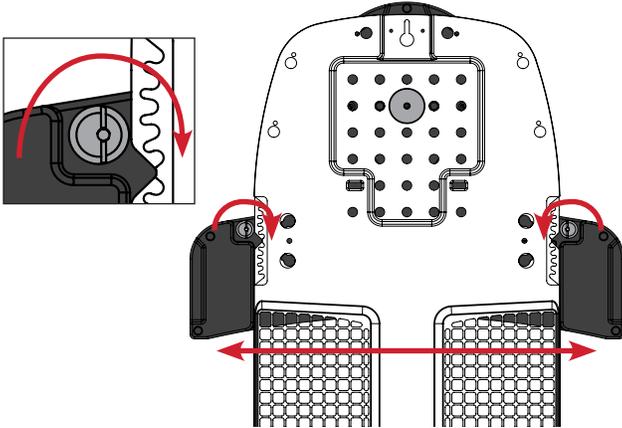


잠금


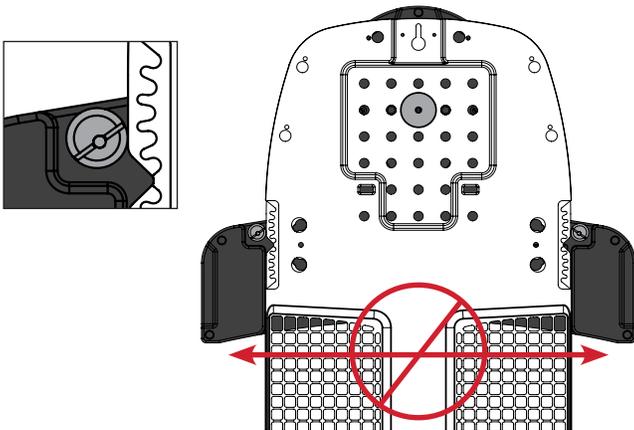


작동 지침

분리 머리 전용

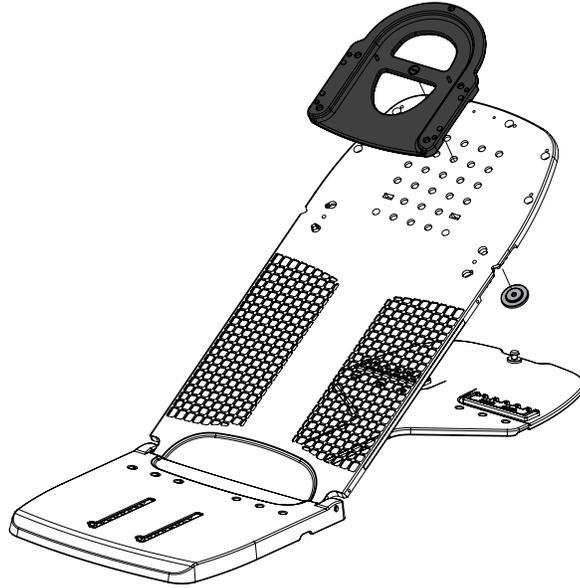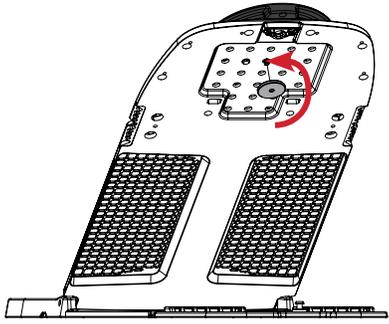

머리 및 어깨

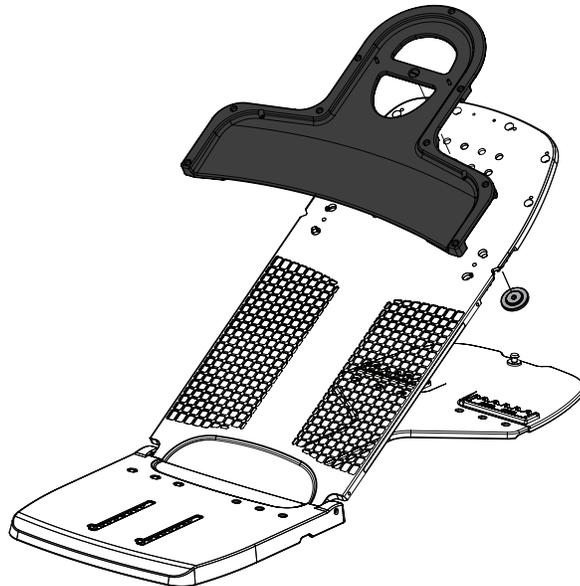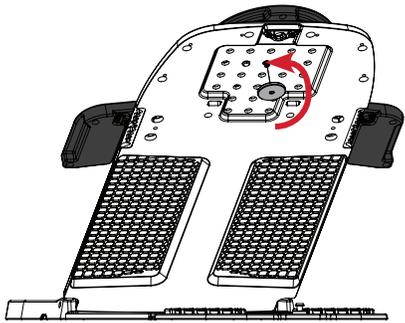


작동 지침


설정

Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터


1단계

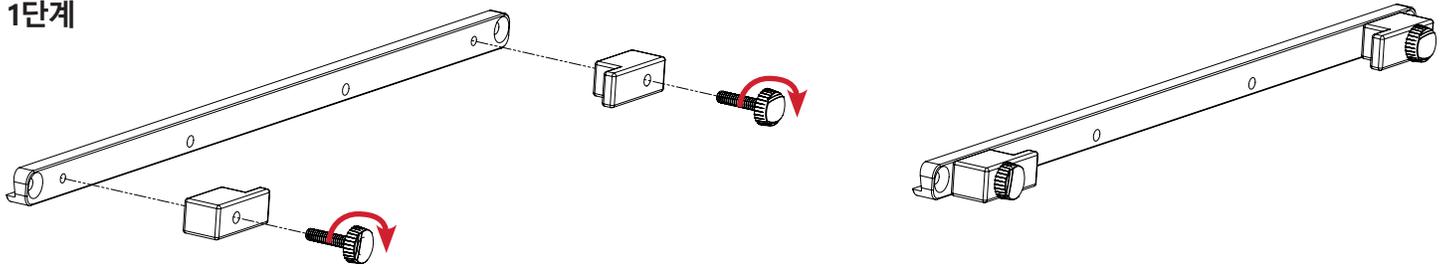

2단계

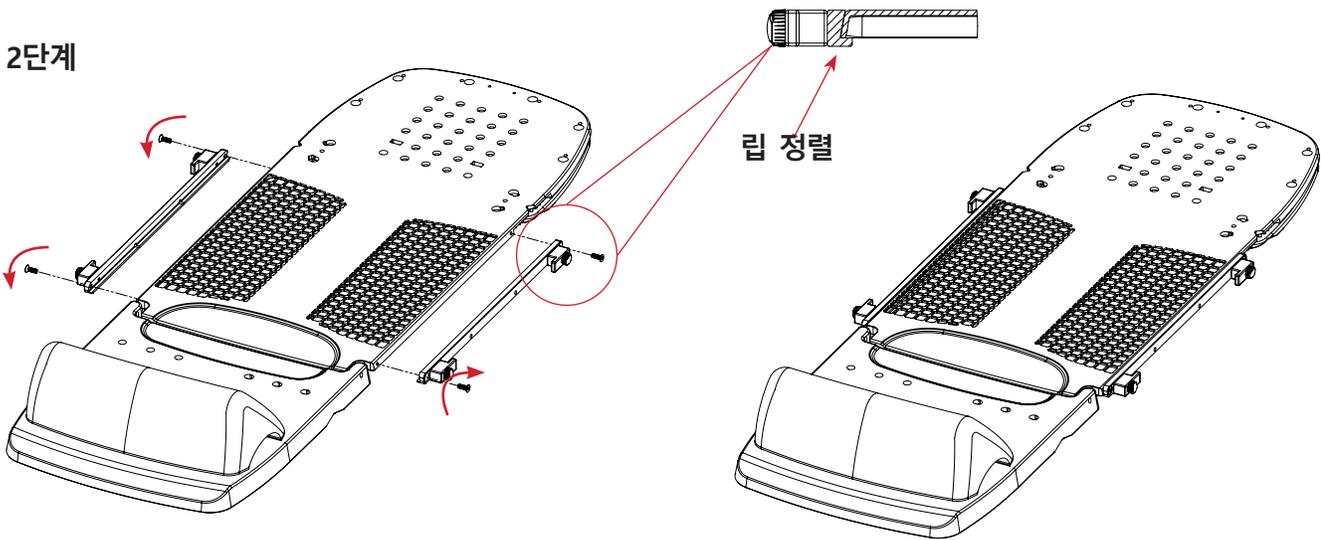

3단계

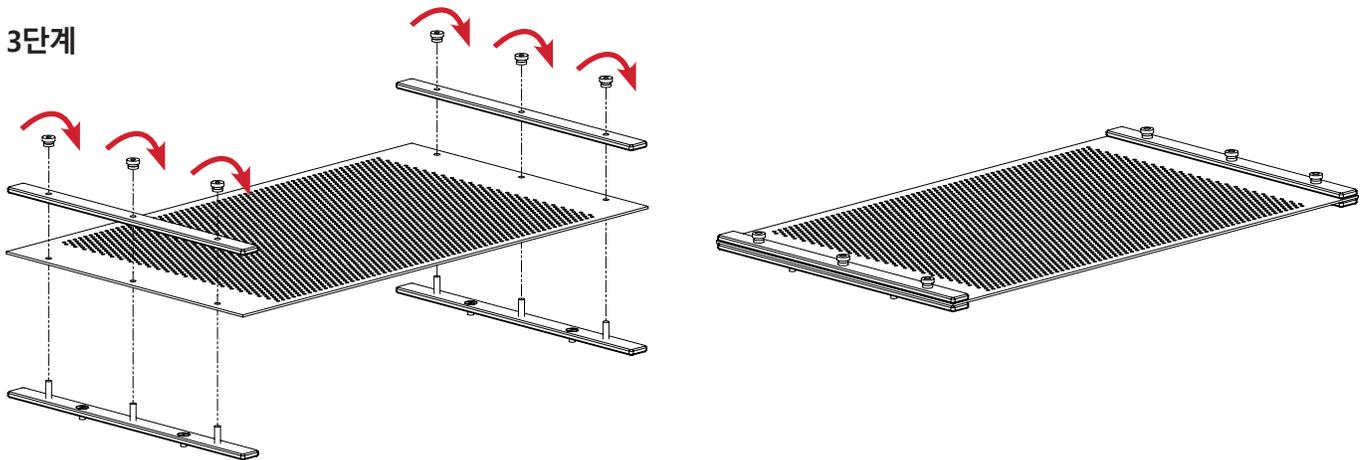

작동 지침

설정


4단계

환자를 Access Supine 유방 장치에 올립니다.

! 참고 ! Access Supine 유방 장치의 사용에 관련된 작동 지침, 제품 기능, 사양, 경고, 주의사항 및 기타 일반적인 예방 조치에 대한 내용은 Access Supine(P/N 2004394) 제품 가이드 및 사용 설명서를 참조하십시오.

부착된 Opti-Handles(RT-4454-14)로 열가소성 플라스틱(RT-1783P3)를 부드럽게 만듭니다.

열가소성 플라스틱의 양쪽에서 4A, 4B, 4C 및 4D 단계를 완료합니다.

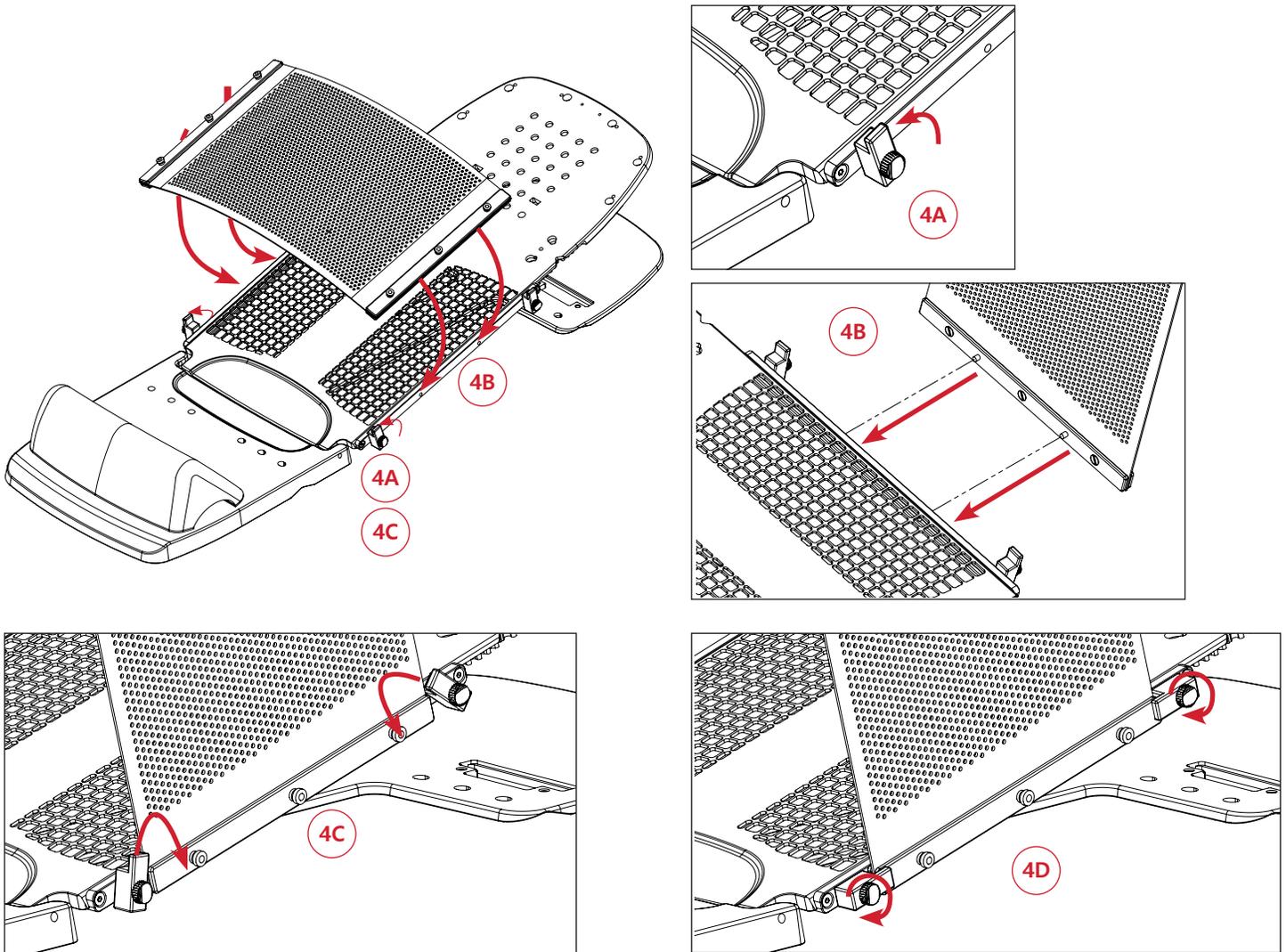

작동 지침

분리





Opti-Handle™ 열가소성 플라스틱 어댑터

1단계

열가소성 플라스틱의 양쪽에서 1A, 1B 및 1C 단계를 완료합니다.

환자를 Access Supine 유방 장치에서 내립니다.


! 참고 ! Access Supine 유방 장치의 사용에 관련된 작동 지침, 제품 기능, 사양, 경고, 주의사항 및 기타 일반적인 예방 조치에 대한 내용은 Access Supine(P/N 2004394) 제품 가이드 및 사용 설명서를 참조하십시오.

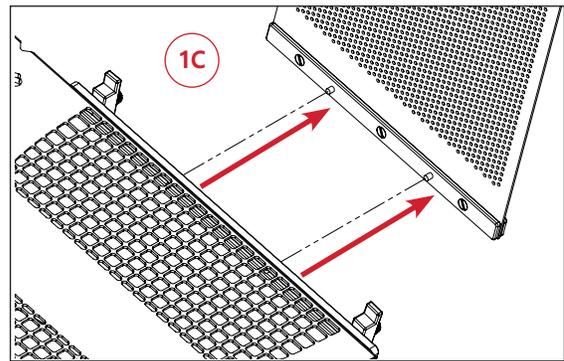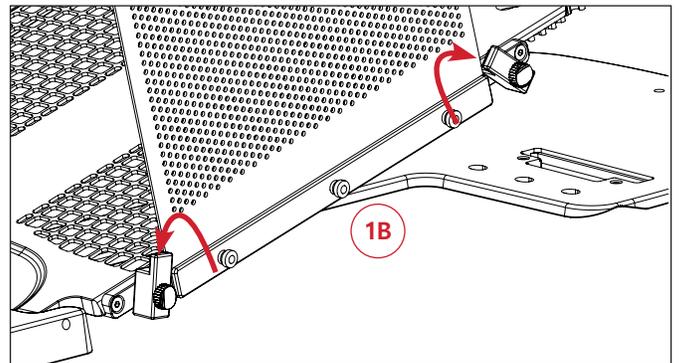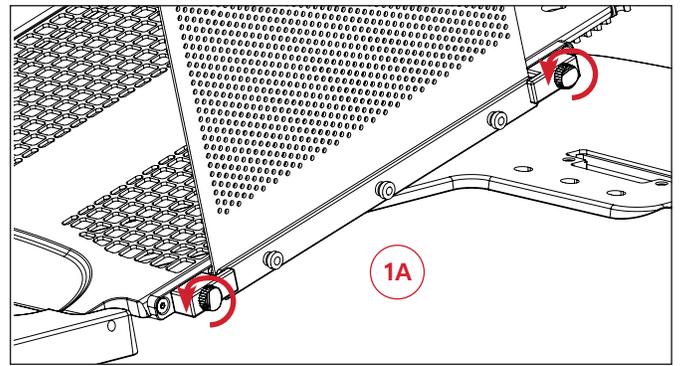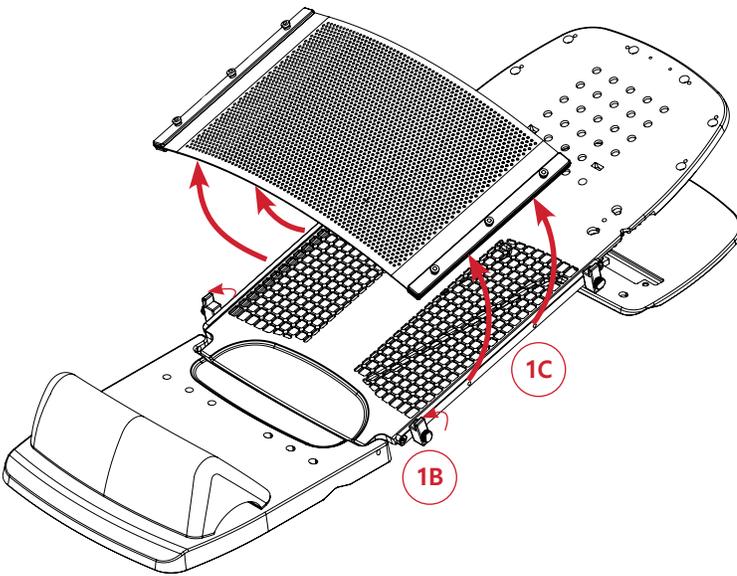



작동 지침

분리

2단계

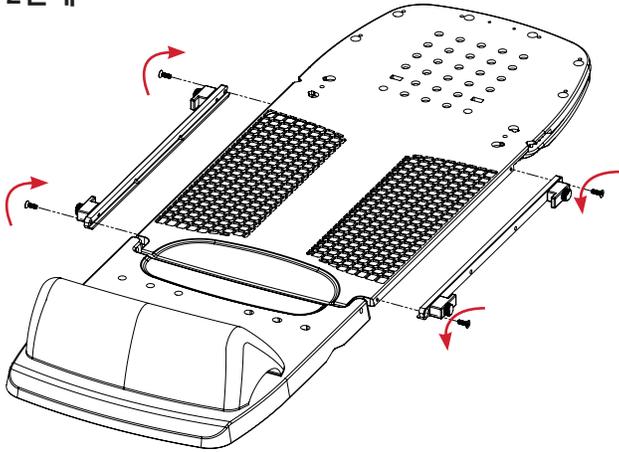

3단계

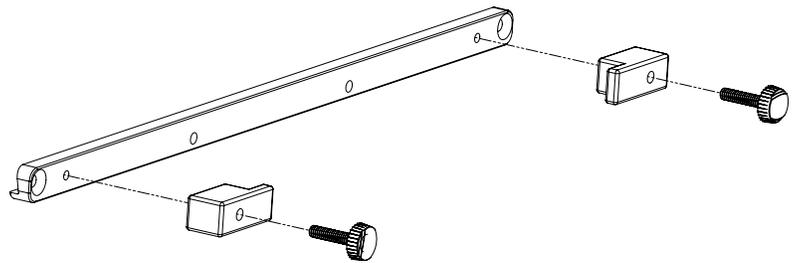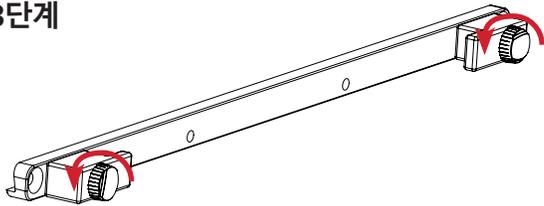

부품 목록

RT-4546-03 및 RT-4546-04

Portrait™ S 프레임 마스크와 호환

RT-4546-05

RT-1783P3, Aquaplast RT® 시트, 12" x 18", 2.4 mm, Perf와 호환

RT-4454-14, 35.56 cm(14 인치) Opti-Handles, 2세트와 호환



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com