



GAMINIO VADOVAS IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

RT-4546-03

„Portrait™“ galvos kaukės adapteris, skirtas
„Access™ Supine“ krūtinės prietaisui

RT-4546-04

„Portrait™“ galvos ir kaklo kaukės adapteris, skirtas
„Access™ Supine“ krūtinės prietaisui

RT-4546-05

„Opti-Handle™“ termoplastiko adapteris, skirtas
„Access™ Supine“ krūtinės prietaisui

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

BENDROSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

ISPĖJAMIEJI PRANEŠIMAI

! ĮSPĖJIMAS ! ŠIOS ĮRANGOS JOKIU BŪDU NEGALIMA KEISTI. JEI KURI NORS ŠIO PRIETAISO DALIS PATIRIA KATASTROFIŠKĄ APKROVĄ, ATRODO SUGADINTA ARBA VEIKIA NETINKAMAI, NEDELSDAMI LIAUKITĖS NAUDOTI IR SUSISIEKITE SU „CQ MEDICAL“ TELEFONO NUMERIU +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ARBA EL. PAŠTO ADRESU SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

GYDOMOJO SPINDULIO SLOPINIMAS

Gydant bet koku prietaisu, padidės odą veikianti dozė. Termoplastinės kaukės silpnina spindulinės terapijos spindulį ir didina odai tenkančią dozę. Planuojant ir gydant reikia atsižvelgti į silpninimą ir padidėjusią odai tenkančią dozę.

MR SAUGOS INFORMACIJA

MR Neklinikiniai tyrimai parodė, kad RT-4546-04 „Portrait™“ galvos ir kaklo kaukės adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, RT-4546-03 „Portrait™“ galvos kaukės adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, ir RT-4546-05 „Opti-Handle™“ termoplastiko adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, yra saugūs naudoti MR aplinkoje. RT-4546-04 „Portrait™“ galvos ir kaklo kaukės adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, RT-4546-03 „Portrait™“ galvos kaukės adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, ir RT-4546-05 „Opti-Handle™“ termoplastiko adapteris, skirtas „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, gali būti naudojami MR aplinkoje.

- RT-4546-04 „Portrait™“ galvos ir kaklo kaukės adapterį, skirtą „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, RT-4546-03 „Portrait™“ galvos kaukės adapterį, skirtą „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, ir RT-4546-05 „Opti-Handle™“ termoplastiko adapterį, skirtą „Access™ Supine“ krūtinės prietaisui, reikia naudoti kartu su MR aplinkoje saugia „Access™ Supine“ (RT-4546MRI) versija pagal numatytąją jo paskirtį prieš skenuojant.
- MR aplinkoje saugi „Access™ Supine“ (RT-4546MRI) versija yra aiškiai pažymėta šiuo simboliu: **MR**

ISPĖJAMOSIOS ETIKETĖS IR APRAŠAI

www.CQmedical.com rasite išvardytus simbolius ir jų aprašymus.





SAUGU NAUDOTI MR APLINKOJE

Šis gaminyss, kiek žinoma, nekelia pavojaus jį paveikus bet kokiaje MR aplinkoje. MR aplinkoje naudoti saugios priemonės pagamintos iš medžiagų, kurios yra elektrai nelaidžios, nemetalinės ir nemagnetinės.




NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS

Tik galva

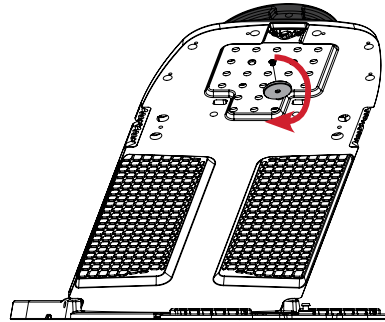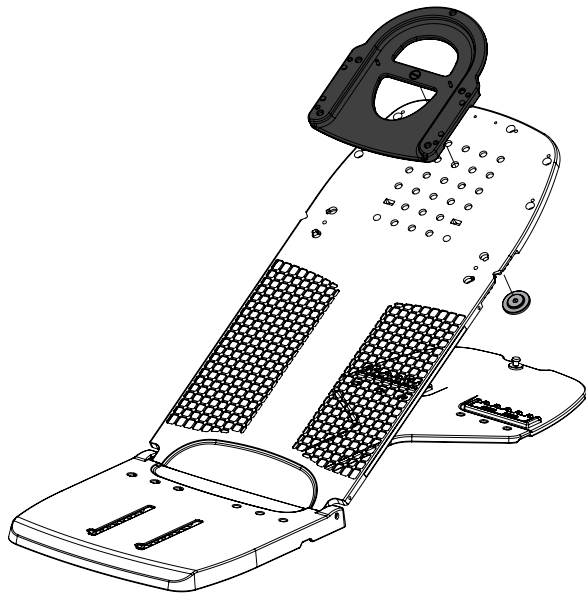

Galva ir pečiai

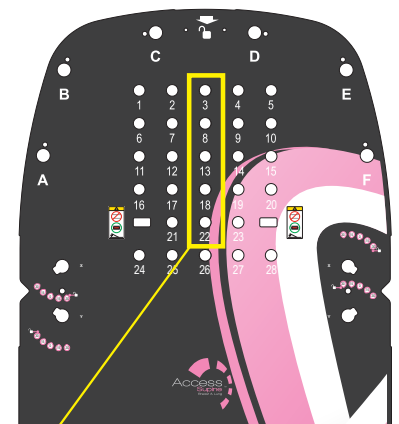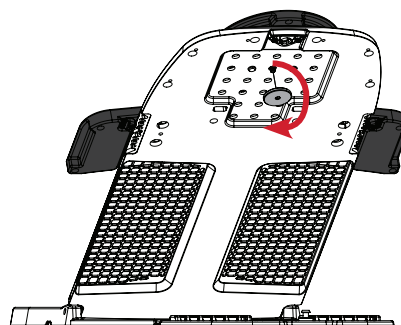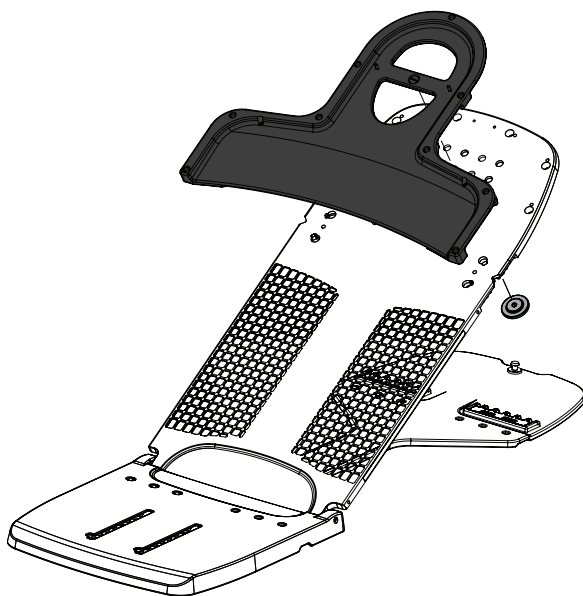


Pritvirtinkite „Portrait™“ kaukės adapterį prie „Access™ Supine“ naudodami 3, 8, 13, 18 arba 22 angą.


NAUDOJIMO NURODYMAI

JEI REIKIA, SUREGULIUOKITE APSAUGODAMI NUO PAJUDĖJIMO

Pasukite, kad
priveržtumėte

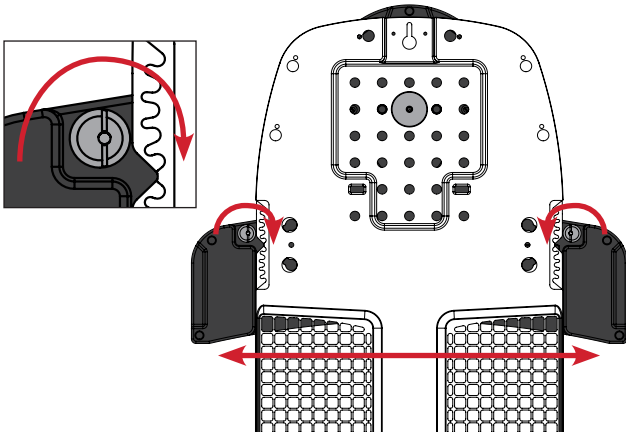



Užfiksiuota

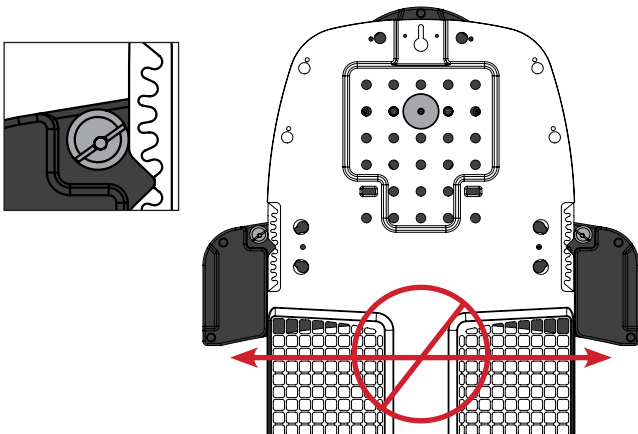



NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS

Tik galva

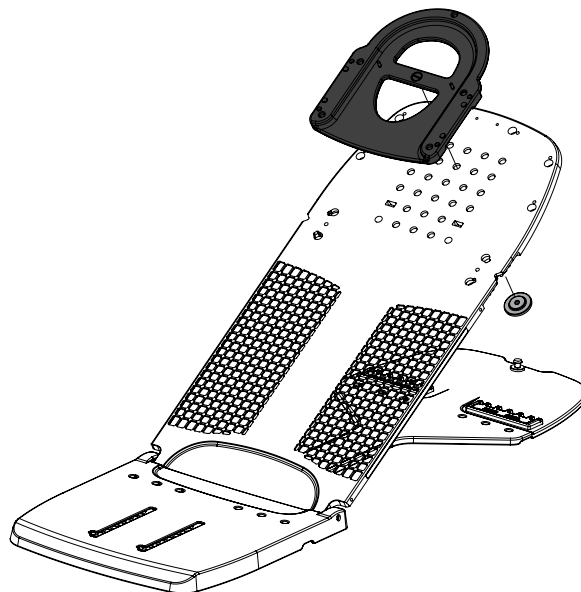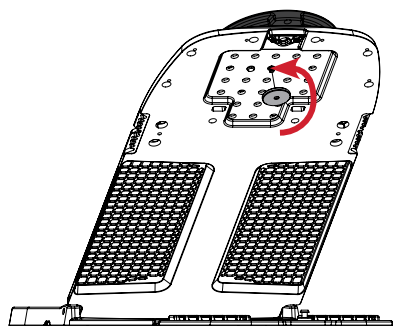

Galva ir pečiai

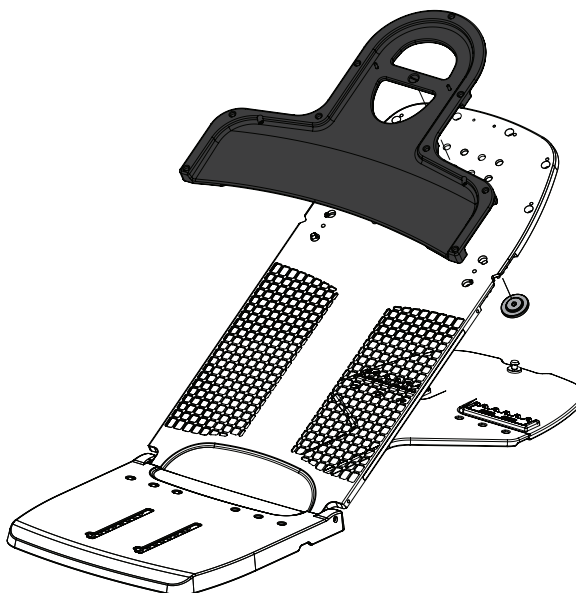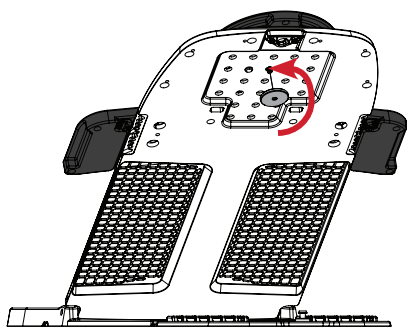


NAUDOJIMO NURODYMAI


NUSTATYMAS

„Opti-Handle™“ termoplastiko adapteris


1 veiksmas

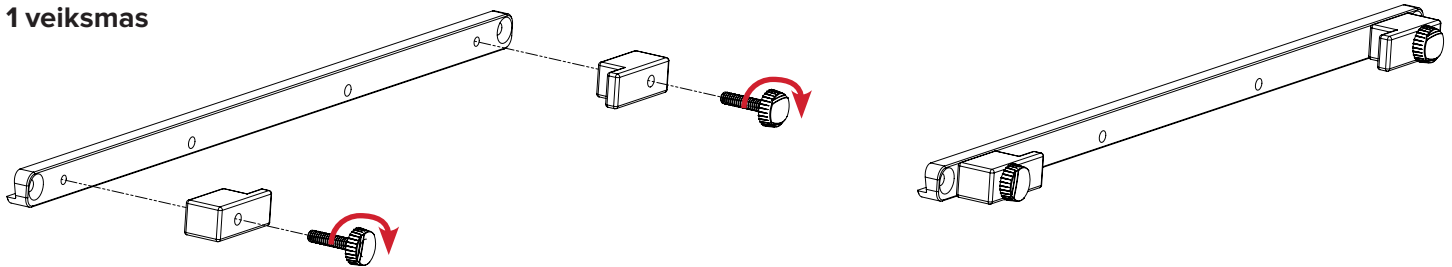

2 veiksmas

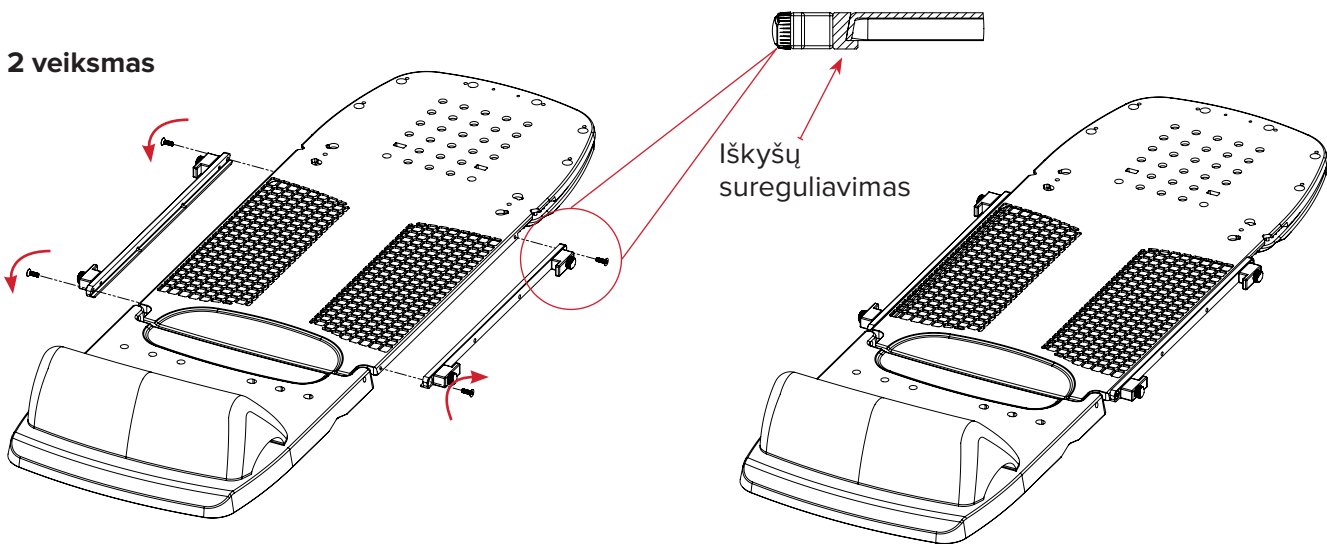

3 veiksmas

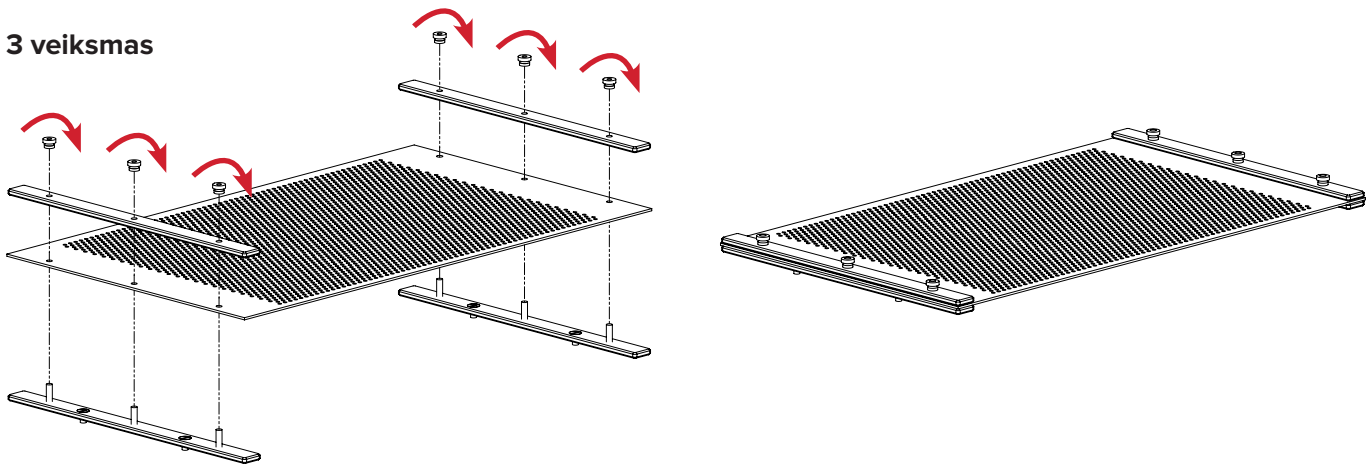

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUSTATYMAS


4 veiksmas

Paciento nustatymas ant „Access Supine“ krūtinės prietaiso.

! PASTABA ! Naudojimo instrukcijas, gaminio funkcijas, specifikacijas, išpėjimus, atsargumo priemones ir kitas bendrąsias atsargumo priemones, susijusias su „Access Supine“ krūtinės prietaiso naudojimu, žr. „Access Supine“ (P/N 2004394) gaminio vadove ir naudojimo instrukcijoje.

Suminkštinkite termoplastiką (RT-1783P3) su pritvirtintomis „Opti-Handles“ (RT-4454-14).

Atlikite 4A, 4B, 4C ir 4D veiksmus abiejose termoplastiko pusėse.

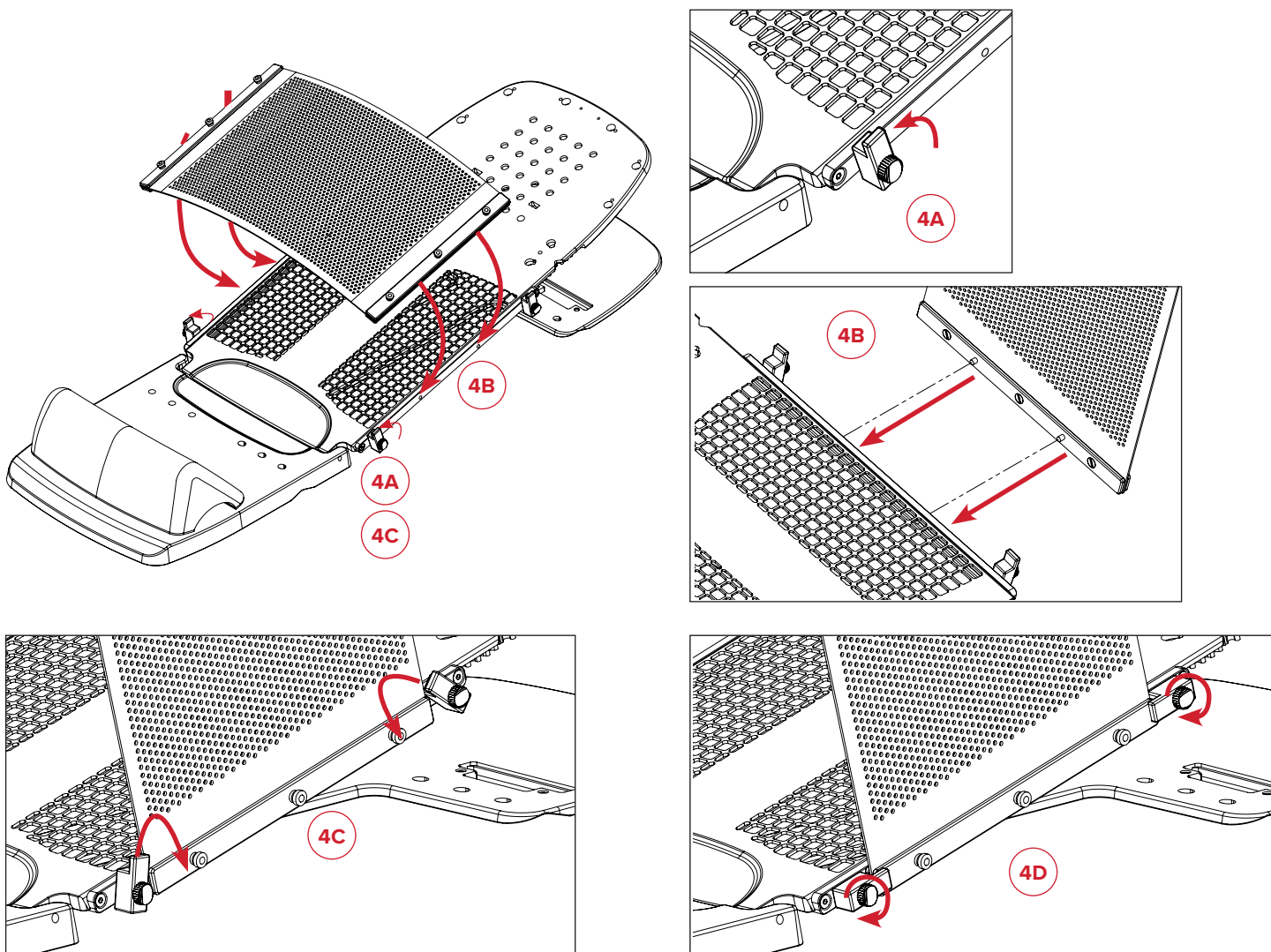

NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS





„Opti-Handle™“ termoplastiko adapteris

1 veiksmas

Atlikite 1A, 1B ir 1C veiksmus abejose termoplastiko pusėse.

Patraukite pacientą nuo „Access Supine“ krūtinės prietaiso.


! PASTABA ! Naudojimo instrukcijas, gaminio funkcijas, specifikacijas, išpėjimus, atsargumo priemones ir kitas bendrąsias atsargumo priemones, susijusias su „Access Supine“ krūtinės prietaiso naudojimu, žr. „Access Supine“ (P/N 2004394) gaminio vadove ir naudojimo instrukcijoje.

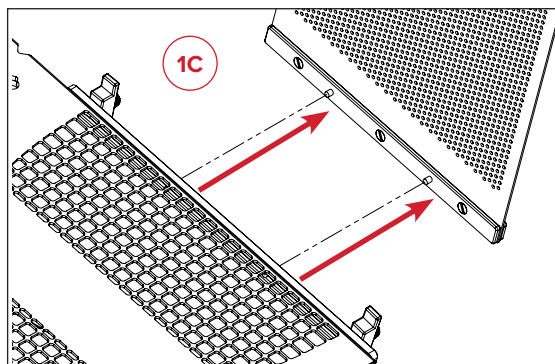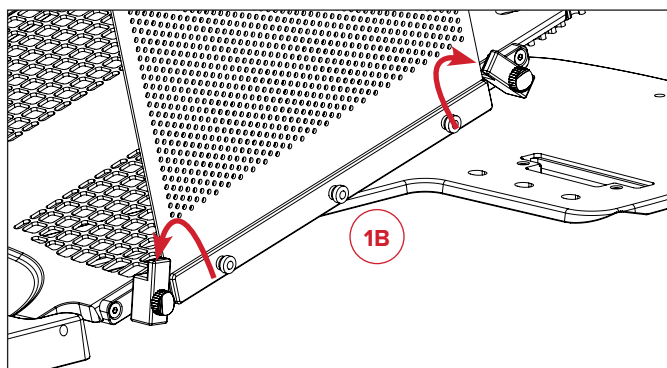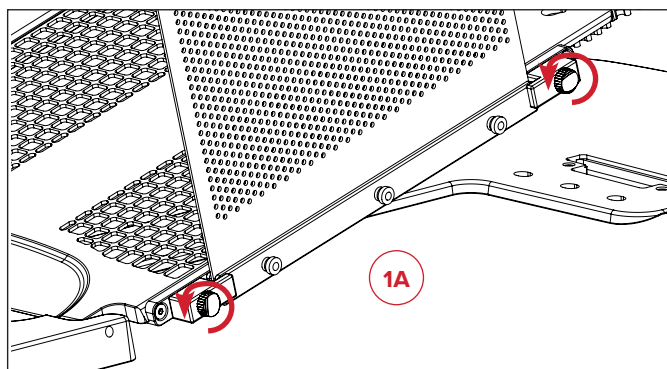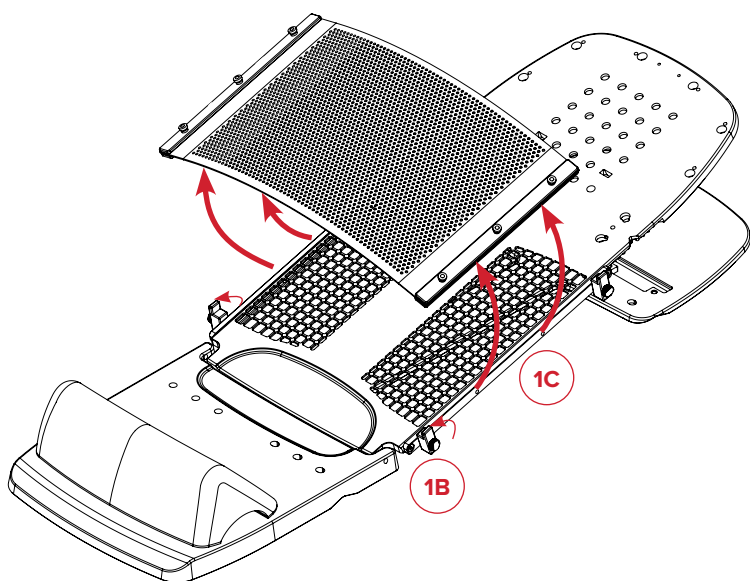



NAUDOJIMO NURODYMAI

NUĖMIMAS

2 veiksmas

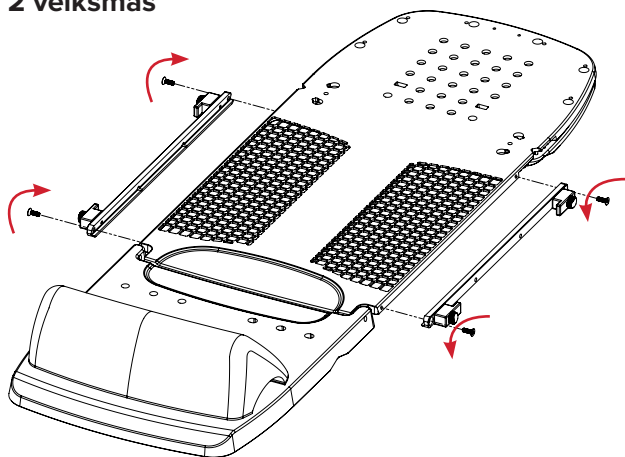

3 veiksmas

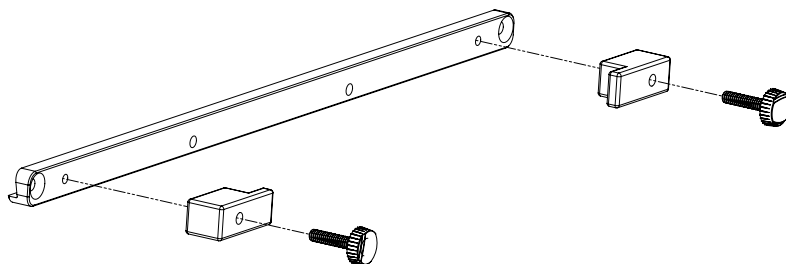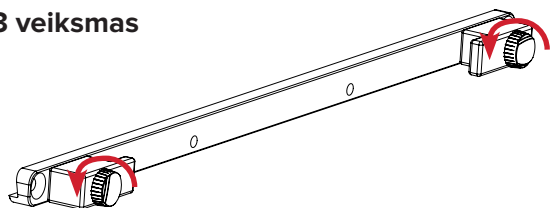

DALIŲ SĄRAŠAS

RT-4546-03 IR RT-4546-04

Suderinamas su „Portrait™“ S formos kaukėmis

RT-4546-05

Suderinamas su RT-1783P3, „Aquaplast RT®“ lakštu, 12 X 18 col., 2,4 mm, „Perf“

Suderinamas su RT-4454-14, 35,56 cm (14 col.) „Opti-Handle“, 2 vnt. rinkinys



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com