



IZSTRĀDĀJUMA CELVEDIS UN LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

RT-4546-03

Portrait™ Head Only maskas adapters
Access™ Supine krūšu ierīcei

RT-4546-04

Portrait™ Head & Neck maskas adapters
Access™ Supine krūšu ierīcei

RT-4546-05

Opti-Handle™ termoplastmasas adapters
Access™ Supine krūšu ierīcei

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

VISPĀRĒJIE PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

BRĪDINĀJUMU PAZIŅOJUMI

! BRĪDINĀJUMS ! NAV PIELAUJAMA NEKĀDA VEIDA APRĪKOJUMA PĀRVEIDOŠANA. JA JEBKURA ŠĪS IERĪCES DAĻA IR TIKUSI KĀTASTROFĀLI PĀRSLOGOTA, IZSKATĀS BOJĀTA VAI DARBOJAS NEPAREIZI, NEKAVĒJOTIES PĀRTRAUCIET TĀS LIETOŠANU UN SAZINIETIES AR UZŅĒMUMU "CQ MEDICAL" PA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 VAI SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

TERAPIJAS STARU KŪĻA VĀJINĀŠANA

Ārstēšana ar jebkuru ierīci izraisīs ādas saņemtās dozas palielināšanos. Termoplastmasas maskas vājinās staru terapijas staru kūli un palielinās ādas saņemto dozu. Plānošanas un terapijas laikā ir jāņem vērā vājinājums un paaugstināta ādas saņemtā doza.

MR DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

MR Neklīniskajās pārbaudēs ir pierādīts, ka **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck maskas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei, RT-4546-03 Portrait™ Head Only maskas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei un RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastmasas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei** ir drošs lietošanai MR vidē. **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck maskas adapteru Access™ Supine krūšu ierīcei, RT-4546-03 Portrait™ Head Only maskas adapteru Access™ Supine krūšu ierīcei un RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastmasas adapteru Access™ Supine krūšu ierīcei** var izmantot MR vidē.

- **RT-4546-04 Portrait™ Head & Neck maskas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei, RT-4546-03 Portrait™ Head Only maskas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei un RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastmasas adapters Access™ Supine krūšu ierīcei jāizmanto kopā ar Access™ Supine (RT-4546MRI) MR vidē drošo versiju saskaņā ar tā paredzēto lietojumu.**
- **Access™ Supine (RT-4546MRI) MR vidē drošā versija ir skaidri marķēta ar šādu simbolu:**



BRĪDINĀJUMA MARĶĒJUMI UN APRAKSTI

Simbolu un to skaidrojumu sarakstu skatiet vietnē www.CQmedical.com.





MR SAFE

Vienums nerada zināmus apdraudējumus nevienā no magnētiskās rezonanses (MR) vidēm. MR vidē drošie vienumi ir izgatavoti no materiāliem, kas nevada elektrību, nesatur metālu un nav magnētiski.




LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA

Head Only

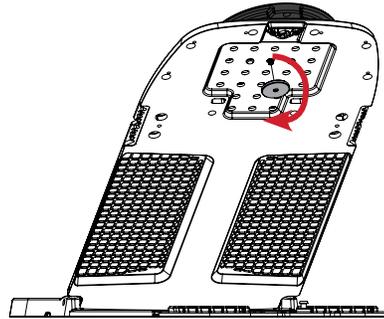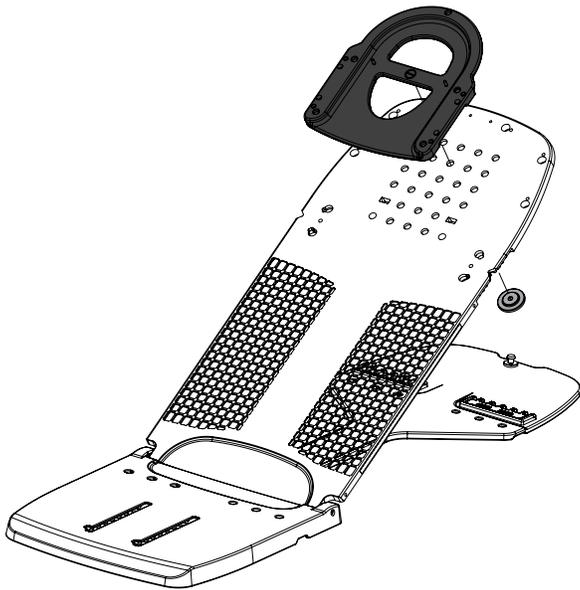

Head & Shoulder

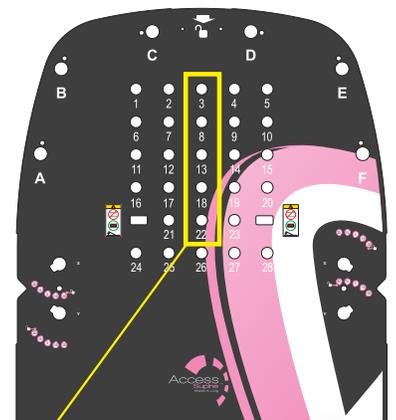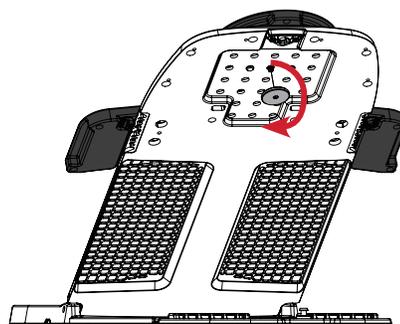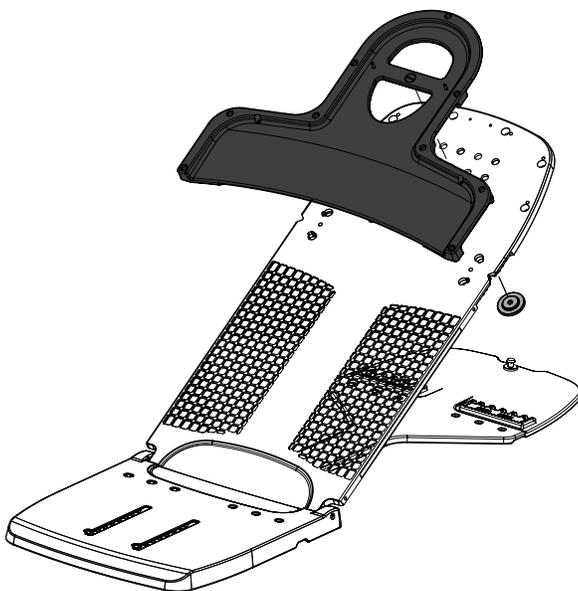


Piestipriniet Portrait™ maskas adapteru pie Access™ Supine, izmantojot 3., 8., 13., 18. vai 22. atveri.


LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

JA NEPIECIEŠAMS, NOREGULĒJIET, LAI NOVĒRSTU KUSTĪBU

Pagrieziet, lai pievilktu

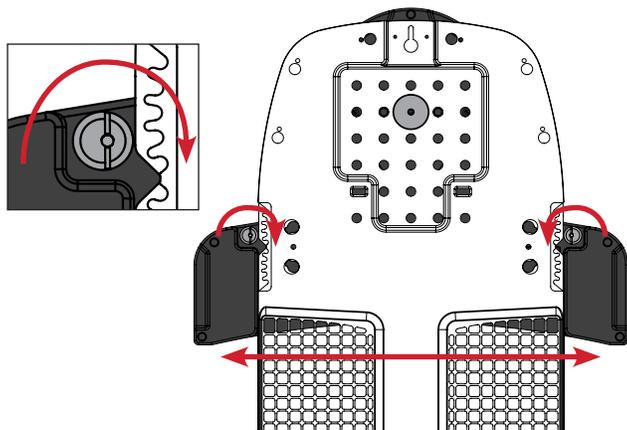



Blokēts

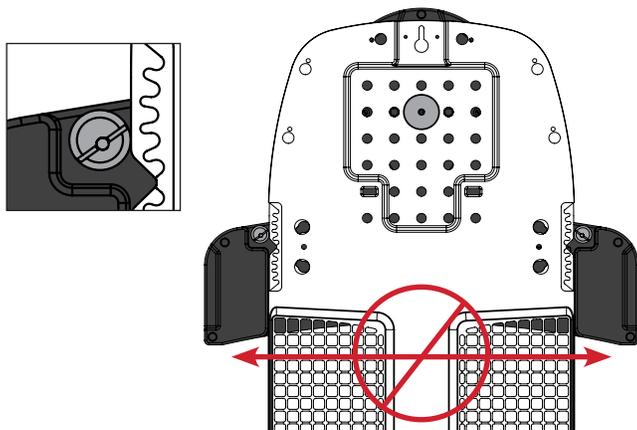



LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NOŅEMŠANA

Head Only

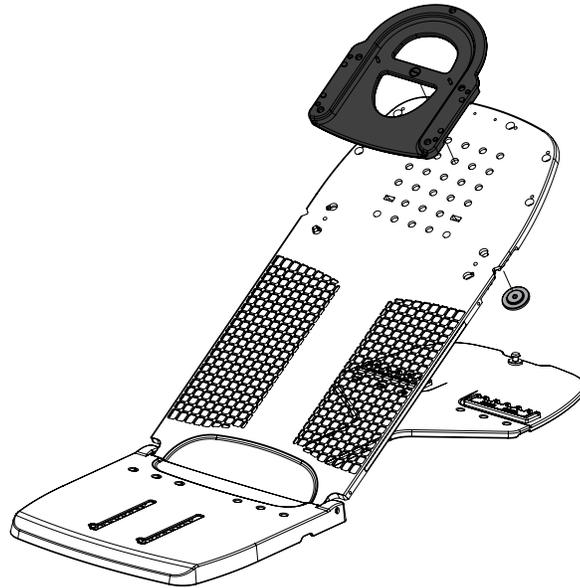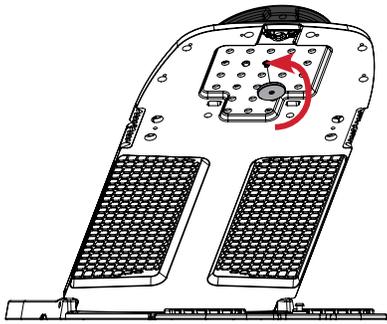

Head & Shoulder

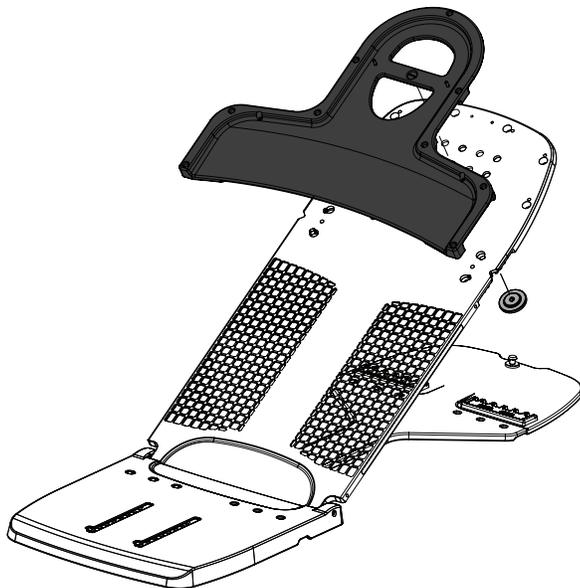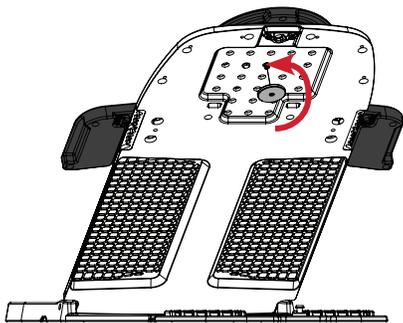


LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS


UZSTĀDĪŠANA

Opti-Handle™ termoplastmasas adapters


1. darbība

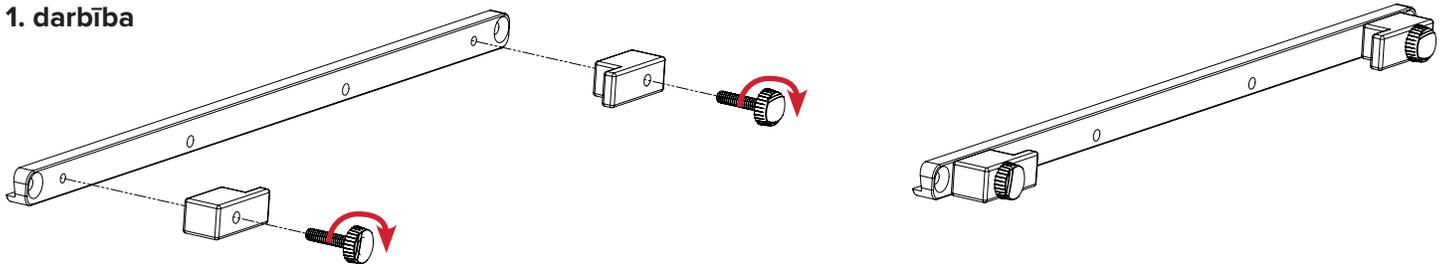

2. darbība

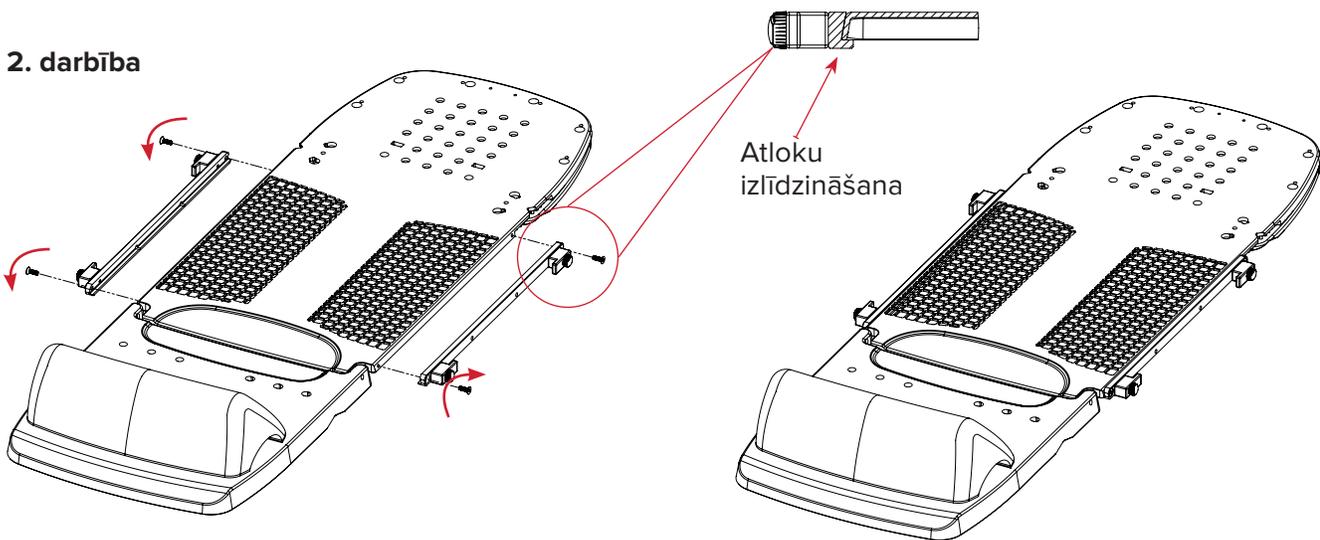

3. darbība

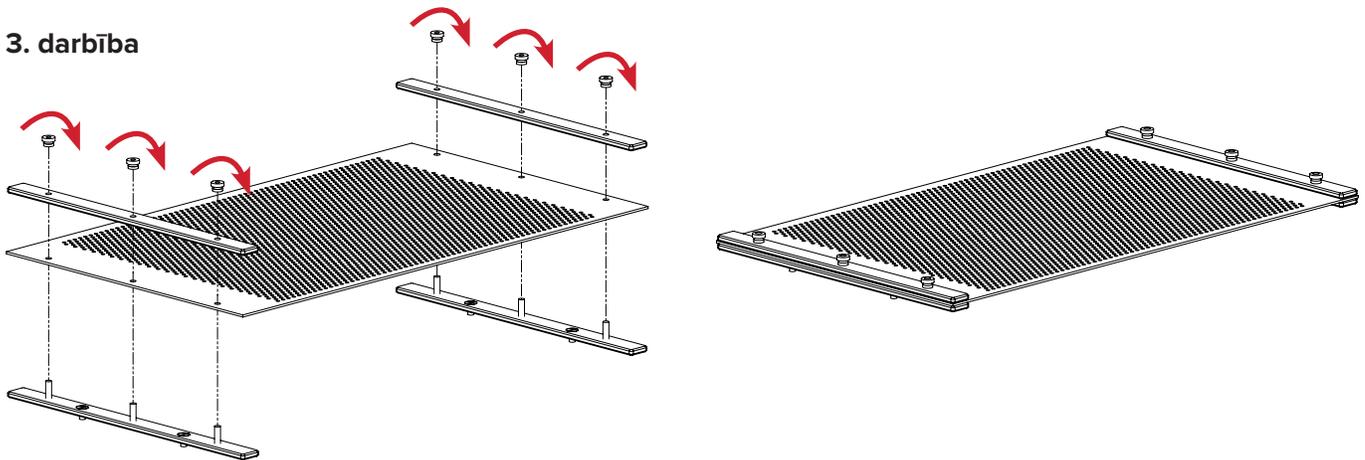

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

UZSTĀDĪŠANA


4. darbība

Novietojiet pacientu uz Access Supine krūšu ierīces.

! PIEZĪME ! Lietošanas instrukcijas, izstrādājuma funkcijas, specifikācijas, brīdinājumus, uzmanības norādes un citus vispārīgus piesardzības pasākumus, kas attiecas uz Access Supine krūšu ierīces lietošanu skatiet Access Supine (P/N 2004394) izstrādājuma ceļvedī un lietotāja rokasgrāmatā.

Mīkstiniet termoplastmasu (RT-1783P3) ar piestiprinātiem Opti-Handles (RT-4454-14).

Izpildiet darbības 4A, 4B, 4C un 4D abās termoplastmasas pusēs.

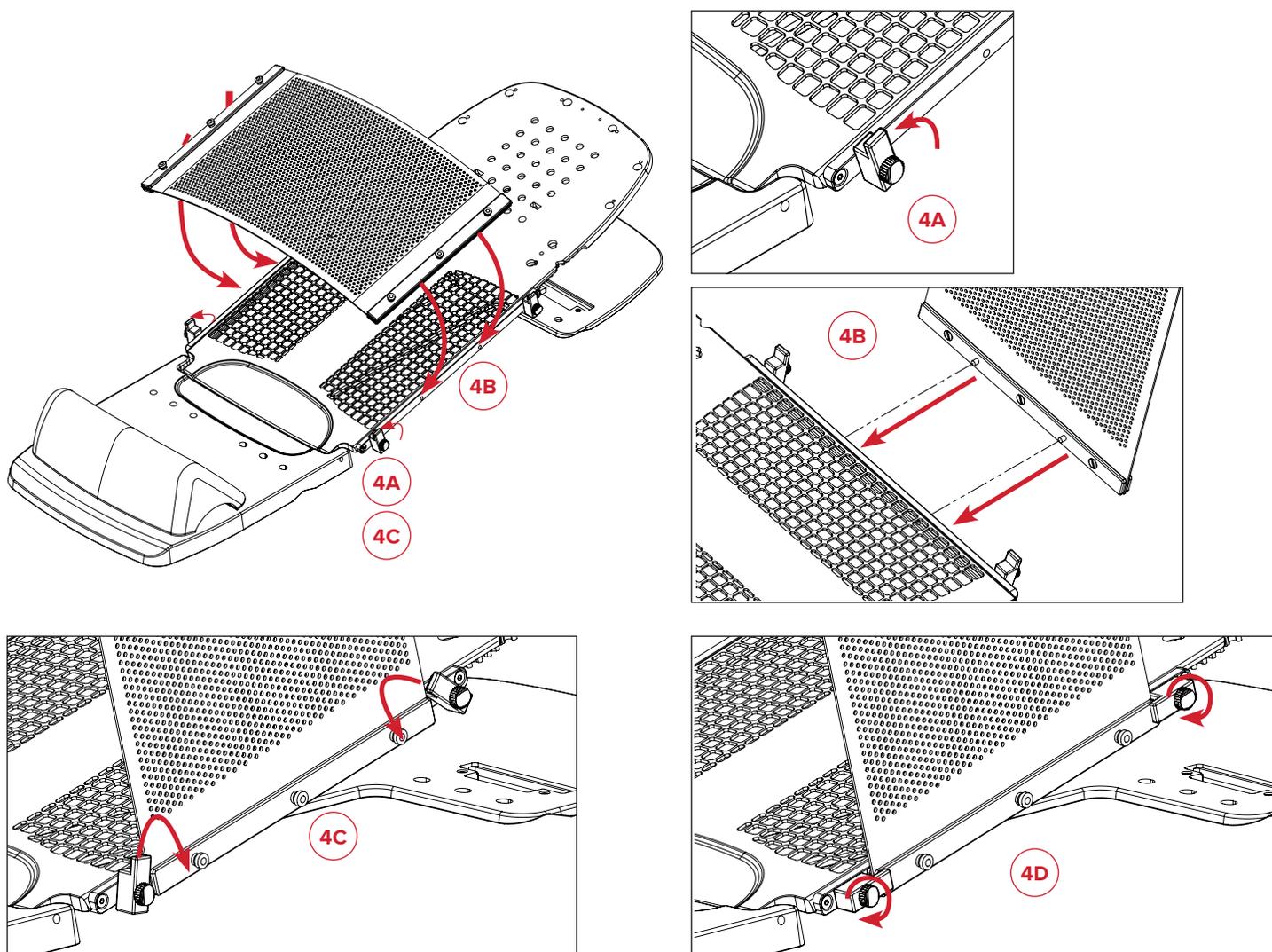

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NOŅEMŠANA





Opti-Handle™ termoplastmasas adapters

1. darbība

Izpildiet darbības 1A, 1B un 1C abās termoplastmasas pusēs.

Noņemiet pacientu no Access Supine krūšu ierīces.


! PIEZĪME ! Lietošanas instrukcijas, izstrādājuma funkcijas, specifikācijas, brīdinājumus, uzmanības norādes un citus vispārīgus piesardzības pasākumus, kas attiecas uz Access Supine krūšu ierīces lietošanu skatiet Access Supine (P/N 2004394) izstrādājuma ceļvedī un lietotāja rokasgrāmātā.

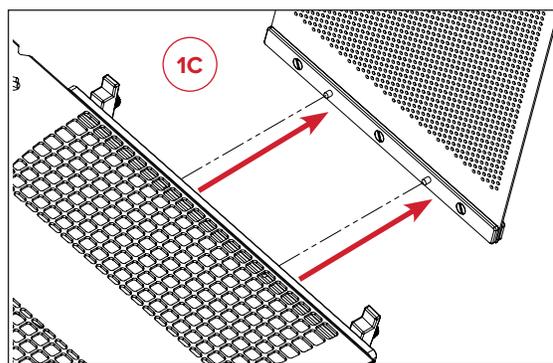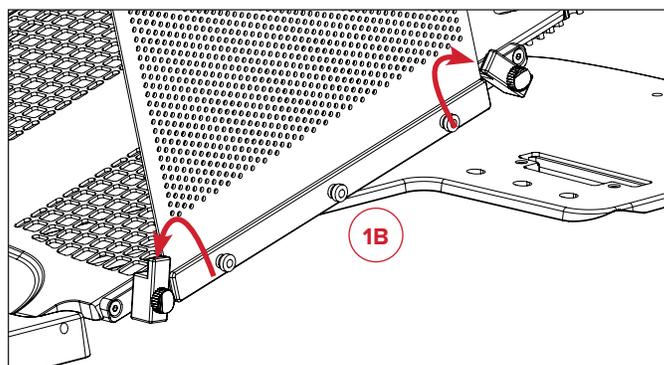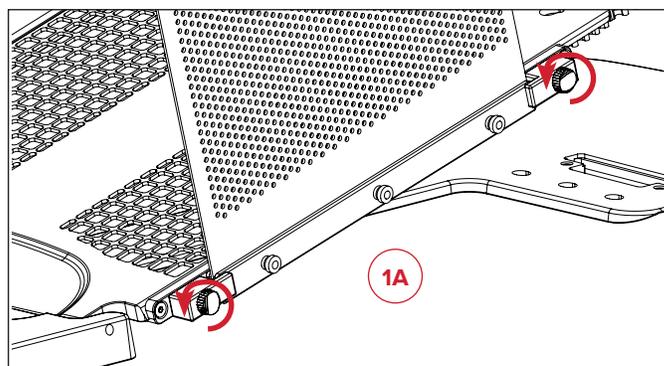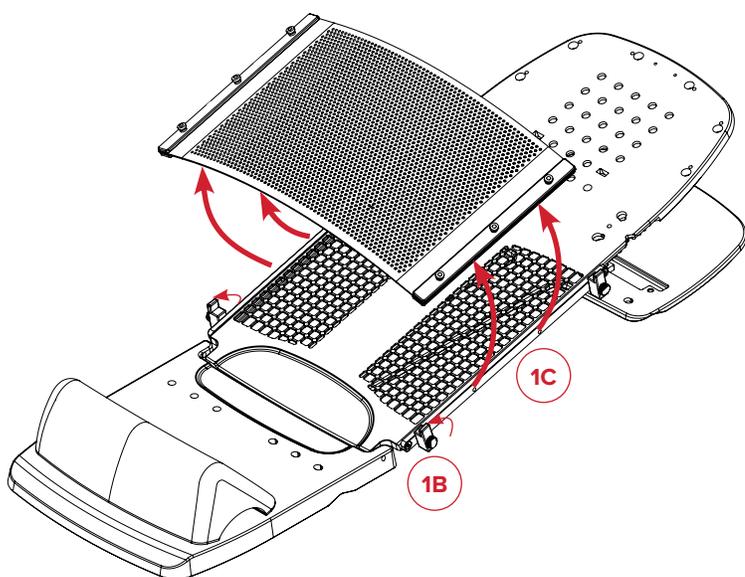



LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

NONĒMŠANA

2. darbība

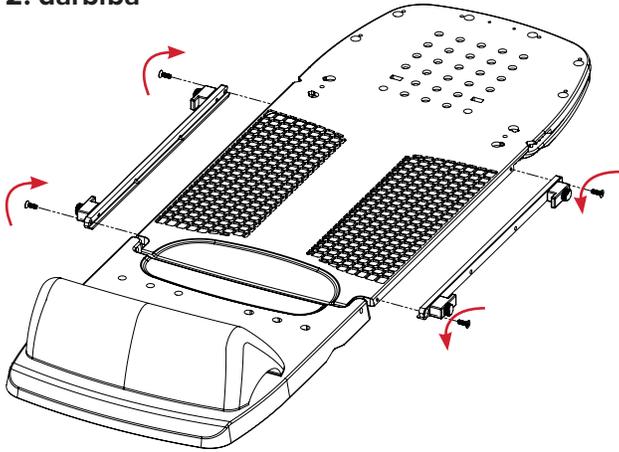

3. darbība

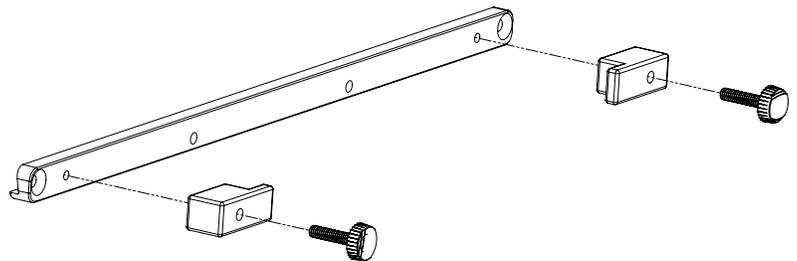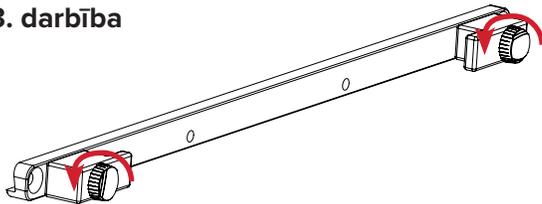

DAĻU SARAKSTS

RT-4546-03 UN RT-4546-04

Saderīgs ar Portrait™ S Frame maskām

RT-4546-05

Saderīgs ar RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Saderīgs ar RT-4454-14, 35,56 cm (14 collas) Opti-Handles, komplektā 2 gab.



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com