



positioning
patients for life.®

PRODUCTHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4546-03

Portrait™-maskeradapter voor alleen het hoofd voor
Access™ Supine-borsthulpmiddel

RT-4546-04

Portrait™ hoofd- en nekmaskeradapter voor
Access™ Supine-borsthulpmiddel

RT-4546-05

Opti-Handle™ thermoplastische adapter voor
Access™ Supine-borsthulpmiddel

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

VERZWAKKING VAN DE BEHANDELINGSBUNDEL

Behandeling via een hulpmiddel leidt tot een toename van de huiddosis. Thermoplastische maskers verzwakken een radiotherapiebundel en verhogen de huiddosis. Tijdens de planning en behandeling moet rekening worden gehouden met verzwakking en een verhoogde huiddosis.

MRI-VEILIGHEIDSINFORMATIE

 Niet-klinische tests hebben uitgewezen dat de **RT-4546-04 Portrait™** hoofd- en nekmaskeradapter voor **Access™** Supine-borsthulpmiddel, **RT-4546-03 Portrait™** -maskeradapter voor alleen het hoofd voor **Access™** Supine-borsthulpmiddel en **RT-4546-05 Opti-Handle™** thermoplastische adapter voor **Access™** Supine-borsthulpmiddel MRI-veilig zijn. **RT-4546-04 Portrait™** hoofd- en nekmaskeradapter voor het **Access™** Supine-borsthulpmiddel, **RT-4546-03 Portrait™** -maskeradapter voor alleen het hoofd van het **Access™** Supine-borsthulpmiddel en **RT-4546-05 Opti-Handle™** thermoplastische adapter voor het **Access™** Supine-borsthulpmiddel kunnen worden gebruikt in een MRI-omgeving.

- De **RT-4546-04 Portrait™** hoofd- en nekmaskeradapter voor het **Access™** Supine-borsthulpmiddel, **RT-4546-03 Portrait™** -maskeradapter alleen hoofd voor het **Access™** Supine-borsthulpmiddel, en de **RT-4546-05 Opti-Handle™** thermoplastische adapter voor het **Access™** Supine-borsthulpmiddel moet worden gebruikt in combinatie met de MRI-veilige versie van de **Access™** Supine (**RT-4546MRI**) in overeenstemming met het beoogde gebruik voorafgaand aan het scannen.
- De MRI-veilige versie van de **Access™** Supine (**RT-4546MRI**) is duidelijk voorzien van het volgende symbool: 

WAARSCHUWINGSLABELS EN BESCHRIJVINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.





MRI-VEILIG

Hiermee wordt aangeduid dat een voorwerp geen bekende gevaren vormt door blootstelling aan een MRI-omgeving. Producten die MRI-veilig zijn, bestaan uit materialen die niet-geleidend, niet-metaal en niet-magnetisch zijn.




GEBRUIKSINSTRUCTIES

OPSTELLING

Alleen voor het hoofd

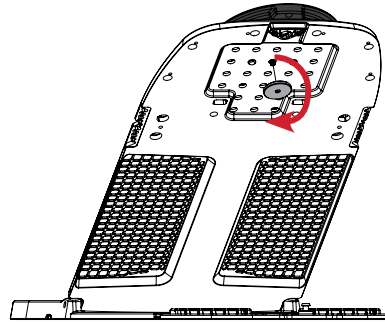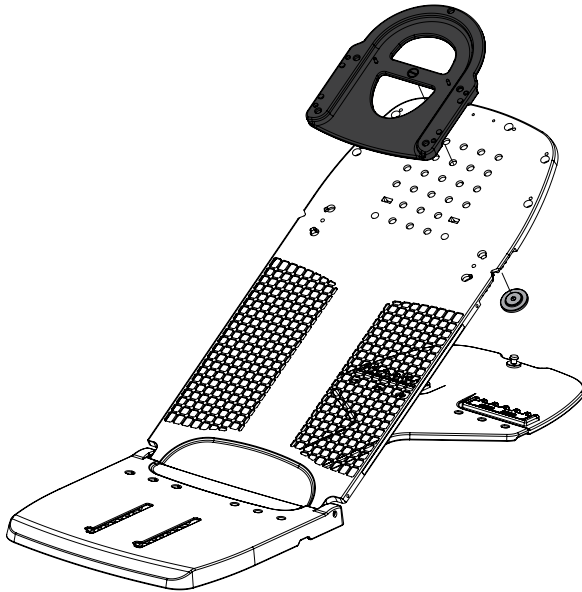

Hoofd en schouder

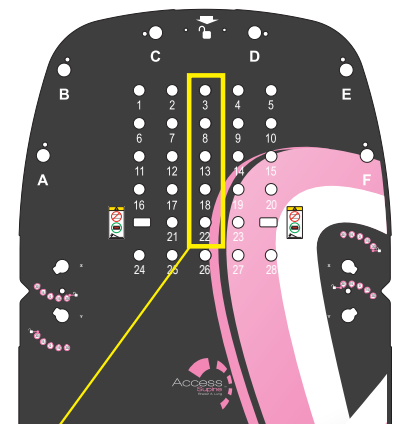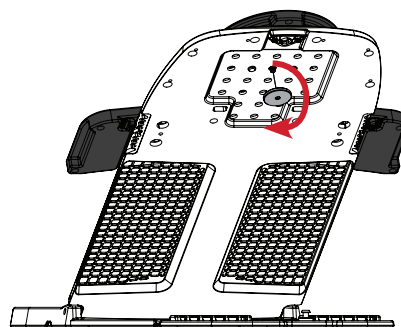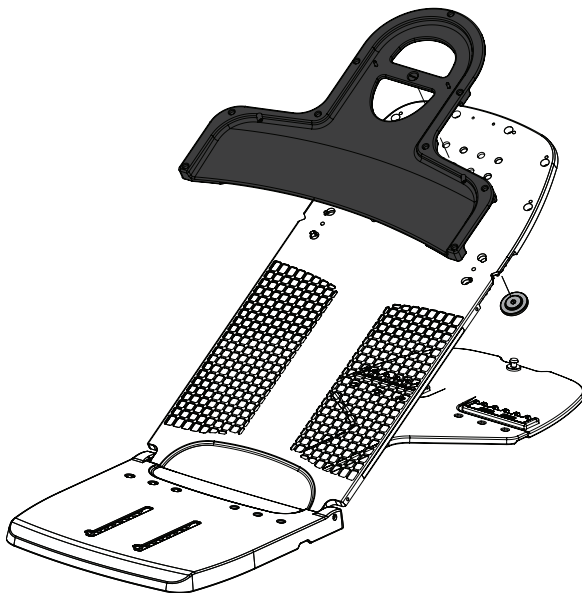


Bevestig de Portrait™-maskeradapter aan de Access™ Supine met behulp van gat 3, 8, 13, 18 of 22.


GEBRUIKSINSTRUCTIES

PAS DEZE ZO NODIG AAN OM BEWEGING TE ELIMINEREN

Draai om vast te zetten

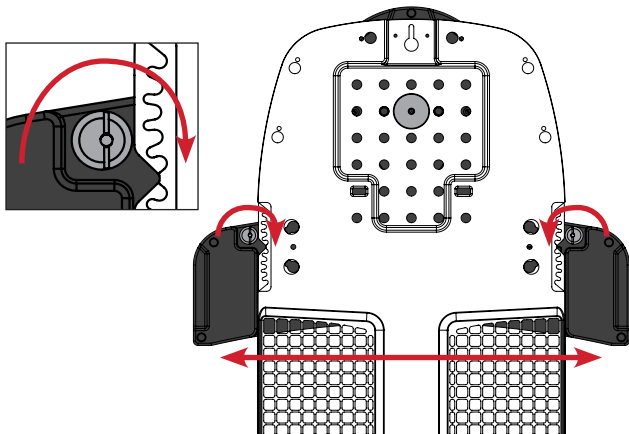



Vergrendeld

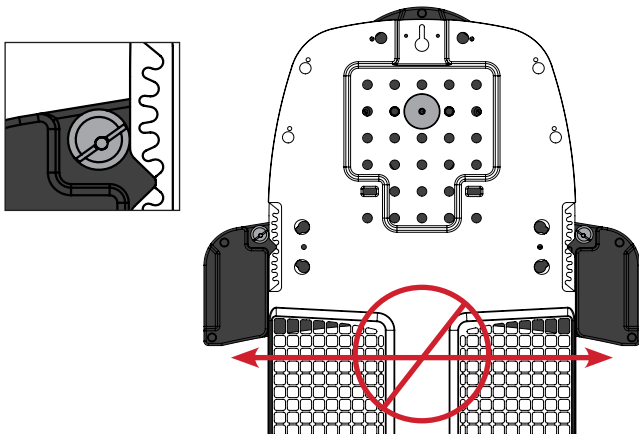



GEBRUIKSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

Alleen voor het hoofd

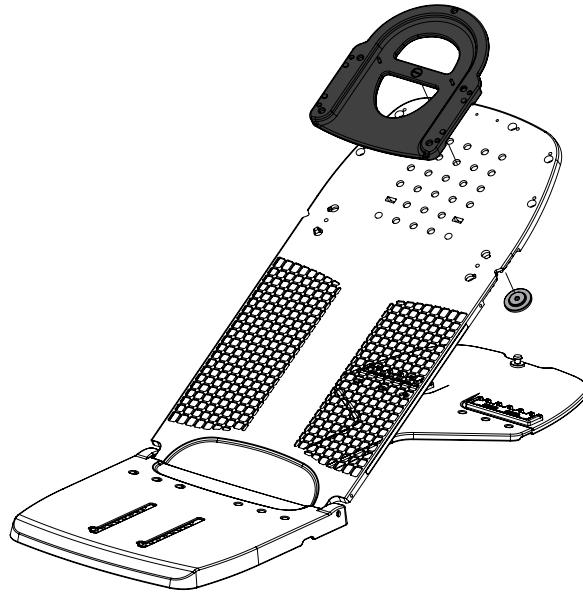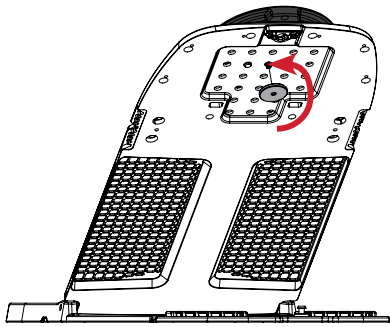

Hoofd en schouder

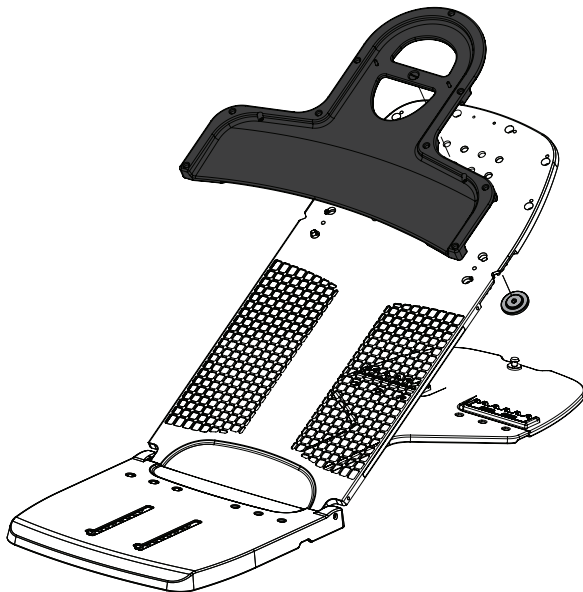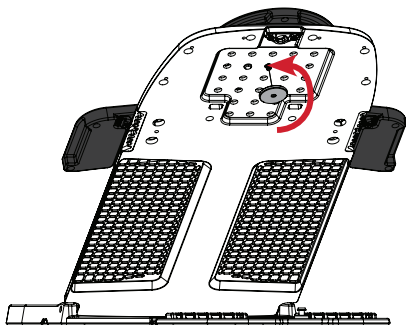


GEBRUIKSINSTRUCTIES


OPSTELLING

Opti-Handle™ thermoplastische adapter


Stap 1

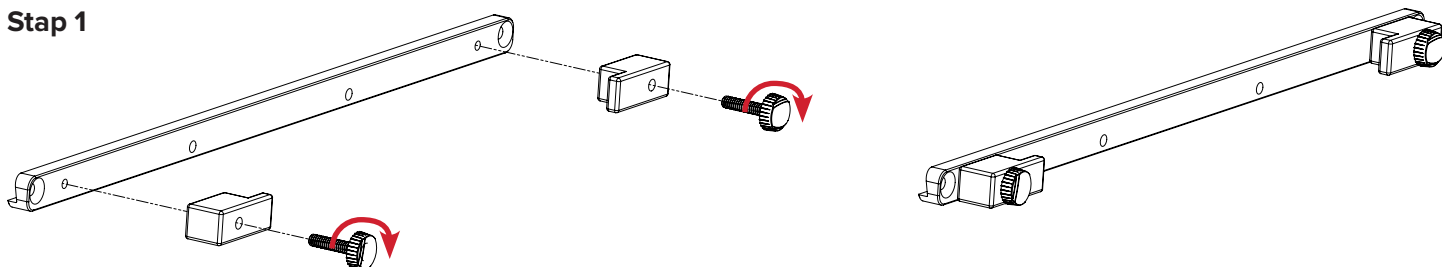

Stap 2

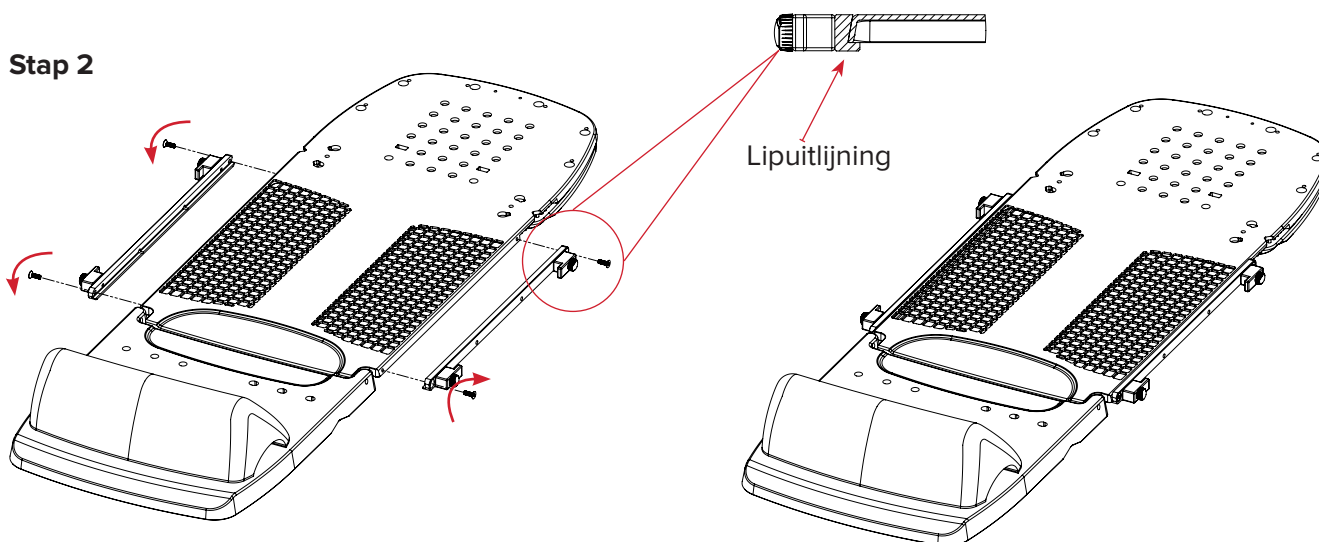

Stap 3

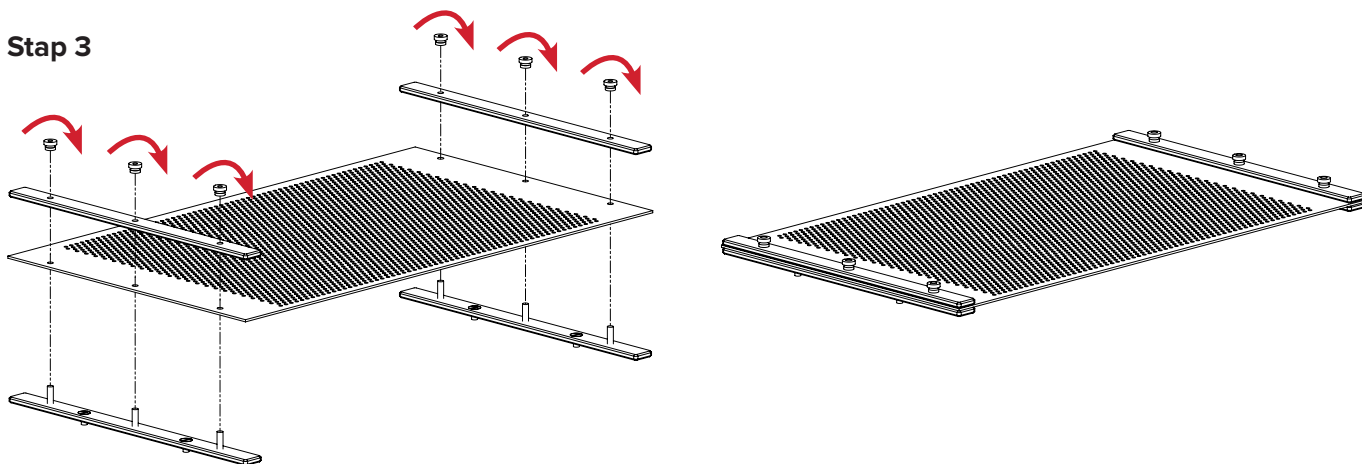

GEBRUIKSINSTRUCTIES

OPSTELLING


Stap 4

Stel de patiënt op op het Access Supine-borsthulpmiddel.

! OPMERKING ! Raadpleeg de producthandleiding en de gebruiksaanwijzing voor Access Supine (onderdeelnr. 2004394) voor gebruiksinstructies, productkenmerken, specificaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, en andere algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het Access Supine-borsthulpmiddel.

Maak de thermoplastische kunststof (RT-1783P3) zacht met de bevestigde Opti-Handles (RT-4454-14).

Voer stap 4A, 4B, 4C en 4D uit aan beide zijden van de thermoplastische kunststof.

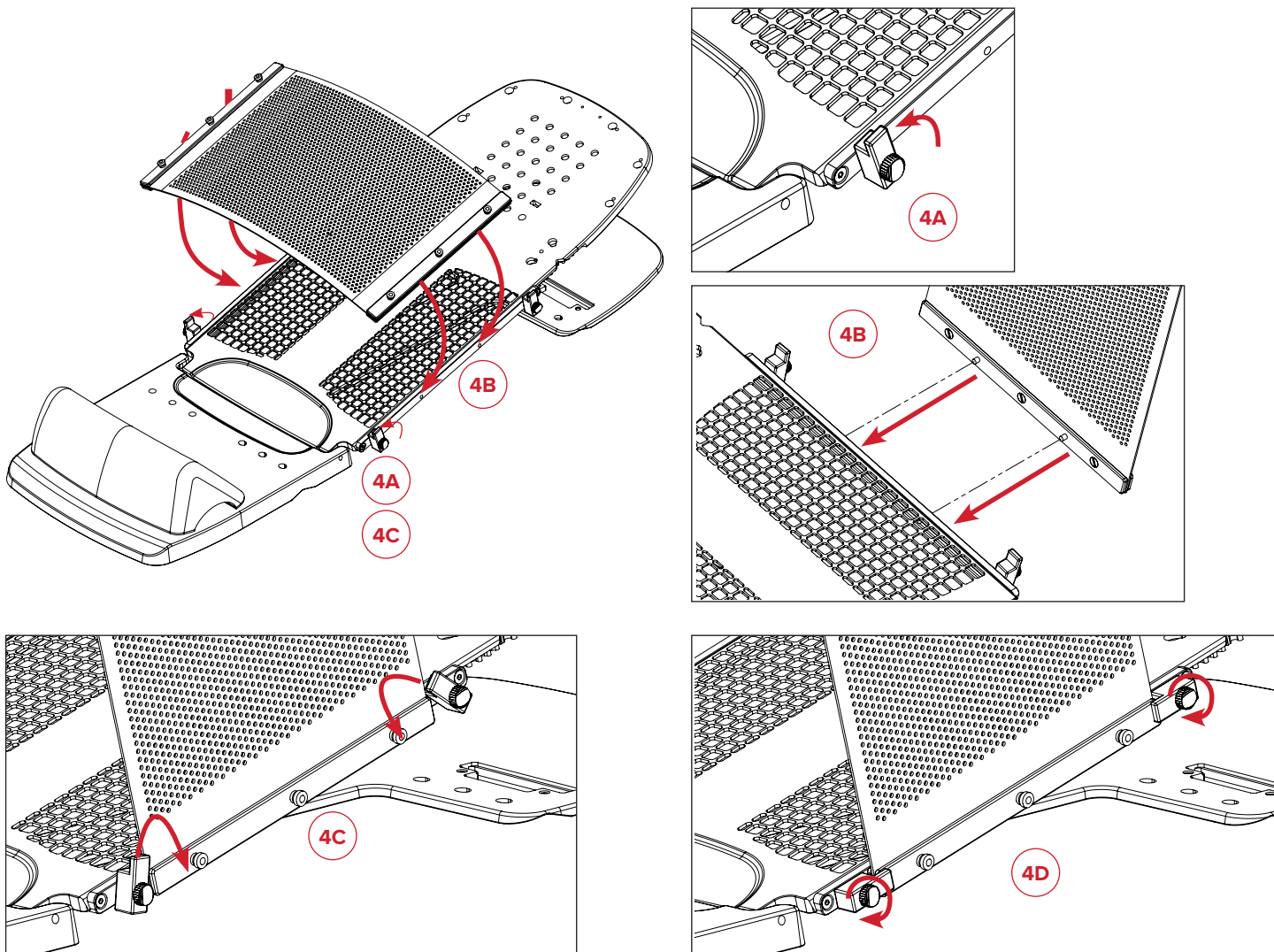

GEBRUIKSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN





Opti-Handle™ thermoplastische adapter

Stap 1

Voer stap 1A, 1B en 1C uit aan beide zijden van de thermoplastische kunststof.

Verwijder de patiënt van het Access Supine-borsthulpmiddel.


! OPMERKING ! Raadpleeg de producthandleiding en de gebruiksaanwijzing voor Access Supine (onderdeelnr. 2004394) voor gebruiksinstructies, productkenmerken, specificaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, en andere algemene voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van het Access Supine-borsthulpmiddel.

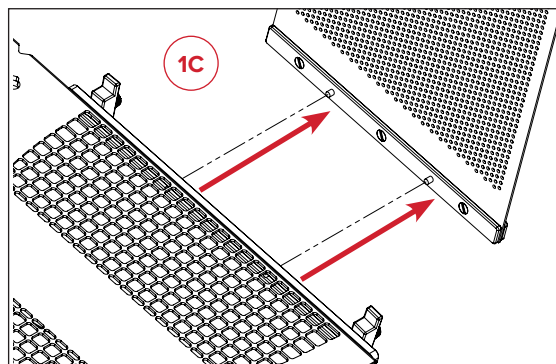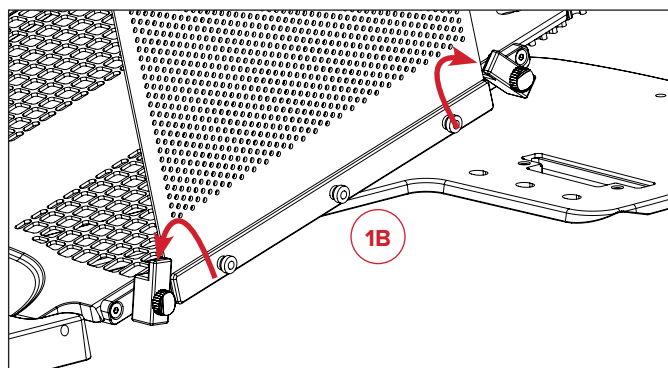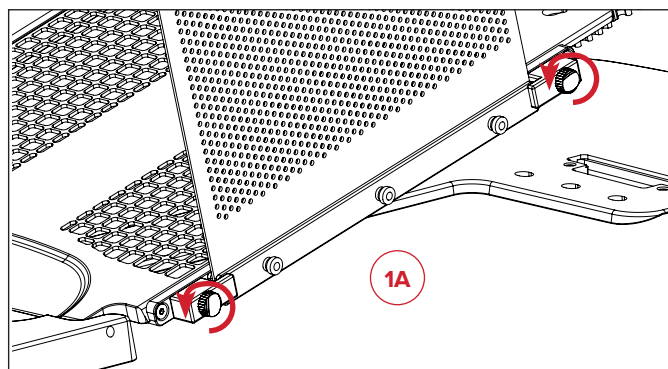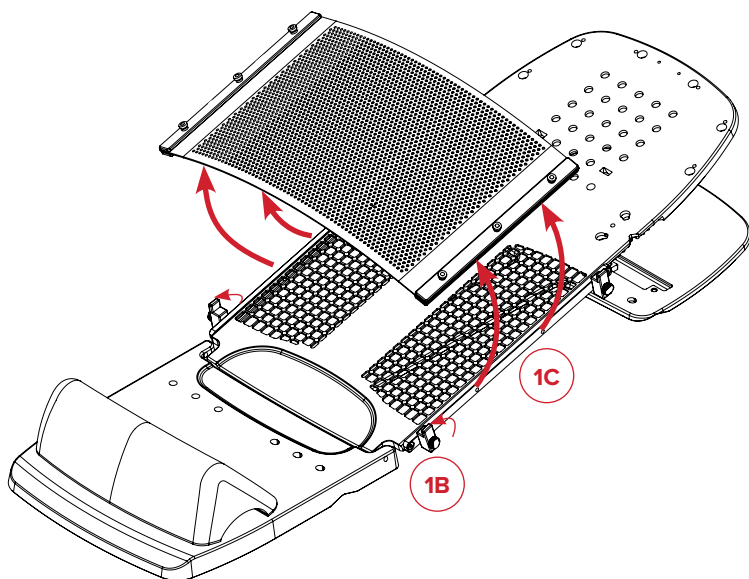



GEBRUIKSINSTRUCTIES

VERWIJDEREN

Stap 2

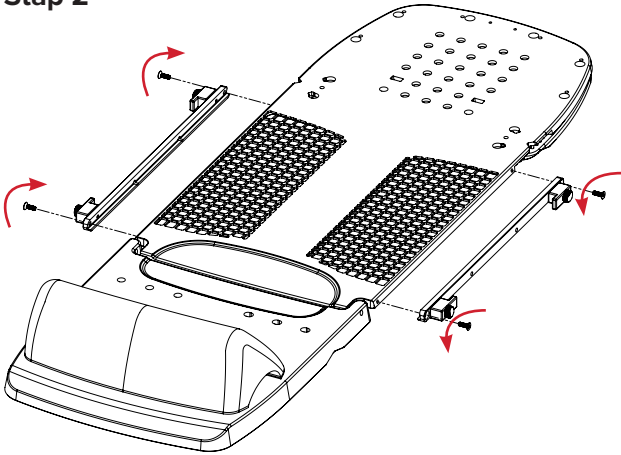

Stap 3

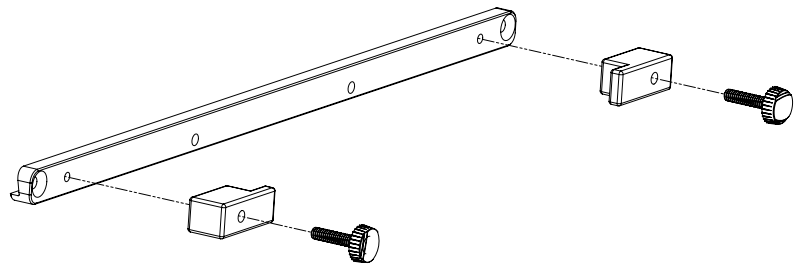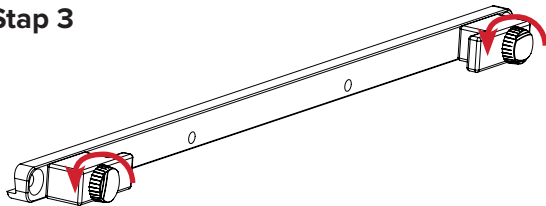

ONDERDELENLIJST

RT-4546-03 EN RT-4546-04

Compatibel met Portrait™ S-Frame-maskers

RT-4546-05

Compatibel met RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Compatibel met RT-4454-14, Opti-Handles van 35,56 cm (14 inch), set van 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_NL_A
2023-04