



GUIA DE PRODUTO E MANUAL DO USUÁRIO

RT-4546-03

Adaptador para máscara Portrait™ apenas para cabeça para Dispositivo de mama Access™ Supine

RT-4546-04

Adaptador para máscara Portrait™ para cabeça e pescoço para Dispositivo de mama Access™ Supine

RT-4546-05

Adaptador termoplástico Opti-Handle™ para Dispositivo de mama Access™ Supine

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

PRECAUÇÕES GERAIS

AVISOS DE ADVERTÊNCIA

! ADVERTÊNCIA ! NÃO É PERMITIDO FAZER NENHUMA MODIFICAÇÃO NESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PEÇA DESTE DISPOSITIVO RECEBER UMA CARGA CATASTRÓFICA, PARECER ESTAR DANIFICADO OU FUNCIONANDO INADEQUADAMENTE, INTERROMPA O USO IMEDIATAMENTE E ENTRE EM CONTATO COM A CQ MEDICAL PELO TELEFONE +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 OU PELO E-MAIL SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ATENUAÇÃO DO FEIXE DE TRATAMENTO

O tratamento por meio de qualquer dispositivo levará a um aumento na dose recebida pela pele. As máscaras termoplásticas atenuam um feixe de radioterapia e aumentam a dose recebida pela pele. A atenuação e o aumento da dosagem recebida pela pele devem ser levados em consideração durante o planejamento e o tratamento.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE RM

 Testes não clínicos demonstraram que o **Adaptador para máscara de cabeça e pescoço RT-4546-04 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine**, o **Adaptador para máscara apenas para cabeça RT-4546-03 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** e o **Adaptador termoplástico RT-4546-05 Opti-Handle™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** são seguros para ressonância magnética (RM). O **Adaptador para máscara de cabeça e pescoço RT-4546-04 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine**, o **Adaptador para máscara apenas para cabeça RT-4546-03 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** e o **Adaptador termoplástico RT-4546-05 Opti-Handle™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** podem ser usados em ambiente de RM.

- O **Adaptador para máscara para cabeça e pescoço RT-4546-04 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine**, o **Adaptador para máscara apenas para cabeça RT-4546-03 Portrait™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** e o **Adaptador termoplástico RT-4546-05 Opti-Handle™ para Dispositivo de mama Access™ Supine** devem ser usados com a versão "Seguro para RM" do Access™ Supine (RT-4546MRI), de acordo com seu uso pretendido antes do exame.
- A versão "Seguro para RM" do Access™ Supine (RT-4546MRI) está claramente identificada com o seguinte símbolo: 

ETIQUETAS E DESCRIÇÕES DE ADVERTÊNCIA

Veja uma lista de símbolos e suas definições em www.CQmedical.com.





SEGURO PARA RM

Um item que não possui nenhum tipo de risco conhecido resultante da exposição a qualquer ambiente de RM. Itens de designação "Seguro para RM" são compostos de materiais eletricamente não condutivos, não metálicos e não magnéticos.




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

Somente cabeça

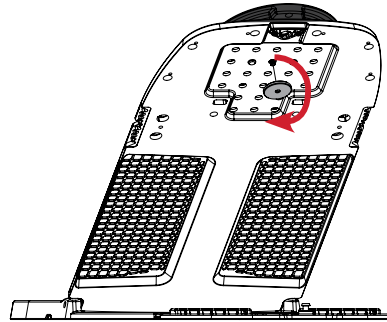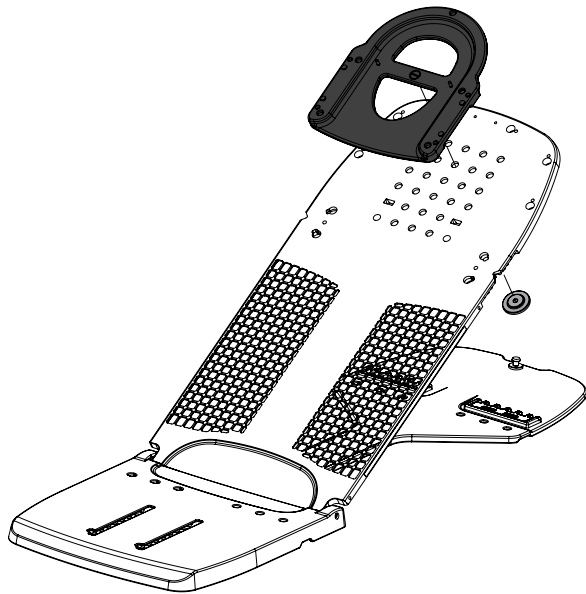

Cabeça e ombro

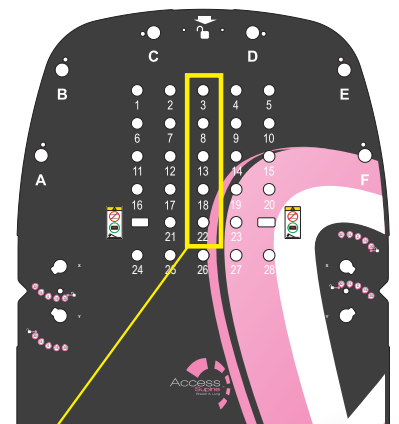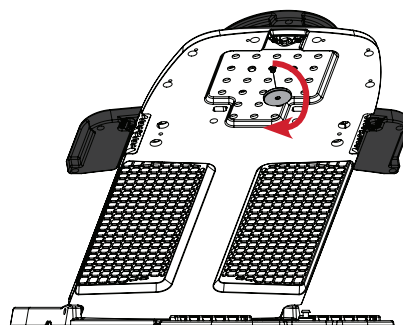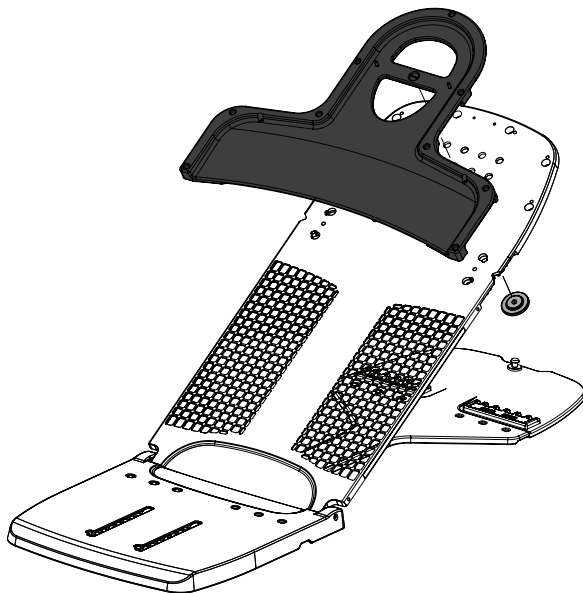


Aperte o Adaptador para máscara Portrait™ no Access™ Supine usando os orifícios 3, 8, 13, 18 ou 22.


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

AJUSTE SE NECESSÁRIO PARA ELIMINAR O MOVIMENTO

Gire para apertar

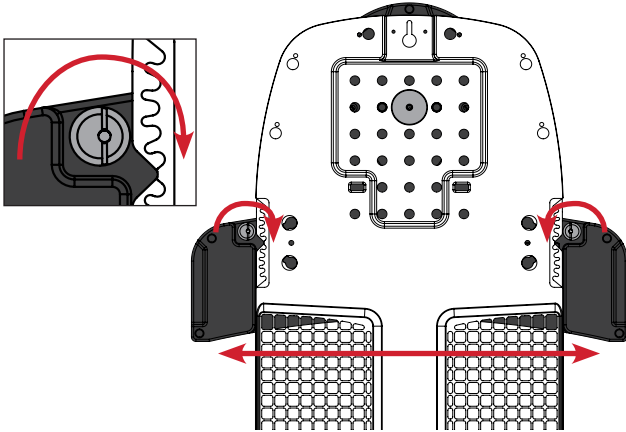



Bloqueado

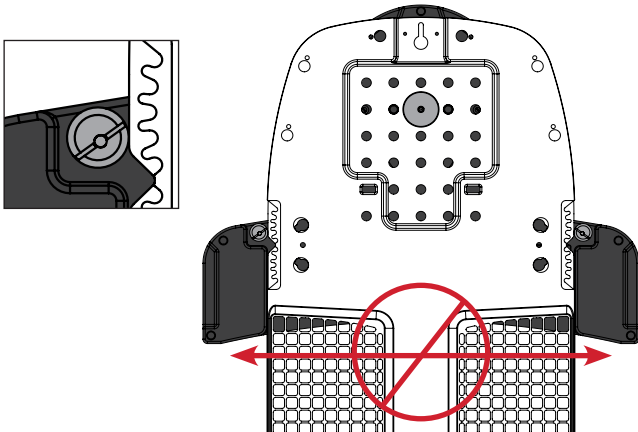



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

REMOÇÃO

Somente cabeça

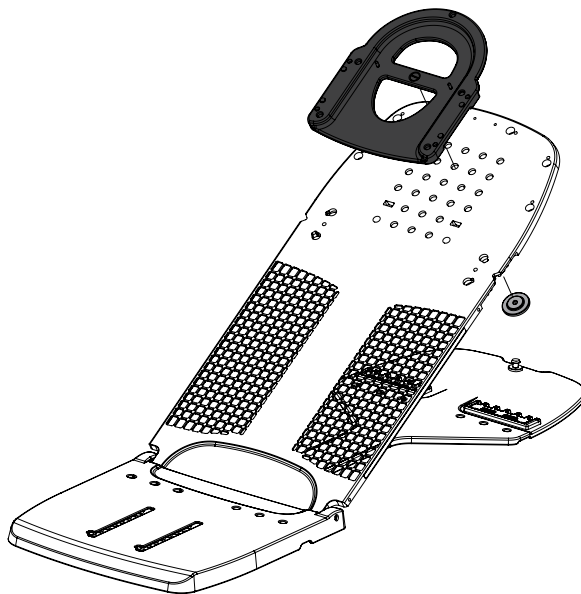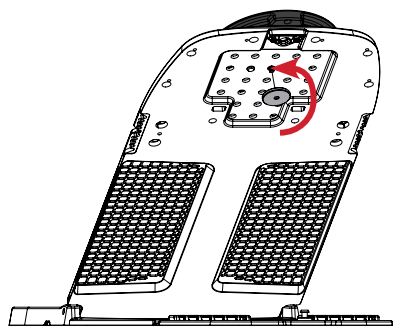

Cabeça e ombro

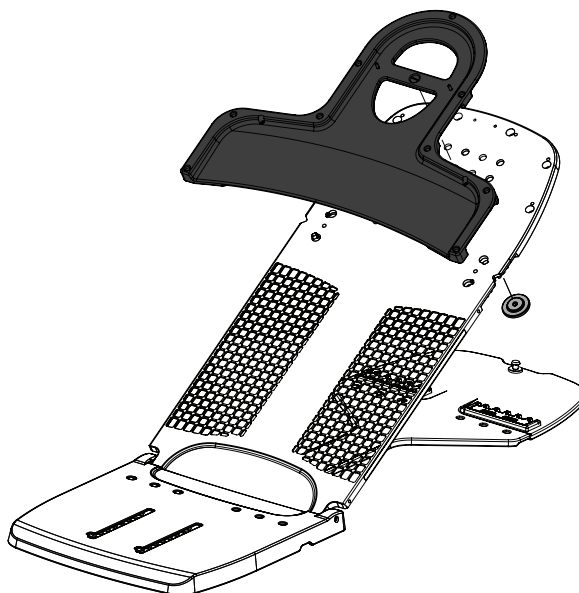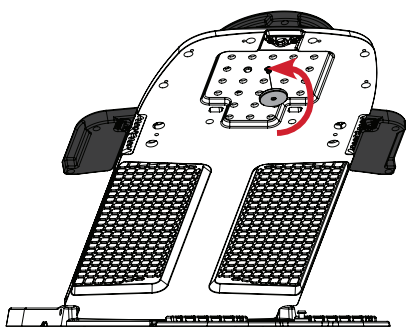


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


CONFIGURAÇÃO

Adaptador termoplástico Opti-Handle™


Etapa 1

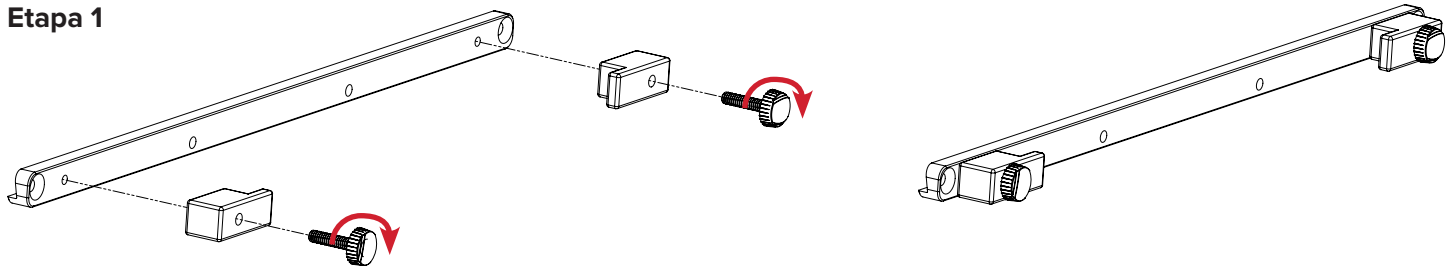

Etapa 2

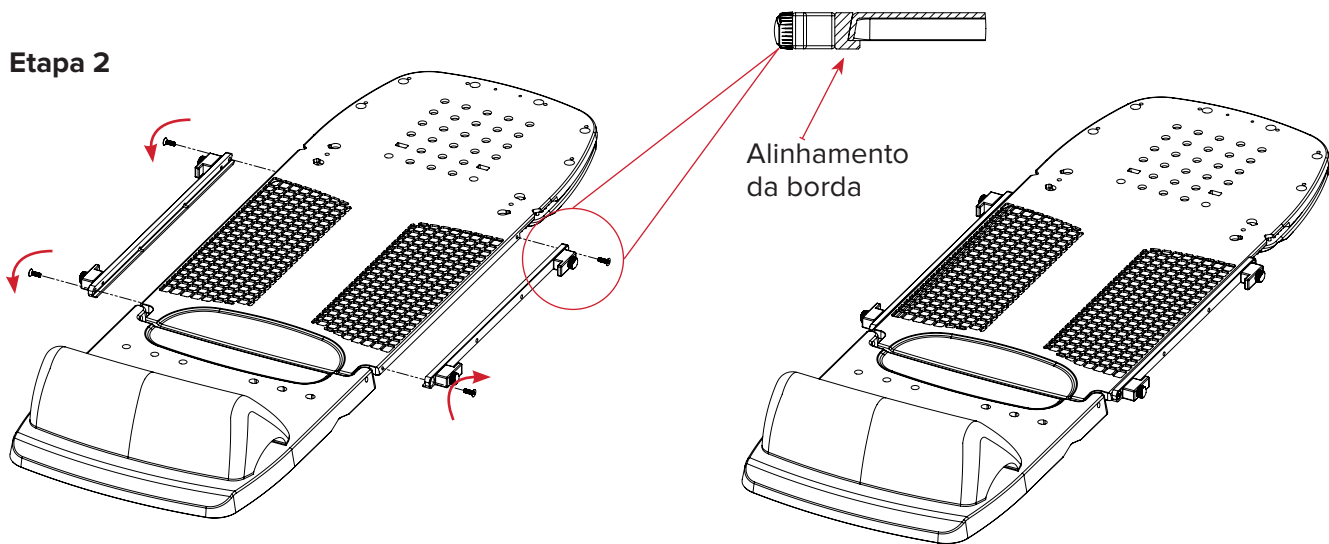

Etapa 3

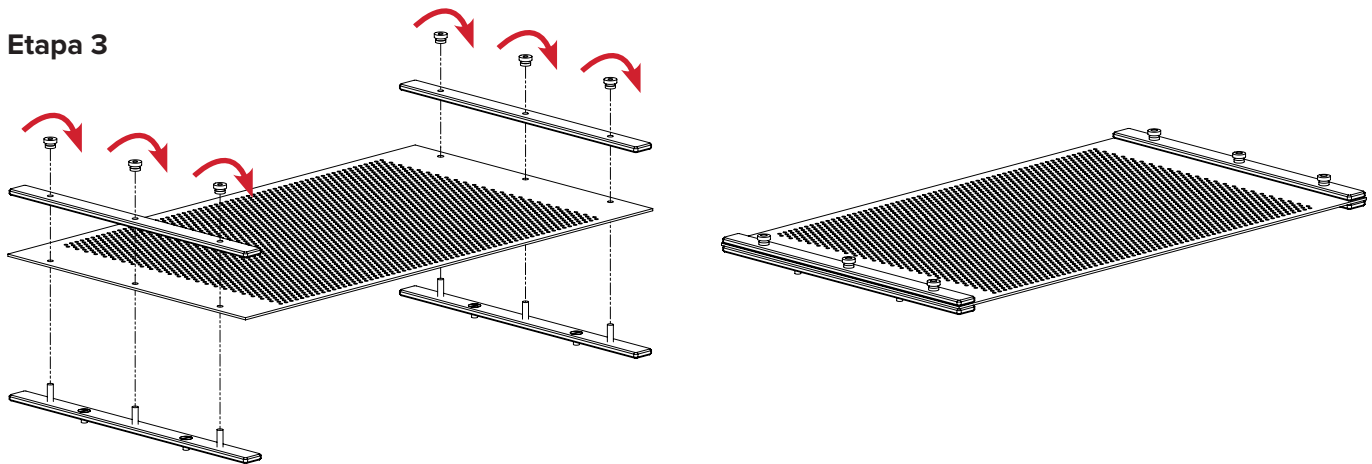

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

CONFIGURAÇÃO


Etapa 4

Configure o paciente no Dispositivo de mama Access Supine.

! OBSERVAÇÃO ! Consulte o Guia de produto e Manual do usuário do Access Supine (P/N 2004394) para obter instruções de operação, características do produto, especificações, advertências, cuidados e outras precauções gerais relacionadas ao uso do dispositivo de mama Access Supine.

Amoleça o termoplástico (RT-1783P3) com as alças Opti-Handles (RT-4454-14).

Conclua as etapas 4A, 4B, 4C e 4D em ambos os lados do termoplástico.

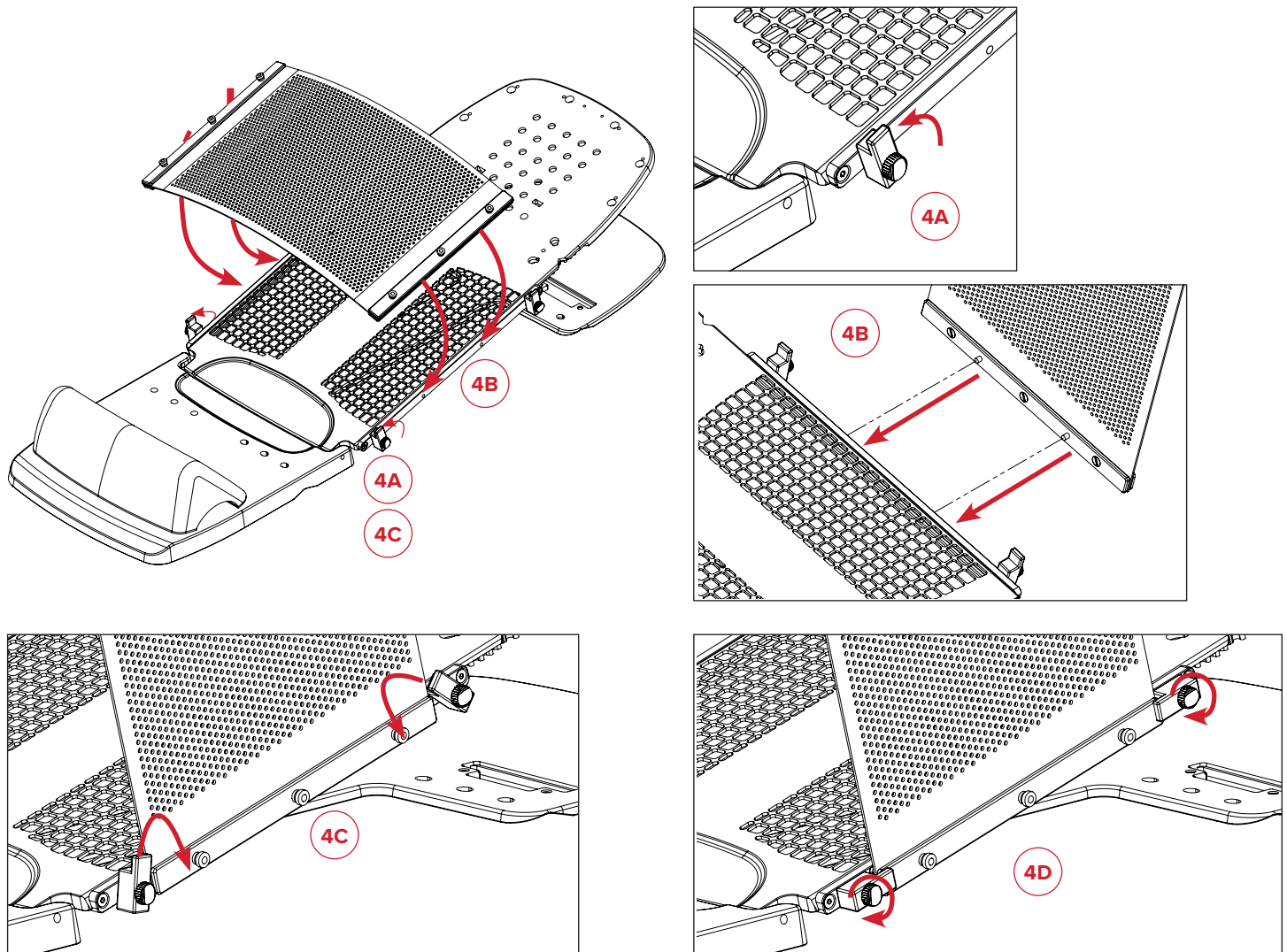

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

REMOÇÃO





Adaptador termoplástico Opti-Handle™

Etapa 1

Conclua as etapas 1A, 1B e 1C em ambos os lados do termoplástico.

Remova o paciente do dispositivo de mama Access Supine.


! OBSERVAÇÃO ! Consulte o Guia de produto e Manual do usuário do Access Supine (P/N 2004394) para obter instruções de operação, características do produto, especificações, advertências, cuidados e outras precauções gerais relacionadas ao uso do dispositivo de mama Access Supine.

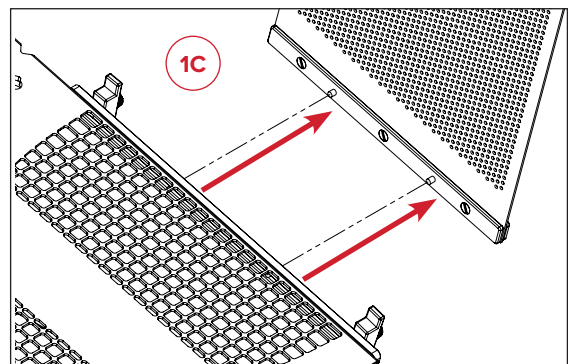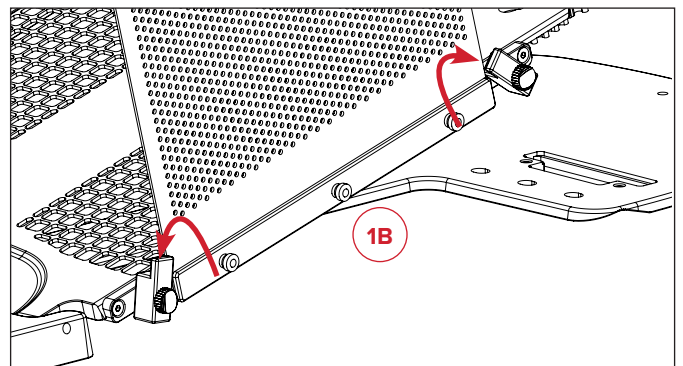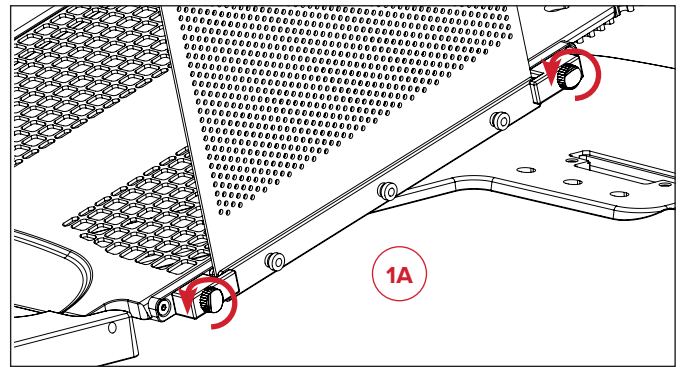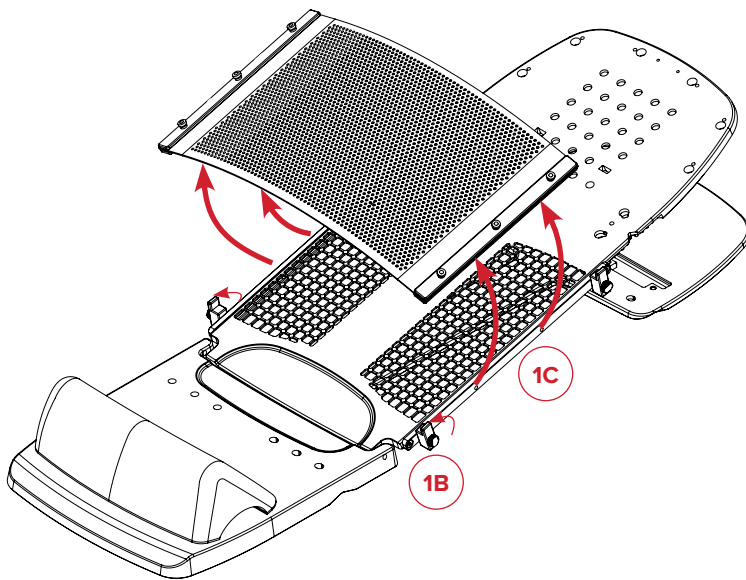



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

REMOÇÃO

Etapa 2

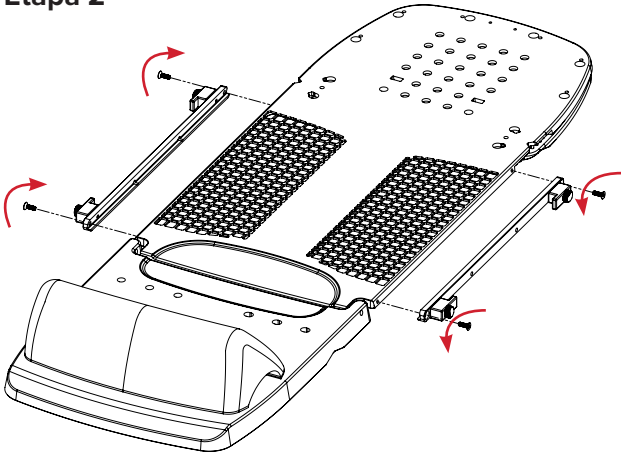

Etapa 3

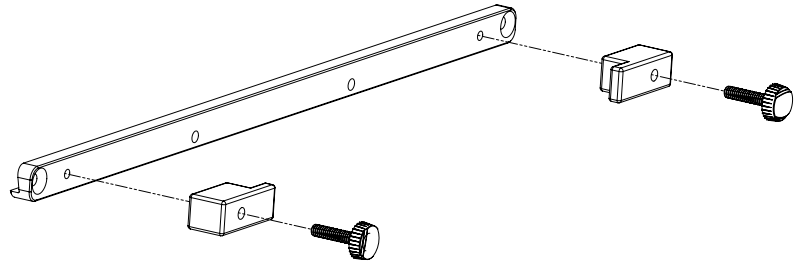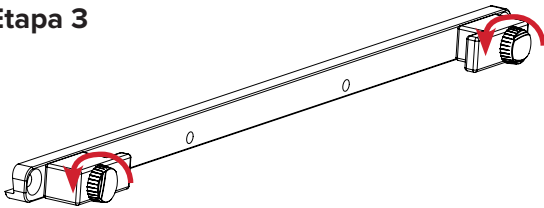

LISTA DE PEÇAS

RT-4546-03 E RT-4546-04

Compatível com máscaras Portrait™ com estrutura em S

RT-4546-05

Compatível com folha RT-1783P3, Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Compatível com os cabos Opti-Handles RT-4454-14, 35,56 cm (14 pol.), conjunto de 2



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com