

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RT-4546-03

Адаптер маски только для головы Portrait™
для устройства Access™ Supine Breast

RT-4546-04

Адаптер маски для головы и шеи Portrait™
для устройства Access™ Supine Breast

RT-4546-05

Термопластический адаптер Opti-Handle™
для устройства Access™ Supine Breast

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ЕСЛИ КАКАЯ-ЛИБО ЧАСТЬ ЭТОГО УСТРОЙСТВА ПОДВЕРГЛАСЬ КРИТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ВЫГЛЯДИТ ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЛИ ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВОМ И ОБРАТИТЕСЬ В КОМПАНИЮ QFIX ПО ТЕЛЕФОНУ +1 484-720-6054 ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ПОГЛОЩЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛУЧА

Проведение терапии сквозь любое устройство приведет к увеличению дозы облучения кожи. Термопластические маски ослабляют терапевтический пучок излучения и увеличивают его дозу для кожи. Ослабление излучения и увеличение дозы для кожи следует учитывать при планировании и осуществлении лечения.

ИНФОРМАЦИЯ О МР-СОВМЕСТИМОСТИ

MR Доклинические испытания показали, что адаптер маски для головы и шеи Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-04, адаптер маски только для головы Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-03, и термопластический адаптер Opti-Handle™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-05, безопасны для использования в МР-окружении. Адаптер маски для головы и шеи Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-04, адаптер маски только для головы Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-03, и термопластический адаптер Opti-Handle™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-05 можно использовать в МР-окружении.

- Адаптер маски для головы и шеи Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-04, адаптер маски только для головы Portrait™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-03, и термопластический адаптер Opti-Handle™ для устройства Access™ Supine Breast, RT-4546-05, разрешается использовать только с безопасной для использования в МР-окружении версией устройства Access™ Supine (RT-4546MRI), проверив перед сканированием его назначение.
- Безопасная для использования в МР-окружении версия устройства Access™ Supine (RT-4546MRI) промаркирована следующим символом: **MR**

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ И ИХ ОПИСАНИЕ

Список символов и их значения см. на сайте Qfix.com.





БЕЗОПАСНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МР-ОКРУЖЕНИИ

Изделие, которое не представляет никаких известных опасностей в результате воздействия любой МР-среды. Безопасные для использования в МР-окружении изделия состоят из токонепроводящих, немагнитных и немагнитных материалов.




ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Только для головы

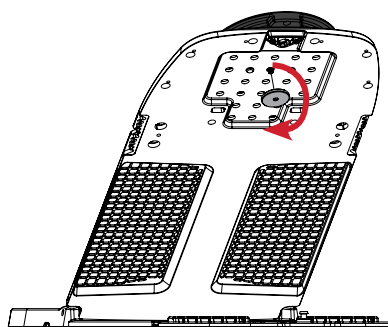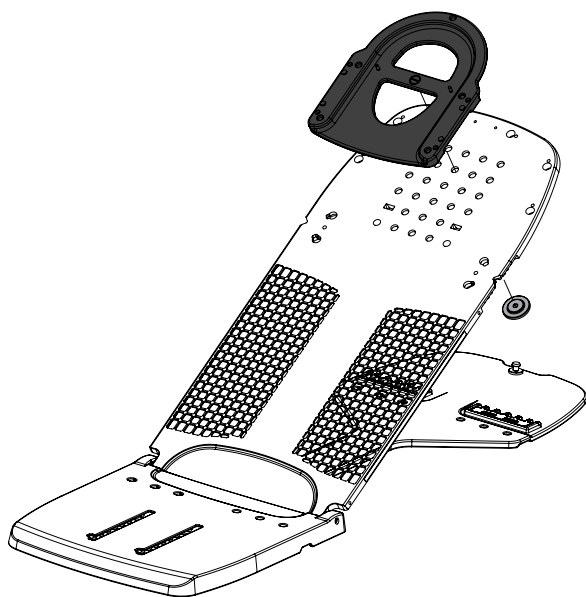

Для головы и плеч

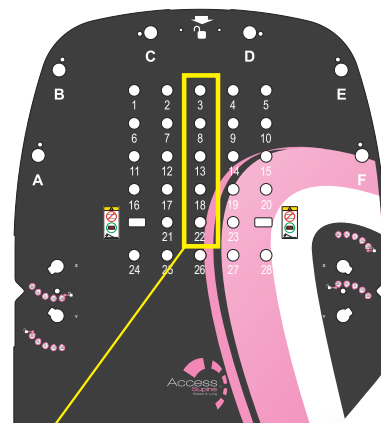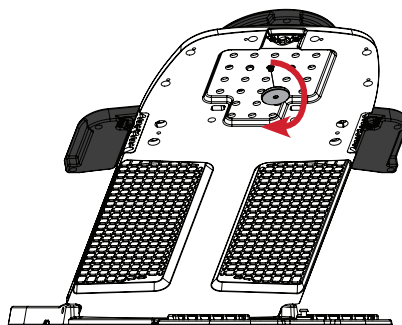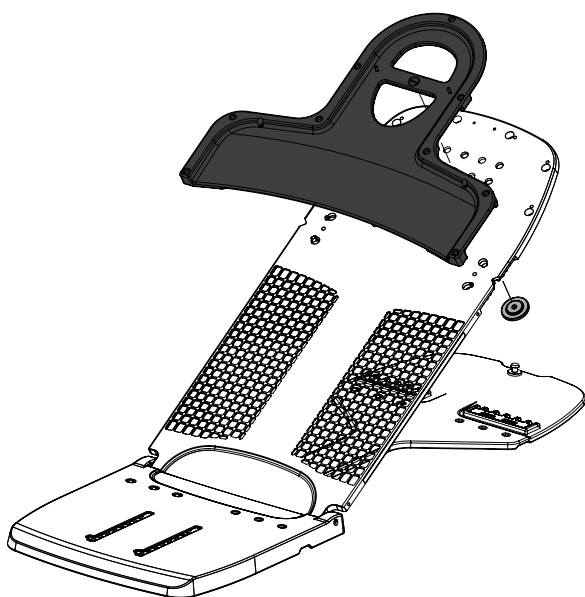


Прикрепите адаптер маски Portrait™ к устройству Access™ Supine, используя отверстия 3, 8, 13, 18 или 22.


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СМЕЩЕНИЕ

Поверните, чтобы затянуть

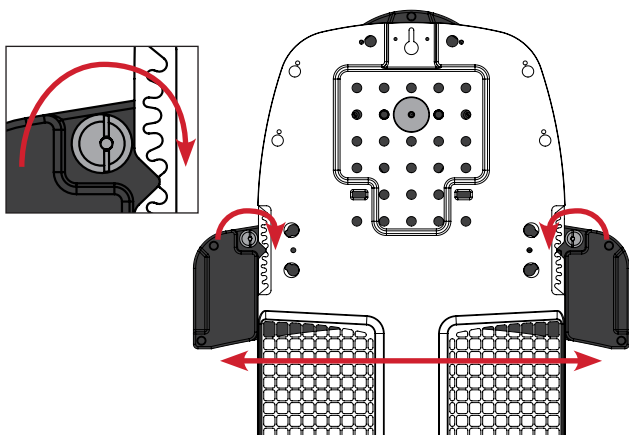



Зафиксировано

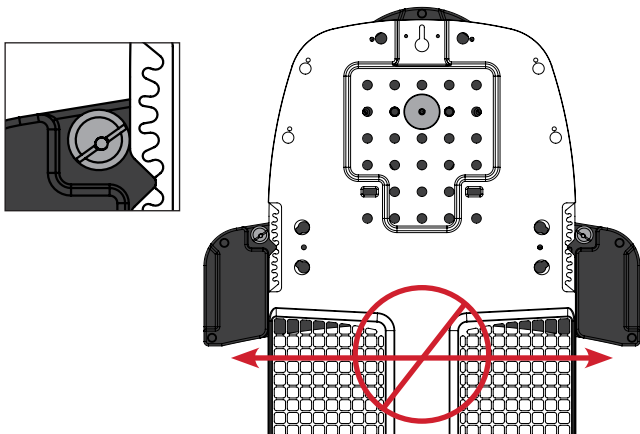



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СНЯТИЕ

Только для головы

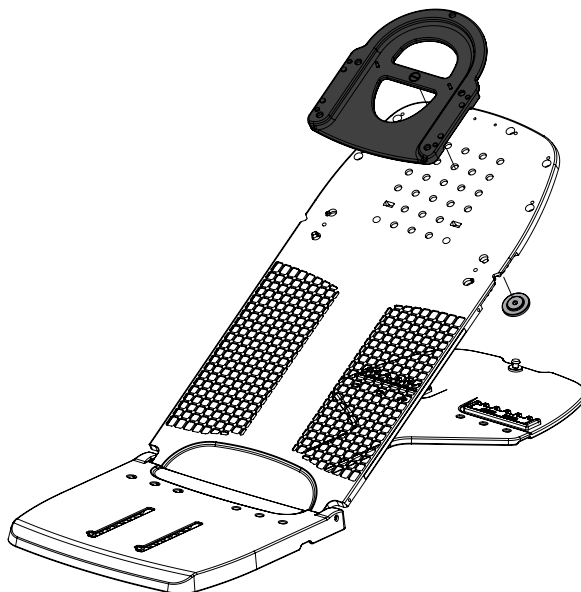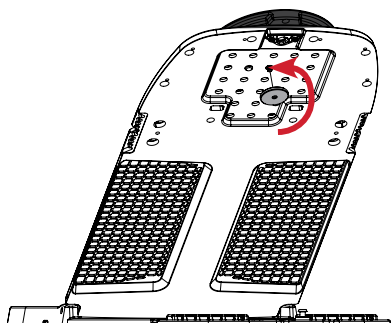

Для головы и плеч

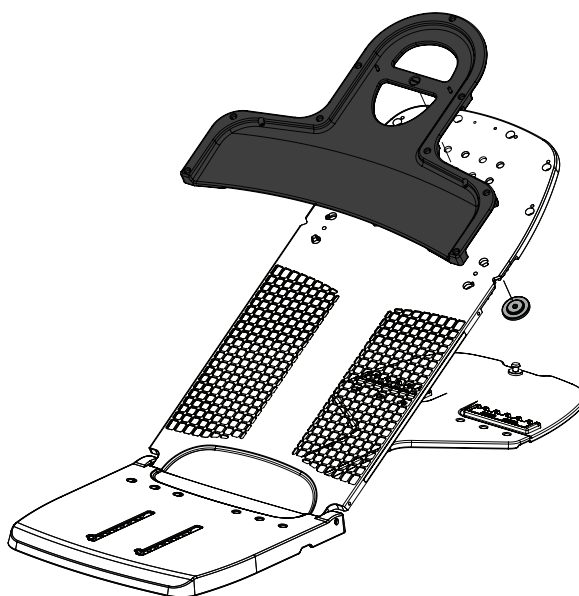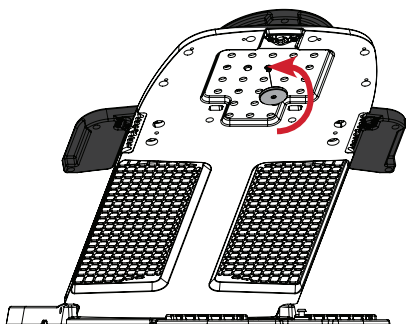


ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Термопластический адаптер Opti-Handle™


Шаг 1

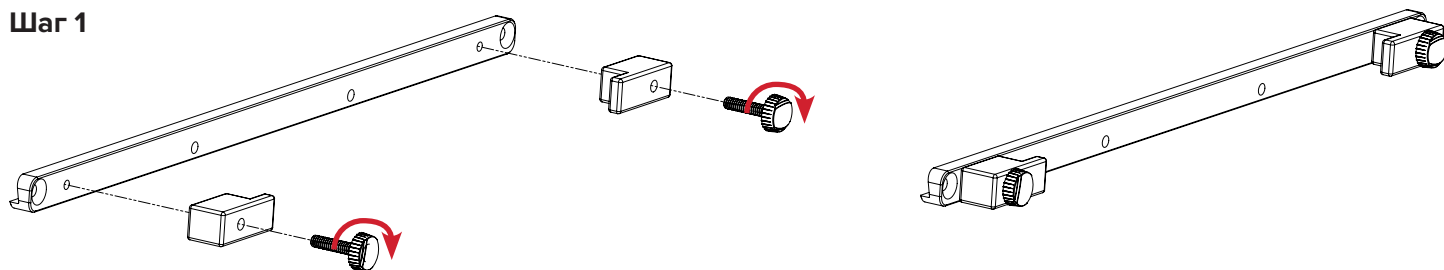

Шаг 2

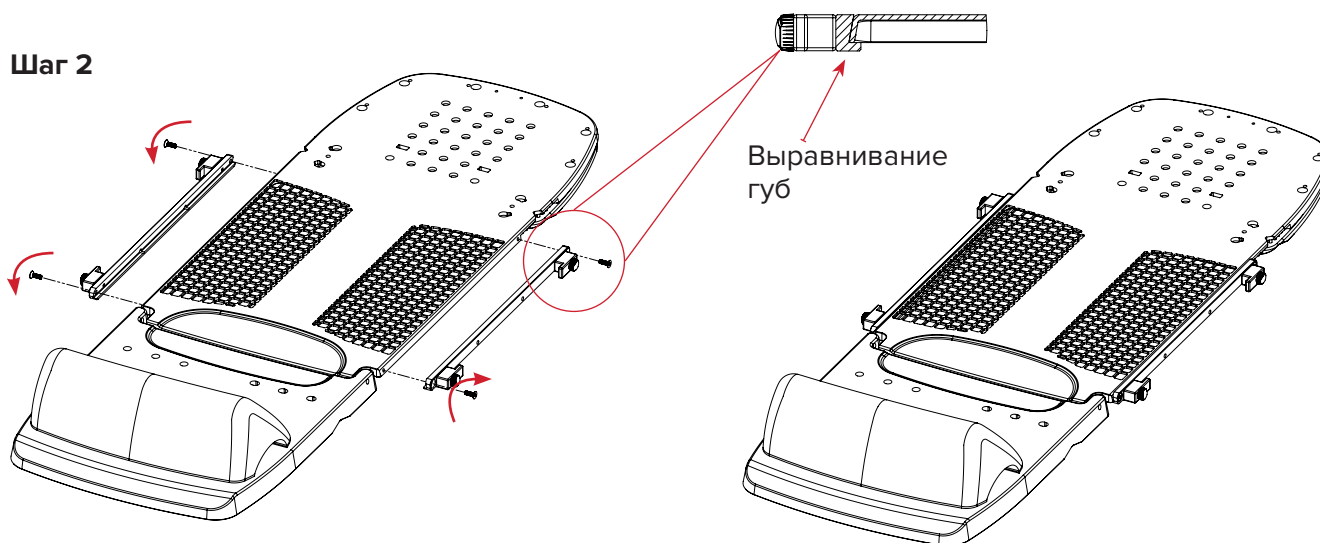

Шаг 3

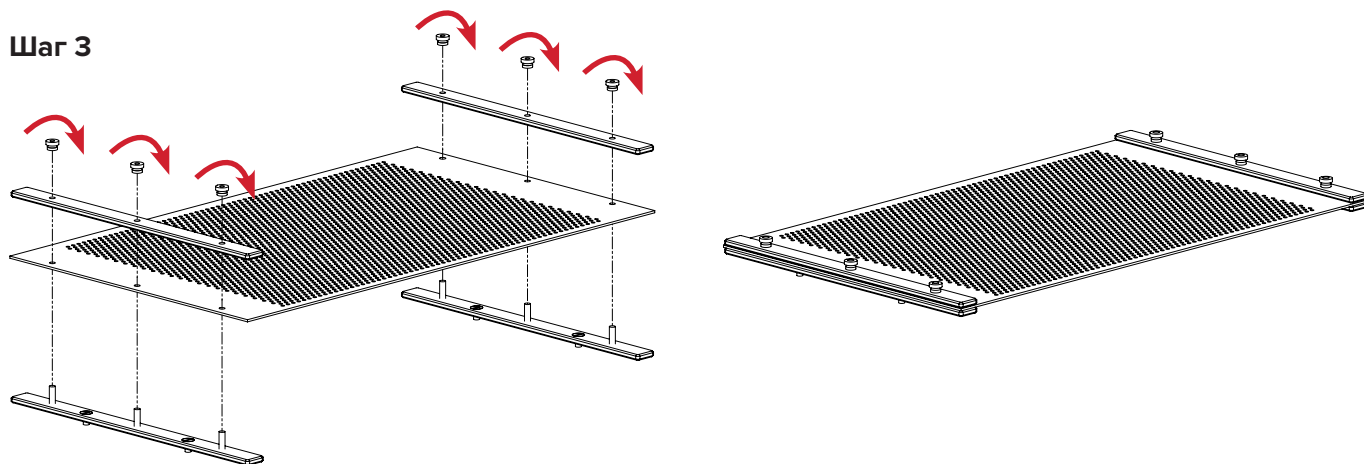

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Шаг 4

Разместите пациента на устройстве Access Supine Breast.

! ПРИМЕЧАНИЕ ! Инструкции по эксплуатации, характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием устройства Access Supine Breast, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Access Supine Breast (P/N 2004394).

Размягчите термопластический материал (RT-1783P3) с прикрепленными к нему Opti-Handles (RT-4454-14).

Выполните шаги 4A, 4B, 4C и 4D с обеих сторон термопластического материала.

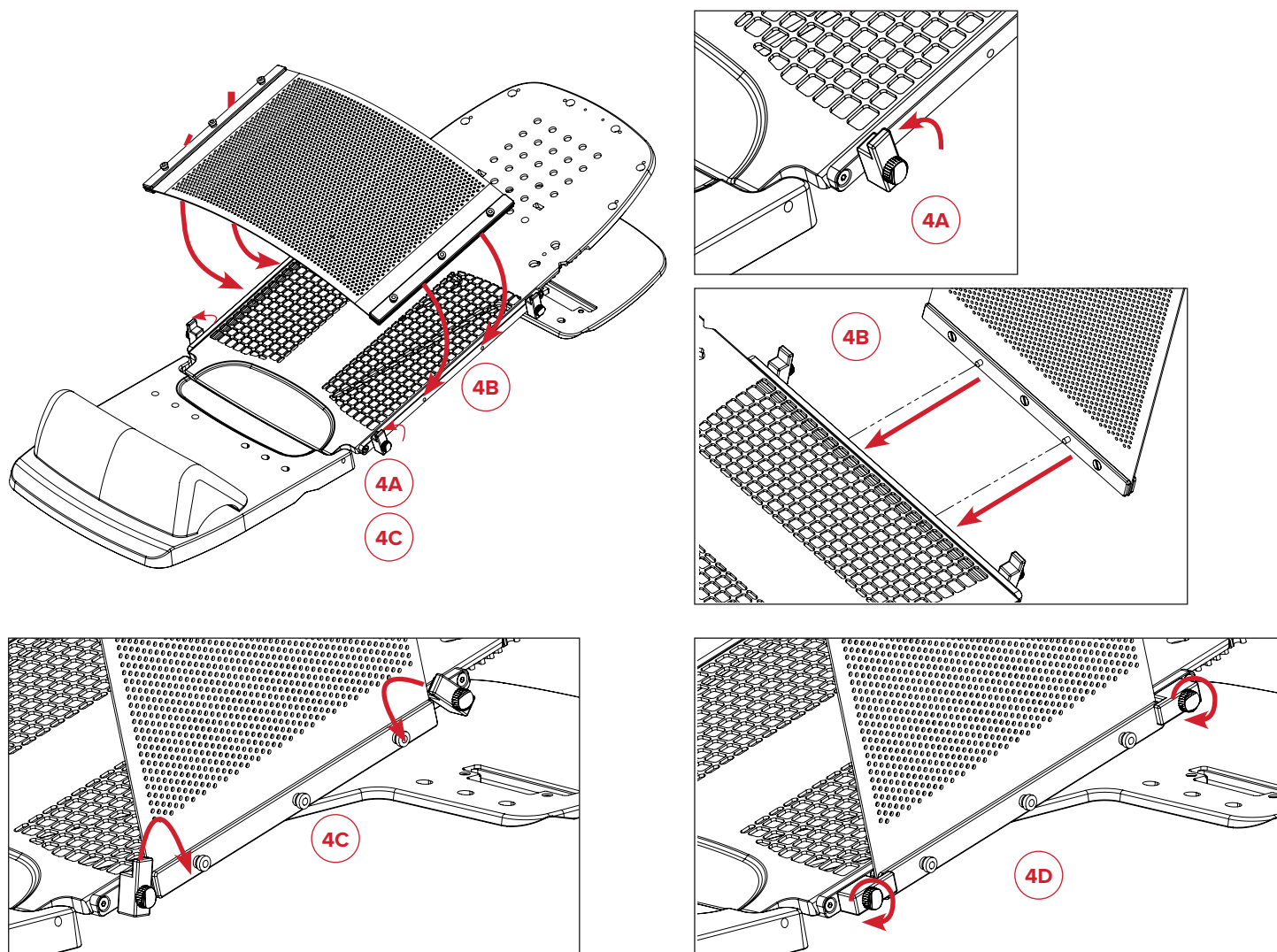

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СНЯТИЕ





Термопластический адаптер Opti-Handle™

Шаг 1

Выполните шаги 1A, 1B и 1C с обеих сторон термопластического материала.

Снимите пациента с устройства Access Supine Breast.


! ПРИМЕЧАНИЕ ! Инструкции по эксплуатации, характеристики изделия, технические характеристики, предупреждения, предостережения и другие общие меры предосторожности, связанные с использованием устройства Access Supine Breast, см. в описании изделия и руководстве пользователя устройства Access Supine Breast (P/N 2004394).

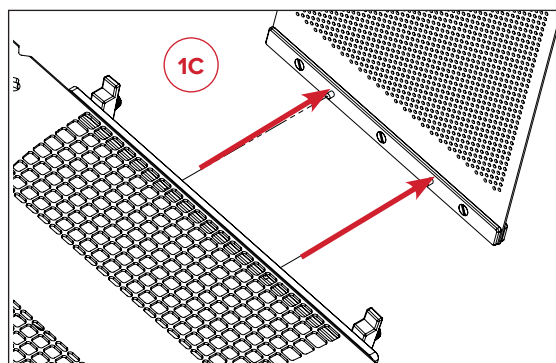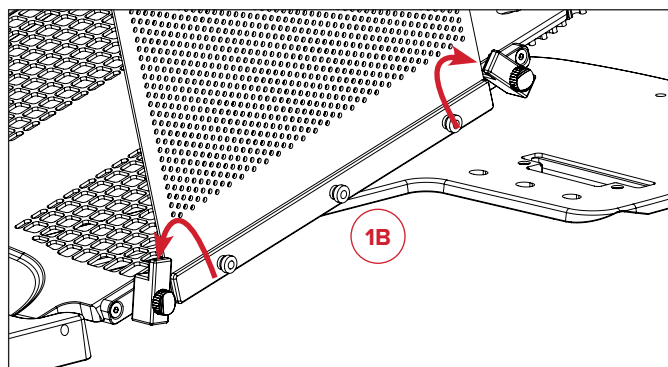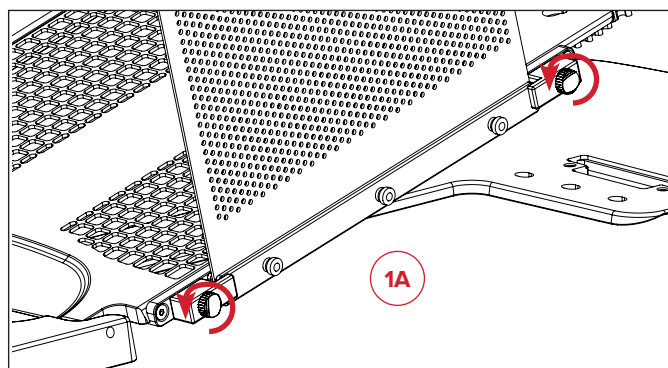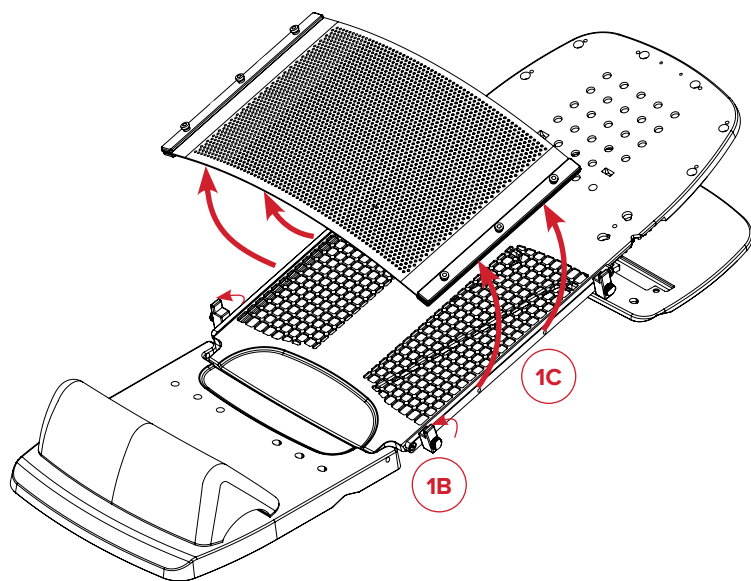



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СНЯТИЕ

Шаг 2

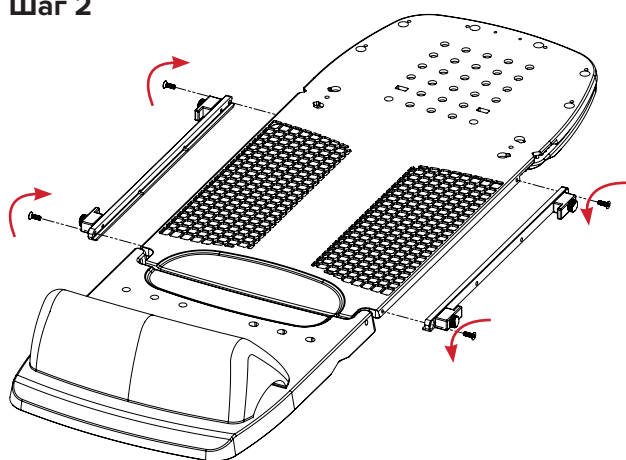

Шаг 3

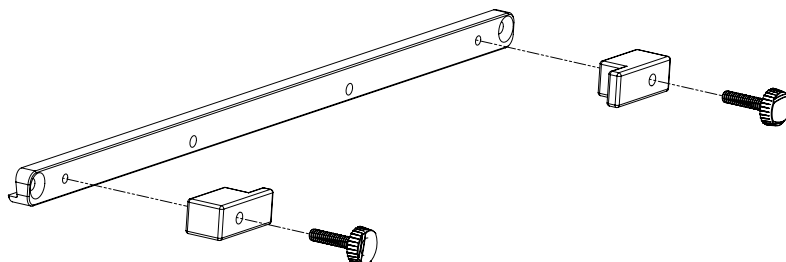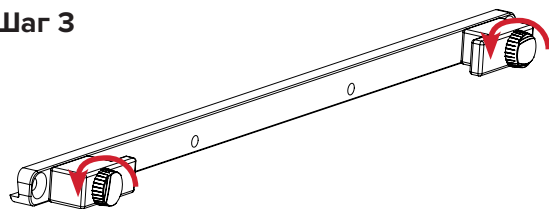

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

RT-4546-03 И RT-4546-04

Совместимы с масками с S-образными рамами Portrait™

RT-4546-05

Совместим с перфорированной маской Aquaplast RT®, 12 x 18 дюймов, 2,4 мм, RT-1783P3

Совместим с устройствами Opti-Handles, 35,56 см (14 дюймов), набор из 2 шт., RT-4454-14



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_RU_A
2023-07