

SPRIEVODCA PRODUKTOM A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4546-03

Adaptér masky iba na hlavu Portrait™ pre
zariadenie Access™ Supine pre prsník

RT-4546-04

Adaptér masky na hlavu a krk Portrait™ pre
zariadenie Access™ Supine pre prsník

RT-4546-05

Termoplastický adaptér Opti-Handle™ pre
zariadenie Access™ Supine pre prsník

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

ZOSLABENIE OŽAROVACIEHO ZVÄZKU

Ožarovanie skrz akékoľvek zariadenie povedie k zvýšenej dávke aplikovanej na kožu. Termoplastické masky zoslabia zväzok ionizujúceho žiarenia a zvýšia dávku aplikovanú na kožu. Zoslabenie žiarenia a zvýšenú dávku aplikovanú na kožu treba vziať do úvahy počas plánovania a ožarovania.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA MR

 Neklinickým testovaním sa preukázalo, že **RT-4546-04 Adaptér masky na hlavu a krk Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník**, **RT-4546-03 Adaptér masky iba na hlavu Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** a **RT-4546-05 Termoplastický adaptér Opti-Handle™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** sú bezpečné v prostredí MR. **RT-4546-04 Adaptér masky na hlavu a krk Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník**, **RT-4546-03 Adaptér masky iba na hlavu Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** a **RT-4546-05 Termoplastický adaptér Opti-Handle™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** môžu byť použité v prostredí MR.

- **RT-4546-04 Adaptér masky na hlavu a krk Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník**, **RT-4546-03 Adaptér masky iba na hlavu Portrait™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** a **RT-4546-05 Termoplastický adaptér Opti-Handle™ pre zariadenie Access™ Supine pre prsník** sa musia pred snímaním používať s verziou systému Access™ Supine (RT-4546MRI), ktorá je bezpečná v prostredí MR, v súlade s jeho určeným použitím.
- Verzia systému Access™ Supine (RT-4546MRI), ktorá je bezpečná v prostredí MR, je jasne označená nasledujúcim symbolom:



VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.





BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR

Predmet, ktorý nepredstavuje žiadne známe riziká pri vystavení akémukoľvek prostrediu MR. Predmety bezpečné v prostredí MR sú z materiálov, ktoré sú elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.




NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE

Len hlava

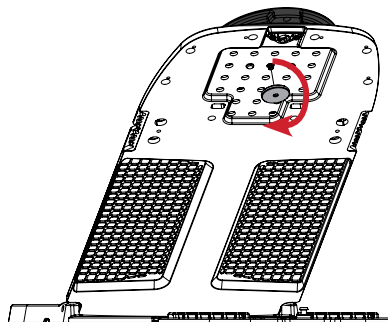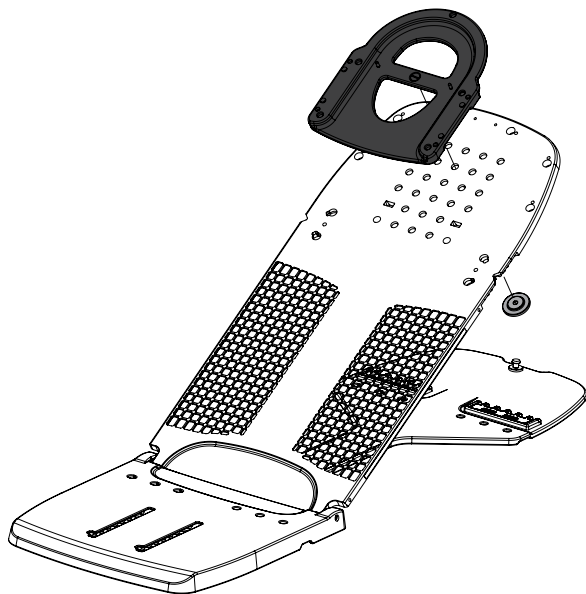

Hlava a rameno

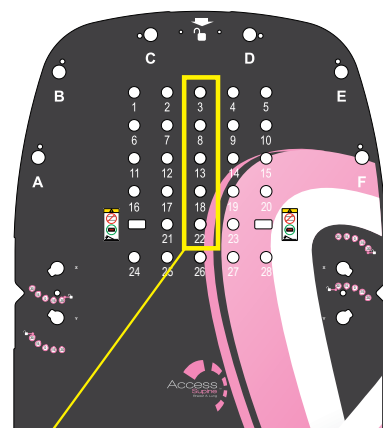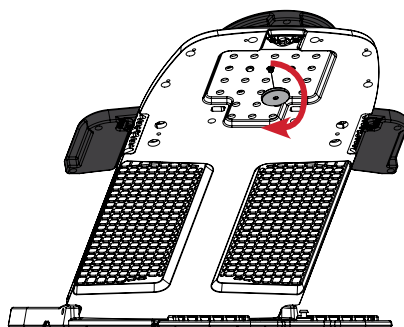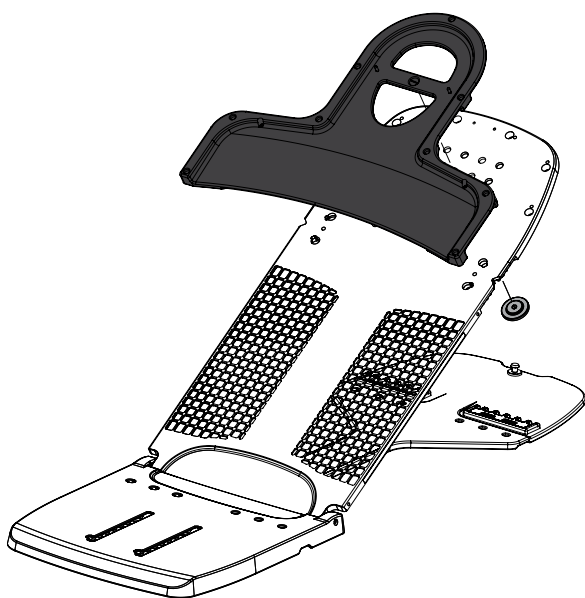


Adaptér masky Portrait™
pripevnite k systému
Access™ Supine pomocou
otvoru 3, 8, 13, 18 alebo 22.


NÁVOD NA POUŽITIE

V PRÍPADE POTREBY NASTAVTE, ABY STE ZABRÁNILI POHYBU

Utiahnite otočením

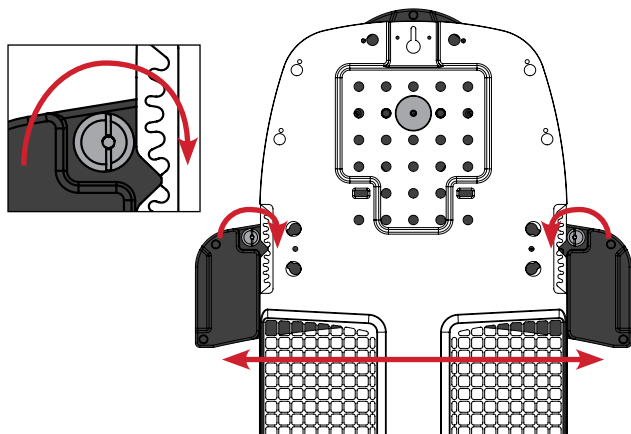



Uzamknutý

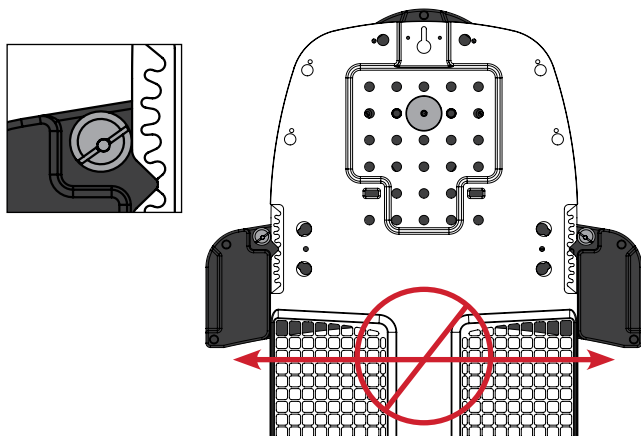



NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE

Len hlava

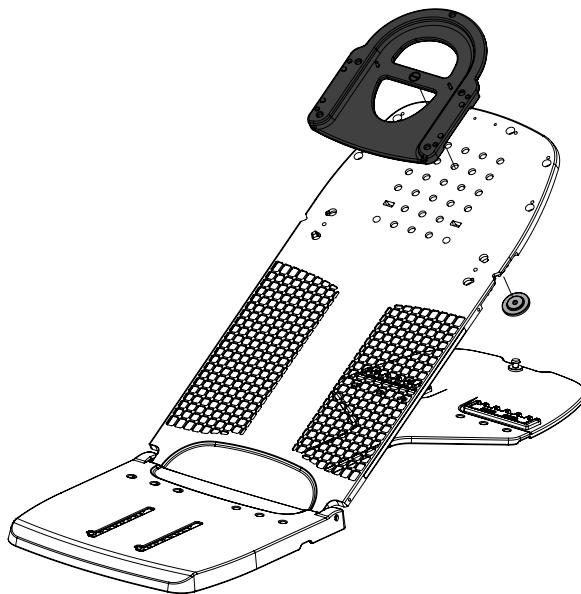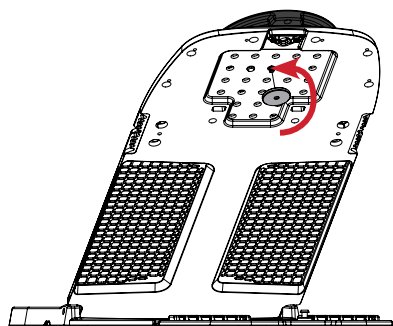

Hlava a rameno

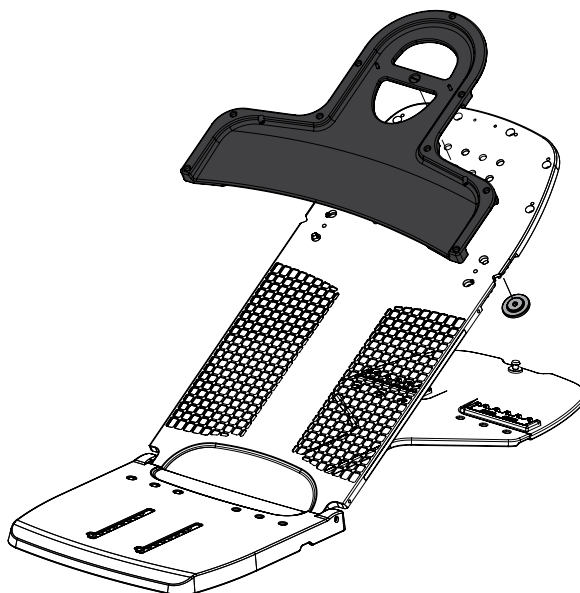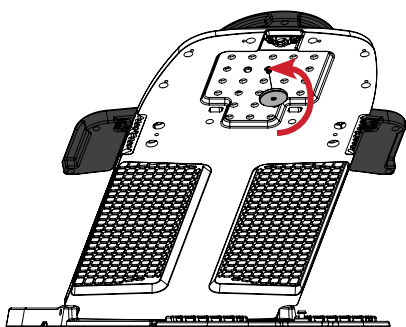


NÁVOD NA POUŽITIE


NASTAVENIE

Termoplastický adaptér Opti-Handle™


Krok 1

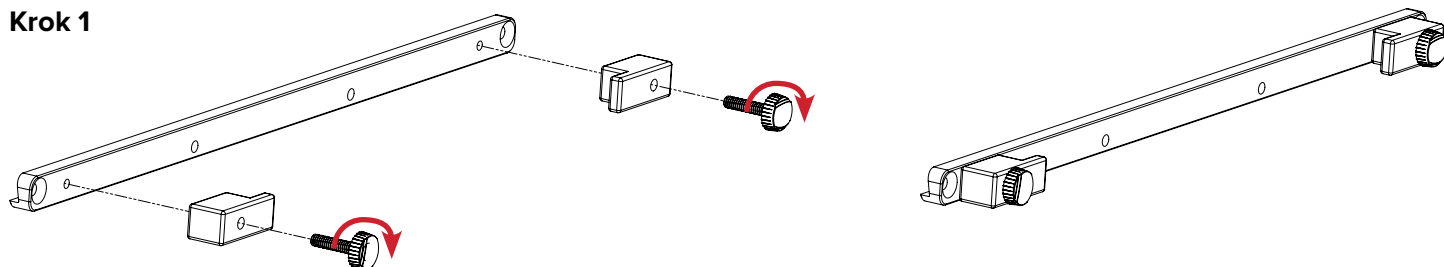

Krok 2

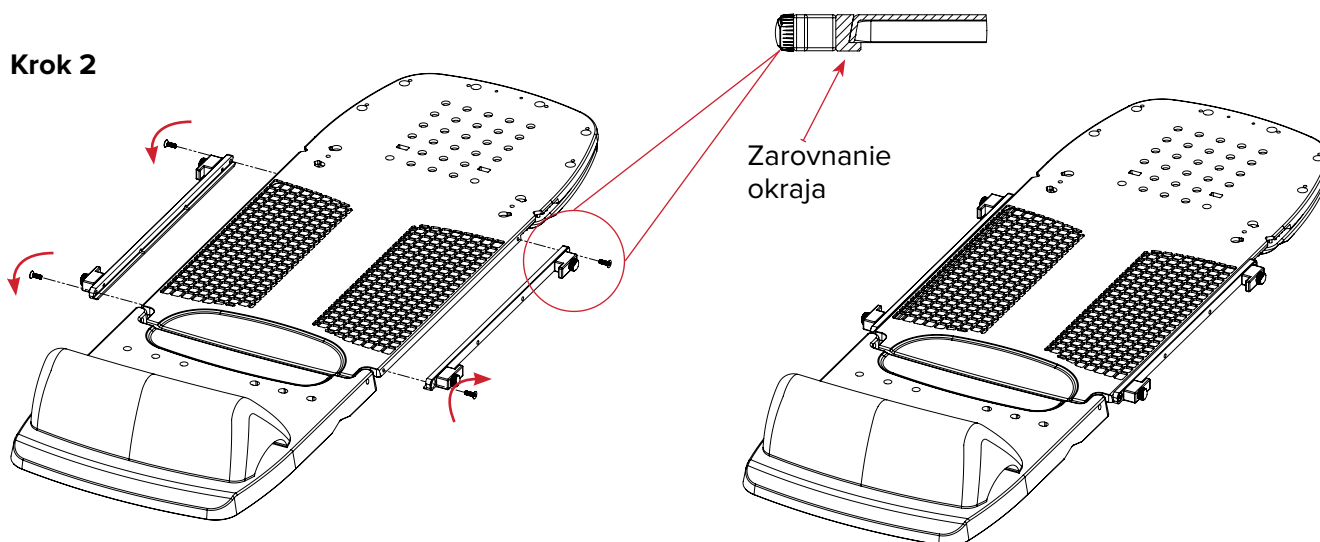

Krok 3

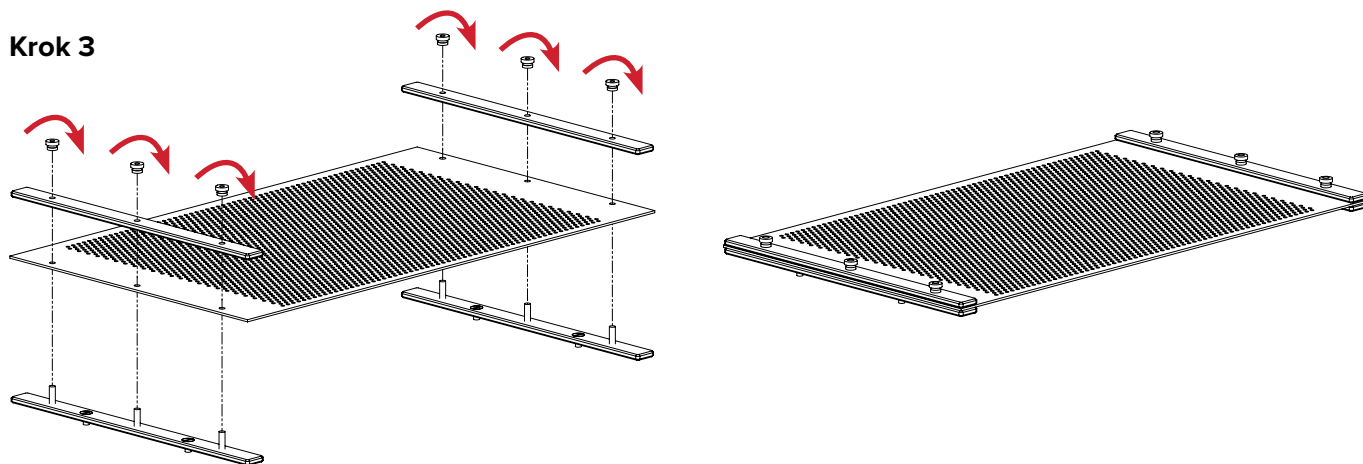

NÁVOD NA POUŽITIE

NASTAVENIE


Krok 4

Uloženie pacienta na zariadení Access Supine pre prsník.

! POZNÁMKA ! Prevádzkové pokyny, vlastnosti produktov, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia spojené s použitím systému Access Supine nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie systému Access Supine (P/N 2004394).

Pomocou pripojených zariadení Opti-Handles (RT-4454-14) zmäkčíte termoplast (RT-1783P3).

Vykonajte kroky 4A, 4B, 4C a 4D na oboch stranách termoplastu.

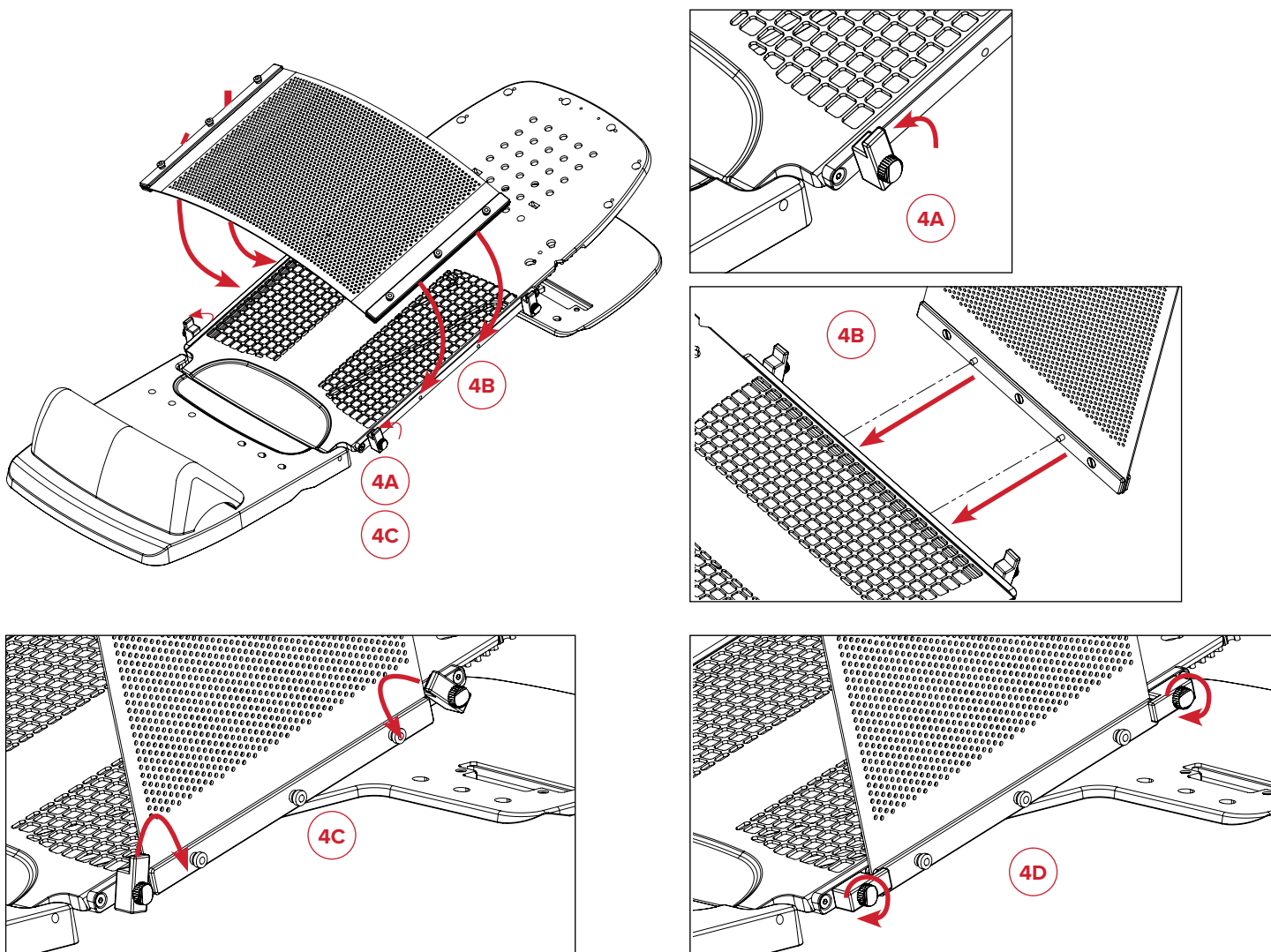

NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE





Termoplastický adaptér Opti-Handle™

Krok 1

Vykonajte kroky 1A, 1B a 1C na oboch stranách termoplastu.

Vyberte pacienta zo zariadenia Access Supine pre prsník.


! POZNÁMKA ! Prevádzkové pokyny, vlastnosti produktov, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia spojené s použitím systému Access Supine nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie systému Access Supine (P/N 2004394).

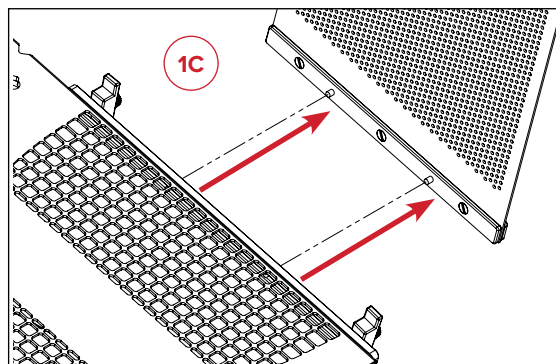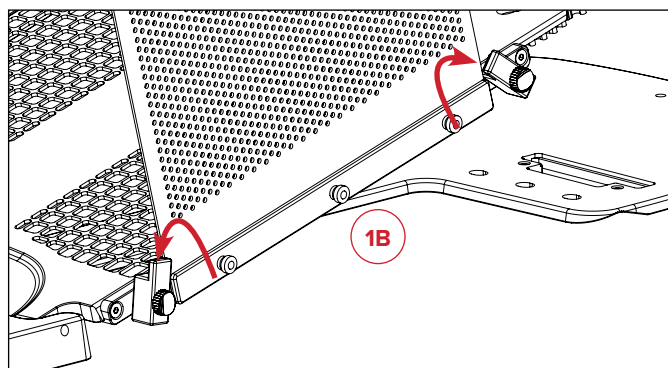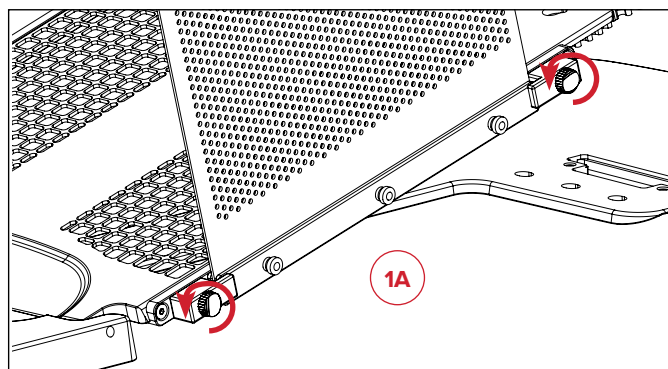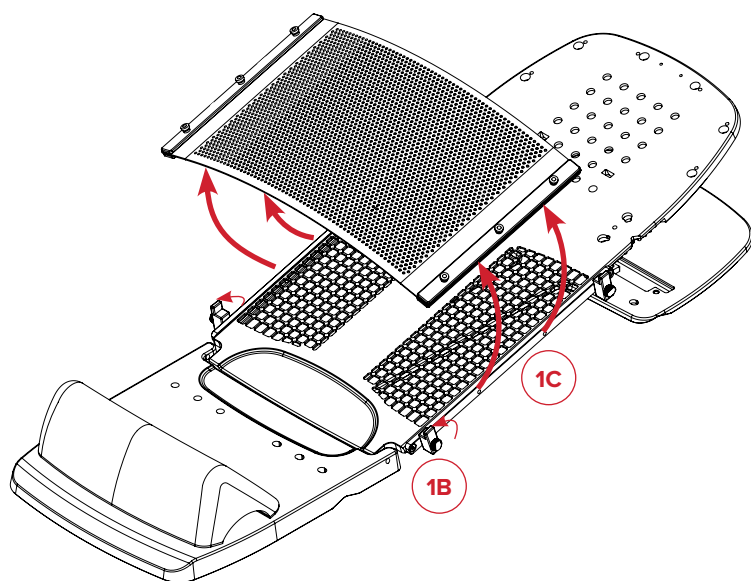



NÁVOD NA POUŽITIE

ODSTRÁNENIE

Krok 2

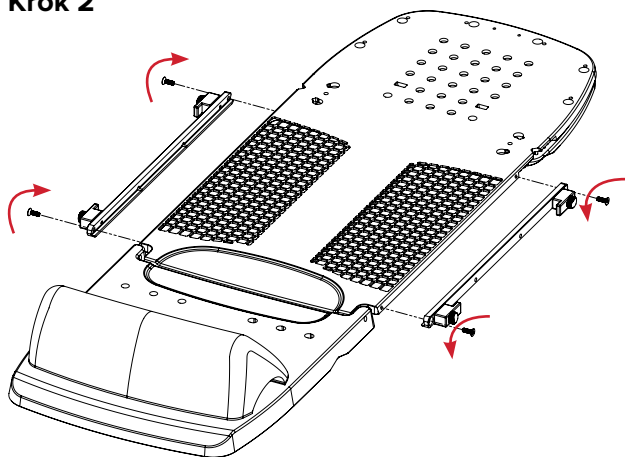

Krok 3

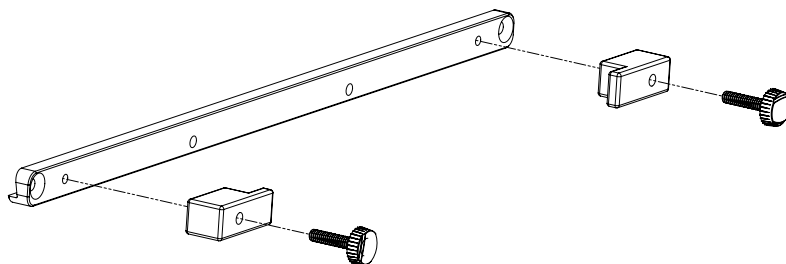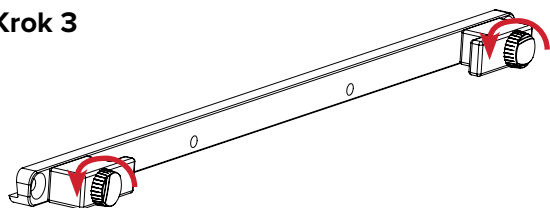

ZOZNAM DIELOV

RT-4546-03 A RT-4546-04

Kompatibilné s maskou s rámom S Portrait™

RT-4546-05

Kompatibilné s RT-1783P3, hárkom Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, dierk.

Kompatibilné s RT-4454-14, 35,56 cm (14 palcov) Opti-Handles, súprava 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com