



VODIČ ZA PROIZVOD I UPUTSTVO ZA UPOTREBU

RT-4546-03

Adapter maske samo za glavu Portrait™ za
ležeći sistem za tretmane dojki Access™

RT-4546-04

Adapter maske za glavu i vrat Portrait™ za
ležeći sistem za tretmane dojki Access™

RT-4546-05

Adapter termoplasta Opti-Handle™ za
ležeći sistem za tretmane dojki Access™

	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

OPŠTE MERE PREDOSTROŽNOSTI

IZJAVE UPOZORENJA

! UPOZORENJE ! NIJE DOZVOLJENA NIKAKVA MODIFIKACIJA OVE OPREME. AKO BILO KOJI DEO OVOG PROIZVODA DOŽIVI KATASTROFALNO OPTEREĆENJE, IZGLEDA KAO DA JE OŠTEĆEN ILI FUNKCIONIŠE NEPRAVILNO, ODMAH PREKINITE SA KORIŠĆENJEM I OBRATITE SE KOMPANIJI CQ MEDICAL PUTEM BROJA +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 ILI ADRESE SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

SLABLJENJE TERAPIJSKOG SNOPI

Tretman putem bilo kog proizvoda dovešće do povećanja površinske doze. Termoplastične maske će oslabiti snop radioterapije i povećati površinsku dozu. Slabljenje i povećanje površinske doze treba uzeti u obzir tokom planiranja i lečenja.

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI PRI SNIMANJU MAGNETNOM REZONANCOM

 Nekliničko testiranje je pokazalo da su adapter maske za glavu i vrat Portrait™ RT-4546-04 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™, adapter maske samo za glavu Portrait™ RT-4546-03 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ i adapter termoplasta Opti-Handle™ RT-4546-05 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ bezbedni za magnetnu rezonancu. Adapter maske za glavu i vrat Portrait™ RT-4546-04 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™, adapter maske samo za glavu Portrait™ RT-4546-03 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ i adapter termoplasta Opti-Handle™ RT-4546-05 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ mogu da se koriste u okruženju magnetne rezonance.

- Adapter maske za glavu i vrat Portrait™ RT-4546-04 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™, adapter maske samo za glavu Portrait™ RT-4546-03 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ i adapter termoplasta Opti-Handle™ RT-4546-05 za ležeći sistem za tretmane dojki Access™ moraju se koristiti sa verzijom ležećeg sistema Access™ bezbednom za MR (RT-4546MRI) u skladu sa namenom pre snimanja.
- Verzija ležećeg sistema Access™ bezbedna za MR (RT-4546MRI) jasno je označena sledećim simbolom:



OZNAKE I OPISI UPOZORENJA

Pogledajte www.CQmedical.com za listu simbola i njihove definicije.





BEZBEDNO ZA MR

Predmet koji ne predstavlja poznate opasnosti kao rezultat izlaganja bilo kom MR okruženju. Predmeti bezbedni za MR sastoje se od materijala koji su električno neprovodni, nemetalni i nemagnetni.




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE

Samo za glavu

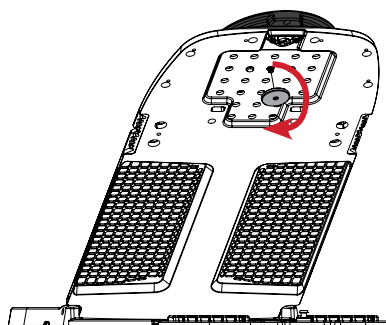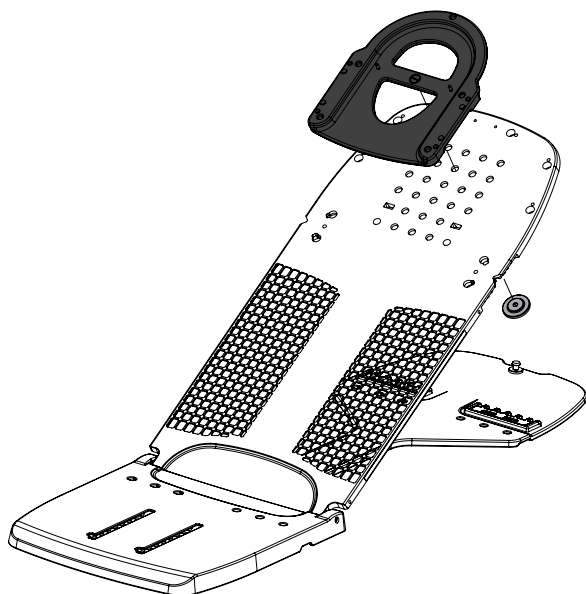

Glava i rame

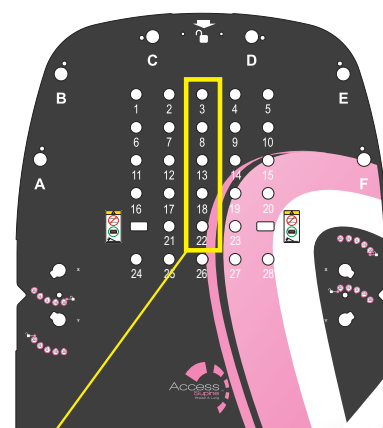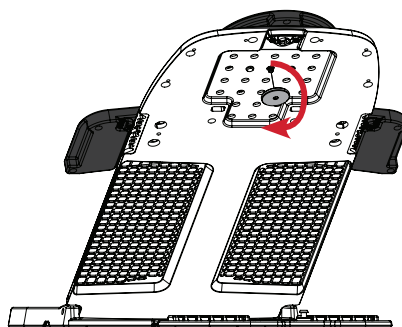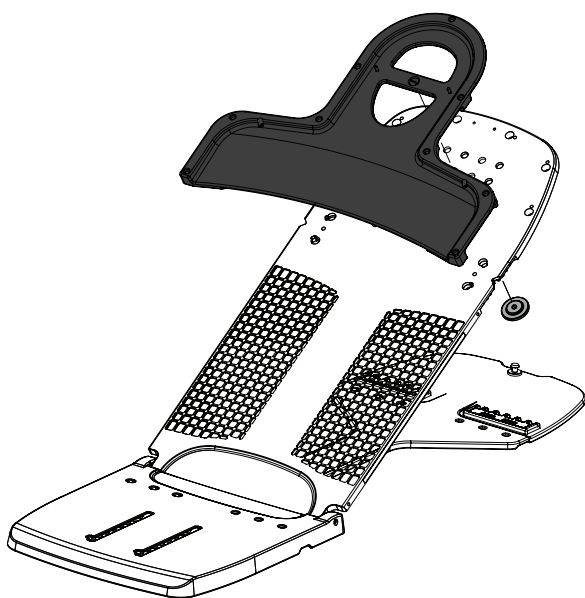


Pričvrstite adapter maske Portrait™ za ležeci sistem Access™ pomoću otvora 3, 8, 13, 18 ili 22.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODESITE AKO JE POTREBNO DA BISTE ELIMINISALI KRETANJE

Okrenite da biste
zategli

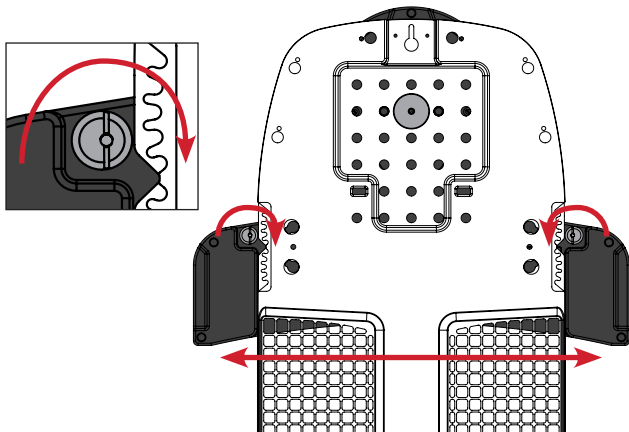



Zaključano

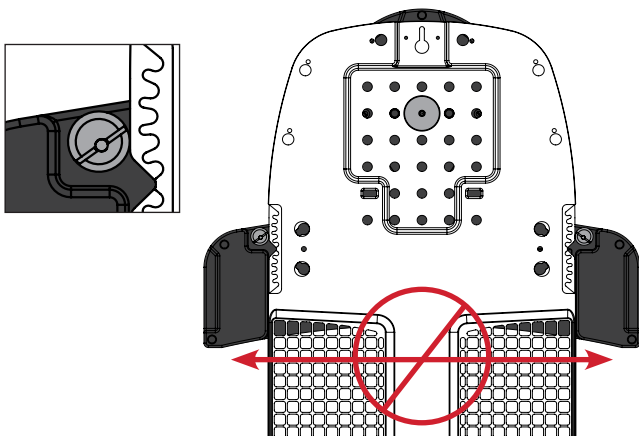



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE

Samo za glavu

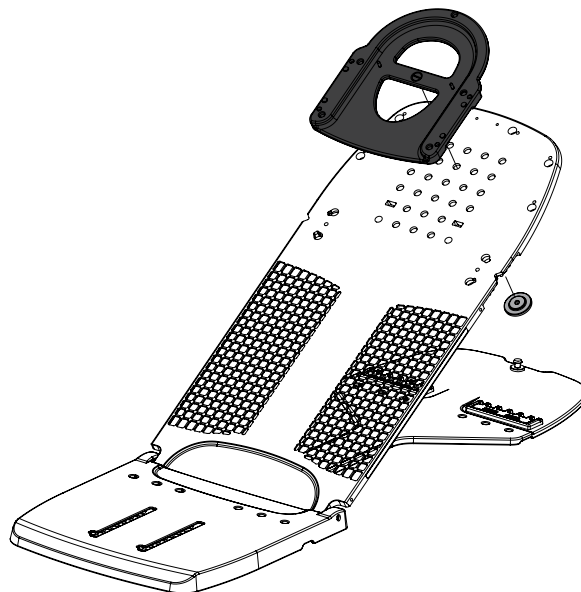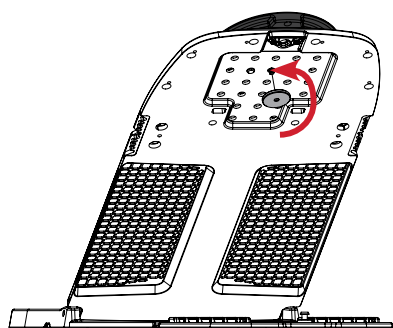

Glava i rame

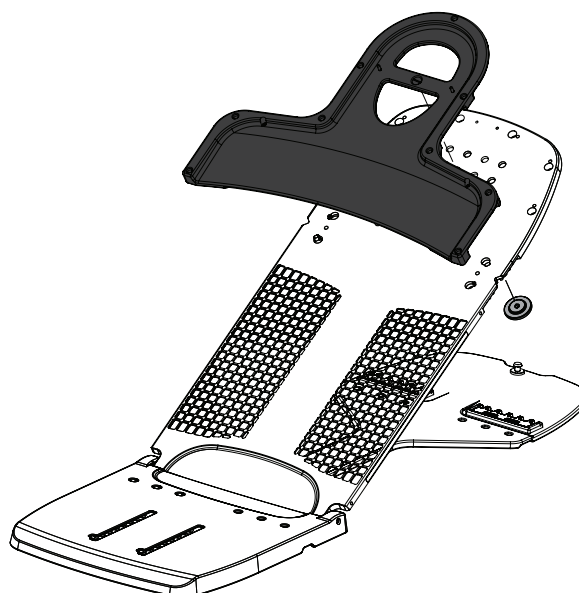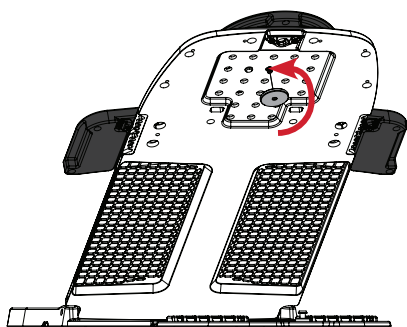


UPUTSTVO ZA UPOTREBU


PODEŠAVANJE

Adapter termoplasta Opti-Handle™


1. korak

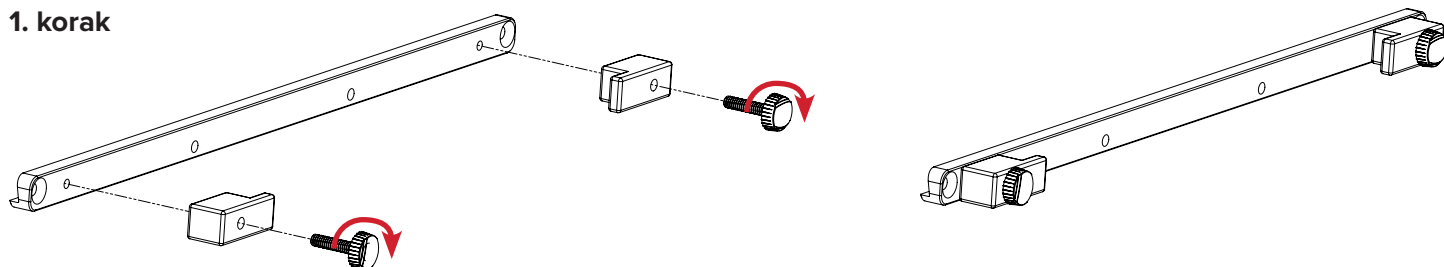

2. korak

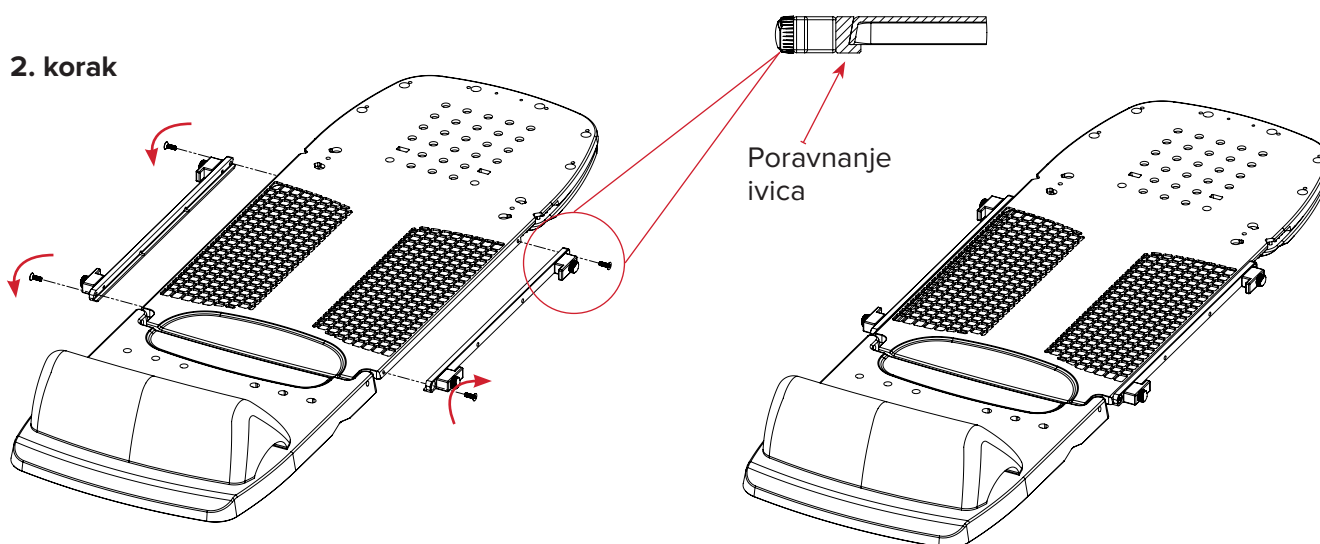

3. korak

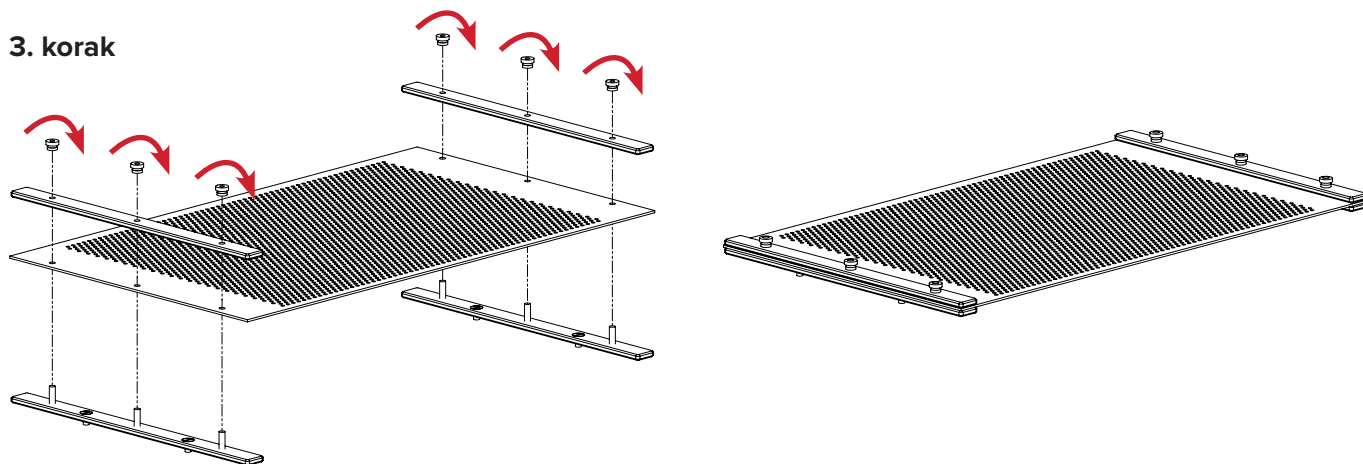

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PODEŠAVANJE


4. korak

Podesite pacijenta na sistemu za tretmane dojki Access Supine.

! NAPOMENA ! Pogledajte vodič za proizvod i uputstvo za upotrebu za sistem Access Supine (P/N 2004394) da biste pronašli uputstva za upotrebu, karakteristike proizvoda, specifikacije, upozorenja, mere opreza i druge opšte mere predostrožnosti u vezi sa upotrebom sistema za tretmane dojki Access Supine.

Omekšajte termoplast (RT-1783P3) sa pričvršćenim Opti-Handles ručkama (RT-4454-14).

Dovršite korake 4A, 4B, 4C i 4D na obe strane termoplasta.

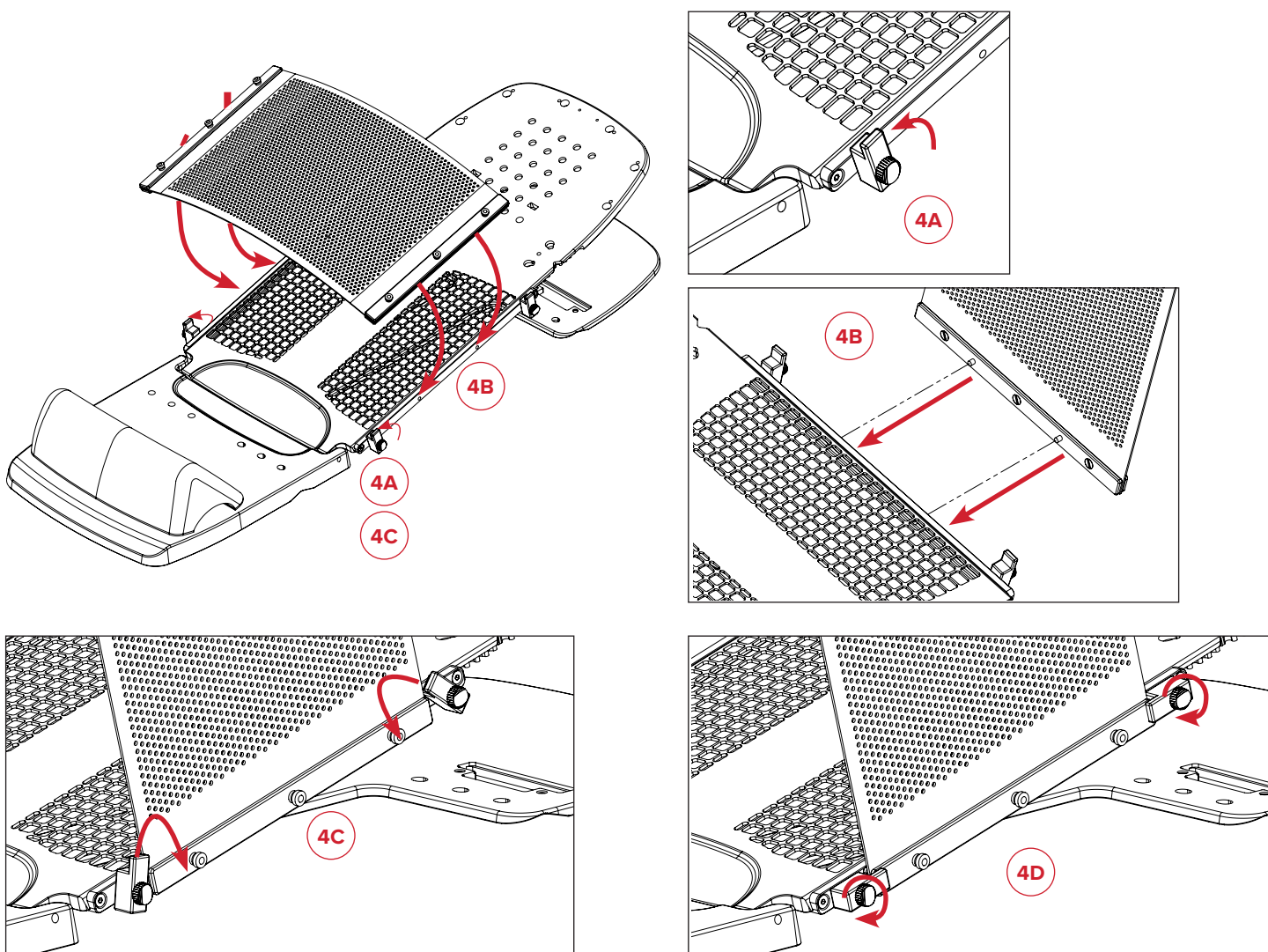

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE





Adapter termoplasta Opti-Handle™

1. korak

Dovršite korake 1A, 1B i 1C na obe strane termoplasta.

Uklonite pacijenta sa sistema za tretmane dojki Access Supine.


! NAPOMENA ! Pogledajte vodič za proizvod i uputstvo za upotrebu za sistem Access Supine (P/N 2004394) da biste pronašli uputstva za upotrebu, karakteristike proizvoda, specifikacije, upozorenja, mere opreza i druge opšte mere predostrožnosti u vezi sa upotrebom sistema za tretmane dojki Access Supine.

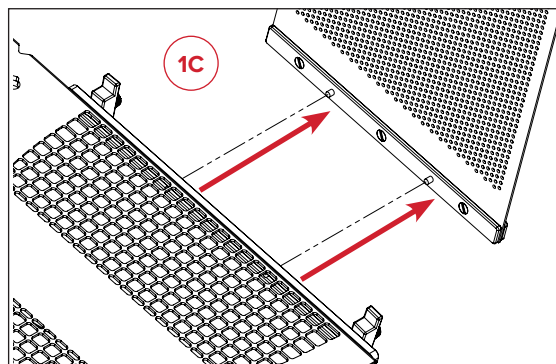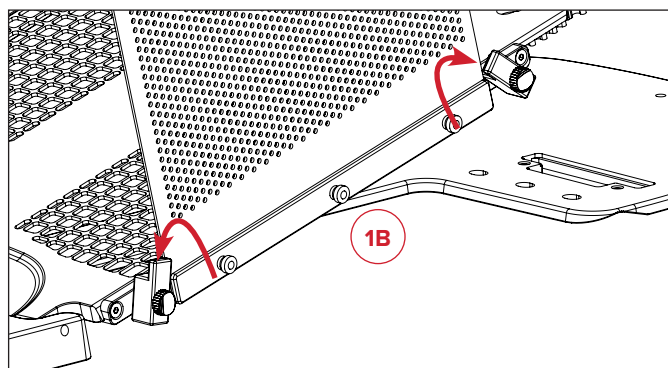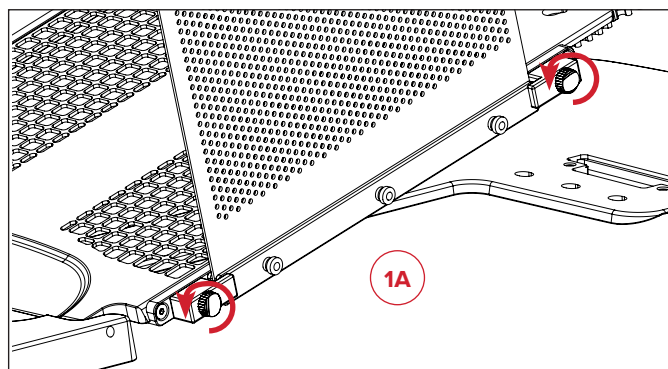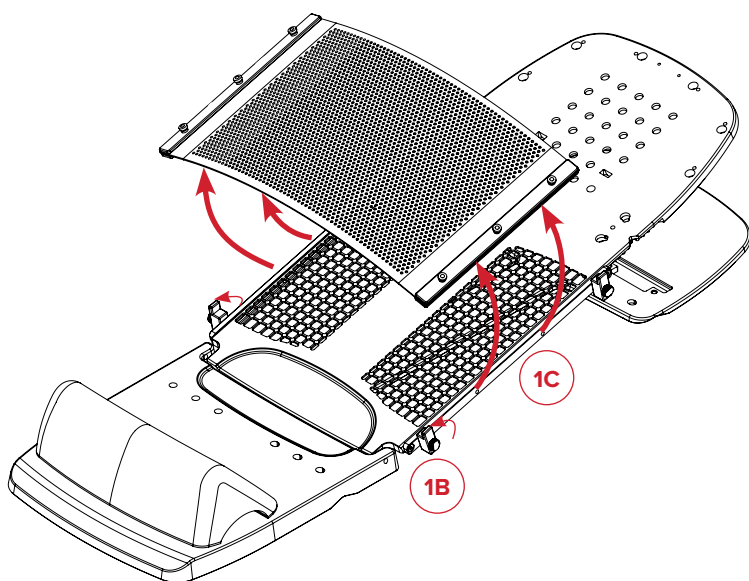



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UKLANJANJE

2. korak

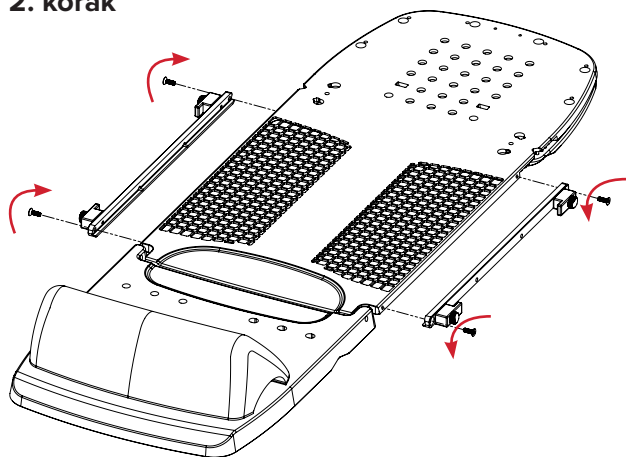

3. korak

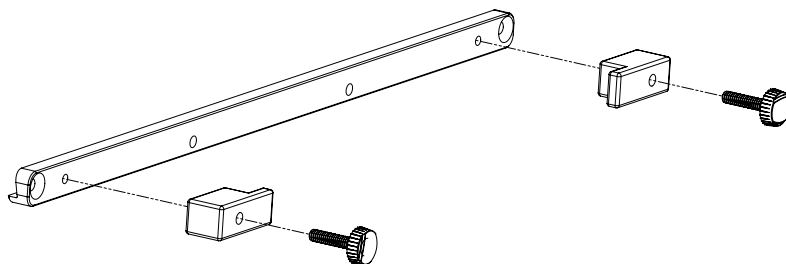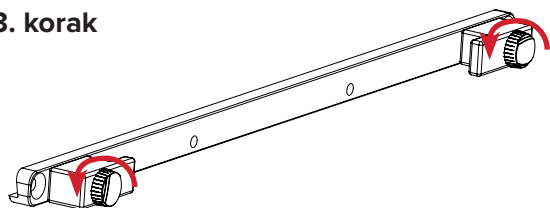

LISTA DELOVA

RT-4546-03 I RT-4546-04

Kompatibilno sa maskama Portrait™ sa S-okvirom

RT-4546-05

Kompatibilno sa podlogom RT-1783P3, Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Kompatibilno sa ručkama RT-4454-14, 35,56 cm (14 inča) Opti-Handles, komplet od 2



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com