

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4546-03

Portrait™ maskadapter för enbart huvud för
Access™ Supine bröstånordning

RT-4546-04

Portrait™ maskadapter för huvud och nacke för
Access™ Supine bröstånordning

RT-4546-05

Opti-Handle™ termoplastadapter för
Access™ Supine bröstånordning

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA PRODUKT BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

Behandling genom en anordning kommer att leda till en ökad huddos. Masker av termoplast attenuerar behandlingsstrålen och ökar huddosen. Attenueringen och den ökade huddosen ska tas med i beräkningen under planering och behandling.

INFORMATION OM MR-SÄKERHET

MR Icke-kliniska tester har visat att **RT-4546-04 Portrait™ maskadapter för huvud och nacke för Access™ Supine bröstnanordning**, **RT-4546-03 Portrait™ maskadapter för enbart huvud för Access™ Supine bröstnanordning** och **RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastadapter för Access™ Supine bröstnanordning** är MR-säkra. **RT-4546-04 Portrait™ maskadapter för huvud och nacke för Access™ Supine bröstnanordning**, **RT-4546-03 Portrait™ maskadapter för enbart huvud för Access™ Supine bröstnanordning** och **RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastadapter för Access™ Supine bröstnanordning** kan användas i en MR-miljö.

- **RT-4546-04 Portrait™ maskadapter för huvud och nacke för Access™ Supine bröstnanordning**, **RT-4546-03 Portrait™ maskadapter för enbart huvud för Access™ Supine bröstnanordning** och **RT-4546-05 Opti-Handle™ termoplastadapter för Access™ Supine bröstnanordning** ska användas med den MR-säkra versionen av Access™ Supine (RT-4546MRI) i enlighet med dess avsedda användning före skanning.
- Den MR-säkra versionen av Access™ Supine (RT-4546MRI) är tydligt märkt med följande symbol:



VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.





MR-SÄKER

En produkt som inte utgör någon känd fara vid exponering för MR-miljö. MR-säkra material består av material som inte leder elektrisk ström, inte innehåller metall och som inte är magnetiska.




BRUKSANVISNING

KONFIGURERING

Enbart huvud

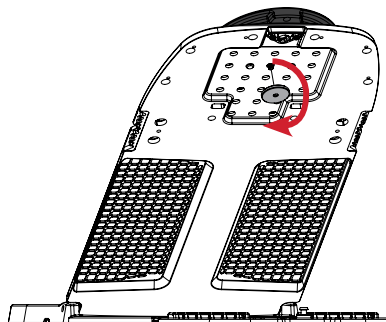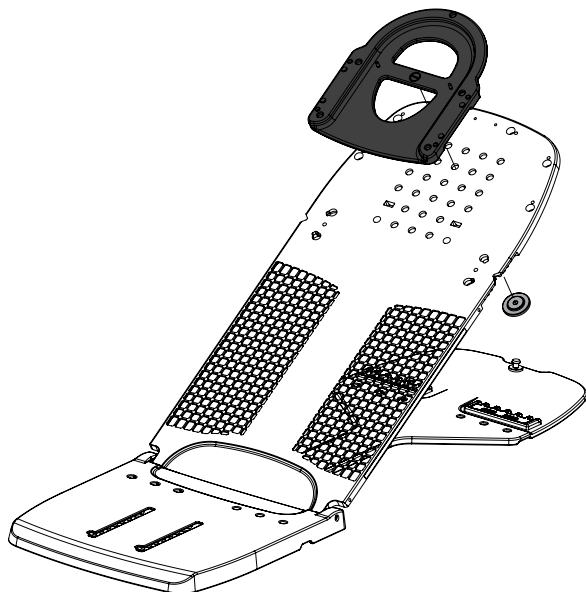

Huvud och axel

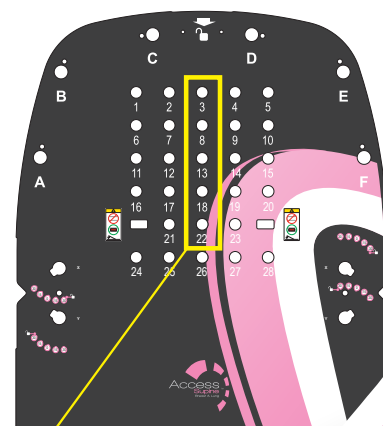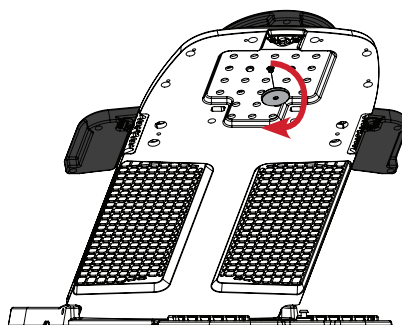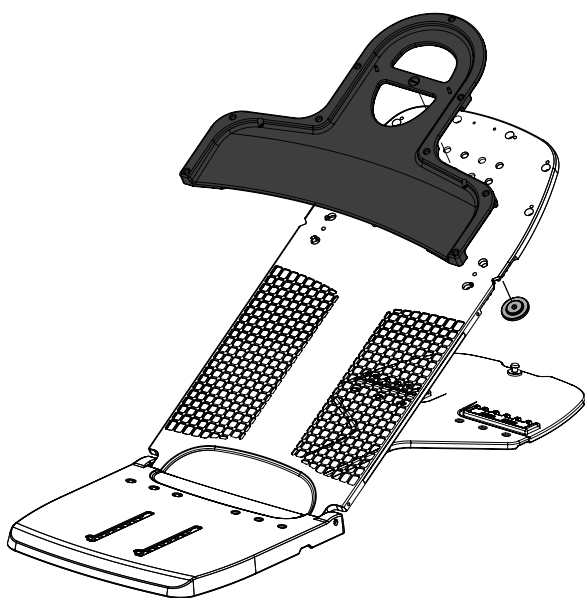


Fäst Portrait™-maskadaptern i Access™ Supine med hjälp av hål 3, 8, 13, 18 eller 22.


BRUKSANVISNING

JUSTERA VID BEHOV FÖR ATT HINDRA RÖRELSE

Vrid för att dra åt

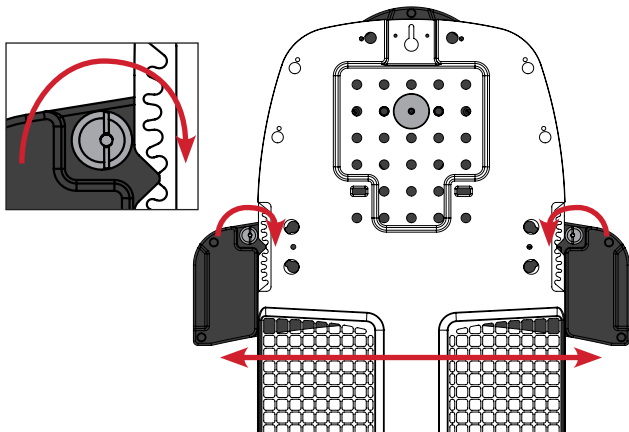



Låst

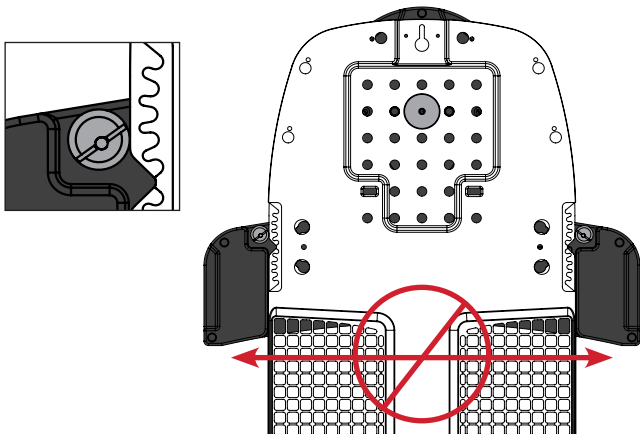



BRUKSANVISNING

BORTTAGNING

Enbart huvud

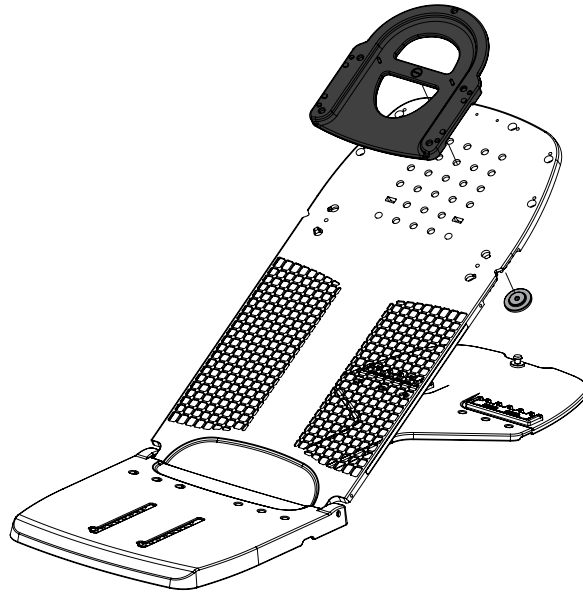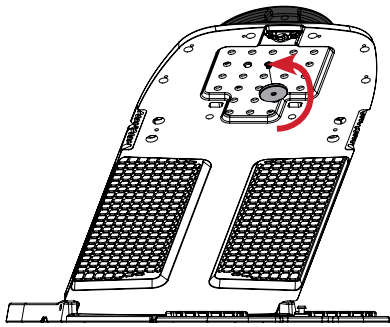

Huvud och axel

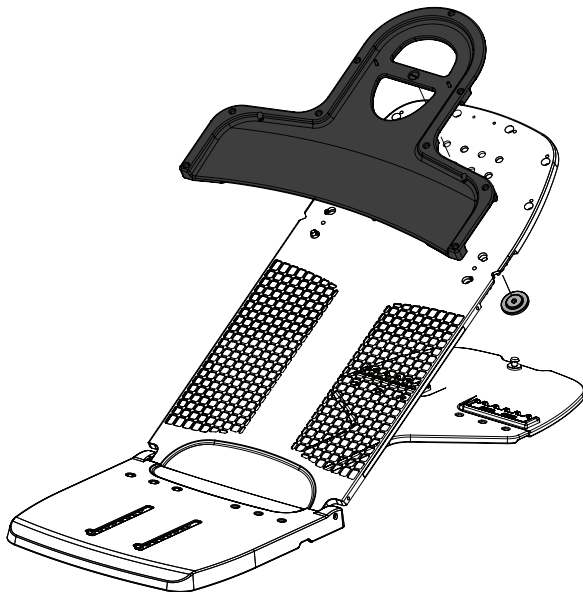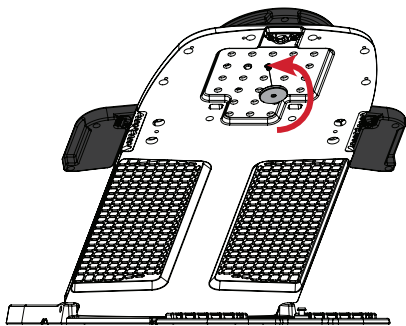


BRUKSANVISNING


KONFIGURERING

Opti-Handle™ termoplastadapter


Steg 1

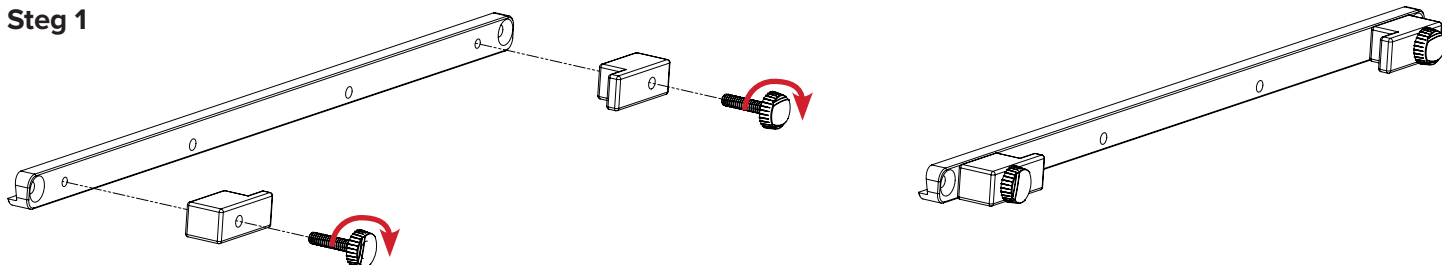

Steg 2

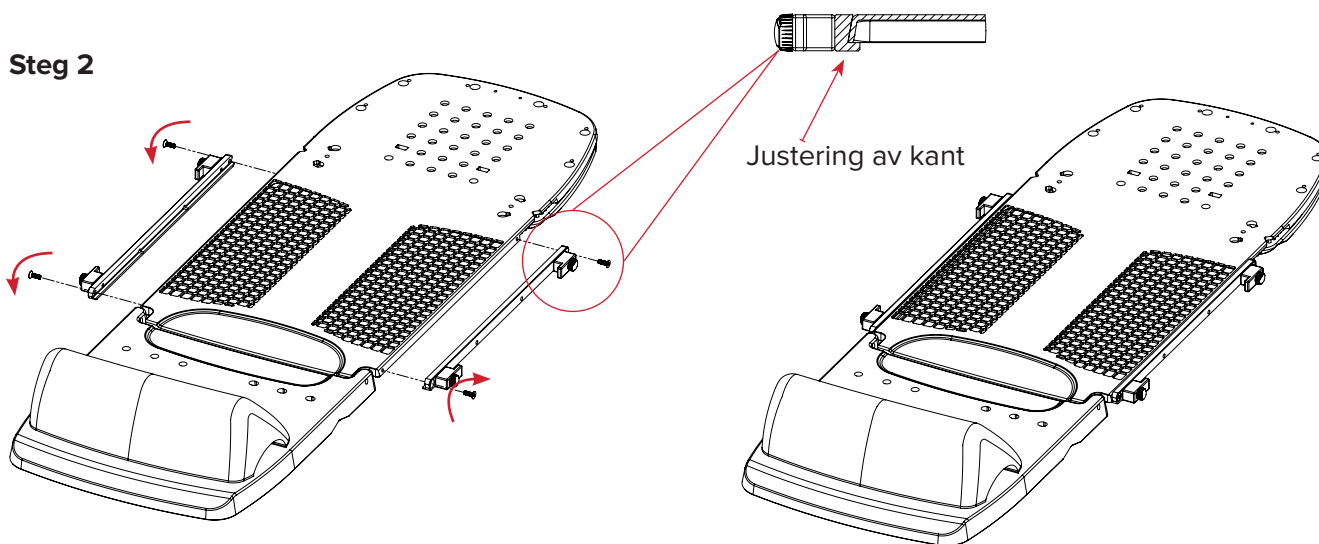

Steg 3

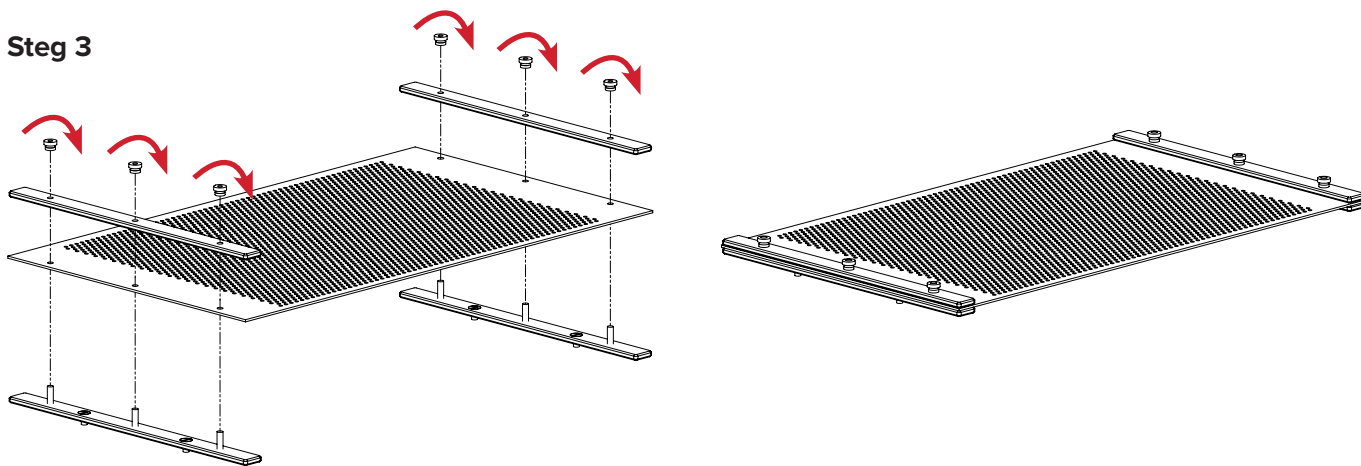

BRUKSANVISNING

KONFIGURERING


Steg 4

lordningställ patienten på Access Supine-bröstanordningen.

! OBS ! Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Access Supine (P/N 2004394) för anvisningar, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och andra allmänna försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Access Supine-bröstanordningen.

Mjuka upp termoplasten (RT-1783P3) med de anslutna Opti-Handles (RT-4454-14).

Slutför stegen 4A, 4B, 4C och 4D på båda sidor av termoplasten.

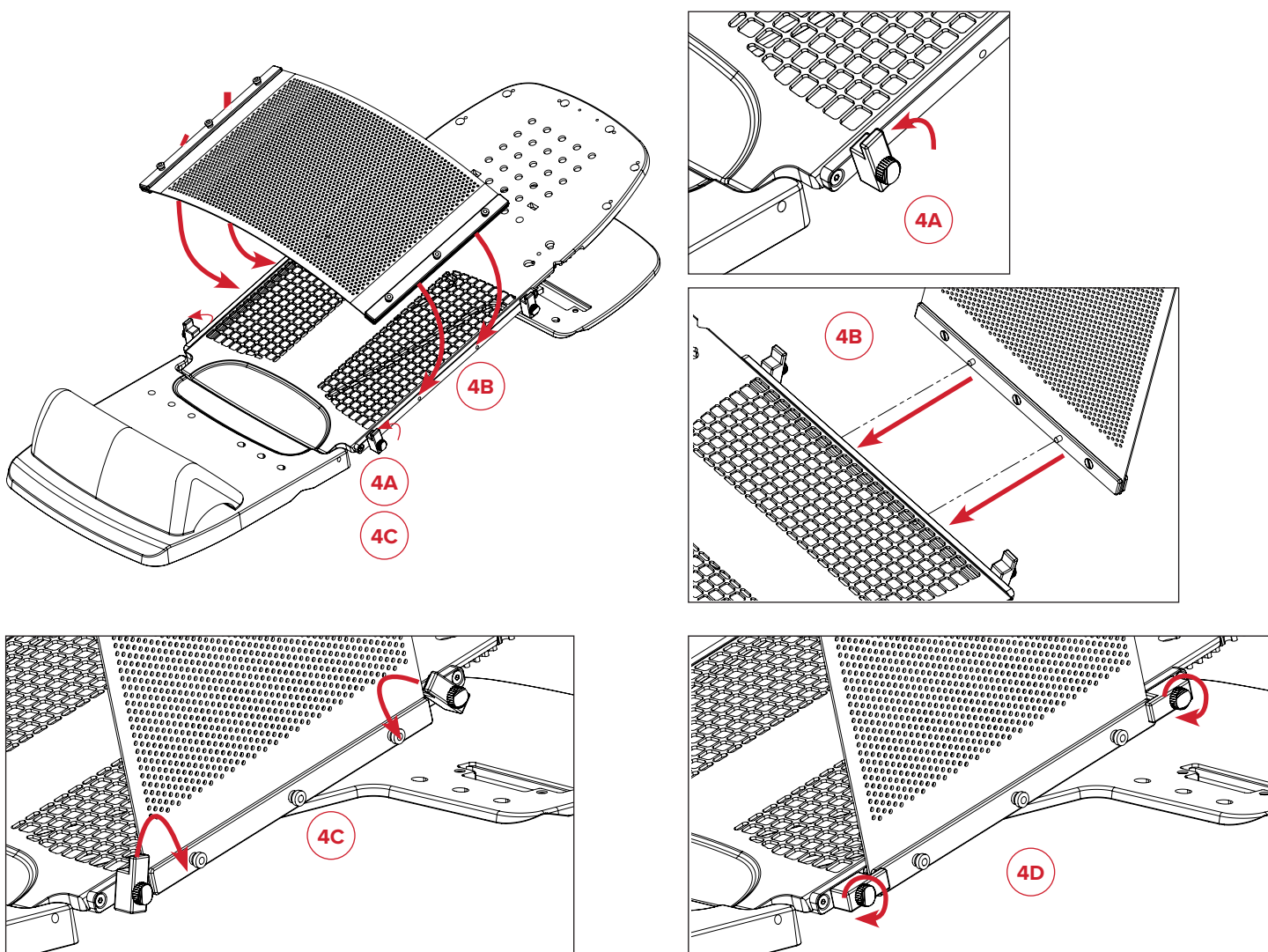

BRUKSANVISNING

BORTTAGNING





Opti-Handle™ termoplastadapter

Steg 1

Slutför stegen 1A, 1B och 1C på båda sidor av termoplasten.

Avlägsna patienten från Access Supine-bröstanordningen.


! OBS ! Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Access Supine (P/N 2004394) för anvisningar, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och andra allmänna försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Access Supine-bröstanordningen.

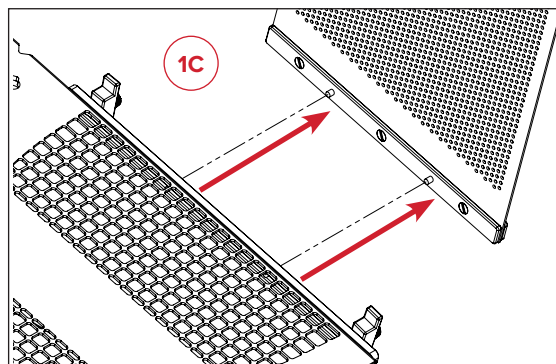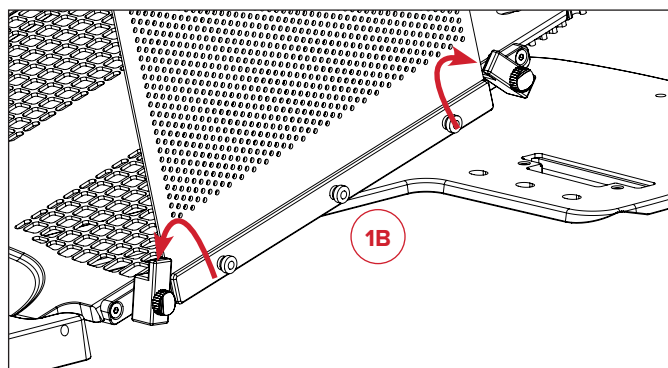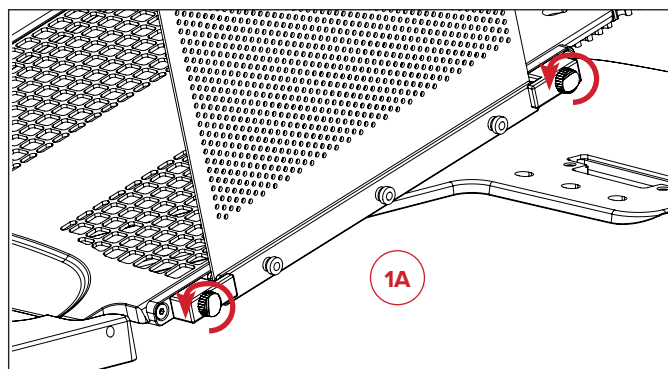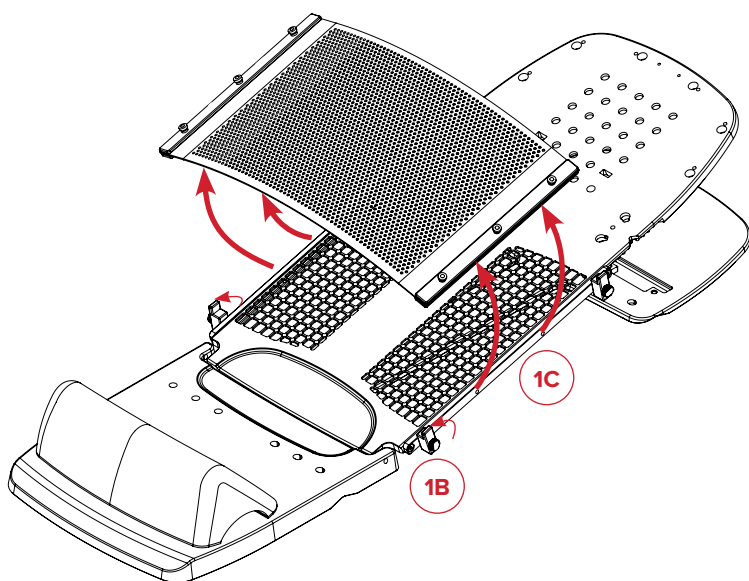



BRUKSANVISNING

BORTTAGNING

Steg 2

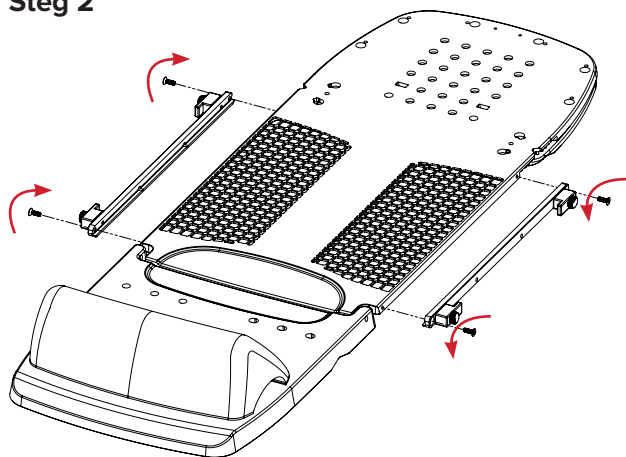

Steg 3

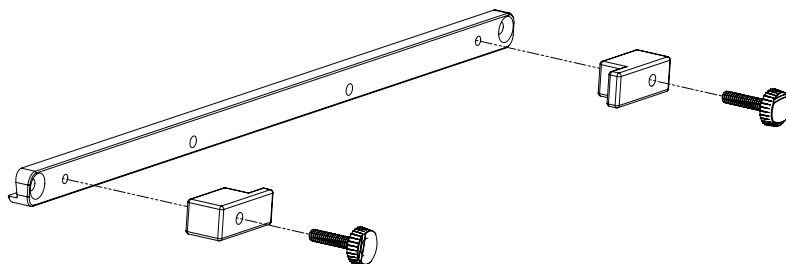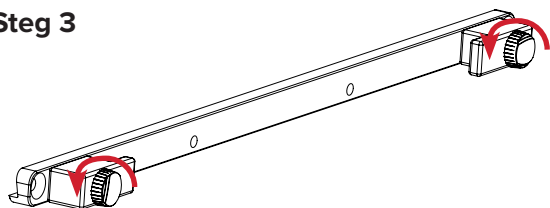

LISTA ÖVER DELAR

RT-4546-03 OCH RT-4546-04

Kompatibel med Portrait™ S Frame-masker

RT-4546-05

Kompatibel med RT-1783P3, Aquaplast RT®-blad, 12 tum x 18 tum, 2,4 mm, Perf

Kompatibel med Opti-Handles RT-4454-14, 35,56 cm (14 tum), uppsättning med 2



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_SV_A
2023-04