



คู่มือ อผลิ ตภัณฑ์ และคู่มือ อสำหรับ บผู้ ใช้

RT-4546-03

ตัวต่อหน้าทากส่วนคื ระะโดยเฉพาะ Portrait™
สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast

RT-4546-04

ตัวต่อหน้าทากส่วนคื ระะและคอ Portrait™
สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast

RT-4546-05

ตัวต่อเทอร์โมพลาสติก ก Opti-Handle™
สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

ข้อพิงระวังท้ วไป

ข้อความแจ้งเต็ อน

! คำเต็ อน ! ไม่อนุญตให้ดัดแปลงอุปกรณ์นี้ หากส่วนประกอบใดๆ ของอุปกรณ์นี้ มี โหลดการท้งานที่ ก่อให้เกิ ดความเส็ ยหายร้ายแรง มี ร่องรอยของความเส็ ยหาย หรือ อท้งานไม่ถู กต้อง ให้หยุดใช้ งานทันที และติ ดต่อ CQ MEDICAL ที่ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 หรือ อ SUPPORT@CQMEDICAL.COM

ความเข้ มของริงสี บำบัดที่ น้อยลง

การให้การรักษาผ่านอุปกรณ์ใดๆ จะทำให้ปริ มาณริงสี ที่ ผิวหน้ งได้รับเพ้ มขึ้ น หน้ากากเทอร์โมพลาสติก จะทำให้ลำแสงของริงสี บำบัดมี ความเข้ มน้อยลงและเพ้ มปริ มาณริงสี ที่ ผิวหน้ งได้รับ ควรพิจารณาถึง ความเข้ มของริงสี บำบัดที่ น้อยลงและปริ มาณริงสี ที่ ผิวหน้ งได้รับที่ เพ้ มขึ้ นในระหว้ งการวางแผนและการรักษา

ข้อมูลความปลอดภัยต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

MR การทดสอบที่ ไม่ใช้การทดสอบทางคลิ นิกแสดงให้ เห็นว่าตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะและคอ Portrait™ รุ่น RT-4546-04 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast, ตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะโดยเฉพาะ Portrait™ รุ่น RT-4546-03 สำหรับ Access™ Supine Breast และตัวต่อเทอร์โมพลาสติก Opti-Handle™ รุ่น RT-4546-05 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast มีความปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะและคอ Portrait™ รุ่น RT-4546-04 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast, ตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะโดยเฉพาะ Portrait™ รุ่น RT-4546-03 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast และตัวต่อเทอร์โมพลาสติก Opti-Handle™ รุ่น RT-4546-05 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast สามารถใช้ได้ ในสภาพแวดล้อมที่ มี สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

- ตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะและคอ Portrait™ รุ่น RT-4546-04 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast, ตัวต่อหน้าทากส่วนที่ ระะโดยเฉพาะ Portrait™ รุ่น RT-4546-03 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast และตัวต่อเทอร์โมพลาสติก Opti-Handle™ รุ่น RT-4546-05 สำหรับอุปกรณ์ Access™ Supine Breast จะต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Access™ Supine รุ่นที่ มีความปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รุ่น RT-4546MRI) ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ งานก่อนดำเนิ นการสแกน
- อุปกรณ์ Access™ Supine รุ่นที่ มีความปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (รุ่น RT-4546MRI) จะได้รับการติ ดจลากรด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้ อย่างชัดเจน



ป้ายเต็ อนและคำอธิบาย

โปรดดูรายการสัญลักษณ์และคำอธิบายสัญลักษณ์เหล่านี้ นได้ที่ www.CQmedical.com





ปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายที่ ทรูบว่าเป็น นผลมาจากการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่ มี สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ ปลอดภัยภายใต้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าผลิต ต่ด้วยวัสดุที่ ไม่นำไฟฟ้า ไม่ใช่โลหะ และไม่ใช่แม่เหล็ก




คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง

ส่วนที่ ๑ อย่างเดียว

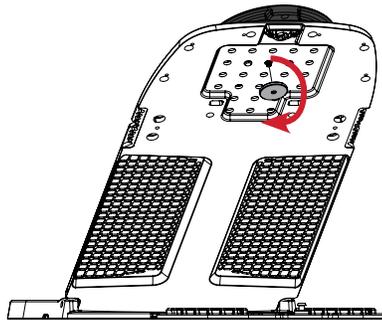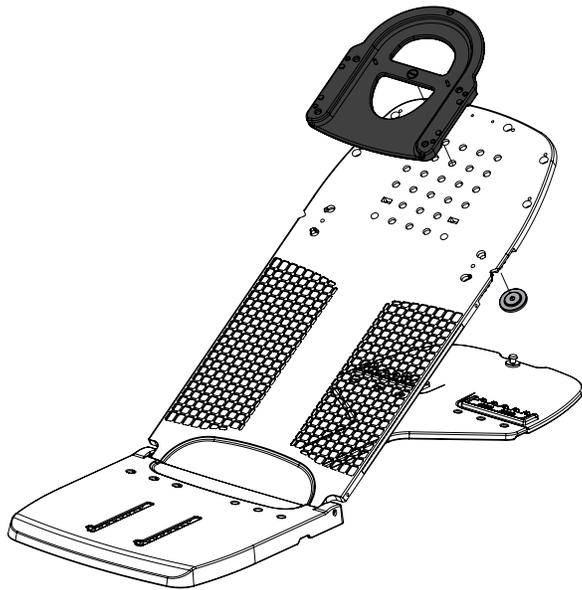

ส่วนที่ ๒ และ ๓

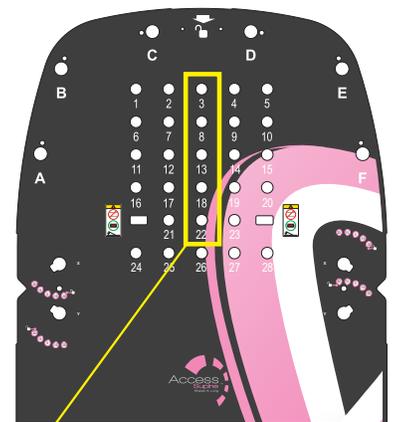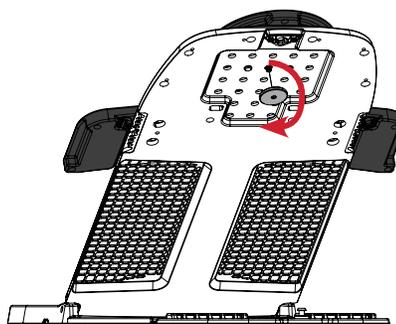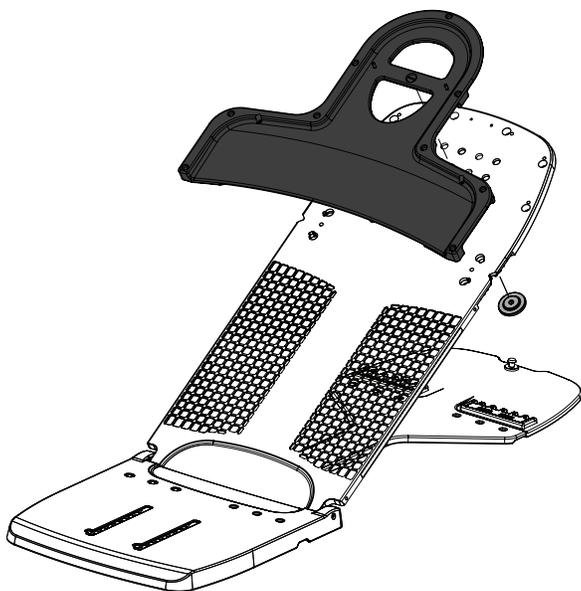


ยึดตัวต่อหน้าจาก Portrait™ เข้ากับอุปกรณ์ Access™ Supine โดยใช้รูที่ 3, 8, 13, 18 หรือ 22


คำแนะนำในการใช้งาน

ปรับในกรณี ที่ จำเป็น เพื่อ อจำกัดไม่ให้เกิด การเคลื่อนไหว

บิดเพื่อ อขันให้แน่น

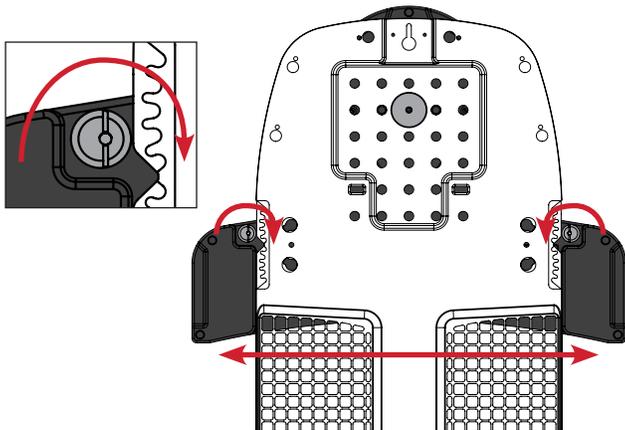



ล็อกแล้ว

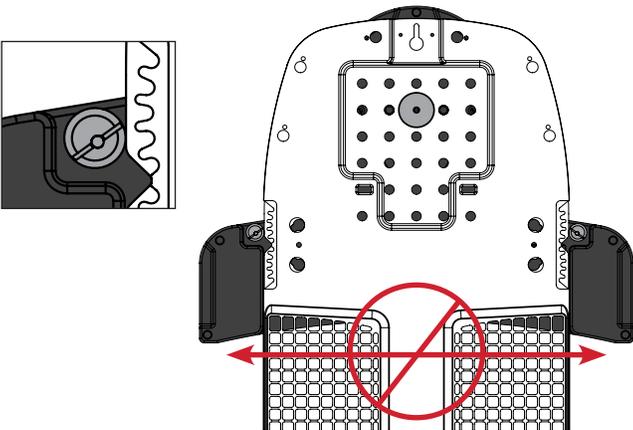



คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดออก

ส่วนนี้ ระวังอย่าได้ ยว

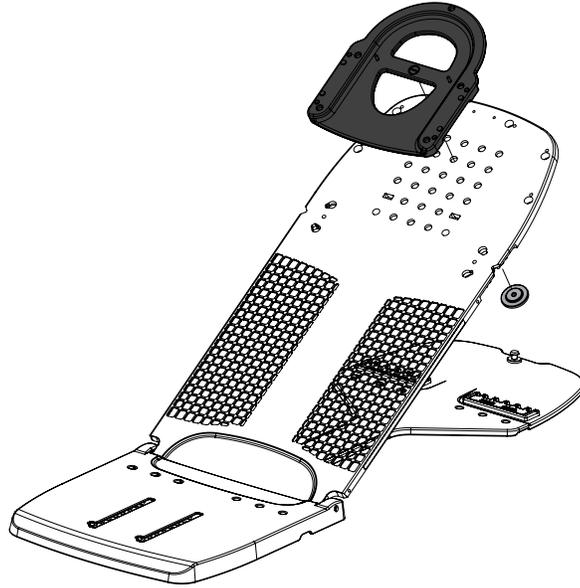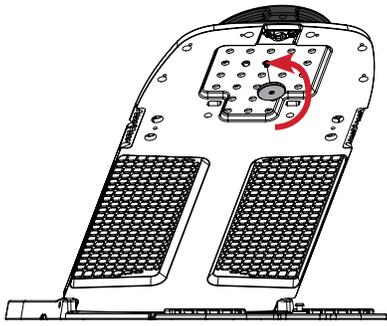

ส่วนนี้ ระวังและไหล

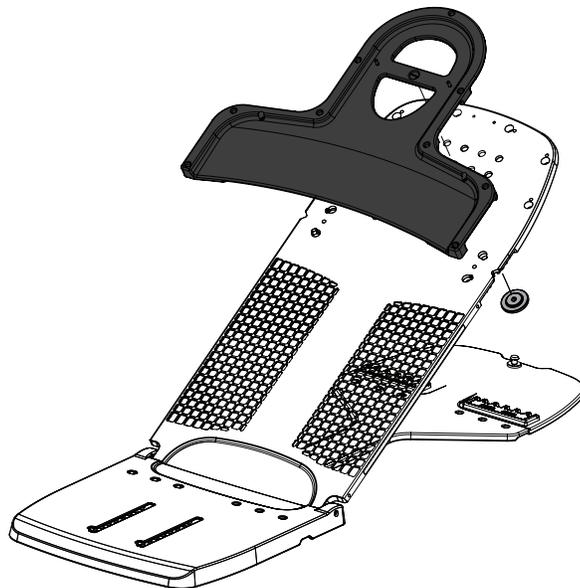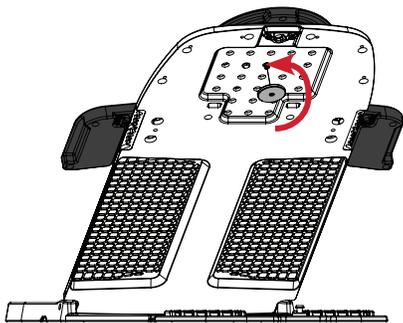


คำแนะนำในการใช้งาน


การติดตั้ง

ตัวต่อเทอร์โมพลาสติก Opti-Handle™


ขั้นตอนที่ 1

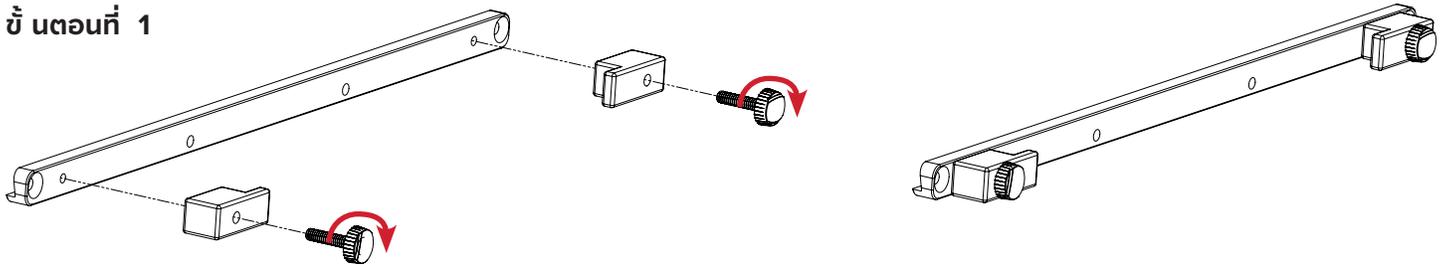

ขั้นตอนที่ 2

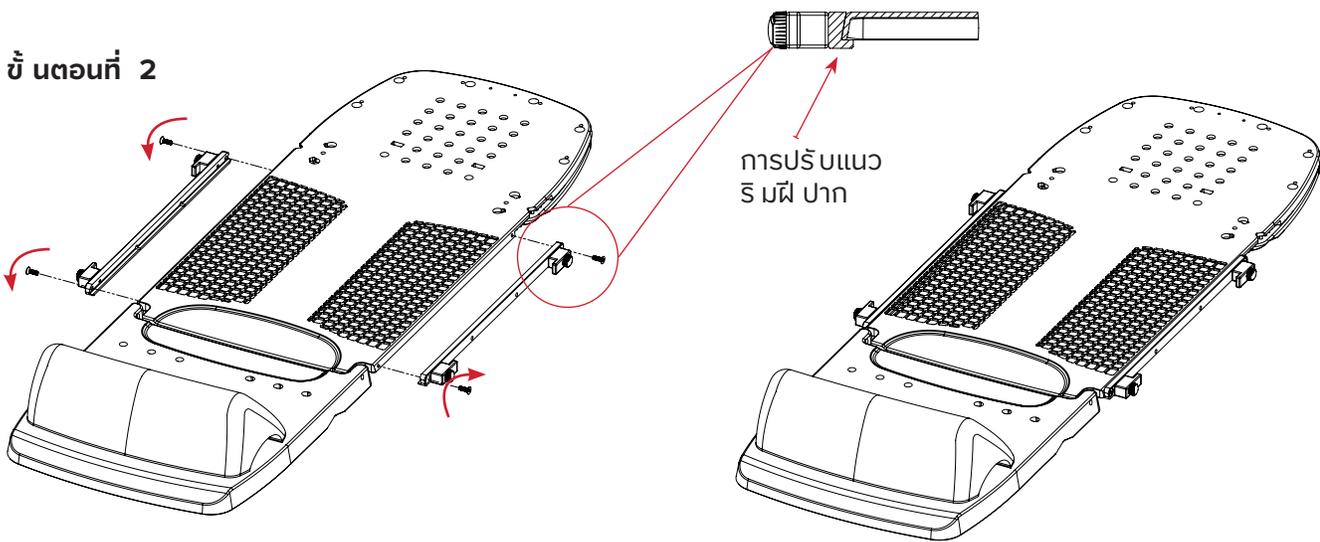

ขั้นตอนที่ 3

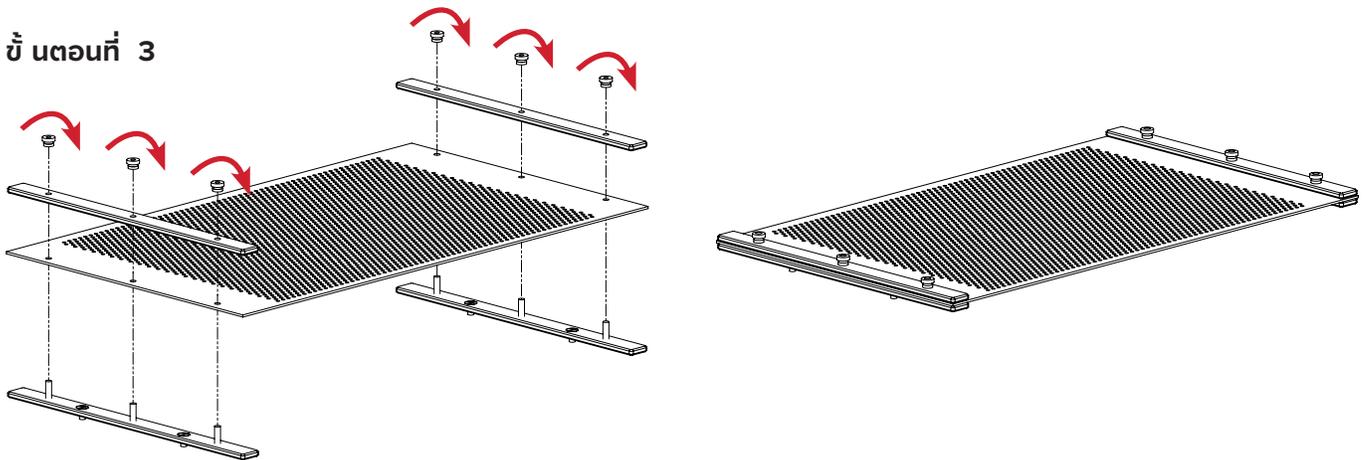

คำแนะนำในการใช้งาน

การติดตั้ง


ขั้นตอนที่ 4

จัดเตรียมท่าทางของผู้ป่วยบนอุปกรณ์ Access Supine Breast

! หมายเหตุ ! โปรดดู คู่มือ ผลิตภัณฑ์ และคู่มือ สำหรับผู้ใช้ ของอุปกรณ์ Access Supine (P/N 2004394) เพื่อ ดูคำแนะนำในการใช้งาน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อพิงระวัง ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้ อุปกรณ์ Access Supine Breast

ทำให้เทอร์โมพลาสติก (RT-1783P3) นี้ มงด้วย Opti-Handle (RT-4454-14) ที่ ติดอยู่

ทำตามขั้นตอน 4A, 4B, 4C และ 4D กับเทอร์โมพลาสติก ทั้ง สองด้านให้เสร็จสิ้น

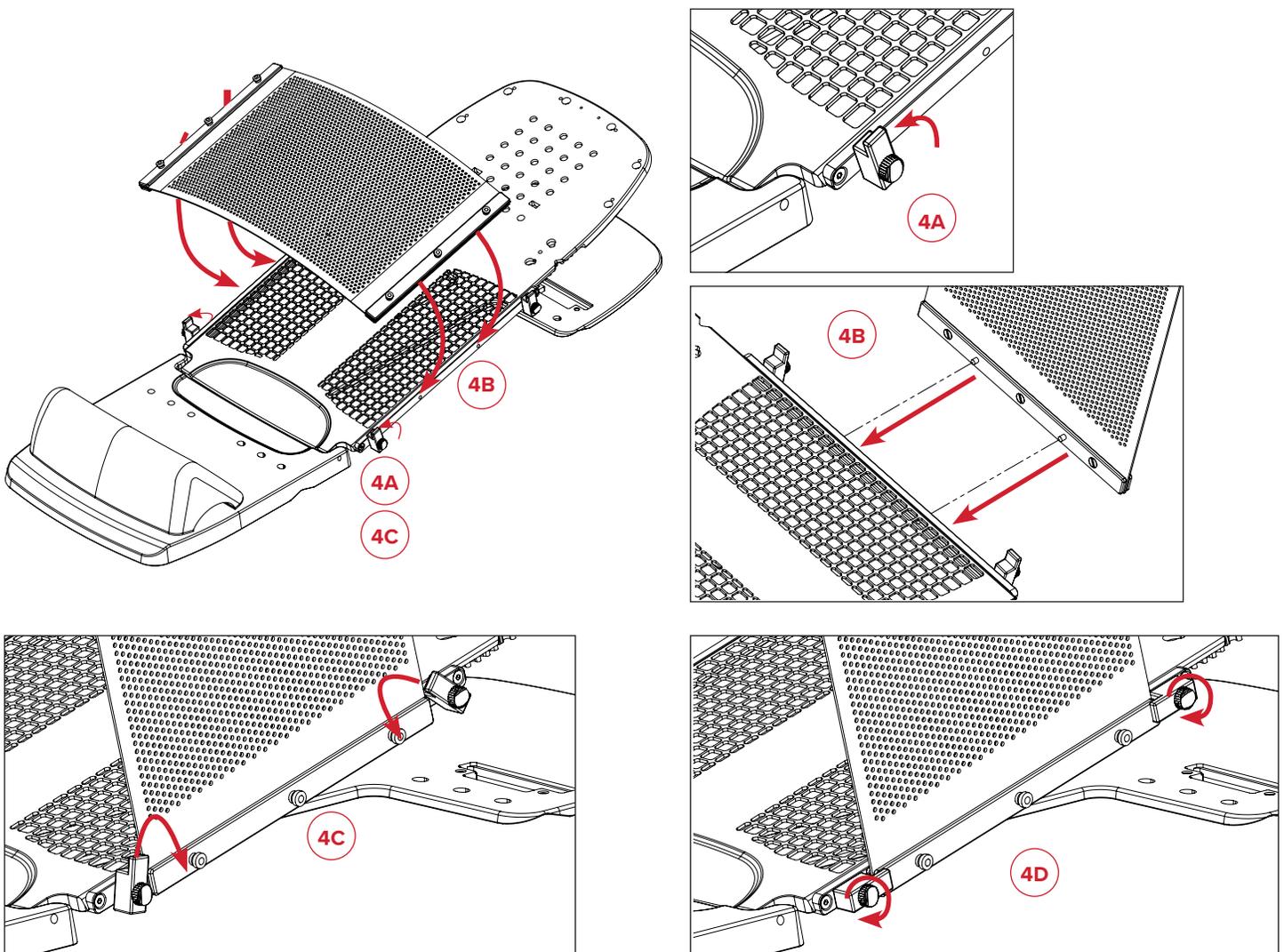

คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดออก





ตัวต่อเทอร์โมพลาสติก Opti-Handle™

ขั้นตอนที่ 1

ทำตามขั้นตอน 1A, 1B และ 1C กับเทอร์โมพลาสติกทั้งสองด้านให้เสร็จสิ้น

นำผู้ป่วยออกจากอุปกรณ์ Access Supine Breast


! หมายเหตุ ! โปรดดูคู่มือผลิตภัณฑ์และคู่มือสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ Access Supine (P/N 2004394) เพื่อดูคำแนะนำในการใช้งาน ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ คำเตือน ข้อควรระวัง และข้อพิงระวังที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อุปกรณ์ Access Supine Breast

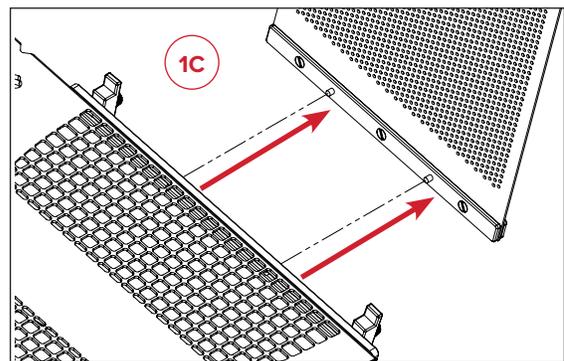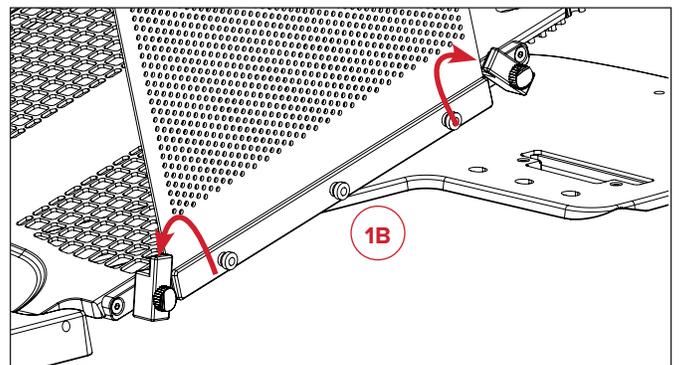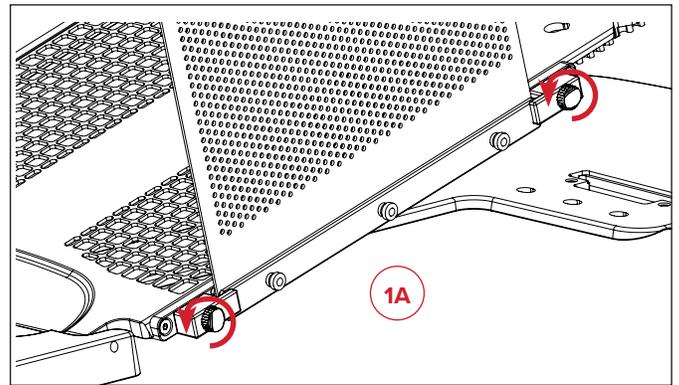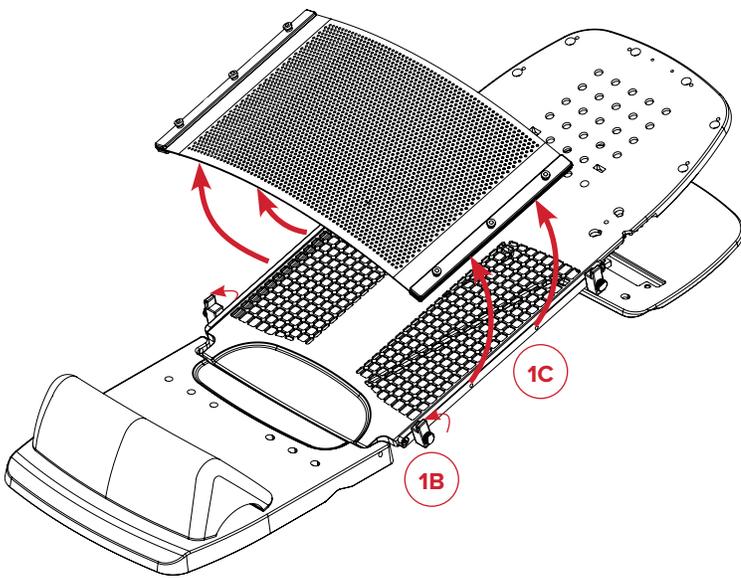



คำแนะนำในการใช้งาน

การถอดออก

ขั้นตอนที่ 2

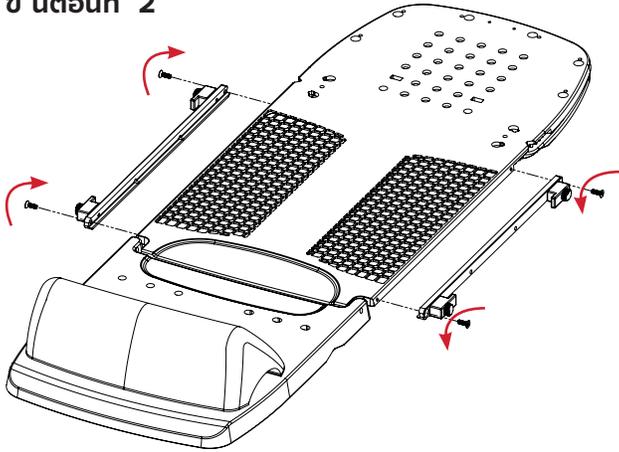

ขั้นตอนที่ 3

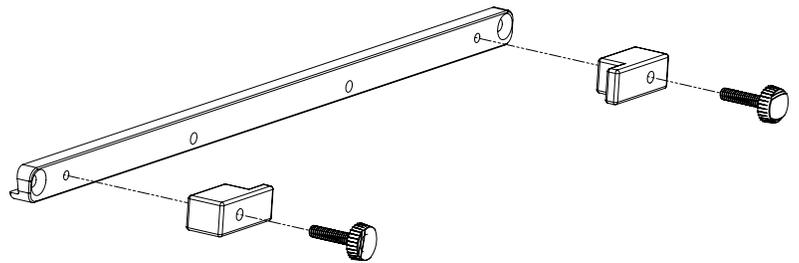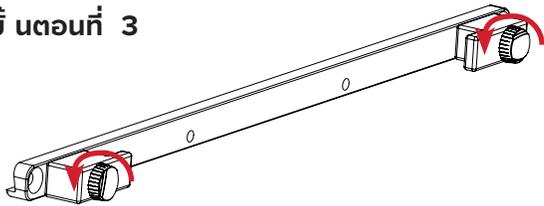

รายการส่วนประกอบ

RT- 4546-03 และ RT- 4546-04

สามารถใช้ได้กับหน้ากาก Portrait™ กรอบ S

RT-4546-05

สามารถใช้ได้กับแผ่น Aquaplast RT® รุ่น RT-1783P3 ขนาด 12 นิ้ว ๖ x 18 นิ้ว ๖, 2.4 มม. ชนิดมีรูพรุน

สามารถใช้ได้กับ Opti-Handles รุ่น RT-4454-14 ขนาด 35.66 ซม. (14 นิ้ว ๖) โดยหนึ่ง ชุดมี 2 ชิ้น



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com