

ÜRÜN KILAVUZU VE KULLANICI EL KİTABI

RT-4546-03

Access™ Supine Göğüs Cihazı için
Portrait™ Yalnızca Baş Maske Adaptörü

RT-4546-04

Access™ Supine Göğüs Cihazı için
Portrait™ Baş ve Boyun Maske Adaptörü

RT-4546-05

Access™ Supine Göğüs Cihazı için
Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör

GENEL ÖNLEMLER

UYARI İFADELERİ

! UYARI ! BU EKİPMANDA MODİFİKASYON YAPILMASINA İZİN VERİLMEZ. CİHAZIN HERHANGİ BİR KISMI ÇOK YÜKSEK DÜZEYDE BİR YÜKE MARUZ KALIR, HASARLI GÖRÜNÜR VEYA UYGUN OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIRSA KULLANIMI HEMEN KESİN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA QFIX İLE İRTİBAT KURUN.

TEDAVİ İŞİNİNİN ZAYIFLAMASI

Herhangi bir cihaz içinden yapılacak tedavi, cildin maruz kaldığı dozda bir artışa yol açacaktır. Termoplastik maskeler bir radyoterapi ışını zayıflatacak ve cilt dozunu artıracaktır. Planlama ve tedavi sırasında söz konusu zayıflama ve artan cilt dozu hesaba alınmalıdır.

MR GÜVENLİK BİLGİSİ

MR Klinik dışı testlerde, **Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-04 Portrait™ Baş ve Boyun Maske Adaptörü, Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-03 Portrait™ Yalnızca Baş Maske Adaptörü ve Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-05 Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör**'ün MR Güvenli olduğu ortaya konmuştur. Klinik dışı testlerde, **Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-04 Portrait™ Baş ve Boyun Maske Adaptörü, Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-03 Portrait™ Yalnızca Baş Maske Adaptörü ve Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-05 Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör**'ün bir MR ortamında kullanılabileceği ortaya konmuştur.

- Tarama öncesinde, **Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-04 Portrait™ Baş ve Boyun Maske Adaptörü, Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-03 Portrait™ Yalnızca Baş Maske Adaptörü ve Access™ Supine Göğüs Cihazı için RT-4546-05 Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör, Access™ Supine (RT-4546MRI) MR Güvenli versiyonuyla, kullanım amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.**
- **Access™ Supine'in MR Güvenli versiyonu (RT-4546MRI), aşağıdaki sembol ile açıkça etiketlenmiştir:**



UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanımları için Qfix.com sitesine bakın.





MR GÜVENLİ

Herhangi bir MR ortamına maruz kalma nedeniyle bilinen tehlikeler oluşturmeyen öğeyi belirtir. MR Güvenli öğeler elektriği iletmeyen, metalik olmayan ve manyetik özelliği bulunmayan malzemelerden oluşur.




ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM

Yalnızca Baş

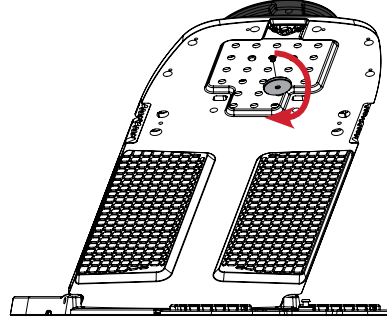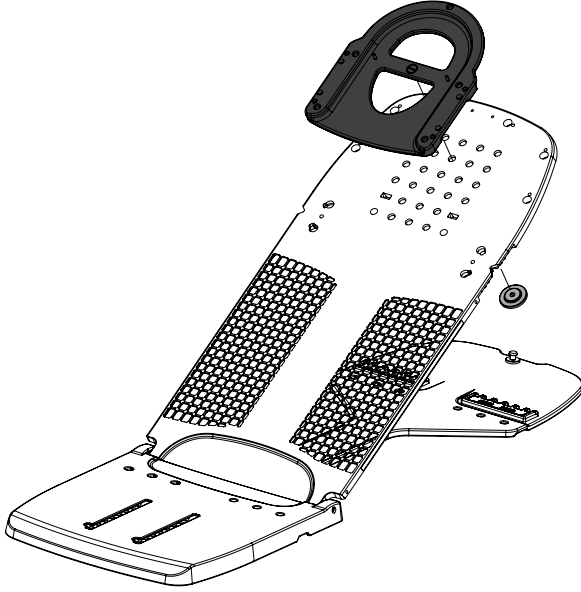

Baş ve Omuz

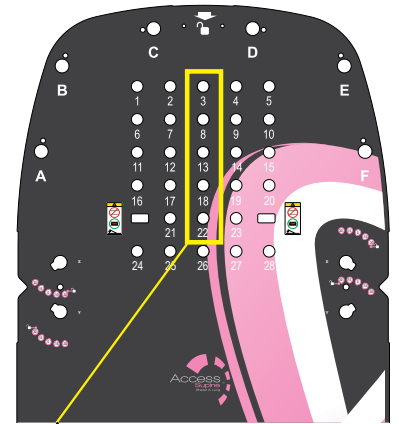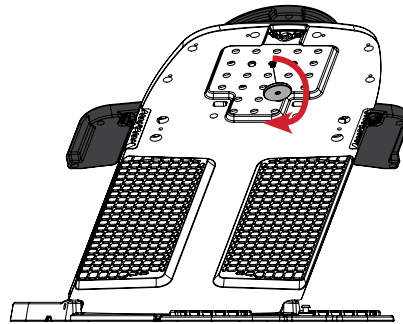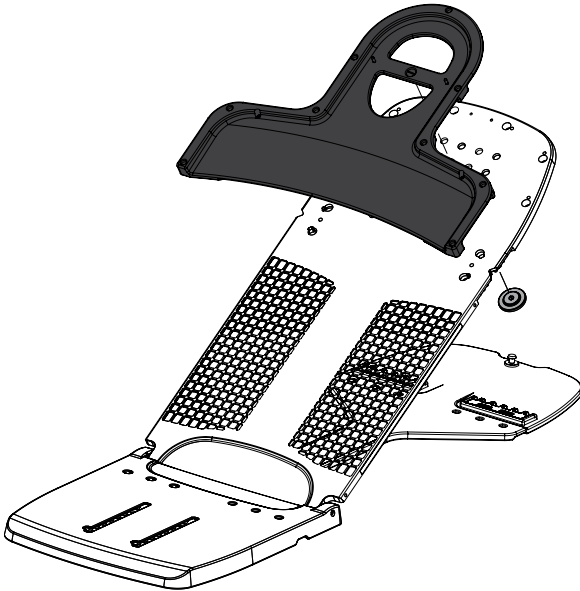


Portrait™ Maske Adaptörünü, delik 3, 8, 13, 18 ya da 22'yi kullanarak Access™ Supine'e sabitleyin.


ÇALIŞTIRMA TALİMATI

HAREKETİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN, GEREKİRSE AYARLAYIN

Döndürerek Sıkın

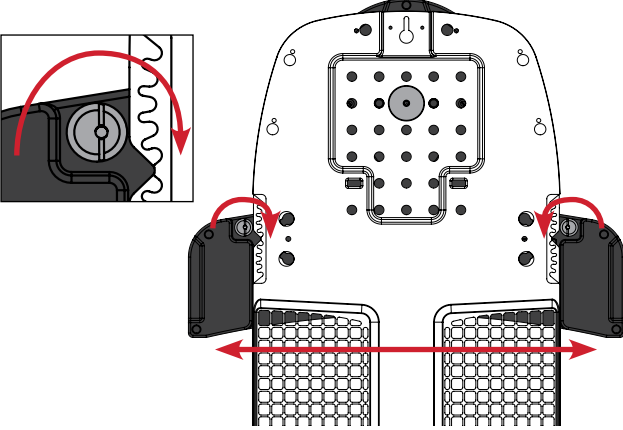



Kilitli

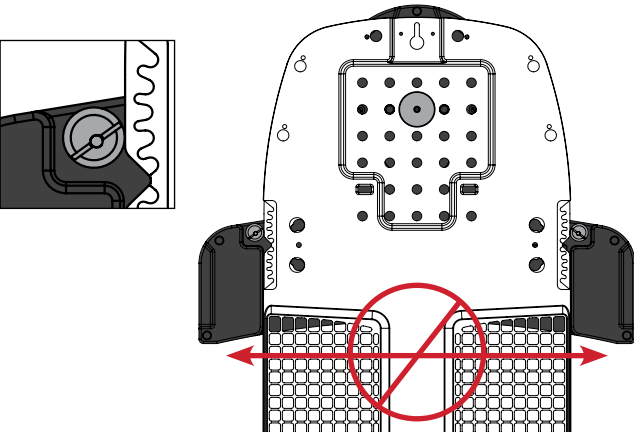



ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA

Yalnızca Baş

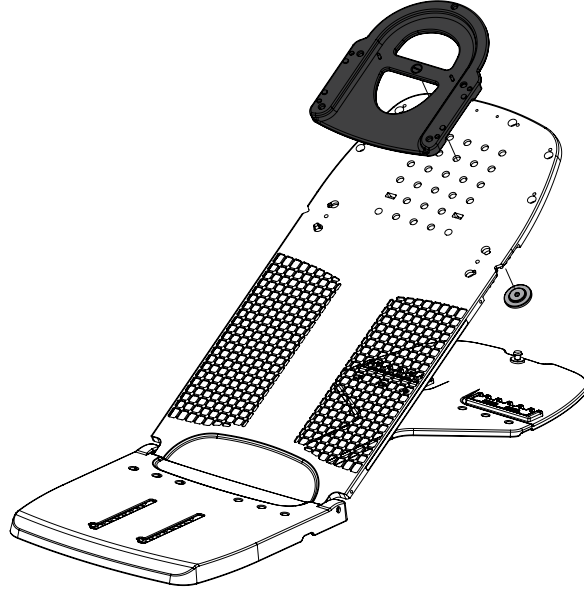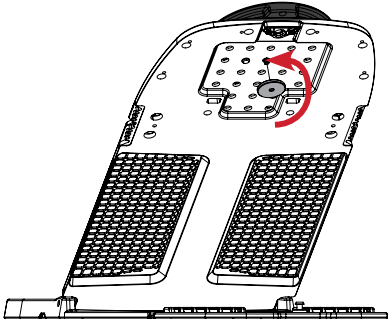

Baş ve Omuz

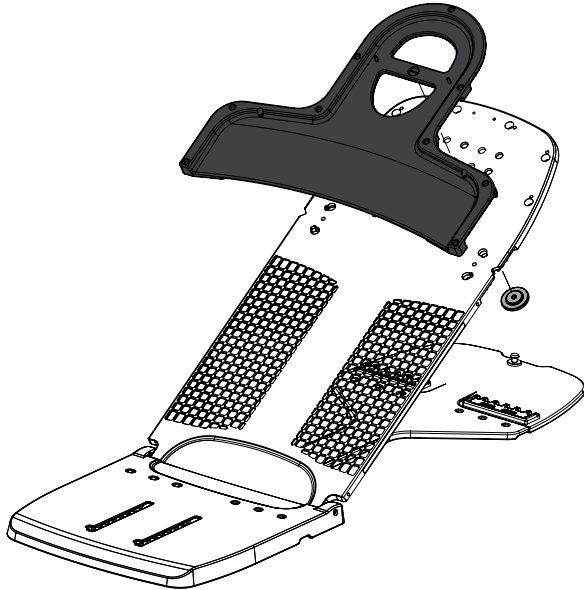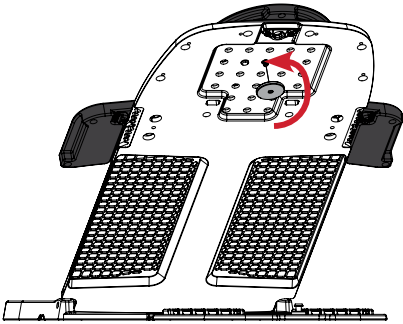


ÇALIŞTIRMA TALİMATI


KURULUM

Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör


Adım 1

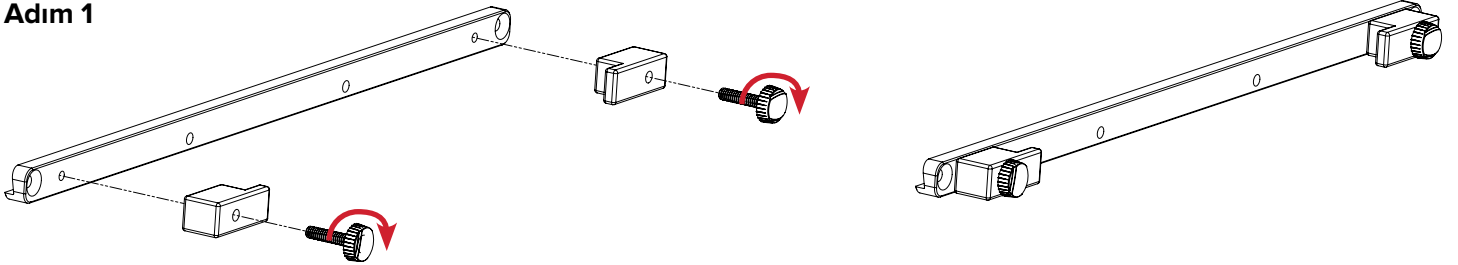

Adım 2

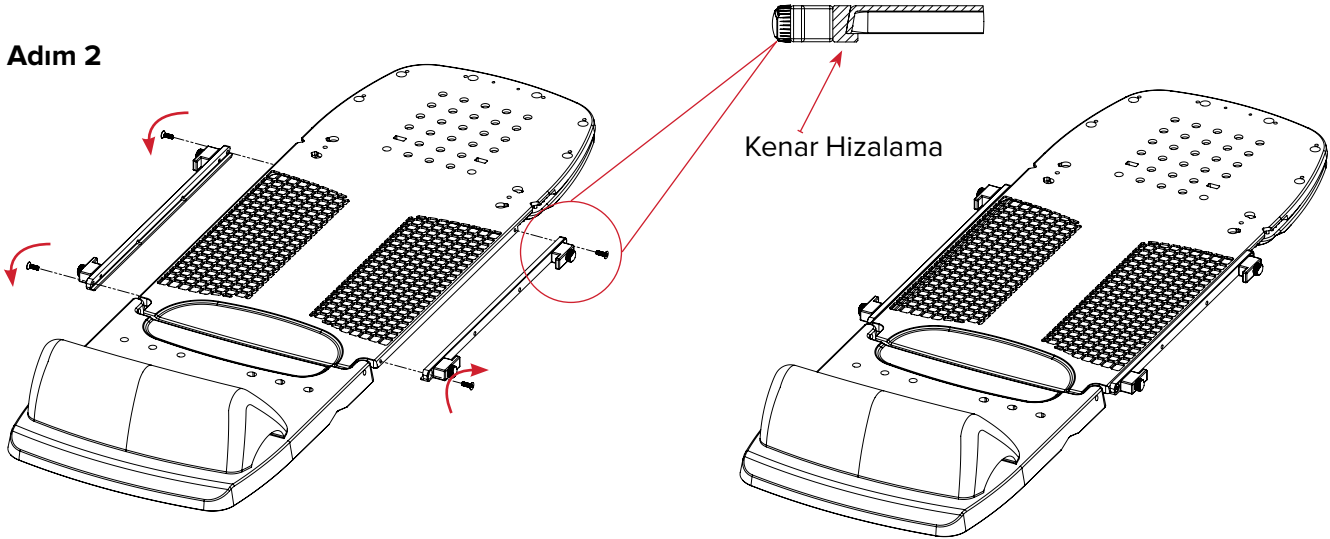

Adım 3

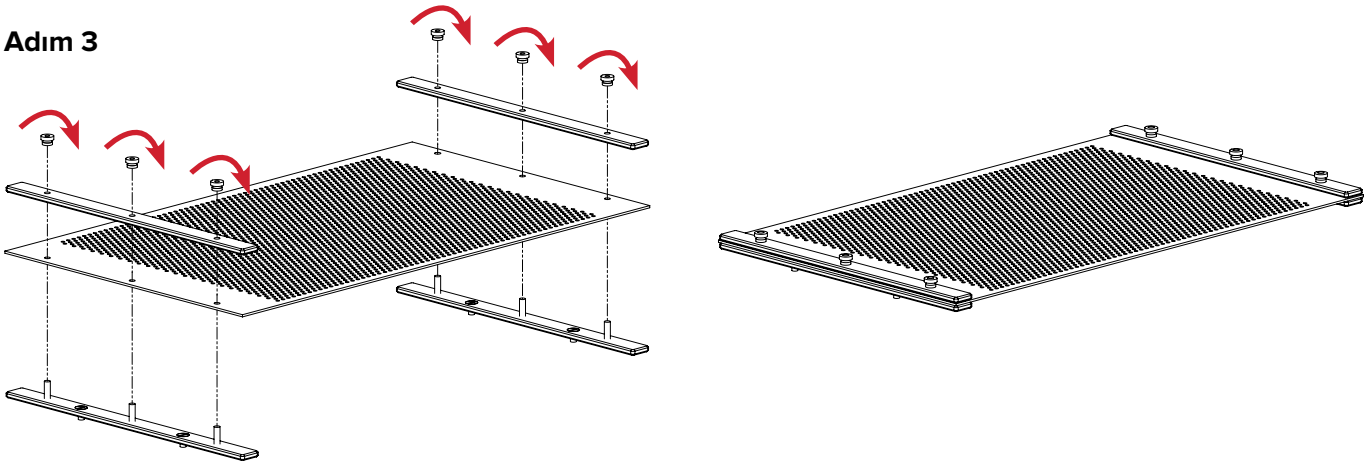

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

KURULUM


Adım 4

Hastayı Access Supine Göğüs Cihazında ayarlayın.

! NOT ! Çalıştırma talimatları, ürün özellikleri, spesifikasyonlar, uyarılar, dikkat ifadeleri ve Access Supine Göğüs cihazının kullanımı ile ilgili diğer genel önlemler için Access Supine (P/N 2004394) Ürün Kılavuzu ve Kullanıcı El Kitabına bakın.

Termoplastiği (RT-1783P3), ilişik Opti-Handles (RT-4454-14) ile yumuşatın.

Termoplastiğin her iki yanında, adım 4A, 4B, 4C ve 4D'yi uygulayın.

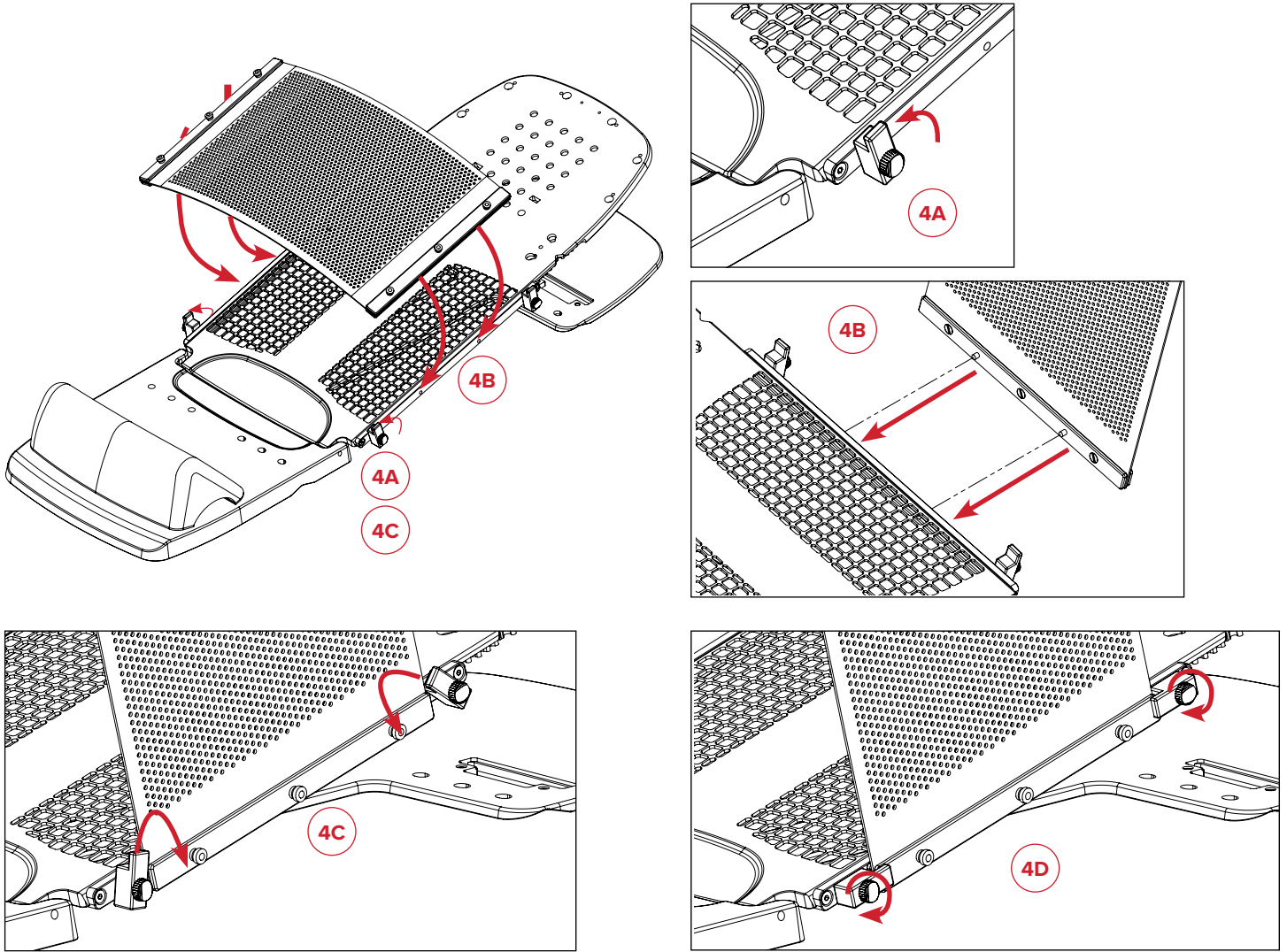

ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA





Opti-Handle™ Termoplastik Adaptör

Adım 1

Termoplastiğin her iki yanında, adım 1A, 1B ve 1C'yi uygulayın.

Hastayı Access Supine Göğüs Cihazından çıkarın.


! NOT ! Çalıştırma talimatları, ürün özellikleri, spesifikasyonlar, uyarılar, dikkat ifadeleri ve Access Supine Göğüs cihazının kullanımı ile ilgili diğer genel önlemler için Access Supine (P/N 2004394) Ürün Kılavuzu ve Kullanıcı El Kitabına bakın.

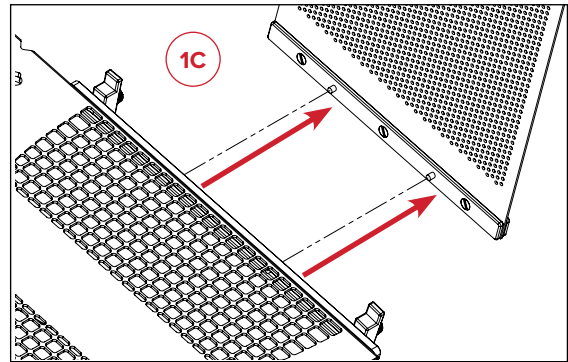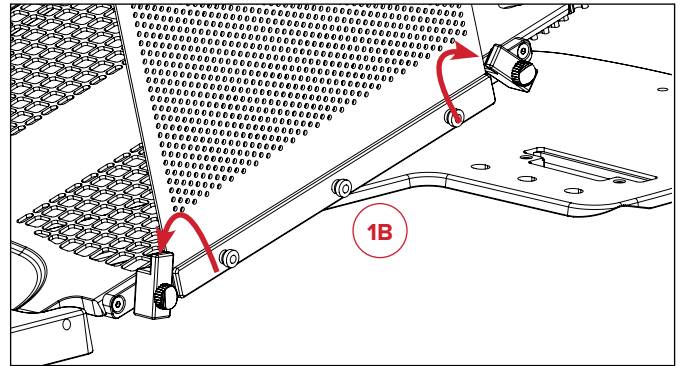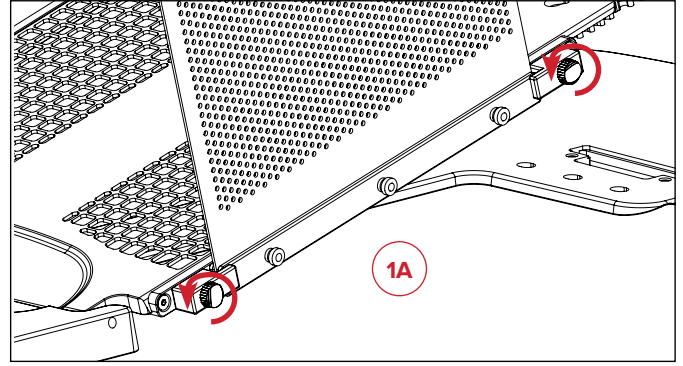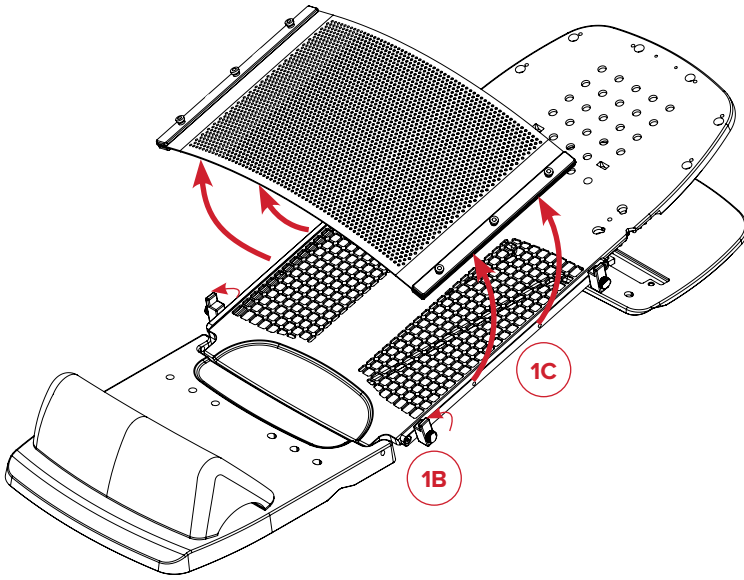



ÇALIŞTIRMA TALİMATI

ÇIKARMA

Adım 2

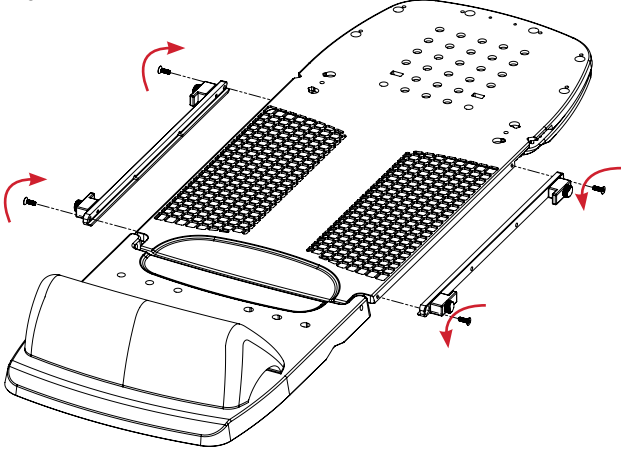

Adım 3

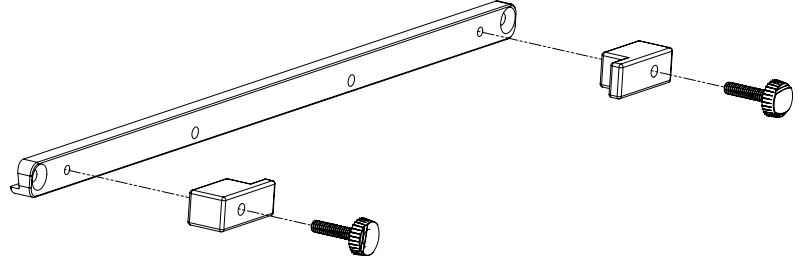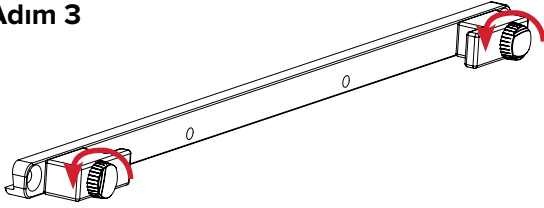

PARÇA LİSTESİ

RT-4546-03 VE RT-4546-04

Portrait™ S Frame Maskelerle uyumludur

RT-4546-05

RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2,4 mm, Perf ile uyumludur

RT-4454-14, 35,56 cm (14 inç) Opti-Handles ile uyumludur, 2'li set



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008021_TR_A
2022-05