



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБУ ТА ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

RT-4546-03

Перехідник маски для голови Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine

RT-4546-04

Перехідник маски для голови та шиї Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine

RT-4546-05

Термопластичний перехідник Opti-Handle™ для грудного пристрою Access™ Supine

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

ЗАГАЛЬНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

! ПОПЕРЕДЖЕННЯ ! БУДЬ-ЯКЕ МОДИФІКУВАННЯ ЦЬОГО ОБЛАДНАННЯ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. ЯКЩО БУДЬ-ЯКА ЧАСТИНА ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ЗАЗНАЛА НАДВЕЛИКОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ПОШКОДЖЕНА АБО ФУНКЦІОНУЄ НЕНАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З КОМПАНІЄЮ CQ MEDICAL ЗА ТЕЛЕФОНОМ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 АБО АДРЕСОЮ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ПОСЛАБЛЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ПУЧКА

Опромінення крізь будь-який пристрій призведе до збільшення шкірної дози. Термопластичні маски послаблюють пучок променевої терапії та збільшують шкірну дозу. Послаблення пучка та збільшення шкірної дози слід враховувати під час планування та лікування.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕЧНІСТЬ МРТ

MR Доклінічні випробування показали, що **перехідник маски для голови та шиї RT-4546-04 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine, перехідник маски для голови RT-4546-03 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine і термопластичний перехідник RT-4546-05 Opti-Handle™ для грудного пристрою Access™ Supine є безпечними для МРТ. Перехідник маски для голови та шиї RT-4546-04 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine, перехідник маски для голови RT-4546-03 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine та термопластичний перехідник RT-4546-05 Opti-Handle™ для грудного пристрою Access™ Supine можуть використовуватися в середовищі МРТ.**

- **Перехідник маски для голови та шиї RT-4546-04 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine, перехідник маски для голови RT-4546-03 Portrait™ для грудного пристрою Access™ Supine та термопластичний перехідник RT-4546-05 Opti-Handle™ для грудного пристрою Access™ Supine необхідно використовувати перед скануванням разом із безпечною для МРТ версією пристрою Access™ Supine (RT-4546MRI) відповідно до його призначення.**
- **Безпечна для МРТ версія пристрою Access™ Supine (RT-4546MRI) чітко позначена таким символом:** **MR**

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ ТА ЇХНІЙ ОПИС

Перелік знаків і їх визначення див. на вебсайті www.CQmedical.com.





БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ МРТ

Виріб, який не представляє жодних відомих небезпек в умовах будь-якого МР-середовища. Вироби, безпечні в МР-середовищі, виготовлені з неметалевих і немагнітних матеріалів, що не проводять електрику.




ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ

Пристрій для голови

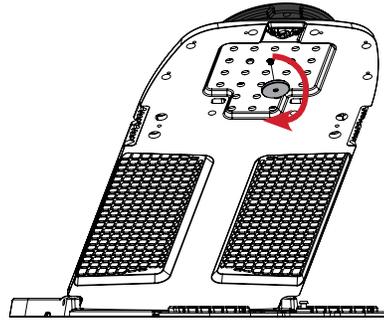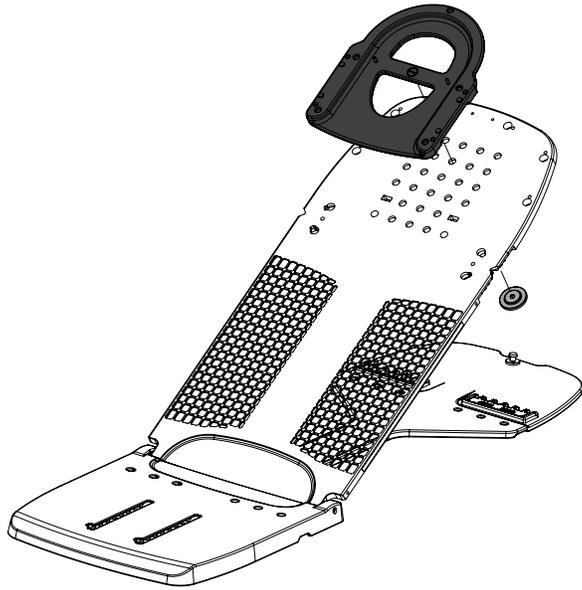

Пристрій для голови та плечей

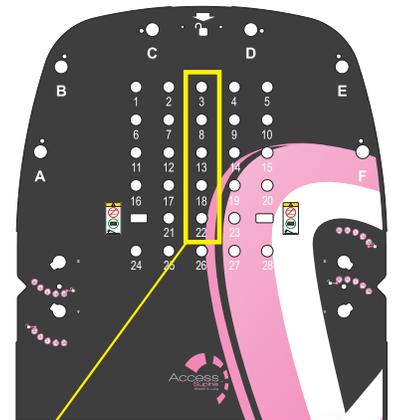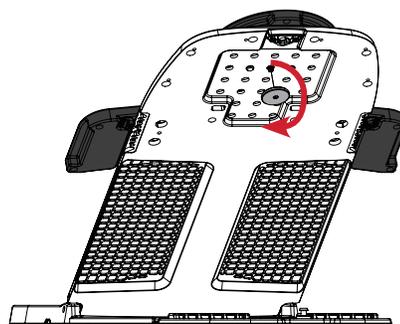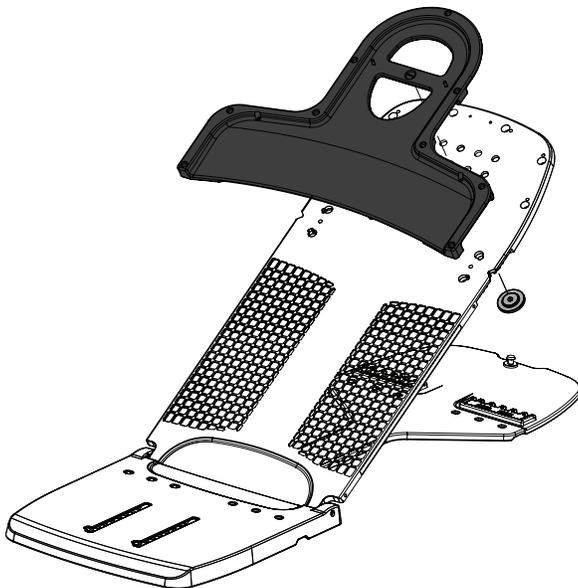


Прикріпіть перехідник маски Portrait™ до пристрою Access™ Supine за допомогою отвору 3, 8, 13, 18 або 22.


ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗА НЕОБХІДНОСТІ ВІДРЕГУЛЮЙТЕ, ЩОБ УНИКНУТИ РУХУ

Закрутіть, щоб
затягнути

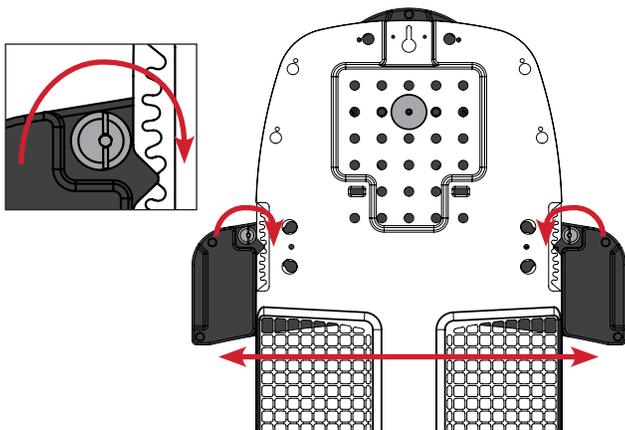



Заблоковано

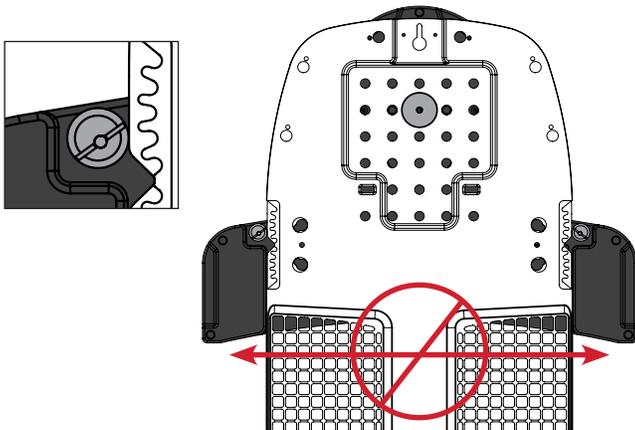



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗНЯТТЯ

Пристрій для голови

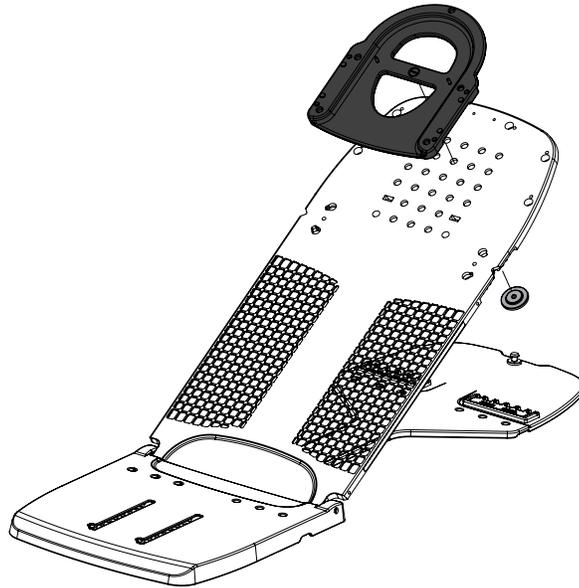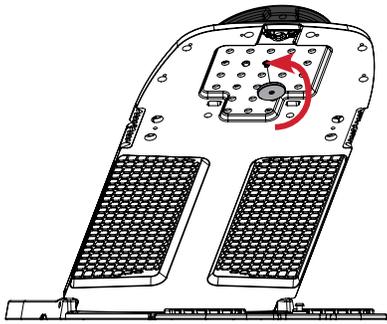

Пристрій для голови та плечей

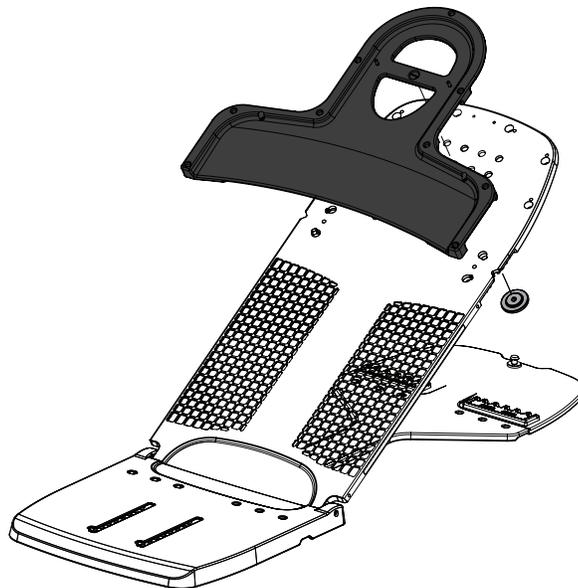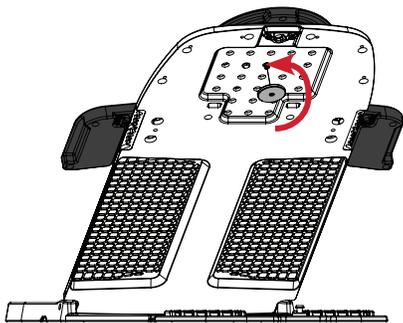


ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ


НАЛАШТУВАННЯ

Термопластичний перехідник Opti-Handle™


Крок 1

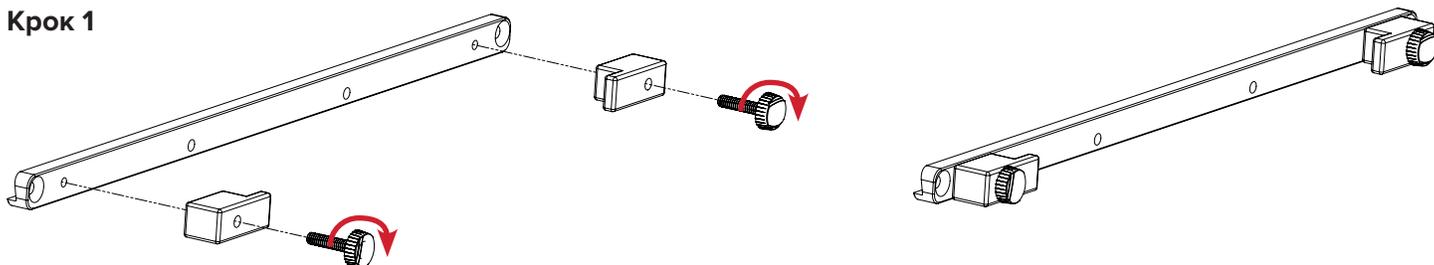

Крок 2

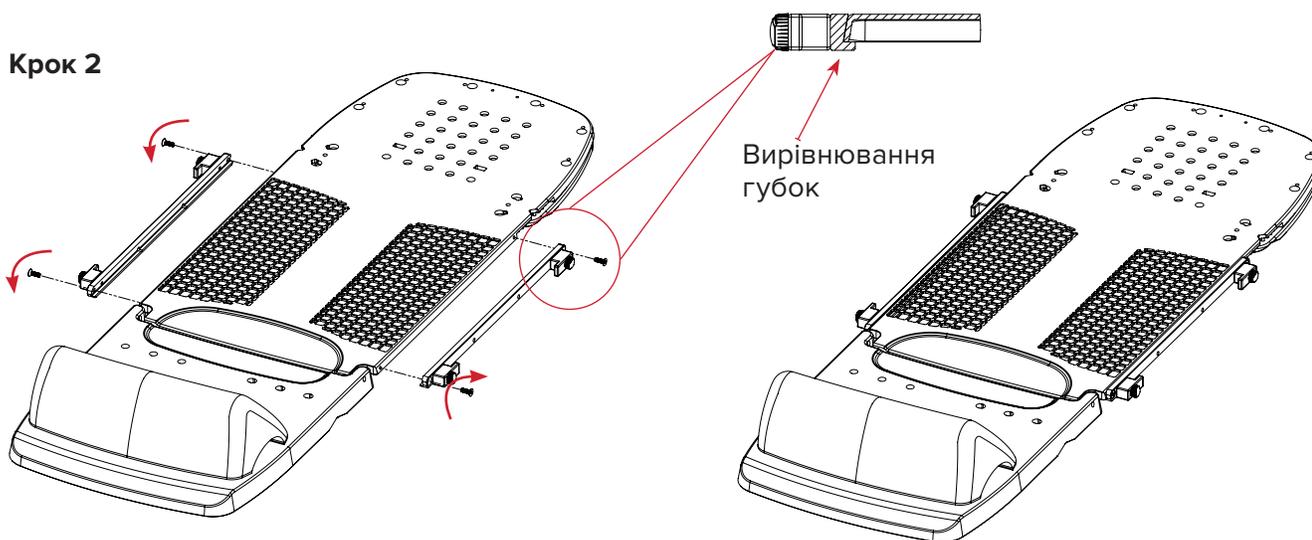

Крок 3

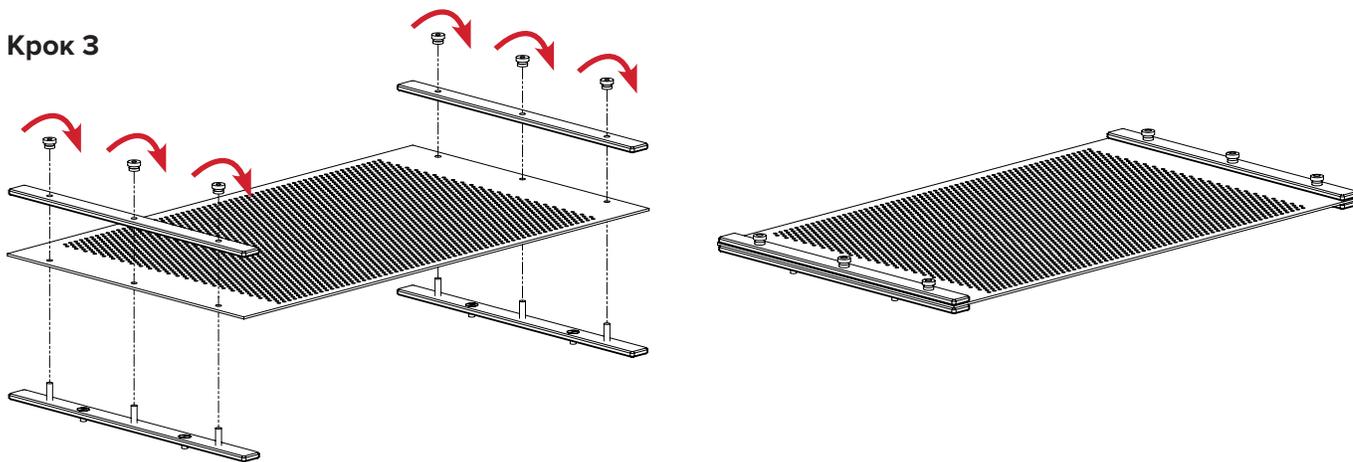

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

НАЛАШТУВАННЯ


Крок 4

Укладіть пацієнта на грудний пристрій Access Supine.

! ПРИМІТКА ! Щоб переглянути інструкції з експлуатації, характеристики продукту, технічні характеристики, попередження, застереження та інші загальні застереження, пов'язані з використанням грудного пристрою Access Supine, зверніться до інструкцій з використання та посібника користувача пристрою Access Supine (P/N 2004394).

Розм'якшіть термопластик (RT-1783P3) за допомогою прикріплених перехідників Opti-Handle (RT-4454-14).

Виконайте кроки 4A, 4B, 4C та 4D з обох сторін термопластику.

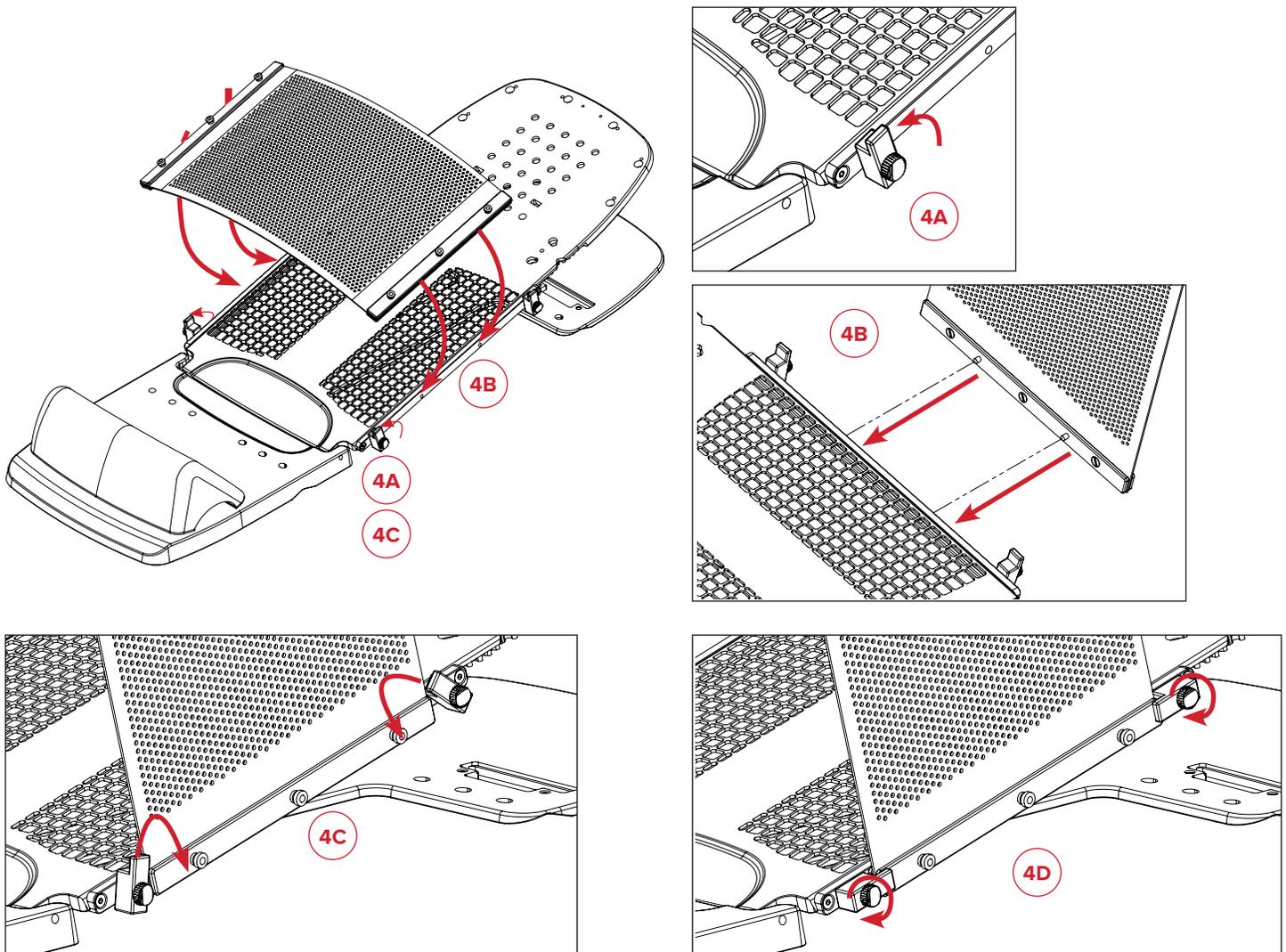

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗНЯТТЯ





Термопластичний перехідник Opti-Handle™

Крок 1

Виконайте кроки 1A, 1B та 1C з обох сторін термопластику.

Зніміть пацієнта з грудного пристрою Access Supine.


! ПРИМІТКА ! Щоб переглянути інструкції з експлуатації, характеристики продукту, технічні характеристики, попередження, застереження та інші загальні застереження, пов'язані з використанням грудного пристрою Access Supine, зверніться до інструкцій з використання та посібника користувача пристрою Access Supine (P/N 2004394).

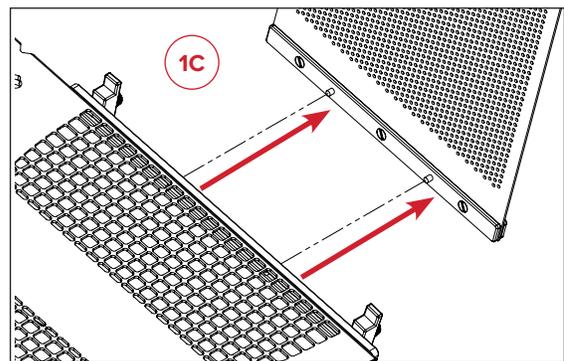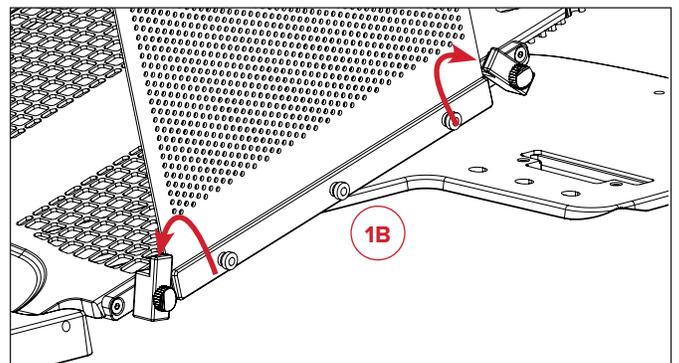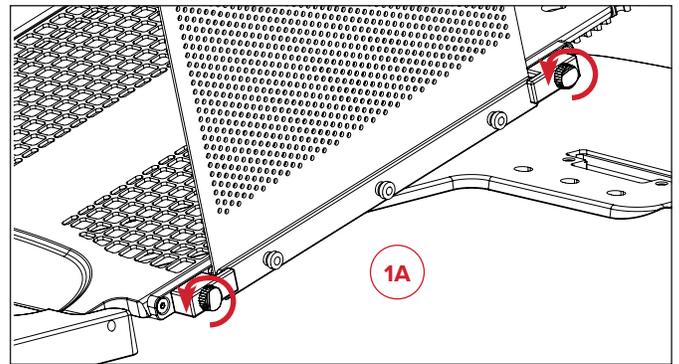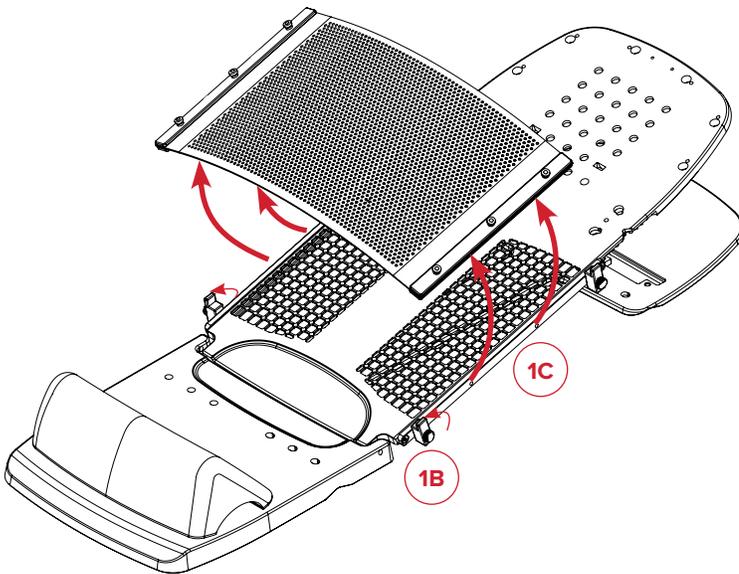



ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗНЯТТЯ

Крок 2

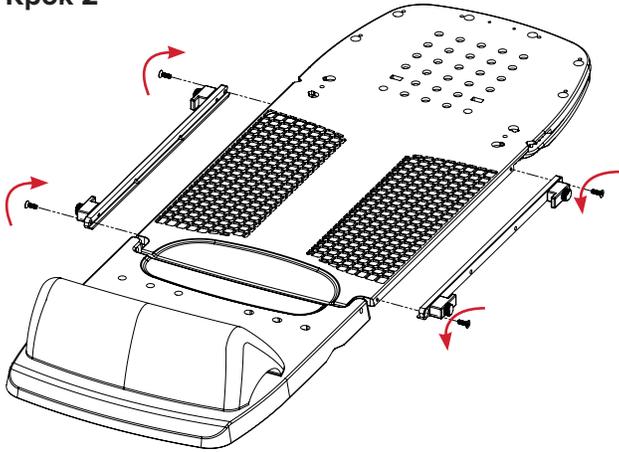

Крок 3

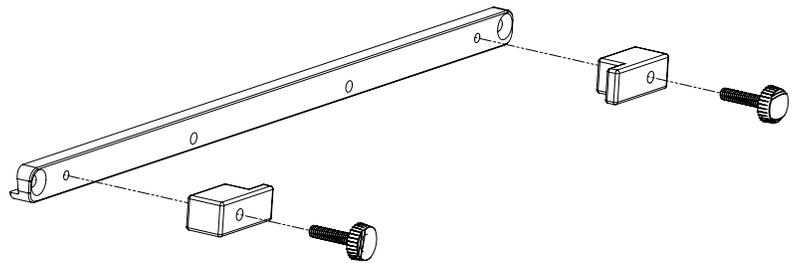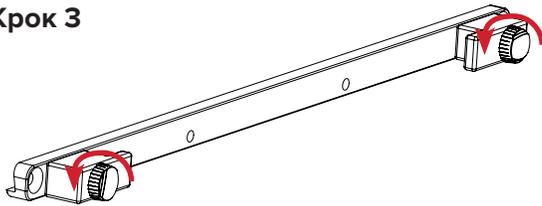

ПЕРЕЛІК ДЕТАЛЕЙ

RT-4546-03 ТА RT-4546-04

Сумісні з масками Portrait™ із S-подібними рамками

RT-4546-05

Сумісний з листом RT-1783P3 Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 мм, перфорованим

Сумісний з перехідниками RT-4454-14 35,56 см (14 дюймів) Opti-Handle, комплект із 2 шт.



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com