



HƯỚNG DẪN VỀ SẢN PHẨM VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

RT-4546-03

Tấm nối che chi đầu Portrait™ dành cho
Thiết bị vú Access™ Supine

RT-4546-04

Tấm nối che đầu và cổ Portrait™ dành cho
Thiết bị vú Access™ Supine

RT-4546-05

Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™ dành cho
Thiết bị vú Access™ Supine

	<p>UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom</p>	
 <p>Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712.737.8688 www.CQmedical.com</p>		<p>Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland</p>

THẬN TRỌNG CHUNG

LỜI CẢNH BÁO

! CẢNH BÁO ! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬA ĐỔI THIẾT BỊ NÀY. NẾU BẤT KỲ BỘ PHẬN NÀO CỦA THIẾT BỊ NÀY CHỊU TẢI QUÁ NẶNG, BỊ HƯ HỎNG HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG ĐÚNG CÁCH, HÃY NGỪNG SỬ DỤNG NGAY VÀ LIÊN LẠC VỚI CQ MEDICAL THEO SỐ +1 712.737.8688 | +1 800.842.8688 HOẶC SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ĐỘ SUY GIẢM CHÙM TIA ĐIỀU TRỊ

Điều trị bằng bất kỳ thiết bị nào sẽ làm tăng liều trên da. Các miếng che bằng nhựa dẻo nhiệt sẽ làm suy giảm chùm tia xạ trị và tăng liều trên da. Cần xem xét độ suy giảm và tăng liều trên da trong quá trình lập kế hoạch và điều trị.

THÔNG TIN AN TOÀN MR

MR Thử nghiệm phi lâm sàng đã chứng minh rằng **Tấm nối che đầu và cổ Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-04, Tấm nối che chi đầu Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-03 và Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-05** an toàn trong môi trường cộng hưởng từ (MR). **Tấm nối che đầu và cổ Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-04, Tấm nối che chi đầu Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-03 và Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-05** có thể được sử dụng trong môi trường MR.

- **Tấm nối che đầu và cổ Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-04, Tấm nối che chi đầu Portrait™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-03 và Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™ dành cho Thiết bị vú Access™ Supine RT-4546-05 phải được sử dụng với phiên bản An toàn MR của Thiết bị Access™ Supine (RT-4546MRI) phù hợp với mục đích sử dụng trước khi chụp.**
- **Phiên bản An toàn MR của Thiết bị Access™ Supine (RT-4546MRI) được dán nhãn rõ ràng với biểu tượng sau:**



NHÃN CẢNH BÁO VÀ MÔ TẢ

Tham khảo www.CQmedical.com để biết danh sách các biểu tượng và định nghĩa của các biểu tượng.





AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG MR

Vật phẩm không gây ra các mối nguy hiểm đã biết do tiếp xúc với bất kỳ môi trường MR nào. Các vật phẩm an toàn trong môi trường MR bao gồm các vật liệu không dẫn điện, phi kim loại và phi từ tính.




HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

THIẾT LẬP

Chi đầu

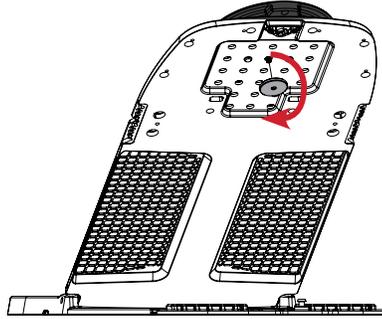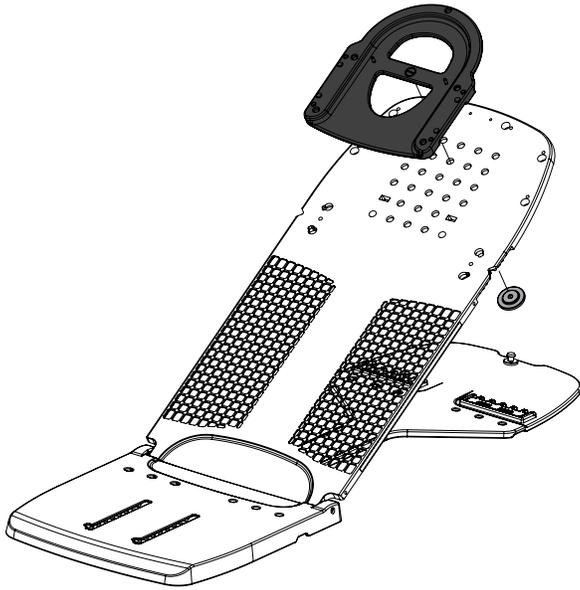

Đầu và vai

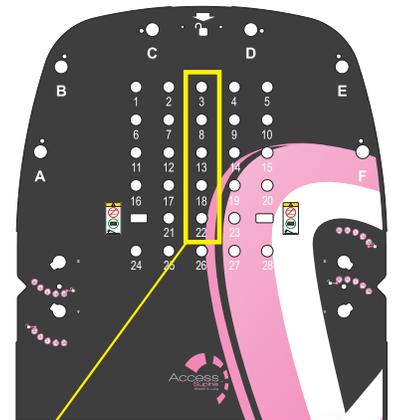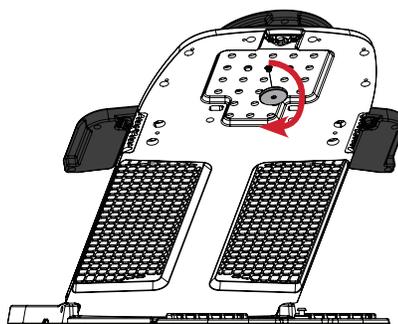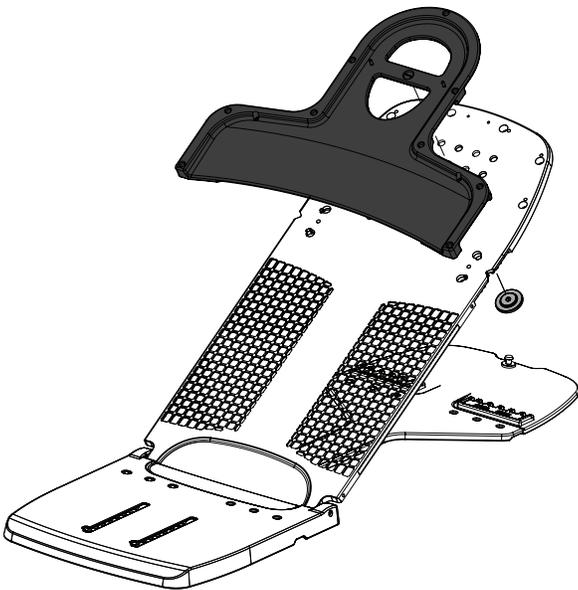


Siết chặt Tấm nổi che Portrait™ vào Access™ Supine bằng cách sử dụng lỗ 3, 8, 13, 18 hoặc 22.


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

ĐIỀU CHỈNH NẾU CẦN ĐỂ KHÔNG BỊ DỊCH CHUYỂN

Vặn để siết chặt

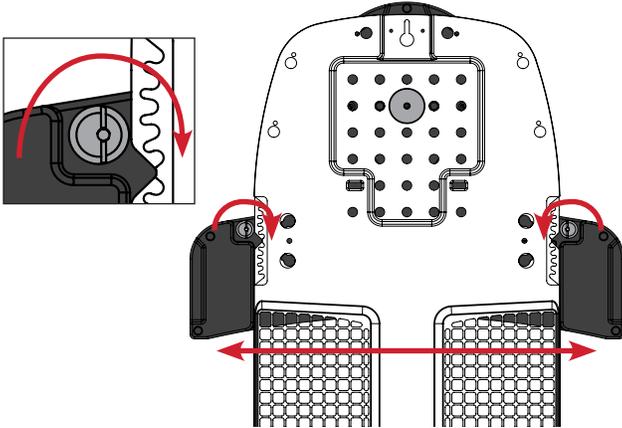



Đã khóa

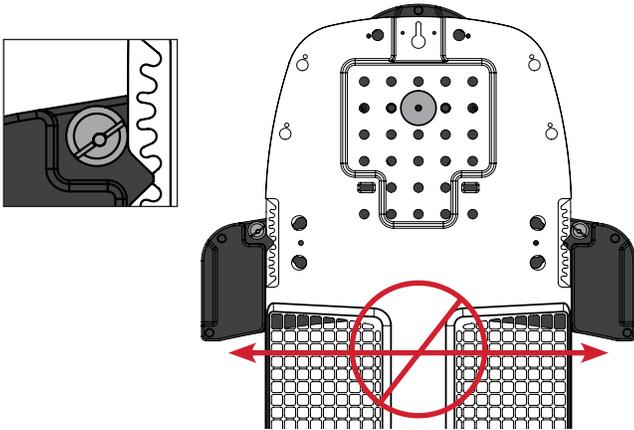



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

THÁO

Chi đầu

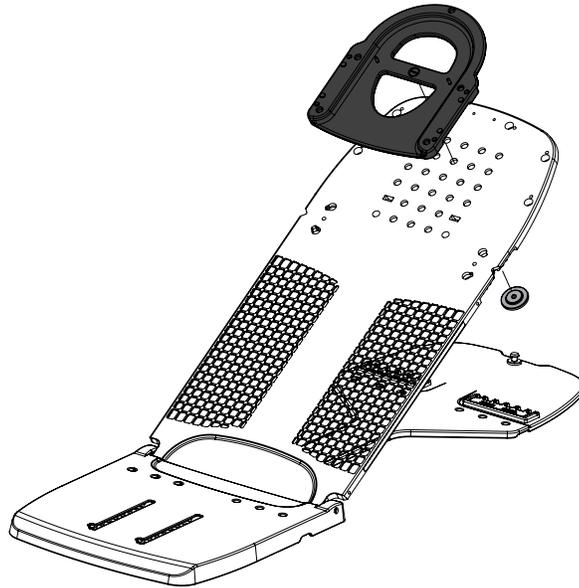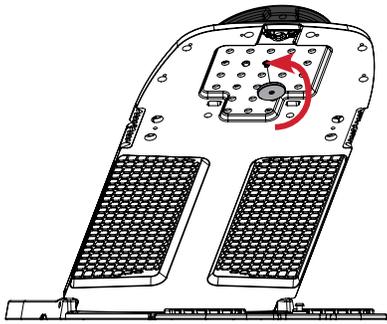

Đầu và vai

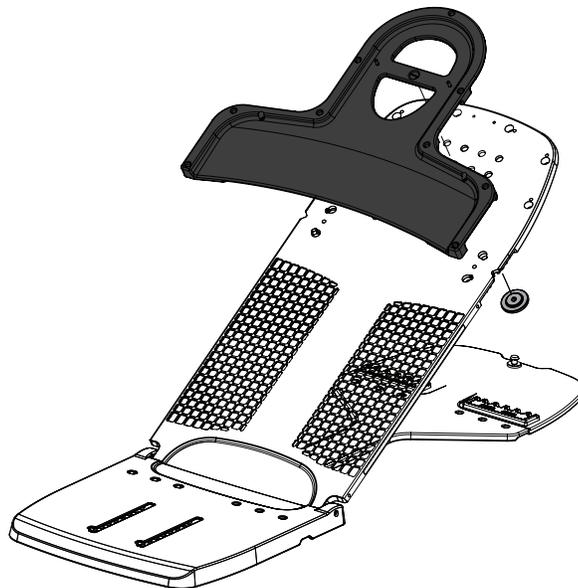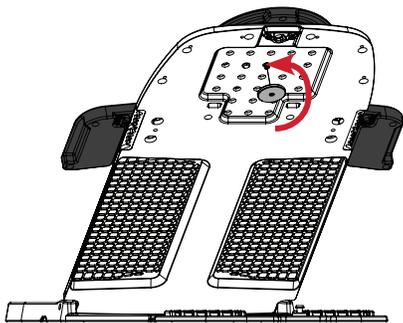


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH


THIẾT LẬP

Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™


Bước 1

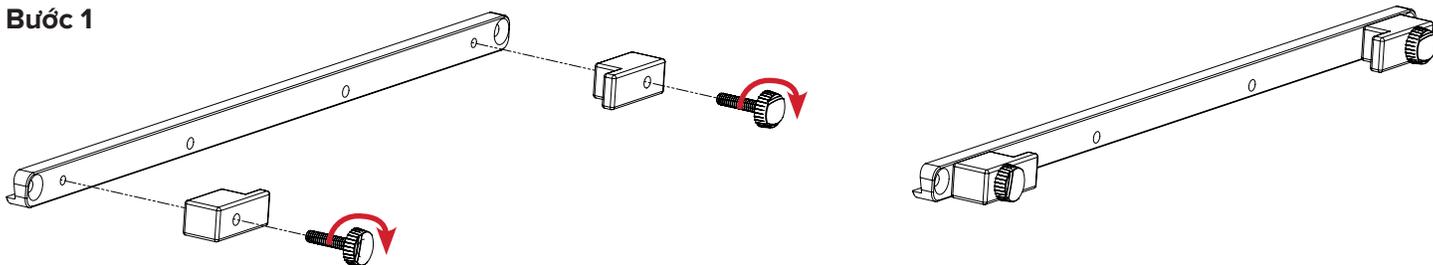

Bước 2

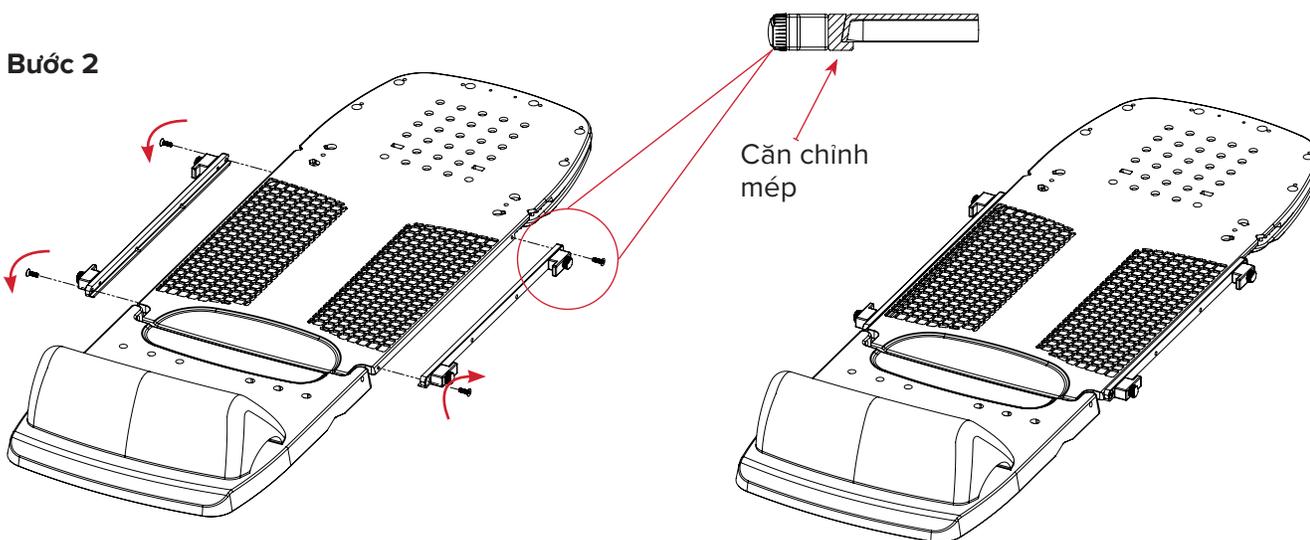

Bước 3

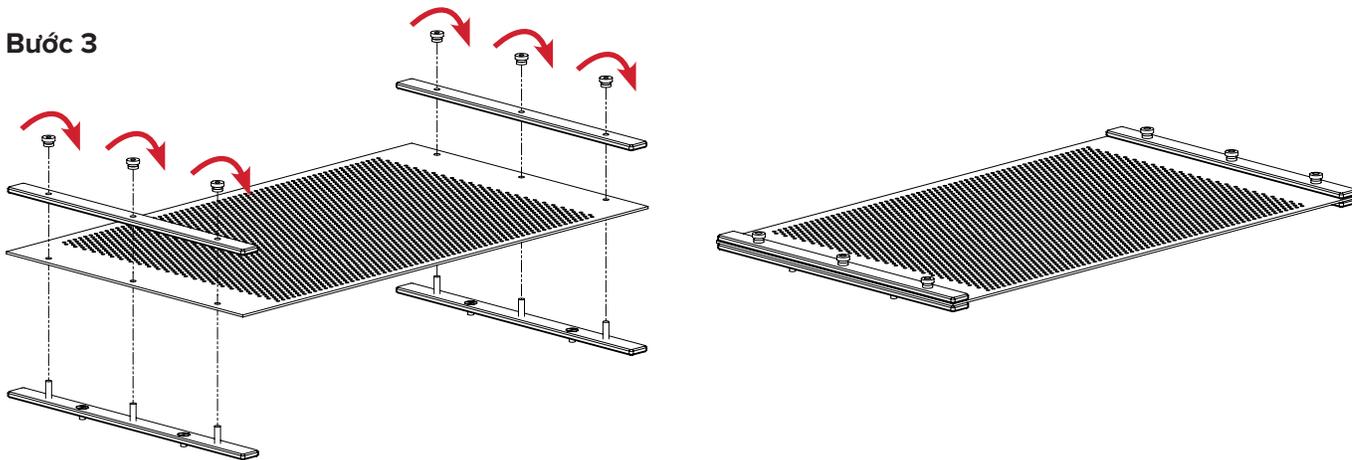

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

THIẾT LẬP


Bước 4

Thiết lập bệnh nhân trên Thiết bị vú Access Supine.

! LƯU Ý ! Tham khảo Hướng dẫn về sản phẩm và Hướng dẫn sử dụng dành cho Thiết bị Access Supine (P/N 2004394) để biết hướng dẫn vận hành, tính năng của sản phẩm, thông số kỹ thuật, cảnh báo, thận trọng và các biện pháp phòng ngừa chung khác liên quan đến việc sử dụng thiết bị vú Access Supine.

Làm mềm nhựa dẻo nhiệt (RT-1783P3) bằng Opti-Handles đi kèm (RT-4454-14).

Hoàn thành các bước 4A, 4B, 4C, và 4D ở cả hai bên của thanh nhựa dẻo nhiệt.

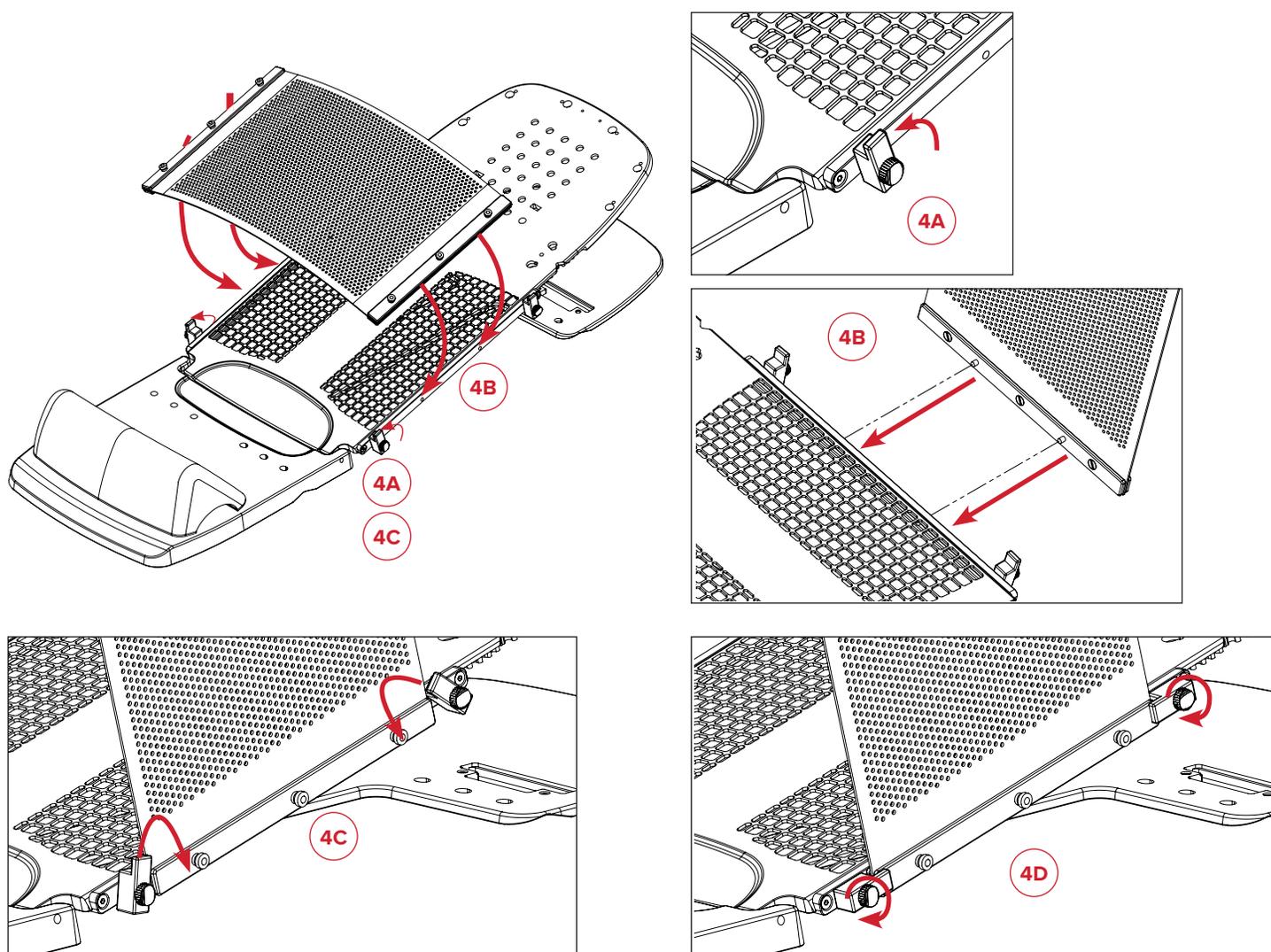

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

THÁO





Thanh nối nhựa dẻo nhiệt Opti-Handle™

Bước 1

Hoàn thành các bước 1A, 1B và 1C ở cả hai bên của thanh nhựa dẻo nhiệt.

Đưa bệnh nhân ra khỏi Thiết bị vú Access Supine.


! LƯU Ý! Tham khảo Hướng dẫn về sản phẩm và Hướng dẫn sử dụng dành cho Thiết bị Access Supine (P/N 2004394) để biết hướng dẫn vận hành, tính năng của sản phẩm, thông số kỹ thuật, cảnh báo, thận trọng và các biện pháp phòng ngừa chung khác liên quan đến việc sử dụng thiết bị vú Access Supine.

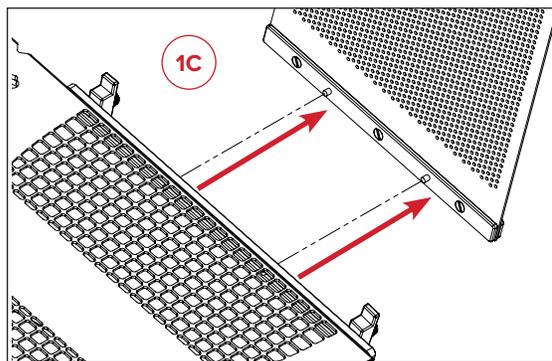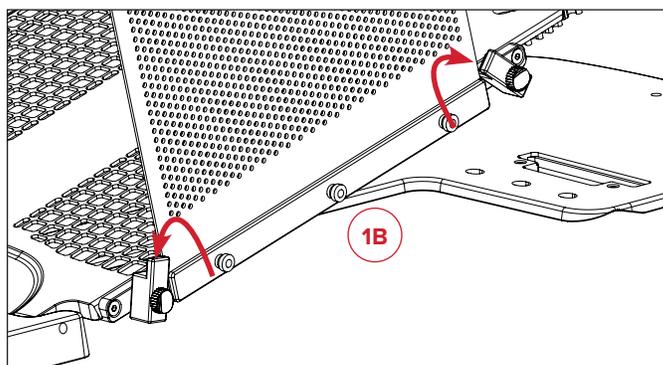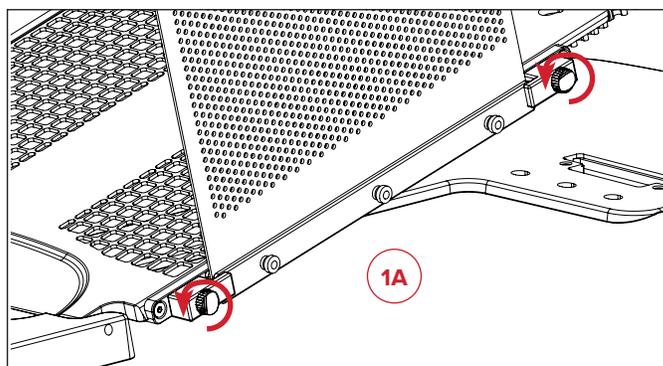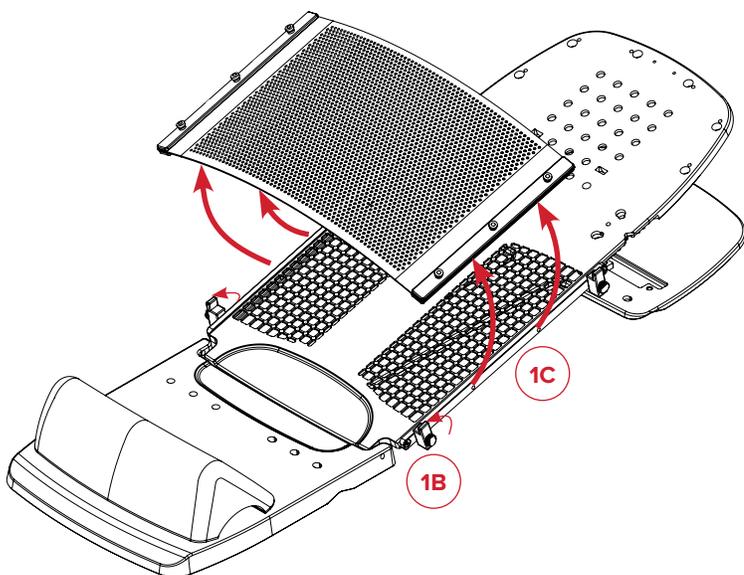



HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

THÁO

Bước 2

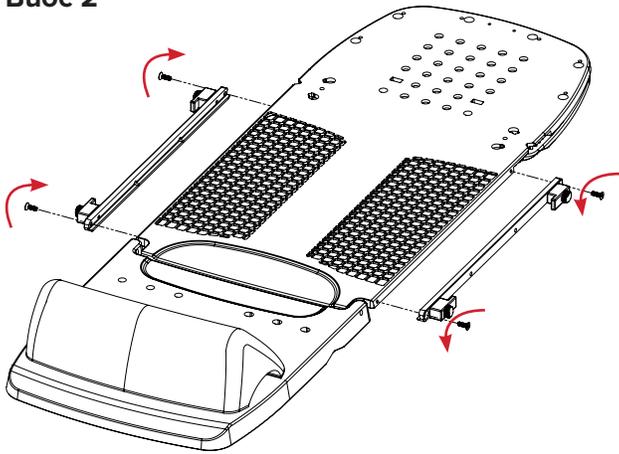

Bước 3

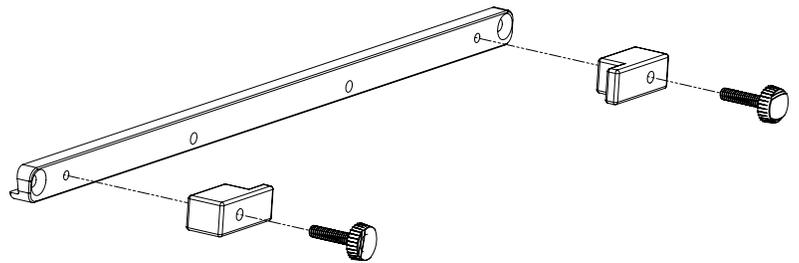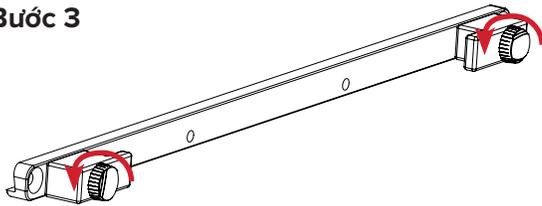

DANH SÁCH LINH KIỆN

RT-4546-03 & RT-4546-04

Tương thích với Miếng che khung S Portrait™

RT-4546-05

Tương thích với RT-1783P3, Tấm Aquaplast RT®, 12" x 18", 2,4 mm, Perf

Tương thích với RT-4454-14, Opti-Handles 35,56 cm (14 inch), bộ 2 cái



www.CQmedical.com

+1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

info@CQmedical.com