



positioning
patients for life.®

产品说明 和用户手册

RT-4546-03

用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的
Portrait™ 头戴式面罩适配器

RT-4546-04

用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的
Portrait™ 头戴式与颈戴式面罩适配器

RT-4546-05

用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的
Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器

一般注意事项

警告声明

! 警告 ! 不得修改本设备。如本装置的任何部分经受了过大的载荷，出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

治疗射束衰减

穿过任何装置进行治疗时，均将引起皮肤剂量的增高。热塑性面罩会对放射治疗射线束造成衰减并增加皮肤剂量。在计划和治疗期间应考虑到衰减和增加皮肤剂量。

MR 安全信息

 非临床试验已证明 RT-4546-04 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式与颈戴式面罩适配器、RT-4546-03 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式面罩适配器和 RT-4546-05 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器具有 MR 安全性。可在 MR 环境中使用 RT-4546-04 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式与颈戴式面罩适配器、RT-4546-03 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式面罩适配器和 RT-4546-05 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器。

- RT-4546-04 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式与颈戴式面罩适配器、RT-4546-03 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Portrait™ 头戴式面罩适配器和 RT-4546-05 用于 Access™ 仰卧装置（胸部）的 Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器在扫描前必须根据其预期用途与 MR 安全版 Access™ 仰卧装置 (RT-4546MRI) 一起使用。
- MR 安全版 Access™ 仰卧装置 (RT-4546MRI) 明确标记以下符号：



警告标签及说明

有关符号及其定义的列表，请参阅 Qfix.com。





MR 安全




物品暴露于任何 MR 环境均无已知的危险。MR 安全物品包括非导电、非金属和非磁性材料。

操作说明

设置 头戴式

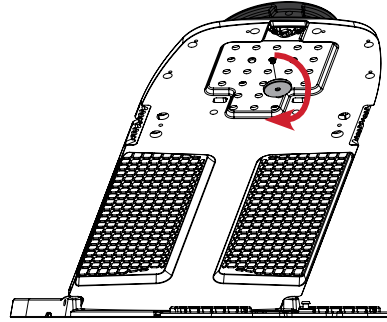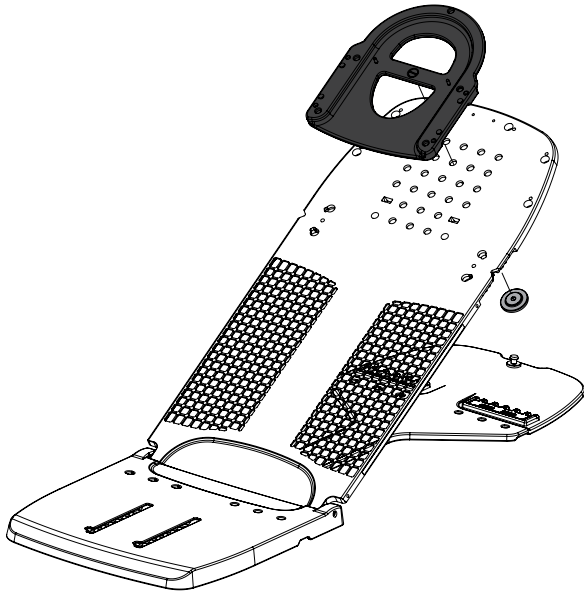

头戴式与肩戴式

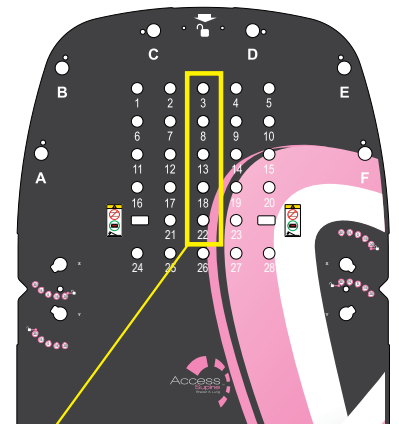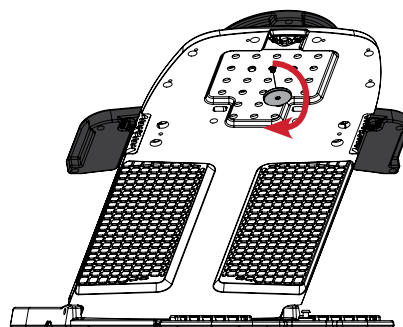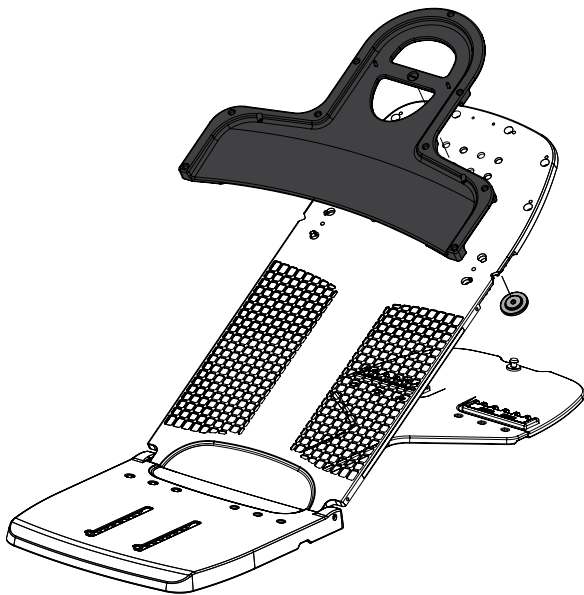


使用孔 3、8、13、18 或 22
将 Portrait™ 面罩适配器固定
到 Access™ 仰卧装置。


操作说明

必要时进行调整以消除松动

扭紧

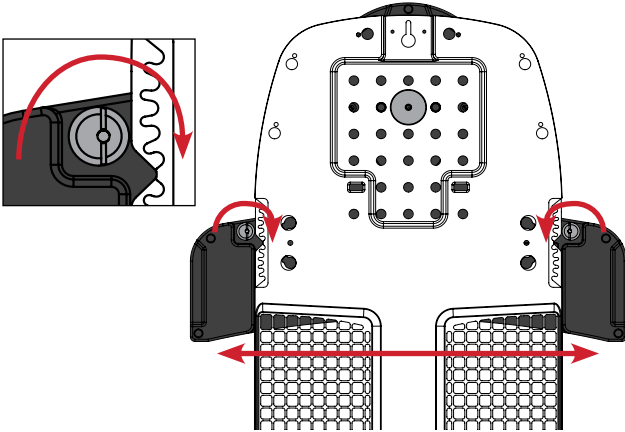



锁定

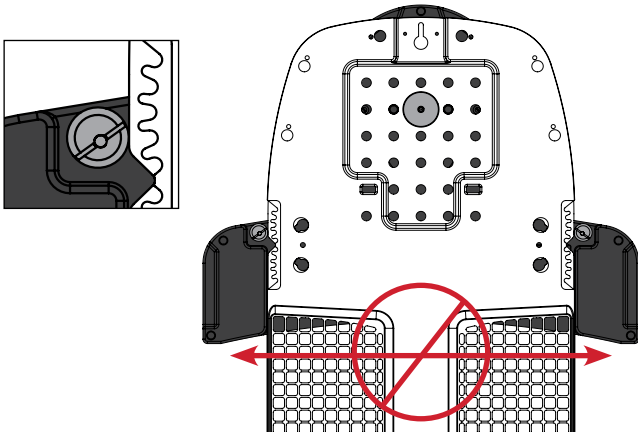



操作说明

拆卸

头戴式

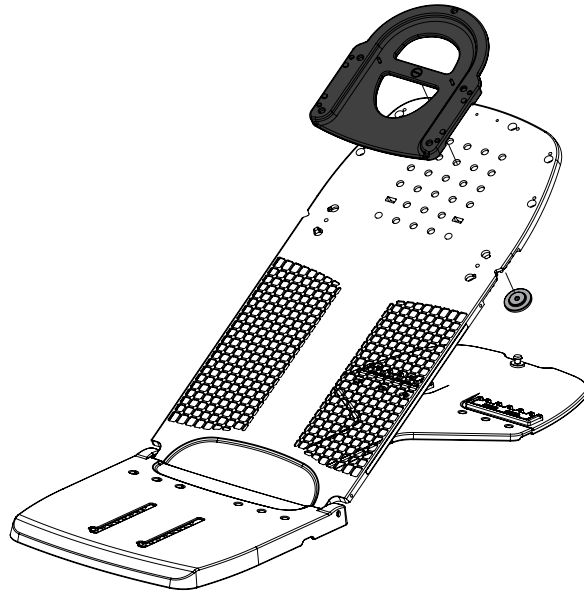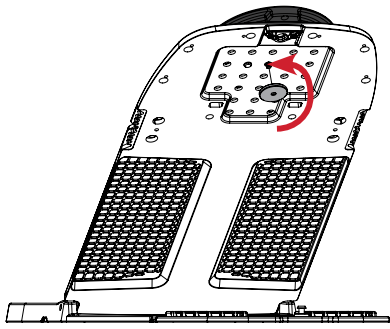

头戴式与肩戴式

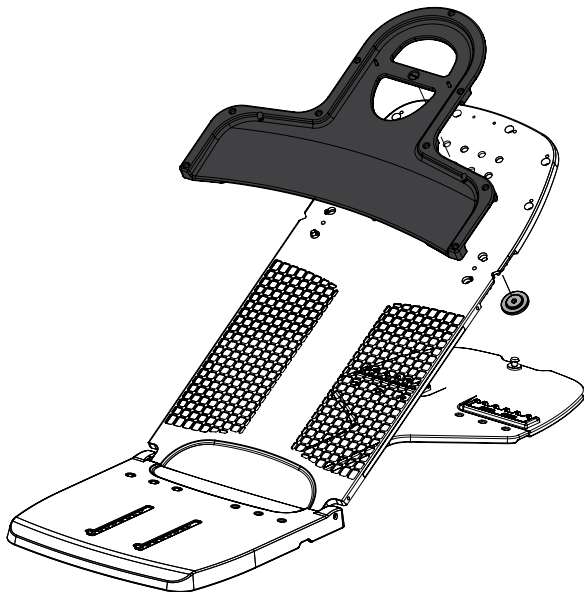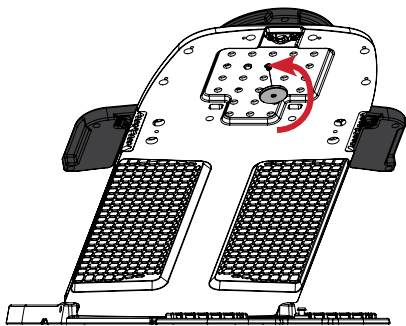


操作说明


设置

Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器


步骤 1

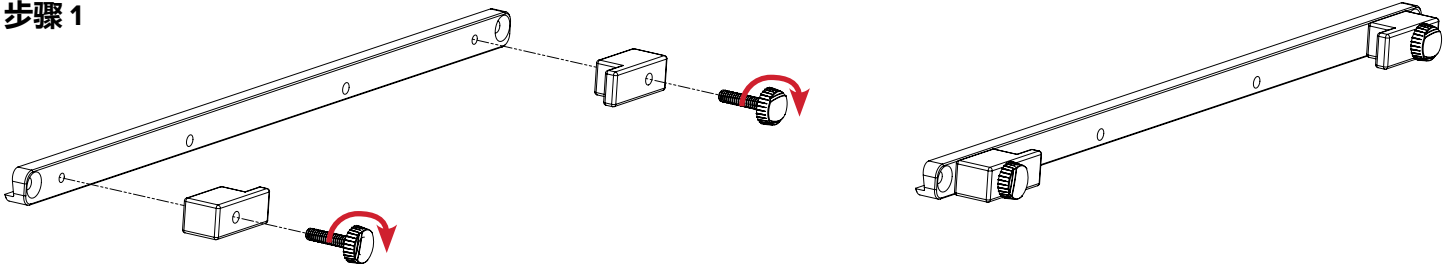

步骤 2

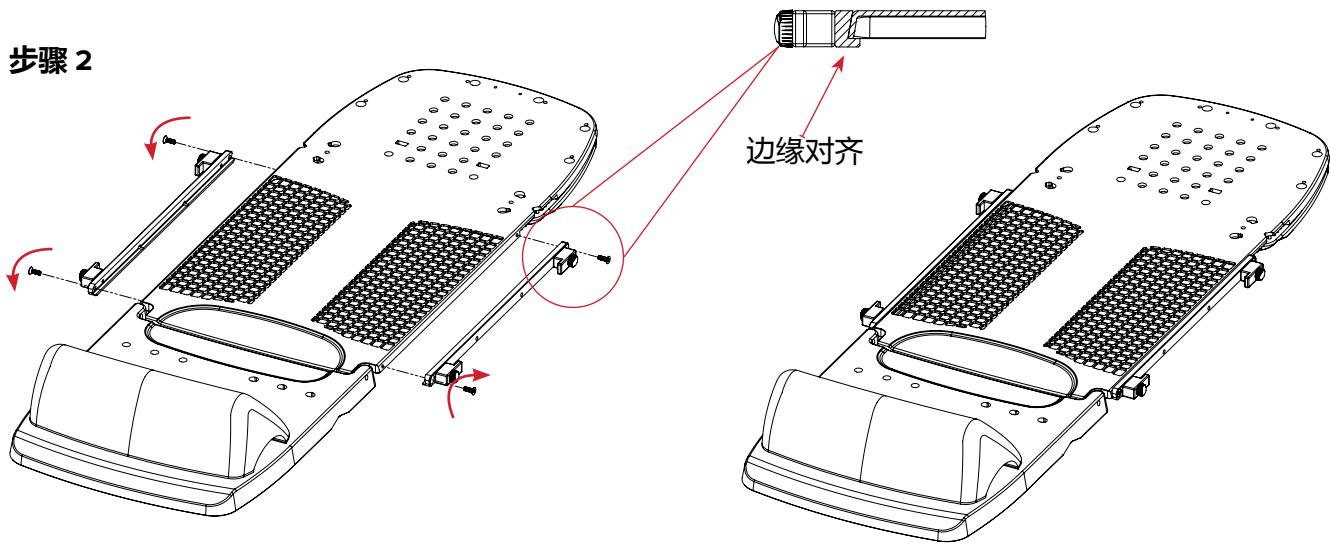

步骤 3

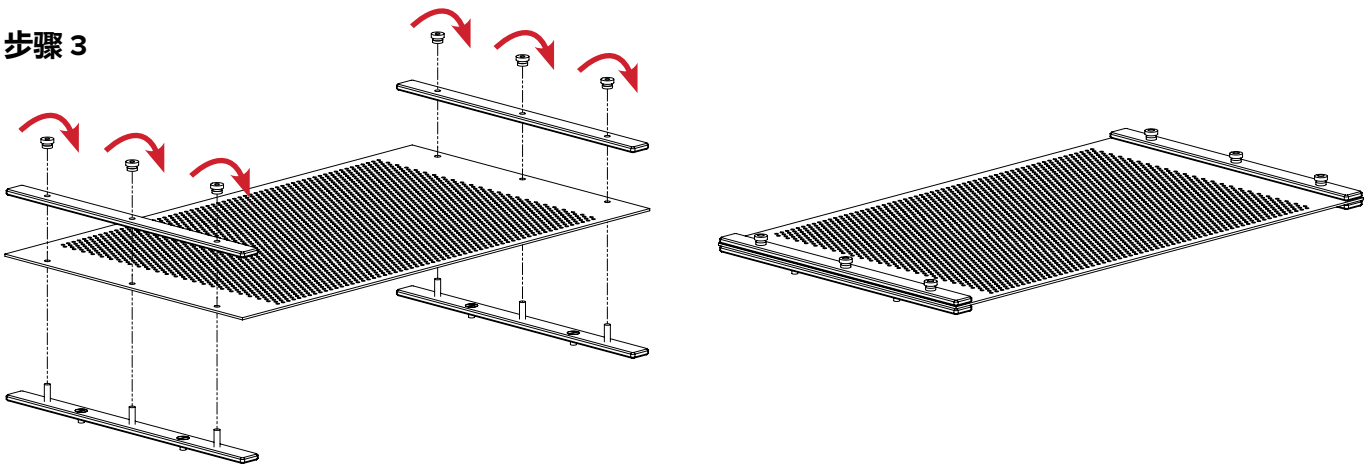

操作说明

设置


步骤 4

将患者安置在 Access 仰卧装置（胸部）上。

！注意！有关 Access 仰卧装置（胸部）使用的操作说明、产品特征、规范、警告、警示和其他一般注意事项，请参阅 Access 仰卧装置 (P/N 2004394) 的产品说明和用户手册。

使用附带的 Opti-Handle (RT-4454-14) 软化热塑性塑料 (RT-1783P3)。

在热塑性塑料的两侧完成步骤 4A、4B、4C 和 4D。

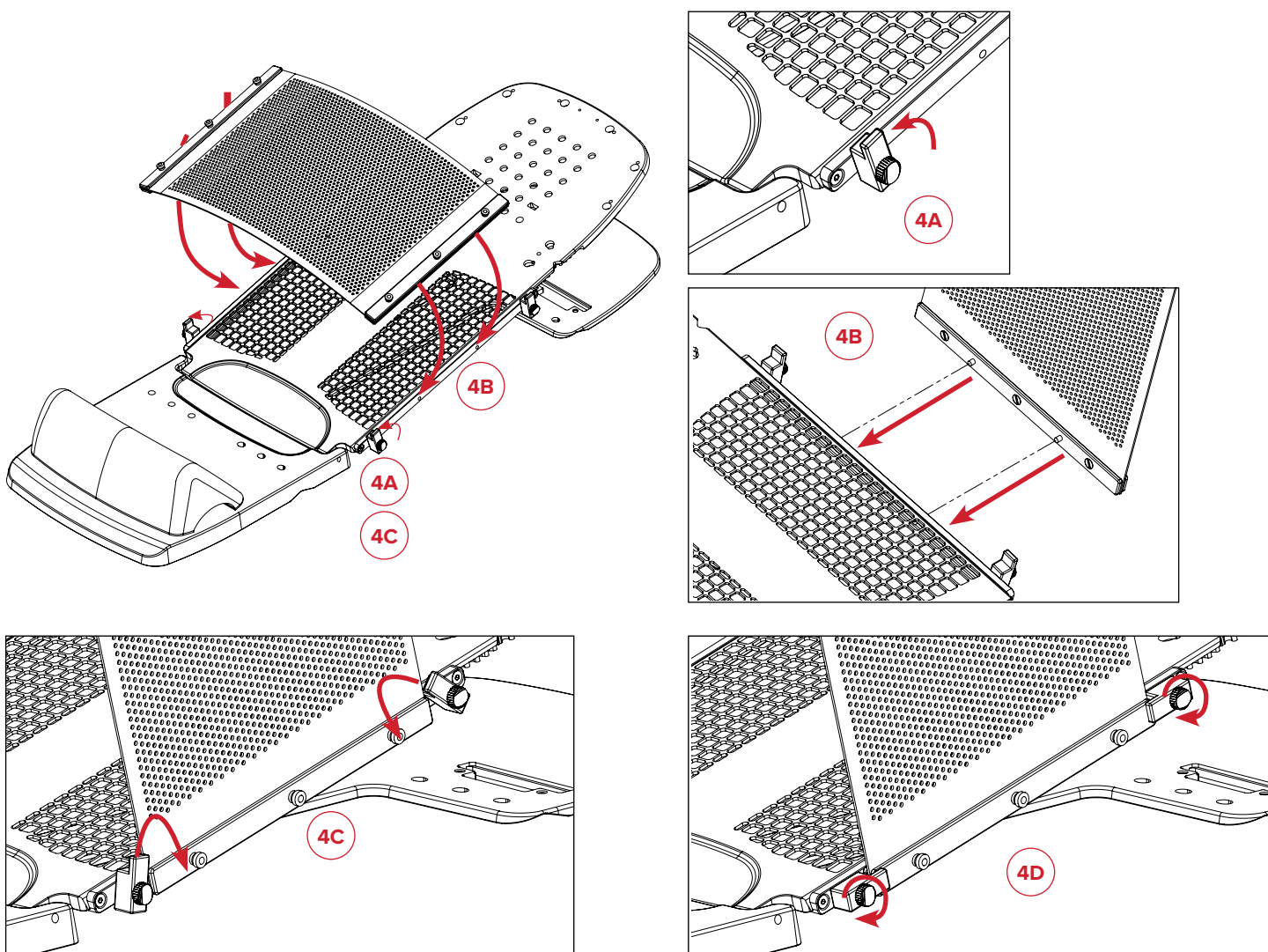

操作说明

拆卸





Opti-Handle™ 热塑性塑料适配器

步骤 1

在热塑性塑料的两侧完成步骤 1A、1B 和 1C。

从 Access 仰卧装置（胸部）上移离患者。


！注意！有关 Access 仰卧装置（胸部）使用的操作说明、产品特征、规范、警告、警示和其他一般注意事项，请参阅 Access 仰卧装置 (P/N 2004394) 的产品说明和用户手册。

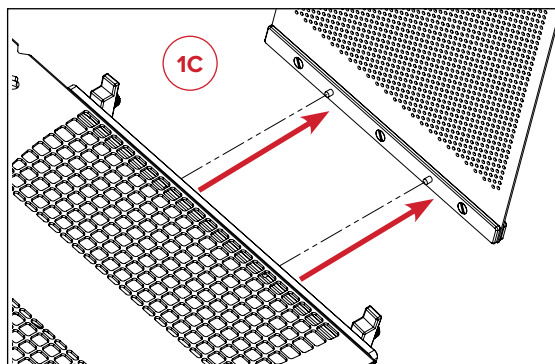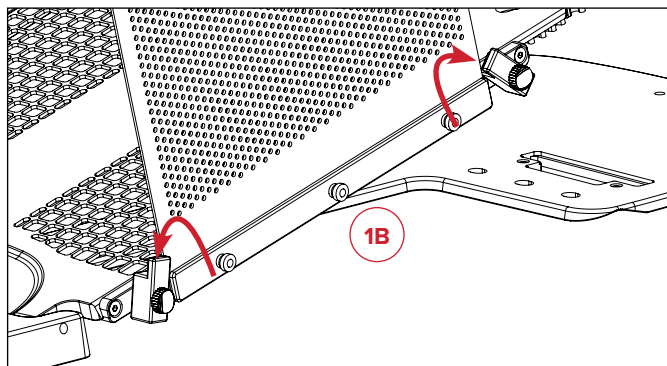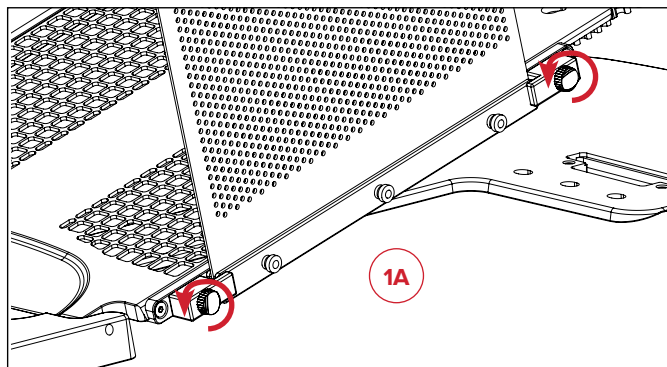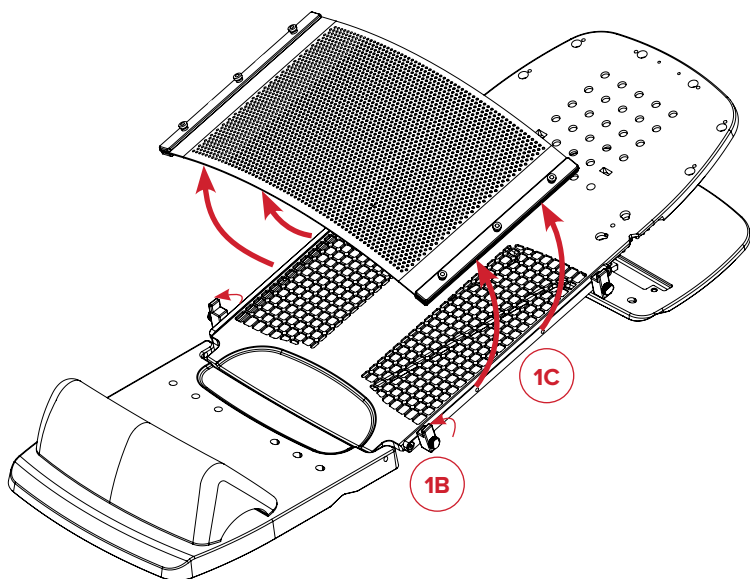



操作说明

拆卸

步骤 2

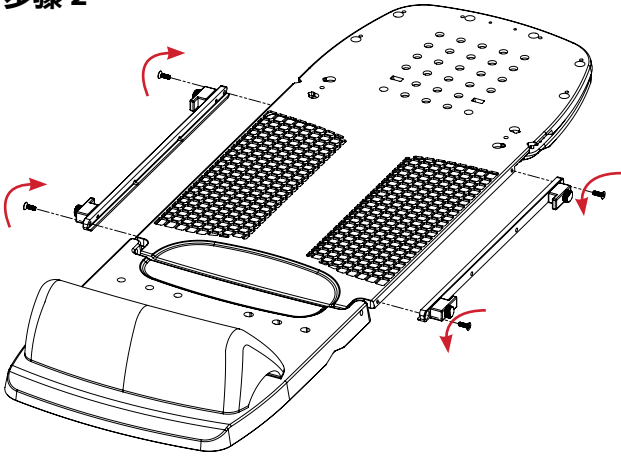

步骤 3

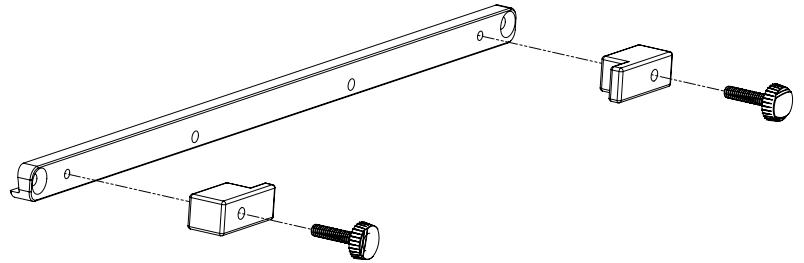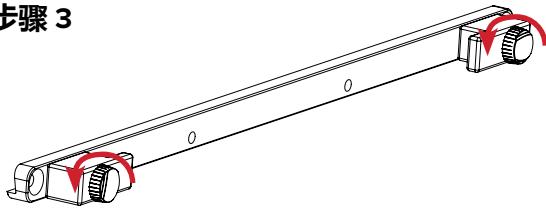

部件列表

RT-4546-03 和 RT-4546-04

与 Portrait™ S 框架面罩兼容

RT-4546-05

与 RT-1783P3, Aquaplast RT® Sheet, 12" x 18", 2.4 mm, Perf 兼容

与 RT-4454-14, 35.56 cm (14 inch) Opti-Handles, set of 2 兼容



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

产品名称：人体定位袋

医疗器械备案号：20150038

2008021_ZH_A