

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

RT-4546H-02 Doska adaptéra vankúša pod hlavu pre zariadenie Access™ Supine

RT-4552P Vankúš pod hlavu pre polohu na bruchu

RT-4552A Adaptér vankúša pod hlavu pre čapy Silverman

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

! VAROVANIE ! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

INFORMÁCIE O BEZPEČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZOBRAZOVANIA MR

MR Neklinickým testovaním sa preukázalo, že **doska adaptéra vankúša pod hlavu pre zariadenie Access™ Supine, vankúš pod hlavu pre polohu na bruchu a adaptér vankúša pod hlavu pre čapy Silverman** sú bezpečné v prostredí MR.

VÝSTRAŽNÉ ŠTÍTKY A POPISY

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.



BEZPEČNÉ V PROSTREDÍ MR


Predmet, ktorý nepredstavuje žiadne známe riziká pri vystavení akémukoľvek prostrediu MR. Predmety bezpečné v prostredí MR sú z materiálov, ktoré sú elektricky nevodivé, nekovové a nemagnetické.

RT-4546H-02


DOSKA ADAPTÉRA VANKÚŠA POD HLAVU PRE ZARIADENIE ACCESS™ SUPINE

Dosku adaptéra podložky položte pod hlavu k zariadeniu Access™ Supine tak, ako je znázornené na obrázkoch 1 a 2: vložte kolíky na doske adaptéra podložky pod hlavu do príslušných otvorov v zariadení Access™ Supine.

! POZNÁMKA ! Prevádzkové pokyny, hárok na nastavenie pacienta, vlastnosti produktov, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia spojené s použitím systému Access™ Supine nájdete v sprievodcovi produktom a návode na použitie systému Access™ Supine (P/N 2004394).

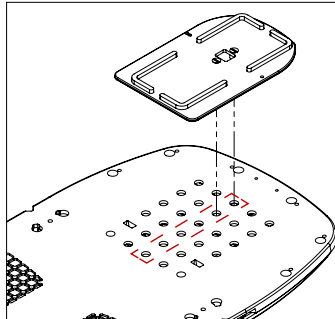

Obrázok 1

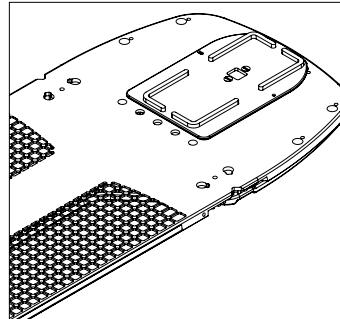

Obrázok 2


RT-4552A A RT-4552P

ADAPTÉR VANKÚŠA POD HLAVU PRE ČAPY SILVERMAN A VANKÚŠ POD HLAVU PRE POLOHU NA BRUCHU


Dosku adaptéra vankúša pod hlavu položte k zariadeniu tak, ako je znázornené na obrázku 3: zatlačte otvory na doske adaptéra vankúša pod hlavu na čapy Silverman na zariadení.

Vankúš pod hlavu pre polohu na bruchu položte na adaptér vankúša pod hlavu (obr. 4).

! POZNÁMKA ! Prevádzkové pokyny, vlastnosti produktov, špecifikácie, výstrahy, upozornenia a iné všeobecné bezpečnostné opatrenia spojené s použitím zariadenia nájdete v sprievodcovi produktom a v návode na použitie.

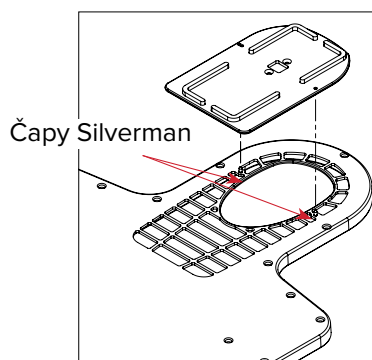

Obrázok 3

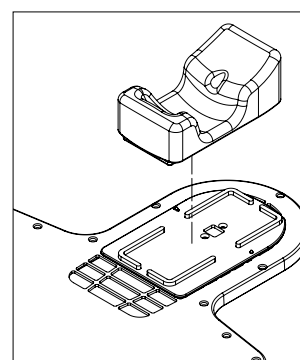

Obrázok 4



Vyrobené v USA spoločnosťou

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com