



positioning
patients for life.®

ӨНІМ НҰСҚАУЛЫҒЫ МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

RT-4600-20

SRS жастықша тіреуіші





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta		АҚШ-та жасаған өндіруші Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	--	---

Encompass және Integrabite – Qfix компаниясының сауда белгілері.

Fibreplast® – Qfix компаниясының тіркелген сауда белгісі.

Moldcare® – ALCARE Co., Ltd. компаниясының тіркелген сауда белгісі.

МАЗМҰНЫ

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	4
ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ	4
ЕМДЕУ ШОҒЫНЫҢ ӨЛСІРЕУІ	4
МР ОРТАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	4
ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ	4
ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ	5
БАПТАУ	5
ШЫҒАРЫП АЛУ	6

ЖАЛПЫ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

ЕСКЕРТУ МӘЛІМДЕМЕЛЕРІ

! ЕСКЕРТУ ! БҰЛ ЖАБДЫҚҚА ЕШҚАНДАЙ ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУГЕ БОЛМАЙДЫ. ЕГЕР ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚАНДАЙ ДА БІР БӨЛІГІНЕ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙҒА СЕБЕП БОЛАТЫН ЖҮК ТҮССЕ, ОЛ ЗАҚЫМДАЛСА НЕМЕСЕ ДҰРЫС ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРМАСА, ОНЫ ӘРІ ҚАРАЙ ПАЙДАЛАНБАЙ, +1 484-720-6054 НӨМІРІ НЕМЕСЕ TECHSUPPORT@QFIX.COM МЕКЕНЖАЙЫ БОЙЫНША QFIX КОМПАНИЯСЫНА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

ЕМДЕУ ШОҒЫНЫҢ ӘЛСІРЕУІ

Кез келген құрылғымен емдеу тері дозасының артуына себеп болады. Термопластикалық маскалар сәулелік терапия сәулесін сейілтеді және тері дозасын арттырады. Жоспарлау және емдеу кезінде әлсіреу және теріні сәулелендіру дозасының жоғарылауын ескеру қажет.

MP ОРТАСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

 **SRS жастықша тіреуіші (RT-4600-20) MP ортасында қауіпсіз.**

- **SRS жастықша тіреуіші MP-томографияға дейін мына таңбамен анық белгіленген RT-4600-01-MRI, Encompass бас + мойын MPT автономды құрылғысымен пайдаланылуы тиіс:**



 **Encompass™ Fibreplast® маскалары MP ортасында қауіпсіз.**

 **IntegraBite™ құрылғысы MP ортасында қауіпсіз.**

ЕСКЕРТУ ЖАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Таңбалардың тізімі мен олардың анықтамаларын Qfix.com сайтынан қараңыз.



MP ОРТАСЫНДА ҚАУІПСІЗ


Қандай да бір MP ортасының ықпалына ұшырау нәтижесінде ешқандай қауіп байқалмаған элемент. «MP ортасында қауіпсіз» элементтер электр тогын өткізбейтін, металдан жасалмаған және магнитсіз материалдардан тұрады.

! ЕСКЕРТПЕ ! RT-4600-01-MRI үшін


ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

БАПТАУ

1. Encompass™ құрылғысына (P/N 2005445) немесе Portrait™ және S типті құрылғыларға (P/N 2008120) арналған SRS адаптеріне қатысты құрылғыны реттеу, термопластикті қыздыру және жұмсарту нұсқауларын, өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларын, ескертулерді, сондай-ақ оларды қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Encompass немесе SRS адаптерінің Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
2. SRS жастықша тіреуішін Encompass (1-сурет) немесе SRS адаптеріндегі (2-сурет) орналастыру істіктеріне қойыңыз.
3. Арнайы жастықшаға арналған Пайдалану нұсқауларына сәйкес RT-4492U, U пішінді MoldCare бас қойғышы сияқты жастықшаны пішінге келтіруді бастаңыз.
4. Жастықшаны SRS жастықша тіреуішінің ішіне орналастырыңыз.

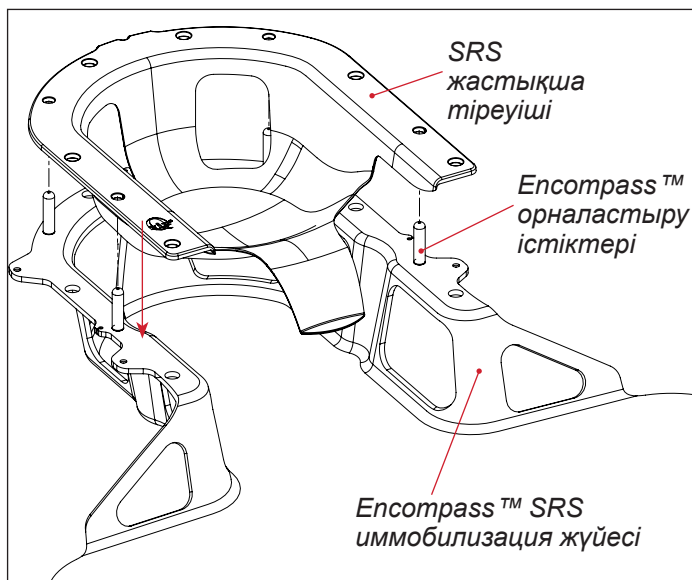

1-сурет

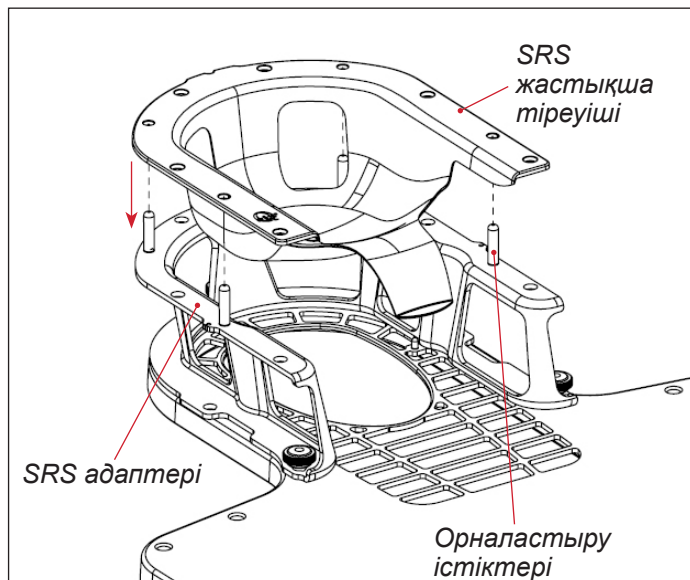

2-сурет


! ЕСКЕРТПЕ ! Тұтас жастықша SRS жастықша тіреуішінің ішінде болуы және жастықша тірек шетінен жоғары көтерілмеуі керек.

! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ ! ЖАСТЫҚШАНЫҢ ТЕРМОПЛАСТИККЕ ЖАБЫСУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН ЖАСТЫҚША ТЕРМОПЛАСТИККЕ ТИІП КЕТПЕУІ КЕРЕК.

5. Емделушіні құрылғыға оның басы жастықшада жататындай етіп жайғастырыңыз.

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛАРЫ

6. Encompass™ немесе SRS адаптеріндегі бүйірлік саңылауларды пайдаланып, емделушінің жайлылығы мен дұрыс жайғасуын қамтамасыз ету үшін оның мойны мен басының айналасында жастықша пішінін жасауды жалғастырыңыз (3-сурет).

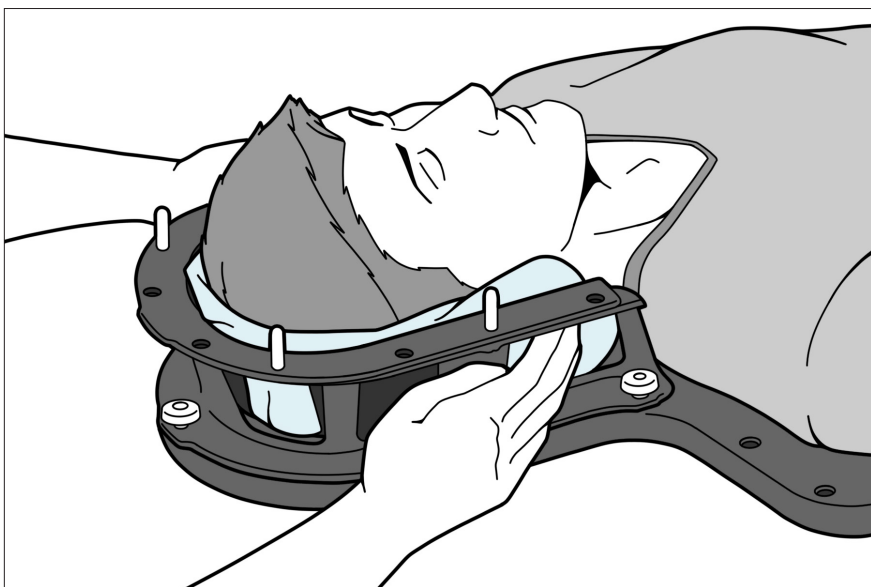

3-сурет

7. Алдыңғы масканы қыздыру және оған пішін беру нұсқауларын, Encompass™ Fibreplast® маскасына қатысты өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларын, ескертулерді, сондай-ақ оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Encompass™ құрылғысының (P/N 2005445) Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

ШЫҒАРЫП АЛУ

1. Encompass™ Fibreplast® маскасын шешіп алу нұсқауларын, оған қатысты өнім функцияларын, техникалық сипаттамаларын, ескертулерді, сондай-ақ оны қолдануға қатысты басқа да жалпы сақтық шараларын Encompass™ құрылғысының (P/N 2005445) Өнім нұсқаулығы мен Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
2. Емделушіні құрылғыдан шығарыңыз.
3. Жастықшаны шығарып алыңыз.
4. SRS жастықша тіреуішін жоғары тартып, Encompass™ немесе SRS адаптерінен шығарыңыз.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008208_KK_A
2023-07