

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-1778PR2DC

Aquaplast RT™ 20 cm hakrem för
Portrait™-maskadaptern för enbart huvud





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	---

Aquaplast RT, Portrait och Access är varumärken som tillhör Qfix.

Fibreplast® är ett registrerat varumärke som tillhör Qfix.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA INCIDENTER.....	4
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING.....	4
ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE.....	4
INFORMATION OM MR-SÄKERHET	5
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR.....	5
AVSEDD ANVÄNDNING	6
BRUKSANVISNING	7
KONFIGURERING	7
BORTTAGNING.....	9

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA PRODUKT BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! EFFEKTER AV DOSDJUP, DEPOSITION OCH ÖVERFÖRINGSOMRÅDE MÅSTE UTVÄRDERAS VID PLANERING OCH BEHANDLING INOM EN PROTONBEHANDLINGSMILJÖ.

! VARNING ! VERIFIERING AV PATIENTPOSITION MÅSTE UTFÖRAS UNDER PLANERING OCH BEHANDLING I EN STRÅLBEHANDLINGSMILJÖ. FÖLJ STANDARDISERADE VERIFIERINGSPROTOKOLL FÖR ATT VERIFIERA PATIENTPOSITION INNAN BEHANDLING UTFÖRS.

ALLVARLIGA INCIDENTER

Vänligen rapportera allvarliga incidenter (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID ANVÄNDNING

- Användning av denna enhet kan orsaka lätt överkänslighet vid hudkontakt.
- Aquaplast RT™ termoplast tillhandahålls endast för användning till en patient och är osterila.
- Alla öppna sår eller lesioner ska täckas med ett förband eller plastfolie enligt sjukhusets rutiner innan termoplasten formas.
- När termoplasten inte används ska den hållas borta från värme och direkt solljus.
- Aquaplast RT och Fibreplast ska kasseras enligt sjukhusets protokoll.

ATTENUERING AV BEHANDLINGSSTRÅLE

Behandling genom en anordning kommer att leda till en ökad huddos. Masker av termoplast attenuerar behandlingsstrålen och ökar huddosen. Attenueringen och den ökade huddosen ska tas med i beräkningen under planering och behandling.

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

INFORMATION OM MR-SÄKERHET

 **Aquaplast RT™ 20 cm hakrem för Portrait™-maskadaptern för enbart huvud, RT-1778PR2DC, är MR-säker.**

- **Aquaplast RT™ 20 cm hakrem får endast användas med Portrait™-maskadaptern för enbart huvud för Access™ Supine-bröstanordningen, RT-4546-03 och den MR-säkra varianten av Access™ Supine (RT-4546MRI) som båda tydligt märkts med följande symbol för MR-skanning:**



 **Portrait™-maskadaptern för enbart huvud för Access™ Supine-bröstanordningen, RT-4546-03, är MR-säker.**

 **Access™ Supine-bröstanordningen, RT-4546MRI, är MR-säker.**

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



MR-SÄKER

En produkt som inte utgör någon känd fara vid exponering för MR-miljö. MR-säkra material består av material som inte leder elektrisk ström, inte innehåller metall och som inte är magnetiska.

AVSEDD ANVÄNDNING

Aquaplast RT™ och Fibreplast® är avsedda att immobilisera, positionera och ändra/rikta om placeringen av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad enligt regionens myndighetskrav.

BRUKSANVISNING

KONFIGURERING


1. Fäst RT-4546-03 Portrait™-maskadaptorn för enbart huvud för Access™ Supine-bröstanordningen i Access Supine-bröstanordningen.

! OBS ! Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Portrait™-maskadaptorn för enbart huvud för Access™ Supine-bröstanordningen, RT-4546-03 (P/N 2008021) för anvisningar, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och andra allmänna försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Portrait™-maskadaptorn för enbart huvud för Access™ Supine-bröstanordningen.

2. Placera patienten på Access™ Supine-bröstanordningen och använd ett huvudstöd vid behov.

! OBS ! Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Access™ Supine-bröstanordningen (P/N 2004394) för anvisningar, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och andra allmänna försiktighetsåtgärder i samband med användningen av Access™ Supine-bröstanordningen.

3. Se till att stiftet inuti PR-klämman (den blå plastkanten på hakremmen) sitter på den inre halvan av hålet på det motsatta stiftet (figur 1).

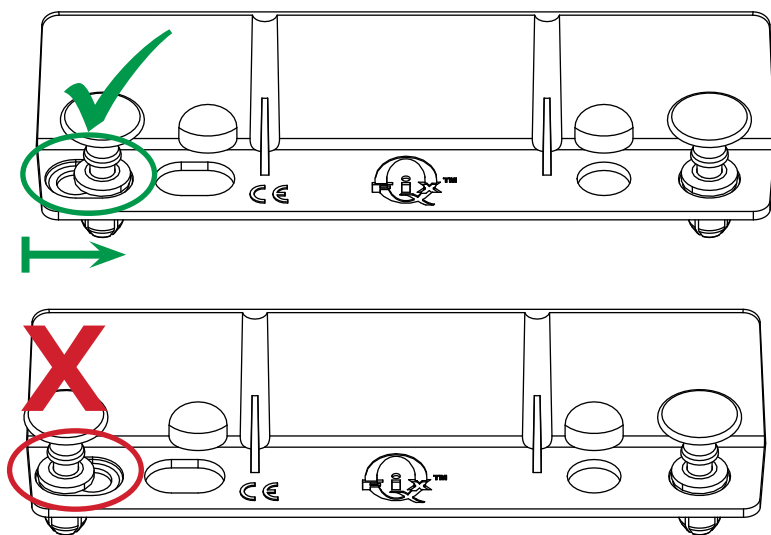


Figur 1

! OBS ! Hänvisa till produktguiden och användarhandboken för Aquaplast RT™ och Fibreplast® (P/N 2002890) för anvisningar om uppvärmning och uppmjukning av termoplasten, produktfunktioner, specifikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, och andra allmänna försiktighetsåtgärder avseende användningen av Aquaplast RT™-termoplastmaterial.

BRUKSANVISNING


4. När den 20 cm Aquaplast RT™-hakremmen för Portrait™-maskadaptorn för enbart huvud är redo att formas fäster du ena sidan av hakremmen i Portrait-maskadaptorn för enbart huvud. Placera skåran och hålet på PR-klämman på hakremmen mot skåran och hålet på Portrait-maskadaptorn för enbart huvud (figur 2).
5. Tryck ned stiften på hakremmen helt i Portrait-maskadaptorn för enbart huvud (figur 2).

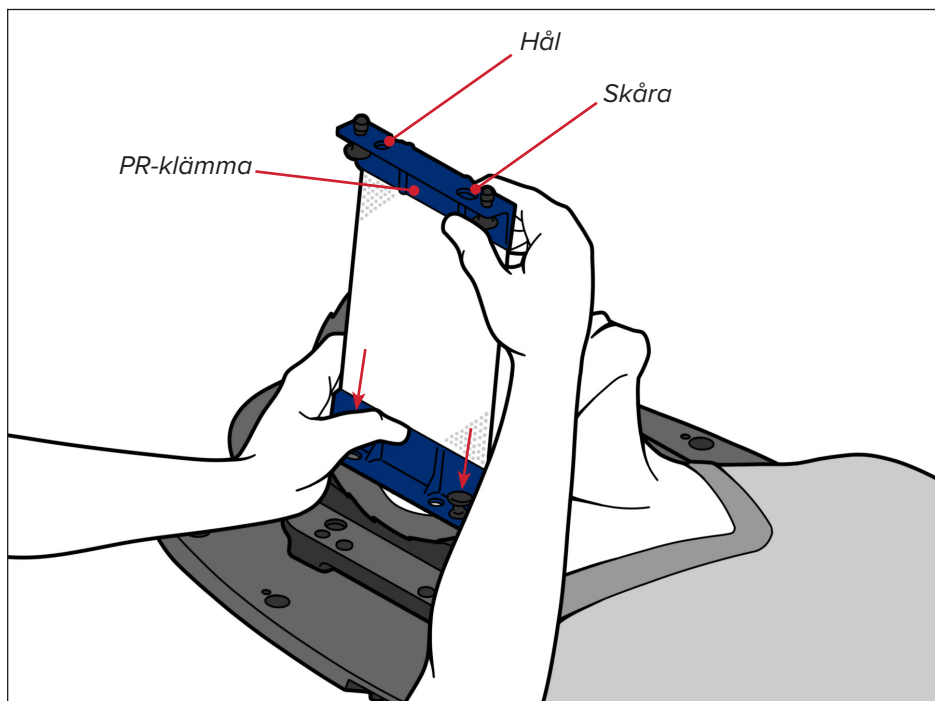

Figur 2

BRUKSANVISNING

6. Upprepa proceduren på den motsatta sidan av den 20 cm Aquaplast RT™-hakremmen. Sträck termoplasten över patientens mun och haka. Se till att termoplasten inte täcker näsan. Hakremmens undersida ska täcka hakans undersida (figur 3).

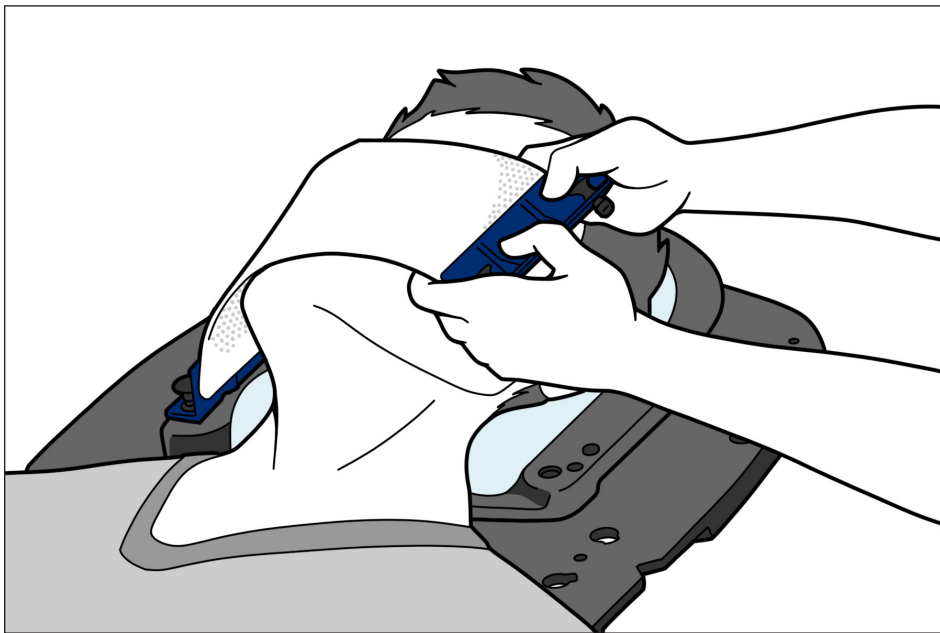

Figur 3

! OBS ! Vik tillbaka överflödig termoplast så att den inte täcker näsan och adamsäpplet.

! FARA ! OM TERMOPLASTEN PLACERAS FÖR LÅGT ÖVER MUNNEN OCH HAKAN KAN DET HÄNDA ATT HAKREMME

! FARA ! TÄCK INTE ÖVER PATIENTENS NÄSA ELLER ADAMSÄPPLE UNDER FORMNINGEN. NÄR TERMOPLASTEN STELNAR KAN DEN ORSAKA OBEHAG FÖR PATIENTEN.

BORTTAGNING

1. Dra upp varje stift på den 20 cm långa Aquaplast RT-hakremmen.
2. Ta bort den 20 cm långa Aquaplast RT-hakremmen från patienten och från Portrait-maskadaptern för enbart huvud.



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008217_SV_A
2023-04