


INSTALLATIONSVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL

RT-4527EXA

VARIAN IGRT direkte indekseringsadapter

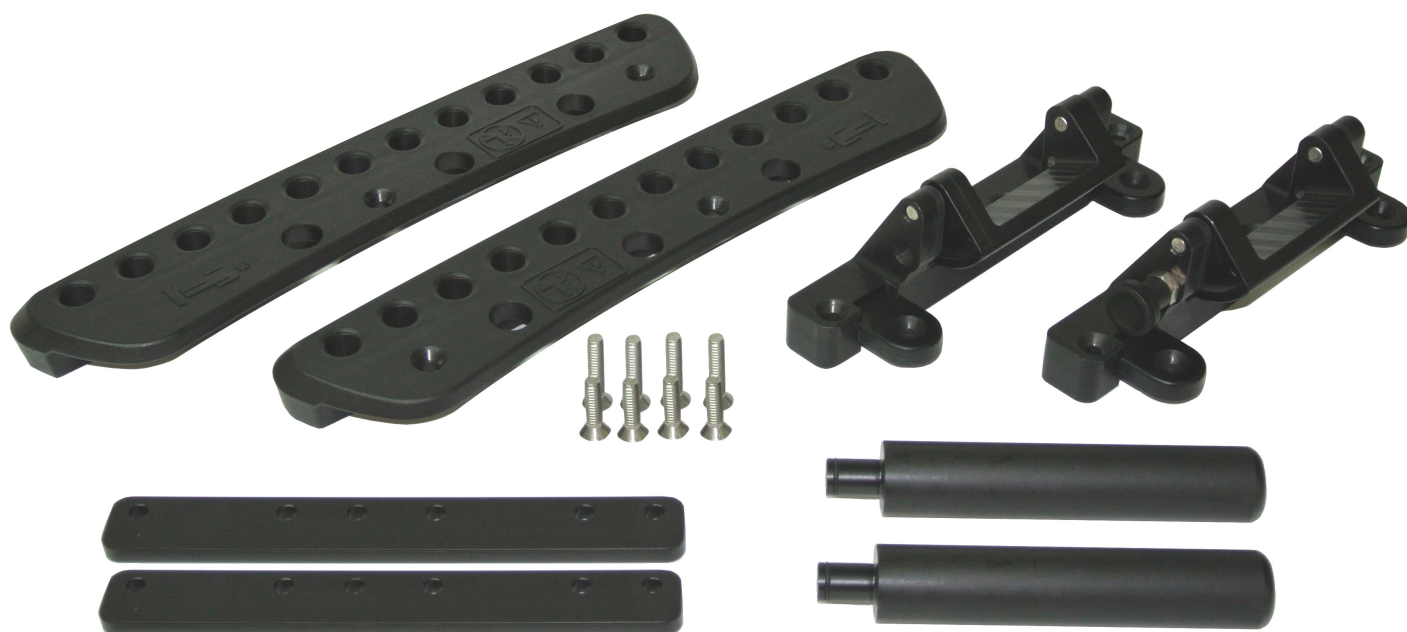

 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 <i>Fremstillet i USA af</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass og Hand Grip Array er varemærker, der tilhører Qfix.
Exact® og ETR® er registrerede varemærker, der tilhører Varian Medical Systems.

INDHOLDSFORTEGNELSE

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
ADVARSLER	4
ALVORLIGE HÆNDELSER	4
OPSÆTNING AF ADAPTER	5
INSTALLATION AF MELLEMLÆGSPLADE	8

GENERELLE FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

Gå til Qfix.com for at se en liste over symboler og deres definitioner.

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSYR. HVIS NOGEN DEL AF UDSYRET UDSÆTTES FOR EN EKSTREMT STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT VÆRE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSYRET OMGÅENDE INDSTILLES OG QFIX KONTAKTES PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

Adapteren er beregnet til at fungere sammen med Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ og BoS™ hoveddrummen. Kontakt Qfix for at få den nyeste liste over enheder og deres kompatible adaptere.

ALVORLIGE HÆNDELSER

Rapportér alle alvorlige hændelser (f.eks. hændelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i død eller alvorlig personskade) til både Qfix og den kompetente myndighed i det pågældende land.



! ADVARSEL !

- 1. ENHEDEN MÅ IKKE VÆRE FRITSVÆVENDE UD OVER DEN MAKSIMALE FRITSVÆVENDE POSITION. FRIT SVÆV UD OVER DEN MAKSIMALE FRITSVÆVENDE POSITION KAN FORÅRSAGE, AT ENHEDEN FALDER NED FRA LEJETOPPEN OG SKADER PATIENTEN.**
- 2. KONTROLLÉR, AT AL HARDWARE ER STRAMMET TIL, INDEN HVER BRUG.**

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter, der gennemgår strålebehandling eller diagnostiske billeddannelsesprocedurer.

TILSIGTEDE BRUGERE

Den tilsigtede bruger af dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmæssige krav i den respektive region.

OPSÆTNING AF ADAPTER RT-4527EXA

! BEMÆRK ! Adaptere og Hand Grip Array er sideafhængige og må udelukkende installeres på den korrekte siden af enheden.

1. Hvis Encompass™ benyttes, skal der tilføjes en mellemlægsplade mellem Hand Grip Array og adapteren. Se side 8 vedrørende installation af mellemlægspladen (Fig. 12). Løsn lokaliseringsskiverne (Fig. 1).
2. Vend adapteren mod enhedens højre og venstre side (Fig. 2).
3. Installer fra undersiden de medfølgende skruer i de nederste huller i Hand Grip Array-beslaget (Fig. 3).
4. Installer fra oversiden de medfølgende skruer i de forsænkede huller (Fig. 4).
5. Stram fra siden af enheden de to medfølgende lokaliseringsskiver og gentag på den anden side af enheden (Fig. 5).
6. Åbn IGRT-låsen (Fig. 6).

Installation på lejetoppen

1. Hægt den højre patientside af overlejringen fast på IGRT-lejetoppen (Fig. 7). Kontrollér, at lokaliseringsskiverne flugter med rillerne.
2. Sænk den venstre patientside af overlejringen ned på IGRT-lejetoppen (Fig. 8). Kontrollér, at lokaliseringsskiverne flugter med rillerne.
3. Træk i stemplet og svinglåsen under lejetoppens spids. Kontrollér, at stemplet går i indgreb igen (Fig. 9 og 10).
4. Installer håndgrebene på den ønskede placering (Fig. 11).

! ADVARSEL ! VERIFICER, AT STEMPLET ER HELT I INDGREB. I MODSAT FALD KAN DET FÅ ENHEDEN TIL AT FALDE NED FRA LEJETOPPEN OG BESKADIGE PATIENTEN.

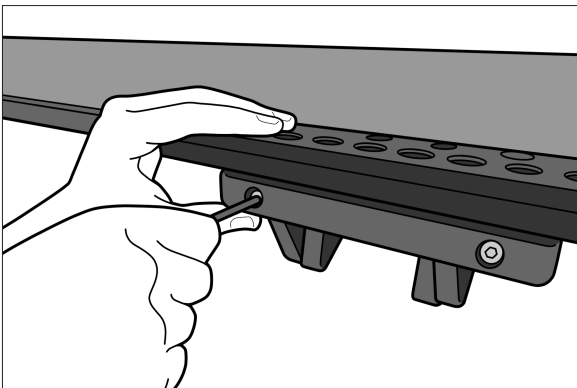


Fig. 1

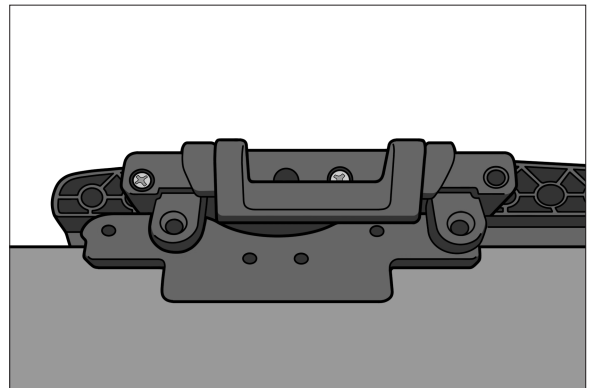


Fig. 2

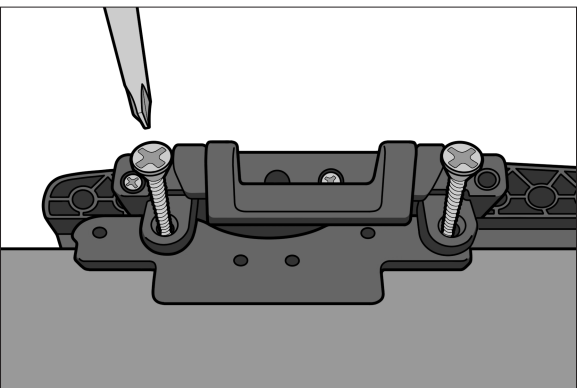


Fig. 3

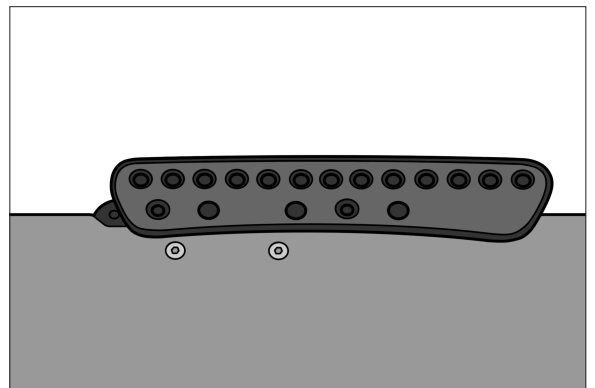


Fig. 4

OPSÆTNING AF ADAPTER

RT-4527EXA

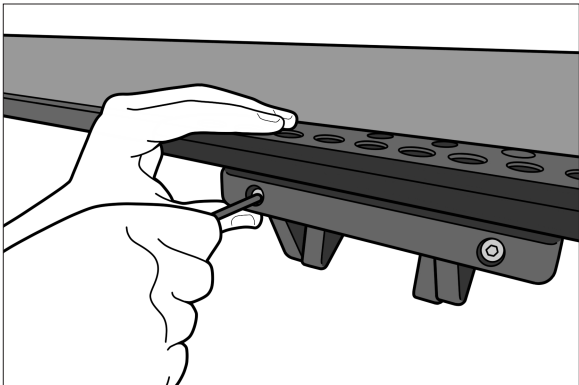


Fig. 5

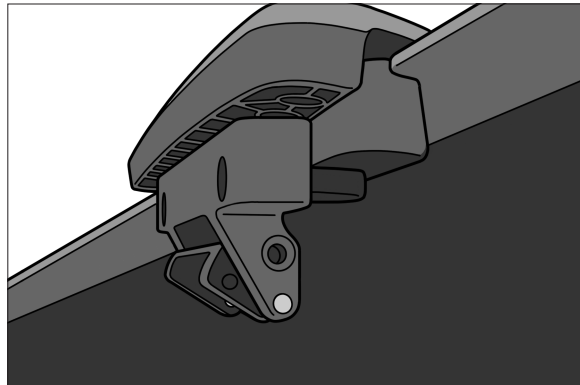


Fig. 6



Fig. 7

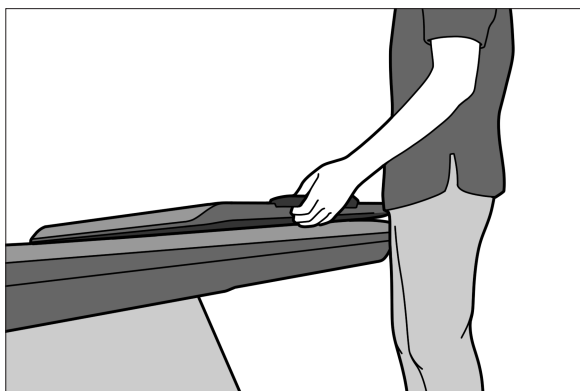


Fig. 8

OPSÆTNING AF ADAPTER

RT-4527EXA

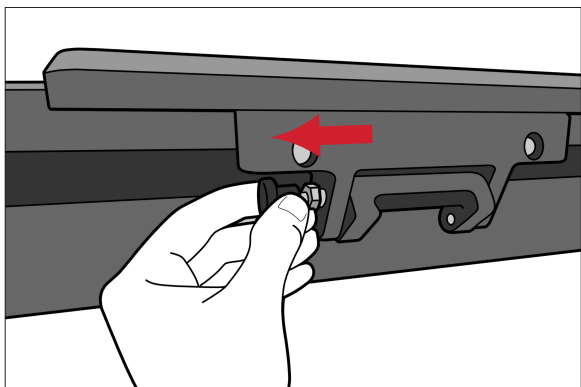


Fig. 9

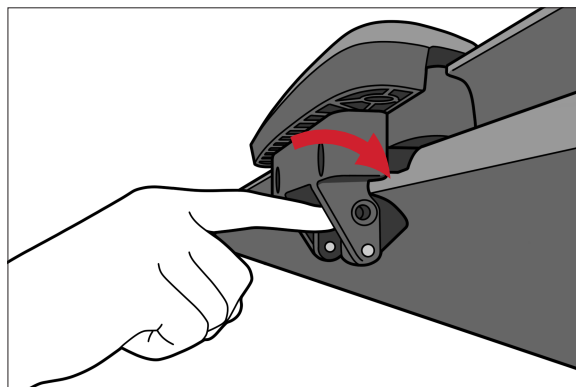


Fig. 10

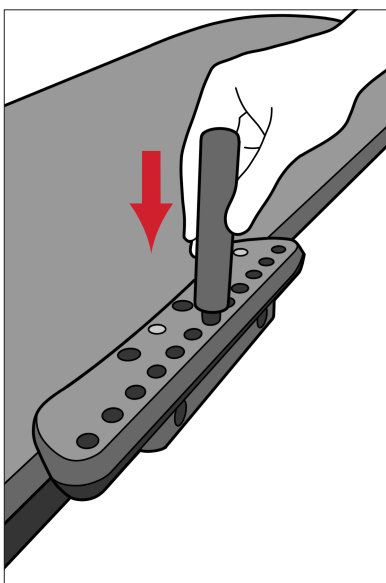


Fig. 11

INSTALLATION AF MELLEMLÆGSPLADE

RT-4527EXA (Fig. 12)

1. Fjern de 2 skruer, der holder adapteren fast på Hand Grip Array.
2. Placer mellemlægspladen mellem adapteren og Hand Grip Array, og ret skruehullerne ind efter hullerne i mellemlægspladen.
3. Skru de to skruer i igen, indtil de sidder forsvarligt fast.
4. Gå videre med opsætningsvejledningen.

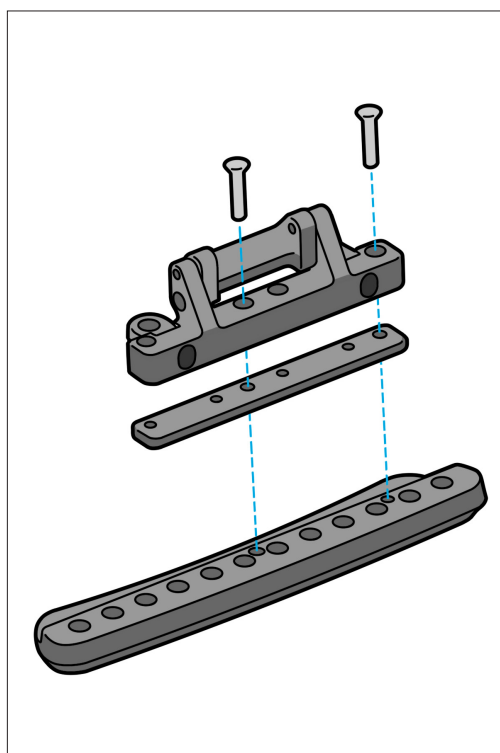


Fig. 12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008323_DA_C
2024-01