



positioning
patients for life.®

ASENNUSOHJEET JA KÄYTTÖOPAS

RT-4527EXA

VARIAN IGRT – suora indeksointisovitin



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom
 <i>Valmistaja USA:ssa</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass ja Hand Grip Array ovat Qfixin tavaramerkkejä.
Exact® ja ETR® Varian Medical Systemsin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

SISÄLTÖ

YLEISET VAROTOIMET	4
VAROITUSLAUSEKKEET	4
VAKAVAT HAITTATAHAHTUMAT	4
SOVITTIMEN ASETUKSET	5
SHIM-ASENNUS.....	8

YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

Symboliluettelo ja symbolien määritelmät löytyvät osoitteesta Qfix.com.

! VAROITUS ! TÄTÄ LAITTEISTOA EI SAA MUUNTA A MILLÄÄN TAVALLA. JOS TÄMÄN LAITTEEN MITÄÄN OSAA KUORMITETAAN LIIKAA TAI NE NÄYTTÄVÄT VAURIOITUNEELTA TAI TOIMIVAT VIRHEELLISESTI, LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI JA OTA YHTEYTTÄ QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6054 TAI SÄHKÖPOSTITSE OSOITTEeseen TECHSUPPORT@QFIX.COM.

Sovitin on suunniteltu toimimaan yhdessä seuraavien tuotteiden kanssa: Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ ja BoS™ Headframe. Ota yhteyttä Qfixiin, jos tarvitset uusimman luettelon laitteista ja niiden kanssa yhteensopivista sovittimista.

VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT

Ilmoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava vamma) sekä Qfixille että oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.



! VAROITUS !

- 1. LAITETTA EI SAA KIINNITTÄÄ YLI ENIMMÄISKIINNITYSSIJAINNIN. ENIMMÄISKIINNITYSSIJAINNIN YLITTÄMINEN VOI AIHEUTTAA SEN, ETTÄ LAITE PUTOAA HOITOPÖYDÄLTÄ JA AIHEUTTAA VAMMOJA POTILAALLE.**
- 2. TARKISTA KAIKKIEN OSIEN KIINNITYS ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA.**

POTILASKOHDERYHMÄT

Potilaat, jotka saavat sädehoitoa tai joille tehdään diagnostisia kuvantamistoimenpiteitä.

TARCOITETUT KÄYTTÄJÄT

Tuotteiden tarkoitettu käyttäjä on henkilö, jolla on kyseisellä lainkäyttöalueella edellytetty pätevyys.

SOVITTIMEN ASETUKSET

RT-4527EXA


! HUOMAA ! Sovittimet ja Hand Grip Array ovat puolikohtaisia ja ne on asennettava vain sille laitteen puolelle, jolle ne on tarkoitettu.

1. Jos Encompass™-laite on käytössä, lisää Shim Hand Grip Arrayn ja sovittimen väliin. Katso Shim-asennuksen tiedot sivulta 8 (kuva 12). Löystä paikanninlevyt (kuva 1).
2. Aseta sovitin laitteen oikean ja vasemman puolen mukaisesti (kuva 2).
3. Asenna mukana tulleet ruuvit Hand Grip Arrayn alareunan kiinnitysaukkoihin (kuva 3).
4. Asenna sitten mukana tulleet ruuvit yläreunan upporuuviaukkoihin (kuva 4).
5. Kiristä laitteen reunasta kaksi mukana tullutta paikanninlevyä ja toista laitteen toisella reunalla (kuva 5).
6. Avaa IGRT-lukitus (kuva 6).


Asennus hoitopöytään

1. Kiinnitä potilaan oikean puolen peitto IGRT-hoitopöytään (kuva 7). Varmista, että paikanninlevyt ovat samassa linjassa lovien kanssa.
2. Laske potilaan vasemman puolen peitto IGRT-hoitopöytään (kuva 8). Varmista, että paikanninlevyt ovat samassa linjassa lovien kanssa.
3. Vedä upotuskappaletta ja käännä lukitus hoitopöydän laidan alle. Varmista, että upotuskappale palautuu paikalleen (kuvat 9 ja 10).
4. Asenna käsikahvat haluttuun sijaintiin (kuva 11).


! VAROITUS ! VARMISTA, ETTÄ UPOTUSKAPPALE ON KOKONAAN PAIKALLAAN. JOS UPOTUSKAPPALE EI OLE OIKEASSA KOHDASSA, LAITE VOI PUDOTA HOITOPÖYDÄLTÄ JA AIHEUTTAA VAMMOJA POTILAALLE.

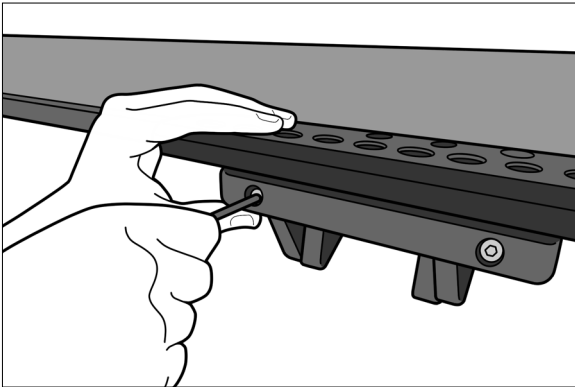


Kuva 1

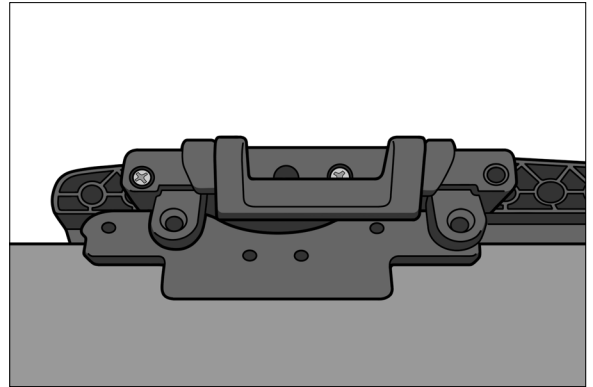

Kuva 2

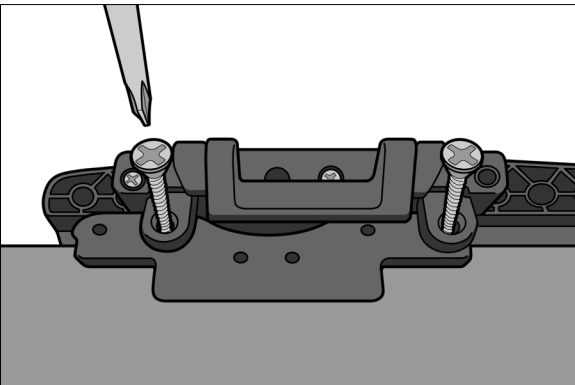


Kuva 3

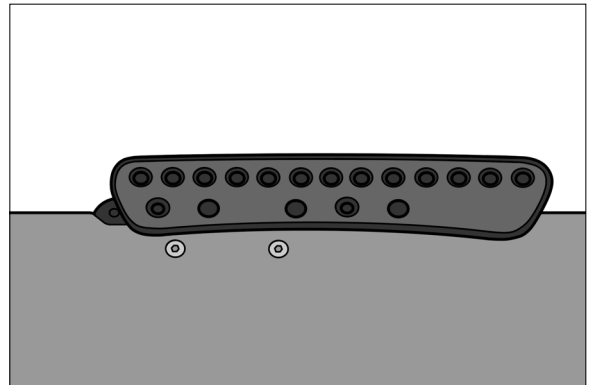


Kuva 4

SOVITTIMEN ASETUKSET

RT-4527EXA

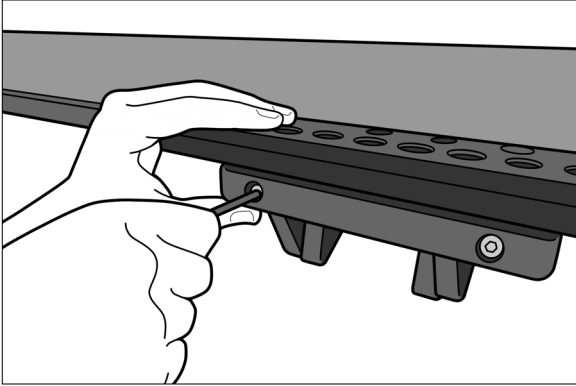


Kuva 5

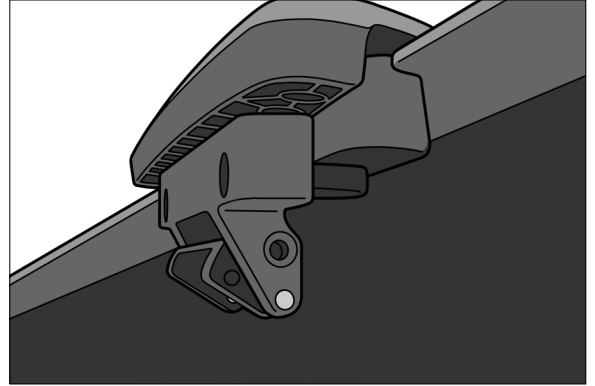

Kuva 6




Kuva 7

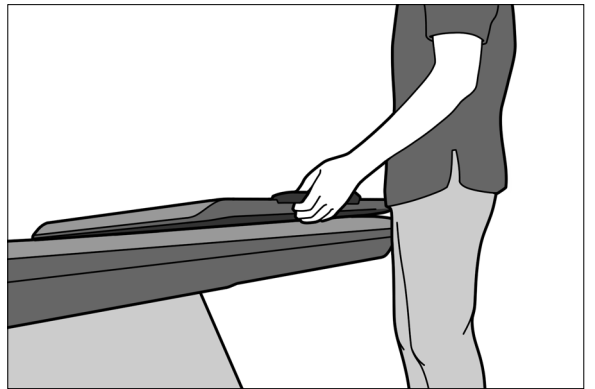


Kuva 8

SOVITTIMEN ASETUKSET


RT-4527EXA

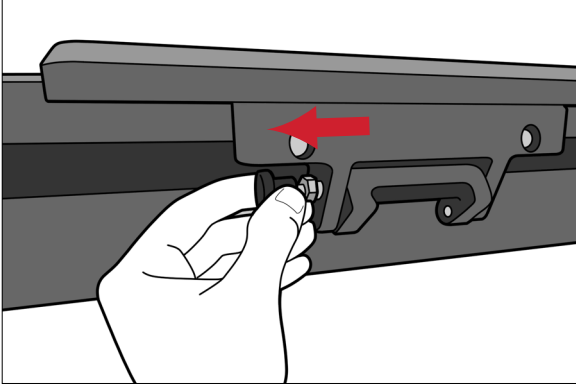

Kuva 9

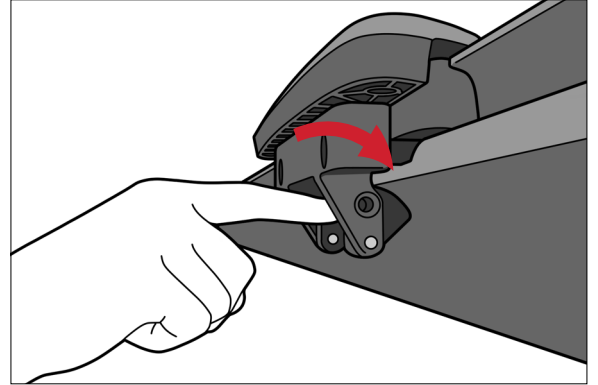

Kuva 10

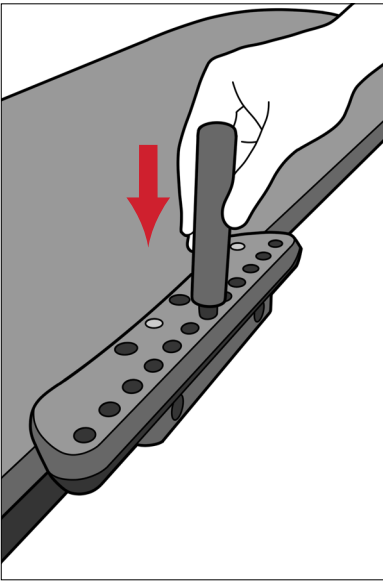


Kuva 11

SHIM-ASENNUK

RT-4527EXA (kuva 12)

1. Poista 2 ruuvia, jotka kiinnittävät sovittimen Hand Grip Arrayhin.
2. Aseta Shim-laite sovittimen ja Hand Grip Arrayn väliin ja aseta ruuviaukot Shim-laitteen aukkojen kohdalle.
3. Aseta ruuvit takaisin paikalleen ja kiristä.
4. Jatka asetusohjeiden mukaisesti.

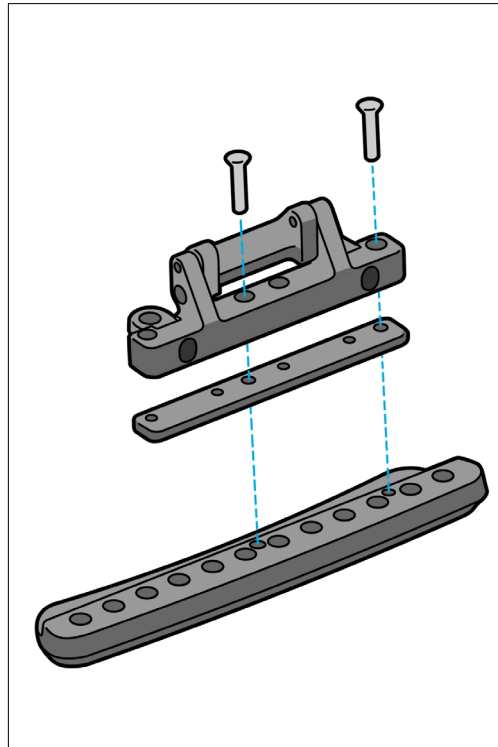

Kuva 12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com