



positioning
patients for life.®

取付ガイド および取扱説明書

RT-4527EXA

VARIAN IGRTダイレクトインデックス
アダプター



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom
 米国での製造者名 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait、AccuFix、Cantilever Board、BoS、Encompass、Hand Grip ArrayはQfixの商標です。

Exact®、ETR®はVarian Medical Systemsの登録商標です。

目次

一般的な使用上の注意.....	4
警告事項.....	4
重大な有害事象	4
アダプターのセットアップ	5
シムの取り付け	8

一般的な使用上の注意

警告事項

記号およびその定義のリストについては、Qfix.comを参照してください。

！警告！ 本デバイスを改造してはなりません。本デバイスの一部が大きな荷重を受けた場合、損傷しているように見える場合、または正常に機能しない場合は、直ちに使用を中止して、QFIX (+1 484-720-6054またはTECHSUPPORT@QFIX.COM) までご連絡ください。

本アダプターは、Portrait™、Encompass™、AccuFix™ Cantilever Board™、および BoS™ヘッドフレームで機能するように設計されています。最新のデバイスおよび互換性のあるアダプターのリストについては、Qfixにお問い合わせください。

重大な有害事象

重大な有害事象（例えば、死亡または重傷をもたらす、またはその可能性がある事象）が発生した場合は必ず、Qfixと当該国の監督当局の両方に報告してください。



！警告！

1. デバイスは最大延長位置を越えて延長してはなりません。最大延長位置を越えて延長した場合、デバイスがカウチトップから落下し、患者が負傷するおそれがあります。
2. 使用前に毎回、すべての金具がしっかりと締まっていることをチェックしてください。

対象患者

放射線療法または画像診断検査を受ける患者。

想定される使用者

製品の意図する使用者は、規制地域の要件に従って認定を受けた資格者です。

アダプターのセットアップ

RT-4527EXA

！注記！アダプターとHand Grip Arrayは側面に依存するため、デバイスの適切な側面にのみ取り付ける必要があります。

1. Encompass™を使用している場合は、Hand Grip Arrayとアダプターの間にシムを追加します。シムの取り付けについては、8ページを参照してください(図12)。位置決めディスクを緩めます(図1)。
2. アダプターをデバイスの左側と右側に向けます(図2)。
3. 底面から、付属のネジをHand Grip Arrayマウントの下側の孔に取り付けます(図3)。
4. 上面から、皿孔に付属のネジを取り付けます(図4)。
5. デバイスの側面から、付属の2つの位置決めディスクを締めます。デバイスの反対側でこれを繰り返します(図5)。
6. IGRTロックを開きます(図6)

カウチトップへの取り付け

1. オーバーレイの患者の右側をIGRTカウチトップに引っ掛けます(図7)。位置決めディスクがノッチに合っていることを確認します。
2. オーバーレイの患者の左側をIGRTカウチトップに下げます(図8)。位置決めディスクがノッチに合っていることを確認します。
3. プランジャーを引き、カウチトップの先端の下でロックを回転させます。プランジャーの再咬合を確認します(図9、図10)。
4. ハンドグリップを目的の位置に取り付けます(図11)。

！警告！プランジャーが完全にかみ合っていることを確認します。かみ合っていないと、デバイスがカウチトップから落下し、患者が負傷するおそれがあります。

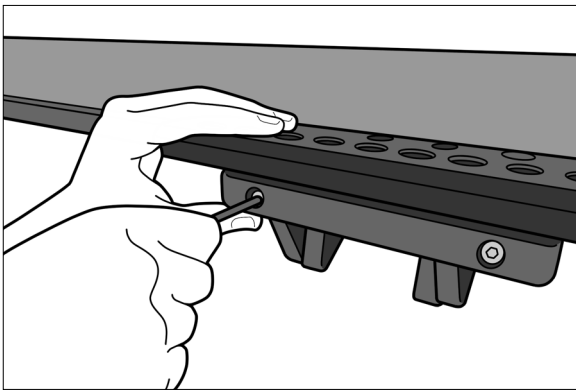


図1

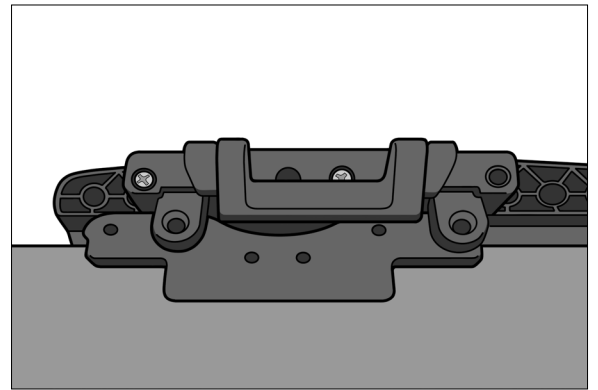


図2

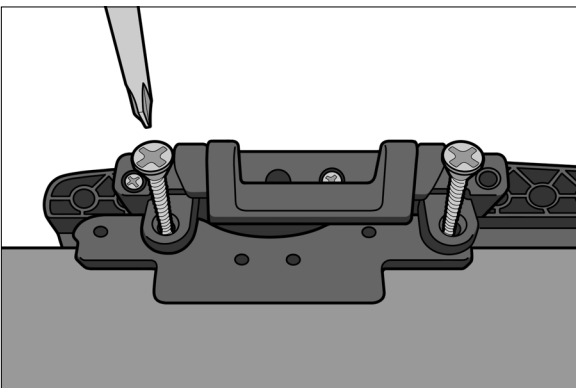


図3

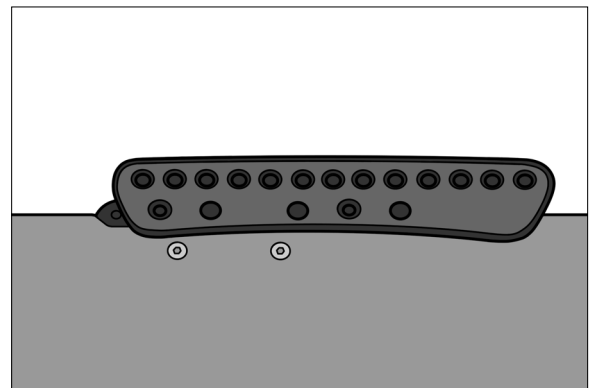


図4

アダプターのセットアップ

RT-4527EXA

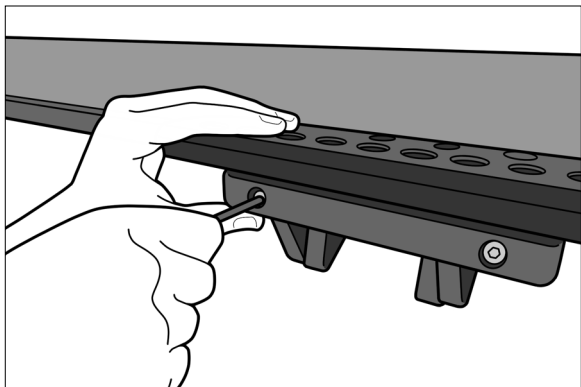


図5

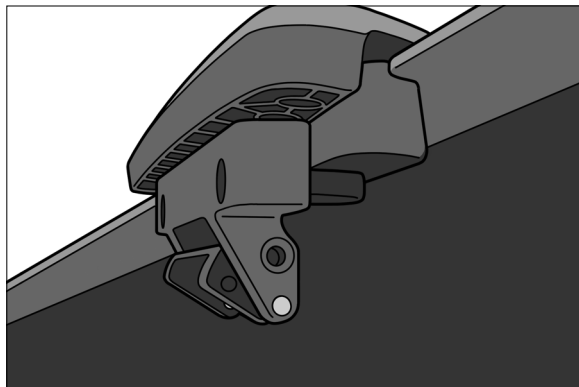


図6



図7

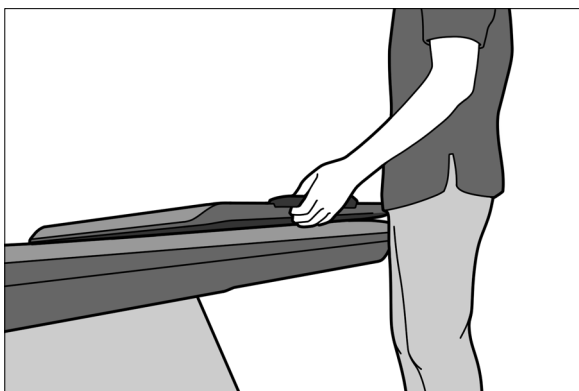


図8

アダプターのセットアップ

RT-4527EXA

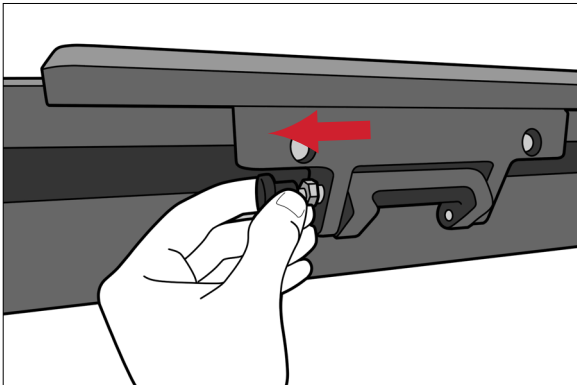


図9

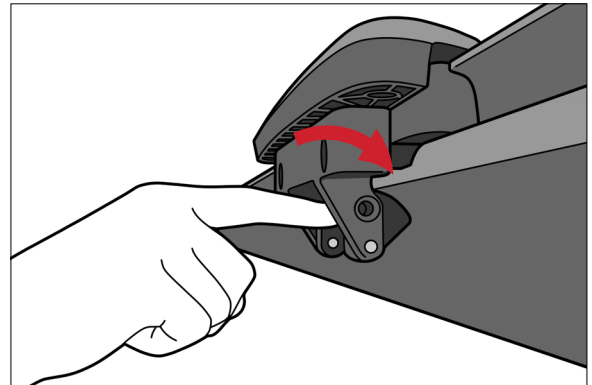


図10

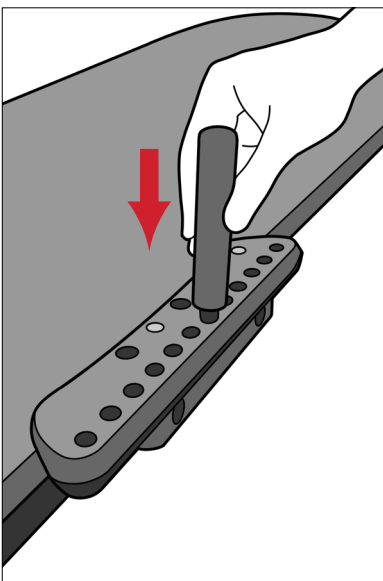


図11

シムの取り付け

RT-4527EXA (図12)

1. アダプターをHand Grip Arrayに固定している2本のネジを外します。
2. シムをアダプターとHand Grip Arrayの間に配置し、ネジ孔をシムの孔に合わせます。
3. 2本のネジを取り付け直して固定します。
4. セットアップ手順を続けます。

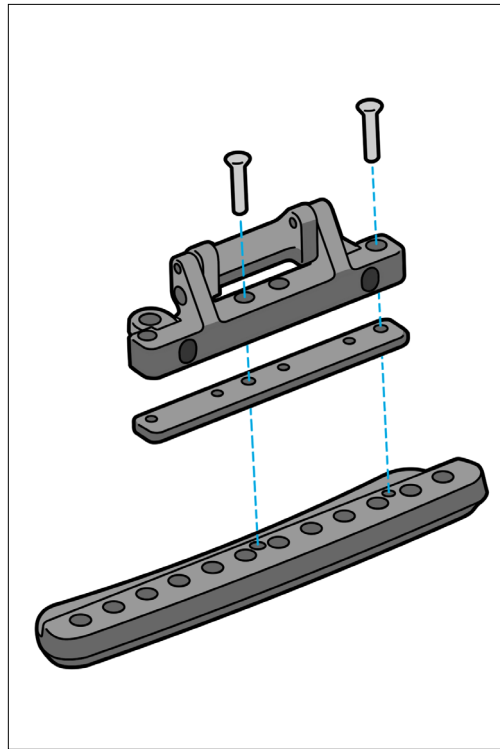


図12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008323_JA_C
2024-01