



positioning
patients for life.®

INSTALLATIEHANDLEIDING EN GEBRUIKSAANWIJZING

RT-4527EXA

VARIAN IGRT Direct Indexing-adapter



 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 <i>Vervaardigd in de VS doo</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass en Hand Grip Array zijn handelsmerken van Qfix.
Exact® en ETR® zijn gedeponeerde handelsmerken van Varian Medical Systems.

INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN	4
WAARSCHUWINGEN	4
ERNSTIGE INCIDENTEN.....	4
ADAPTERINSTELLING.....	5
AANBRENGEN VAN VULSTUKKEN	8

ALGEMENE VOORZORGS- MAATREGELEN

WAARSCHUWINGEN

Ga naar Qfix.com voor een lijst met symbolen en de bijbehorende definities.

! WAARSCHUWING ! AANPASSING VAN DEZE APPARATUUR IS NIET TOEGESTAAN. ALS EEN ONDERDEEL VAN DIT HULPMIDDEL EEN TE GROTE BELASTING ONDERVINDT, BESCHADIGD LIJKT OF NIET GOED FUNCTIONEERT, DIENT U HET HULPMIDDEL NIET LANGER TE GEBRUIKEN EN CONTACT OP TE NEMEN MET QFIX VIA +1 484-720-6054 OF TECHSUPPORT@QFIX.COM.

De adapter is ontworpen voor gebruik met Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ en BoS™ Headframe. Neem contact op met Qfix voor de meest recente lijst met hulpmiddelen en hun compatibele adapters.

ERNSTIGE INCIDENTEN

Meld ernstige incidenten (bijvoorbeeld incidenten die dodelijk of ernstig letsel als gevolg (kunnen) hebben) bij zowel Qfix als de bevoegde autoriteit van uw land.



! WAARSCHUWING !

- 1. HET TOESTEL MAG *NIET* VERDER WORDEN GEKANTELD DAN DE MAXIMAAL GEKANTELTE POSITIE; ALS HET APPARAAT VERDER WORDT GEKANTELD DAN DE MAXIMAAL GEKANTELTE POSITIE, KAN HET VAN HET TAFELBLAD VALLLEN EN LETSEL BIJ DE PATIËNT VEROORZAKEN.**
- 2. CONTROLEER VÓÓR ELK GEBRUIK OF ALLE BEVESTIGINGSMIDDELEN GOED VASTZITTEN.**

PATIËNTENDOELGROEPEN

Patiënten die bestralingstherapie of diagnostische beeldvormingsprocedures ondergaan.

BEOOGDE GEBRUIKERS

De beoogde gebruiker van de producten is iemand die in aanmerking komt volgens de eisen van het regelgevingsgebied.

ADAPTERINSTELLING

RT-4527EXA


! OPMERKING ! Adapters en handgripeenheden zijn zijdeafhankelijk en mogen alleen aan de juiste zijde van het apparaat worden geïnstalleerd.

1. Als u Encompass™ gebruikt, voegt u een vulstuk toe tussen de handgripeenheid en de adapter. Zie pagina 8 voor het aanbrengen van vulstukken (afb. 12). Maak de stelschijven los (afb. 1).
2. Zet de adapter op de rechter- en linkerkant van het toestel (afb. 2).
3. Breng vanaf de onderzijde de meegeleverde schroeven aan in de onderste gaten van de bevestiging van de handgripeenheid (afb. 3).
4. Breng vanaf de bovenzijde de meegeleverde schroeven aan in de verzonken gaten (afb. 4).
5. Draai vanaf de zijkant van het hulpmiddel de twee meegeleverde centreerschijven vast en herhaal dit aan de andere kant van het hulpmiddel (afb. 5).
6. Open de IGRT-vergrendeling (afb. 6).


Installeren op tafelblad

1. Haak aan de rechterzijde van de patiënt de overlay op het IGRT-tafelblad (afb. 7). Zorg ervoor dat de stelschijven zijn uitgelijnd met de inkepingen.
2. Laat aan de linkerkant van de patiënt de overlay zakken op het IGRT-tafelblad (afb. 8). Zorg ervoor dat de stelschijven zijn uitgelijnd met de inkepingen.
3. Trek aan de trek- en draaivergrendeling onder het uiteinde van het tafelblad. Controleer of de trekvergrendeling goed op zijn plaats komt te zitten (afb. 9 en 10).
4. Plaats de handgrepen op de gewenste plaats (afb. 11).


! WAARSCHUWING ! CONTROLEER OF DE TREKVERGREDELING VOLLEDIG AANGRIJPT. ALS U DIT NIET DOET, KAN HET APPARAAT VAN HET TAFELBLAD VALLEN, WAARDOOR DE PATIËNT LETSEL KAN OPLOPEN.

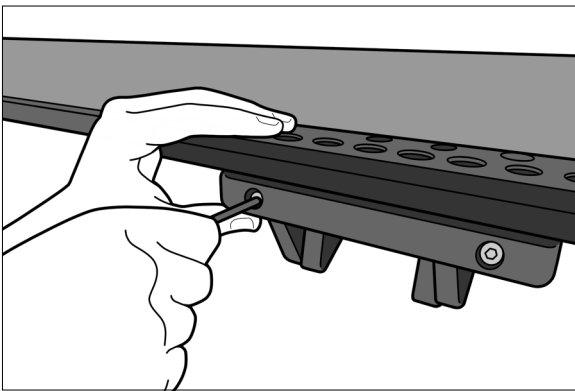


Afb. 1

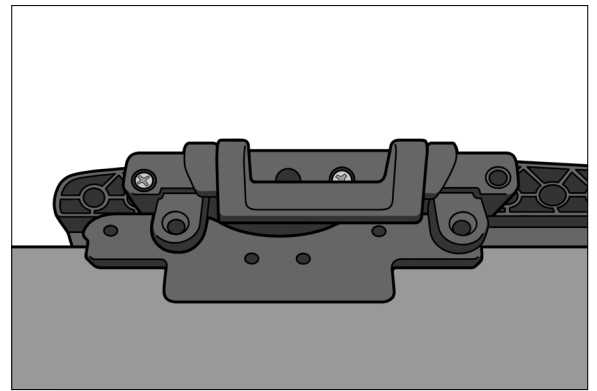

Afb. 2

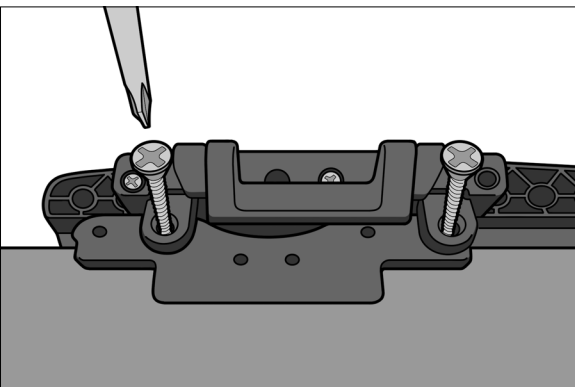


Afb. 3

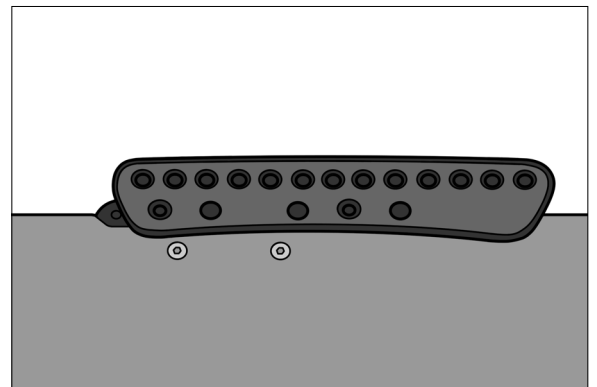


Afb. 4

ADAPTERINSTELLING

RT-4527EXA

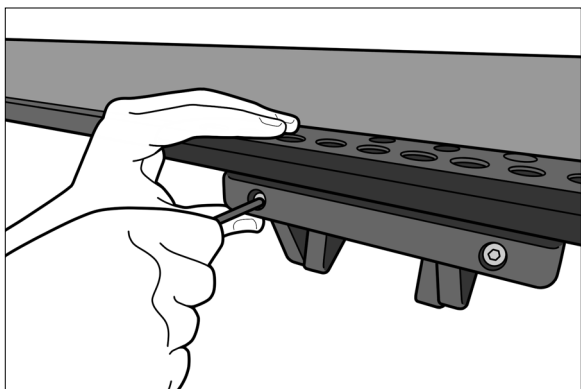


Afb. 5

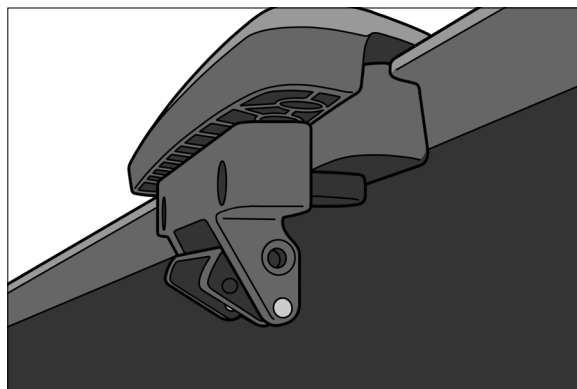

Afb. 6




Afb. 7

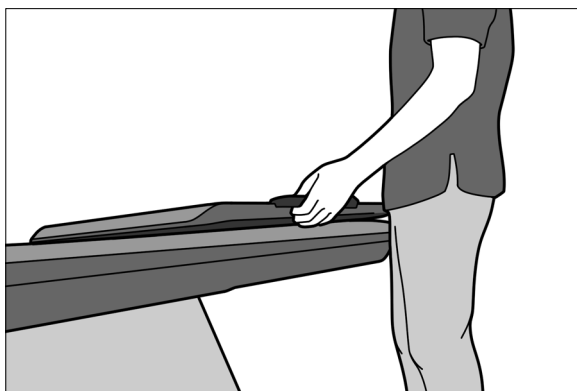


Afb. 8

ADAPTERINSTELLING


RT-4527EXA

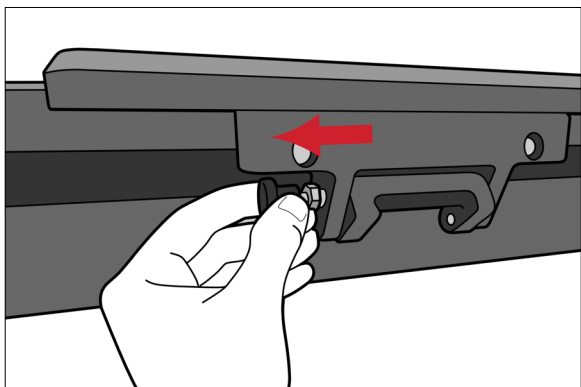

Afb. 9

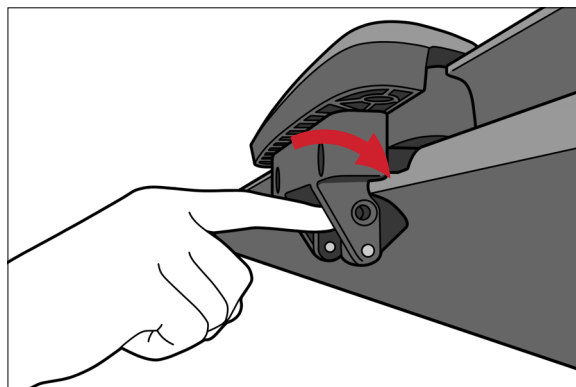

Afb. 10

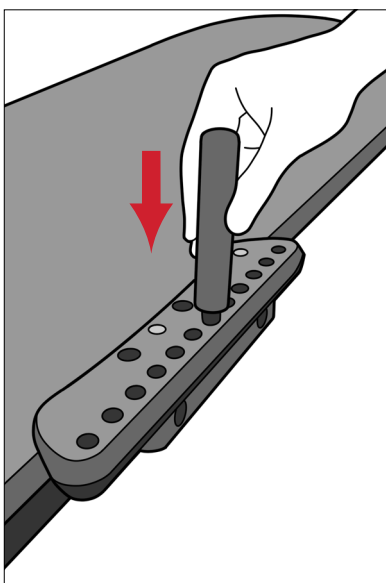


Afb. 11

AANBRENGEN VAN VULSTUKKEN

RT-4527EXA (afb. 12)

1. Verwijder de 2 schroeven waarmee de adapter aan de handgriep eenheid is bevestigd.
2. Plaats het vulstuk tussen de adapter en de handgreep, waarbij u de schroefgaten uitlijnt met de gaten in het vulstuk.
3. Draai de twee schroeven weer in tot ze goed vastzitten.
4. Ga verder met de installatie-instructies.

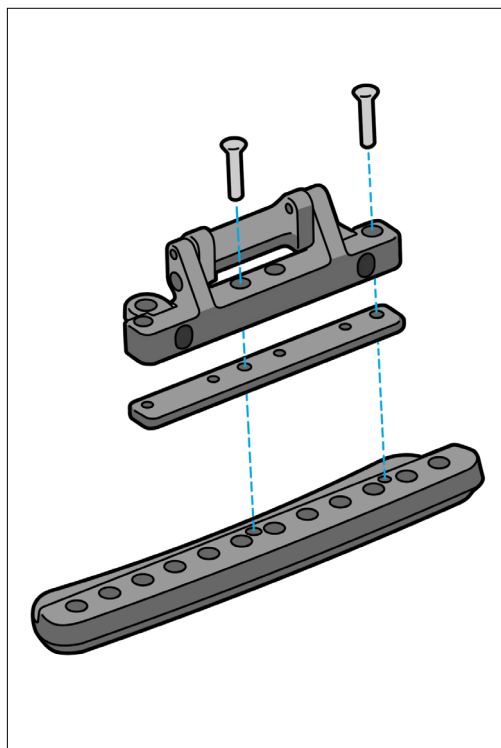

Afb. 12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 484.720.6053 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com

2008323_NL_C
2024-01