



INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKERHÅNDBOK

RT-4527EXA

VARIAN IGRT-direkteindekseringsdapter

 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom	
 <i>Produsert i USA av</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8688 +1 800-842-8688 www.CQmedical.com	CH REP	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass og Hand Grip Array er varemerker som tilhører Qfix.

Exact® og ETR® er registrerte varemerker som tilhører Varian Medical Systems.

INNHALDSFORTEGNELSE

GENERELLE FORHOLDSREGLER	4
VARSLER	4
ALVORLIGE HENDELSER.....	4
ADAPTEROPPSETT	5
INSTALLERE SHIM.....	8

GENERELLE FORHOLDSREGLER

VARSLER

Du finner en liste over symboler og definisjonen av dem på CQmedical.com.

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLATT Å FORETA ENDRINGER PÅ DETTE UTSTYRET. HVIS NOEN DEL AV DENNE ENHETEN UTSETTES FOR EKSTREM BELASTNING, VIRKER SKADET ELLER IKKE FUNGERER SOM DEN SKAL, MÅ DU UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE DEN OG KONTAKTE CQ MEDICAL PÅ +1 712-737-8688 ELLER INFO@CQMEDICAL.COM.

Adapteren er utformet for å fungere med Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ og BoS™-hoderammen. Den nyeste listen over enheter og kompatible adaptere får du ved å kontakte CQ Medical.

ALVORLIGE HENDELSER

Rapporter alle alvorlige hendelser (f.eks. hendelser som fører til, eller kan føre til død eller alvorlig personskade) til både CQ Medical og den relevante myndigheten i landet.



! ADVARSEL !

- 1. ENHETEN SKAL IKKE UTKRAGES MER ENN DEN MAKSIMALE UTKRAGEDE POSISJONEN. MER UTKRAGING ENN DEN MAKSIMALE UTKRAGEDE POSISJONEN KAN FØRE TIL AT ENHETEN FALLER AV BORDTOPPEN OG SKADER PASIENTEN.**
- 2. KONTROLLER AT ALLE KOMPONENTER ER TRUKKET GODT TIL FØR HVER BRUK.**

PASIENTMÅLGRUPPER

Pasienter som gjennomgår strålebehandling eller prosedyrer med diagnostisk avbildning.

TILTENKTE BRUKERE

Tiltente brukere for produktene er personer som er kvalifisert i henhold til kravene i lokale forskrifter.

ADAPTEROPPSETT

RT-4527EXA

! MERK ! Adaptere og Hand Grip Array er sideavhengige og skal bare installeres på riktig side av enheten.

1. Ved bruk av Encompass™ skal shim plasseres mellom Hand Grip Array og adapteren. Informasjon om installasjon av shim finnes på side 8 (fig. 12). Løsne plasseringsskivene (fig. 1).
2. Tilpass adapteren på høyre og venstre side av enheten (fig. 2).
3. Sett skruene som følger med, i de nedre hullene på Hand Grip Array-beslaget fra undersiden (fig. 3).
4. Sett skruene som følger med, i de forsenkede hullene fra oversiden (fig. 4).
5. Trekk til de to plasseringsskivene som følger med, fra siden på enheten, og gjenta på motsatt side av enheten (fig. 5).
6. Åpne IGRT-låsen (fig. 6).

Installere på bordtopp

1. Hekt overlegget på pasientens høyre side til IGRT-bordtoppen (fig. 7). Kontroller at plasseringsskivene er innrettet med hakkene.
2. Senk overlegget på pasientens venstre side ned på IGRT-bordtoppen (fig. 8). Kontroller at plasseringsskivene er innrettet med hakkene.
3. Trekk i stempelet, og sving låsen under enden av bordtoppen. Kontroller at stempelet går i inngrep igjen (fig. 9 og 10).
4. Installer håndtak på ønsket sted (fig. 11).

! ADVARSEL ! BEKREFT AT STEMPELET ER HELT I INNGREP. HVIS IKKE KAN ENHETEN FALLE NED FRA BORDTOPPEN OG SKADE PASIENTEN.

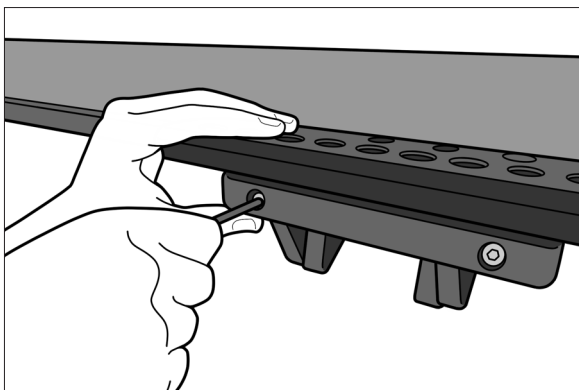


Fig. 1

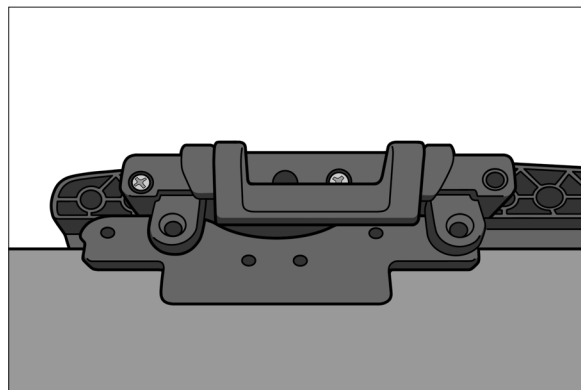


Fig. 2

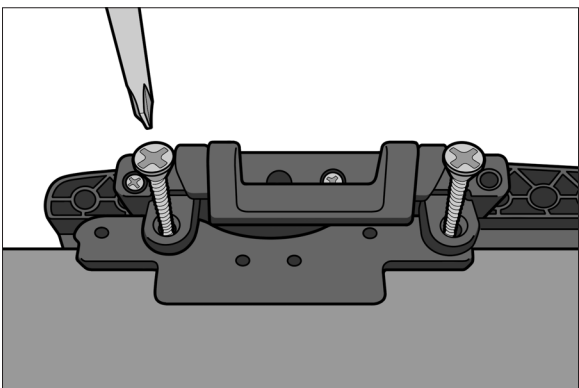


Fig. 3

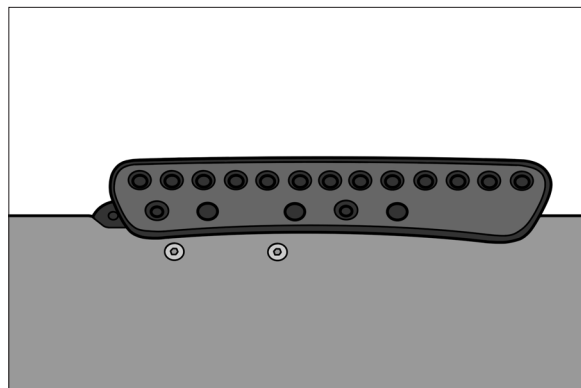


Fig. 4

ADAPTEROPPSETT

RT-4527EXA

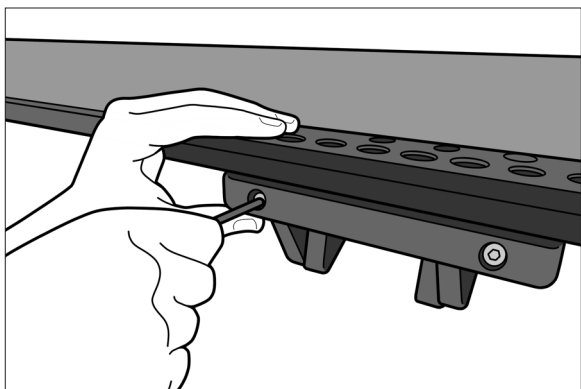


Fig. 5

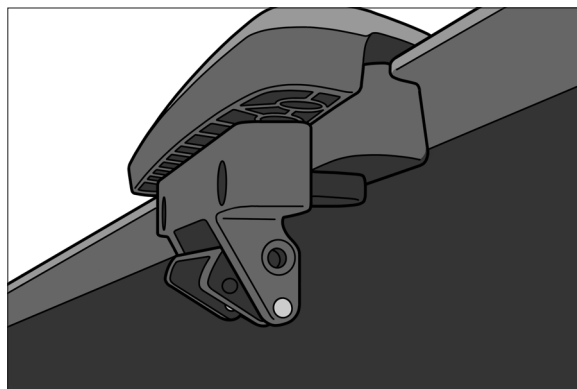


Fig. 6



Fig. 7

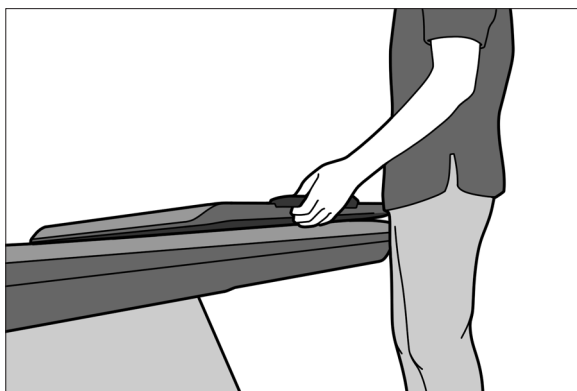


Fig. 8

ADAPTEROPPSETT

RT-4527EXA

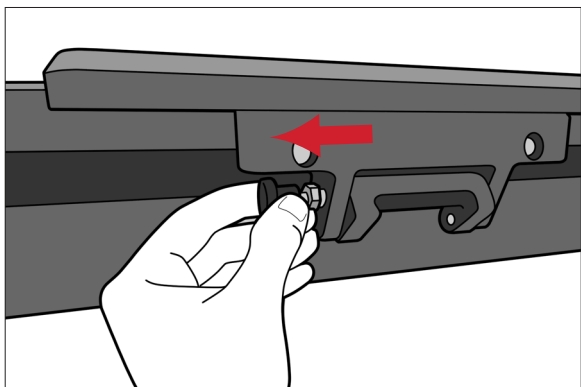


Fig. 9

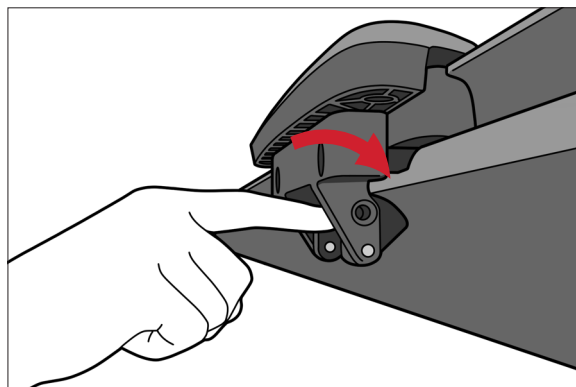


Fig. 10

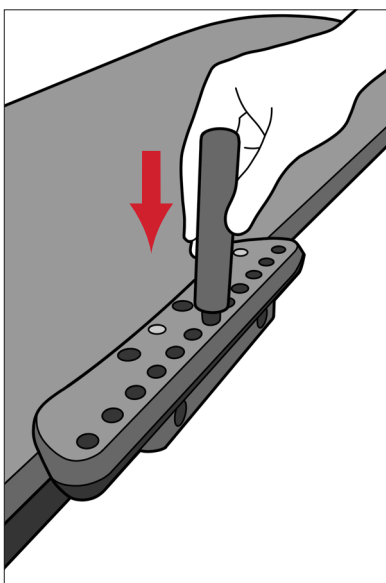


Fig. 11

INSTALLERE SHIM

RT-4527EXA (fig. 12)

1. Fjern de 2 skruene som fester adapteren til Hand Grip Array.
2. Plasser shim mellom adapteren og Hand Grip Array, og innrett skrueshullene med hullene i shim-en.
3. Skru i de to skruene igjen til de sitter godt fast.
4. Fortsett med oppsettinstruksjonene.

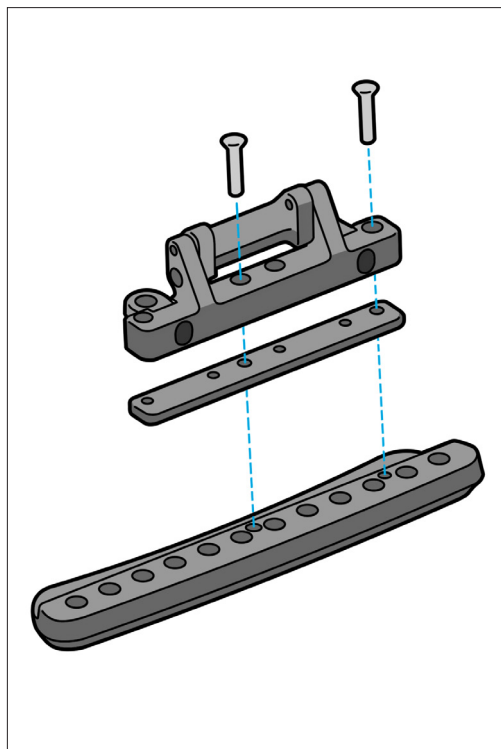


Fig. 12



www.CQmedical.com

☎ +1 712-737-8688 | +1 800-842-8688

✉ info@CQmedical.com

2008323_NO_1
2025-07