


NÁVOD NA INŠTALÁCIU A NÁVOD NA POUŽITIE

RT-4527EXA

VARIAN IGRT – priamy polohovací adaptér

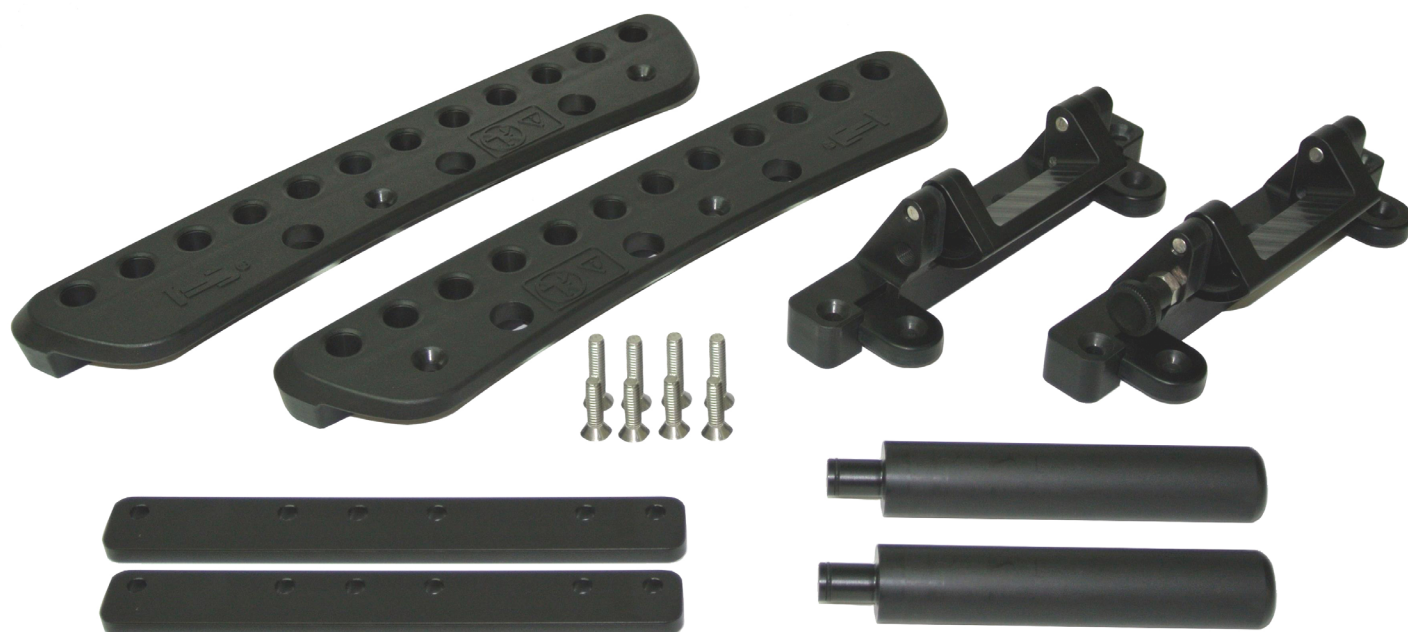

 EC REP Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, Longdon W1D 4EG United Kingdom
 <i>Vyrobené v USA spoločnosťou</i> Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 484-720-6053 www.Qfix.com	CH REP Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Portrait, AccuFix, Cantilever Board, BoS, Encompass a Hand Grip Array sú ochranné známky spoločnosti Qfix.

Exact® a ETR® sú registrované ochranné známky spoločnosti Varian Medical Systems.

OBSAH

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	4
VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA	4
ZÁVAŽNÉ UDALOSTI	4
NASTAVENIE ADAPTÉRA.....	5
RT-4527EXA	5
INŠTALÁCIA VLOŽKY	8

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

Zoznam symbolov a ich definície nájdete na stránke Qfix.com.

! VAROVANIE! VŠETKY ÚPRAVY TOHTO ZARIADENIA SÚ ZAKÁZANÉ. AK BUDE AKÁKOL'VEK ČASŤ TOHTO ZARIADENIA NADMERNE ZAŤAŽENÁ, BUDE SA JAVIŤ AKO POŠKODENÁ ALEBO NEBUDE SPRÁVNE FUNGOVAŤ, IHNEĎ JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ A KONTAKTUJTE SPOLOČNOSŤ QFIX NA ČÍSLE +1 484-720-6054 ALEBO NA ADRESE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

Tento adaptér slúži na prácu so zariadeniami Portrait™, Encompass™, AccuFix™ Cantilever Board™ a BoS™ Headframe. Najaktuálnejší zoznam zariadení a kompatibilných adaptérov vám poskytne spoločnosť Qfix.

ZÁVAŽNÉ UDALOSTI

Nahláste všetky závažné udalosti (napríklad udalosti, ktoré viedli k úmrtiu alebo závažnému zraneniu, prípadne k nim mohli viesť) spoločnosti Qfix aj kompetentnému úradu vo vašej krajine.



! VAROVANIE !

1. ZARIADENIE SA NESMIE UPEVNŇOVAŤ NAD MAXIMÁLNU KONZOLOVÚ POLOHU. UPEVNENIE NAD MAXIMÁLNU KONZOLOVÚ POLOHU MÔŽE VIESŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY OŽAROVACIEHO STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

2. PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SKONTROLUJTE TESNOSŤ VŠETKÝCH HARDVÉROVÝCH KOMPONENTOV.

CIEĽOVÉ SKUPINY PACIENTOV

Pacienti podstupujúci rádioterapiu alebo diagnostické zobrazovacie vyšetrenia.

CIEĽOVÍ POUŽÍVATELIA

Cieľový používateľ výrobkov je osoba kvalifikovaná v súlade s požiadavkami príslušnej regulačnej oblasti.

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXA


! POZNÁMKA ! Adaptéry a zariadenie Hand Grip Array sú závislé od strany a inštalujú sa iba na príslušnú stranu zariadenia.

1. Ak používate zariadenie Encompass™, vložte medzi zariadenie Hand Grip Array a adaptér vložku. Montáž vložky nájdete na strane 8 (obr. 12). Uvoľnite nastavovacie disky (obr. 1).
2. Otočte adaptér na pravú a ľavú stranu zariadenia (obr. 2).
3. Z dolnej strany namontujte dodané skrutky do spodných otvorov držiaka Hand Grip Array (obr. 3).
4. Z vrchnej strany namontujte dodané skrutky do zapustených otvorov (obr. 4).
5. Zboku zariadenia utiahnite dva dodané polohovacie disky a opakujte na opačnej strane zariadenia (obr. 5).
6. Otvorte zámku IGRT (obr. 6).


Inštalácia na dosku ožarovacieho stola

1. Pravú stranu pacienta s prekrytím pripevnite na dosku ožarovacieho stola IGRT (obr. 7). Ubezpečte sa, že sú polohovacie disky zarovnané so zárezmi.
2. Ľavú stranu pacienta s prekrytím spustite na dosku ožarovacieho stola IGRT (obr. 8). Ubezpečte sa, že sú polohovacie disky zarovnané so zárezmi.
3. Potiahnite piest a otočte zámku pod výbežok dosky stola. Skontrolujte, či je piest zaistený (obr. 9 a 10).
4. Rukoväti namontujte na požadované miesto (obr. 11).


! VAROVANIE ! SKONTROLUJTE, ČI PIEST ÚPLNE ZAPADOL. AK TAK NEUROBÍTE, MÔŽE DÔJSŤ K PÁDU ZARIADENIA Z DOSKY STOLA A K ÚRAZU PACIENTA.

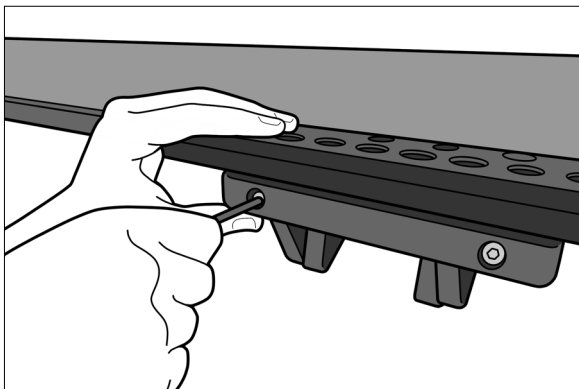


Obr. 1

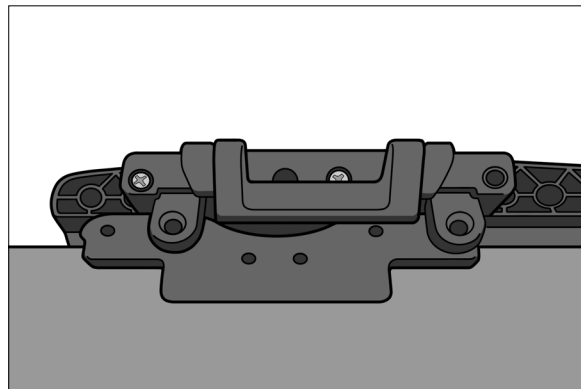

Obr. 2

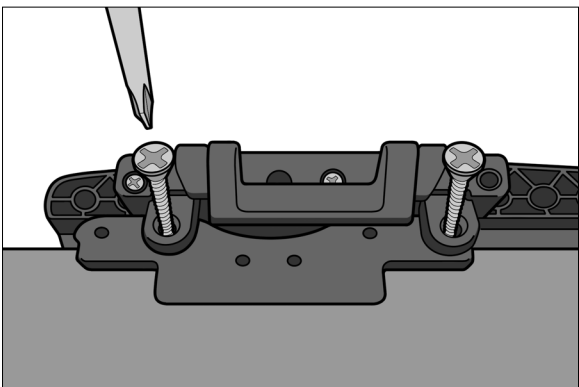


Obr. 3

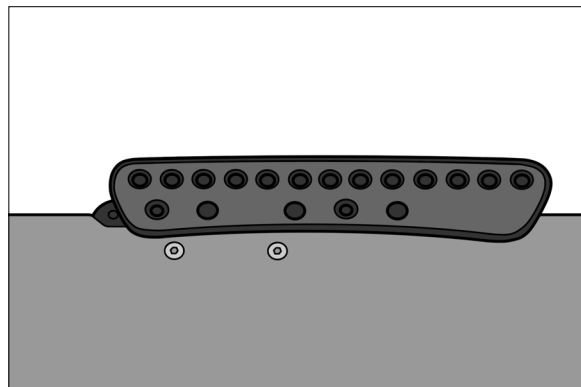


Obr. 4

NASTAVENIE ADAPTÉRA

RT-4527EXA

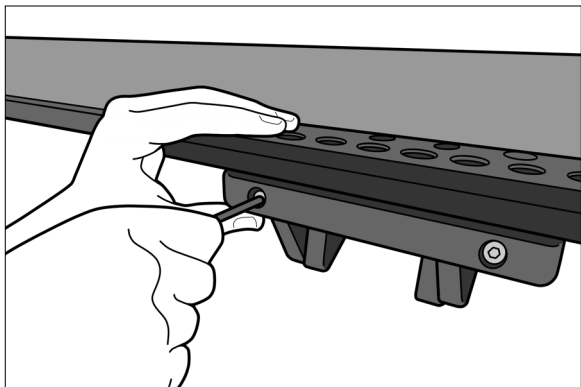


Obr. 5

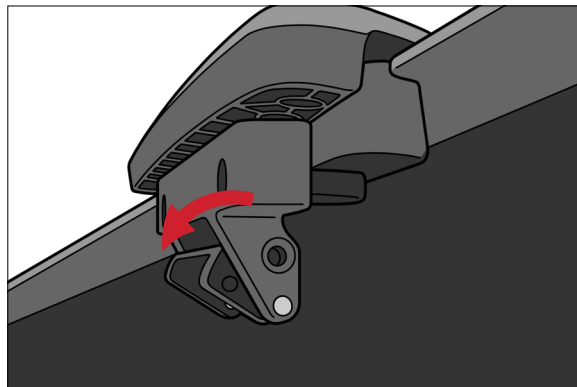

Obr. 6




Obr. 7

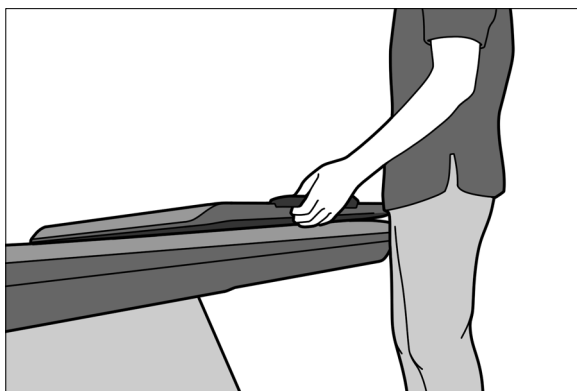


Obr. 8

NASTAVENIE ADAPTÉRA


RT-4527EXA

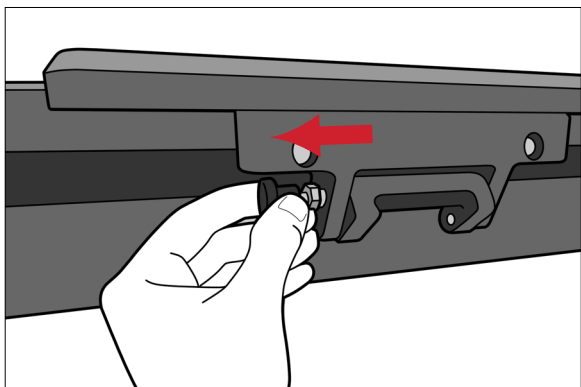

Obr. 9

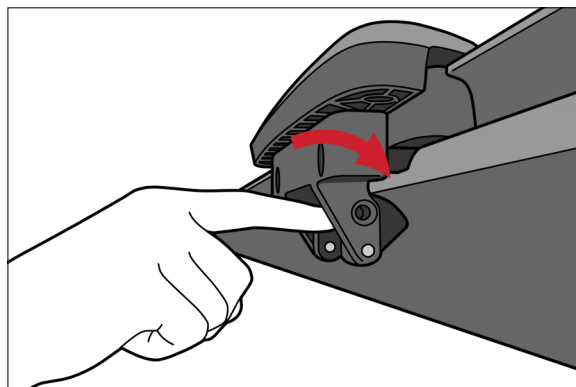

Obr. 10

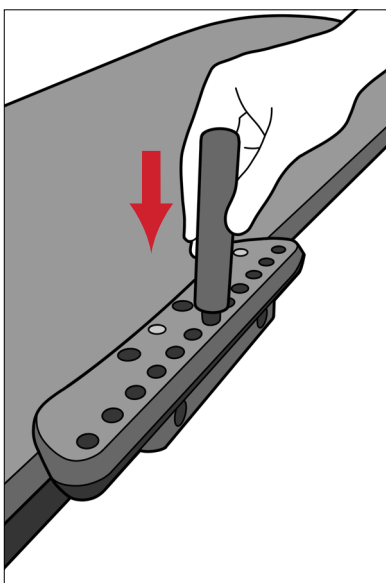


Obr. 11

INŠTALÁCIA VLOŽKY

RT-4527EXA (Obr. 12)

1. Odskrutkujte 2 skrutky, ktorými je adaptér pripevnený k zariadeniu Hand Grip Array.
2. Vložku umiestnite medzi adaptér a zariadenie Hand Grip Array a otvory pre skrutky zarovnajte s otvormi vo vložke.
3. Znova zaskrutkujte dve skrutky, kým nebudú zaistené.
4. Pokračujte podľa pokynov na nastavenie.

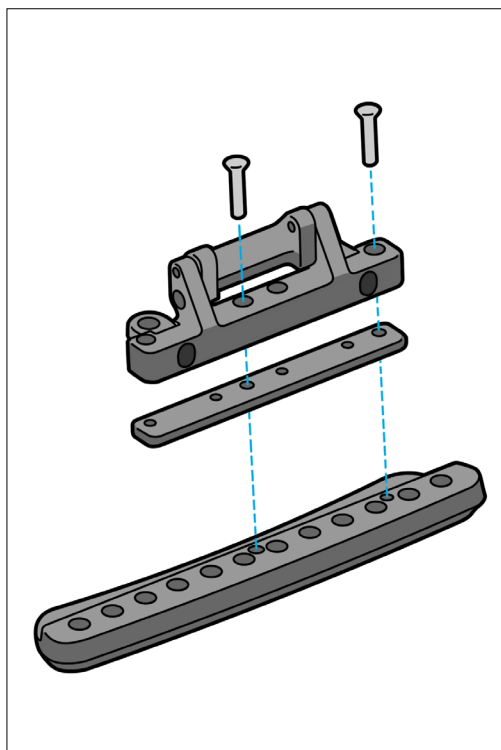

Obr. 12



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 484.720.6053 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2008323_SK_D
2024-01