



ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

RT-4800-B1

RT-4800-B2

Γέφυρες συμπίεσης InfinityLock™ SBRT



 <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-left: 10px;">EC REP</div> Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	UK Responsible Person QServe Group UK, Ltd. 49 Greek Street Soho, London W1D 4EG United Kingdom	
 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 712-737-8688 www.CQmedical.com	<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;">CH REP</div>	Raditec Medical AG Schlossberg 5a 5454 Bellikon Switzerland

Οι ονομασίες VacQfix, InfinityLock, InfinityEdge και One-Step είναι εμπορικά σήματα της Qfix.

Η ονομασία Super Sani-Cloth® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της PDI Healthcare.

Η ονομασία Clorox® είναι καταχωρισμένο εμπορικό σήμα της The Clorox Company.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ	4
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	4
ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ.....	4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.....	4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MRI.....	4
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ	5
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.....	6
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	7
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	7
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	8
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	8
ΡΥΘΜΙΣΗ.....	10
ΑΦΑΙΡΕΣΗ	12
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	13
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	13
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.....	13
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.....	14
ΠΛΑΤΟΣ	14
ΥΨΟΣ	14
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.....	15
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.....	16
ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ INFINITYLOCK SBRT – RT-4800-B1, RT-4800-B2.....	16

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

⚠ ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΧΤΕΙ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ CQ MEDICAL ΣΤΟ +1 712-737-8688 Η ΣΤΟ SUPPORT@CQMEDICAL.COM.

ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Αναφέρετε τυχόν σοβαρά συμβάντα (π.χ. συμβάντα που οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό) τόσο στην CQ Medical όσο και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των γεφυρών συμπίεσης SBRT, συνιστάται οι χρήστες να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στην ασφαλή λειτουργία του συστήματος πριν από τη χρήση.

Για την ακριβή και ασφαλή χρήση των γεφυρών συμπίεσης SBRT, ο χρήστης πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Βεβαιωθείτε ότι οι γέφυρες συμπίεσης SBRT έχουν ασφαλίσει καλά στην επιφάνεια στήριξης του ασθενούς και επαληθεύστε ότι η ρύθμιση είναι σωστή πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη αναπαραγωγικότητα, συνιστάται η χρήση των γεφυρών συμπίεσης SBRT σε συνδυασμό με επιφάνειες υποστήριξης ασθενούς με κλίμακες αναφοράς ακριβούς τοποθέτησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MRI

MR Μη κλινικές δοκιμές έχουν καταδείξει ότι οι γέφυρες συμπίεσης **SBRT** είναι ασφαλείς για χρήση σε μαγνητική τομογραφία. Αυτές οι διατάξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ CQ MEDICAL ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ MRI ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ.**

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ MR ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:**

- Τραυματισμό του ασθενούς
- Πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό


Χρησιμοποιείτε μόνο διαπιστωμένα παρελκόμενα, ασφαλή για μαγνητική τομογραφία ή κατάλληλα για μαγνητική τομογραφία υπό προϋποθέσεις, που έχουν υποβληθεί σε δοκιμές και εγκριθεί για το δικό σας σύστημα μαγνητικής τομογραφίας.

Εξετάστε τη συμβατότητα με μαγνητική τομογραφία των παρελκομένων πριν από τη χρήση στο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ! Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ.**

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

Ανατρέξτε στον ιστότοπο CQmedical.com για μια παράθεση των συμβόλων και των ορισμών τους.

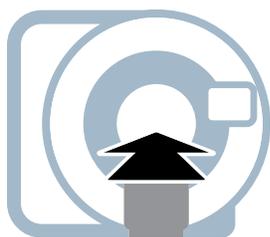

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΥΛΙΝΔΡΟ (GANTRY)

Προσανατολισμός των γεφυρών. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των γεφυρών, βεβαιωθείτε ότι το βέλος είναι στραμμένο προς τον κύλινδρο (gantry).



ΑΣΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Ένα στοιχείο το οποίο δεν παρουσιάζει γνωστό κίνδυνο από την έκθεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας (MR). Τα ασφαλή για χρήση σε μαγνητική τομογραφία στοιχεία αποτελούνται από υλικά τα οποία είναι ηλεκτρικά μη αγώγιμα, μη μεταλλικά και μη μαγνητικά.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Αυτή η διάταξη προορίζεται για την ακινητοποίηση, την τοποθέτηση και την επανατοποθέτηση ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η ομοσπονδιακή νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών περιορίζει την πώληση αυτής της διάταξης από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.


ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία ή διαγνωστικές διαδικασίες απεικόνισης.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ο προβλεπόμενος χρήστης των προϊόντων είναι το καταρτισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κανονιστικής περιοχής άτομο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

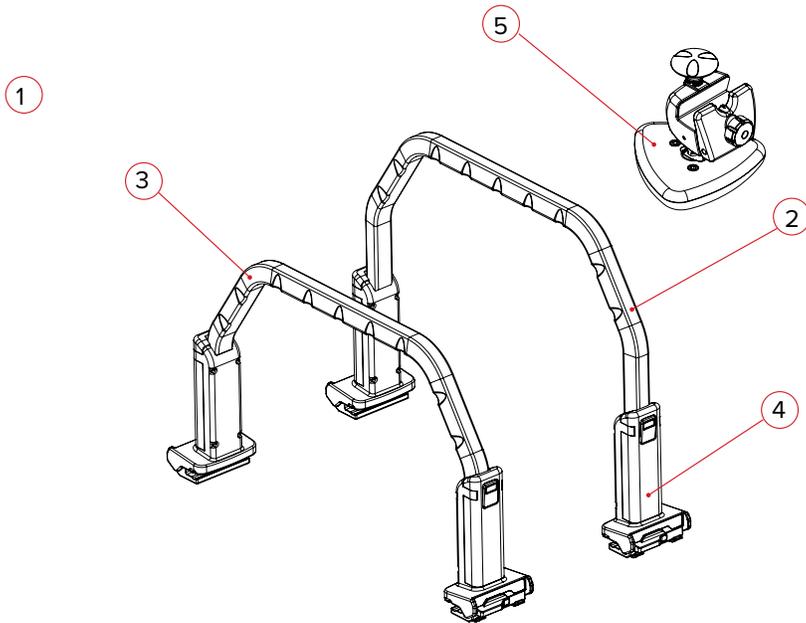

1. ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ INFINITYLOCK SBRT

Οι γέφυρες συμπίεσης InfinityLock SBRT διατίθενται σε πολλά μεγέθη. Το ύψος τους είναι ρυθμιζόμενο, περιλαμβάνουν έναν εύχρηστο μοχλό μονής κίνησης, οριζόντιες κλίμακες και εγκοπές ακριβούς τοποθέτησης για τα μαξιλάρια VacQfix™.

2. ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η μεγάλη γέφυρα μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα από 39 cm έως 48 cm (η μέτρηση γίνεται από την επιφάνεια θεραπείας έως την κάτω πλευρά της γέφυρας).

3. ΜΙΚΡΗ ΓΕΦΥΡΑ

Η μικρή γέφυρα μπορεί να ρυθμιστεί κατακόρυφα από 30 cm έως 38 cm (η μέτρηση γίνεται από την επιφάνεια θεραπείας έως την κάτω πλευρά της γέφυρας).

4. ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

Ο σφιγκτήρας γέφυρας ασφαλίσει σταθερά τις γέφυρες συμπίεσης InfinityLock SBRT στο InfinityEdge™ της επιφάνειας θεραπείας. Ο σφιγκτήρας τοποθετείται με ακρίβεια στη διάταξη θεραπείας ευθυγραμμίζοντας τις μπλε ενδείξεις στους σφιγκτήρες με τις κλίμακες στη διάταξη θεραπείας.

5. ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ

Η τριγωνική διάταξη συμπίεσης στερεώνεται στη γέφυρα συμπίεσης InfinityLock SBRT και περιλαμβάνει ένα κουμπί απελευθέρωσης ασφαλείας, απτική συμπίεση και διαβαθμισμένη πλευρική τοποθέτηση κατά μήκος της γέφυρας.

6. ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΜΗΡΟΥ VACQFIX (δεν απεικονίζεται στο διάγραμμα)

Το μαξιλάρι συμπίεσης μηρού VacQfix προσφέρει πλήρη ακινητοποίηση του ποδιού. Το μαξιλάρι ρυθμίζεται κατά μήκος της γέφυρας συμπίεσης InfinityLock SBRT με κουμπωτά κλιπ μαξιλαριού VacQfix και περιλαμβάνει τη βαλβίδα One-Step™.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ

1. Με τον μοχλό ασφάλισης στη θέση απασφάλισης, συνδέστε έναν σφιγκτήρα γέφυρας σε κάθε πλευρά της διάταξης. (Εικ. 1)
2. Σύρετε σταθερά και τους δύο σφιγκτήρες στο InfinityEdge της διάταξης μέχρι οι σφιγκτήρες να εφαρμόσουν πλήρως.
3. Χρησιμοποιώντας την κλίμακα στη διάταξη, ευθυγραμμίστε τους σφιγκτήρες γέφυρας ακριβώς απέναντι τον έναν από τον άλλο.
4. Ασφαλίστε και τους δύο σφιγκτήρες γέφυρας περιστρέφοντας τον μοχλό ασφάλισης μέχρι οι σφιγκτήρες γέφυρας να ασφαλίσουν. (Εικ. 2)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Μην περιστρέφετε τον μοχλό στη θέση ασφάλισης, εκτός εάν ο σφιγκτήρας γέφυρας έχει ασφαλίσει πλήρως στο άκρο της διάταξης. Μην αποθηκεύετε τη γέφυρα με τον μοχλό σε θέση ασφάλισης.

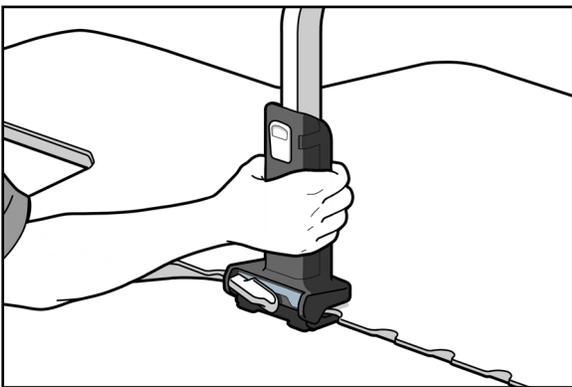


Εικ. 1

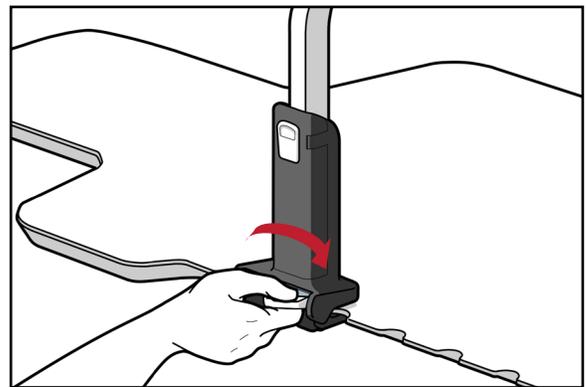


Εικ. 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

1. Ξεβιδώστε τη λαβή ασφάλισης και γείρετε προς τα πίσω την μπροστινή πλάκα του σφιγκτήρα συμπίεσης μέχρι να εφαρμόσει γύρω από τη γέφυρα. (Εικ. 3)
2. Ασφαλίστε τον σφιγκτήρα συμπίεσης περιστρέφοντας τη λαβή ασφάλισης μέχρι να ασφαλίσει ο σφιγκτήρας. (Εικ. 4)

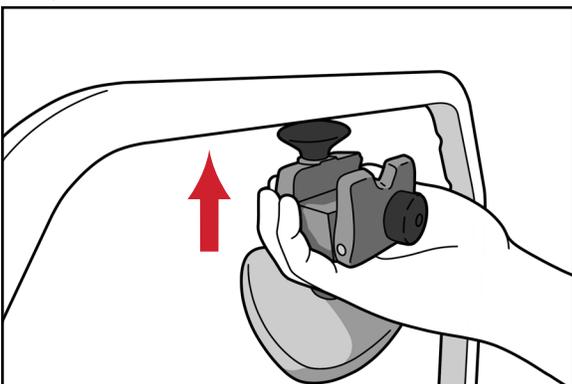

Εικ. 3

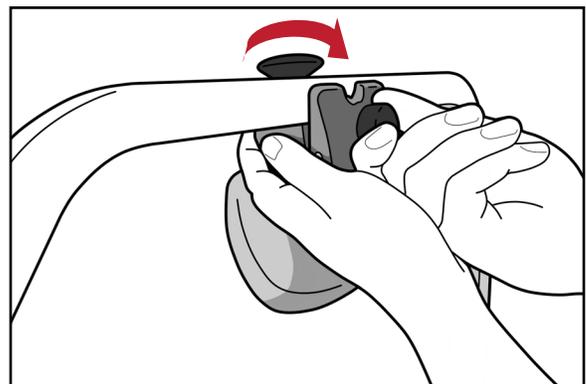


Εικ. 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΠ ΜΑΞΙΛΑΡΙΟΥ VACQFIX™

Ευθυγραμμίστε το κλιπ μαξιλαριού VacQfix με την επιθυμητή θέση στη γέφυρα συμπίεσης InfinityLock SBRT και σπρώξτε τα γύρω από τη γέφυρα συμπίεσης InfinityLock SBRT μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους. (Εικ. 5 και 6)

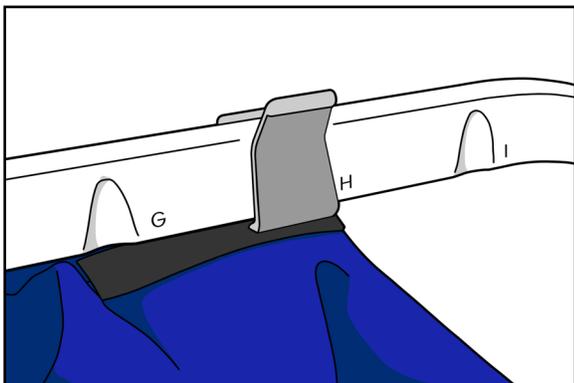

Εικ. 5

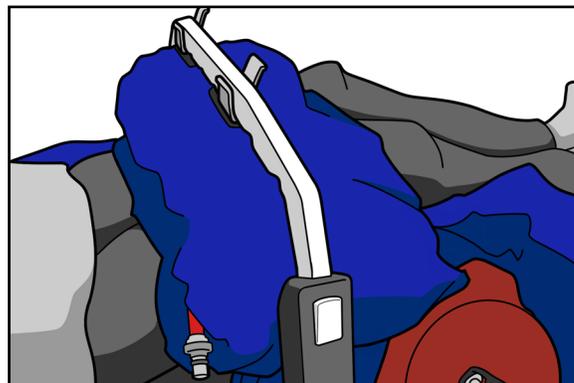

Εικ. 6


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

1. Για κατακόρυφη ρύθμιση, ενώ πιέζετε και κρατάτε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης, ανυψώστε ή χαμηλώστε τη γέφυρα στο επιθυμητό ύψος. Βεβαιωθείτε ότι το ύψος είναι ασφαλισμένο σε μια θέση όπως υποδεικνύεται στη γέφυρα. (Εικ. 7)
2. Για οριζόντια ρύθμιση, απασφαλίστε κάθε σφιγκτήρα γέφυρας, σύρετε τη γέφυρα στην επιθυμητή θέση στη διάταξη και κατόπιν ασφαλίστε τον σφιγκτήρα γέφυρας πίσω στη θέση του. (Εικ. 8 και 9)


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Η μπλε ένδειξη στον σφιγκτήρα υποδεικνύει τη θέση στη διάταξη. (Εικ. 10)

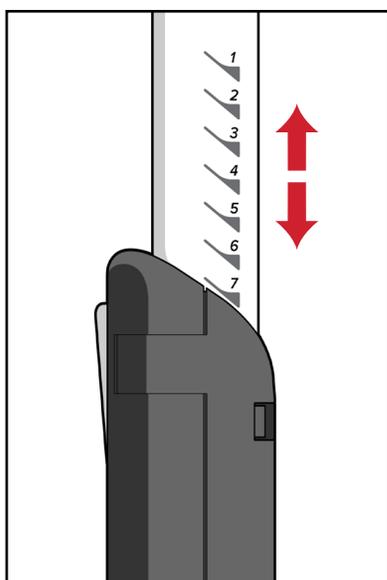


Εικ. 7

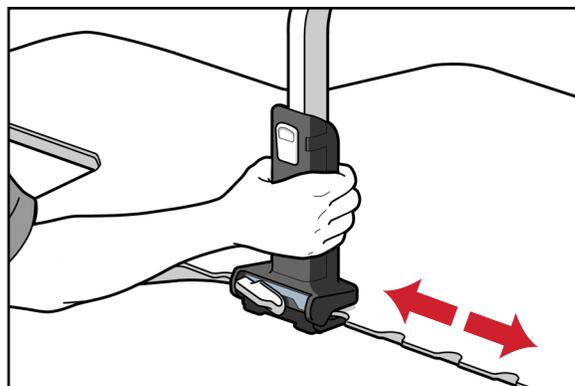

Εικ. 8

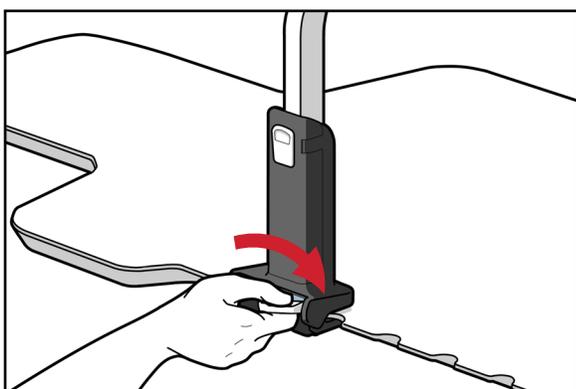

Εικ. 9

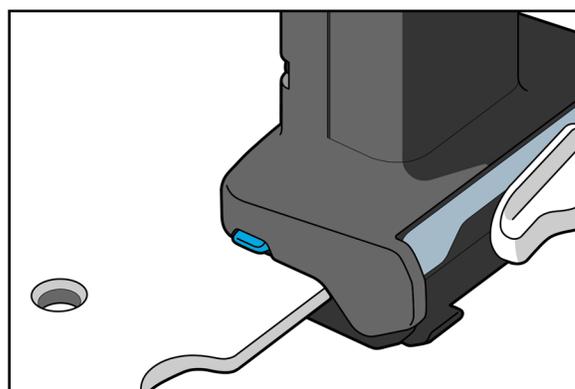

Εικ. 10


ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ


ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ

1. Με τη λαβή ασφάλισης χαλαρή, σύρετε τον σφιγκτήρα συμπίεσης στην επιθυμητή θέση και ασφαλίστε τον σφίγγοντας τη λαβή ασφάλισης. (Εικ. 11)
2. Μόλις ο ασθενής τοποθετηθεί στη θέση του, η τριγωνική διάταξη συμπίεσης μπορεί να χαμηλώσει στο διάφραγμα πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης και σπρώχνοντας προς τα κάτω στον άξονα. (Εικ. 12)


! ΣΗΜΕΙΩΣΗ ! Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο σφιγκτήρας συμπίεσης λειτουργεί ως απελευθέρωση ασφαλείας. Πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης, η τριγωνική διάταξη συμπίεσης απελευθερώνεται από τον ασθενή. (Εικ. 13)

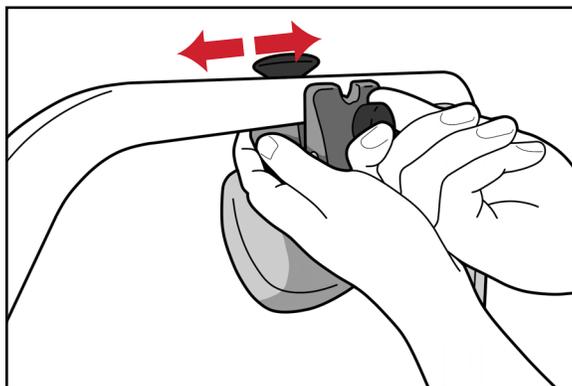

Εικ. 11

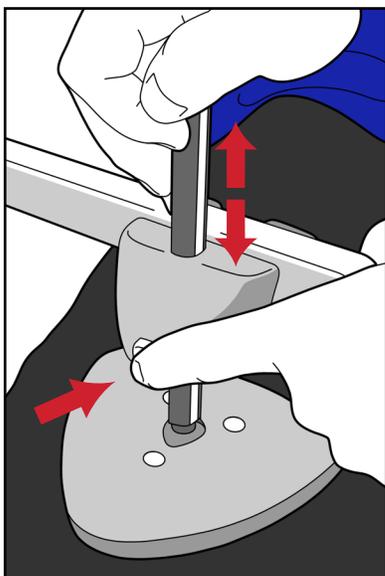

Εικ. 12

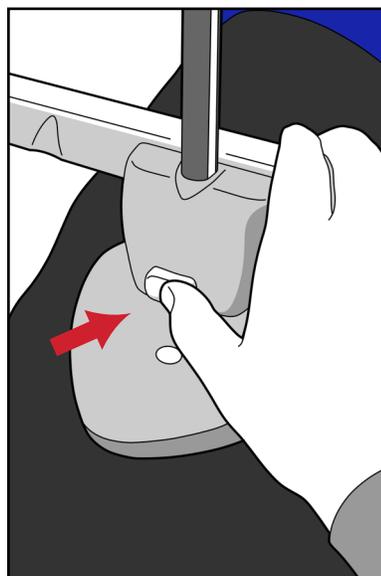

Εικ. 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Για να αφαιρέσετε τα κλιπ μαξιλαριού VacQfix, απομακρύνετε τα κλιπ ώστε να ανοίξουν και απομακρύνετε τα από τη γέφυρα.
2. Για να αφαιρέσετε τον σφιγκτήρα συμπίεσης, χαλαρώστε τη βίδα μέχρι να είναι δυνατή η απομάκρυνση του σφιγκτήρα από τη γέφυρα.
3. Για να αφαιρέσετε τη γέφυρα, απασφαλίστε και τους δύο σφιγκτήρες γέφυρας και τραβήξτε κάθε σφιγκτήρα μακριά από τα πλαϊνά της διάταξης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η διάταξη μπορεί να καθαριστεί με διάλυμα ήπιου, μη αποξεστικού καθαριστικού. Για τον καθαρισμό, εφαρμόστε διάλυμα σε καθαρό ύφασμα και σκουπίστε την επιφάνεια. Επιθεωρήστε οπτικά τη διάταξη. Εάν δεν είναι καθαρή, επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα καθαρισμού μέχρι να είναι οπτικά καθαρή. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό ύφασμα εφυγραμένο με νερό για να σκουπίσετε τη διάταξη, ώστε να αφαιρέσετε τυχόν κατάλοιπα του καθαριστικού παράγοντα. Για το στέγνωμα, σκουπίστε τη διάταξη με καθαρό, στεγνό ύφασμα. Το παρακάτω υλικό καθαρισμού έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό της διάταξης.

- Διάλυμα λευκαντικού Clorox® 10%

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για να απολυμάνετε τη διάταξη, χρησιμοποιήστε αλκοόλη ή υγρό μαντηλάκι Super Sani-Cloth®. Σκουπίστε την επιφάνεια της διάταξης με το πανί και αφήστε τη διάταξη να στεγνώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε.

ΜΗΝ τοποθετείτε αιχμηρά αντικείμενα στη διάταξη.

Ελέγχετε περιοδικά τη σύσφιξη όλων των συνδέσμων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ





ΠΛΑΤΟΣ

60,7 cm


ΥΨΟΣ

Μεγάλη γέφυρα = 48 cm στο μέγιστο ύψος, 39 cm στο ελάχιστο ύψος

Μικρή γέφυρα = 38 cm στο μέγιστο ύψος, 30 cm στο ελάχιστο ύψος

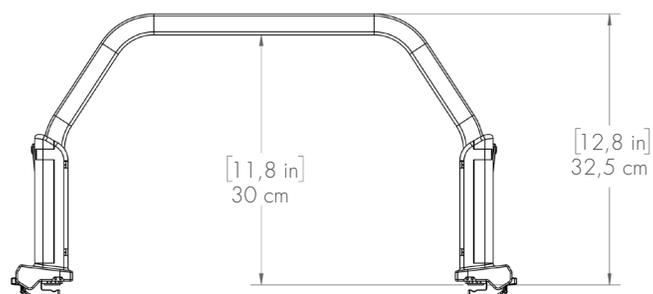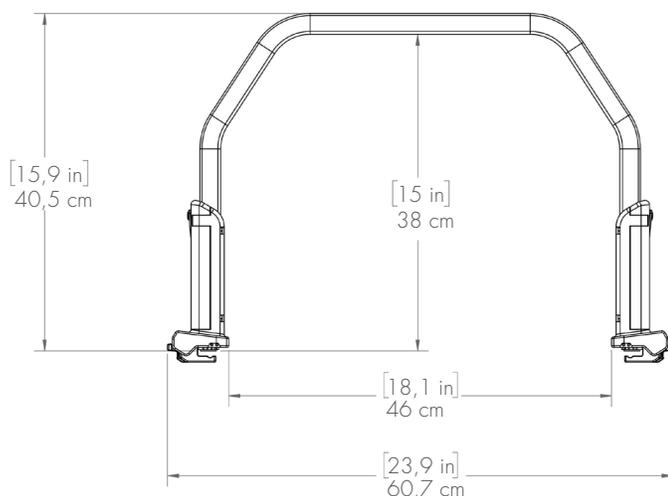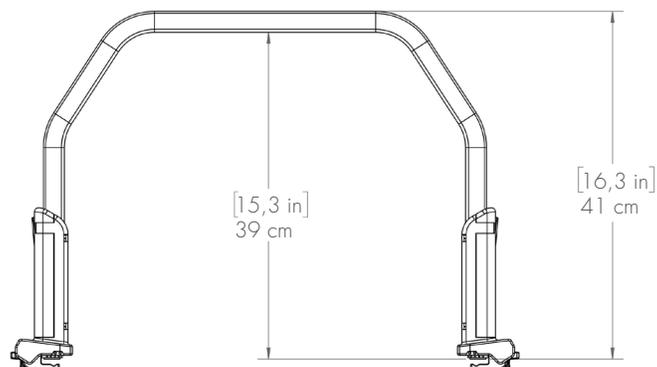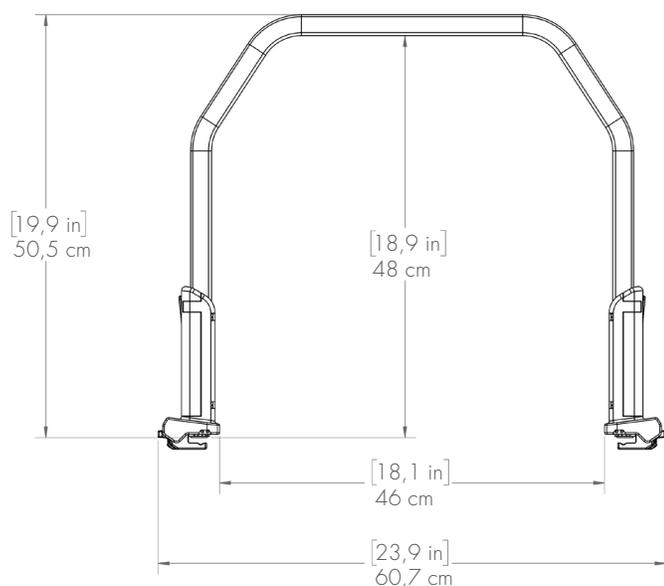

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

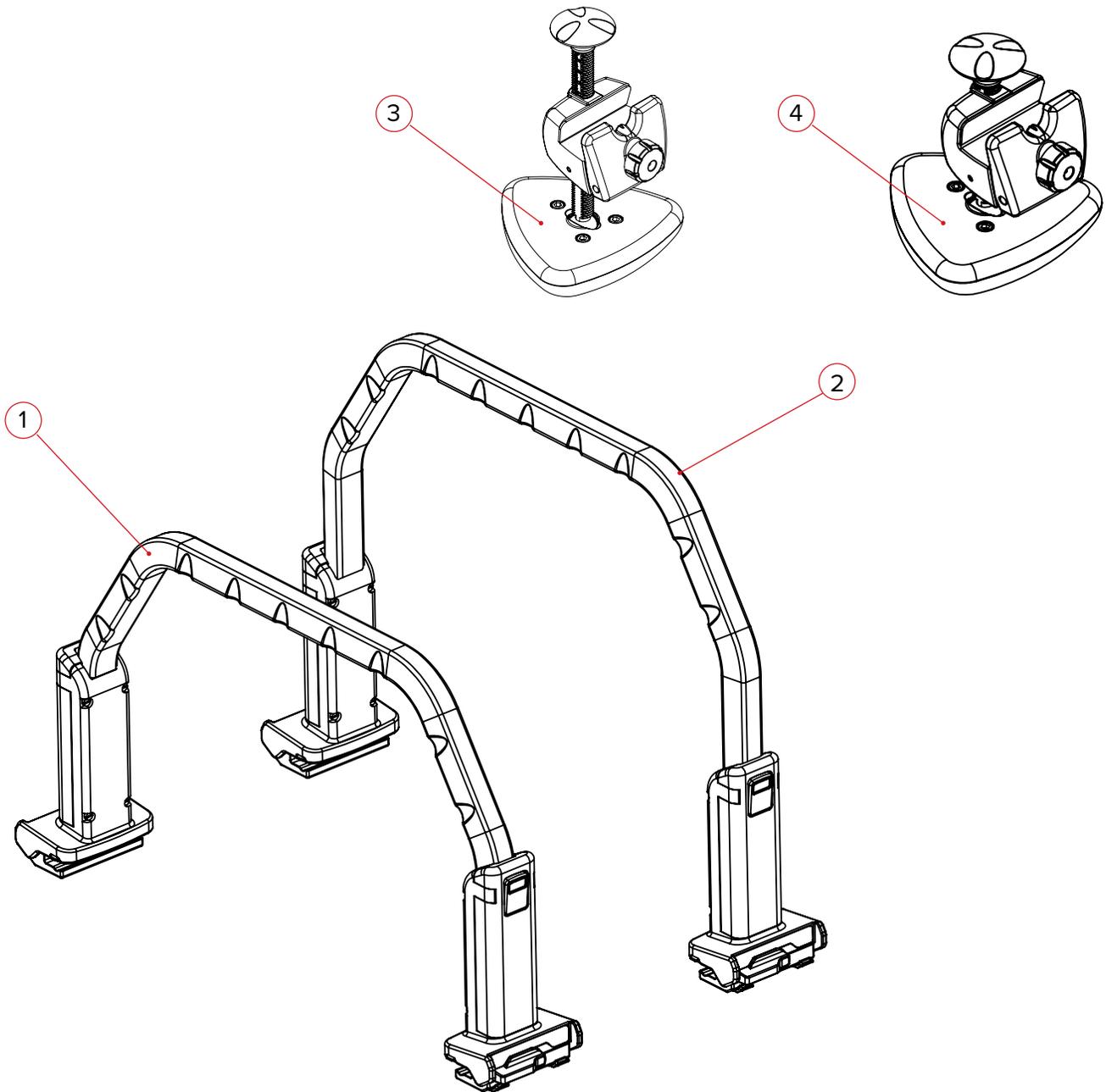

1. RT-4800-B1 — Γέφυρα συμπίεσης InfinityLock SBRT, μικρή
2. RT4800-B2 — Γέφυρα συμπίεσης InfinityLock SBRT, μεγάλη
3. RT-4558KV4 — Τριγωνική διάταξη συμπίεσης (τυπική)
4. RT-4558KV4-01 — Τριγωνική διάταξη συμπίεσης (χαμηλού προφίλ)
5. 2001944 — Ασφαλιζόμενο κλιπ μαξιλαριού VacQfix SBRT (μεγάλου μήκους) (δεν απεικονίζεται)
6. 2001945 — Ασφαλιζόμενο κλιπ μαξιλαριού VacQfix SBRT (μικρού μήκους) (δεν απεικονίζεται)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ INFINITYLOCK SBRT – RT-4800-B1, RT-4800-B2

Όνομα ασθενούς:

Κωδ. αναγνώρισης ασθενούς:

Ρύθμιση από:

Ιατρός:

Ημερομηνία:

Σχόλια:

Ρύθμιση της γέφυρας συμπίεσης InfinityLock SBRT (κάθε γέφυρα θα πρέπει να έχει δικό της αρχείο ρύθμισης)

Γέφυρα που χρησιμοποιείται: **Μικρή** **Μεγάλη**

Παρελκόμενο που χρησιμοποιείται: **Τριγωνική διάταξη συμπίεσης** **Μαξιλάρι συμπίεσης μηρού**

1. Θέση στη διάταξη: mm (θα πρέπει να είναι η ίδια θέση και στα αριστερά και στα δεξιά του ασθενούς)
2. Ύψος γέφυρας: (1–19)
3. Ευθυγράμμιση λείζερ: mm

Σημειώσεις:

Τριγωνική διάταξη συμπίεσης (συμπληρώστε το εάν χρησιμοποιήθηκε παρελκόμενο)



4. Θέση παρελκόμενου στη γέφυρα: mm
5. Ύψος τριγωνικής διάταξης συμπίεσης mm

Σημειώσεις:

Μαξιλάρι συμπίεσης μηρού VacQfix (συμπληρώστε το εάν χρησιμοποιήθηκε παρελκόμενο)

6. Θέση παρελκόμενου στη γέφυρα:
Μόνο μεγάλο κλιπ: (σήμανση A έως I)

Σημειώσεις:

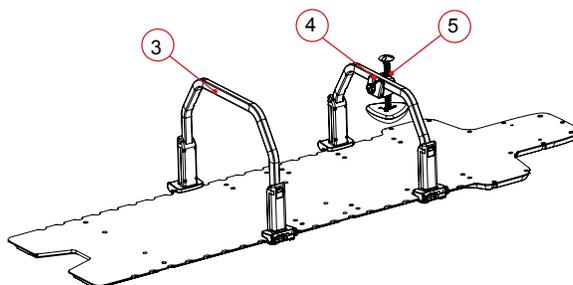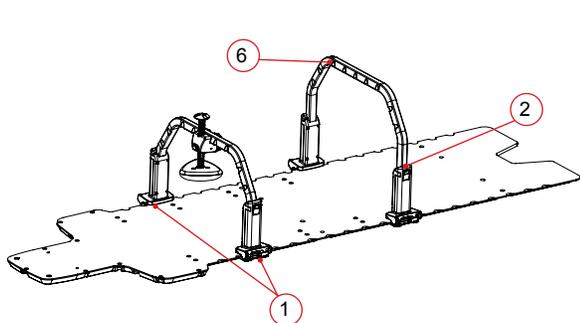



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.CQMedical.com

☎ +1 712.737.8688 / 800.842.8688

✉ info@CQMedical.com