




positioning
patients for life.®

GUIDE PRODUIT ET MANUEL DE L'UTILISATEUR

RT-4551BAR-04

Barre de positionnement compatible Elekta®

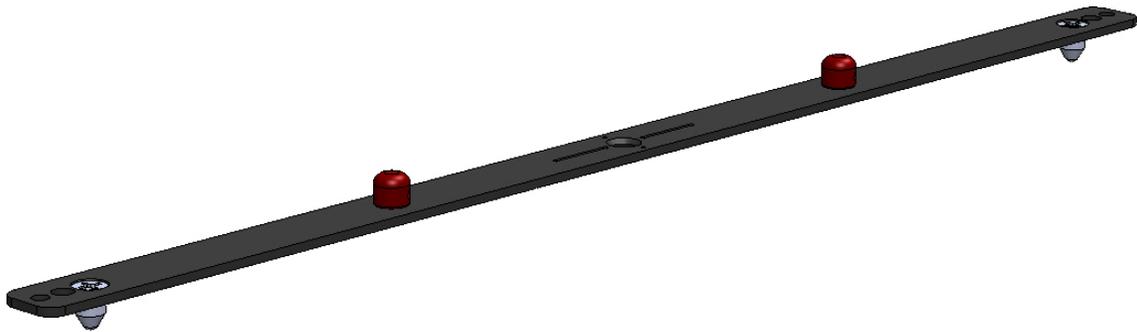



EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabriqué aux États-Unis par Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	---

Elekta® est une marque commerciale déposée d'Elekta AB.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES.....	4
AVERTISSEMENTS.....	4
GROUPES CIBLES DE PATIENTS.....	4
UTILISATEURS PRÉVUS.....	4
INCIDENTS GRAVES.....	4
ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS.....	4
INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	5
INSTALLATION.....	5
RETRAIT.....	5
ENTRETIEN.....	6
NETTOYAGE DU SYSTÈME.....	6

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENTS

! AVERTISSEMENT ! AUCUNE MODIFICATION DE CET ÉQUIPEMENT N'EST AUTORISÉE. SI UNE PARTIE QUELCONQUE DE CE DISPOSITIF SUBIT UNE CHARGE EXCESSIVE DANS UN CONTEXTE D'ÉVÉNEMENT CATASTROPHIQUE, SEMBLE ENDOMMAGÉE OU FONCTIONNE MAL, INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONTACTER QFIX AU +1 484-720-6054 OU À L'ADRESSE TECHSUPPORT@QFIX.COM.

GROUPES CIBLES DE PATIENTS

Patients en radiothérapie ou suivant des procédures d'imagerie diagnostique.

UTILISATEURS PRÉVUS

L'utilisateur prévu pour les produits est une personne qualifiée selon les exigences de la région de réglementation.

INCIDENTS GRAVES

Veillez signaler tout incident grave (par ex. incidents provoquant ou pouvant provoquer la mort ou des blessures graves) à Qfix ainsi qu'aux autorités compétentes de votre pays.

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT ET DESCRIPTIONS


Consulter Qfix.com pour obtenir une liste des symboles et de leur définition.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

INSTALLATION

INSTALLATION DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

La barre de positionnement est dotée de deux broches de positionnement qui peuvent accueillir la plupart des accessoires de positionnement standard. Pour la fixer, placer l'une des extrémités de la barre de positionnement dans les trous d'indexation appropriés.

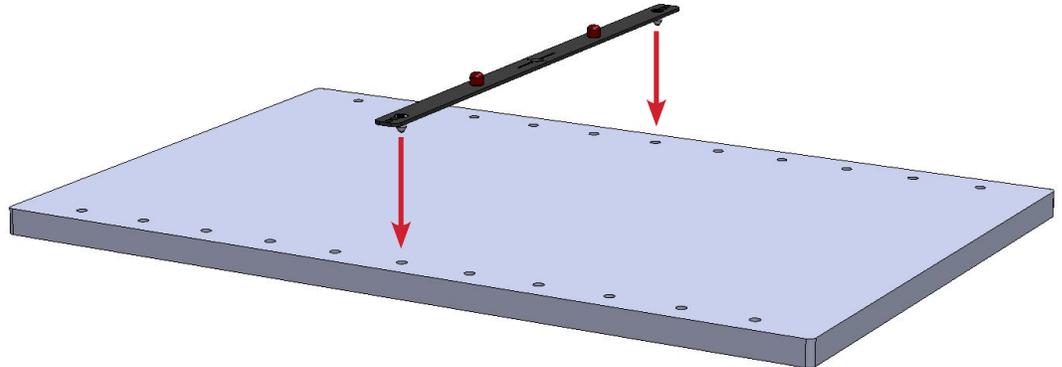

RETRAIT

RETRAIT DE LA BARRE DE POSITIONNEMENT

Tirer l'une des extrémités de la barre de positionnement vers le haut.

ENTRETIEN

NETTOYAGE DU SYSTÈME

Nettoyer la barre de positionnement Elekta avec un nettoyant ou un désinfectant doux et non abrasif. Pour nettoyer la surface, l'essuyer avec un chiffon propre imbibé de solution.

Les nettoyants suivants ont été testés et approuvés pour le nettoyage de la surface de la barre de positionnement Elekta. Pour désinfecter la surface de la barre de positionnement Elekta, consulter les instructions spécifiques du fabricant du nettoyant.

- Eau
- Solution d'eau de Javel Clorox® à 10 %
- Alcool isopropylique
- Solution de dialdéhyde activée Cidex® à 2,4 %
- Savon et eau



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

 +1 610.268.0585 / 800.526.5247

 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

 sales@Qfix.com