


GHIDUL PRODUSULUI ȘI MANUALUL DE UTILIZARE

RT-4551BAR-04

Bara de localizare compatibilă Elekta®



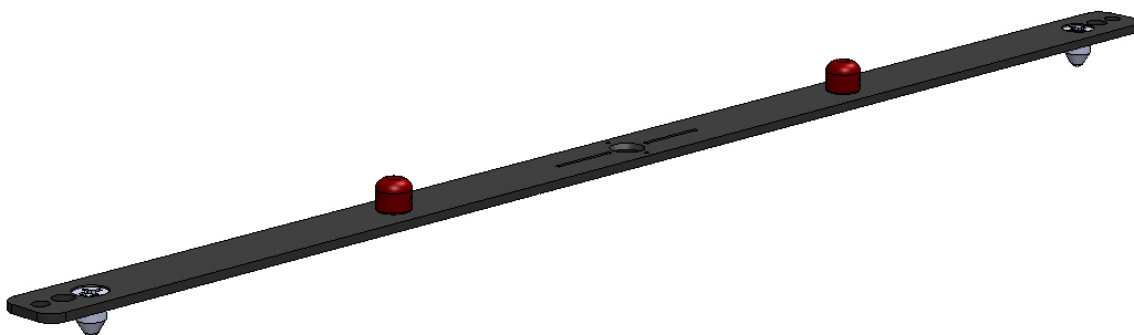

EC	REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Fabricat în SUA de Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
----	-----	---	--

Elekta® este o marcă comercială înregistrată a Elekta AB.

CUPRINS

MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE	4
DECLARAȚII DE AVERTIZARE.....	4
GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI.....	4
UTILIZATORI ȚINTĂ	4
INCIDENTE GRAVE.....	4
ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI.....	4
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	5
CONFIGURARE.....	5
DEMONTARE.....	5
ÎNTREȚINERE.....	6
CURĂȚAREA SISTEMULUI	6

MĂSURI GENERALE DE PRECAUȚIE

DECLARAȚII DE AVERTIZARE

! AVERTISMENT ! NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT. DACĂ ORICARE DINTRE COMPONENTELE ACESTUI DISPOZITIV ESTE SUPUSĂ LA O SARCINĂ EXTREM DE MARE, ESTE DETERIORATĂ SAU FUNCȚIONEAZĂ NECORESPUNZĂTOR, ÎNTRERUPEȚI IMEDIAT UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ȘI CONTACTAȚI QFIX LA +1 484-720-6054 SAU LA TECHSUPPORT@QFIX.COM.

GRUPURI ȚINTĂ DE PACIENȚI

Pacienții supuși radioterapiei sau procedurilor de diagnosticare prin imagistică.

UTILIZATORI ȚINTĂ

Utilizatorul țintă pentru aceste produse este o persoană calificată în conformitate cu cerințele regiunii de reglementare.

INCIDENTE GRAVE

Vă rugăm să raportați toate incidentele grave (de exemplu, incidente care au ca rezultat sau au potențialul de a cauza decesul sau vătămarea gravă) atât către Qfix, cât și către autoritatea competentă din țara dumneavoastră.

ETICHETE DE AVERTIZARE ȘI DESCRIERI


Pentru o listă a simbolurilor și definițiile aferente acestora, consultați Qfix.com.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CONFIGURARE

MONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Bara de localizare are două știfturi de localizare care corespund majorității accesoriilor standard de poziționare. Pentru montare, poziționați unul dintre capetele barei de localizare în canelurile de indexare compatibile și fixați-o.

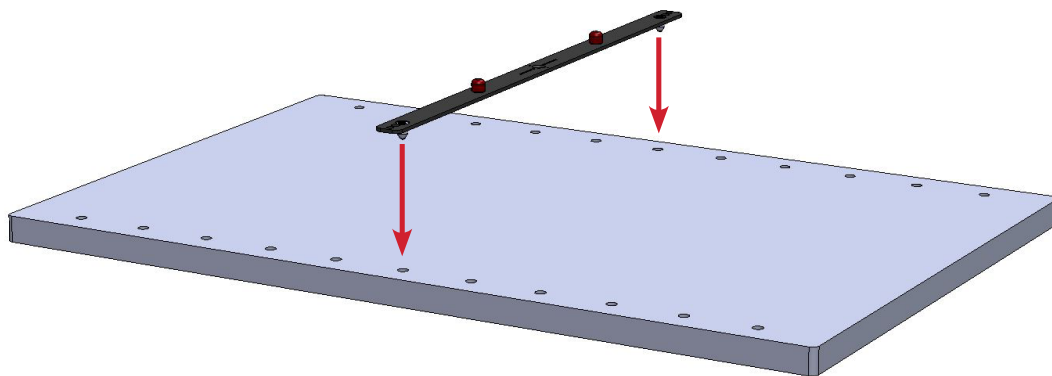

DEMONTARE

DEMONTAREA BAREI DE LOCALIZARE

Trageți de unul dintre capetele barei de localizare.

ÎNTREȚINERE

CURĂȚAREA SISTEMULUI

Bara de localizare Elekta poate fi curățată cu o soluție slabă, neabrazivă, de curățare sau dezinfectare. Pentru curățare, aplicați soluția pe o lavetă curată și ștergeți suprafața.

Următoarele materiale de curățare au fost testate și s-a constatat că sunt adecvate pentru curățarea suprafeței barei de localizare Elekta. Pentru a dezinfecta suprafața barei de localizare Elekta, consultați instrucțiunile specifice ale producătorului agentului de curățare.

- Apă
- O soluție Clorox® de înălbire, cu concentrație de 10%
- Alcool izopropilic
- Soluție Cidex® de dialdehidă activată, cu concentrație de 2,4%
- Apă și săpun



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

+1 610.268.0585 / 800.526.5247

+1 610.268.0588 / 800.831.8174

sales@Qfix.com