

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4543C och RT-4546C

ArmShuttle[™] och ArmShuttle[™] Elite





EC REP	Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	 Tillverkad i USA av Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	---	---

Armshuttle, Quest och Access är varumärken som tillhör Qfix.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	4
VARNINGSMEDDELANDEN	4
ALLVARLIGA OLYCKOR	4
VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR	4
AVSEDD ANVÄNDNING	5
BRUKSANVISNING	6
UNDERHÅLL	7
RENGÖRING AV SYSTEMET	7
DESINFEKTION AV SYSTEMET	7
DELAR	8
INSTÄLLNINGSBLAD	9
RT-4543C & RT-4546C ARMSHUTTLE™ & ARMSHUTTLE™ ELITE	9

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA ENHET BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

! VARNING ! LÅT INTE PATIENTEN ÄNDRA POSITION MED HJÄLP AV ARMSHUTTLE-HANDTAGEN.

! VARNING ! ANVÄND INTE ARMSHUTTLE FÖR ATT ÄNDRA PATIENTYTANS VINKEL.

ALLVARLIGA OLYCKOR

Vänligen rapportera allvarliga olyckor (t.ex. olyckor som orsakar eller har potential att orsaka dödsfall eller allvarlig personskada) både till Qfix och till behörig myndighet i ditt land.

VARNINGSDEKALER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna anordning är avsedd för fixering, positionering och ompositionering av patienter som genomgår strålbehandling.

! OBS ! Enligt amerikansk federal lag får denna enhet endast säljas av eller på ordination av läkare.

PATIENTMÅLGRUPPER

Patienter som får strålbehandling eller diagnostisk avbildning.

AVSEDDA ANVÄNDARE

Avsedd användare för produkterna är en person kvalificerad i enlighet med regionens myndighetskrav.


BRUKSANVISNING



1



2

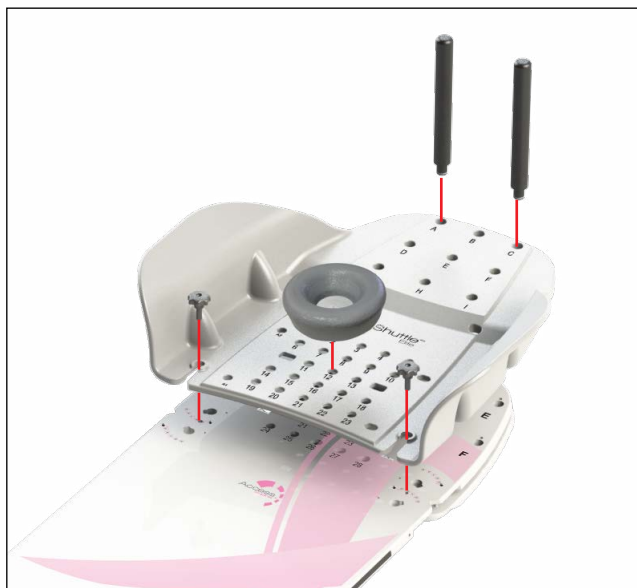

1



2

UNDERHÅLL

RENGÖRING AV SYSTEMET

Enheten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinfektionslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan. Inspektera enheten visuellt och upprepa föregående rengöringssteg, om den inte är ren, tills den är visuellt ren. Använd en ren duk fuktad med vatten för att torka av enheten för att ta bort alla rester av rengöringsmedlet. Torka genom att torka av enheten med en ren, torr duk. Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpligt för rengöring av enheten.


- Vatten
- Tvål och vatten

DESINFEKTION AV SYSTEMET

För att desinfektera anordningens yta hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.


- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning

RT-4546C

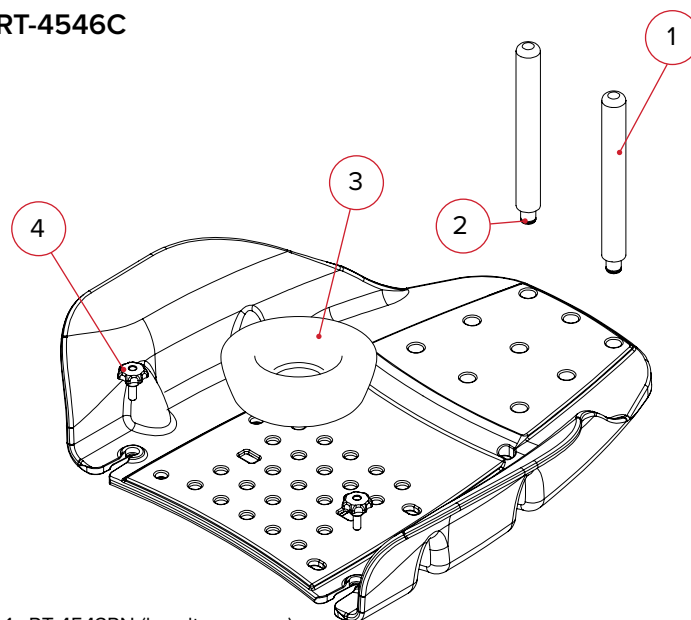

1. RT-4543PN (handtagsgrepp)
2. 3001419 (O-ring)
3. RT-4546H (skumstöd huvud)
4. 2004451 (gängad ratt)

RT-4543C

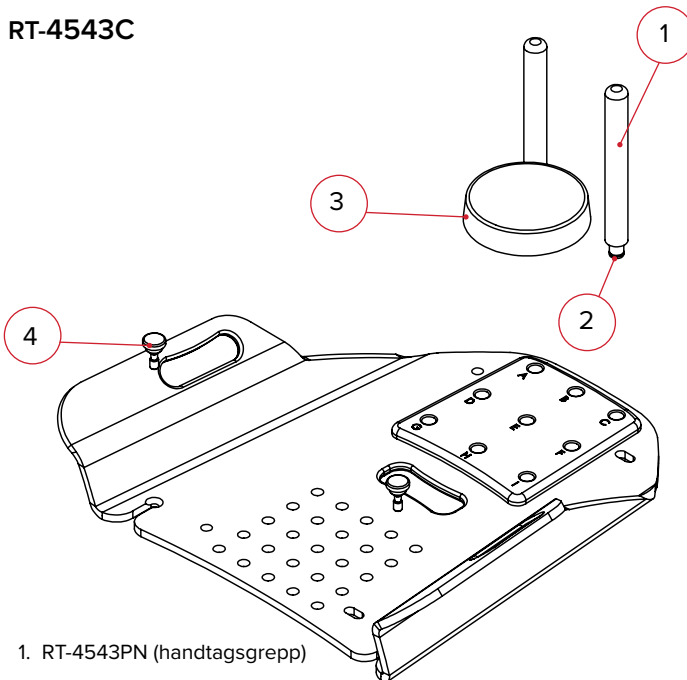

1. RT-4543PN (handtagsgrepp)
2. 3001419 (O-ring)
3. 2000109 (skumstöd huvud)
4. 2001643 (ratt)

INSTÄLLNINGSBLAD

RT-4543C & RT-4546C ARMSHUTTLE™ & ARMSHUTTLE™ ELITE

Patientens namn:



Patient-ID:

Inställning utförd av:

Läkare:

Datum:

Kommentarer:

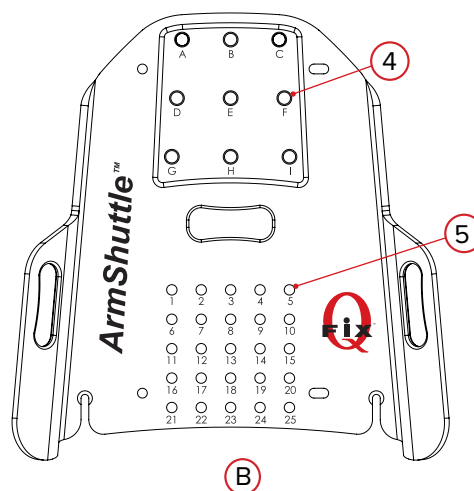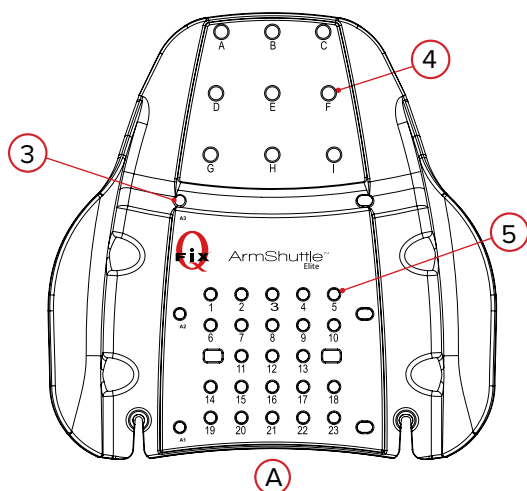

1. Använd ArmShuttle (markera en): ArmShuttle Elite med Access™ rygggläge ArmShuttle med QUEST™ bröstbräda
Annan enhet:

2. Positioneringsstaven(-arnas) position(er) på enheten (om tillämpligt):

3. Positioneringsstaven(-arnas) position(er) (markera de som används) (endast för ArmShuttle Elite):

A1 A2 A3 ANVÄNDS EJ

4. Handtagets(-ens) position(er) (markera de som används):

A B C D E F G H I ANVÄNDS EJ

5. Huvudstödet position (nummer 1–25):

Använd typ av huvudstöd:

Anmärkingar:



440 Church Road
Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

🖨 +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com

2004227_SV_E
2021-07