

PRODUKTGUIDE OCH ANVÄNDARHANDBOK

RT-4488-01, RT-4488-02, RT-4488-03,
RT-4488-04, RT-4488-05 och RT-4488-06
SofTouch™-bordsdyna



ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNINGSMEDDELANDEN

! VARNING ! INGA MODIFIERINGAR AV DENNA UTRUSTNING ÄR TILLÅTEN. AVBRYT OMEDELBART ANVÄNDNINGEN OCH KONTAKTA QFIX PÅ +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM OM NÅGON DEL AV DENNA PRODUKT BELASTAS KATASTROFALT, FÖREFALLER SKADAD ELLER FUNGERAR FELAKTIGT.

VARNINGSETIKETTER OCH BESKRIVNINGAR

Se Qfix.com för en lista med symboler med definitioner.



SE BRUKSANVISNINGEN

SofTouch™-bordsdynan kan täcka viktiga varningsetiketter, försiktighetsåtgärder och märkningar. Se bruksanvisningen för den produkt som bordsdynan används på för varningar, försiktighetsåtgärder och ytterligare märkning.

UNDERHÅLL


Produkten kan rengöras med en mild, icke-slipande rengörings- eller desinficeringslösning. Rengör genom att applicera lösningen på en ren duk och torka av ytan.

Följande rengöringsmaterial har testats och visats vara lämpliga för rengöring av ytan. För att desinficera ytan hänvisas till specifika instruktioner från rengöringsmedlets tillverkare.

- Vatten
- 10 % Clorox® blekmedelslösning
- Isopropylalkohol
- Cidex® 2,4 % aktiverad dialdehydlösning
- Tvål och vatten

Spreja INTE direkt på bordsdynan.

Placera INTE vassa föremål på bordsdynan.

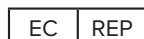

Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta



Tillverkad i USA av

Qfix

440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA

+1 610-268-0585 www.Qfix.com

SofTouch är ett varumärke som tillhör Qfix.

Cidex® är ett registrerat varumärke som tillhör Johnson & Johnson.

Clorox® är ett registrerat varumärke som tillhör The Clorox Company.

2004784_SV_A
2022- 09