




positioning
patients for life.®

产品说明 和用户手册

RT-4551BAR-04

Elekta® 兼容定位杆

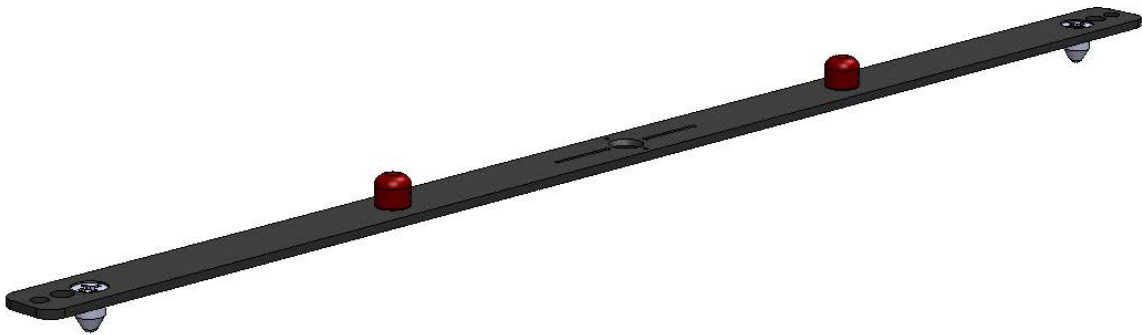



EC REP		Advena Limited Tower Business Centre, 2nd Flr Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta	美国制造，制造商为 科辅适 Qfix 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, 美国 +1 610-268-0585 www.Qfix.com
------------------------------	--	--	---

产品名称：人体定位袋
医疗器械备案号：20150038

Elekta® 是 Elekta AB 的注册商标。

目录

一般注意事项.....	4
警告声明.....	4
患者目标人群	4
预期用户.....	4
严重事件.....	4
警告标签及说明.....	4
操作说明.....	5
设置	5
拆卸.....	5
维护.....	6
系统清洁.....	6

一般注意事项

警告声明

！警告！不得修改本设备。如本装置的任何部分因承受过大载荷而出现损坏迹象或功能异常，请立即停止使用并通过 +1 484-720-6054 或 TECHSUPPORT@QFIX.COM 联系 QFIX。

患者目标人群

接受放射治疗或诊断成像程序的患者。

预期用户

产品的预期用户是根据监管区域的要求取得资质的人员。

严重事件

请向 Qfix 和您所在国家/地区的主管当局报告任何严重事件（例如导致或可能造成死亡或严重伤害的事件）。

警告标签及说明


有关符号及其定义的列表，请参阅 Qfix.com。

操作说明

设置

安装定位杆

定位杆上有两个与大多数标准定位配件相匹配的定位销钉。要连接定位杆, 请将定位杆两端置于相应的分度孔中。

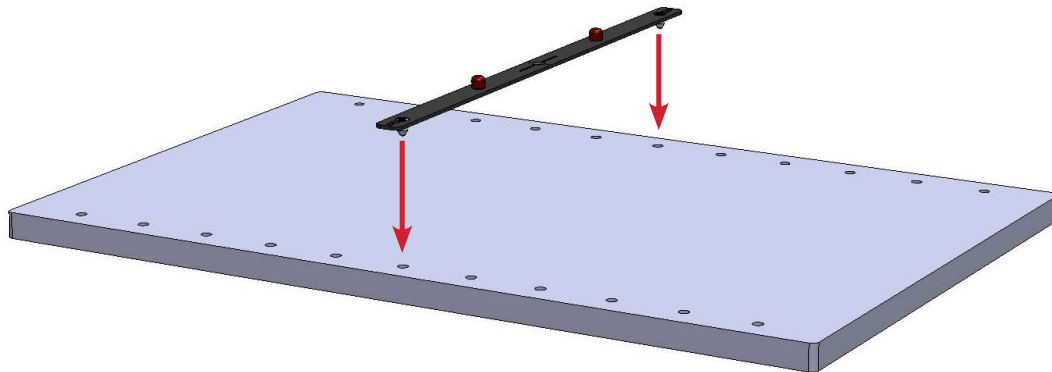

拆卸

拆卸定位杆

拉起定位杆的两端。

维护

系统清洁

Elekta 定位杆可使用温和的非研磨性清洁或消毒液进行清洁。清洁时, 用溶液润湿干净的布块后擦拭表面。

下列清洁材料已经过测试, 证明适用于清洁 Elekta 定位杆表面。要对 Elekta 定位杆表面进行消毒, 请参阅清洁剂厂商的特定说明。

- 水
- 10% Clorox® 漂白液
- 异丙醇
- Cidex® 2.4% 活化二醛溶液
- 肥皂和水



440 Church Road
Avondale, PA 19311 美国
www.Qfix.com

☎ +1 610.268.0585 / 800.526.5247

☎ +1 610.268.0588 / 800.831.8174

✉ sales@Qfix.com